


Withings

Made for
iPod iPhone iPad



EN / Quick Start Guide for usage with an iOS™ device
FR / Guide d'installation pour utilisation avec terminal iOS™
DE / Installationsanleitung zur Nutzung mit iOS™ Gerät
IT / Istruzioni d'installazione per utilizzo con terminale iOS™
CZ / Průvodce rychlou instalací pro použití s přístrojem s iOS™

1

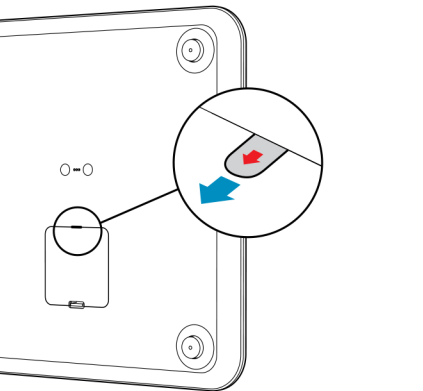

EN / Pull the tab underneath the scale
FR / Retirez la languette à l'arrière de la balance
DE / Ziehen Sie die Lasche unter der Waage ab
IT / Rimuovere la linguetta sotto la bilancia
CZ / Vytáhněte jazyček na spodní straně váhy

2




EN / Tap the "Settings" app on your iPhone home screen
FR / Touchez l'application "Réglages" dans l'écran d'accueil de votre iPhone
DE / Auf der Startseite Ihres iPhones die App "Einstellungen" berühren
IT / Tocca l'applicazione "Regolazioni" nella schermata iniziale del tuo iPhone
CZ / Klepněte na ploše svého iPhone na aplikaci „Settings“ („Nastavení“)

3




EN / Tap "General", then "Bluetooth"
FR / Touchez "Général", puis "Bluetooth"
DE / "Allgemeine Einstellungen", dann "Bluetooth" auswählen
IT / Tocca "Generale", quindi Bluetooth"
CZ / Klepněte na „General“ („Obecné“), pak na „Bluetooth“

4

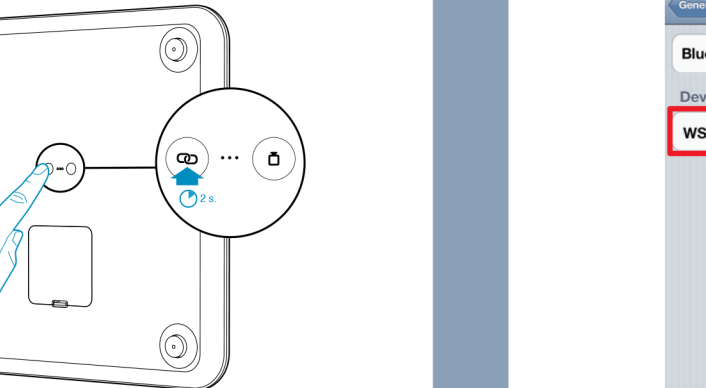

EN / Press the pairing button for 2 seconds
FR / Appuyez 2 secondes sur le bouton d'appariage
DE / Drücken Sie die Pairing Taste für 2 Sekunden
IT / Premere il pulsante di accoppiamento per 2 secondi
CZ / Stiskněte na 2 sekundy párovací tlačítko

5

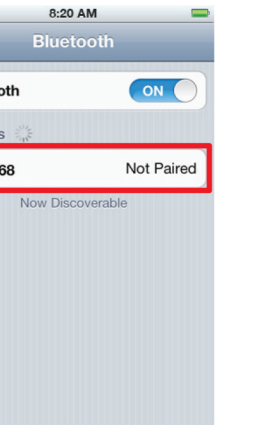

EN / Make sure Bluetooth is turned on, then select the WS accessory
FR / Vérifiez que le Bluetooth est activé, puis tapez sur l'accessoire WS
DE / Sicherstellen, dass Bluetooth aktiviert ist, dann das WS Zubehör auswählen
IT / Verifica che il Bluetooth sia attivato, quindi digita sul dispositivo WS
CZ / Zkontrolujte, že je Bluetooth zapnutý, pak vyberte příslušenství WS

6



EN / Download the Withings app from the App Store
FR / Téléchargez l'application Withings depuis l'App Store
DE / Laden Sie die Withings App aus dem App Store herunter
IT / Scarica l'applicazione Withings da App Store
CZ / Stáhněte si z App Store aplikaci Withings

7



EN / Launch the Withings app and follow instructions
FR / Lancez l'application Withings et suivez les instructions
DE / Starten Sie die Withings App und befolgen Sie die Anleitungen
IT / Lancia l'applicazione Withings et e segui le istruzioni
CZ / Spustěte aplikaci Withings a postupujte podle pokynů



<http://support.withings.com>