




Panasonic®

Návod k obsluze
Systém odstraňování chloupků IPL (pro domácnost)
Model č. ES-WH80

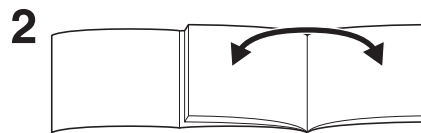

Česky 5

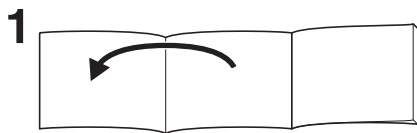

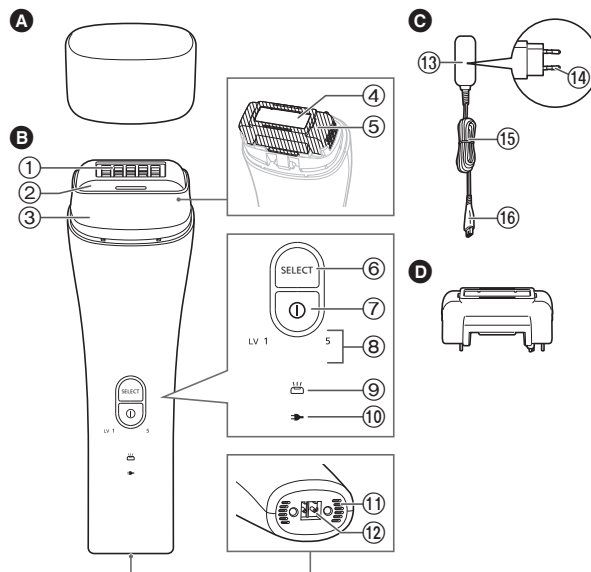

Návod k obsluze
Systém odstraňování chloupků IPL (pro domácnost)
Model č. ES-WH80

Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	7	Pro zdravou pokožku	16
Účel použití.....	11	Indikátor.....	16
Označení částí.....	12	Čištění.....	18
Oblasti ošetření.....	12	Výměna žárovky.....	19
Pokyny týkající se času a frekvence použití.....	13	Otázky a odpovědi	20
Nabíjení.....	13	Řešení problémů	21
Před použitím	14	Výdrž baterie	22
První použití zařízení	14	Vyjmutí vestavěných dobíjecích baterií	22
Postup použití.....	15	Specifikace	23

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek od společnosti Panasonic.

Před jeho použitím si prosím přečtete tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

Varování

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo pokud jim budou poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a pokud budou rozumět souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu zařízení bez dohledu.
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud dojde k poškození kabelu, je potřeba napájecí adaptér zlikvidovat.
- Zabraňte styku zařízení s vlhkostí.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Bezpečnostní pokyny

Vždy dodržujte na tyto bezpečnostní pokyny s cílem zamezit riziku zranění, úmrtí, úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození majetku.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly slouží ke klasifikaci a popsání úrovně rizika, zranění a poškození majetku způsobeného neuposlechnutím značení a nevhodným použitím.

 NEBEZPEČÍ	Označuje možné riziko, které bude mít za následek vážné zranění nebo smrt.
 VAROVÁNÍ	Označuje možné riziko, které může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje riziko, které může mít za následek lehké zranění.

Následující symboly slouží ke klasifikaci a popsání typu pokynů, které je nezbytné dodržovat.

	Tento symbol slouží k upozornění uživatele na určitý postup činnosti, který nesmí být vykonán.
	Tento symbol slouží k upozornění uživatele na určitý postup činnosti, který musí být dodržen pro bezpečný provoz zařízení.

VAROVÁNÍ

► Pro zamezení potíží s pokožkou nebo zdravím

 Lidé používající implantovaná lékařská zařízení (například kardiostimulátor) musí zabránit kontaktu tohoto zařízení v oblastech, kde je takové zařízení implantováno.

- Mohlo by to mít za následek nehodu nebo nemoc.

 **Nepoužívejte během těhotenství nebo menstruace.**
- Mohlo by to mít za následek potíže s kůží způsobené hormonální nerovnováhou.

 **Nepoužívejte na tetování.**
- Mohlo by to mít za následek keloidy způsobené popálením, začervenání nebo vyrážky na pokožce.

 **Nesměřujte světlo ze zařízení přímo do očí.**
- Mohlo by to mít za následek poranění očí.

 **Používejte pouze v oblasti podpaží, rukou, nohou nebo třísel.**
- Neuposlechnutí těchto pokynů může způsobit popálení, začervenání nebo vyrážky na pokožce.

► Napájení

 **Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér do elektrické zásuvky mokřima rukama.**
- Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo nehodu.

VAROVÁNÍ

Kabel nepoškozujte ani neupravujte. Také jej neohýbejte silou, natahejte za něj a nekrutěte jím. Na kabel také nepokládejte nic těžkého a nesvírejte jej. Nepotápějte napájecí adaptér do vody a neumývejte jej vodou. Neumíst'ujte napájecí adaptér nad umývadlo nebo vanu s vodou nebo do jeho blízkosti. Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je napájecí adaptér poškozen nebo pokud zástrčka nedrží v zásuvce pevně.

- Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Pomocí dodaného napájecího adaptéru nenabíjejte žádné jiné zařízení.

- Mohlo by to mít za následek popálení nebo požár způsobený zkratem.

Nepoužívejte způsobem přesahujícím povolené zatížení zásuvky nebo elektrické sítě.

- Přesazení povoleného zatížení připojením příliš vysokého počtu zástrček do jedné zásuvky může mít za následek požár způsobený přehřátím.

Spotřebič vždy používejte se zdrojem napájení, který se shoduje se jmenovitým napětím uvedeným na spotřebiči.

Adaptér nebo zástrčku spotřebiče zcela zasuňte.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Během čištění vždy odpojte adaptér ze zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.

Pravidelně čistěte napájecí zástrčku a zástrčku zařízení, abyste předešli hromadění prachu.

- V opačném případě může dojít k požáru způsobenému selháním izolace z důvodu vlhkosti.

Adaptér odpojte a utřete suchým hadrem.

► Tento produkt

Tento produkt je vybaven vestavěnou nabíjecí baterií.

Nevhazujte ji do plamene ani ji nezahřívejte. Baterii nenabíjejte, nepoužívejte ani nenechávejte v prostředí s vysokou teplotou.

- Mohlo by to mít za následek přehřátí, vznícení nebo explozi.

Neskladujte v dosahu dětí.

Nedovoľte dětem používat toto zařízení.

- Mohlo by to mít za následek nehodu nebo zranění.

Zařízení neupravujte ani neopravujte.

- Mohlo by to mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Pokud potřebujete zařízení opravit (např. výměna baterie a podobně), kontaktujte autorizované servisní centrum.

Zařízení rozeberte pouze tehdy, pokud chcete produkt zlikvidovat.

- Mohlo by to mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Neskladujte zařízení v koupelně ani na místě s vysokou vlhkostí. Zařízení také neukládejte na místa, kde se může vylít voda (např. na toaletní stolek).

- Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepotápějte spotřebič do vody a neumývejte jej vodou.

- Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Nestandardní fungování nebo porucha** V případě nestandardního fungování nebo poruchy okamžitě přestaňte zařízení používat a odpojte adaptér.

- Používání za takových podmínek by mohlo mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

<Případy nestandardního fungování nebo poruchy>

- ! • Hlavní zařízení, adaptér nebo kabel je poškozený nebo nestandardně horký.
- Hlavní zařízení, adaptér nebo kabel je cítit spáleninou.
- Během používání nebo nabíjení se z hlavního zařízení, adaptéru nebo kabelu ozývá nestandardní zvuk.
- Okamžitě požádejte o kontrolu nebo opravu v autorizovaném servisním středisku.

- **Dbejte také na následující pokyny**

Žárovku odstraňujte pouze tehdy, pokud ji budete chtít vyměnit.

Během výměny žárovky se nedotýkejte příslušné oblasti.

- Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- **Pro ochranu kůže**

Následující lidé by spotřebič neměli používat:

- Osoby s dermatitidou
- Osoby trpící atopickou dermatitidou nebo vyrážkami a jinými kožními nemocemi
- Osoby s alergickou diatézou nebo citlivou pokožkou, která se snadno podráždí kosmetikou, oblečením, kovy apod
- Osoby s pokožkou citlivou na sluneční záření

Nepoužívejte na následující části těla:

- Opálená pokožka
- Oblasti s tmavě hnědou anebo černou pokožkou, jako jsou například pigmentové skvrny (**Další informace najdete v tabulce „Vhodné odstíny chloupků a pleti“.**)
- Strupy, zranění, vyrážky, odřeniny, bradavice, pupínky, rakovina kůže, dermatofytóza, folikulitida, podrážděná kůže, štípnutí hmyzem apod
- Tvář a genitálie
- Angiom
- Oblasti po estetickém chirurgickém zákroku

Nepoužívejte v následujících případech:

- Když se necítíte dobře nebo když máte pocit, že vaše tělo nebo vaše pokožka nejsou v pořádku

Nepoužívejte na stejné místo opakovaně.

Odstraňování chloupků systémem IPL také

neprovádějte častěji než 3krát týdně.

- V opačném případě může dojít k zranění pokožky, zánětu, krvácení, zvýšené bolesti nebo jiným potížím či nebezpečným příznakům..



Nepoužívejte prasklou žárovku.

- Mohlo by to mít za následek poranění kůže.

UPOZORNĚNÍ



Neodstraňujte rámeček – kromě případů čistění nebo výměny žárovky.

- Mohlo by to mít za následek poranění kůže nebo prstů.



Zařízení smí používat pouze osoby starší 18 let.

- V opačném případě může dojít k zranění anebo zánětu kůže, krvácení nebo zvýšené bolesti.



Před použitím zkontrolujte, zda rámeček a zábleskové okénko nejsou zakřivené, prasklé nebo poškozené.

- V opačném případě může dojít k poranění kůže.



Osoby užívající léky by se měli poradit s dermatologem.

- V závislosti na typu užívaných léků může být pokožka citlivá na stimulaci zářením a může u ní dojít k potížím.



V případě výskytu zánětu (například začervenání kůže) přestaňte spotřebič používat, pokud zánět přetrvá i po 2 dnech, poraďte se s dermatologem.

- V opačném případě může dojít k zhoršení příznaků.

► Napájení



Nedovolte, aby se do kontaktu se zástrčkou napájení nebo se zástrčkou zařízení dostaly špendlíky anebo odpadky.

- Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.



Při skladování zařízení kolem něj neomotávejte kabel.

- Mohlo by to mít za následek zlomení vodiče uvnitř kabelu, což by mohlo vést k požáru způsobenému zkratem.



Odpojte zástrčku adaptéru anebo zařízení tak, že uchopíte adaptér zástrčky nebo zařízení, a ne kabel.

- Odpojení uchopením kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.



Když zařízení nedobíjíte, odpojte adaptér ze zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému únikem elektřiny kvůli poškození izolace.

► Tento produkt



Nepoužívejte na pokožku zvlhčenou vodou, pleťovou vodou anebo jinými přípravky.

- Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu.



Nepouštějte na zem a nevystavujte nárazu.

- Mohlo by to mít za následek zranění.



Neodstraňujte rámeček okamžitě po použití systému IPL pro odstranění chloupků.

- Mohlo by to mít za následek popáleniny, jelikož zábleskové okénko bude horké.

► Dodržujte následující pokyny



Nepoužívejte na šaty ani na vlasy.

- Mohlo by to mít za následek spáleniny nebo odbarvení.

► Likvidace dobíjecí baterie

NEBEZPEČÍ

Dobíjecí baterie je vhodná pouze pro použití s tímto spotřebičem. Nepožívejte baterii v kombinaci s jinými produkty.

Nenabíjejte baterii po jejím vyjmutí z produktu.

• Nevhazujte do ohně a nevystavujte teplu.

• Baterii nedemontujte, neupravujte, nevystavujte úderům ani neprorázejte hřebíkem.

 • Nedovolte, aby se kladné a záporné póly baterie dostaly do kontaktu prostřednictvím jiných kovových předmětů.

• Baterii nepřpravujte ani neskladujte společně s kovovými šperky, jako jsou náhrdelníky a vlásenky.

• Baterii nenabíjejte, nepoužívejte a neponechávejte na místech, kde bude vystavena vysokým teplotám, jako například na přímém slunci nebo v blízkosti jiných zdrojů tepla.

• Nikdy trubici nezbavujte pláště.

- Mohlo by to mít za následek přehřátí, vznícení anebo explozi.

VAROVÁNÍ

Po vyjmutí nabíjecí baterii nenechávejte v dosahu dětí či kojenců.

 - V případě náhodného požití baterie hrozí nebezpečí zranění.

Pokud k tomu dojde, neprodleně se obraťte na lékaře.

Jestliže z baterie vytéká kapalina, podnikněte následující opatření. Nedotýkejte se baterie holými rukama.

- Kapalina z baterie může zapříčinit ztrátu zraku, pokud přijde do kontaktu s očima.



Nemněte si oči. Neprodleně oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.

- Kapalina z baterie může způsobit zánět nebo zranění, pokud přijde do kontaktu s pokožkou nebo oděvem. Pečlivě opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.

Účel použití

• Systém odstraňování chloupků IPL použijte pouze po odstranění nadbytečných chloupků.

Vyzařování světla bez odstraňování chloupků může způsobit, že se chloupek zachytí v krytu nebo zábleskovém okénku a že tuto nečistotu nebude možné odstranit. Před použitím nejdříve setřete z oblasti, kterou chcete ošetřit, veškerou vodu nebo pot a veškeré chloupky přilepené ke kůži.

• K čištění zařízení nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol a podobně. Mohlo by to způsobit poruchu, praskliny anebo změnu barvy zařízení. Utírejte suchým hadříkem.

• Neponechávejte zařízení v oblastech s vysokou teplotou. Mohlo by to mít za následek poruchu zařízení.

Označení částí

A Nástavec

B Hlavní zařízení

- ① Kryt (se vzorem mřížky)
- ② Spínač záblesku
- ③ Rámeček
- ④ Zábleskové okénko
- ⑤ Žárovka
- ⑥ Spínač pro výběr úrovně (záblesky)
- ⑦ Hlavní vypínač
- ⑧ Indikátor úrovně (modrý) (záblesky)
(Viz strany 15 a 16.)
- ⑨ Indikátor potvrzení (červený) (Viz stranu 16.)
- ⑩ Indikátor nabíjení / upozornění (červený) (Viz stranu 16.)
- ⑪ Přívod vzduchu
- ⑫ Zásuvka

C Napájecí adaptér (RE7-87)

(Tvar napájecího adaptéru se liší v závislosti na oblasti.)


- ⑬ Adaptér
- ⑭ Napájecí zástrčka
- ⑮ Kabel
- ⑯ Zástrčka zařízení

Příslušenství


D Žárovka (x1)

Oblasti ošetření

Zařízení můžete používat na oblastech označených symbolem

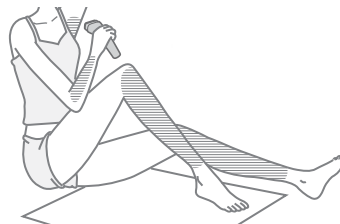

Podpaží

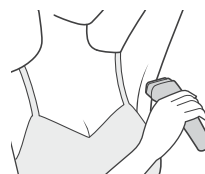


Ruce



Nohy



Třísla*

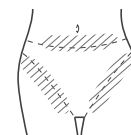

* V případě třísel si nejdříve oblečte plavky nebo spodní prádlo a zkontrolujte si tak oblast ošetření.

Pokyny týkající se času a frekvence použití

Frekvence použití

Nohy/ruce

První 2 měsíce používejte jednou každé 2 týdny.

Po třetím měsíci používejte jednou každé 4 týdny.

Podpaží/třísla

První 2 měsíce používejte jednou každý týden.

Po třetím měsíci používejte jednou každé 2 týdny.

Pokyny týkající se času použití

Nohy	Kolem 10 minut na jedno použití pro obě nohy (kolem 190 záblesků)
Ruky	Kolem 5 minut na jedno použití pro obě ruce (kolem 90 záblesků)
Podpaží	Kolem 2 minut na jedno použití pro obě podpaží (kolem 30 záblesků)
Třísla	Kolem 2 minut na jedno použití (kolem 30 záblesků)


- Nepoužívejte na stejné místo opakovaně. Odstraňování chloupků systémem IPL také neprovádějte častěji než 3krát týdně. I když není odstranění nežádancích chloupků okamžitě znát, používejte zařízení maximálně dvakrát týdně. (Účinky ošetření se mohou lišit v závislosti na oblasti těla nebo jednotlivých tělesných typech.)
- Pokud jste zařízení jistou dobu nepoužívali, pokračujte v používání při stejné frekvenci jako během prvních 2 měsíců.
- Ošetření se může lišit v závislosti na oblasti nebo na množství chloupků a způsobu použití zařízení.
- Před ošetřením nejdříve z oblasti odstraňte jakékoliv nežádoucí chloupky.
Použijte prosím samostatnou žiletku nebo elektrický holicí strojek.

- Zařízení se liší od systémů pro trvalé odstranění chloupků. Pokud s ošetřováním přestanete, nežádoucí chloupky postupně znovu dorostou.

Nabíjení

- 1 Zasuňte zástrčku zařízení pevně do zásuvky naspodu hlavní části zařízení.**
- 2 Adaptér pevně zasuňte do elektrické zásuvky.**
- 3 Zkontrolujte, zda svítí indikátor dobíjení/upozornění.**

Během nabíjení	Po dokončení nabíjení
 Svítí červený indikátor.	 Červený indikátor zhasne.

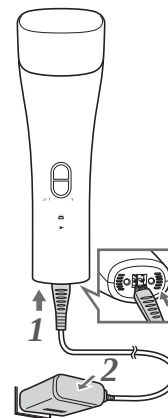

- Čas nabíjení se může lišit, když zařízení používáte poprvé nebo pokud jste je nepoužívali půl roku nebo déle. Indikátor na hlavní části zařízení nemusí několik minut po zahájení nabíjení svítit, rozsvítí se však, pokud budete v nabíjení pokračovat.
- Plné dobití trvá kolem 3 hodin.
- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na aktuálním stavu nabití baterie.

<Kontrola dokončení nabíjení>

Stiskněte s připojeným adaptérem napájení hlavní vypínač. Indikátor nabíjení/upozornění se rozsvítí a po přibližně 5 sekundách zhasne.

4 Odpojte adaptér z elektrické zásuvky, potom odpojte zástrčku zařízení od hlavní části zařízení.

(pro bezpečí a snížení spotřeby energie)

- S hlavní částí zařízení se nevyskytnou potíže, i když se bude dobíjet déle než 3 hodiny.
- Zařízení vydá na jedno plné dobití kolem 600 záblesků.
- Počet záblesků se může lišit v závislosti na okolní teplotě a způsobu použití zařízení.

Poznámky

- Doporučovaná okolní teplota pro nabíjení je 15 – 35 °C. Mimo doporučené teploty nemusí být dobíjení zařízení možné.
- Dobíjení baterie po každém použití zařízení neovlivní výdrž dobíjecí baterie.
- Jestli během nabíjení slyšíte zvuk praskání v radiu nebo v jiných zařízeních, nabíjejte zařízení pomocí jiné elektrické zásuvky.

Před použitím

- Zařízení nepoužívejte na tmavých místech.
- Mohlo by to mít za následek dočasné podráždění očí.
- Před ošetřením nejdříve z oblasti odstraňte veškeré nežádoucí chloupky.
- Před použitím nejdříve setřete z oblasti, kterou chcete ošetřit, veškerou vodu nebo pot a veškeré chloupky přilepené ke kůži. V opačném případě nebude možné špinu na krytu nebo na zábleskovém okénku odstranit.

První použití zařízení

Zkontrolujte, zda výstupní úroveň odpovídá vaší kůži.

Nastavte výstupní úroveň na 1 (LV1) a použijte jeden záblesk na ošetřovanou oblast.

Po 2 dnech



jestli se na kůži nevyskytne nic nestandardního

Nastavte výstupní úroveň na 1 (LV1) a začněte s ošetřováním požadované oblasti.e

- Pokyny ohledně frekvence a času ošetření naleznete na stránce 13.

Po 2 týdnech*




jestli se na kůži nevyskytne nic nestandardního

* V případě podpaží a třísel:
po 1 týdnu

Jestli chcete zvýšit výstupní úroveň pro ošetření, použijte jeden záblesk na ošetřovanou oblast a přibližně 2 dny před ošetřením zkontrolujte stav kůže v dané oblasti. Výstupní úroveň zvyšujte vždy postupně o jeden stupeň.

- Jestli se po 2 nebo více dnech objevuje pocit bolesti anebo začervenání, přestaňte zařízení používat a poraďte se s dermatologem.

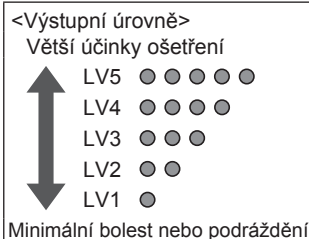

Postup použití

- Když je napájecí adaptér připojen k hlavní části zařízení, napájení se nezapne, ani pokud stisknete vypínač.
- Doporučená okolní teplota během provozu je 5 – 35 °C. Mimo doporučené teploty nemusí být použití zařízení možné.

1 Sejměte nástavec.

2 Stiskněte a podržte vypínač (kolem 3 sekund) ①.


- Pokud zařízení po dobu zhruba jedné minuty nepoužijete, automaticky se vypne.

3 Stiskněte tlačítko a vyberte výstupní úroveň.

- Při zapnutí je zvolena úroveň 1.
- Úrovně se přepínají systémem 1→2→3→4→5→1... při každém stisknutí tlačítka pro výběr úrovně.
- Indikátor úrovně zabliká a pak se zapne. (Když je zařízení připravené na záblesky, ozve se zvuk pípnutí.)

4 Když svítí indikátor úrovně, přiložte nástavec blízko pokožce a držte ho stisknutý, dokud se neobjeví záblesk.

- Když zařízení pípne, přitlačte jej svisle k pokožce.
- Před použitím zkontrolujte, zda se poblíž nenacházejí žádní lidé.
- Body pro odstraňování chloupků pomocí IPL (Viz strana 15.)
- Když zařízení pípá, znamená to, že je připraveno na záblesky.

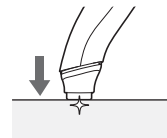


CZ

5 Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ①.

Body pro odstraňování chloupků pomocí IPL


Bod 1

Body pro odstraňování chloupků pomocí IPL Přiložte nástavec svisle k pokožce a držte jej přitlačený ke kůži. Zábleskové okénko nespustí záblesky, dokud nebude přiloženo svisle k pokožce.

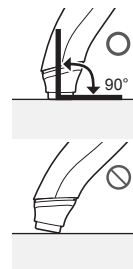


Bod 2

Velikost nástavce (s vzorem mřížky) je vodítkem pro rozsah odstraňování chloupků systémem IPL při každém záblesku.

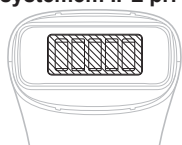


: Dosah odstraňování chloupků systémem IPL při každém záblesku

- Když zařízení pípá, znamená to, že je připravené na záblesky.

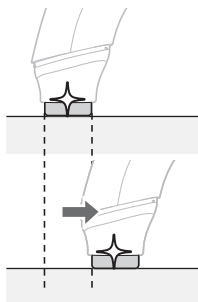

Souvislé záblesky

Po jednom záblesku posuňte zařízení k další oblasti, stále je přitom držte přitlačené k pokožce. Je možné dosáhnout až 10 souvislých záblesků v intervalu přibližně 3 sekundy.

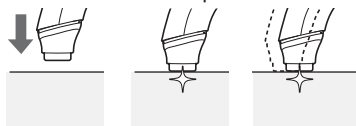

- Okénko záblesku přestane po 10 záblescích vysílat další záblesky. Sejměte zařízení z pokožky a postup zopakujte.
- Nepoužívejte zařízení dlouhodobě na stejnou oblast.

Pro zdravou pokožku

Po odstranění chloupků pomocí systému IPL se doporučuje následující péče:

1. Ochlaďte pokožku pomocí ručníku namočeného do ledové vody.
2. Zvlhčete pleť pomocí tělového mléka apod.



Indikátor

► Běžné fungování

  	Indikátor úrovně (modrý) bliká (jednou za sekundu). Obrázek vlevo znázorňuje situaci, kdy je zvolena úroveň 5. Probíhá příprava na záblesk.
  	Indikátor úrovně (modrý) svítí. Obrázek vlevo znázorňuje situaci, kdy je zvolena úroveň 5. Je možné spuštění záblesků.

► Do potřeby výměny žárovky zůstává méně než 1 000 záblesků

LV 1	5	Indikátor potvrzení žárovky (červený) svítí. Do potřeby výměny žárovky zůstává méně než 1 000 záblesků. Připravte si novou žárovku. (Viz strana 19.)
		

► Období výměny žárovky


LV 1	5	Indikátor potvrzení žárovky (červený) bliká (jednou za sekundu) a zařízení se po 5 sekundách vypne. Odstraňování chloupků pomocí IPL není možné, jelikož čas na výměnu žárovky již vypršel. Vyměňte žárovku. (Viz strana 19.)
		

► Upozornění na dobíjení

LV 1	5	Indikátor dobíjení/upozornění (červený) bliká (jednou za sekundu). Baterie je téměř vybitá. Doporučuje se její nabití.
		

► Porucha displeje

LV 1	5	[Nestandardní nabíjení] Indikátor dobíjení/upozornění (červený) rychle bliká (dvakrát za sekundu). Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 15 – 35 °C. Zkontrolujte pokojovou teplotu místa, kde se zařízení bude nabíjet, zopakujte nabíjení.
		
LV 1	5	[Žárovka] Indikátor potvrzení žárovky (červený) rychle bliká (dvakrát za sekundu). Zařízení vydává sérii pípnutí a po 5 sekundách se vypne. Žárovka není připojena správně. Nejdříve zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto, a pak správně připojte žárovku. (Viz strana 19.)
		

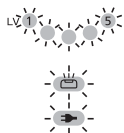

[Jiné poruchy]

Indikátor úrovně (modrý), indikátor potvrzení žárovky (červený), indikátor dobíjení/upozornění (červený) blikají současně (jednou za sekundu), zařízení dvakrát pípne a po 5 sekundách se vypne.

Doporučená okolní teplota pro používání zařízení je 5 – 35 °C. Zkontrolujte pokojovou teplotu místa, kde se zařízení bude používat, a zapněte jej znovu.

(Zařízení se nemusí pokojové teplotě přizpůsobit okamžitě po změně místa.) Jestli se tyto příznaky objevují opakovaně, kontaktujte autorizované servisní centrum.


Čištění

Vždy vypněte napájení hlavní části zařízení a před čištěním počkejte 2 až 3 minuty.

► Zábleskové okénko/rámeček

Odstraňte veškeré zachycené chloupky na nastavci nebo zábleskovém okénku. V opačném případě bude odstranění nečistot obtížné a oslabí se tím světlo.

1. Sejměte rámeček.

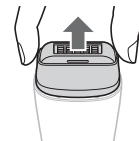

2. Pomocí suchého hadříku opatrně odstraňte jakékoliv nečistoty.

Zábleskové okénko




Rámeček/nástavec



3. Nasadte rámeček.

Zasuňte ho, dokud necvakne.

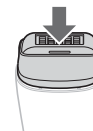

Výměna žárovky

Žárovka by měla při doporučené frekvenci a času využití vydržet kolem 2 let.

Žárovku je potřeba vyměnit po přibližně 20 000 záblescích.

Upozornění na dobu výměny

Když zařízení zapnete a zůstává méně než přibližně 1 000 záblesků, indikátor potvrzení žárovky (červený) bude svítit. Pokud nastal čas na výměnu žárovky, indikátor potvrzení žárovky (červený) bude při zapnutí blikat. (Viz strana 17.)

Výměna a resetování žárovky

1. Vypněte zařízení stisknutím ①.
2. Odstraňte žárovku.

① Sejměte rámeček.

② Sejměte ho taháním rovně ve směru šipky.

- Nepoužívejte žárovku, která již byla použita. (Mohlo by dojít k jejímu poškození.)




3. Nasadte novou žárovku.

① Vložte si zasunutím rovně ve směru šipky.

- Zasuňte ji pevně a v plném rozsahu.

② Nasadte rámeček.

Zasuňte ho, dokud necvakne.

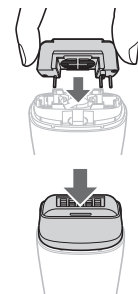

4. Stiskněte tlačítko  a držte je stisknuté (asi 3 sekundy), dokud zařízení nepípne, přičemž se resetuje.

- Výměna je dokončená, když indikátor potvrzení lampy (červený) dvakrát blikne a zapípá zvukový signál.
- Zařízení se nezapne, dokud nedokončíte resetování.

Poznámky

- Zařízení resetujte vždy bezprostředně po výměně žárovky. (Zařízení není možné resetovat, pokud od výměny žárovky uplynulo příliš moc času)
- **Pokud není možné dokončit resetování, zařízení nabijte, znovu připojte žárovku a následně zařízení resetujte.**

► Náhradní díly

Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho prodejce nebo v servisním centru.

Náhradní žárovka	WES2W13
------------------	---------

Otázky a odpovědi

Otázka	Odpověď
Jaký typ světla je vyzařován ze zábleskového okénka?	▶ Okamžitý záblesk z xenonové lampy.
Proč mohou zařízení používat pouze osoby starší 18 let?	▶ Z důvodu nestabilní hladiny hormonů během dospívání, která může způsobit citlivost pokožky.
Může se zařízení používat na jiné oblasti než podpaží, ruce, nohy a třísla?	▶ Zařízení používejte pouze v oblasti podpaží, rukou, nohou nebo třísel. (Zařízení nepoužívejte na tvář ani jiné části těla.)
Mohu zařízení používat každý den?	▶ Používání zařízení na stejnou oblast každý den se nedoporučuje. Řiďte se prosím pokyny pro frekvenci a čas ošetření. (Viz strana 13.)
Proč je cítit po záblesku spálenina?	▶ Je to způsobeno tím, že záblesk aplikuje teplo na nežadáné chloupky a nejde o příznak selhání. Pokud některé chloupky příliš narostly, odstraňte je. Také odstraňte všechny zbytky oholených chloupků na kůži.
Světlo během používání výrazně září. Je to problém?	▶ Spínač záblesku umístěte blízko k pokožce (viz stranu 15.) Pokud se vám světlo pořád zdá silné, použijte sluneční brýle nebo jinou ochranu zraku.

Otázka	Odpověď
Světlo je během používání na kůži hodně horké. Je to problém?	▶ Citlivost je u každé osoby odlišná, záblesky se mohou zdát horké, pokud jste neodstranili chloupky. Před použitím záblesku si prosím oholte všechny krátké chloupky.
Pokožka během používání hodně zčervená. Je to problém?	▶ Ošetřená pokožka může v závislosti na tělesném typu a stavu osoby používající zařízení po ošetření dočasně zčervenat nebo být bolestivá. Používání zařízení okamžitě ukončete a pokožku udržujte v chladu a navlhčenou. Jestli příznaky do 2 dnů ustoupí, použijte zařízení na úrovni, při které se příznaky nevyskytují. Jestli příznaky přetrvávají i po 2 dnech, poraďte se s dermatologem. (Viz strana 14.)
Bolest a začervenání po použití neustupují. Je to problém?	▶ Jestli nelze nečistoty odstranit ani po čištění, bude světlo slabší a bude potřeba vyměnit nástavec.
Nečistoty na nástavci se nedají odstranit.	▶ Kontaktujte prodejnu, kde jste zařízení zakoupili, nebo servisní centrum autorizované společností Panasonic pro vykonání oprav. (Díl na opravu: ESWH81P3107)

Otázka	Odpověď
Bliká indikátor potvrzení žárovky, když stisknete spínač výběru úrovně?	Indikátor potvrzení žárovky zabliká, když připojíte nebo odpojíte žárovku. Nejde však o poruchu. Pokud jste vyměnili žárovku, zařízení resetujte. (Viz stranu 19.)

Řešení problémů	
Problém	Řešení
Zábleskové okénko nevysílá záblesky.	Zkontrolujte, zda indikátor úrovně (modrý) nezačal místo blikání svítit. Stiskněte spínač záblesku svisle vůči pokožce, dokud se nepustí záblesky. (Viz stranu 15.) Jestli bylo emitovaných 10 nepřetržitých záblesků, dočasně odtáhněte zařízení od pokožky. Jestli indikátor potvrzení (červený) bliká, je čas vyměnit žárovku. Nahradte ji novou žárovkou. (Viz stranu 19.)
Čas přípravy záblesku je dlouhý.	Čas přípravy záblesku se může prodloužit, aby bylo zařízení chráněno před přehřátím.
Všechny indikátory zablikaly, zařízení dvakrát zapívalo a pak se vypnulo.	Doporučovaná okolní teplota pro používání zařízení je 5 – 35 °C. Použití zařízení nemusí být možné mimo povolený rozsah teplot. (Viz stranu 18.)

CZ

Problém	Řešení
Zařízení vydalo sérii pípnutí, indikátor potvrzení žárovky (červený) rychle zablikal (dvakrát za sekundu) a zařízení se vypnulo.	▶ Žárovka není připojena správně. Připojte žárovku správně. (Viz stranu 19.)
Zařízení se vypnulo potom, co indikátor žárovky (červený) zablikal.	▶ Je čas na výměnu žárovky. Nahradte ji novou žárovkou. (Viz stranu 19.)
Indikátor potvrzení žárovky (červený) svítí.	▶ Brzo nastane čas na výměnu žárovky. Připravte si novou žárovku. (Viz stranu 19.)
Zařízení se během používání vypnulo.	▶ Jestli zapnuté zařízení po dobu kolem jedné minuty nepoužijete, z bezpečnostních důvodů se automaticky vypne. Znovu zařízení zapněte.
Zařízení můžete po dobití použít pouze několikrát.	▶ Baterie dosáhla konce své životnosti. (Viz stranu 22.)
Baterie nefunguje ani po stisknutí spínače.	▶ Při zapínání stiskněte a držte hlavní vypínač (kolem 3 sekund). ▶ Zařízení nabijte. (Viz stranu 13.)

Jestli není problém možné vyřešit, kontaktujte prodejnu, kde jste zařízení zakoupili, nebo servisní centrum autorizované společností Panasonic pro vykonání oprav.

22

Výdrž baterie

Kolem 3 let.

Jestli je doba provozu výrazně kratší i po plném dobití, baterie dosáhla konce své životnosti. (Životnost baterie se může měnit v závislosti na způsobu používání a skladování.) Výměnu baterie v tomto zařízení nesmí provádět spotřebitel. Nechte si baterii vyměnit v autorizovaném servisním centru.


Vyjmутí vestavěných dobíjecích baterií

Než zařízení zlikvidujete, vyjměte vestavěné dobíjecí baterie.

Zajistěte, aby byly baterie zlikvidovány na oficiálním místě určeném pro tento účel, je-li takové místo k dispozici. Tento obrázek slouží pouze pro případ likvidace zařízení, nesmí se používat k jeho opravě. Jestli zařízení rozeberete, může dojít k jeho selhání.

- Odpojte zařízení od napájecího adaptéru.
- Pokud se zařízení dá používat a vyzařuje záblesky, používejte ho, dokud se nevybije baterie.
- Po vypnutí zařízení počkejte před jeho rozebráním alespoň 10 minut.

- Proveďte kroky ① až ⑥, vyjměte baterii a zlikvidujte ji.
- Dávejte si pozor, abyste zařízení nezkratovali spojením kladných a záporných pólů baterie a póly izolujte pomocí pásky.

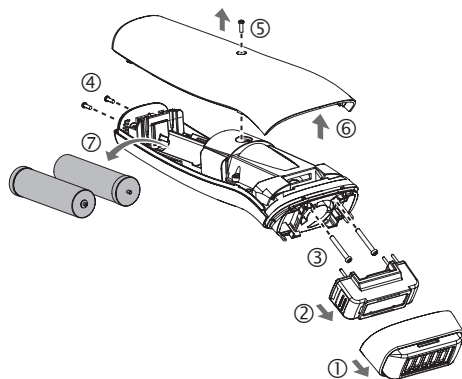

Ochrana životního prostředí a recyklace materiálů

Toto zařízení obsahuje lithium-iontový akumulátor. Zajistěte, aby byly baterie zlikvidovány na oficiálním místě určeném pro tento účel, je-li takové místo k dispozici.

Specifikace

Napájení	Podívejte se na štítek na napájecím adaptéru. (automatická konverze napětí)
Čas nabíjení	Zhruba hodiny
Hluk šířený vzduchem	XXXX: XX (dB (A) re 1 pW)

Tento produkt je určený pouze k domácímu použití.

Likvidace vysloužilých zařízení a baterií

Pouze pro Evropskou unii a země s recyklačními systémy



Tyto symboly na produktech, baleních a/nebo v průvodních dokumentech znamenají, že použité elektrické a elektronické produkty a baterie se nesmějí smíchat s běžným domácím odpadem. Pro zabezpečení vhodného zpracování, obnovy a recyklace starých produktů a baterií je prosím odneste na náležitá sběrná místa v souladu s platnými zákony.

Jejich vhodnou likvidací pomůžete ušetřit cenné zdroje a zamezit potenciálně negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Pokud máte zájem získat další informace o sběru a recyklaci, kontaktujte prosím vaši obec.

Za nevhodné zpracování tohoto odpadu mohou být v souladu s národními zákony uloženy pokuty.



Poznámka pro symbol baterie (spodní symbol):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V takovém případě musí splňovat požadavky stanovené směrnici po obažené chemikálie.

MEMO



Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2015

CZ

Vytištěno v Japonsku
0000000000 X0000-0

