


Naipo

Uživatelská příručka

3D rotující masážní přístroj Shiatsu s nabíjecí baterií

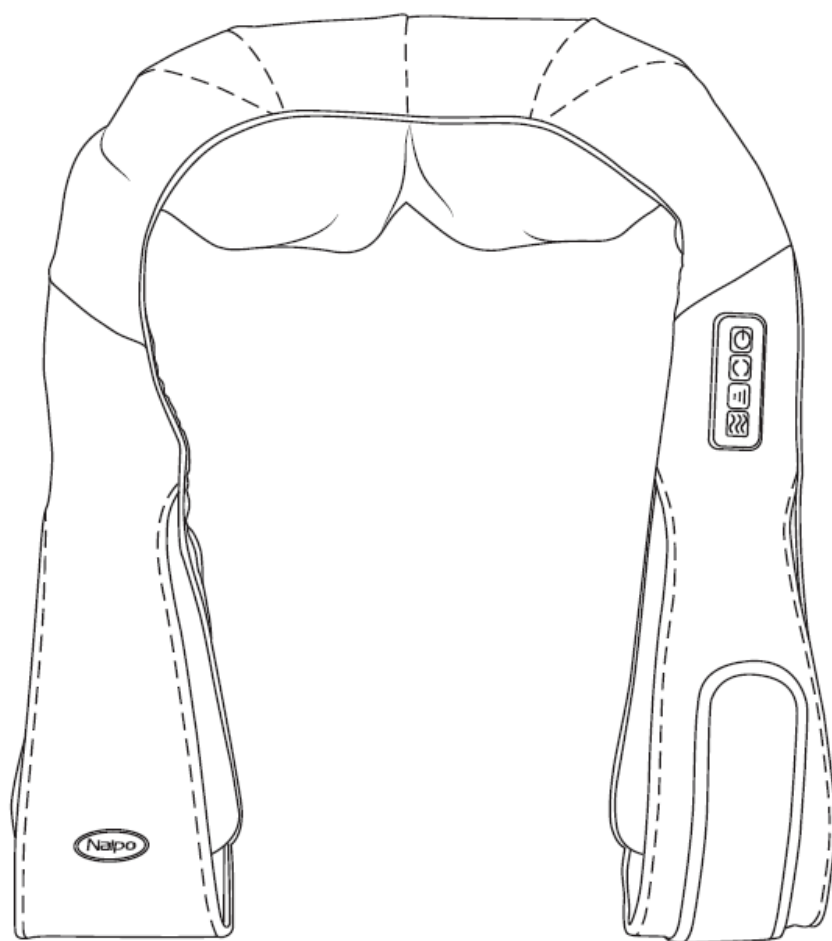

Model: MGS-321

Před prvním použitím přístroj plně nabijte, baterie nemusí mít po delším uskladnění dostatek energie.

Důležité:

Tento manuál si pečlivě uschovejte v případě, že byste ho později potřebovali použít znova. Před použitím přístroje si manuál důkladně pročtěte.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny, abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popáleninami a jiných zranění.

- Jakmile přístroj přestanete používat, odpojte jej ze zásuvky. To samé platí i před každým čištěním přístroje.
- V případě, že by vám přístroj spadl do vody, odpojte jej nejprve ze zásuvky a až posléze pro něj můžete sáhnout.
- Nepoužívejte přístroj, když se sprchujete nebo koupáte.
- Neskladujte přístroj na místech, kde hrozí pád do vany nebo umyvadla.
- Za žádných okolností nepoužívejte spolu s přístrojem špendlíky a kovové spony.
- Nepoužívejte přístroj tam, kde je mokro či vlhko.
- Přístroj zapojený do zásuvky nikdy nenechávejte bez dozoru. Pokud přístroj zrovna nepoužíváte nebo se jej chystáte rozložit na části, odpojte nejdříve přístroj ze zásuvky.
- Pokud je přístroj používán dětmi či v blízkosti dětí nebo osob se zdravotním postižením, je nutno tak činit za dozoru dospělého.
- Používejte tento přístroj pouze k účelům stanovených v tomto manuálu. Používejte pouze ty části, které jsou součástí balení.
- Za žádných okolností přístroj nepoužívejte v případě, že je poškozený kabel/zástrčka nebo přístroj nepracuje správně.
- Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Přístroj nepoužívejte ve spánku a neusněte, když ho používáte.
- Do otvorů přístroje nic nestrkejte.
- Nepoužívejte v prostorech, kde jsou právě používány aerosolní prostředky (např. spreje).
- Přístroj nepoužívejte pod dekou nebo polštářem, mohl by způsobit požár nebo zranění elektrickým proudem.

- Nepřenášejte přístroj za kabel.
- Chcete-li přístroj vypnout, přepněte všechny tlačítka do pozice „OFF“. Poté přístroj můžete vypojit ze zásuvky.
- Tento přístroj je zamýšlen pouze pro osobní, neprofesionální použití.
- Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte na kojence, osoby se zdravotním postižením a osoby spící či v bezvědomí.
- Nepoužívejte na citlivou pokožku nebo někoho, kdo má sníženou citlivost na teplo.
- Přístroj netahejte za kabel ani kabelem nekruťte. To samé platí pro napájecí zdroj a ovládací prvky přístroje.

Upozornění:

Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny.

- Tento produkt není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými pohybovými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem dospělého, který zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Přístroj lze používat pouze s přidanou nabíjecí baterií nebo napájecím zdrojem.
- Pokud pro vás platí níže zmíněné, poraďte se před použitím přístroje nejdříve se svým lékařem:
 - jste těhotná
 - máte kardiostimulátor, umělé klouby nebo elektronické implantáty
 - trpíte některou z následujících nemocí: poruchy oběhového systému, křečové žíly, otevřené rány, modřiny, poškozená pokožka, zánět žil
- Nepoužívejte přístroj jako náhradu za lékařskou péči.
- Pokud při používání přístroje ucítíte bolest, okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým lékařem.
- Přístroj za žádných okolností nepoužívejte přímo na oblasti oteklé či zasažené zánětem nebo kožní vyrážkou.
- Přístroj nepoužívejte před spaním; masáž má stimulující účinky a může spánek oddálit.
- Děti a osoby se zdravotním postižením nesmí přístroj používat bez dozoru dospělého.

Technické parametry:

Popis	Masážní přístroj Shiatsu na krk a ramena s nabíjecí baterií
Číslo modelu	MGS-321
Výkon	25,6W
Vstupní napětí	12,8V DC 2A
Li-on baterie	11,1V 2000mAh

Ovládací prvky



Tlačítko zapnutí/vypnutí (On/Off)



Směr rotace: Po/proti směru hodinových ručiček



Rychlost masáže: střední / vysoká / nízká



Tlačítko zahřívání: zapnuto/vypnuto (On/Off)

Průvodce provozem

1. Použití při nabíjení

- (1) Připojte napájecí zdroj k masážnímu přístroji a zapojte do zásuvky.
- (2) Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Výchozí nastavení je na střední rychlosti masáže se zapnutou zahřívací funkcí. Lithiová baterie se při používání přístroje nenabíjí.
- (3) Masáž si podle potřeb můžete uzpůsobit za pomoci tlačítek změny směru rotace, rychlosti masáže a zahřívání.
- (4) Pro vypnutí přístroje opět stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

2. Použití s nabíjecí baterií

- (1) Pro zapnutí přístroje dlouze (přibližně 2 sekundy) stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Výchozí nastavení je na střední rychlosti masáže se zapnutou zahřívací funkcí.
- (2) Masáž si podle potřeb můžete uzpůsobit za pomoci tlačítek změny směru rotace, rychlosti masáže a zahřívání.


(3) Pro vypnutí přístroje opět stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

*Plně nabitá lithiová baterie zvládne šest 15-minutových cyklů.


Před prvním použitím přístroj plně nabijte, baterie nemusí mít po delším uskladnění dostatek energie. Když modrá dioda svítí, znamená to, že se baterie nabíjí. Baterie je plně nabitá ve chvíli, kdy dioda zhasne.

Vhodné masírovací oblasti:


Tento masážní přístroj je vhodný na oblasti krku, ramen, zad, pasu, břicha a stehen.

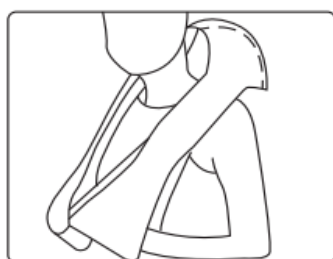


Krk a ramena

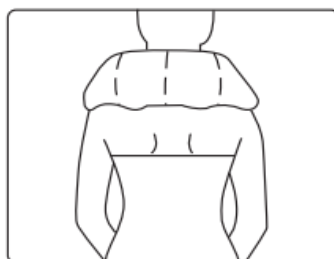


Krk

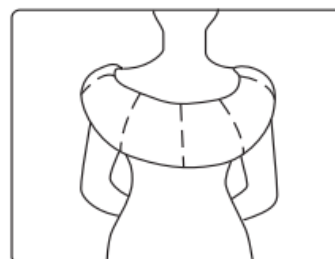


Záda

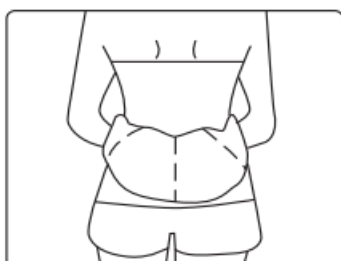

Pas

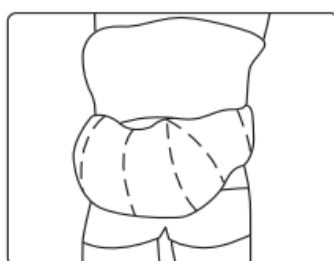

Břicho

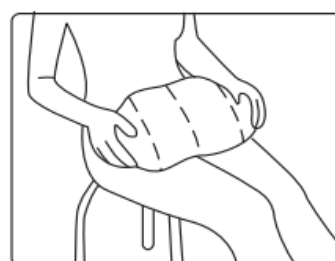

Stehna

Čištění a údržba:

Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Přístroj lze čistit pouze jemným a čistým ručníkem. Za žádných okolností nepoužívejte kartáče, čisticí prostředky, benzín, ředidla nebo alkohol. Nekruťte kabelem, mohl by se poškodit.