

beurer

MP 70



H Paraffinfürdő
Használati útmutató

Tartalom

1. Szállítási terjedelem	2	7. A készülék kezelése	6
2. Biztonsági tudnivalók	2	8. Tisztítás	7
3. A készülék ismertetése	4	9. Pót- és kopóalkatrészek	8
4. Rendeltetésszerű alkalmazás	5	10. Ártalmatlanítás	8
5. A készülék leírása	5	11. Műszaki adatok	8
6. Üzembevétel	5		

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta. Nevünk garancia az értékes és részletesen bevizsgált minőségi termékekre olyan területeken, mint a hő, súly, vérnyomás, testhőmérséklet, pulzus, kímélő terápia, masszázs, szépség, baba és a levegő. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe!

Az Ön Beurer-csapata

1. Szállítási terjedelem

- 1 MP 70 paraffinfürdő
- 1 fedél
- 1 védőrács
- 2 tasak egyenként 450g paraffin viasszal
- 30 műanyag kesztyű / műanyag zacskó / műanyag fólia / fólia



Figyelmeztetés

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell.

2. Biztonsági tudnivalók

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék típustábláján a következő szimbólumok használatosak:

 Figyelmeztetés	Sérülésveszély vagy egészségkárosodás veszélye.
 Figyelem	Biztonsági megjegyzés a készülék/tartozékok lehetséges károsodására vonatkozóan.
	Ez a CE-jelölés azt igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Közösség által, a gyártó céggel szemben támasztott követelményeknek.
	Ártalmatlanítás az Európai Uniónak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelve szerint
	Gyártó cég
	A készülék kettős szigetelésű, így megfelel a 2-es érintésvédelmi osztálynak.

Használat előtti fontos biztonsági tudnivalók

Figyelmeztetés

- A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak. Ez a készülék nem ipari használatra készült, és nem alkalmas gyógyászati területen történő alkalmazásra. Csak személyes, házi használatra alkalmazza a készüléket.
- Javításokat csak erre jogosult szervizek végezhetnek, mert a javításhoz célszámszám, ill. speciális alkatrészek szükségesek. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti.
- Ne használja a készüléket, ha szív- vagy cukorbetegségben szenved, ha bőrpírok, gyulladások, duzzadások, érzékeny helyek, nyílt sebek, égési sérülések, ekcémák vagy pikkelyfoltok vannak a testen, valamint alacsony fokú fájdalomérzet esetén.
- Ne használja a készüléket, ha érzéketlen a hőre.
- Terhesség vagy egészségügyi problémák esetén kérje az orvosa tanácsát, mielőtt használná a készüléket.
- Akut gyulladás vagy perifériás érbetegségek esetén a készülék használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.
- Sohase használja paraffin viasz nélkül a paraffinfürdőt!
- Használat előtt vegye le az ékszereket a kezeiről és a lábairól.
- Soha ne melegítse a paraffin viaszt annak műanyag csomagolásában! Soha ne melegítse a paraffin viaszt tűzhelyen, nyílt láng felett vagy mikrohullámú sütőben! Kizárólag a paraffinfürdőben melegítse a paraffin viaszt!
- A gyermekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek elektromos készülékekkel kapcsolatban fennállhatnak. Gondoskodjon arról, hogy felügyelet nélkül ne használhassák gyermekek a készüléket.
- Minden egyes használat előtt győződjön meg a készülék és a hálózati vezetéke sértetlenségéről. Sérülések esetén a készüléket nem szabad üzembe venni.
- A készülék hálózathoz történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken megadott feszültséggel.
- Ne használja a készüléket víz (pl. fürdőkád, mosdókagyló stb.) közelében.
- Ne használja a készüléket fürdés, tusolás vagy alvás közben.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Tartsa mindig biztonságos helyen a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket érzékeny felületekre!

- A készülék használatakor ügyeljen rá, hogy az stabil, vízszintes felületen álljon.
- Tartsa távol a készüléket és a hálózati vezetéket forró felületektől. Ne helyezze más készülékekre, a forró paraffin viasz sérüléseket okozhat.
- Ne használja a készüléket aeroszolos termékek és olyan berendezések közelében, amelyek oxigént használnak fel.
- Ne használja a szabadban a készüléket. A készüléket kizárólag beltérben használja.
- Használat előtt úgy vezesse a hálózati vezetéket, hogy ne lehessen belebotlani.
- Ne használja a készüléket ágyban, alvás közben, vagy ha fáradt.
- Ne használja a készüléket takarók, törülközők stb. alatt.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne töltsen túl a paraffinfürdő! Ügyeljen rá, hogy a megolvadt paraffin viasz ne lépje túl a MAX jelzést.
- A paraffinviasz teljesen megolvadt állapotában rendkívül forró lehet.
- Mielőtt kezét, lábát vagy könyökét belemártja a megolvadt paraffin viaszba, csuklója belső oldalával ellenőrizze, hogy a viasz hőmérséklete kellemes.

Használat közbeni fontos biztonsági tudnivalók



Figyelmeztetés

- Kapcsolja ki azonnal a készüléket, ha használat közben valamilyen zavar lépne fel, és húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból.
- Szemeit és hőre érzékeny egyéb testrészeit tartsa távol a forró paraffin viasztól.
- Ha a paraffin viaszt tartósan túl forrónak vagy túl hidegnek érzi a bőrén, ez testi problémára utalhat. Ebben az esetben kérje ki orvosa tanácsát.
- Ügyeljen rá, hogy használat közben a készülék legalább a MIN jelzésig legyen töltve paraffin viasszal.
- A paraffin viasz ne legyen 20 percnél hosszabb ideig a kezelt helyen.
- Használat közben ne rázza és ne mozgassa a készüléket. Leforrázzhatja vagy megégetheti magát.
- Ha a paraffinfürdőben túl forró paraffin viasz található, ne öntsön hozzá vizet.
- Fájdalom, irritáció, bőrgyulladás vagy rossz közérzet esetén szakítsa meg a használatot és konzultáljon az orvosával.
- Ha véletlenül vízbe esett a készülék, akkor azonnal húzza ki a hálózati dugaszt. Az újbóli használata előtt ellenőriztesse elektromos szakemberrel.

Használat utáni fontos biztonsági tudnivalók



Figyelem

- Használat után kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy kihúzza a hálózati dugaszt az aljzatból.
- Sohase húzza ki a dugaszt a vezetéknel fogva vagy nedves kézzel az aljzatból.
- A viasztömb paraffinfürdőből való eltávolításához ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. Ezek megsérthetik és megkarcolhatják a paraffinfürdőt.
- Ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, akkor száraz, hűvös, pormentes környezetben tárolja.
- Ha kérdései vannak a készülékeink használatával kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálatához.

3. A készülék ismertetése

Az MP 70 paraffinfürdő megolvasztja a paraffin viaszt.

A melegen folyékonyvá váló paraffin viaszba többször rövid ideig bele kell mártani, majd ismét ki kell venni a száraz és repedezett kezét, lábát vagy könyököt. Az érintett testrészeken így egy vékony viaszréteg keletkezik, amelyre ezután egy műanyag kesztyűt kell húzni. A paraffin viasz hőjének hatására a bőr pórusai megnyílnak és nedvesség jelenik meg. A viaszréteg megakadályozza a nedvességtartalom távozását. Ehelyett a nyitott pórusokon keresztül mélyen a bőrbe jut és ott felszívódik. Ezáltal a bőr különösen puhává és simává válik. 20 perc behatási idő elteltével a paraffin viasz lehúzható az érintett testrésztől.


A paraffinfürdő hője emellett javítja a vérellátást.

4. Rendeltetésszerű alkalmazás

Ez a készülék kizárólag emberi kézen, lábon vagy könyökön történő alkalmazásra készült. Ne használja állatokon a készüléket!



5. A készülék leírása

1. Paraffinfürdő
2. Fedél
3. Működést jelző zöld lámpa
4. Hőmérséklet-szabályozó
5. Melegítést jelző piros lámpa
6. Védőrács
7. Paraffin viasz
8. Műanyag kesztyűk

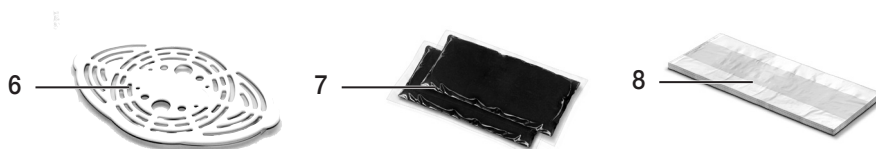

6. Üzembevétel

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze, hogy a szállítmány minden része megvan-e (lásd 1. Szállítási terjedelem).
- Ellenőrizze a paraffinfürdőt és a kábel esetleges sérüléseit.
- Állítsa lapos, szilárd, egyenes és vízre érzéketlen felületre, pl. egy asztalra a paraffinfürdőt.
- Ügyeljen rá, hogy a viasz behelyezése előtt a paraffinfürdő üres legyen.




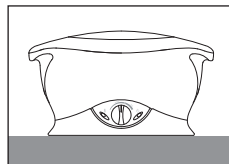
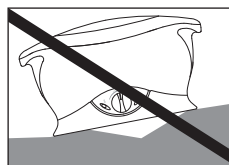


- Vegye ki a paraffin viaszt a műanyag csomagolásból.
- Tegye a paraffinfürdőbe a kívánt mennyiségű paraffin viaszt (legalább 0,9 kg, legfeljebb 1,35 kg). Törje össze a paraffin viasztömböket, hogy a viaszt könnyebben bele tudja helyezni a paraffinfürdőbe.

Figyelem

Ügyeljen rá, hogy üzembe helyezés előtt a paraffinfürdő legalább a MIN jelzésig legyen töltve paraffin viasszal.

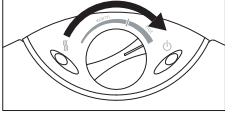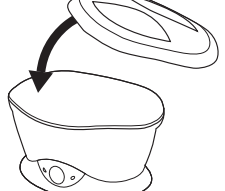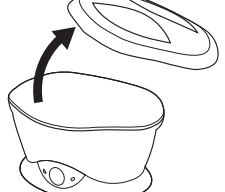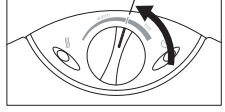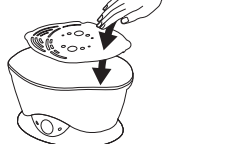

• Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a fali aljzatba (220–240V, ~50/60Hz). A paraffinfürdőn világítani kezd a működést jelző zöld lámpa. A készülék most bekapcsolt állapotban van. A paraffinfürdő melegítést jelző piros lámpája szintén világítani kezd, és csak a beállított hőfok elérése után alszik ki.	
• A paraffin viasz felolvasztásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót „hot” állásba.	
• Most helyezze rá a tetőt a paraffinfürdőre, és várjon, amíg a paraffin viasz teljesen felolvad (kb. 2-3 óráig tart). ⚠ Figyelmeztetés Amikor a paraffinfürdő „hot” állásban van, soha ne tegye bele a paraffin viaszba a kezét, lábát vagy könyökét!	
• Ha a paraffin viasz teljesen megolvadt, vegye le a tetőt. • Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a „warm” és „hot” állás között jelzett vonalhoz. • Helyezze a csomagban található védőrácsot a folyékony paraffin viaszba, és várjon, amíg az lesüllyed a paraffinfürdő aljára. • Helyezze fel ismét a tetőt a paraffinfürdőre és várjon kb. 1 órát, amíg a paraffin viasz lehűl az ideális alkalmazási hőmérsékletre (60°C). ⚠ Figyelmeztetés A helyiség hőmérséklete hatással lehet a készülék teljesítményére, és ezzel a viasz hőmérsékletére is. Mielőtt kezét, lábát vagy könyökét belemártja a paraffinfürdőbe, csuklója belső oldalával ellenőrizze, hogy a viasz hőmérséklete kellemes. Ha bevonat képződött a viasz felületén, emelje a hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozó jobbra forgatásával. Ha túl melegnek találja a paraffin viaszt, csökkentse a hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozó balra forgatásával.	  

7. A készülék kezelése




⚠ Figyelmeztetés

Mielőtt kezét, lábát vagy könyökét belemártja a paraffinfürdőbe, csuklója belső oldalával ellenőrizze, hogy a viasz hőmérséklete kellemes.

⚠ Figyelmeztetés

A kezelés előtt vegye le az ékszereit (pl. óra, gyűrű stb.).

Miután elvégezte a „6. Üzembevitel” fejezetben leírt szükséges előkészületeket, megkezdheti a készülék használatát. Hajtsa végre ehhez a következő lépéseket:

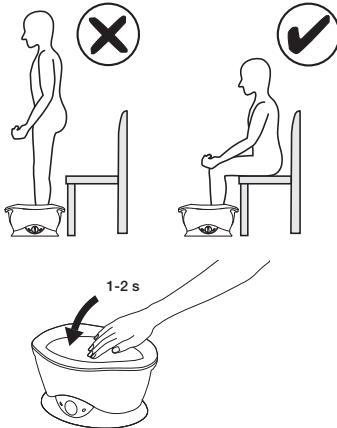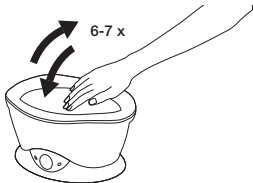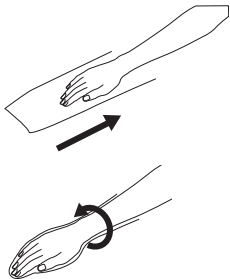
- Javasoljuk, hogy a kezelés előtt kenje be a kezelendő részeket lanolinos kézkrémmel. Ezáltal jobb eredményt érhet el, és a kezelést követően könnyebben el tudja távolítani a paraffin viaszt. ⚠ Figyelmeztetés Ha a paraffinfürdőt a lábain alkalmazza, ezt kizárólag ülő helyzetben végezze. Soha ne álljon bele a paraffinfürdőbe! - A kezelendő részt (kéz, láb vagy könyök) rövid időre, 1-2 másodpercre mártsa bele a folyékony paraffin viaszba. Ezután vegye ki a kezét, és várjon, míg a viasz megkeményedik. Ez idő alatt ne mozgassa a kezelt részt, hogy a viasz jobban megkeményedhessen.	
A belemártást és a kivételt 6-7 alkalommal ismételje meg, amíg több viaszréteg képződik a kezelendő részen. Ha a kezelés ideje alatt a paraffin viasz túl meleg vagy túl hideg lesz, a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásának megfelelő vagy azzal ellentétes irányba.	
Most helyezzen fel egy műanyag kesztyűt a kezelt részre, nyomja rá a paraffin viaszra, és tekerje össze a nyílásnál. A műanyag kesztyűt 20 percig viselje. ⚠ Figyelmeztetés Ha a műanyag kesztyűt a lábán viseli, ne járkaljon benne. Fennáll az elcsúszás veszélye!	
20 perc elteltével húzza le a műanyag kesztyűt a viaszrétegekkel együtt a kezelt részről. A műanyag kesztyűt dobja a szemétkbe, azt nem lehet újra felhasználni.	
Minden használat után vegye ki a védőrácsot a paraffinfürdőből.	

8. Tisztítás

⚠ Figyelem

Ha a készüléket csak egy személy használja, rendszeres időközönként cserélje ki a paraffin viaszt, és ilyenkor tisztítsa is meg a paraffinfürdőt.

Ha a készüléket több személy használja, a kezelés előtt higiéniai okokból ki kell cserélni a paraffin viaszt.

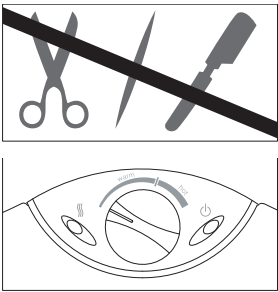• Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból. • Vegye ki a védőrácsot a paraffinfüldőből. • Haggya megkeményedni a paraffin viaszt egy éjszakán keresztül.	
⚠ Figyelmeztetés A viasztömb paraffinfüldőből való eltávolításához ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. Ezek megsérthetik és megkarcolhatják a paraffinfüldőt. • Ha a paraffin viasz megkeményedett, nyomja meg a viasztömb egyik végét, és vegye ki azt a paraffinfüldőből. Ha a viasztömböt nem tudja könnyen kivenni, forgassa a hőmérséklet-szabályozót 10 percre „warm” állásba. Ezt követően húzza ki a hálózati dugaszt, és vegye ki a viasztömböt a paraffinfüldőből.	
• Ezután törölje szárazra a paraffinfüldő belsejét egy tiszta kendővel. ⚠ Figyelem Tisztításhoz soha ne töltsön vizet a paraffinfüldőbe!	
• Tisztítás után tárolja a paraffinfüldőt száraz, hűvös, pormentes helyen.	

9. Pót- és kopóalkatrészek

Cikk-, ill. rendelési szám

2x 450g paraffin viasz + 30 műanyag kesztyű 589.42*

*Kapható a kereskedelemben vagy az adott szervizcímen (a szervizcímjegyzék szerint)

10. Ártalmatlanítás

Mindig tartsa be a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi előírásokat. A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



11. Műszaki adatok

Modellszám	MP 70
Tápfeszültség	220–240V, ~50/60Hz
Teljesítmény	80 W
Érintésvédelmi osztály	II / □ , IPX0
Méretek (H x Sz x Ma)	33 x 25 x 18 cm
Súly	1 kg