

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BeautyRelax BR-2620

kozmetikai eszköz a bőr rugalmasságáért

EMSLIFT SMART



TARTALOM:

MEGJEGYZÉS	4
ELLENJAVALLATOK	5
A KÉSZÜLÉK FŐ ELŐNYEI	5
JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK	5
A CSOMAGOLÁS TARTALMA	6
A KÉSZÜLÉK BEVEZETÉSE	6
EMS LIFTING	6
A MŰSZER LEÍRÁSA	7
A KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE	8
ARCKEZELÉSI LEHETŐSÉGEK	9
A LEHETSÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	10
GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	11
AKKUMULÁTORTÖLTÉS	12
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	12
HASZNÁLT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA	13
TANÚSÍTÁS	13
SZÁLLÍTÁS	13

Kedves vásárló, köszönjük a bizalmát, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található összes részletes információt. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági figyelmeztetésekre. Kérjük, hogy a készüléket pontosan az utasításoknak megfelelően használja. Mindezek a lépések segítenek a készülék összes funkciójának maximális kihasználásában. Ebben a kézikönyvben megpróbáljuk a lehető legjobb képet adni a használt technológiáról és arról, hogyan használhatja a műszert a lehető legjobban.

Ha bármilyen bizonytalanság merülne fel az utasítások olvasása közben, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a következő e-mail címen: mh@santadria.cz.

A használati utasítást gondosan őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

MEGJEGYZÉS

- Az első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, tekintse át az összes ábrát, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.
- Ha bőrét súlyos bőrbetegség érinti, ne használja a készüléket. Első használatához forduljon háziorvosához.
- A készüléket elsősorban az Ön személyes használatára szánják. Ne ossza meg családtagjaival vagy barátaival. Ha egynél több személy használja a készüléket, különös figyelmet kell fordítani a higiéniaira.
- Ha a készülék sérült, nem működik megfelelően, vagy vízbe esett, soha ne helyezze üzembe.
- Ha a készülék elromlott, az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a belső részeket.
- Ha a készülék a földre esik, megsérülhet. Ebben az esetben ne használja tovább a készüléket, és forduljon a kereskedő szervizéhez.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy fokozott páratartalmú helyeken (fürdő, zuhanyzó, úszómedence stb.).
- A készülék nem mosható. Nem szabad vízbe vagy folyóvíz alá meríteni.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Minden használat után mindig alaposan kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készüléket nagyon hideg környezetből nagyon meleg környezetbe helyezték át, várjon legalább 3 órát a használat előtt.
- A készüléket nem gyermekeknek vagy olyan személyeknek szánták, akiknek fizikai vagy szellemi állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.
- Ne helyezze vagy használja a készüléket forró hőforrásokra (radiátor, kályha, tűzhely stb.).
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A készüléket száraz környezetben tárolja. Próbálja meg a portól védve tartani.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- A forgalmazó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv utasításaitól eltérő, nem megfelelő használatból eredő károkért. Nem felelős a biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő következményekért.
- A forgalmazó nem vállal felelősséget az egyéb felhasználás által okozott egészségügyi vagy vagyoni károkért.
- Az eszköz nem orvostechnikai eszköz.



ELLENJAVALLATOK

A készüléket semmilyen körülmények között nem **szabad olyan** személyeknek használniuk, akiket az említett állapotok bármelyike érint:

- Rák, epilepszia, vírusos betegségek
- Magas lázban
- Súlyos vese- vagy májbetegség
- Szívbetegség, pacemaker, magas vérnyomás
- Fém implantátumok a szervezetben
- Érrendszeri rendellenességek vagy arteoszklerózis
- Terhesség
- Akneiform keratosis, basaliomák, melanomák, spinaliomák, atópiás ekcéma, kontakt ekcéma, szoláris dermatitis, pikkelysömör.
- Alvadásgátló gyógyszert szedő személyek
- Az állandó felügyeletet igénylő személyek csak orvoshoz fordulva használhatják a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket a szemhéjon, a halánték vagy a pajzsmirigy területén.



A KÉSZÜLÉK FŐ ELŐNYEI

- A kezelés teljesen non-invazív jellegű.
- Mindenféle kellemetlenség nélkül.
- Használatkor csak enyhe bizsergést fog érezni.
- A bőrkezelés időtakarékos.

JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

- EMS bőrstimulációs impulzusok
- 4 intenzitási szint
- Megereszkedett és egészségtelennek tűnő bőrre tervezve
- Az arckontúrok rugalmasságának növelése
- A kollagén és a rugalmas rostok intenzív stimulálása
- Jelentős bőregenetlenségek az életkor miatt
- Legnagyobb alkalmazási fej a hasonló típusú eszközökhöz képest
- A kezelés teljesen non-invazív jellege
- Mindenféle kellemetlenség nélkül
- Csak enyhe bizsergő érzést fog érezni használat közben.
- A bőrkezelés időtakarékos
- Arc- és dekoltázskezelésre tervezve
- Kompakt méretek
- Vezeték nélküli (könnyen használható)
- Tápegység: li-ion akkumulátor
- Töltés: USB kábelon keresztül (tartozék)
- Méretek: 5,6×13,1cm
- Súly: 83g

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- BeautyRelax BR-2620.
- USB töltőkábel.
- Használati utasítás.

A KÉSZÜLÉK BEVEZETÉSE

BeautyRelax Emslift Smart bőrfeszítő készülék. Érett és megereszkedett bőrre tervezték. A kollagén és a rugalmas rostok stimulálásának maximális hatása. Rendszeres használata remek állapotban tartja a bőrt. Növeli a bőr rugalmasságát, a hangsúlyos ráncokra és az egyenetlen bőrre összpontosítva. Az arcizmok erősítése.

EMS LIFTING

Az arcot az izmok sűrű szerkezete szövi át. Az arcizmok olyan izomcsoportot alkotnak, amelyek az arckifejezést és az arckifejezéseket eredményezik. Az élet során azonban elvesztik rugalmasságukat és rugalmasságukat. Az elektromos impulzusok teljesítménye és frekvenciája kifejezetten az arckezeléshez van igazítva. A kozmetikai készülék alkalmazási feje a bőrrel érintkezve gyengéd elektromos impulzusokat bocsát ki, amelyek a bőr felső részén keresztül közvetlenül az arcizmokba hatolnak. Az izmok összehúzódnak és ezáltal megerősödnek. A kollagén és a rugalmas rostok mechanikusan stimulálódnak.



Az arc területén a bőr textúrájának és tónusának javulását, valamint a bőr rugalmasságának növekedését fogja elérni. A bőr megfiatalodott és ragyogó megjelenésű. Az elektromos izomstimulációs funkcióval rendelkező kozmetikai eszközöket kizárólag az arc kezelésére használják. Az alkalmazófej az arc azon részeit stimulálja, ahol a legnagyobb a zsír- és izomszövet. Ez javítja a finom arcizmok rugalmasságát és feszségét.

AZ EMS TECHNOLÓGIA LEGFONTOSABB HATÁSAI

- az arc vérkeringésének támogatása
- az arc nyirokrendszerének stimulálása
- növeli a bőr rugalmasságát
- a finom mimikai ráncok csökkentése
- a kollagénrostok átalakulása
- növeli az arckontúrok rugalmasságát

A MŰSZER LEÍRÁSA



- 1. Alkalmazási fej**
- 2. + gomb**
- 3. Gomb -**
- 4. Tápkábel bemenet**
- 5. Fényjelzés - EMS impulzusintenzitás 1. szint (alacsony)**
- 6. Fényjelzés - EMS impulzusintenzitás 2. szint (alap)**
- 7. Fényjelzés - EMS impulzusintenzitás 3. szint (magas)**
- 8. Fényjelzés - EMS impulzusintenzitás 3. szint (legmagasabb)**

A KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

1. A tényleges kezelés megkezdése előtt távolítsa el a bőrről az olajat és a sminket. Vigyen fel egy vékony réteg sonogelt a bőrre.
2. Nyomja meg a **(+)** gombot a készülék bekapcsolásához. Az alkalmazási fej alacsony szinten 1. elektromos mikroimpulzusokat generál.
3. Nyomja meg újra a **(+)** gombot a mikroimpulzus intenzitásának egy szinttel történő növeléséhez a 2. szintre.
4. Nyomja meg újra a **(+)** gombot a mikroimpulzus intenzitásának egy szinttel történő növeléséhez a 3. szintig.
5. Nyomja meg újra a **(+)** gombot a mikroimpulzus intenzitásának egy szinttel történő növeléséhez a 4. szintig.
6. A **(-)** gombbal csökkentheti a mikroimpulzusok intenzitását az igényeinek megfelelően. Javasoljuk, hogy mindig a legalacsonyabb értékkel kezdje, és fokozatosan növelje. A gomb minden egyes megnyomását hangjelzés kíséri.
7. A mikroimpulzusok hatását akusztikus jelzés - csipogás - kíséri. Ez a készülék bekapcsolásának kísérőjelensége.
8. A vezérlőgomb OFF üzemmódban működik - 1 - 2 - 3 - 4 - OFF.

1. megjegyzés: Mindig lassan haladjon a bőrön.

2. megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a kezelés során mindkét felhordófej érintkezzen a bőrrel.

KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK ARCÁPOLÁS



FACE: távolodjon el a középponttól a homloktól a széléig, fokozatosan fedje le az egész területet.




ORR: a homloktól az orr körül az arc felé haladva, fentről lefelé.



FACE: mozgassa az arcát az arc irányába. alulról felfelé.



CHIN: az áll hegyétől az arc körvonalai mentén, alulról felfelé haladva.

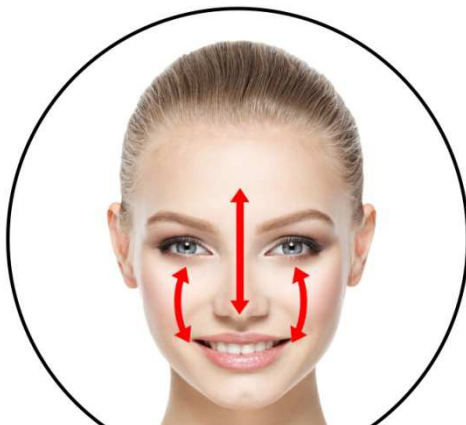

T-zóna: a homloktól az orrhegyig haladjon. és az arc, mozgás mindkét irányban.



Nyak: az álltól a fül felé haladva, majd lefelé a nyakon felfelé.

A LEHETSÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

A probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A gép nem kapcsol be.	A készüléket USB töltőkábelrel csatlakoztatjuk.	A készülék használata előtt húzza ki a készüléket a tápkábelből.
	Az akkumulátor lemerült.	Használat előtt tölts fel kellőképpen a készülék akkumulátorát.
Töltési probléma.	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép vagy laptop USB-portjához.	Csatlakoztassa újra a töltőkábel végét a számítógép vagy laptop USB-portjához.
	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a készülékhez.	Csatlakoztassa újra a töltőkábel végét a készülékhez.
	A töltőkábel megsérült.	Cserélje ki a töltőkábelt egy újjal.
Az elektromos mikroimpulzusok hatása túl erős.	Az intenzitás szintje túl erős.	Csökkentse az intenzitást alacsonyabb szintre.
	A Sonogel túl kis mennyiségben vagy egyáltalán nem kerül a bőrre.	A bőr vezetőképességének növelése érdekében vigyen fel nagyobb mennyiségű gél a bőrre.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Honnan tudom, hogy az EMS-impulzusok megfelelően működnek-e?

Ahogy az alkalmazási fejek a bőrön mozognak, az EMS-impulzusok jelenlétét enyhe bizsergésként érezheti. Pontosan ebben a pillanatban a finom arcráncok összes struktúrája stimulálódik. Az impulzusok stimulálják a bőr kollagén és rugalmas rostjait.

Végigsimítom a bőrömön a készüléket, és nem érzek pulzust. Ez így rendben van?

Az elektromos mikroimpulzusok hatása nagyon szubjektív és egyéni. Ez több tényezőtől függ. Az elektromos impulzusok érzékelése gyengébb, ha a kezelt területen vastagabb a zsírréteg. Az ok lehet egy kis **menyiségű** kozmetikai krém a bőrön. Használat közben a készülék fogási szögét is megváltoztathatja.

Hogyan válasszuk ki az EMS funkció megfelelő intenzitását?

A készülék összesen 4 EMS impulzusintenzitási szintet kínál. Minden felhasználónak más és más lehet a bőr alatti zsírrétege. A zsír ellenállásként működik. Ha több a bőr alatti zsír, az elektromos impulzusoknak nagyobb teljesítményt kell kifejteniük, hogy behatoljanak a bőrrétegbe.

Használhatom a készüléket, ha smink van a bőrömön?

A készülék használata előtt mindig távolítsa el a sminkmaradványokat. Ez gátat képezne a masszázshengerek és a bőr között. Az elektromos mikroimpulzusok nem tudnának kellőképpen behatolni a bőrbe.

Milyen gyakran és mennyi ideig kell használni a készüléket?

Ezen a területen nincs jelentős korlátozás. A kezelés optimális időtartama 15 és 20 perc között van. Minden nap elvégezhető pihenés vagy tévézés közben. Reggel sminkelés előtt vagy este lefekvés előtt. Ha a bőr nagyobb teljesítménynél jobban irritálódik, tartson egy-két nap szünetet, mielőtt újra használná a készüléket.

Használhatom a készüléket az arcomon kívül a testemen is?

A görgők méretének köszönhetően a készülék nemcsak az arcon, hanem a testen is használható. Mindig jobb, ha testápoló krémet használ, hogy növelje a bőr vezetőképességét, és az elektromos mikroimpulzusok a lehető legjobban tudjanak hatni a bőrre.

Nagy karbantartási igényű a készülék?

Minden egyes bőrkezelés után fordítson különös figyelmet az alkalmazási fejekre. Mindig győződjön meg róla, hogy nincs rajtuk maradék nedvesség. A maximális fertőtlenítés érdekében használjon időnként dörzsölő alkoholt.

Mikor számíthatok eredményekre?

Az eszköz jótékony hatásainak elérésének sebessége nagyon egyéni. Ez sok tényezőtől függ: a bőr alatti zsírréteg mértéke, életkor, nem. A műszeres kezelés folyamatossága elengedhetetlen az eredmények eléréséhez. A készülék kompakt méretének köszönhetően útközben is magával viheti. Próbálja meg a készüléket a napi bőrápolási rituálé rendszeres részévé tenni.

Bizonyos esetekben tilos a használata?

Vannak olyan helyzetek, amikor a készülék használata nem ajánlott. Kövesse a kézikönyvben az ellenjavallatok című részt.

AKKUMULÁTORTÖLTÉS

A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A töltőkábel bemenete a készülék alján található. A töltőkábelt a csomag tartalmazza. A másik végét a számítógép vagy laptop USB-portjához csatlakoztatja.

Töltési eljárás:

1. A töltéshez használja a csomagban található tápkábelt.
2. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a töltőállványhoz. A másikat a számítógép vagy laptop USB-portjához.
3. A töltési folyamatot pulzáló fényjelzés kíséri.
4. Ha az akkumulátor feltöltődött, a fénypulzálás megszűnik.
5. A töltés hossza az akkumulátor állapotától függ. A töltési folyamat akár 2 órát is igénybe vehet.

Ha az akkumulátor kapacitása 20% alá csökken, az akkumulátor szimbólum villogni kezd. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a készülék automatikusan kikapcsol.

Ne csatlakoztassa a töltőkábelt semmilyen típusú 220 V-os hálózati adapterhez. Ez károsíthatja a készüléket. A töltéshez mindig a számítógép vagy laptop USB-portját használja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A kezelés után mindig gondoskodjon az applikátorok megfelelő tisztításáról. Ne használjon agresszív tisztítószeret. Javasoljuk a speciális fertőtlenítő spray-k használatát, amelyeket például az egészségügyben vagy a szépségszalonokban gyakran használnak a műszerek tisztítására. Normál sima dörzsölő alkohol is elegendő. A nedvesség SEMMILYEN esetben nem juthat közvetlenül a műszerbe. A tisztítás előtt célszerű eltávolítani a felhordófejet a készülékről. A tisztításhoz ideális egy vattapamacs vagy száraz kendő. A készülék újbóli használata előtt az applikátoron nem maradhat gél, kozmetikai krém vagy szérum maradványa. Végül mindig ellenőrizze, hogy az applikátorfej teljesen száraz-e. Soha ne használjon éles tárgyakat, amelyek károsíthatják az applikátorfej felületét. Ez károsíthatja a fej érintkezési felületét.

HASZNÁLT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál települési hulladékhoz adni. A megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatívaként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékártalmatlanításból adódhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg kívánja semmisíteni, kérjük, szerezze be a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől a megfelelő megsemmisítési módszerrel kapcsolatos szükséges információkat.

TANÚSÍTÁS



A termék az Európai Unió országában való használatra engedélyezett, és CE-jelöléssel van ellátva. A megfelelőségi nyilatkozat és az összes dokumentáció az importőről beszerezhető.

SZÁLLÍTÁS

SANTADRIA s.r.o. , Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk:

E-mail: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160