

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ránckozmetikai eszköz
BeautyRelax BR-2530

RFLIFT PREMIUM



TARTALOM:

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	4
MEGJEGYZÉS	5
A SONOGEL HASZNÁLATA	5
A HASZNÁLAT CÉLJA	6
ELLENJAVALLATOK	7
MŰSZAKI PARAMÉTEREK	8
A CSOMAGOLÁS TARTALMA	8
FŐ ELŐNYÖK	9
KÉSZÜLÉKFUNKCIÓK	10
A KÉSZÜLÉK TECHNOLOGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA	11
RÁDIÓFREKVENCIÁS	12
EMS	12
MIKROÁRAM	12
REZGÉS	12
FOTÓTERÁPIA	13
A MŰSZER LEÍRÁSA	14
AZ ALKALMAZÁS FEJÉNEK LEÍRÁSA	15
A KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE	16
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK	18
A MŰSZEREZÉS LEHETSÉGES TERÜLETEI	20
AZ ARC ÉS A NYAK KEZELÉSÉNEK MÓDSZERE	21
GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	22
AKKUMULÁTORTÖLTÉS	24
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	24
NÉHÁNY MONDAT A KÖVETKEZTETÉSKÉNT	25
HASZNÁLT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA	26
TANÚSÍTÁS	26
SZÁLLÍTÁS	26
ES MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	27

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

• A BeautyRelax RFlift Premium a nem invazív bőrkezelésre tervezett kozmetikai eszközök kategóriájába tartozó készülék. Ez azt jelenti, hogy a felhordófej egyetlen része sem hatol a bőr felső rétege alá. Az eszköz nem

orvostechikai eszköz.

• A nem invazív használat előfeltétele annak, hogy a készüléket az átlagfelhasználó otthoni körülmények között használhassa. A készülék működtetése nem igényli az orvosi vagy kozmetikai esztétikai szakember felügyeletét.

• A BeautyRelax RFlift Premium tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel az ilyen típusú készülékekre vonatkozó összes európai szabványnak. Az összes elektronikus alkatrész biztonsága biztosított.

• A kezelés mindig egy átlátszó, vezető szonogéllal történik. Bármelyik gyógyszerárban vagy gyógyászati segédeszköz boltban megvásárolható. Néhány tíz koronába kerül. Mindenképpen a legolcsóbb is elég. Minél drágább, annál jobb. A finom gélréteg bőrre történő felvitelének fő célja a vezetőképeség növelése. A rádiófrekvenciás hullámok, a mikroáram és az EMS elektromos impulzusok jobban képesek behatolni a dermisz rétegébe, ahol a kollagén és a rugalmas rostok szerkezete található.

• Mindig úgy járjon el, hogy a felhordófejet legfeljebb néhány másodpercig a bőrön tartja (bélyegzés). A bőrkezelést mindig a legalacsonyabb intenzitással kezdje. Mindig növelje az intenzitást az érzésének megfelelően. A bőrkezelések soha nem lehetnek elviselhetetlenül fájdalmasak. Próbálja meg ennek megfelelően beállítani az applikátor és a bőr közötti érintkezés hosszát. Csak enyhe bizsergés vagy enyhe csípés fogadható el. Az arc egyes részeit egy alkalmazás során nem szabad háromnál többször kezelni ugyanazon a helyen.

• Ha az applikátorfejet túl sokáig tartja a bőrén, és a legmagasabb kezelési szintet is beállítja, a készülék elég erős ahhoz, hogy kellemetlenül megsértse a bőrét. **Ezért kérjük, hogy a lehető legnagyobb gondossággal és szelídséggel közelítsen a kezeléshez.**

• Az ismétlések száma nagyon egyéni. Ez a bőr korától és állapotától függ. Ideális esetben hetente egyszer vagy legfeljebb kétszer. A bőrnek és különösen a dermisz rétegnek időre van szüksége az önálló regenerációs folyamathoz. Minél gyakoribb a használat, annál jobb az elérhető eredmények. Egyik sem érvényes - minél nagyobb a teljesítmény, annál gyorsabb és jobb az eredmény. Mindenki bőre egy olyan szerv, amelynek érzékenysége egyénre szabott. Egyesek számára már a közepes teljesítmény is jelentősen fájdalmas lehet, míg másoknak a legnagyobb teljesítmény sem okoz gondot a hosszabb kezeléseknél.

• Minden kezelés után mindig alaposan tisztítsa meg a felhordófejet. A fertőtlenítéshez ideális a tiszta alkohol használata. Az utolsó fázisban alaposan szárítsa meg az applikátort. A nedvesség az érintkező applikátorok oxidációját és a készülék károsodását okozhatja. Ez jelentősen megnöveli a műszer élettartamát.

• Ha nem tudja, mit kell tennie, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Telefon: 737196160 vagy e-mail: mh@santadria.cz A BeautyRelax márkatanácsadója, Martin Hrbek készséggel áll rendelkezésére, hogy válaszoljon minden kérdésére vagy problémájára.

• Sok sikert kívánunk az egészségesebb és szebb bőrért folytatott küzdelemhez.

BeautyRelax.cz csapat



MEGJEGYZÉS

- Az első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, tekintse át az összes ábrát, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.
- Ha bőrét súlyos bőrbetegség érinti, ne használja a készüléket. **Ha nem biztos abban, hogy az Ön egészségi állapota megfelel-e a készülék használatának feltételeinek, forduljon háziorvosához az alkalmassággal kapcsolatban.**
- Ha egynél több személy használja a készüléket, különös figyelmet kell fordítani a higiéniaira. Az applikátorfejet minden használat után alaposan fertőtleníteni kell, különösen akkor, ha egynél több személy használja az eszközt.
- Ha a készülék sérült, nem működik megfelelően, vagy vízbe esett, soha ne helyezze üzembe.
- Ha a készülék elromlott, az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a belső részeket.
- Ha a készülék a földre esik, megsérülhet. Ebben az esetben ne használja tovább a készüléket, és forduljon a kereskedő szervizéhez.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy fokozott páratartalmú helyeken (fürdő, zuhanyzó, úszómedence stb.).
- A készülék nem mosható. Nem szabad vízbe vagy folyóvíz alá meríteni.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Minden használat után mindig alaposan kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készüléket nagyon hideg környezetből nagyon meleg környezetbe helyezték át, várjon legalább 3 órát a használat előtt.
- A készüléket nem gyermekeknek vagy olyan személyeknek szánták, akiknek fizikai vagy szellemi állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.
- Ne helyezze vagy használja a készüléket forró hőforrásokra (radiátor, kályha, tűzhely stb.).
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A készüléket száraz környezetben tárolja. Próbálja meg a portól védve tartani.
- Használat közben semmilyen módon ne takarja le a készüléket. Túlmelegedhet!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- **A forgalmazó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv utasításaitól eltérő, nem megfelelő használatból eredő károkért. Nem felel a biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő következményekért.**
- **A forgalmazó nem vállal felelősséget az egyéb felhasználás által okozott egészségügyi vagy vagyoni károkért.**

A SONOGEL HASZNÁLATA

A használatához mindig egy tiszta vezető gél társul. A SONOGEL nevű kontaktzselé bármelyik gyógyászati segédeszköz boltban megvásárolható (gyógyszertárban is megvásárolható). Ideális esetben hozzáadott anyagok nélkül. A márka nem számít. A gél nagyon fontos a készülék használatához. Szükséges kötőréteget képez az applikátor és a bőr között. Vízbázisú. Nem károsíthatja az applikátorfejet. A kontaktzselé használata elengedhetetlen. Ez lehetővé teszi, hogy a készülék technológiája jobban kötődjön a bőrhöz.



Kedves vásárló, köszönjük a bizalmát, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található összes részletes információt. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági figyelmeztetésekre. Kérjük, hogy a készüléket pontosan az utasításoknak megfelelően használja. Mindezek a lépések segítenek a készülék összes funkciójának maximális kihasználásában. Ebben a kézikönyvben megpróbáljuk a lehető legjobb képet adni az alkalmazott technológiáról és arról, hogyan használhatja a készüléket a lehető legjobban.

Ha bármilyen bizonytalanság merülne fel az utasítások olvasása közben, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a következő e-mail címen: mh@santadria.cz.

A használati utasítást gondosan őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

A HASZNÁLAT CÉLJA

A BeautyRelax Rlift Premium egy professzionális ráncatlanító gép, amely az érett és fáradt, ráncos arc-, nyak- és dekoltázs bőrt célozza meg. 5 fejlett technológia - rádiófrekvencia, mikroáram, EMS impulzusok, fotonfény (kék, piros, zöld) és vibráció. A kollagén és a rugalmas rostok átalakításának közvetlen célzása. Korlátozások nélkül minden bőrtípusra tervezték. **A BeautyRelax Rlift Premium** egy olyan csúcstechnológiás szépségápolási eszköz, amelyre 100%-ban számíthatsz a bőröd állapotának javítása érdekében.



ELLENJAVALLATOK

A készüléket **nem használhatják olyan** személyek, akiket az alábbi állapotok bármelyike érint:

- Rák, epilepszia, vírusos betegségek
- Magas lázban
- Súlyos vese- vagy májbetegség
- Szívbetegség, pacemaker, magas vérnyomás
- Fém implantátumok a szervezetben (a korlátozások csak az eszköz használatának helyén érvényesek)
- Érrendszeri rendellenességek vagy arteoszklerózis
- Akneiform keratosis, basaliomák, melanomák, spinaliomák, atópiás ekcéma, kontakt ekcéma, szoláris dermatitis, pikkelysömör.
- Alvadásgátló gyógyszert szedő személyek
- Az állandó felügyeletet igénylő személyek csak orvoshoz fordulva használhatják a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket a szemhéjakon, a halánték területén vagy a pajzsmirigy közvetlen közelében.




MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Automatikus programok: MFIP, UP, EMS, LED, VR
- Technológia: rádiófrekvencia, mikroáram, EMS impulzusok, fotonfény (kék, piros, zöld), vibráció.
- Rádiófrekvencia: 1Mhz
- A kék fény hullámhossza: 465nm
- A vörös fény hullámhossza: 625nm
- A zöld fény hullámhossza: 525nm
- Tápegység: újratölthető Li-ion akkumulátor
- Akkumulátor kapacitás: 1450mAh
- Töltés: USB kábel 220V-os adapterrel (benne)
- Méretek: 18,5×4,5×5,5cm
- Súly: 148g

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- 1x BeautyRelax BeautyRelax BR-2530
- 1x USB kábel
- 1x hálózati adapter 220V
- 1x Védőtáska
- 1x használati utasítás

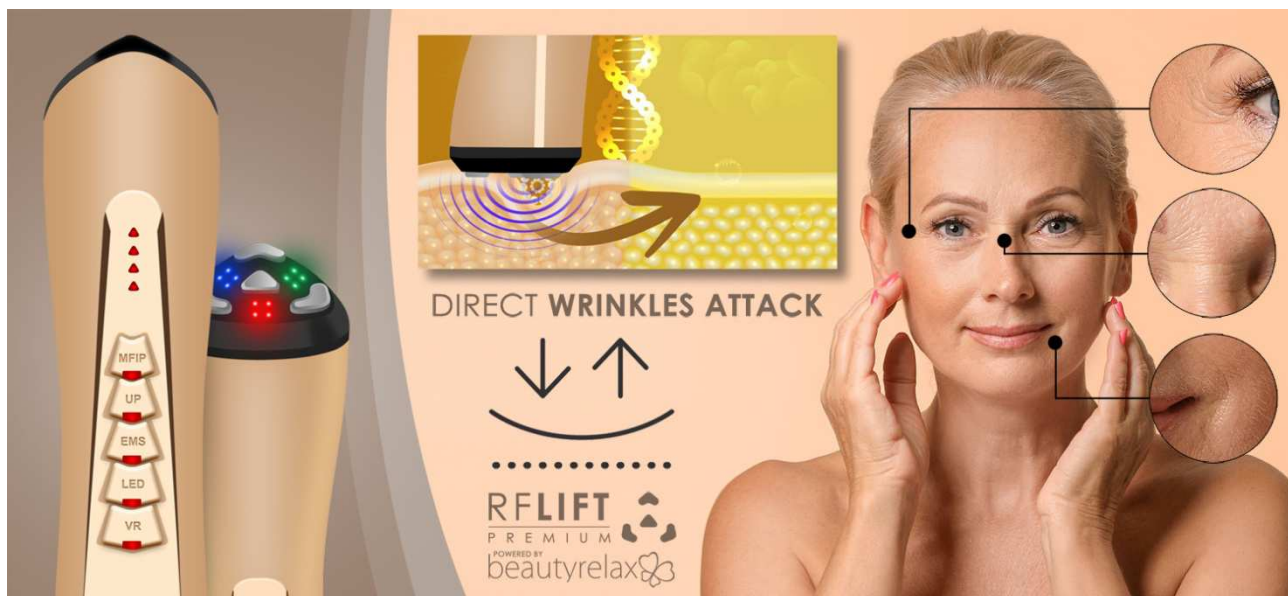

FŐ ELŐNYÖK

- A kollagén és a rugalmas rostok átalakításának közvetlen célzása
- Igazán hatékony megoldás az érett és fáradt bőr számára
- A mély és finom arcráncok enyhítése
- Növeli a bőr rugalmasságát
- Nem invazív bőrfiatalító hatás érhető el rendszeres használatával
- Optimalizált teljesítmény a maximális hatás érdekében, a bőrbarát jelleg fenntartása mellett.
- Elérhető emelő hatás
- A hegek és a bőr egyenetlenségeinek kisimítása
- A jellegzetes arckontúrok kiemelése
- Az alkalmazás semmilyen módon nem terheli a szervezetet.
- Maga a kezelés mindössze néhány percet vesz igénybe
- Nem invazív lifting az esztétikai stúdióval megegyező színvonalon
- Segít elérni a fiatalos és ragyogó megjelenést



KÉSZÜLÉKFUNKCIÓK

- Felhordófej 4 érintkező felülettel
- Az érintkezési felületek speciálisan kialakítottak és optimális méretűek az összes arcú kezeléséhez.
- Vezeték nélküli használat (újratölthető akkumulátorral működik)
- Nem invazív kezelés (a készülék nem hatol közvetlenül a bőrön keresztül)
- Teljesen biztonságos használat, a biztonsági ajánlások betartásával
- Nem invazív kezelés (az applikátor egyetlen része sem hatol be a bőrbe)
- Korlátozások nélkül minden bőrtípusra tervezve
- Megismételhető kezelés az Ön otthonának kényelmében
- Arcra, nyakra és dekoltázsra tervezve
- Kezelés kellemetlenségek nélkül
- A készülék magas használati értéke csak modern technológiát kínál a kezeléshez
- A készülék minden alkatrészének minőségi kivitelezése
- 4 rozsdamentes acél érintkezési felület
- Hosszú élettartam
- Valamennyi felkínált funkció megfelelő teljesítése
- Az intenzitási szint egyéni beállításának lehetősége
- Tanúsított műszer



A KÉSZÜLÉK TECHNOLOGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA

A **BeautyRelax RFlift Premium** egy csúcskategóriás szépségápolási készülék, amely professzionális szinten hatékonyan ápolja bőrét! A többfunkciós applikációs fej több fejlett technológiát kombinál, hogy segítsen leküzdeni az öregedés jeleit. A **BeautyRelax RFlift Premium** a rádiófrekvenciás hullámok, a mikroáram, az EMS impulzusok és a fotonfény hatását kínálja. Célzottan csökkentheti a ráncokat és növelheti a bőr rugalmasságát.

The infographic displays five technologies used in the RFLIFT PREMIUM device, each represented by a numbered icon:

- 1. **RF** (Radiofrequency)
- 2. **EMS PULSES**
- 3. **MICRO CURRENT**
- 4. **PHOTON LIGHT**
- 5. **VIBRATIONS**

Below the icons, a close-up of the device's applicator head is shown, featuring a control panel with buttons labeled MFIP, UP, EMS, and LED. To the right, a woman's face is shown with a grid overlay, illustrating the treatment area.

RFLIFT PREMIUM
POWERED BY
beautyrelax

5 HIGH EFFICIENCY TECHNOLOGIES SKIN TREATMENT


RÁDIÓFREKVENCIÁS

A BeautyRelax RFlift Premium fejlett rádiófrekvenciás hullámtechnológiát használ. Az alkalmazás fején található érintkezési felületek optimálisan kiválasztott teljesítmény és frekvencia mellett juttatják el a rádiófrekvenciás energiát a bőr alatti rétegbe. A rádiófrekvenciás energia mennyiségét a kezelendő terület típusának megfelelően maga szabályozhatja. A használat átlagos időtartama a kezelendő terület méretétől függ. Maga a készülék használata egyszerű és intuitív. Ez az arc "taposásának" vagy gyorsabb rövid mozdulatoknak a formáját ölti. A felhordófej érintkezési felületei speciálisan kialakítottak. Ez lehetővé teszi, hogy az egész arcfelületet hézagmentesen kezelje.



EMS

A felhordófej érintkező felületei EMS-impulzusokat generálnak. Az elektromos impulzusok közvetlenül az izomrostok szerkezetét célozzák meg. A hagyományos elektrostimulátorok ugyanígy működnek, a test kiválasztott részein lévő izmokat stimulálják zselés ragasztóelektrodákon keresztül. A kozmetikai eszköz elektromos impulzusai a bőr felső részén keresztül közvetlenül az arcizmokba hatolnak. Az arc területén a bőr textúrájának és tónusának javulását, valamint a bőr rugalmasságának növekedését fogja elérni. A bőr megfiatalodott és ragyogó megjelenésű. Fokozza az arc kontúrait.

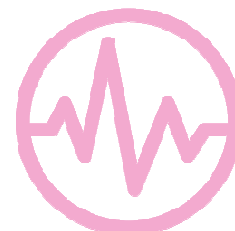


MIKROÁRAM

Azt elektromosság használatával kapcsolatos információk félelmet vagy vegyes érzéseket kelthetnek Önben. **Ne féljete!** A kozmetikai eszközök által használt elektromos áram a bőrkezelés rendkívül biztonságos módszere. Az erő korlátozott, hogy semmiképpen ne tudjon kárt tenni magában. A mikroáram-technológia ugyanazon az alapon nyugszik, mint az EMS-impulzusok. Ezek olyan elektromos áramimpulzusok, amelyeknek nagyon meghatározott frekvenciájuk és teljesítményük van. A mikroáram a dermisz rétegbe hatolva támogatja a rugalmas rostokat. Ezzel szemben az EMS-impulzusok teljesítménye és frekvenciája úgy van megválasztva, hogy mélyebbre hatoljon az arcizmokba.




REZGÉS

A nyirokrendszer megfelelő működése nemcsak a test végtagjaira, hanem az arcunkra is vonatkozik. Ha a nyirok- és vérkeringésünk rendben van, a szennyeződések eltávolítása a vérből többszörösen javul. Jobb vérkeringés = a nyirokrendszer stimulálása = a szennyeződések és szennyeződések jobb eltávolítása a testből = szép és egészséges bőr. Egy egyszerű egyenlet, amely nem csak az arcra, hanem az egész testünkre vonatkozik. A gyengéd vibrációs masszázst technológiailag az egyik legegyszerűbb, mégis nagyon hatékony bőrkezelési technika.

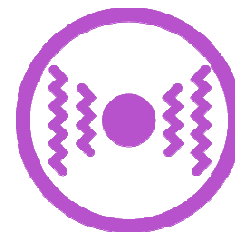

FOTÓTERÁPIA

A fény egyszerűen a különböző frekvenciájú elektromágneses sugárzás látható része. A 390 és 760 nm (nanométer) közötti hullámhosszúságú tartományba esik. Az emberi szem a 400 és 800 nm közötti hullámhosszúságú fényt képes érzékelni. A fotonterápiában a fény fotonok formájában energiaáramként jut a szervezetbe. Tudományosan bizonyított, hogy a különböző hullámhosszúságú fény sajátos bőrápolási hatásokat eredményez. Tanulmányok igazolták, hogy az élő szövetek és szervezetek számára a sejtek szintjén valódi pozitív terápiás előnyökkel jár.

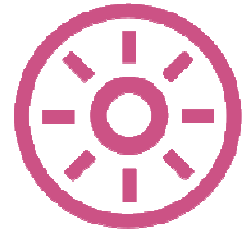

A gyulladásos betegségek betegség, sérülés vagy stressz következtében alakulhatnak ki. A fényterápia természetes módon serkenti a sejtek gyógyító erejét. A fény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt belsejébe. A fény aktiválja a sejtek fotoreceptorait. A fotonterápia nem okoz mellékhatásokat és nem károsítja a szervezetet. Pozitív hatásainak köszönhetően nemcsak a bőrgyógyászat, hanem a kozmetikai bőrkezelés szegmensében is népszerűvé vált.

VALÓDI POZITÍV ELŐNYÖK AZ ÉLŐ SZÖVETEK ÉS SZERVEZETEK SZÁMÁRA A SEJTEK SZINTJÉN.

- A fotonfény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt belsejébe.
- A fény aktiválja a sejtek fotoreceptorait.
- A fényterápia természetes módon serkenti a sejtek gyógyító erejét.
- A fotonterápia nem okoz semmilyen mellékhatást vagy károsodást a szervezetben.
- A betegség, sérülés vagy stressz okozta gyulladásos betegségeket kezeli.

VÖRÖS FÉNY (625nm hullámhossz)

- Támogatja a természetes kollagéntermelést.
- Növeli a kozmetikai termékekben lévő hatóanyagok felszívódásának hatékonyságát.
- A bőr alatti szövet vérkeringés javítása.
- Megakadályozza a pigmentképződést.

KÉK FÉNY (465 nm hullámhossz)

- Aktiválja a porfirineket (kémiai reakciót indít el, amely megöli a káros baktériumokat).
- Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatás.
- A pattanások kialakulásának megelőzése.
- Biztonságos és hatékony kezelés.

ZÖLD FÉNY (525 nm hullámhossz)


- Hozzájárul az epidermális pigmentfoltok eltüntetéséhez.
- 40-60%-kal lassítja a melanin termelődését.
- Kiegyensúlyozza a bőr színtónusát.
- Gyulladáscsökkentő hatás.
- Minden bőrtípusra alkalmas.

A MŰSZER LEÍRÁSA



1. Alkalmazási fej
2. A **fényerősség szintjének** jelzése
3. **MFIP** gomb
4. **UP** gomb
5. **EMS** program gomb
6. **LED** program gomb
7. **VR** program gomb
8. Díszítő csíkok az oldalakon
9. Díszítő öv
10. Bemenet a töltőkábelhez

AZ ALKALMAZÁS FEJÉNEK LEÍRÁSA

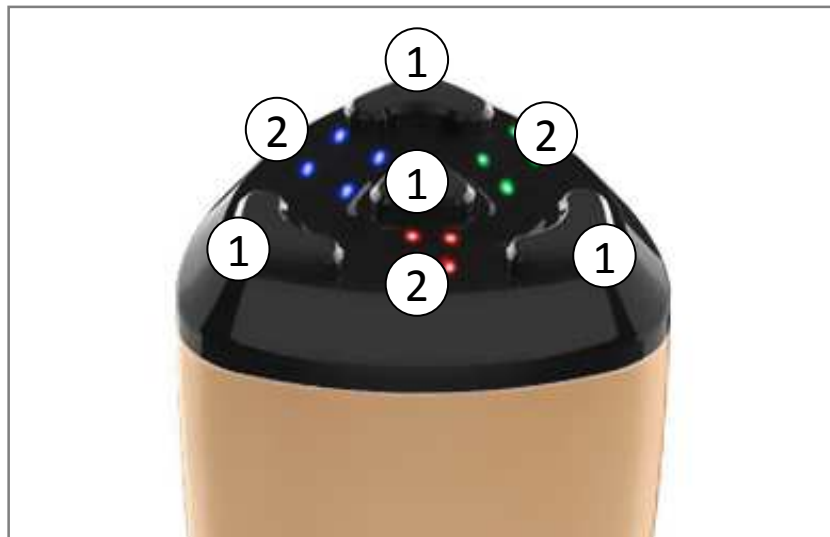

1. Rádiófrekvenciás, mikroáram, EMS impulzus és rezgés átvitelére szolgáló érintkezőfelületek
2. Foton terápiás fények

A KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

- 1.** A bőrt minden használat előtt alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani. Ideális, ha a kezelést fürdés utánra időzíti. A pórusok egy forró fürdő után kinyílnak. A bőr puhább.
- 2.** Vigyen fel egy vékony réteg átlátszó gél a kezelendő területre. A SONOGEL nevű applikációs gél bármelyik gyógyászati segédeszköz boltban megvásárolható (gyógyszertárban is kapható). A gél nagyon fontos a készülék használatához. A felhordófej és a bőr között szükséges kötőréteget képez. Vízbázisú. Nem károsíthatja az alkalmazás fejét. Az alkalmazási gél használata elengedhetetlen. A bőr és az applikátor közötti kötőanyag nélküli eszköz nem ajánlott.
- 3.** A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan az **MFIP** gombot. Megszólal a "BEEP" hangjelzés. A készülék most készenléti üzemmódban van. Minden intenzitásszint-jelzőfény pulzál.
- 4.** Nyomja meg az **MFIP** gombot. A mikroáram aktiválódik. A beállított alapértelmezett intenzitás a legalacsonyabb, 1. szint (egyetlen piros fény jelzi). Az összes fotonterápiás lámpa világítani fog.
- 5.** Az **MFIP** gomb újabb rövid, ismételt megnyomásával fokozatosan növeli a mikroáram intenzitását. Összesen 4 szint van (1, 2, 3, 4). Ha a MFIP gombot a negyedik intenzitási szinten megnyomja, a készülék visszatér az alapértelmezett készenléti üzemmódba. Az intenzitásszint bármilyen változását egy "BEEP" hangjelzés kíséri.
- 6.** Nyomja meg az **UP** gombot. A rádiófrekvencia és a mikroáram aktiválódik. A beállított alapértelmezett intenzitás a legalacsonyabb, 1. szint (egyetlen piros fény jelzi). Minden fotonterápiás lámpa világítani fog.
- 7.** Az **UP** gomb rövid ideig tartó ismételt megnyomásával fokozatosan növeli a rádiófrekvenciás intenzitás és a mikroáram szintjét. Összesen 4 szint van (1, 2, 3, 4). A **FEL** gomb megnyomása után a negyedik intenzitási szinten a készülék visszatér az alapértelmezett készenléti üzemmódba. Minden egyes intenzitásszint-változást egy "BEEP" hangjelzés kíséri.
- 8.** Nyomja meg az **EMS** gombot. Az EMS impulzusok aktiválódnak. A beállított alapértelmezett intenzitás a legalacsonyabb, 1. szint (egyetlen piros fény jelzi). Az összes fotonterápiás lámpa világít.
- 9.** Az **EMS** gomb újabb rövid, ismételt megnyomása fokozatosan növeli az EMS-impulzusok intenzitását. Összesen 4 szint áll rendelkezésre (1, 2, 3, 4). Amint megnyomja az EMS gombot a negyedik intenzitási szinten, a készülék visszatér az alapértelmezett készenléti üzemmódba. Minden egyes intenzitásszint-változást egy "BEEP" hangjelzés kíséri.

- 10.** A VR funkciót az MFIP, UP, EMS, LED programok bármelyikének működése közben is hozzáadhatja. Az alkalmazásfej elindítja a vibrációs masszázst. A vibrációs masszázsnak egy intenzitási szintje van. A vibrációs masszázst hangjelzés kíséri. Ez csak a rezgésmasszázs megerősítésére szolgál.
- 11.** Kezelje az arc, a nyak vagy a dekoltázs egyenként kiválasztott részét. Mindig úgy járjon el, hogy a felhordófejet néhány másodpercig a bőrön tartja (bélyegzés). Rövid vagy hosszú ütések is választhatóak. Mindig a legalacsonyabb, 1-es beállítással kezdje. A bőrkezelés soha nem lehet elviselhetetlenül fájdalmas. Próbálja meg ennek megfelelően beállítani az applikátor és a bőr közötti érintkezés hosszát. Csak enyhe bizsergés vagy enyhe csípés fogadható el. Az enyhe hő alkalmazásának érzékelése szintén normális. A rádiófrekvencia nem égetheti meg Önt.
- 12.** A LED gomb segítségével bármely program működése közben beállíthatja a fotonterápiás fények hatásmódját. A LED fénysorrendje a következő: **(1)** minden szín folyamatos fény **(2)** piros fény **(3)** kék fény **(4)** zöld fény **(5)** minden szín impulzusfény.
- 13.** Minden program 10 percig tart. Ezután a készülék automatikusan kikapcsol. Ha folytatni kívánja a bőrkezelést, kapcsolja be újra a készüléket, és válasszon ki egy adott programot.
- 14.** Az MFIP gomb hosszú megnyomásával bármikor kikapcsolhatja a készüléket.
- 15.** Miután befejezte a készülék használatát, törölje le a sonogelt a bőréről. Ha szükséges, használjon krémet vagy spray-t a bőrének hidratálására. Bőre alvás közben regenerálódik. A hidratálás jelentősen hozzájárul a bőr gyorsabb regenerálódásához.



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ

MEGJEGYZÉSEK


1. Ha úgy dönt, hogy az arc, a nyak vagy a dekoltázs nagyobb részét kezeli a készülékkel, javasoljuk, hogy a sonogelt szakaszosan alkalmazza. Bár a kontaktgél kiváló hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik, egy idő után fokozatosan kiszáradhat.
2. Az MFIP, az UP és az EMS programok mindig egymástól függetlenül működnek. Ezek nem kombinálhatók.
3. A fotonfényterápia az MFIP, UP vagy EMS programokkal párhuzamosan működik.
4. A VR program működhet önállóan vagy párhuzamosan az összes többi programmal.
5. A felhordófej 4 rozsdamentes acél érintkezési felületre van osztva. A **BeautyRelax BR-2530 RFLIFT PREMIUM** egyedülálló módon rendezi el ezeket az érintkező felületeket. Ennek köszönhetően még a nehezen hozzáférhető területeket is könnyedén kezelheti, különösen az arc területén. Használat során törekedjen arra, hogy ideális esetben mind a 4 érintkező felület érintkezzen a bőrrel. Ha ezt elmulasztja, semmi sem történik. Csak azokkal az érintkezési felületekkel kezelje a bőrt, amelyeket az arcformája megenged.
6. A fotonfények aktív működésekor nincs szükség védőszemüvegre. A szemkörnyéki bőr kezelése sem okoz gondot. Mindazonáltal javasoljuk, hogy kerülje a fényforrásba való közvetlen és hosszan tartó belenézést. Az Ön látása semmilyen módon nem károsodik tartósan, de a fényforrás hosszabb ideig történő nézése nem kellemes a szemének.
7. Az egyes programokat fokozatosan kombinálhatja egy bőrkezelés során. Használjon több olyan programot, amely megfelel az eszközzel elérni kívánt céloknak. Lásd az egyes technológiák jelentésének leírását a kezelési útmutató bevezetőjében. Javasoljuk, hogy a legproblémásabb területekre összpontosítson (finom homlokráncok, szarkalábak a szem körül, mimikai ráncok, kontúrozás, nyakráncok stb.).
8. Ha egy adott technológiát a bőr egy adott pontján még a legalacsonyabb intenzitási szinten is kellemetlennek érzi, csökkentse a szonogél mennyiségét, rövidítse le az applikátor és a bőr közötti érintkezési időt, vagy kerülje el az adott pontot teljesen.
9. **Megjegyzés:** A bőrrel való első érintkezéskor mindig a legalacsonyabb intenzitási szintet tartsa bekapcsolva. Vigye fel az applikátort az arc azon részére, ahol több bőr alatti zsír

található. Fokozatosan növelheti az intenzitást. Ez azonban mindig az Ön szubjektív érzésétől függ. Ha a kezelés már kényelmetlen vagy enyhén fájdalmas, állítsa vissza a legalacsonyabb szintre, vagy hagyja abba a kezelést.

- 10. Tipp:** A kezelt területnek ideális esetben mentesnek kell lennie az erős szőrszálaktól. Ez javítja a felhordófej mozgását a bőrön. A rádiófrekvenciás, mikroáramú és EMS impulzusoknak jobb lehetőségük lesz behatolni a bőr alatti szövetekbe.
- 11. Ajánlás:** legalább 3 napig ne tegye ki a kezelt bőrt forró víznek. Legalább 3 napig próbálja meg elkerülni a szaunázást. A bőr még mindig regenerálódik a kezelés után, és a forró víz (vagy a szaunában való tartózkodás) feleslegesen irritálhatja a bőrt. A bőr felmelegszik a készülék használata közben. Ha túl melegnek érzi, tartson szünetet, és hagyja lehűlni a bőrét.



A MŰSZEREZÉS LEHETSÉGES TERÜLETEI

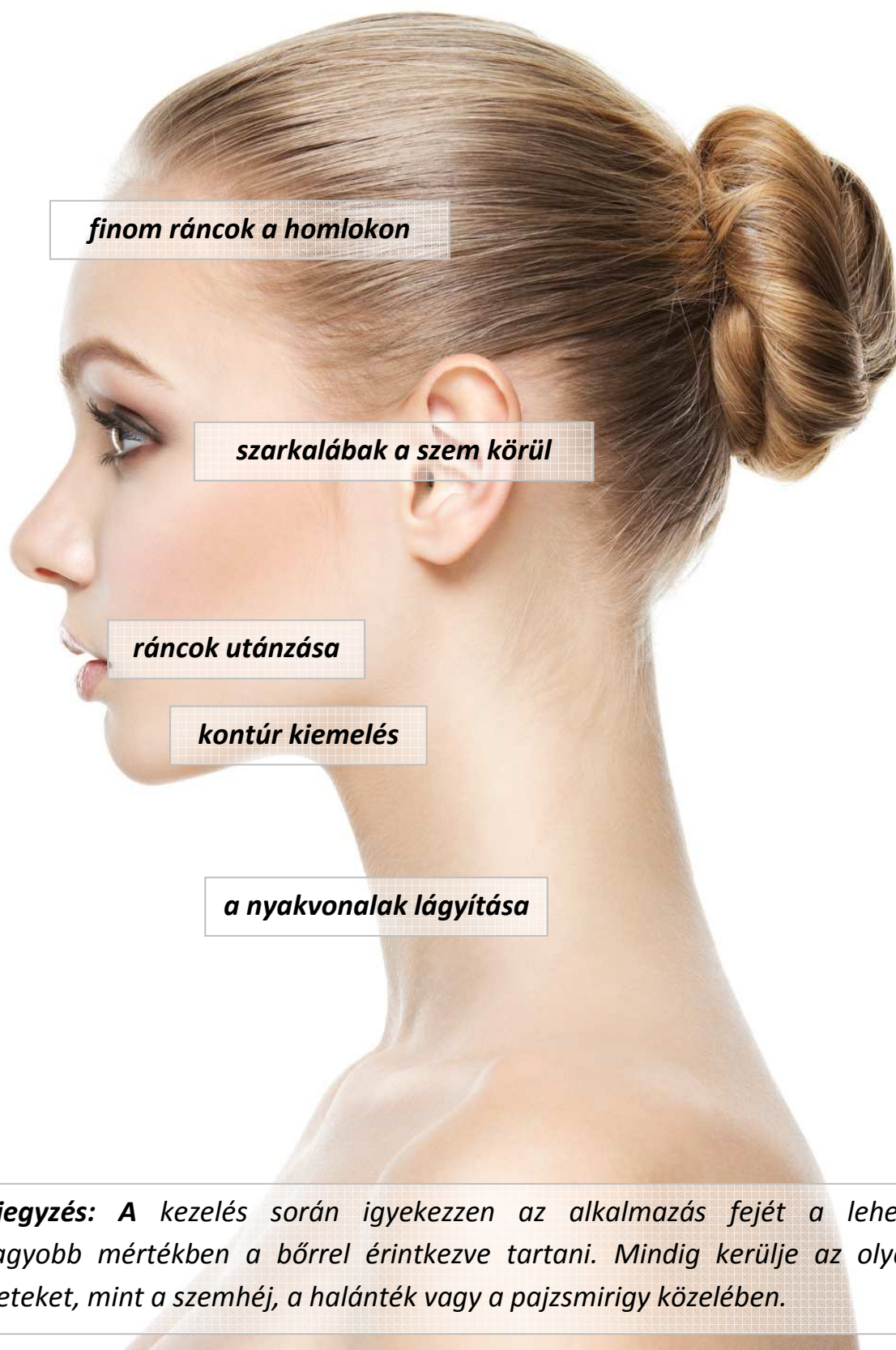

Megjegyzés: A kezelés során igyekezzon az alkalmazás fejét a lehető legnagyobb mértékben a bőrrel érintkezve tartani. Mindig kerülje az olyan területeket, mint a szemhéj, a halánték vagy a pajzsmirigy közelében.

AZ ARC ÉS A NYAK KEZELÉSÉNEK MÓDSZERE



FACE: távolodjon el a középponttól a homloktól a széléig, fokozatosan fedje le az egész területet.




ORR: a homloktól az orr körül az arc felé haladva, fentről lefelé.



FACE: mozgassa az arcát az arc irányába. alulról felfelé



CHIN: az áll hegyétől az arc körvonalai mentén, alulról felfelé haladva.

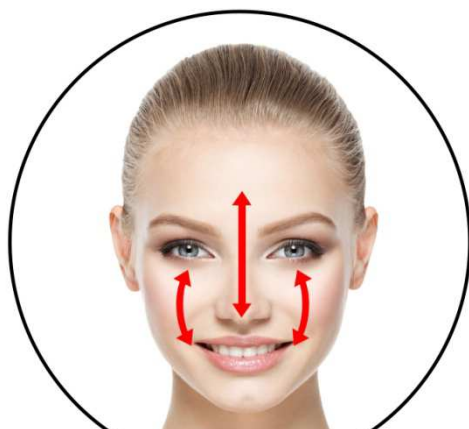

T-zóna: a homloktól az orrhegyig haladjon. és az arc, mozgás mindkét irányban



Nyak: az álltól felfelé a fülig, majd lefelé a nyakig.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Hogyan kell a kezelést megfelelően elvégezni az otthoni környezetben?

Kérjük, a kezelés megkezdése előtt nagyon figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található összes részletet. Fordítson különös figyelmet az ellenjavallatokra. Ha bizonytalan, forduljon házi orvosához. Helyezze magát kényelembe. Vegyen fel valami könnyebb, kényelmes ruhát.



Milyen érzéseket lehet érzékelni a kezelés során?

Amikor az alkalmazás fej érintkezik a bőrrel, rádiófrekvenciás hullámok áramlása áramlik át a bőrfelületen a dermisz rétegbe. Ezt a folyamatot hőnek lehet érzékelni, amely fokozatosan fokozatosan elhatárolódik. A hőérzetet nem a bőr "melegítése" okozza, hanem a rádiófrekvenciás energia mellékhatása. A rádiófrekvenciás hullámok használatának fő célja és lényege, hogy közvetlenül a bőrréteget célazzák meg egy meghatározott frekvenciával és teljesítménnyel. Az EMS-impulzusok hatása bizsergető érzésként érzékelhető. A mikroáram hatása az EMS-impulzusokhoz hasonló érzékszervi élményt nyújt. A mikroáram esetében a bőrön egyedi elektromos impulzusokat érez, amelyek fokozatosan fokozatosak. A mikroáram jobban pulzál. Az EMS inkább bizsergető érzés.

Mi az oka a felhordófej tisztításának/fertőtlenítésének?

A mikroszkopikus bőrrészecskék a kezelés után megtapadhatnak a felhordófejre. A tisztítás megakadályozza ezek bejutását a készülékbe, és biztosítja a higiénikus működést. A fokozott működési higiénia különösen fontos, ha egynél több személy használja a készüléket.

Milyen eredményekre számíthatok? Hogyan hat a rádiófrekvencia a bőrre?

A rádiófrekvenciás kezelést követően a bőrre gyakorolt hatások nagyon egyéniek, és az eredmény számos tényezőtől függ. Általában közvetlenül a kezelés után a bőr enyhén kipirosodik. A nedvesség sonogel általi behatolása vizuálisan frissebb benyomást kelthet. Azonnali helyi hőmérsékletnövekedés tapasztalható a bőrön, ahol az alkalmazási fejet stimulálták. A bőrnek azonban órákon át teret kell adni, amikor a bőr rugalmasságáért felelős kollagén és rugalmas rostok újjáalakulnak. A rádiófrekvenciás nem invazív bőrfelvarrás nem végleges eljárás. A bőrt folyamatosan stimulálni kell (átlagosan havonta 2-4 alkalommal). A rendszeres bőrkezelés befejeztével a bőr fokozatosan visszatér eredeti állapotába. Javasoljuk, hogy ugyanazon a területen végzett kezelések között legalább egy hét szünet legyen.

Mennyi ideig tart egy egyéni bőrkezelés?

Az egyéni kezelés ajánlott időtartama 10-15 perc. A teljes idő nem haladhatja meg a 20 percet. Itt az applikátor bőrrel való nettó érintkezési idejéről beszélünk.

Milyen termékeket kell alkalmazni közvetlenül a rádiófrekvenciás bőrkezelés után?

A kezelést követően a bőrt megfelelően hidratálni kell. Javasoljuk, hogy rendszeresen használjon hidratáló krémet, hogy a bőrnek elegendő nedvesség álljon rendelkezésére a regenerálódáshoz. Mindenképpen kerüljenek más lehetséges kozmetikai beavatkozások, például a gyémánt mikrodermabrázióval történő mélytisztítás, legalábbis a kezelés napján. A rádiófrekvenciás kezelés után a bőr enyhén irritált, esetlegesen bőrpírral. A bőrnek időt kell adni a regenerálódásra. A kezelés napján nem javasoljuk a szaunázás látogatását.

Megsérülhet-e a bőrfelület az applikátorfej által?

Ez bizony így van. A készülék teljesítménytartományát szándékosan úgy alakították ki, hogy a különböző bőrérzékenyséű és különböző zsírszöveti rétegekkel rendelkező felhasználók teljes spektrumát kezelni tudja. A készülék egyik fő előnye a rugalmas használat, az arcra, nyakra és dekoltázsra összpontosítva. A teljesítményadagolás beállítása lehetővé teszi a nagyon érzékeny területek kezelését is. Másrészt nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre nagyobb területeken, ahol az érzékenység szintje alacsonyabb. Ha a készülék nem rendelkezne megfelelő teljesítménytartománnyal, akkor nem lehetne az esztétikai eszközök területén a bőrfelvarrás hatékony univerzális eszközének tekinteni. Ezért a teljesítménybeállítások beállításakor fokozott óvatossággal kell eljárni.

Milyen kozmetikai termékek kombinálhatók a BeautyRelax RFLIFT PREMIUM kezelés során?

Ne használjon semmilyen kozmetikai terméket a készülék használata előtt és közben (kivéve a klasszikus kontaktzselét). A kozmetikai termékekben hozzáadott anyagok a készülék technológiájával kombinálva káros allergiás reakciót okozhatnak. A **BeautyRelax RFLIFT PREMIUM** kellően hatékony technológiákat kínál, és ezt a hatást nem kell további kozmetikai termékkel támogatni. Csak használat után tanácsos a bőrt minden nap megfelelően hidratálni.

A készülékkel a test mely részei kezelhetők?

A készüléket az arc, a nyak és esetleg a dekoltázs kezelésére tervezték.

A kezelés során a felhordófej hőmérséklete jelentősen megemelkedik. Hogyan kell eljárnom ebben az esetben?

Ha úgy dönt, hogy folytatja a bőrkezelést, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja legalább 5 percig hűlni. Ezután folytassa a készülék használatát.

Vannak ellenjavallatok? (olyan helyzetek, amikor a készülék nem használható)

A **BeautyRelax RFLIFT PREMIUM** minden bőrtípusra készült, korhatár nélkül. A készülék nem használható, ha a felhasználó súlyos bőrbetegségben szenved. Lásd az ellenjavallatok listáját a kézikönyv bevezetőjében.

Az eszköz orvostechnikai eszköznek minősül?

Az eszköz nem orvostechnikai eszköz. A masszázskészülékek kategóriájába tartozik. A készülék nem kezel bőrbetegségeket. A készülék a rádiófrekvencia, a mikroáram, az EMS-impulzusok, a fotonfény és a vibráció bevált technológiáját kínálja. Ez a kombináció hatékonyan segít javítani a fáradt és egészségtelennek tűnő bőr állapotán.

Mit tegyek, ha az akkumulátor hosszú idő után veszít a kapacitásából?

Ha az akkumulátor kapacitása idővel jelentősen csökken, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a mh@santadria.cz címen. Elküldjük Önnek az akkumulátor cseréjével kapcsolatos információkat.

Rendelkezik a készülék valamilyen tanúsítvánnyal?

A szabványos európai tanúsítás eszköze. Megfelel az ilyen típusú eszközökre vonatkozó összes szabványnak.

Hol gyártják a készüléket?

A műszert Kínában gyártatjuk a mi igényeink és specifikációink szerint. Garantáljuk a szabványos garanciát és a garanciát követő szervizelést.

Vízálló a készülék?

Nem az. A készülék egyetlen része sem arra szolgál, hogy folyóvíz alatt mossák.

Egynél több személy is használhatja a készüléket?

Elsősorban nem ajánljuk. Ha azonban családtagról van szó, és minden kezelés után betartják az applikátorfej tisztításának és fertőtlenítésének folyamatát, a másik személy is használhatja a készüléket.

AKKUMULÁTORTÖLTÉS

A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátort a teljes használathoz megfelelően fel kell tölteni.

Töltési eljárás:

1. A töltéshez csak a csomagban található adapterrel ellátott töltőkábelt használja.
2. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a készülék alján található tápcsatlakozóhoz.
3. Csatlakoztassa a kábel másik végét a 220 V-os adapterhez.

Töltés közben a készülék tetején lévő lámpa villog.

4. Ha az akkumulátor feltöltődött, mind a 4 fényjelző lámpa megszűnik villogni, és folyamatosan világít.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A kezelés befejezése után mindig gondoskodjon a felhordófej és az összes érintkező felület megtisztításáról. Ne használjon agresszív tisztítószeret. Javasoljuk a speciális fertőtlenítő spray-k használatát, amelyeket általában például az egészségügyben vagy a szépségszalonokban használnak a műszerek tisztítására. Normál sima dörzsölő alkohol is elegendő. A nedvesség SEMMILYEN esetben nem juthat közvetlenül a készülékbe. A tisztításhoz ideális egy pamutpárna vagy száraz kendő. Az eszköz újbóli használata előtt nem maradhat gélmaradvány az applikátoron. Végül mindig ellenőrizze, hogy az applikátorfej teljesen száraz-e. Soha ne használjon éles tárgyakat, amelyek károsíthatják az applikátorfej felületét. Ez károsíthatja a az applikátorfej érintkező felületeit.




NÉHÁNY MONDAT A KÖVETKEZTETÉSKÉNT

Számos kozmetikai eszköz van a piacon, amelyek "csodálatos" fiatalítást ígérnek. A készülékek különböző formájúak, színűek és árúak. Egyes eladók nagyon gyakran és szívesen kötnek egy adott terméket a kozmetikai termékeikhez, mert az ő "különleges" termékük nélkül a kozmetikai eszköz nem működne. Ebben a piaci helyzetben rendkívül örülök, hogy a BeautyRelax RFlift Premium legerősebb aspektusa a technológia önmagában. Az Ön elvárásait az RFlift Premium modell a fejlett, hatékony technológiákkal - rádiófrekvencia, mikroáram és EMS impulzusok fotonfénnyel vagy vibrációval kombinálva - teljesíti. Az egyetlen fogyóanyag a kontaktzselé (sonogel), amely nagyon kedvező árú. Így nem kell aggódnia amiatt, hogy a készülék rendszeres használata rémálommá válik a pénztárcája számára. A BeautyRelax RFlift Premium modell nem kínál több bőrkezelési szakaszt (például a bőr tisztítását vagy a kozmetikai termékek hatékony beépítését a bőrbe). Fő specialitása az érett bőr kezelése, ami kategóriájában az egyik legjobbba teszi. Mindenképpen ajánlom a készüléket mindenkinek, aki az új technológiák híve, és nem nagyon bízik a reklámokból ismert klasszikus krémek és szérumok hatékonyságában. A BeautyRelax RFlift Premium praktikus, ergonomikus formájú és könnyen kezelhető. Az összes alkatrész kivitelezése magas színvonalú. Aki aktívan szeretné elősegíteni a bőr rugalmasságának növelését, a ráncok eltüntetését és az arc kiemelkedő kontúrjainak megerősítését, annak a BeautyRelax RFlift Premium biztosan megfelel az elvárásainak.



Martin Hrbek

www.beautyrelax.cz

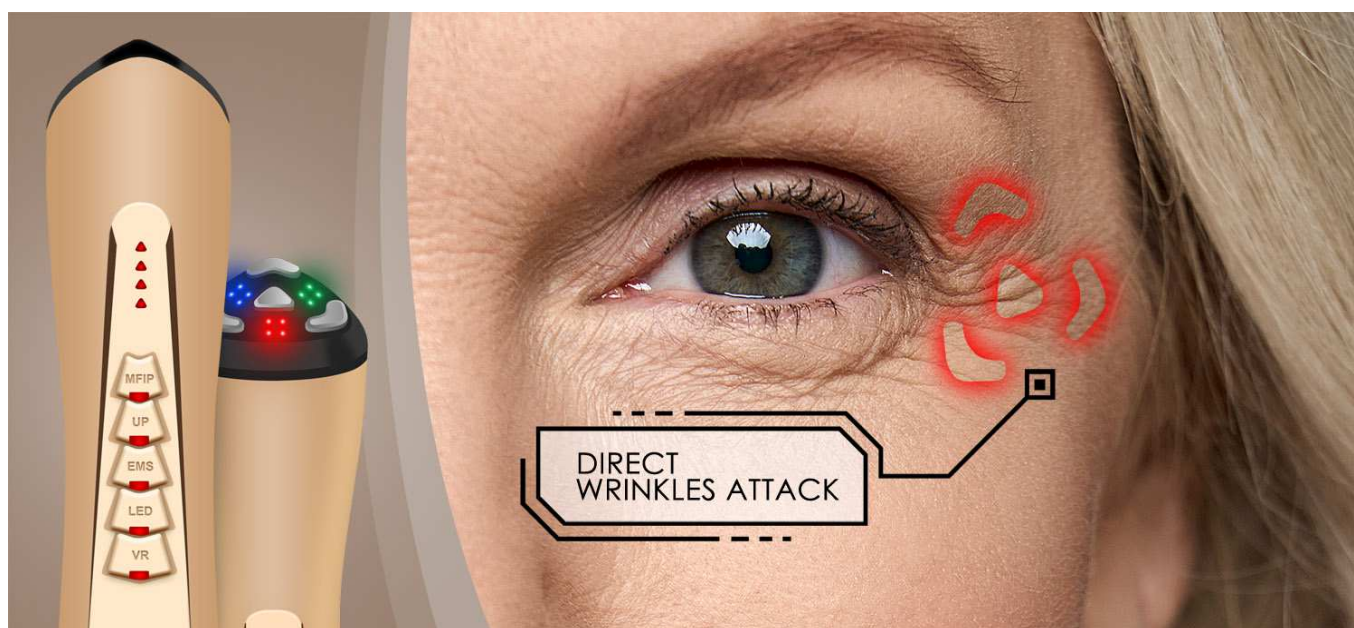

HASZNÁLT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál települési hulladékhoz adni. A megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatívaként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékártalmatlanításból adódhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg kívánja semmisíteni, kérjük, szerezze be a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől a megfelelő megsemmisítési módszerrel kapcsolatos szükséges információkat.

TANÚSÍTÁS



A termék az Európai Unió országában való használatra engedélyezett, és CE-jelöléssel van ellátva. A megfelelőségi nyilatkozat és az összes dokumentáció az importőről beszerezhető.

SZÁLLÍTÁS

SANTADRIA s.r.o. , Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk:

E-mail: mh@santadria.cz

ES MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, a vállalat képviselőjében

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, ID: 29195454

mint az Európai Unióba irányuló importőr kijelenti, hogy a következő kereskedelmi névvel
ellátott termék

RFLIFT PREMIUM kozmetikai ráncatlanító gép

BR-2530 típusnév alatt forgalmazták

EAN: **8594166119406**

a **BeautyRelax** márka termékcsoporthoz tartozó termékek

megfelel a következő európai szabványoknak:

EN 55014-1:2017+A11:2020


EN55014-2:2015

Az eszköz nem orvostechnikai eszköz. Több személy általi használat esetén különös
figyelmet kell fordítani a hasonló típusú eszközökre vonatkozó higiéniai előírásokra.

Az ezen irányelveknek való megfelelés alapján a termék CE-jelölést kapott.

A termék megfelel a 2002/95/EK RoHS-irányelvnek (RoHS) is. Minden anyag egészségre
ártalmatlan. Nem tartalmaznak nehézfémeket, például kadmiumot és más mérgező
anyagokat.

A biztonságos használatához elengedhetetlen, hogy szigorúan kövesse a csomagban
található használati utasításban foglalt utasításokat.

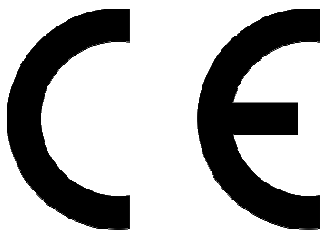

A kibocsátás helye: Brno Nap: 1.2.2022

.....
Martin Hrbek, ügyvezető igazgató