

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Arckozmetikai eszköz
BeautyRelax **BR-1490**

POREMAX HOT&COLD



TARTALOM:

FIGYELMEZTETÉS	4
FŐ ELŐNYÖK	5
ESZKÖZ SPECIFIKÁCIÓK	5
TEKNIKAI PARAMÉTEREK	5
ESZKÖZ BEMUTATÁSA	6
VÁKUUMSZÍVÓ RENDSZER	6
HŐ ÉS HIDEGTERÁPIA	7
A HŐTERÁPIA HATÁSAI	7
MELEG	8
HIDEG	8
HIDEGTERÁPIA HATÁSAI	8
A FEKETE PONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI	9
KÜLSŐ NEGATÍV HATÁSOK	10
CSOMAG TARTALMA	11
ESZKÖZ LEÍRÁS	12
HASZNÁLAT ELŐTT	13
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	13
SZAKMAI KEZELÉS 3 LÉPÉSBEN	14
INTENZÍV ÉS NAGYON BARÁTSÁGOS SZÍVÁS	15
VÁKUUMSZIVATÁS 1-2-3	16
VÁKUUMSZÍVÓ TELJESÍTMÉNY ELOSZTÁSA	17
EGYÉNI FEJEK HASZNÁLATA	18
CSERÉLHETŐ FEJEK	19
HASZNÁLAT	20
A BŐRTISZTÍTÁS ELÉRT HATÁSAI	21
AZ ARC ÉS A NYAK KEZELÉSÉNEK MÓDSZERE	22
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	23
AKKUMULÁTOR TÖLTÉS	24
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	24
HASZNÁLT ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA	25
TANÚSÍTVÁNY	25
IMPORTŐR	25
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	26

Kedves vásárló, köszönjük bizalmát termékünk megvásárlásában. Az első használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az üzemeltetési utasításban található összes részletes információt. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. A készüléket pontosan az utasításoknak megfelelően használja. Ezek a lépések hozzájárulnak az eszköz összes funkciójának maximális kihasználásához. Ebben az útmutatóban megpróbáljuk minél közelebb hozni Önt az alkalmazott technológiákhoz és az eszköz lehető legjobb kihasználásához.

Ha bármilyen kétértelműség merül fel az utasítások elolvasása során, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az e-mail címen: mh@santadria.cz

A későbbi felhasználás érdekében tartsa biztonságos helyen a használati utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

- Az első üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást, tekintse meg az összes képet, és őrizze meg őket későbbi felhasználás céljából.
- Ha a bőrét súlyos bőrbetegség érinti, ne használja a készüléket. Az első alkalomhoz forduljon háziorvosához.
- A készüléket elsősorban személyes használatra tervezték. Ne ossza meg családjával vagy barátaival. Ha az eszközt több személy használja, különös figyelmet fordítson a higiénia elveire.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült, nem működik megfelelően vagy vízbe esett.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a készülék belsejét, ha az elromlott.
- Ha az egység leesik, megsérülhet. Ebben az esetben ne használja tovább az eszközt, és forduljon a kereskedő szervizéhez.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy magas páratartalmú helyen (fürdő, zuhany, úszómedence stb.).
- A készülék nem mosható. Nem szabad vízbe vagy folyóvízbe meríteni.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Minden használat után mindig kapcsolja ki alaposan a készüléket.
- Ha az egységet nagyon hidegből nagyon meleg környezetbe helyezték át, várjon legalább 3 órát, mielőtt használná.
- A készüléket nem gyermekek vagy olyan személyek használhatják, akiknek fizikai vagy mentális állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.
- Ne helyezze és ne használja a készüléket forró hőforrásokra (radiátor, tűzhely, tűz stb.)
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A készüléket száraz helyen tárolja. Igyekezzen megvédeni a portól.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, ellentétben a jelen kezelési útmutatóban leírtakkal. Nem vállal felelősséget a biztonsági előírások be nem tartásának következményeiért.
- A forgalmazó nem felel az egyéb felhasználások által okozott egészség- vagy vagyoni károkért.

FŐ ELŐNYÖK

- Nem invazív kezelés (a készülék nem hatol be közvetlenül a bőrön).
- Kezelés kellemetlenségek nélkül.
- Nincsenek nem kívánt maradandó változások a bőr pigmentációjában.
- A kozmetikumok közvetlenül az eljárás után használhatók.

ESZKÖZ SPECIFIKÁCIÓK

- Nagyon hatékony mechanikus bőrtisztítás.
- Jobb vérkeringés a bőrön.
- A kollagén és az elasztikus rostok stimulálása.
- A bőr sima és friss benyomást kelt.
- A hő növeli a kezelés hatékonyságát azáltal, hogy megnyitja a bőr pórusait.
- A kezelés végén a hideg kellemesen megnyugtatja a bőrt.

TEKNIKAI PARAMÉTEREK


- A vákuumszívás intenzitásának 5 szintje (legfeljebb 70 kPa).
- LCD kijelző.
- Az akkumulátor állapotának és a vákuumszívás intenzitásának jelzése.
- 5 cserélhető bőrkezelő applikátor.
- Tápellátás: USB kábel (tartozék).
- Töltési feszültség: 5V, Teljesítmény: 4W.
- Az akkumulátor kapacitása: 1200mAh.
- Töltési idő: kb. 4 óra.
- Felhasználási idő: kb. 2 óra.
- Méretek: magasság 19x4x4,5 cm.
- Súly: 154g.



ESZKÖZ BEMUTATÁSA


Az iLift sorozat BeautyRelax Poremax hideg és meleg kozmetikai eszköze praktikus segítség a rendszeres bőrápoláshoz. Számos technológiát ötvöz a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. Örömmel várhatja a bőr vákuumszívással történő tisztítását, amelyet hőterápia egészít ki. Exkluzív, különböző típusú kezelések egy eszközben. LCD kijelző, 5 cserélhető applikátor, 5 fokozatú intenzitás beállítás. Egyszerűen beleszeret a magas használati értékű BeautyRelax Poremax hideg és meleg készülékbe!

VÁKUUMSZÍVÓ RENDSZER

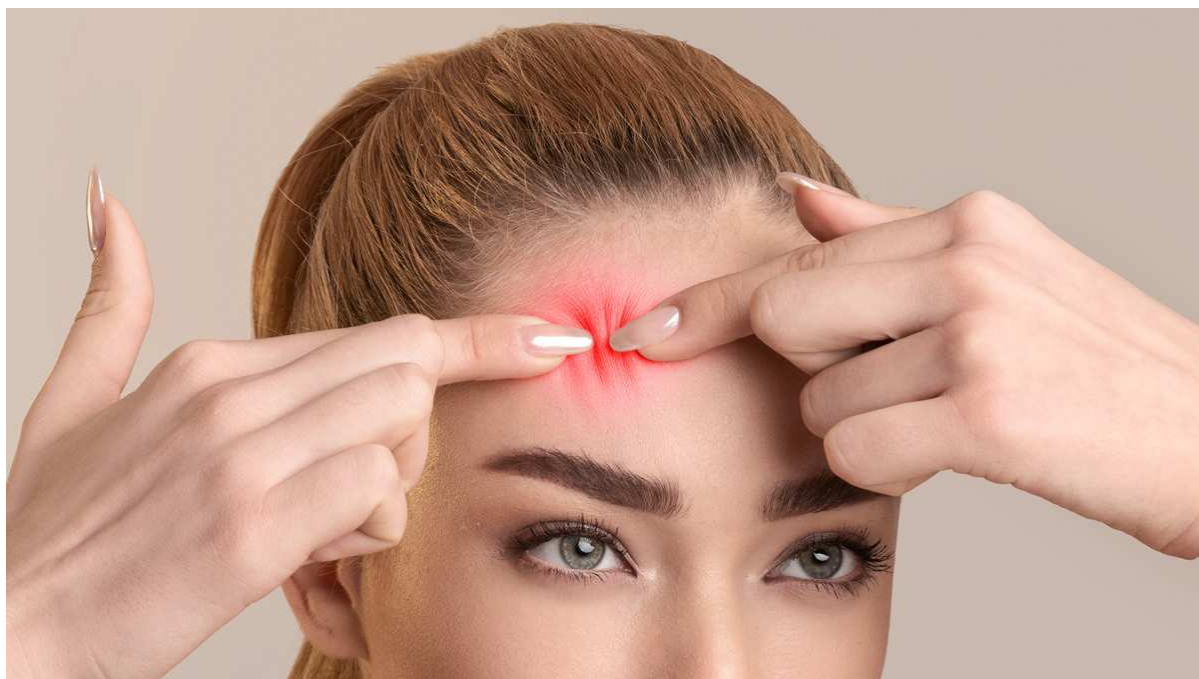

A bőrünk minden nap számos olyan tényezőnek van kitéve, amelyek negatív hatást gyakorolnak (por, szmog, baktériumok, maradék sminkrészecskék, nedvesség). A faggyú képződése szennyeződésekkel és elhalt hámsejtekkel kombinálva eltömíti a bőr pórusait, és fekete pontok vagy pattanások kialakulásában nyilvánul meg, fehér "sapkákkal". Környezet a baktériumok képződéséhez és az azt követő gyulladásához. A szép és egészséges bőr fő előfeltétele a rendszeres ápolás.

A Poremax hideg és meleg kozmetikai eszköz alaposan megtisztítja a bőrt. Mitesszerek és pattanások esetén segít eltávolítani őket. A felhordó fej elnyeli a bőrt, és az applikátor széle eltávolítja a szennyeződések, a fekete pöttyöket és a csúnya fehér sapkákat a felületről. A kellemetlen kézszorítás, amely jelentős bőrpírt és bőrirritációt okoz, a vége! A felületi pigmentfoltok és a pórusok megpuhulnak. A Poremax hideg és meleg kozmetikai eszköz rendkívül hatékony, ugyanakkor kíméletes a bőrön!

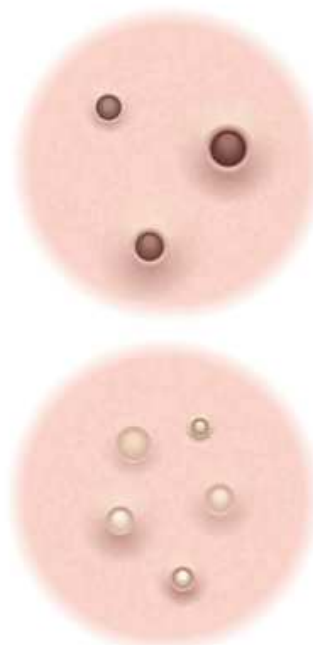

HŐ ÉS HIDEGTERÁPIA

Az iLift sorozat Poremax hideg és meleg kozmetikai készüléke speciális lapos applikátorral van felszerelve, amely képes a hőmérsékletet szükség szerint beállítani. A hőmérséklet néhány másodperc alatt megváltozik. Jelentős késés nélkül beállíthatja a fűtést vagy a hűtést. A hőterápia nagyon praktikus funkció, amelyet a kezelés elején és végén használ.

HŐTERÁPIA HATÁSAI

A hőnek vagy a hidegnek való kitettségnek specifikus hatása van. Az alap hő- vagy hidegforrás, amely a bőrre kerül. Néhány percen belül megváltozik a hőmérséklet a bőr felszínén. Ha a készülék mindkét funkcióval rendelkezik, akkor a hőtől hidegre és fordítva váltás néhány másodpercen belül megtörténik. A hőnek való kitettség általában az első lépés a bőr eltávolítása után. Csak néhány percig kezelje.) A hideg hatása a bőrre jelentősen befolyásolja az arc nyirokrendszerének működését és anyagcseréjét. A hideg hatása általában befejezi a bőr kezelését.




a szervezet természetes
méregtelenítése



póruscsökkentés



a természetes páratartalom
fenntartása

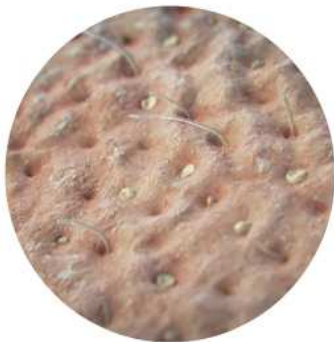

felszabadítja a bőr pórusait




segít a bőr alapos
tisztításában



segíti a vérkeringést

MELEG

A hő fő hatása a bőrre a bőr pórusainak megnyílása. Ezt a lépést a kozmetikai stúdióban alkalmazzák a bőr sminkje után. Bármilyen más eljárás is következik. A bőr pórusainak kibővítése elemi alapja a bőr mély tisztításának. Továbbá a pórusok képesek felszívni a kozmetikumokból származó tápanyagokat a bőr mélyebb részén. A kozmetikusok leggyakrabban párolt törülközőt használnak. Ön, mint egy igazi professzionális szépségápolási eszköz, a BeautyRelax.

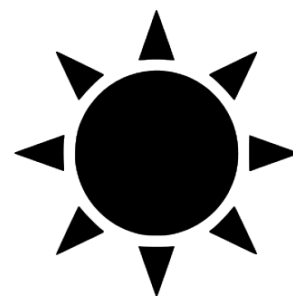

HIDEG

Ezzel szemben a hideg általában nyugtató hatással van a bőrre. Hideg törülközőt használunk otthon, ha magas a hőmérsékletünk, vagy a bőr piros és irritált. A hideg többek között összehúzza a bőr pórusait. A BeautyRelax kozmetikai eszközt különösen a külső ingerekre érzékeny, nagyon érzékeny bőrű felhasználó fogja értékelni. Ha a bőr elvörösödik, mint egy kozmetikai kezelés után, a hideg megnyugtatja a bőrt, és hozzájárul a bőr színének normalizálásához.




HIDEGTERÁPIA HATÁSAI

- a bőr megnyugtatása a kezelés végén.
- gyulladáscsökkentő hatás
- a duzzanat elnyomása
- az öngyógyító bőrfolyamatok aktiválása




A FEKETE PONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

A mitesszerek egyik fő oka a bőr pórusainak eltömődése faggyúval vagy elhalt bőrrel. Az eldugult fej fekete színe nem szennyeződés. Ez a faggyú és az elhalt hámsejtek környezeti expozíció utáni oxidáció eredménye. A vákuumszívású kozmetikai eszköz az egyik leghatékonyabb módszer a lehető legkevesebb bőrirritációt okozó mitesszerek eltávolítására.

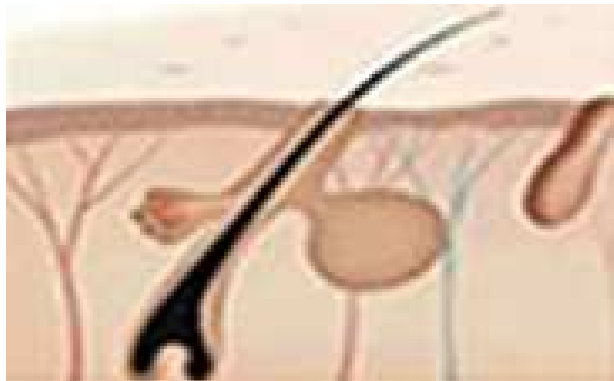


A faggyúmirigyekből származó zsír felszabadul a szőrtüszők mentén.

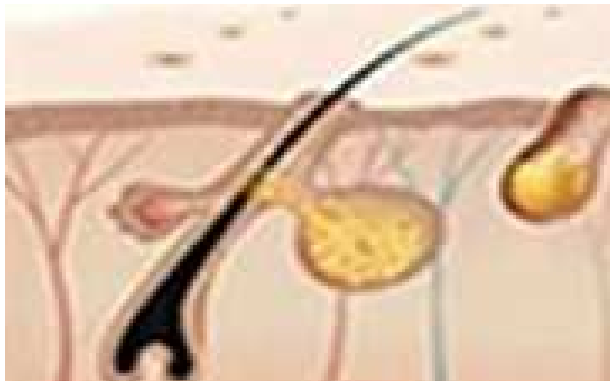

A faggyúmirigyek többféle tényezőtől függetlenül lazítják a zsírt.



A zsír kifehéredik.

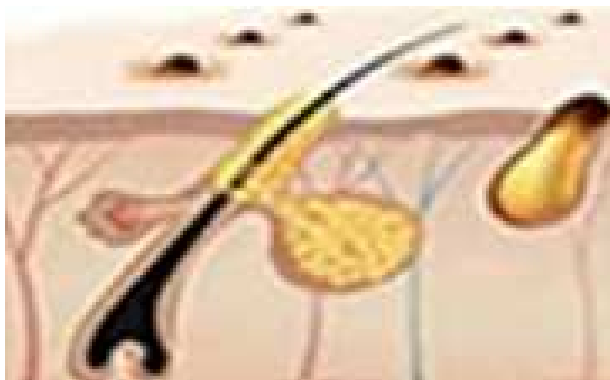

A zsír nagy mennyiségű fekete ponttal van kitéve és oxidálva a levegőben.

KÜLSŐ NEGATÍV HATÁSOK

Bőrünk számos olyan külső tényezőnek van kitéve, amelyek különböző mértékben befolyásolják bőrünk minőségét és öregedését. Nap, por, kevés alvás, rossz életmód, a bőr elégtelen rendszeres tisztítása a sminktől.



Megnagyobbodott pórusok, a mitesszerek gyakoribb előfordulása, hatástalan bőrápolás



A baktériumok fokozott előfordulása, fokozott bőrzékenység, nagyobb hajlam a pattanásokra



Fokozott faggyútermelés, zsíros bőr, amelyet nagyon nehéz megtisztítani




A maradékból szennyeződéssel eltömődtek a pórusok csökkentett bőrtisztító hatású smink

CSOMAG TARTALMA



ESZKÖZ LEÍRÁS

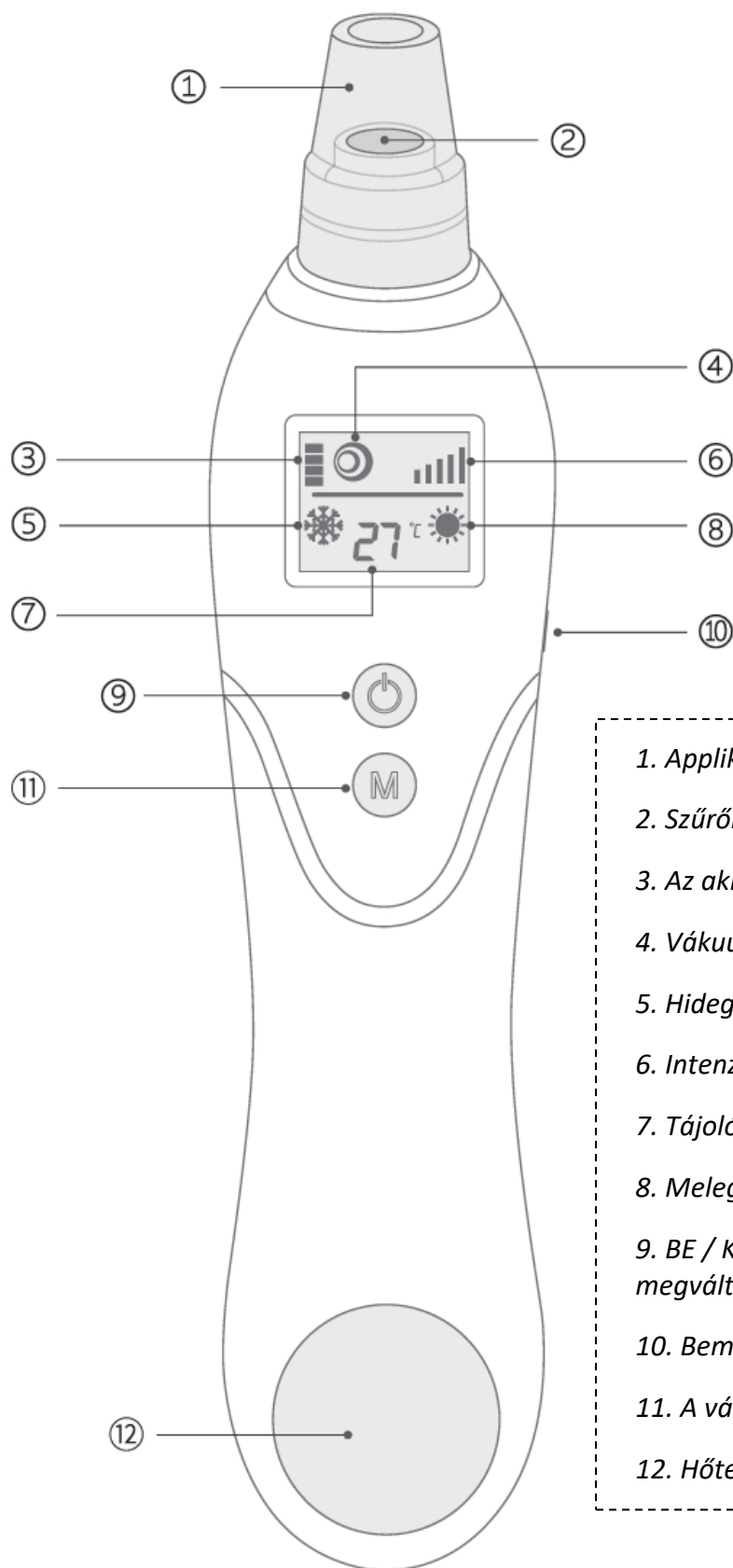

1. Applikátor fej
2. Szűrőbetét
3. Az akkumulátor állapotjelzője
4. Vákuumszívó mód
5. Hideg mód
6. Intenzitás szint
7. Tájolós hőmérséklet kijelzés
8. Meleg mód
9. BE / KI gomb a funkció megváltoztatásához
10. Bemenet az USB-kábeles töltéshez
11. A vákuumszívás intenzitása
12. Hőterápiás applikátor

HASZNÁLAT ELŐTT

A készüléket maga a bőr kezelése előtt zsírtalanítsa a bőr és a smink. Várjon, amíg a bőr teljesen megszárad. Használat előtt nem lehet nedvességnyom a bőrön. A készülék első használata előtt próbálja ki annak alkalmazását, pl. Az alkaron. Várjon körülbelül 1 órát, amíg a bőr negatívan reagál, ha vákuumszívást alkalmaz.


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ne használja a készüléket erősen heges bőrre.
- Ne használja a készüléket, ha ekcéma vagy más bőrbetegségben szenved.
- Ha érzékeny a bőre, akkor óvatosan használja a készüléket.
- Ne gyakoroljon túlzott erőt a bőrre.
- A kezelés után a bőr enyhén vörös lehet. Ez egy átmeneti hatás, amelynek néhány tíz percen belül el kell tűnnie.
- A kezelés után ajánlott tápláló maszkot, krémet vagy éjszakai krémet használni. Feltétlenül használjon fényvédőt, mielőtt kimenne (erős napfény esetén).
- Arckezelés után szinte azonnal sminkelhet, miután szükség szerint megnyugtatta a bőrt.
- Az alkalmazás fejének felszerelése előtt feltétlenül helyezze be a szűrőbetéteket a szívónyílásba. Ellenkező esetben a készülék megsérül, ha beszennyeződik a kosz.



SZAKMAI KEZELÉS 3 LÉPÉSBEN

A készülék használata sokkal egyszerűbb, mint azt elképzeli. A készülék multifunkcionális. Ugyanaz, mint egyszerre 3 különböző eszköz. A kezelés nem fog túl sok időt igénybe venni. Ezért könnyű megszokni azt a rutinkezelést, amely az egészséges és szép bőr fenntartásához szükséges. 3 különböző típusú eszköz egyben, 3 különböző típusú bőrkezelés, nagyfokú hatással!

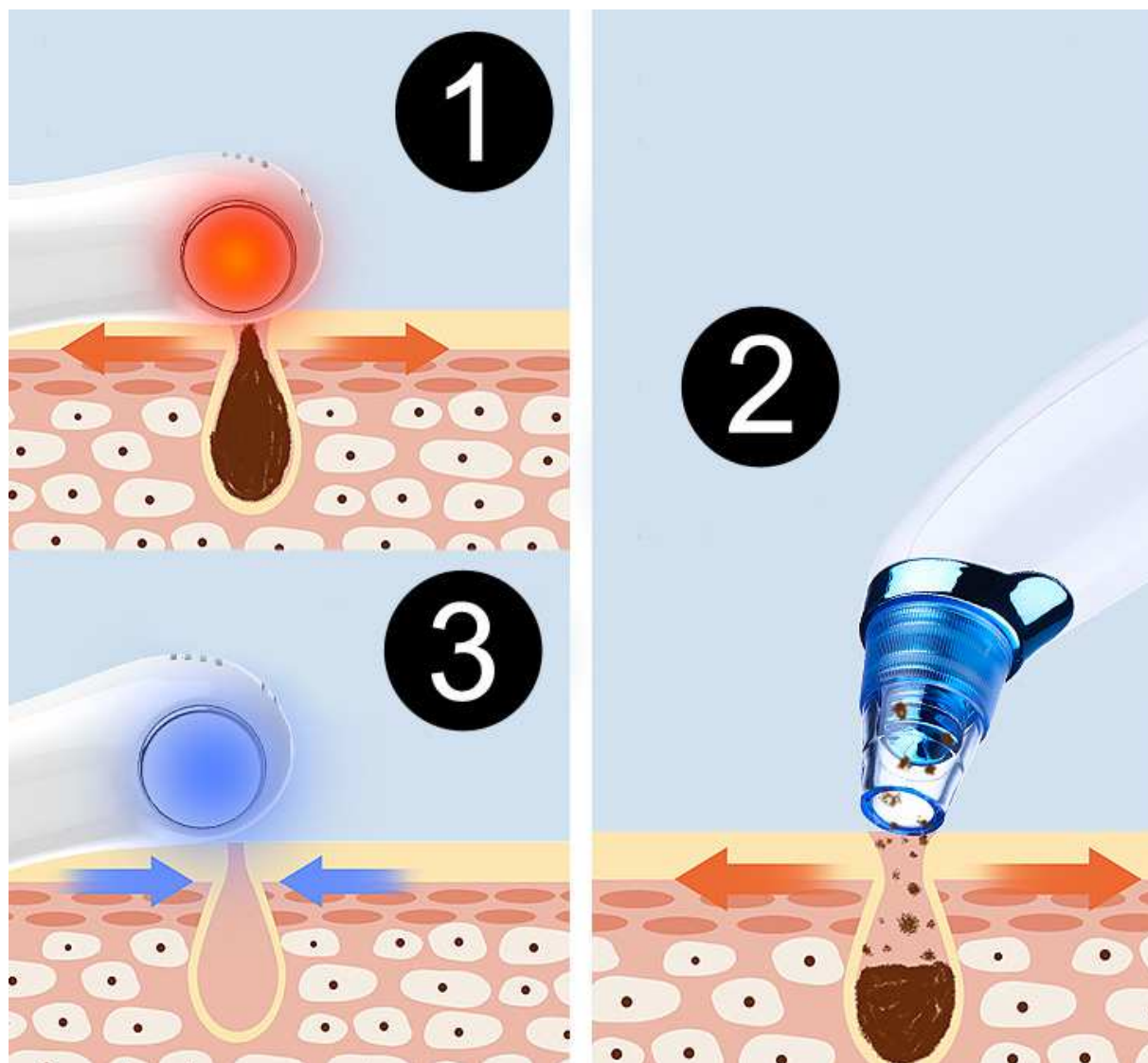


1.A bőrpórusok megnyitása az előfeltétele az igazán jó bőrtisztításnak. Az applikátor segítségével könnyen felmelegítheti bőrét. Javul a vérkeringés az arckezelés helyi területein.

2.A vákuumszívó beállítási teljesítményének változékonysága porszívóként hat a bőrre. Minden mikroszkopikus szennyeződést, sminkmaradványt, elhalt bőrmaradványt teljesen eltávolítunk.

3.A bőr vörös és enyhén irritált a bőr mechanikai tisztítása után. Beállítja a hideg üzemmódot. Az applikátor segítségével szépen lehűti és megnyugtatja a bőrt. A bőr pórusai normális állapotba kerülnek.

INTENZÍV ÉS NAGYON BARÁTSÁGOS SZÍVÁS

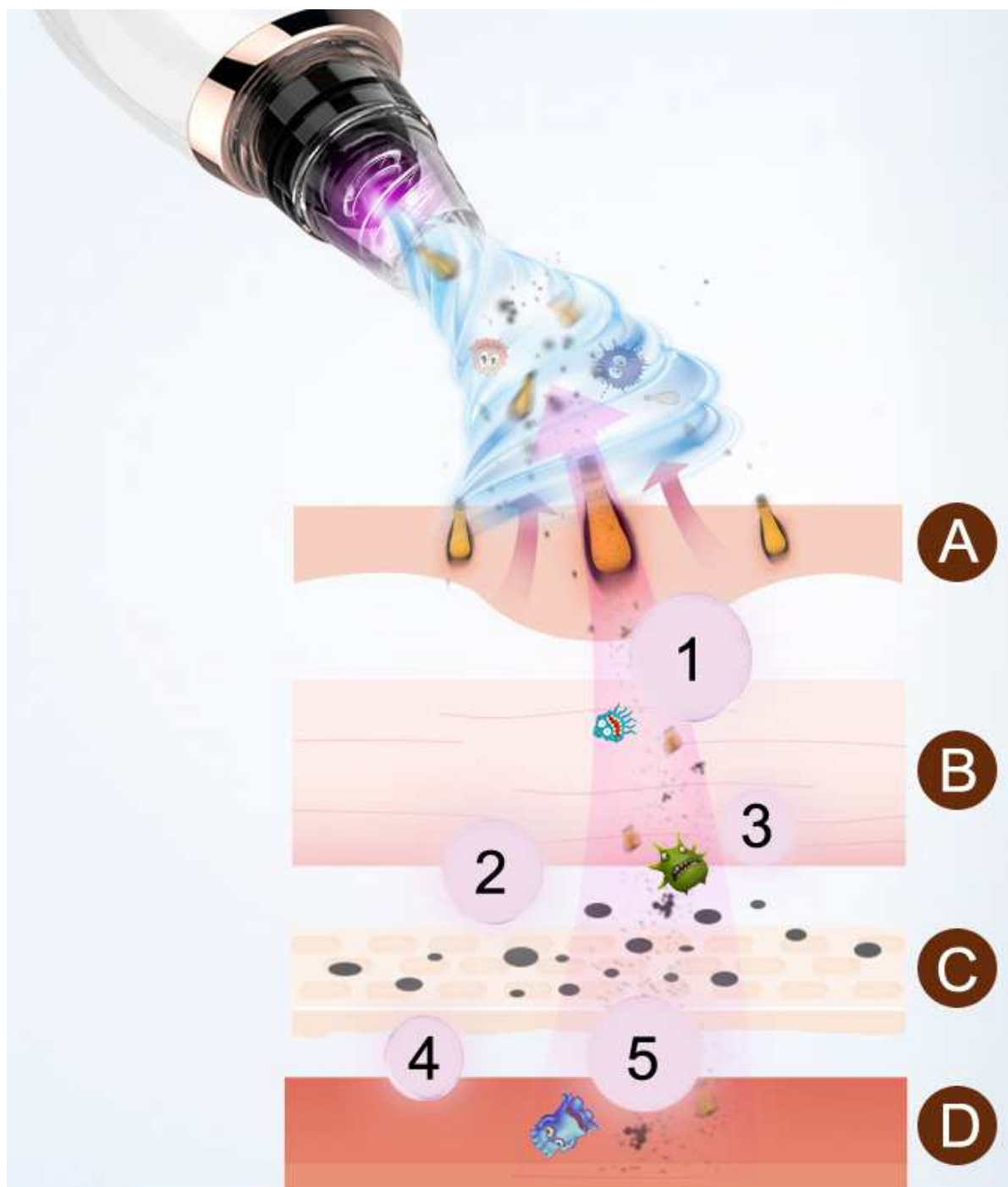

(1)fekete pontok

(2)elhalt bőrmaradványok

(3)sminkmaradványok

(4)zsír

(5)baktérium


(A)bőrfelület

(B)alsó bőr réteg

(C)alapréteg

(D)dermis réteg

VÁKUUMSZIVATÁS 1-2-3

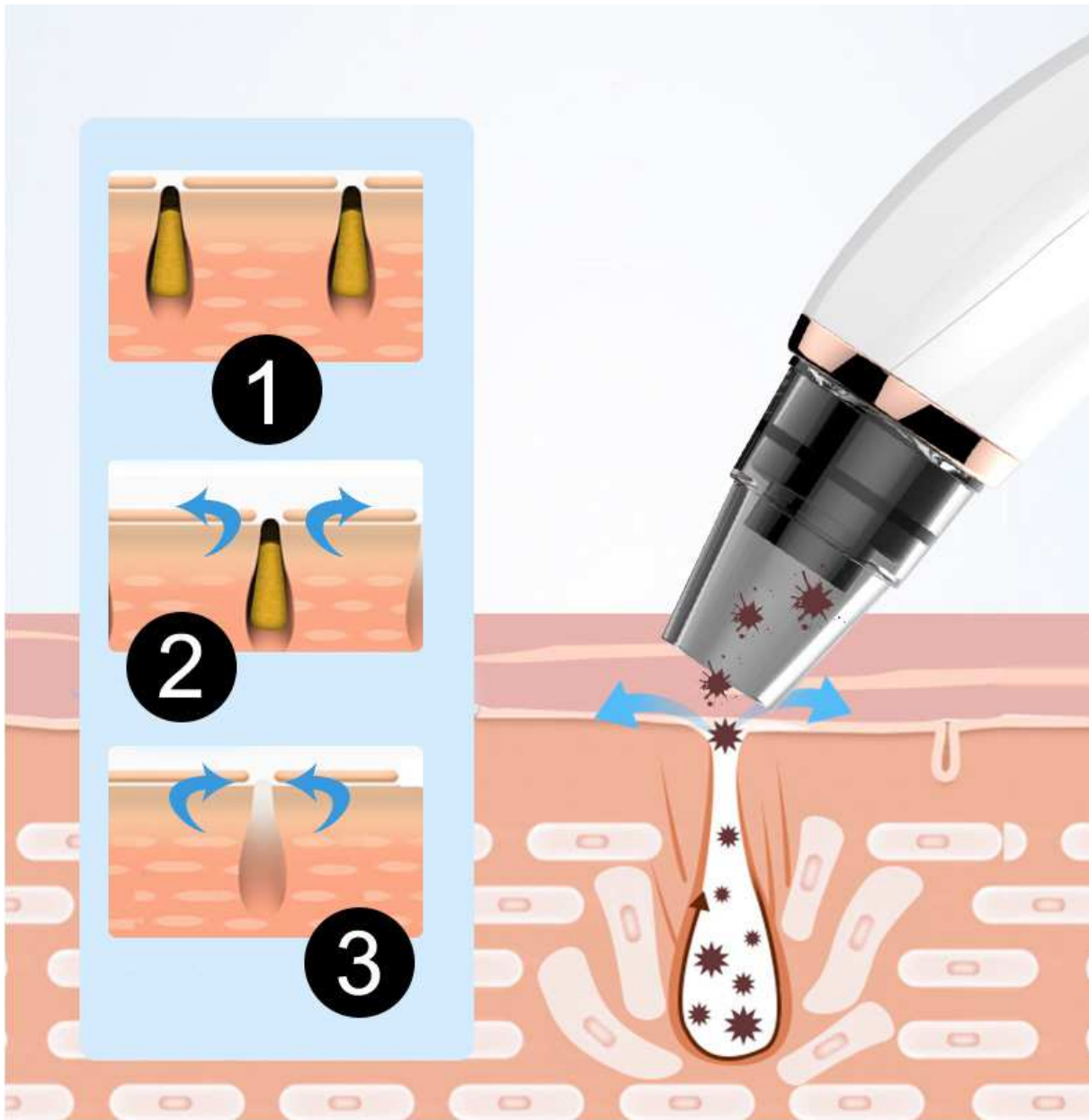

1. NYITÁS:pórusnyílások, fekete pontok.

2. SZÍVÁS:mitesszerek és pattanásokvákuumolása.

3. ZSUGORODÁS:összehúzza a pórusokat és megnyugtatja a bőrt.

VÁKUUMSZÍVÓ TELJESÍTMÉNY ELOSZTÁSA

A vákuumszívó teljesítményt egyedileg állíthatja be az Ön igényeinek megfelelően. Ha nagyon érzékeny a bőr, és a szennyezés nem jelentős, használjon alacsonyabb energiát. Ha a bőr ellenálló és erősen szennyezett, vegye igénybe a nagyobb teljesítmény előnyeit. Rendszeres használatával nagyon gyorsan megtanulja az áramellátási beállításokat. Mindig próbáljon megfelelő teljesítmény-kompromisszumot választani, hogy a kezelés hatékony, de kényelmes legyen az Ön számára. Számítson arra, hogy a bőr nagyobb teljesítményen jobban irritálódik és kipirosodik. Így több időre lesz szüksége a felépüléshez.




- (1) 40KPA - alkalmas nagyon érzékeny bőrre
- (2) 50KPA - normál bőrre alkalmas
- (3) 60KPA - zsíros bőrre alkalmas
- (4) 65KPA - kombinált bőrre alkalmas
- (5) 70KPA - nagyon ellenálló és piszkos bőrre alkalmas

EGYÉNI FEJEK HASZNÁLATA

Mindannyian más arcmérettel, formával és más érzékeny bőrrel rendelkezünk. A különbségek a bőr jelenlegi állapotában is megmutatkoznak. Mindannyian eredeti. A csomag 5 különböző applikátort tartalmaz, hogy a kozmetikai eszköz használata minél sokoldalúbb legyen. Az egyes felhordókra vonatkozó utasítások csak általánosak. A gyakorlatban kipróbálhatja magának, hogy az applikátorok melyik kombinációja a legmegfelelőbb az Ön számára. Előfordulhat, hogy hosszú távon egyáltalán nem fog használni valamennyit.



A körkörös applikátort használja a bőr kíméletes mechanikai tisztításához. Alaposan eltávolítja a bőr minden szennyeződését. Más applikátorok különböző átmérőjű furattal vannak lezárva. Minél kisebb a lyuk, annál kisebb a vákuum. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kisebb nyílás nagyobb vákuumtolóerőt koncentrálna egy kisebb területre. A vákuumszívó teljesítményt nemcsak a készüléken található gombbal állíthatja be, hanem az applikátor megfelelő megválasztásával is. Különböző furatátmérőjű applikátorokkal távolítsa el a mitesszereket, támogassa a helyi arc vérkeringését, vagy masszírozza a finom arcráncokat.

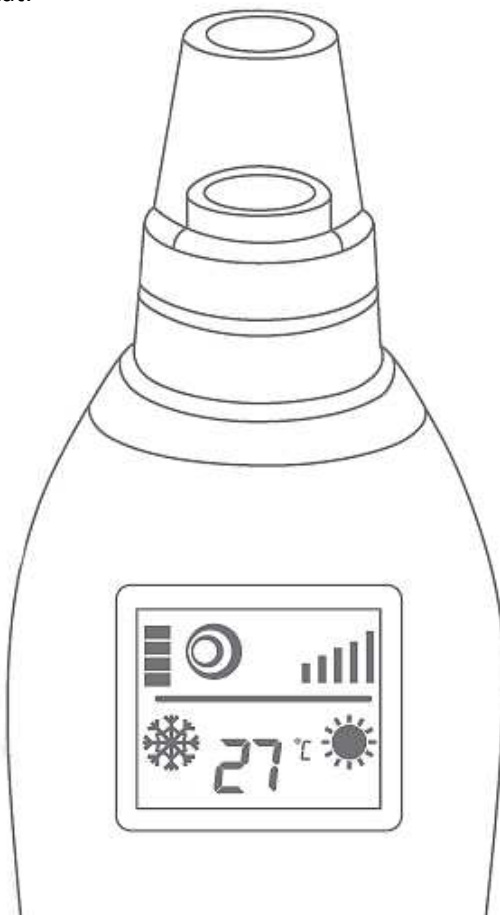

CSERÉLHETŐ FEJEK



Kisebb átmérőjű kerek csúcsú fej

Nagyon kicsi kezelési területekre tervezték, nagyobb ráncok számára. Ideális az érzékeny bőr vagy az arc részeinek mitesszerrel történő mélytisztítására.



Kerek felületű fej a bőr tisztítására

Tisztítás az elhalt hámsejtektől és maradványoktól. Kivéve a nagyon vékony bőrű területeket (pl. Halánték), az egész arcra lehet használni.



Kerek csúcs alapátmérőjű fej

Az arc T-zónájának kezelésére tervezték. Zsíros bőr esetén. Emelő hatás és hatékony masszázs az intenzív vérkeringésért.



Közepes átmérőjű kerek csúcsú felhordó

Optimális az ajkak, az orr és különösen az orr redők számára. Használható a bőr tisztítására. Nagyszerű a finom arcráncok kiküszöbölésére.




Fej nagy átmérőjű kerek hegygel

Homlokra vagy orrra alkalmas. Ideális fekete pontok rajzolásához. Használhatja arc- vagy hasításkezelésekre.

HASZNÁLAT

1. Kapcsolja be a készüléket az ON / OFF **(9)** gomb legalább 3 másodpercig tartó nyomva tartásával. A kijelző világítani kezd. A kijelzőn az alapvető információk láthatóak. Az ON / OFF gomb **(9)** újbóli megnyomásával válthat az egyes bőrkezelési módok (vákuum szívás, hideg, hő) között. Egy adott üzemmód aktiválását a megfelelő ikon **(4)** vákuumszívás, **(5)** hideghatás, **(8)** hőhatás jelzi. A hőmérséklet kijelzés nagyon tájékoztató jellegű. A felhordás előtt mindig kézzel ellenőrizze a bőrfelhordó hőmérsékletét.
2. A megfelelő applikátor felszerelése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőbetétet behelyezte a szívóterületbe. Csatlakoztassa a kiválasztott applikátort a bőr szívási módjához vákuumszívással. A légáram átfolyik a tamponon, és minden szennyeződés csapdába esik. Ennek elmulasztása szennyeződés elszívásához és az egység károsodásához vezethet.
3. Az M gomb **(11)** segítségével állítsa be a vákuum szívóerőt (1,2,3,4,5 szint). Hő (fűtés) üzemmódban beállíthatja a hőmérsékleti szintet (1,2,3,4,5 szint).
4. A készülék 9 perc után automatikusan kikapcsol.
5. A készüléket bármikor kikapcsolhatja az ON / OFF gomb hosszan tartó megnyomásával **(9)**.

A BŐRTISZTÍTÁS ELÉRT HATÁSAI

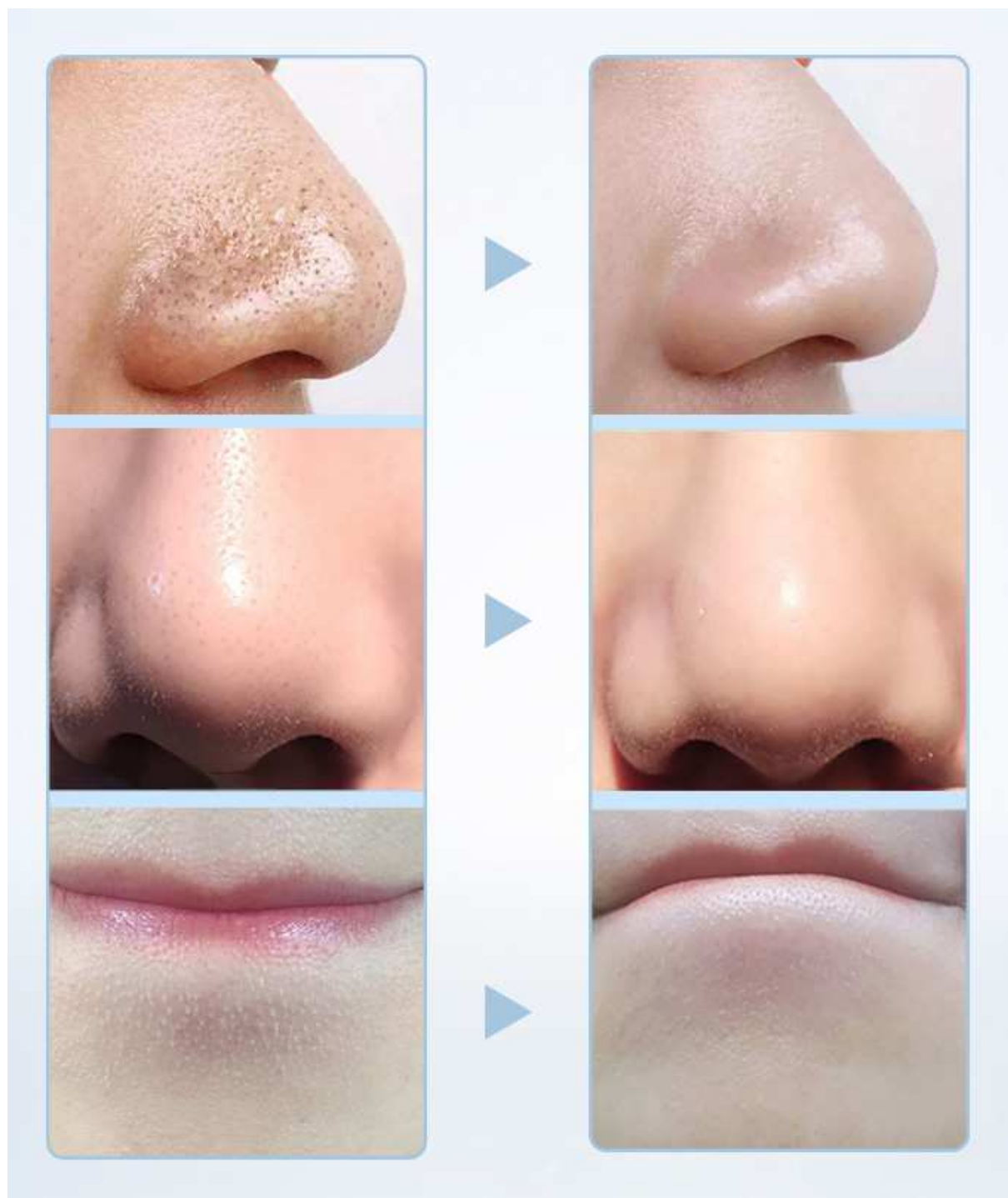

AZ ARC ÉS A NYAK KEZELÉSÉNEK MÓDSZERE



HOMLOK: távolodjon el a központtól széle felé nézve fokozatosan fedje le az egészet




ORR: mozogjon az orr körüli homloktól az arcig, fentről lefelé



ARC: mozgassa az arcát abba az irányba alulról felfelé



ÁLL: Az áll hegyétől mozogjon az arc kontúrjai mentén, alulról felfelé

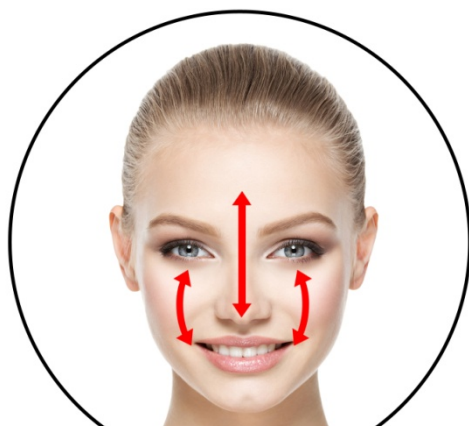

T ZÓNA: mozogjon a homlokától az orr és az arc hegyéig, mindkét irányban mozogjon



NYAK: Az állról a fül felé, majd a nyakig mozogjon

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Szükséges-e minden használatkor szűrőbetétet elhelyezni?

A pamut törlő megteremti a szükséges akadályt a szennyeződés és a készülék elektronikája között. Ha nem használja a tampont, szennyeződés kerülhet a készülékbe, és károsíthatja azt. Ha cserealkatrészeket vásárol, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel / forgalmazóval. Ha a készüléket egy személy használja, akkor többször is használható. Ha az eszközt több személy használja, minden bőrkezelés után ki kell cserélni a szűrőbetétet.

Mekkora az optimális hossza egy bőrkezelésnek?

A bőr tisztításához az optimális hosszaknak 15-30 perc között kell lennie. Attól függ, mennyire gondosan figyel az arc minden részére, az állra vagy a dekoltázsra. Kezdje rövidebb kezelési idővel, és fokozatosan hosszabbítsa meg, ahogy bőre reagál a készülékre. Nem mindig minél hosszabb, annál jobb. Ha érzékenyebb a bőre, akkor rövidebb kezelési idővel kezdje. A készülék legközelebbi használatkor fokozatosan növelheti a kezelés időtartamát.

Következetes korlátozás-e a bőrkezelés?

A bőr tisztítása után a bőr enyhén pirosodhat. Ez teljesen természetes hatás. Az arc vérkeringése és nyirokrendszere támogatott. A színnek tízperces sorrendben kell alábbhagynia. A bőr normalizálódik.

Fájdalmas a készülék használata?

Bár a tisztítás az elhalt bőr felső rétegének elszívásának elvén alapszik, nem fog érezni kellemetlen érzéseket. A vákuumszívásnak köszönhetően a bőr tisztítását kellemes pihentető masszázsként fogja fel. Ha nagyon érzékeny a bőre, állítson be alacsonyabb vákuumszívó teljesítményt. Érzelmileg állítsa be teljesítményét aszerint, hogy a bőre hogyan reagál.

Miért nevezik ezt a bőrkezelést néha fiatalításnak?

A fiatalítás megkezdődik az új, egészséges és rugalmas, külső hatásoknak ellenálló bőrsejtek növekedésével. Ez helyreállítja a bőr biológiai idejét és lelassítja további öregedését.

Alkalmas a készülék a bőrömre?

A tisztítás minden bőrtípusra alkalmas. A korlátozás csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a bőrt jelentős bőrbetegség érinti. Különösen ügyelni kell azokra az emberekre, akiknek nagyon érzékeny a vékony bőrük. A bőr megkönnyebbülése szintén fontos szerepet játszik. Ha nagyszámú heg vagy nem szabványos szabálytalanság (szemölcs, bőrnövekedés) van a bőrén, ez bonyolíthatja a kezelést. Javasoljuk, hogy ezeket a helyeket applikátorral kerülje.

Van-e egyáltalán valódi értelme a hőnek / hidegnek?

Határozottan igen. Nem véletlen, hogy a hőterápiát mechanikus bőrtisztítóval kombinálják. Az esztétikai tanulmányokban szerzett több éves tapasztalat arra készítette a mérnököket, hogy olyan készüléket fejlesszenek ki, amely a hő és a hideg gyors átadását kínálná. A meleg bőr sokkal jobban tisztít. Bár a bőr mechanikai tisztítása gyengéd, enyhe irritáció és természetes felmelegedés tapasztalható. A hideg felhordó fej kellemesen hűti a bőrt és kényelmesen visszahozza. A közelmúltban a kozmetikai eszközök hőterápiájának funkciója nagyon népszerű.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Csak a mellékelt töltőkábelt használja a töltéshez. Ha az akkumulátor állapota egyetlen sávot jelez, töltse fel az akkumulátort.

Vigyázat: Ne csatlakoztassa a töltőkábelt 220 V-os váltakozó áramú adapterhez. Ez károsíthatja az akkumulátort. Csak a számítógép vagy a laptop USB-portját használja áramforrásként.

Töltési eljárás:

1. Csak a mellékelt töltőkábelt használja a töltéshez.
2. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a készülék tápellátásához.
Csatlakoztassa a másik végét egy számítógép vagy laptop USB-portjához.
3. Az akkumulátor ikon töltés közben villog.
4. Ha az akkumulátor töltődik, az akkumulátor ikon villogása megszűnik.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt válassza le az applikátort a készülékről. Maga az applikátor is langyos vízfolyással mosható. Az applikátor szűk tereinek tisztításához ideális egy pamut törlővel tisztítani a füleket. Ne használjon agresszív tisztítószeret. Javasoljuk speciális fertőtlenítő spray-k használatát, amelyeket általában használnak például egészségügyi vagy kozmetikai szalonokban az eszközök tisztításához. A klasszikus tiszta alkohol is elegendő lesz. A tisztításhoz pamut törlő vagy száraz ruha ideális. Végül mindig ellenőrizze, hogy az adagolófej teljesen száraz-e. Soha ne használjon olyan éles tárgyakat, amelyek károsíthatják az applikátorokat vagy a készüléket.

HASZNÁLT ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a szokásos kommunális hulladékok közé adni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban egyenértékű új termék vásárlásakor visszaküldheti termékeit a helyi kiskereskedőhöz. A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti az értékes természeti erőforrások megőrzését és megelőzi a környezeti és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat, amelyek a hulladék nem megfelelő ártalmatlanításának következményei lehetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ez a szimbólum érvényes az Európai Unióban. A termék ártalmatlanításához kérje a megfelelő ártalmatlanítási információkat a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől.



Ez a termék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről és az elektromos biztonságról szóló uniós irányelvek követelményeinek.

IMPORTŐR

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
vállalati azonosító: 29195454 | VAT number: CZ29195454
kapcsolattartó e-mail: mh@santadria.cz

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alul aláírva, a cég képviseletében

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

ezennel az EU-ban importörként kijelenti, hogy az alábbi kereskedelmi névvel ellátott termék az alábbiakban szerepel

Cosmetic face device

modellnéven indult: **POREMAX HOT&COLDBR-1490**

EAN: **8594166116917**

a **BeautyRelax** termékcsoporthoz tartozó BeautyRelax

megfelel a következő európai szabványoknak:

EN55014-1:2017

EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

EN55014-2:2015

EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014

EN61000-4-6:2014, EN61000-4-11:2004

A részleteket a sz. LST180268006E

Ezen irányelveknek való megfelelés alapján a terméket CE-jelöléssel látták el.

A termék megfelel a 2002/95 / EK (RoHS) irányelvnek is. Minden anyag nem káros az egészségre. Nem tartalmaznak nehézfémeket, például kadmiumot és más mérgező anyagokat.

A biztonságos használat érdekében szigorúan be kell tartani a csomagban található üzemeltetési utasításban megadott utasításokat.



Kiállítva: Brno ekkor: 2020.6.15

Martin Hrbek, igazgató