

CURAPROX

HYDROSONICKÝ KARTÁČEK PRO

Návod k použití a rady



HYDROSONICKÝ KARTÁČEK PRO

Blahopřejeme Vám

ke koupi hydrosonického zubního kartáčku pro
od značky CURAPROX.

CURAPROX je značkou dentálního zdraví,
vlastněnou společností Curaden, AG, která
sídlí v Kriensu, ve Švýcarsku. Od roku 1972
vyvíjí CURAPROX v úzké spolupráci
s dentálními odborníky na vývoj, výuku
a praxi šetrné a účinné pomůcky pro ústní hygienu.

Hydrosonický kartáček pro

Pro profesionální čištění zubů.

Zvláště vhodný pro čištění zubů během
ortodontické léčby a po jejím skončení.

Varování

Pokud byl nedávno proveden na vašich zubech nebo dásních nějaký chirurgický zákrok, měli byste konzultovat použití hydrosonického kartáčku se svým zubním lékařem. Poradte se také se zubním lékařem, pokud Vám po použití přístroje nadměrně krvácejí dásně, nebo pokud krvácení dásní trvá déle. Uživatelé s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi by měli přístroj používat pouze tehdy, pokud je možné zajistit přiměřený dohled, aby bylo zajištěné správné používání přístroje. Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály. Hydrosonický kartáček pro odpovídá bezpečnostním standardům pro elektromagnetické přístroje. Pokud budete mít, jako nositel implantátu nebo kardiostimulátoru, dotazy k použití přístroje, spojte se se svým lékařem nebo výrobcem implantátu nebo kardiostimulátoru.

Bezpečnostní pokyny

Tento sonický kartáček smí být dobíjen pouze přiloženou nabíječkou. Ověřte prosím, před uvedením přístroje do provozu, zda údaje na kartáčku odpovídají regionálnímu síťovému napětí. Poškozený

přívodní kabel nebo nabíječka nesmí být nadále používány nebo vámi opravovány. Síťový kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn celý přístroj. Veškeré případné opravy svěťte svému odbornému prodejci nebo našemu zákaznickému servisu. Nabíječku chraňte před vodou a ne-
namáchejte ji do vody ani do jiných tekutin. Čištění nabíječky: nejprve odpojte od sítě, potom vyčistěte a teprve když je zcela suchá, opět připojte k síti.

Ekologická likvidace

Nevhazujte vysloužilý přístroj do směsného domácího odpadu. K odborné recyklaci jej odnesete do sběrný. Tímto způsobem pomáháte šetřit životní prostředí. Vestavěná baterie obsahuje látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Použitý kartáček proto dejte do sběrný.



Správná likvidace tohoto produktu

V rámci Evropské unie znamená tento symbol, že přístroj nelze likvidovat spolu se směsným domácím odpadem. Staré přístroje obsahují hodnotné materiály, které by měly být recyklovány.

Nekontrolovaná likvidace odpadů poškozuje životní prostředí i lidské zdraví. Prosím, likvidujte proto staré přístroje ve sběrných místech. Tímto způsobem se využije recyklovatelný materiál obsažený v přístroji.

Technické údaje síťové nabíječky USB

Vstup: 100-240 V, 50/60Hz, 0,2A max

Výstup: 5V DC, 600mA

Technické údaje nabíjecí základny s kabelem USB

Vstup: 5V DC, 600mA

Jednodílná základna, gumové nožičky

Technické údaje přístroje

- Baterie: Li-ion (3.7V 700MAH).
- Optimální čas nabíjení baterie: deset hodin.
- Provozní doba nabité baterie: cca 60 minut, což odpovídá patnácti dnům čištění zubů, při čištění čtyři minuty denně.
- Kmitočet: 22'000, 32'000 až 42'000; u posledních dvou lze zvolit tři programy čištění.
- Časovač na jednu čtvrtinu chrupu: 30 sekund, časovač na dobu čištění: dvě minuty.
- Automatické vypnutí: po čtyřech minutách.
- Příslušenství: 1x hlavice kartáčku „sensitive“
1x hlavice kartáčku „power“
1x hlavice kartáčku „single“
1x nabíječka s kabelem USB
1x síťová vidlice USB
1x cestovní pouzdro
1x návod k použití

Shoda



Poruchy


Porucha	Možná příčina	Řešení
• Přístroj nefunguje	• Baterie není nabitá • Přístroj není zapnutý	• Přístroj správně umístit do nabíječky • Stiskněte knoflík zapnuto/vypnuto
• Výkon slábne	• Přístroj není dostatečně nabitý • Hlavice zašpiněná nebo opotřebovaná	• Přístroj zcela nabít • Hlavici vyčistit nebo vyměnit
• Při použití kartáčku cítíte lehké brnění	• Pokud používáte kartáček poprvé, je to normální pocit	• Tento pocit po dalším používání kartáčku časem zmizí

HYDROSONICKÝ KARTÁČEK PRO

Základní informace	8
Stav nabití	9
Sedm programů čištění	10
Manipulace a spuštění	11
Čištění zubů s rovnátky: návod	12
Čištění zubů po sejmutí rovnátek: návod	13
Čištění dásňového žlábků: návod	17
Jednosvazková hlavice: další návody	18
Mechanicky a hydrodynamicky	20
Hlavice smart pro dokonalou péči	21
Příobjednání: hlavice kartáčků	24

Obsah balení

- 1x hydrosonický kartáček pro
- 1x hlavice kartáčku „sensitive“
- 1x hlavice kartáčku „power“
- 1x hlavice kartáčku „single“
- 1x nabíječka s kabelem USB
- 1x síťová vidlice USB
- 1x cestovní pouzdro
- 1x návod k použití

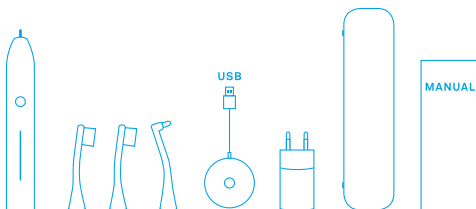


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zvolte si svou hlavici kartáčku

- „sensitive“ a „power“ pro normální čištění zubů
- „single“ pro kontaktní místa u ortodontických aparátů, jako jsou fixní rovnátka nebo retainery; stejně jako pro dokonalou péči o dásňový žlábek.

Hlavice kartáčku je možné jednoduše nasadit i sundat. Pozor: při výměně nenaklánět.

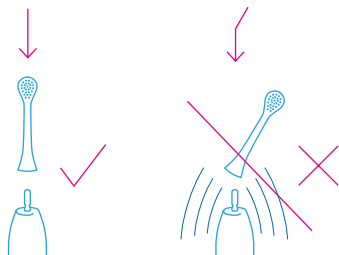

**Zapněte a vypněte
krátkým stisknutím
tlačítka**

**Krátce stisknout
zapnuto/vypnuto**



Volba čistícího programu


Knoflík stiskněte déle a pustte, když se objeví žádaný program čištění. Po zapnutí se spustí hydrosonický kartáček pro v programu, který byl zvolený naposledy. Pohyb vláken se snižuje ihned a automaticky při přitlačení kartáčku.

**Dlouhé stisknutí:
volba programu
čištění**



ÚROVEŇ NABÍTÍ: VŽDY PLNÁ SÍLA


- Hydrosonický kartáček pro je při expedici nabitý na 75 %. Můžete ho ihned používat.
- Úroveň nabití uvidíte, jakmile kartáček vyjmete z nabíjecí základny, nebo když ho vypnete.
- Pokud svítí všech sedm světel LED, je baterie plně nabitá. Čím více tyto LED svítí, tím více je baterie nabitá.
- Pokud svítí nejspodnější LED červeně místo modře, je baterie nabitá na méně než 20%.
- Dejte nabíjet hydrosonický kartáček pro do nabíjecí základny, která je připojena k síti: spojte přípojku nabíjecí základny USB se síťovou vidlicí USB a tuto zapojte do sítě. Můžete nabíjet také přes přípojku USB vašeho laptopu nebo počítače.
- Plně nabitá baterie vydrží 60 minut, to jsou asi dva týdny čištění zubů, při čištění čtyři minuty denně.
- Optimální čas nabíjení baterie: deset hodin
- Mimořádně dlouhá životnost. Přístroj nabíjte vždy, když stav baterie klesne pod 20% (LED svítí červeně).
- Vždy plná síla. Úroveň čištění je nezávislá na stavu baterie. Hydrosonický kartáček pro čistí dobře při nízkém nabití baterie, stejně jako při plně nabité baterii.

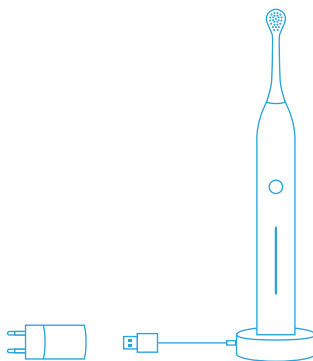

**Nabíjení: přes síťovou vidlici nebo přípojku USB
vašeho laptopu/počítače**

VYZKOUŠEJTE: SEDM PROGRAMŮ ČIŠTĚNÍ

Zapněte a držte knoflík stisknutý: hydrosonický kartáček pro předvedení všech sedm programů čištění

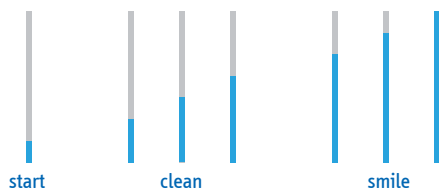

Program „start“

K čištění rovnátek, oblouků a drátků pomocí nástavce „single“ doporučujeme program „start“. Ten disponuje více než 22'000 kmitů za minutu. Svítí nejnižší LED. Mimoto je tento program vhodný, abyste si zvykli na lehké brnění, které způsobuje sonický zubní kartáček.

Tři stupně programu „clean“

Dále následuje „clean“ se třemi různě intenzivními stupni, s až 32'000 kmitů za minutu; jako ukazatel stupně slouží svítící LED.

Doporučení: nástavec „sensitive“ nebo „power“

Tři stupně programu „smile“

Nakonec následují tři různě intenzivní stupně „smile“, s až 42'000 kmitů za minutu, kdy se rozsvítí všechny LED. Potom začínají stupně zase od začátku.

Doporučení: nástavec „sensitive“ nebo „power“

Volba programu čištění

Zvolíte si svůj oblíbený program tak, že pustíte knoflík, jakmile dosáhnete programu, který je pro vás nejlepší. Tento program se uloží pro příští čištění zubů.

Přerušení

Krátké přerušení ukazuje, že uplynulo 30 sekund.

Dlouhé přerušení ukazuje, že uplynuly 2 minuty.

Po čtyřech minutách se hydrosonický kartáček pro automaticky vypne.

Tip: čistíte velmi dobře při použití všech programů. Až na program „start“ pro čištění rovnátek jsou všechny programy dost silné na to, aby čistily nejen mechanicky, ale také hydrodynamicky

MANIPULACE: TAK TO FUNGUJE NEJLÉPE

- Hlavice kartáčku High-tech jsou osazeny nejjemnějšími CUREN® vlákny. Hydrosonický kartáček pro na ně klade velmi vysoké nároky tím, že vyvíjí až 42'000 kmitů za minutu.
- Vyměňte proto hlavici kartáčku nejpozději po třech měsících.
- Po použití opláchněte hlavici i vlákna kartáčku pod tekoucí vodou.
- Můžete sdílet hodné věci s jinou osobou, ale ne zubní kartáček.

ZAČNĚTE: S DOBRÝM POCITEM


- Zvolte si svůj oblíbený program od „clean“ ke „smile“ a nechte přitom kartáček přiložený na zubech – vyberte tedy zcela podle pocitu. Čištění zubů vám bude obzvláště příjemné.
- Vyzkoušejte obě hlavice, „sensitive“ i „power“. Ze které máte nejlepší pocit?
- Z hlediska výkonu čištění není důležité, který ze tří programů „clean“ nebo „smile“ si vyberete.

NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ ZUBŮ S ROVNÁTKY

Tam, kde jsou na zubech fixní rovnátka, vznikají dodatečná místa kolem zámečků a drátků, která je třeba vyčistit. Správné vyčištění těchto kontaktních míst je rozhodující pro správnou ústní hygienu při péči o zuby s rovnátkami. Ať se jedná o fixní rovnátka nebo retainery – díky hydrosonickému kartáčku pro je čištění zcela jednoduché a vaše zuby zůstanou zdravé.


Základní čištění

Hlavici kartáčku „sensitive“ nebo „power“ pohybuje nejprve na straně dásně u rovnátek od zubu k zubu, tedy nad, popřípadě pod rovnátka, při zvoleném programu „clean“ až „smile“. Tímto způsobem vyčistíte také dásňový žlábek. Potom čistíte na druhé straně rovnátek, rovněž od zubu k zubu.

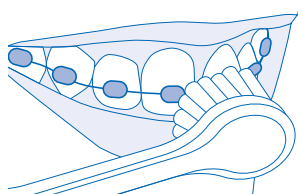


Fixní rovnátka

Takto budou kontaktní místa čistá. S jednosvazkovým nástavcem minimálně pohybujte kolem dokola rovnátek, hezky pomalu, téměř bez tlaku, při programu „start“.

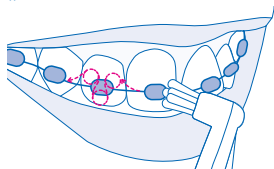

Vnitřní rovnátka a retainery

Totéž platí pro fixní rovnátka na vnitřní straně zubů. Pohybujte hezky pomalu s nástavcem s jednosvazkovým kartáčkem kolem dokola vnitřních rovnátek, popřípadě podél retainerů, při programu „start“, téměř bez tlaku. Díky CURACURVE® jsou také tato místa na vnitřních stranách nejlépe dosažitelná.

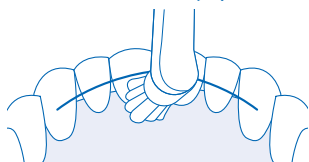


Videonávod na: www.curaprox.com

NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ ZUBŮ PO SEJMUTÍ ROVNÁTEK

A po sejmutí rovnátek? Čistíte stále pečlivě. Máte všechno, co k tomu potřebujete: hydrosonický kartáček, hlavice „sensitive“ a „power“ i nástavec s jednosvazkovým kartáčkem.



1. Hlavici kartáčku navlhčete a naneste trochu zubní pasty.
2. Kartáček vložte do úst a přiložte pod úhlem 45 stupňů, takže kartáček volně leží z poloviny na dásních a z poloviny na zubech.

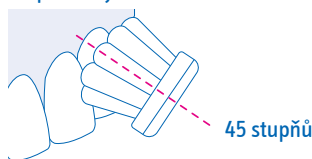


3. Čistíte zub po zubu. Setrvejte dvě až tři sekundy pod úhlem 45 stupňů u každého zubu. V žádném případě na kartáček netlačte.

Naklápění

Naklopte hydrosonický kartáček jednou až dvakrát, jako byste chtěli zavést vlákna do mezizubního prostoru. Postupujte pomalu a bez tlaku.

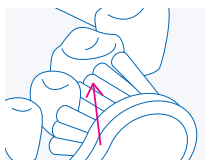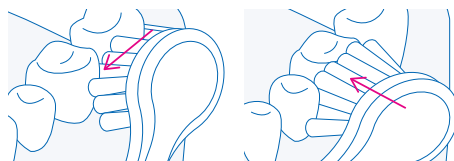


U každého zubu setrvejte dvě až tři sekundy – přitom naklopte kartáček pomalu jednou až dvakrát, aby se vlákna zasunula a obzvláště dobře prostory vyčistila.

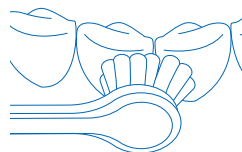


4. Po třiceti sekundách signalizuje kartáček přerušením chodu na 0,2 sekundy přechod k další čtvrtině chrupu.
5. Průběh čištění opakujte v každé čtvrtině chrupu. Dávejte pozor na to, abyste čistili zuby pokud možno vždy ve stejném pořadí, abyste měli jistotu, že na žádný zub nezapomenete.

Nahoře

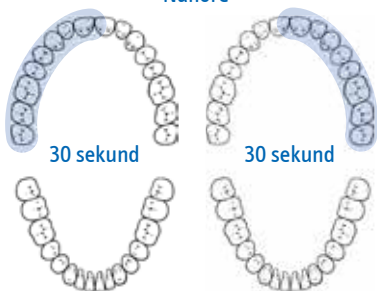

1 minuta


Dole

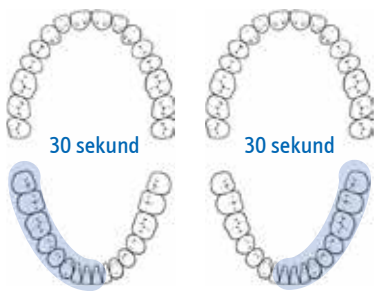

1 minuta

6. Dlouhé přerušení chodu signalizuje, že uplynuly dvě minuty. Po čtyřech minutách se hydrosonický kartáček vypne.
7. Pevně zavedené implantáty čistíte hydrosonickým kartáčkem stejně, jako byste čistili přirozený zub. Nemusíte vůbec myslet na to, že máte implantát. Případně se doporučuje zubní pasta s přídavkem chlorhexidinu, která je vhodná pro denní použití: gelová zubní pasta CURASEPT ADS® 705, 0.05 % CHX + 0.05 % fluoridu. Každopádně se doporučuje čištění mezizubními kartáčky nebo mezizubními kartáčky pro implantáty, protože u implantátů je třeba čistit dásňový žlábek obzvláště pečlivě. Zeptejte se zubního lékaře.

U hybridních zubních náhrad je také hydrosonický kartáček nejvhodnější, aby se precizně vyčistila všechna kontaktní místa.

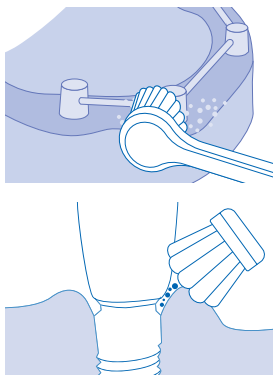

8. Především děti a mladiství čistí navíc žvýkáci plochy s různě hlubokými fisurami (rýhami). Také zde vedte hydrosonický kartáček bez tlaku od zubu k zubu a také od žvýkáci plochy ke žvýkáci ploše a u každého zubu setrvejte dvě až tři sekundy.





9. U výplní, implantátů, korunek a fazet: postupujte přesně tak, jak je popsáno v tomto návodu na čištění.
10. Podle doporučení zubních lékařů jsou dvě minuty považovány za minimální dobu čištění. Prodloužení doby čištění posiluje zdraví zubů. Zubní kartáček je možné kdykoli vypnout.

Důležité


Netlačte na zubní kartáček. Optimálního výsledku čištění dosáhnete, když se budete hydrosonickým kartáčkem pro lehké dotýkat povrchu zubů a čistit zub po zubu. Tento postup vede k optimální prevenci. Pokud budou vaše dásně po druhém nebo třetím použití citlivé, nepostupujte při čištění správně. V tomto případě si prosím ještě jednou přečtěte návod nebo si nechte poradit u stomatologických odborníků.

Čištění zubů z vnitřní strany

- a. Horní a dolní řada předních zubů z vnitřní strany: položte hydrosonický kartáček šikmo tak, abyste mohli čistit i vnitřní stranu zubů pod úhlem 45 stupňů.

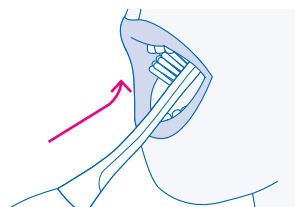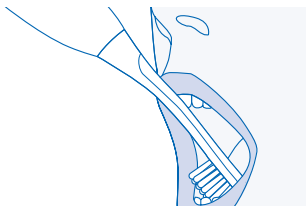

- b. Horní a dolní třenové zuby a stoličky: položte hydrosonický kartáček šikmo za zub a setrvejte tam dvě až tři sekundy.

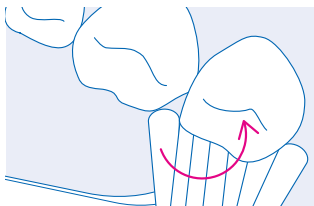


NÁVOD K ČIŠTĚNÍ DÁSŇOVÉHO ŽLÁBKU

Hlavice s jednosvazkovým kartáčkem by se měla vlastně nazývat multifunkční, protože disponuje velkým množstvím možností použití.


Čištění dásňového žlábků

V této úzké rýze mezi zubem a dásní se ukrývají bakterie. Jednosvazkový kartáček vám umožní obzvláště intenzivní a přesto jemné vyčištění dásňového žlábků.


1. Položte jednosvazkový kartáček šikmo na jednu stranu zubu. Zubní pastu nepotřebujete.

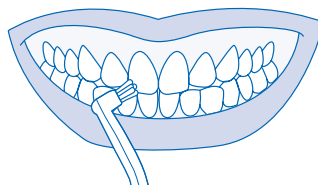


2. Přitom byste měli trochu zavést vnější vlákna svazku lehce, citlivě a téměř bez tlaku do dásňového žlábků.

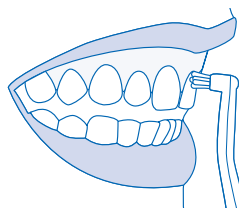

3. Nyní ved'te jednosvazkový kartáček těsně, ale bez tlaku podél dásňového žlábků od jedné strany zubu k druhé. Přitom držte kartáček kolmo k zubní ploše.

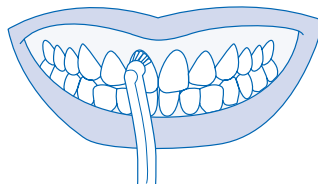


4. Na vnitřní straně postupujte stejně jako na vnější straně. Položte jednosvazkový kartáček na jeden konec zubu. Dotýkejte se dásňového žlábků s citem a čistěte zub stejným způsobem jako na přední straně.

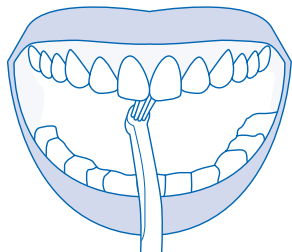


A teď: další zub. A potom buď nástavcem se zubním kartáčkem nebo s jednosvazkovým kartáčkem vyčistěte žvýkácké plochy.

NÁSTAVEC S JEDNOSVAZKOVÝM KARTÁČKEM: DALŠÍ NÁVODY

Když jsou odchylky od správného postavení zubů
Při nesprávně postavených zubech čistěte pečlivě špatně přístupná místa a postupujte k dalším zubům pomalu, téměř bez tlaku.

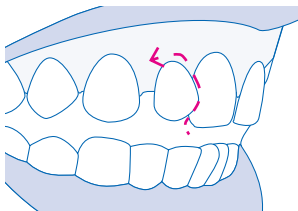


Když se silně tvoří zubní kámen
Osoby, kterým se tvoří zubní kámen obzvláště silně, vedou jednosvazkový kartáček rovněž podle dásňového žlábků pomalu, téměř bez tlaku při zvoleném programu „clean“ až „smile“.

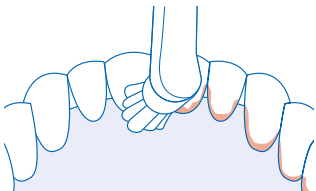


Implantáty

Implantáty vyžadují dobrou péči, aby měly dlouhou životnost. Čistěte kritická místa obzvláště dobře a téměř bez tlaku, to znamená dásňový žlábek kolem implantátu. K tomu je ideálním nástrojem jednosvazkový kartáček.

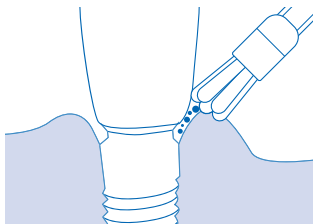

Leštění

Čistěte jednosvazkovým kartáčkem každou plošku zubu zvlášť, téměř bez tlaku a malými kruhy v programu „clean“ až „smile“. Potom přejedte zuby jazykem, abyste zjistili, jak jsou hladké a čisté.

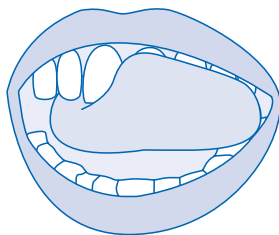

MECHANICKY A HYDRODYNAMICKY

Účinně a šetrně

S více než 30'000 kmity za minutu čistíte v programu „clean“ až „smile“ účinněji a šetrněji než s manuálním zubním kartáčkem. Je prakticky nemožné poranit si dásně nebo zuby.

Zuby a mezery

Hydrosonický kartáček pro čistí díky sonické technologii neuvěřitelně důkladně, a sice nejen zuby a dásňový žlábek, ale do určité míry dokonce mezizubní prostory.

Dásňový žlábek, kapsy

Hydrosonický kartáček pro odstraňuje miliony bakterií z biofilmu z dásňového žlábků i z eventálních parodontálních kapes – díky sonické technologii a hydrodynamice.

Mechanické čištění

Rychlost pohybu vláken zajišťuje vynikající výsledek mechanického čištění.

Hydrodynamika

Tato vysoká rychlost vede k turbulencím ve směsi ze slin, vody a zubní pasty. Tyto turbulence odstraňují mnoho bakterií z biofilmu také tam, kam se vlákna nedostanou, například z mezizubních prostor.

Společně s promyšlenými hlavicemi kartáčků splňuje hydrosonický kartáček pro nejvyšší nároky, co se týče mechanického a hydrodynamického čištění.

HLAVICE SMART PRO DOKONALOU PÉČI


Kvalita sonického kartáčku závisí na výkonu pohonu – a ještě více na hlavicích kartáčku: například na kvalitě a osazení vláken na kartáčku.

Vlákna


Od začátku používáme CUREN® vlákna místo obvyklých nylonových vláken. Výhodou je, že CUREN® vlákna nevážou vodu a tak zůstává výkon konstantní. Obzvláště důležité však je, že CUREN® vlákna jsou neuvěřitelně jemná, jsou úžasně příjemná na dotyk - dokonce při 42'000 kmitech za minutu.



Uspořádání

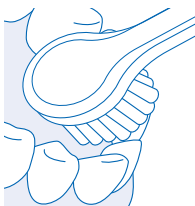

Více na straně 13

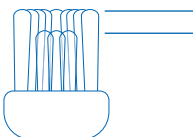


Prof. Dr. med. dent. Ulrich P. Saxer objevil výhody kapkovitého tvaru: ten umožňuje čistit každý zub zvlášť a to zaručuje nejvyšší kvalitu čištění. Proto je kartáček osazen vlákny s rozdílnou výškou, aby mohly zub doslova obejmut.

Z vnější strany dlouhé, z vnitřní strany krátké. Tímto uspořádáním vláken je možné každý zub jednotlivě obsáhnout – pro optimální mechanické a také hydrodynamické čištění.


Pohyb

Kmitající hlavice kartáčků, tedy takové, které se pohybují kruhovitě, mohou poškodit dásňový žlábek při přílišném tlaku, tvrdých vláknech a špatné technice čištění. Proto se naši dentální odborníci rozhodli pro jednoduchý vertikální pohyb sem a tam. Ten má tři výhody: šetří dásňový žlábek, pečuje o něj obzvláště dobře a vede vedle mechanického k dodatečnému způsobu čištění – hydrodynamickému. Vlákna se pohybují tak rychle, že vznikají turbulence, které se tvoří v ústech ve směsi ze slin, vody a zubní pasty. Tak se čistí také tam, kam se nedostanou vlákna, například až v mezizubních prostorech

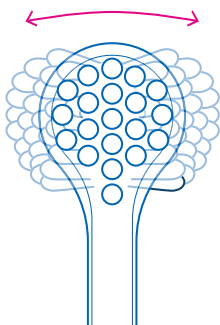

Zvláštní případ

Náš jednosvazkový nástavec byl vyvinut expertem na ústní hygienu Jiřím Sedelmayerem, původně jako jednosvazkový ruční kartáček CS single, nyní také pro sonické kartáčky. Jednosvazková hlavice je totiž vhodná také pro sonické kartáčky. Jednosvazkovým kartáčkem je možné jednoduše vyčistit výklenky a rýhy, například dásňový žlábek a plochy kolem rovinátek, a to perfektně.

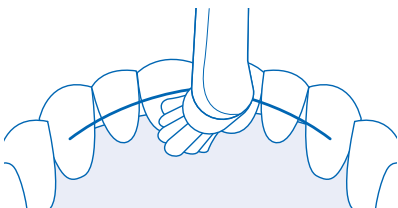

Ergonomie

Ano, naše kartáčkové nástavce jsou lehce nakloněné. Tento náklon o 10, popřípadě 15 stupňů je ale rozhodující. Ergonomie je rozhodujícím způsobem zlepšena, obtížná místa, jako zadní třenové zuby a stoličky nebo vnitřní strana zubů jsou nyní snadno dosažitelné – jednoduše díky perfektnímu náklonu CURACURVE®.



Komfort

Jak může být pro vás čištění zubů ještě příjemnější? Právě používání sonických kartáčků vede k nepříjemným pocitům, když se dotkne zadní strana kartáčkového nástavce zubu. Naše řešení: pogumovali jsme zadní stranu kartáčku, a sice tak, aby nebyla činnost kartáčkového nástavce tak patrná. Tedy všechno příjemné, všechno jednoduché, všechno čisté.

Naše inovace

Jsme pyšní na naši inovativní švýcarskou technologii kartáčkových hlavice – a na to, že je dokonce ve Švýcarsku vyrábíme. A doufáme, že také Vy tyto kartáčkové hlavice smart oceníte. Jsme přesvědčeni o tom, že se vám s nimi podaří jednoduše a příjemně docílit zdraví dutiny ústní.

+ VYROBENO VE ŠVÝCARSKU

PŘIOBJEDNÁNÍ KARTÁČKOVÝCH HLAVIC

Kartáčkové hlavice jsou k dostání v lékárnách, v ordinacích zubních lékařů, v prodejních stáncích Curaprox a na e-shopech.



power

Silná a přesto jemná s prokazatelně jemnými CUREN® vlákny. Na normální dásně, nebo jednoduše, protože to tak máme rádi. Extra malá hlavice ve tvaru kapky pro vysoce precizní čištění, zub po zubu. Podporuje hydrodynamický efekt.



sensitive

Obzvláště jemná a přesto vysoce účinná. S extra jemnými CUREN® vlákny. Na citlivé dásně při parodontóze – nebo jednoduše, protože to tak máme rádi. Extra malá hlavice ve tvaru kapky pro vysoce precizní čištění, zub po zubu. Podporuje hydrodynamický efekt.



single

Extra jemná. Čistí především tam, kde se obzvláště dobře ukrývají bakterie: v mezizubních prostorech, kolem rovnátek, oblouků a drátů. A v dásňovém žlábků. Téměř nezbytný pro dosažení ploch pro péči kolem implantátů a u nesprávně postavených zubů. Také vhodný pro leštění zubů.



Tyto kartáčkové hlavice vyvinul prof. Dr. med. dent. Ulrich P. Saxer se specialistou na ústní hygienu Jiřím Sedelmayerem.

Kartáčkové hlavice jsou:

power



power



sensitive



sensitive



single



single



power



power



sensitive



sensitive



single



single



[BE YOU.]

'EXPRESS YOURSELF'

BĚLÍCÍ ZUBNÍ PASTA
PRO KAŽDOU NÁLADU
VHODNÁ I PRO ČIŠTĚNÍ
HYDROSONICKÝM KARTÁČKEM

Bakteriální
rovnováha

Dlouhotrvající
svěžest

Stejně
složený v šesti
příchutích

Enzymatické
bělení

Čistíte
s chutí



YES, SMILE.

curaden
 BETTER HEALTH FOR YOU

Curaden Czech, s.r.o.
U Železné lávky 10
118 00 Praha 1
tel.: 737 861 899

www.curaprox.cz

