

BENUTZERHANDBUCH

Ästhetisches Gerät zur Körperformung
BeautyRelax BR-2720

CELLUFORM ULTIMATE



INHALT:

EIN WORT DER EINFÜHRUNG	5
PROBLEME DES FETTGEWEBES	7
FETTE ZELLE	7
ULTRASCHALL UND RADIOFREQUENZ	8
FÜR ALLE ZEICHENTYPEN	8
DAS PROBLEM DER FALTEN	10
METHODEN DER FALTENREDUZIERUNG	10
HINWEIS	11
VERWENDUNG VON SONOGEL	11
KONTRAINDIKATIONEN	12
VERBOTENE BEREICHE DER BEHANDLUNG	12
ZULÄSSIGE BEHANDLUNGSBEREICHE	12
LYMPHKNOTEN - HIFU-ULTRASCHALL	13
EINFÜHRUNG DER GERÄTECHNIK	16
HOCHFREQUENZ [RF]	16
ULTRASCHALLWELLEN [HIFU]	16
EMS [EMS]	17
ROTES LICHT [630NM]	17
HAUPTVORTEILE	18
WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN	18
TECHNISCHE PARAMETER	18
VERPACKUNGSGEHALT	18
BESCHREIBUNG DES INSTRUMENTS	19
BESCHREIBUNG DER ANZEIGE	21
KONTROLLE UND VERWENDUNG DES GERÄTS	22
HINWEISE ZUR VERWENDUNG DES GERÄTS	24
DAUER UND HÄUFIGKEIT DER NUTZUNG - KÖRPER	25
DAUER UND HÄUFIGKEIT DER NUTZUNG - GESICHT	25
HAUTTEST	26
WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DER HOCHFREQUENZ	27
OPTIONEN ZUR KÖRPERBEHANDLUNG	28
EMPFOHLENE TECHNIK FÜR DIE VERWENDUNG DES GERÄTS	33
METHODE ZUR BEHANDLUNG VON GESICHT UND HALS	35

INHALT:

REINIGUNG UND WARTUNG	36
BATTERIEAUFLADUNG	36
MÖGLICHE PROBLEME ZU LÖSEN	36
EMPFOHLENE INSTRUMENTE IM ZUSAMMENHANG	37
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND ANTWORTEN	38
EIN PAAR SÄTZE ZUM SCHLUSS	42
ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN	43
ZERTIFIZIERUNG	43
IMPORTEUR	43
ES KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	44

EIN WORT DER EINFÜHRUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen beim Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle detaillierten Informationen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte beachten Sie insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Gerät genau nach Anweisung. Alle diese Schritte tragen dazu bei, alle Funktionen des Geräts optimal zu nutzen und die Gesundheit aller zu schützen. In diesem Handbuch versuchen wir, Ihnen die bestmögliche Vorstellung von der verwendeten Technologie zu vermitteln und Ihnen zu zeigen, wie Sie das Gerät am besten nutzen können.


Bitte nehmen Sie keine der Anweisungen in dieser Anleitung auf die leichte Schulter. Das Ästhetikgerät zur nicht-invasiven Behandlung ausgewählter Körperteile arbeitet mit Technologien, die schmerzfrei und sicher sind. Das Gerät hat einen langen Entwicklungsprozess durchlaufen und erfüllt in puncto Sicherheit alle gesetzlichen Normen. Um das subkutane Fettgewebe effektiv zu stimulieren, arbeitet das Gerät mit einer bestimmten Leistung. Wenn Sie die gegebenen Anweisungen nicht befolgen, die Warnhinweise und die Liste der Kontraindikationen nicht beachten, können Sie im Extremfall Ihre Gesundheit negativ beeinflussen. Andererseits sollten Sie keine Angst vor der Verwendung des Geräts haben. Das Design, die Funktionen und die Technologie sind für die Verwendung unter häuslichen Bedingungen ohne die Aufsicht einer sachkundigen medizinischen Fachkraft geeignet.

Einleitende wichtige Informationen zum Gerät und seiner Verwendung:

- Das BeautyRelax-Gerät gehört zur Kategorie der Massage- und Ästhetikgeräte. Es handelt sich nicht um ein medizinisches Gerät. **Es dient nicht der Behandlung von Fettleibigkeit oder anderen damit verbundenen Einschränkungen.** Es bietet Technologien, die, wenn sie unter bestimmten Bedingungen angewendet werden, bei der Reduzierung des subkutanen Fettgewebes und der Verbesserung der Hautelastizität helfen.
- Das BeautyRelax-Gerät bietet eine nicht-invasive Behandlung. In der Praxis bedeutet dies, dass kein Teil des Applikationskopfes physisch unter die Haut eindringt.
- Die nicht-invasive Anwendung ist eine Voraussetzung für die Verwendung des Geräts unter häuslichen Bedingungen durch den Durchschnittsanwender. Der Betrieb des Geräts erfordert nicht die Aufsicht eines ausgebildeten medizinischen oder kosmetischen Ästhetikers.
- Das ästhetische Gerät BeautyRelax ist zertifiziert und erfüllt alle Normen, die für ein Gerät dieser Art erforderlich sind. Die Sicherheit des Adapters und aller elektronischen Komponenten ist gewährleistet.
- Die Behandlung wird immer mit einem klaren, leitfähigen Gel (Sonogel) kombiniert. Es kann in jeder Apotheke oder jedem Sanitätshaus gekauft werden. Es kostet ein paar Dutzend Kronen. Das billigste ist auf jeden Fall ausreichend. Je teurer, desto besser. Der Hauptzweck des Auftrags des Gels auf die Haut besteht darin, die Leitfähigkeit zu erhöhen. Die Technologie des Geräts kann sich dann besser mit der Haut verbinden. Achten Sie darauf, nicht mit der Menge des Gels auf Ihrer Haut zu knausern. Es ist ein wichtiger Bestandteil für die qualitative Ausführung der Hautbehandlung.
- Es ist definitiv nicht wahr, dass die Ergebnisse umso schneller eintreten, je häufiger Sie das Gerät benutzen. Geben Sie Ihrem Körper genügend Zeit, die Energie zu verarbeiten, die durch die Benutzung des Geräts freigesetzt wird. Dies wird einen wesentlichen Beitrag zum Schutz Ihrer Gesundheit leisten.
- Wenn Sie sich bei der Benutzung des Geräts unsicher sind, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Wir wünschen Ihnen, dass das Gerät Ihnen gute Dienste leistet und die Erwartungen, die Sie vor dem Kauf hatten, erfüllt. Das Team von BeautyRelax.cz

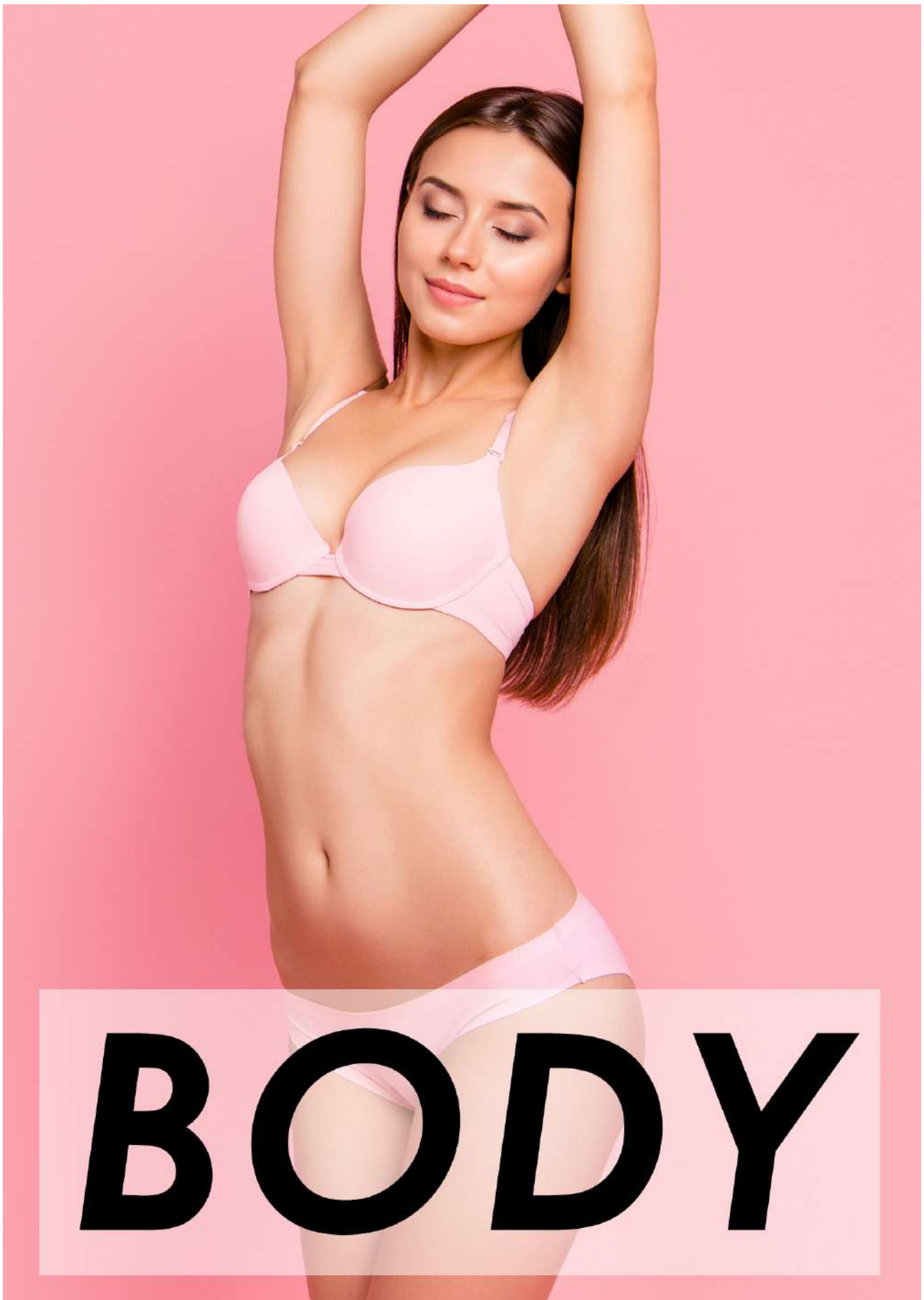


PROBLEME DES FETTGEWEBES

Fettzellen gehören zu den größten Zellen im menschlichen Körper. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Energie zu speichern. Neben der Speicherung von Energie dient das weiße Fettgewebe auch der Wärmeisolierung und dem Schutz der inneren Organe. Das Fettgewebe ist am häufigsten im Unterhautgewebe zu finden. Das Fettgewebe gehört zu den Bindegeweben. Eine der wichtigsten Eigenschaften des Fettgewebes ist die Ansammlung von Fett, das aktiv aus Kohlenhydraten und Fettsäuren in den Zellen gebildet wird. Der Prozess der Fettspeicherung und des Fettabbaus wird hormonell und durch Nervenreize gesteuert. Das weiße Fettgewebe besteht aus **Fettzellen** mit großen Fetttröpfchen, die von einem Ring aus Zytoplasma (Fettvakuole) umgeben sind. Der Zellkern befindet sich an der Peripherie der Zelle. Das gespeicherte Fett ist von halbflüssiger Konsistenz und besteht hauptsächlich aus Triacylglycerinen und Cholesterinestern. Bei schlanken Personen macht es etwa 20 % des Körpergewichts aus, bei fettleibigen Personen kann es jedoch bis zu 50 % des Gesamtgewichts ausmachen.



Grafische Animation eines Fettzellhaufens

FETTE ZELLE

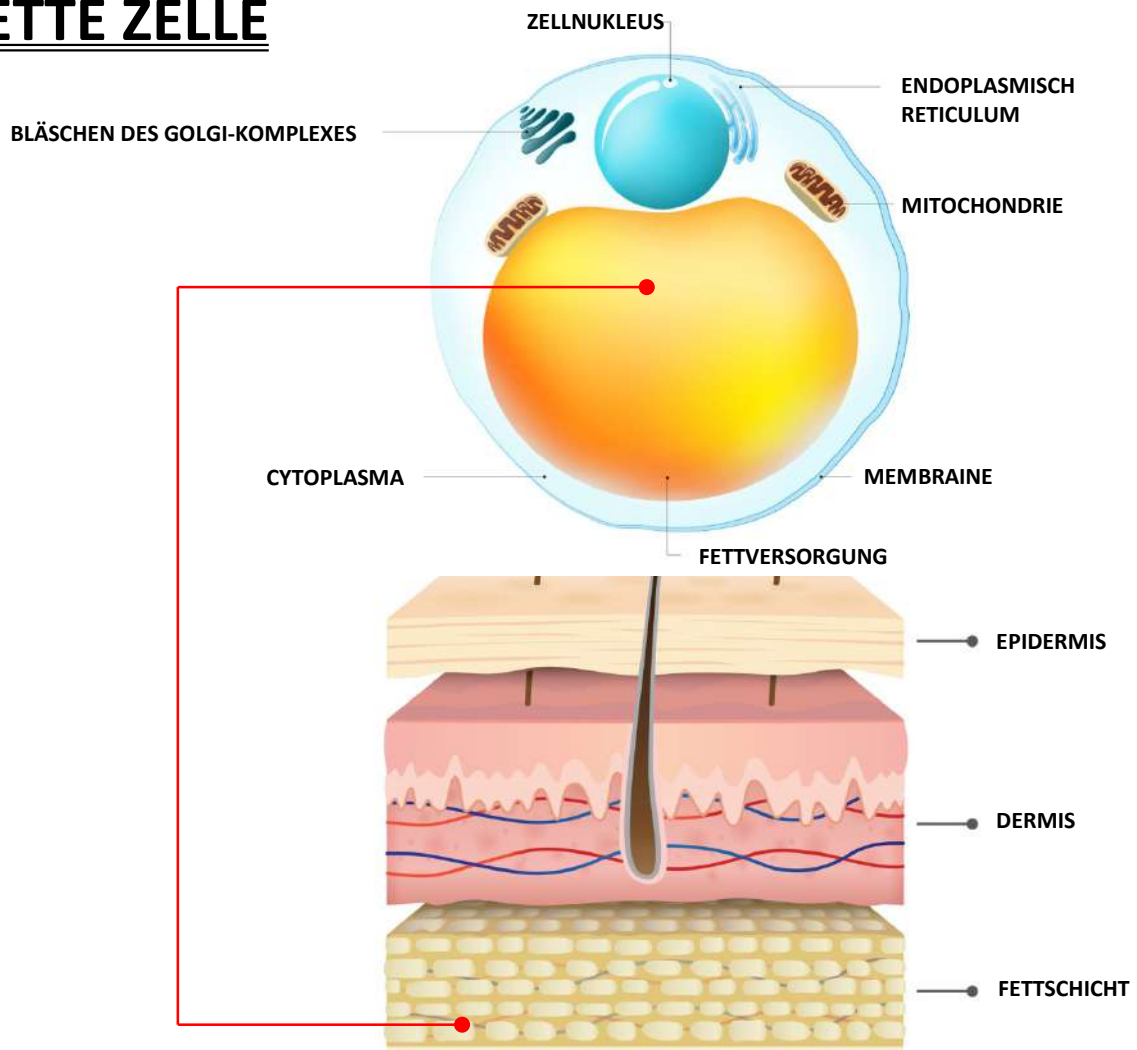


ULTRASCHALL UND RADIOFREQUENZ


Der Hauptzweck des Einsatzes ästhetischer Geräte besteht darin, die Fettzellen, die sich im Fettgewebe ansammeln, direkt zu bekämpfen. Das ästhetische Gerät **BeautyRelax Celluform Ultimate** kombiniert zwei moderne Technologien - **RF-Radiofrequenzwellen** und innovative **HIFU-Ultraschallwellen**. Die duale Behandlung ist eine optimale Kombination der Stimulation von Fettzellen. Die zielgenaue Radiofrequenzenergie erzeugt einen thermischen Effekt. Der zelluläre Stoffwechsel wird beschleunigt. Die Struktur einiger Fettzellen wird gestört. Es folgt eine Zerlegung in einzelne Partikel. Die Wirkung der Körperformung besteht darin, die Menge der Fettzellen zu reduzieren und ihr Volumen zu verringern. Unter der Einwirkung der Ultraschallwellen werden die Triglyceride in Fettsäuren und Glycerin zerlegt. Glycerin ist wasserlöslich und kann daher leicht in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Die Fettsäuren werden von der Leber auf eine natürliche und körpereigene Weise verarbeitet.



FÜR ALLE ZEICHENTYPEN

Der BeautyRelax ist für alle Körpertypen geeignet. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Unabhängig von der Veranlagung für größere Fettablagerungen an irgendeiner Stelle. Ausnahmen sind Personen, die unter einer der in der Liste der Kontraindikationen aufgeführten Bedingungen leiden.

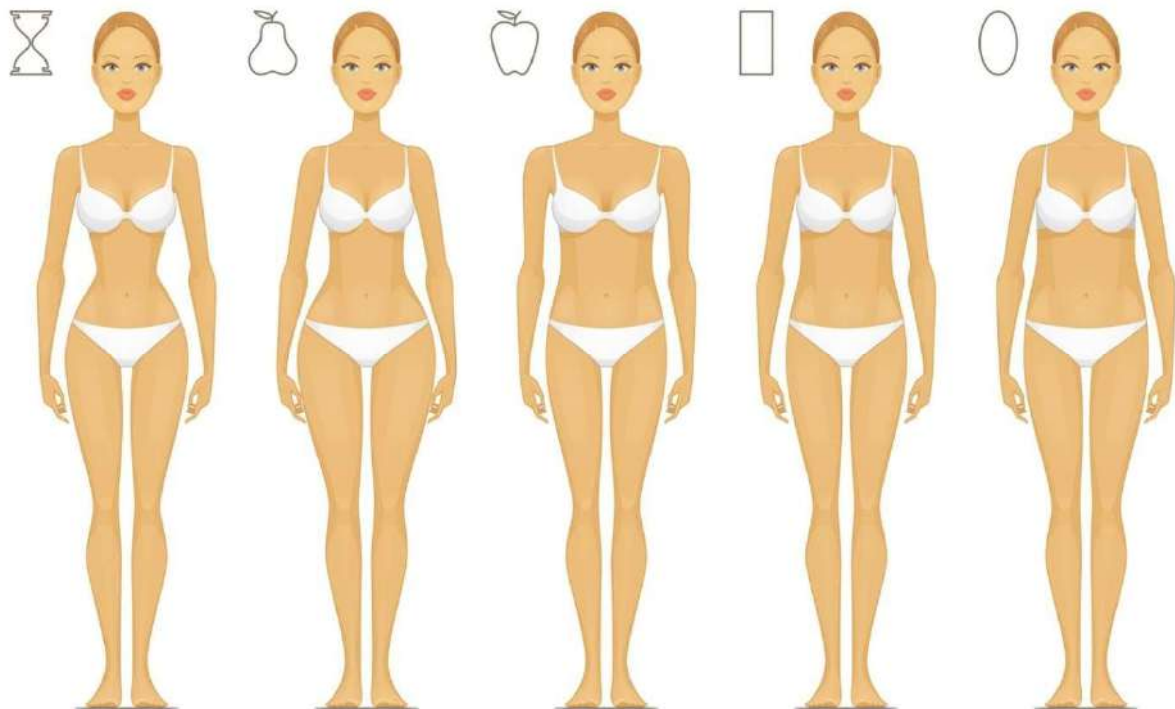

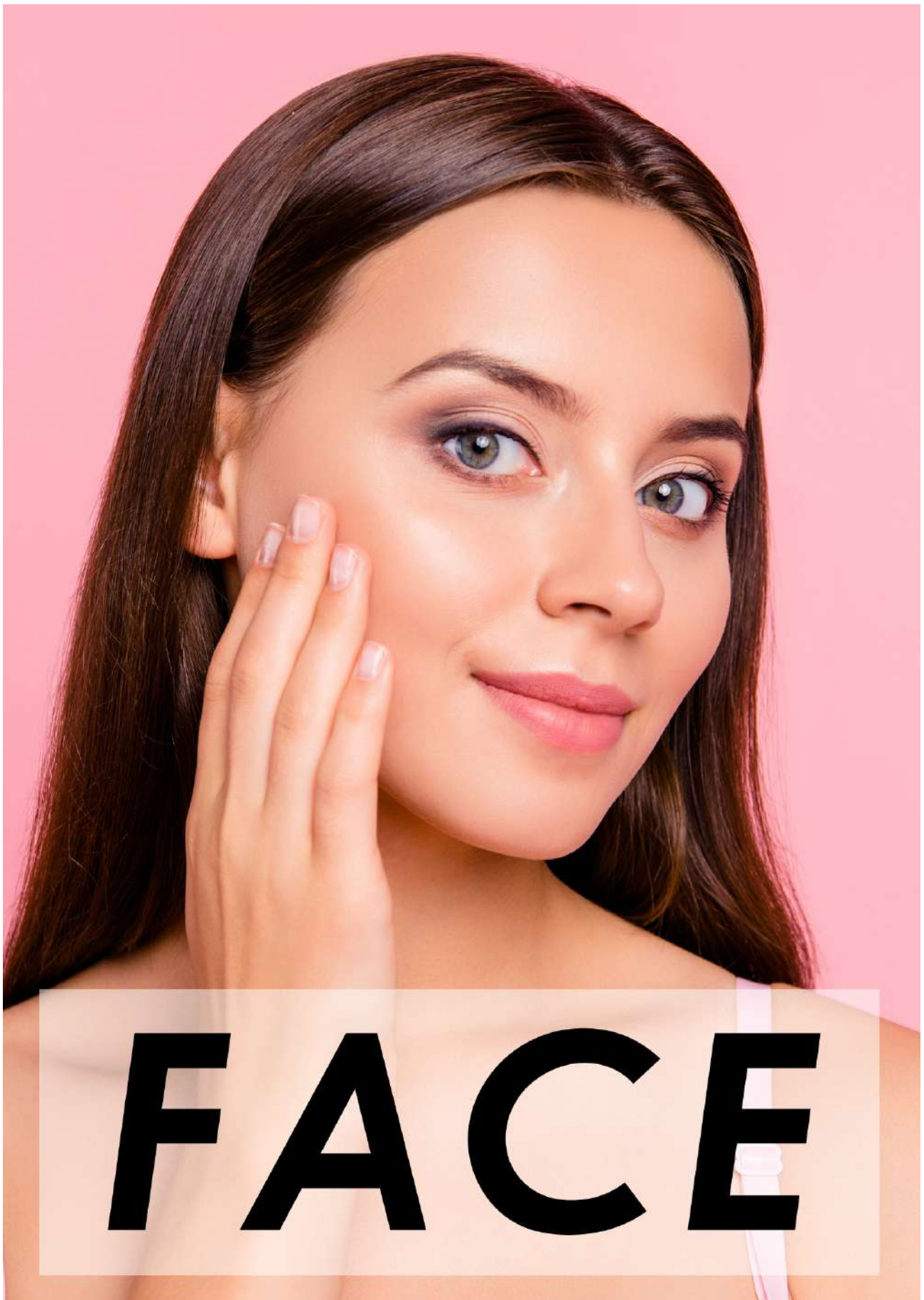


DAS PROBLEM DER FALTEN

Der Prozess der Faltenbildung ist ein natürliches Phänomen. Er ist eine Folge der Hautalterung. Mit der Zeit verliert sie ihre Elastizität. Die Zellerneuerung verlangsamt sich, was dazu führt, dass keine ausreichenden Mengen an hochwertigem Kollagen produziert werden können. Als Folge der **verminderten Kollagenproduktion** bildet die Haut Falten, die der Körper nicht ohne Hilfe ausgleichen kann. Die Faltenbildung der Haut dringt allmählich bis in die Dermis - die Lederhaut (das Stützgewebe der Haut) - vor. Das Ergebnis ist eine Haut mit einer großen Anzahl tiefer und ausgeprägter Falten. Die Falten lassen sich in zwei grundlegende Gruppen einteilen. **Dynamische Falten**, die durch Kontraktion (Zusammenziehen der Muskeln) verursacht werden. Sie treten etwa ab dem 35. Lebensjahr auf. **Statische Falten** sind das Ergebnis einer Erschlaffung der unteren Hautschicht und einer geringen Kollagenproduktion. Statische Falten treten ab dem 40. Lebensjahr auf.



METHODEN DER FALTENREDUZIERUNG


Die Möglichkeiten der Faltenentfernung werden in zwei grundlegende Gruppen unterteilt: **invasive** und **nicht-invasive Methoden**. Die invasive Methode umfasst alle Arten von chirurgischen Verfahren, bei denen ein Skalpell oder Injektionen verwendet werden. Das Instrument des Arztes wird physisch über die Hautoberfläche geführt. Zu den nicht-invasiven Methoden gehören verschiedene kosmetische Produkte, Cremes, Gele, Öle und Seren. Eine weitere Möglichkeit sind instrumentelle Hautbehandlungen mit ausgewählten Technologien, die die natürliche Kollagenproduktion aktiv anregen und die elastischen Fasern stärken sollen. Die Radiofrequenztechnologie erlebt einen großen Aufschwung im Bereich der Ästhetik. Sie erreicht das beste Verhältnis von **Sanftheit** und **Effektivität**.

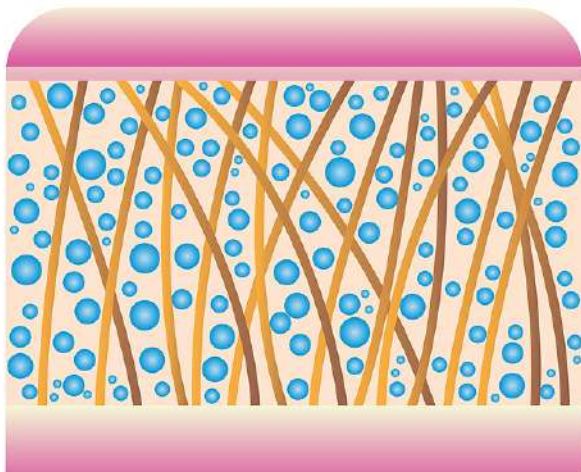

GESTRAFFTE HAUT OHNE

FALTEN

AUSREICHEND KOLLAGEN

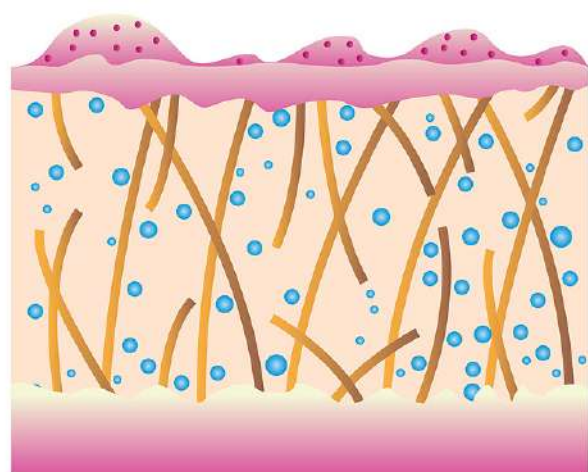

SCHLAFTE HAUT MIT FALTEN

GERINGE MENGE AN KOLLAGEN
VERMINDERTE ELASTIZITÄT DER ELASTISCHEN
FASERN

HINWEIS

- Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch durch, prüfen Sie alle Abbildungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Wenn Ihre Haut von einer schweren Erkrankung betroffen ist, dürfen Sie das Gerät nicht verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Gesundheitszustand mit den Bedingungen für die Verwendung des Geräts übereinstimmt, fragen Sie Ihren Hausarzt nach der Eignung.
- Das Gerät ist in erster Linie für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Geben Sie es nicht an Familienmitglieder oder Freunde weiter. Wenn das Gerät von mehr als einer Person benutzt wird, sollte besonders auf die Hygiene geachtet werden.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, nicht richtig funktioniert oder ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie es nicht in Betrieb.
- Wenn das Gerät defekt ist, berühren Sie nicht die inneren Teile, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn das Gerät auf den Boden fällt, kann es beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst des Händlers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (Badewanne, Dusche, Schwimmbad usw.).
- Das Gerät ist nicht waschbar. Es darf nicht in Wasser getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich aus.
- Wenn das Gerät von einer sehr kalten in eine sehr warme Umgebung gebracht wurde, warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie es benutzen.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen bestimmt, deren körperliche oder geistige Verfassung den sicheren Gebrauch des Geräts nicht zulässt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Wärmequellen (Heizkörper, Herd, Feuer usw.) und verwenden Sie es nicht dort.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Lagern Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung. Versuchen Sie, es vor Staub zu schützen.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Der Händler haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entgegen den Anweisungen in diesem Handbuch entstehen. Er ist nicht verantwortlich für Folgen, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.
- Der Vertreiber haftet nicht für Gesundheits- oder Sachschäden, die durch andere Verwendungen entstehen.



VERWENDUNG VON SONOGEL

Die Anwendung erfolgt immer in Kombination mit einem klaren leitfähigen Gel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Anwendungsgel, SONOGEL genannt, kann in jedem Sanitätshaus (auch in der Apotheke) erworben werden. Das Gel ist für die Anwendung des Geräts sehr wichtig. Es bildet eine notwendige Haftschrift zwischen dem Applikator und der Haut. Es ist auf Wasserbasis. Es kann den Applikatorkopf nicht beschädigen. Achten Sie darauf, es bei der Verwendung des Geräts nicht zu sparsam einzusetzen.



Die Verwendung eines Applikatorgels ist unerlässlich. Radiofrequenz, EMS-Impulse und HIFU-Ultraschall können sich besser mit der Haut verbinden. Verwenden Sie keine anderen kosmetischen Produkte in Kombination mit dem Gerät.

KONTRAINDIKATIONEN

Das Gerät **darf unter keinen Umständen** von Personen benutzt werden, die von einem dieser Zustände betroffen sind:

- Krebs, Epilepsie, Diabetes, virale Erkrankungen
- Im Zustand des hohen Fiebers
- Schwere Nieren- oder Lebererkrankung
- Hoher Cholesterinspiegel
- Hautkrankheiten
- Müdigkeitssyndrom
- Herzkrankheit, Herzschrittmacher, Bluthochdruck
- Metallimplantate im Körper (gilt nur für den Anwendungsbereich des Geräts)
- Gefäßerkrankungen oder Arteriosklerose
- Schwangerschaft
- Personen, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen
- Patienten, die sich einer Operation mit Transplantation unterzogen haben
- Personen, die einer ständigen Überwachung bedürfen, dürfen das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.



VERBOTENE BEREICHE DER BEHANDLUNG

- Bereich Schilddrüse
- Der Bereich, in dem sich das Herz befindet
- Achselhöhlen
- Ellenbogen
- Handgelenk
- Knöchel
- Palmen
- Füße
- Kniebereich
- Wirbelsäule



ZULÄSSIGE BEHANDLUNGSBEREICHE


- Gesicht
- Bart
- Unterarme
- Arme der Hand
- Bauch
- Oberschenkel
- Gesäß
- Kälber



Hinweis: Der gepaarte Körperbereich wird als ein Teil betrachtet (rechte und linke Wade = ein Teil)


LYMPHKNOTEN - HIFU-ULTRASCHALL

Versuchen Sie bei der Anwendung des Beautyrelax-Gerätes, diese Bereiche der Lymphknoten zu **vermeiden**. Eine leichte Berührung spielt keine Rolle. Eine ständige Stimulation dieser Knoten ist nicht zu empfehlen. Die Knoten sind **mit großen grünen Punkten** dargestellt:

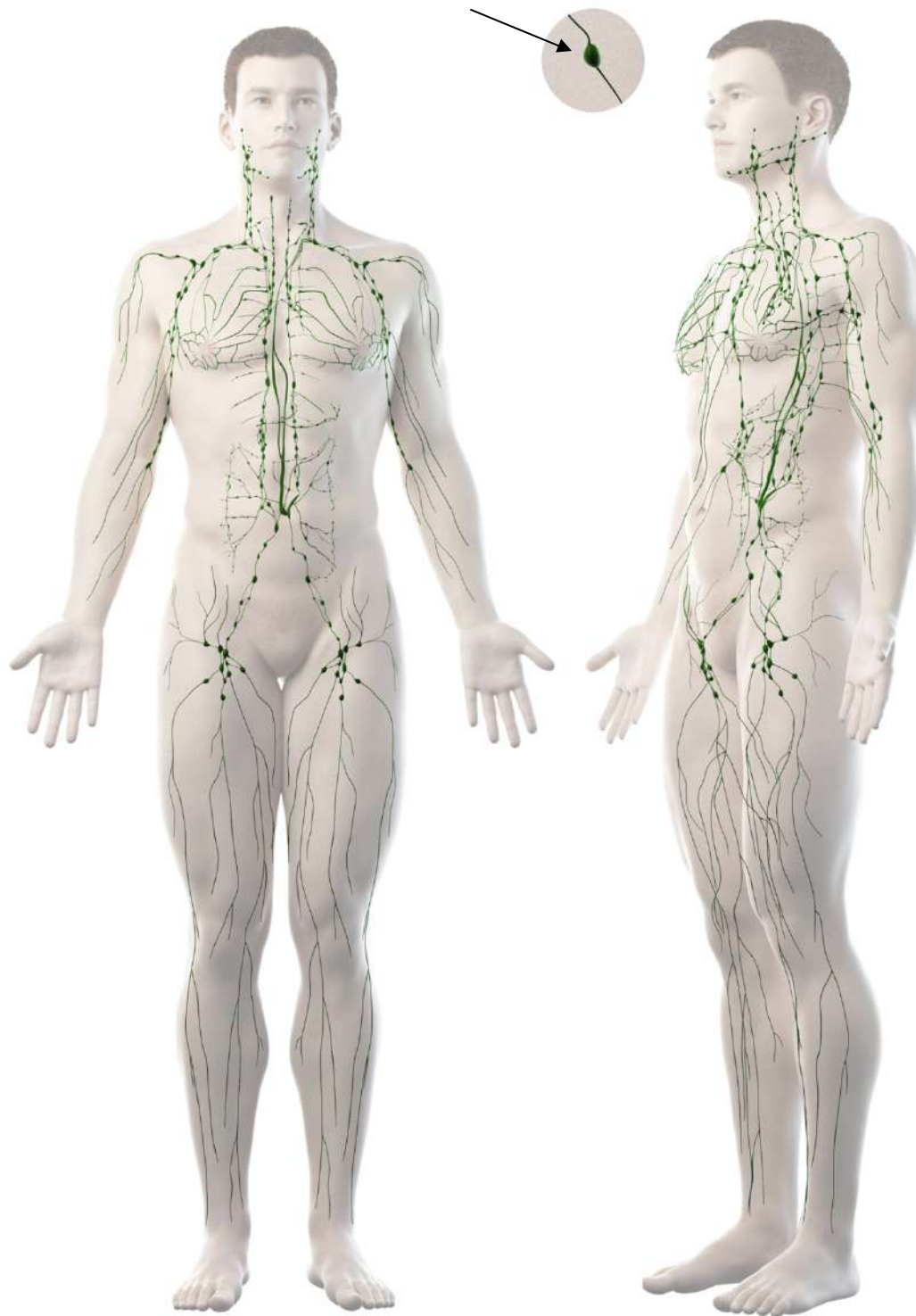

LYMPHKNOTEN - HIFU-ULTRASCHALL

Versuchen Sie bei der Anwendung des Beautyrelax-Gerätes, diese Bereiche der Lymphknoten zu **vermeiden**. Eine leichte Berührung spielt keine Rolle. Eine ständige Stimulation dieser Knoten ist nicht zu empfehlen. Die Knoten sind **mit großen grünen Punkten** dargestellt:

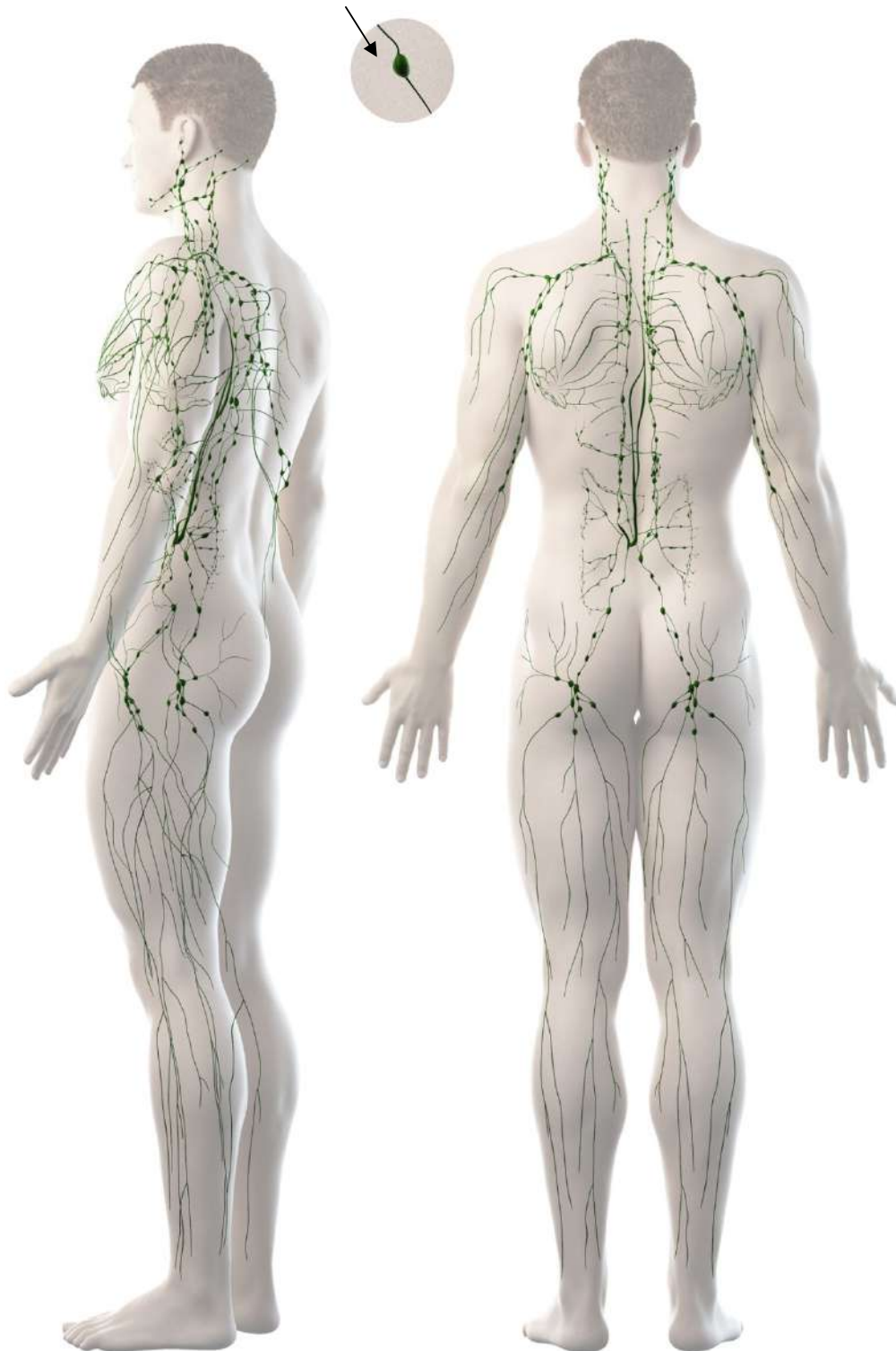

LYMPHKNOTEN - HIFU-ULTRASCHALL

Versuchen Sie bei der Anwendung des Beautyrelax-Gerätes, diese Bereiche der Lymphknoten zu **vermeiden**. Eine leichte Berührung spielt keine Rolle. Eine ständige Stimulation dieser Knoten ist nicht zu empfehlen. Die Knoten sind **mit großen grünen Punkten** dargestellt:



EINFÜHRUNG DER GERÄTETECHNIK

Beliebte Technologien aus dem Bereich der nicht-invasiven Ästhetik in einem kleinen kompakten Design. Wir stellen Ihnen die absolute Neuheit in der Kategorie der Körperpflege vor: das **BeautyRelax Celluform Ultimate**. Es verwendet Technologien, die mit den großen Geräten in Ästhetikstudios vergleichbar sind. Die Hauptfunktion des **BeautyRelax Celluform Ultimate** ist die gezielte Körperformung mit Schwerpunkt auf der Reduktion von subkutanem Fett. Dank eines multifunktionalen Applikationskopfes bearbeitet es das Fettgewebe mit HIFU-Ultraschallwellen, RF-Radiofrequenz, elektrischen EMS-Mikroimpulsen und rotem Photonenlicht. Dank der einzigartigen Krümmung des Geräts lassen sich auch schwer zugängliche Stellen problemlos behandeln. Nutzen Sie die professionelle Technologie bequem von zu Hause aus!

HOCHFREQUENZ [RF]

Die Radiofrequenzwellen sind in den letzten Jahren im Bereich der Ästhetik sehr beliebt geworden. Zu ihren Hauptvorteilen gehören ein hohes Maß an Sanftheit und Wirksamkeit. Der Applikator, der auf die zu behandelnde Stelle aufgesetzt wird, setzt Energie mit einem ganz bestimmten Frequenz- und Leistungsbereich frei. Bei dem Modell BeautyRelax Celluform Ultimate ist die Radiofrequenz auf eine Frequenz von 2 MHz abgestimmt. Die Radiofrequenzwellen sind so optimiert, dass sie einen Wärmegradienten verursachen, der die Prozesse in der Dermis und der Fettgewebeschicht deutlich beeinflusst. Die abgegebene Energie aktiviert den Umbau der elastischen Fasern und die Förderung der Kollagenbildung. Die möglichst gezielte Energieabgabe auch in Bereichen mit stärker ausgeprägter Fettschicht und die anschließende Anregung von Stoffwechselprozessen hat einen wesentlichen Einfluss auf die sehr effektive Glättung von erschlafften und deformierten Konturen. Gleichzeitig stimuliert die Radiofrequenz aktiv die Fettzellen, um Energie freizusetzen, die dann vom Körper auf natürliche Weise verarbeitet wird. Die Zellen verändern ihre Größe und somit wird das Fettgewebe verkleinert. Dieser Prozess kann durch regelmäßige Anwendung unter den in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen erreicht werden. Die Wirkung der Radiofrequenz ist ein Gefühl von Wärme. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Wärme, die Ihre Haut mit dem Applikationskopf erwärmen würde, der sich erhitzt. Sie können die Wärme an der Hautoberfläche spüren, aber sie dringt weiter in die Dermis und bis zum Fettgewebe vor. Durch die Hitze werden Radiofrequenzwellen erzeugt. Die Radiofrequenz hat also zwei grundlegende Schlüsseleigenschaften - aktive Stimulation des Fettgewebes und Erhöhung der Hautelastizität.



ULTRASCHALLWELLEN [HIFU]

Dank ihrer Eigenschaften haben die Ultraschallwellen einen festen Platz im Bereich der Ästhetik gefunden. Ultraschallwellengeräte können das Gesicht wirksam reinigen oder das Fettgewebe aktiv stimulieren. Bei verschiedenen Frequenzen erzielen sie unterschiedliche Eigenschaften. Beim Celluform Ultimate ist die Ultraschallfrequenz auf 3MHz eingestellt. Es ist jedoch eines der ersten, das eine völlig neuartige Ultraschallwellenbehandlung in Form einer Erhöhung der Stromstärke anbietet. Die Fläche, die die Ultraschallwellen erzeugt, ist im Vergleich zu Geräten ähnlicher Art kleiner. Die erhöhte Konzentration trägt dazu bei, das Fettgewebe maximal zu erreichen. Die Verwendung eines HIFU-Ultraschallwellengeräts führt zu einer effektiveren Stimulation der Fettzellen.



[EMS]

Die Kontaktflächen der Kügelchen auf dem Applikationskopf des Geräts übertragen feine elektrische Mikroimpulse, die durch den oberen Teil der Haut direkt in die Muskeln eindringen. Die Stärke und Frequenz der elektrischen Impulse sind speziell abgestimmt, um eine wirksame und dennoch schmerzfreie Hautbehandlung zu ermöglichen. Die Muskeln werden kontrahiert und dadurch gestärkt. Kollagen und elastische Fasern werden mechanisch stimuliert. Sie erreichen eine Verbesserung der Hauttextur, des Hauttöns und eine Erhöhung der Elastizität. Der Begleiteffekt der EMS-Technologie ist ein kribbelndes Gefühl auf der Haut.



ROTES LICHT [630NM]

Licht ist einfach der sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung mit unterschiedlichen Frequenzen. Es erreicht verschiedene Wellenlängen im Bereich von 390 bis 760nm (Nanometer). Das menschliche Auge ist in der Lage, Licht mit Wellenlängen zwischen 400 und 800 nm wahrzunehmen. Bei der Photonentherapie gelangt das Licht als Energiestrom in Form von Photonen in den Körper. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unterschiedliche Wellenlängen des Lichts zu spezifischen Hautpflegeeffekten führen. Studien haben einen echten positiven therapeutischen Nutzen für lebendes Gewebe und Organismen auf zellulärer Ebene nachgewiesen.



Entzündliche Erkrankungen können als Folge von Krankheiten, Verletzungen oder Stress auftreten. Die Lichttherapie stimuliert die Heilkraft der Zellen auf natürliche Weise. Das Licht kann nicht-invasiv und schmerzfrei in das Innere der Zelle eindringen. Das Licht aktiviert die Photorezeptoren in den Zellen. Die Photonentherapie verursacht keine Nebenwirkungen oder Schäden im Körper. Aufgrund ihrer positiven Wirkungen hat sie nicht nur in der Dermatologie, sondern auch im Bereich der kosmetischen Hautbehandlung an Popularität gewonnen.

ECHTE POSITIVE AUSWIRKUNGEN AUF LEBENDE GEWEBE UND ORGANISMEN AUF ZELLULÄRER EBENE

- Photonenlicht kann nicht-invasiv und schmerzlos in das Innere der Zelle eindringen.
- Licht aktiviert die Photorezeptoren in den Zellen.
- Die Lichttherapie stimuliert die Heilkraft der Zellen auf natürliche Weise.
- Die Photonentherapie verursacht keine Nebenwirkungen oder Schäden im Körper.
- Es befasst sich mit entzündlichen Erkrankungen aufgrund von Krankheit, Verletzung oder Stress.

Rotes Licht:

- fördert die natürliche Kollagenproduktion
- Verbesserung der Durchblutung des Unterhautgewebes
- verhindert Pigmentbildung

HAUPTVORTEILE

- 4 fortschrittliche moderne Technologien, die in Schönheitssalons am häufigsten eingesetzt werden
- Das Gerät ist für die Anwendung im Gesicht und an ausgewählten Körperpartien vorgesehen
- Kompakte Größe und geringes Gewicht für einfache Selbstbehandlung
- Nicht-invasive Anwendung (kein Teil des Geräts dringt in die Hautoberfläche ein)
- Die Behandlung ist so schonend wie möglich für Ihren Körper
- Sichere Verwendung unter häuslichen Bedingungen
- Ohne jegliche Nebenwirkungen

WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN

- Ein wirksames Mittel im Kampf gegen problematische Körperteile
- Aktives Targeting ausgewählter Bereiche mit erhöhtem Vorkommen von Fettgewebe
- Signifikante Verbesserung der Hautelastizität
- Intensive Unterstützung der Bildung von körpereigenem Kollagen
- Umgestaltung der elastischen Fasern


TECHNISCHE PARAMETER

- Technologie: Radiofrequenz, Ultraschallwellen der Kategorie HIFU, EMS-Impulse, Rotlicht
- Einstellung der Intensität: ja, 3 Stufen
- Ultraschallfrequenz: 3Mhz
- Funkfrequenz: 2Mhz
- EMS-Impulsfrequenz: 90Khz
- Rotes Licht mit einer Wellenlänge von 625nm
- Timer: ja, 5 Minuten für jedes Programm
- Stromversorgung: eingebauter Li-Ionen-Akku
- Akku-Kapazität: 1200mAh
- Akkuladung: kabellos mit Ladestation + USB-Kabel + 220V-Adapter
- Abmessungen: 13x9x9cm
- Gewicht: 200g

VERPACKUNGSGEHALT

- Ästhetisches Gerät BeautyRelax BR-2720.
- Ladestation.
- USB-Kabel.
- Adapter für 220V-Netz.
- Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG DES INSTRUMENTS

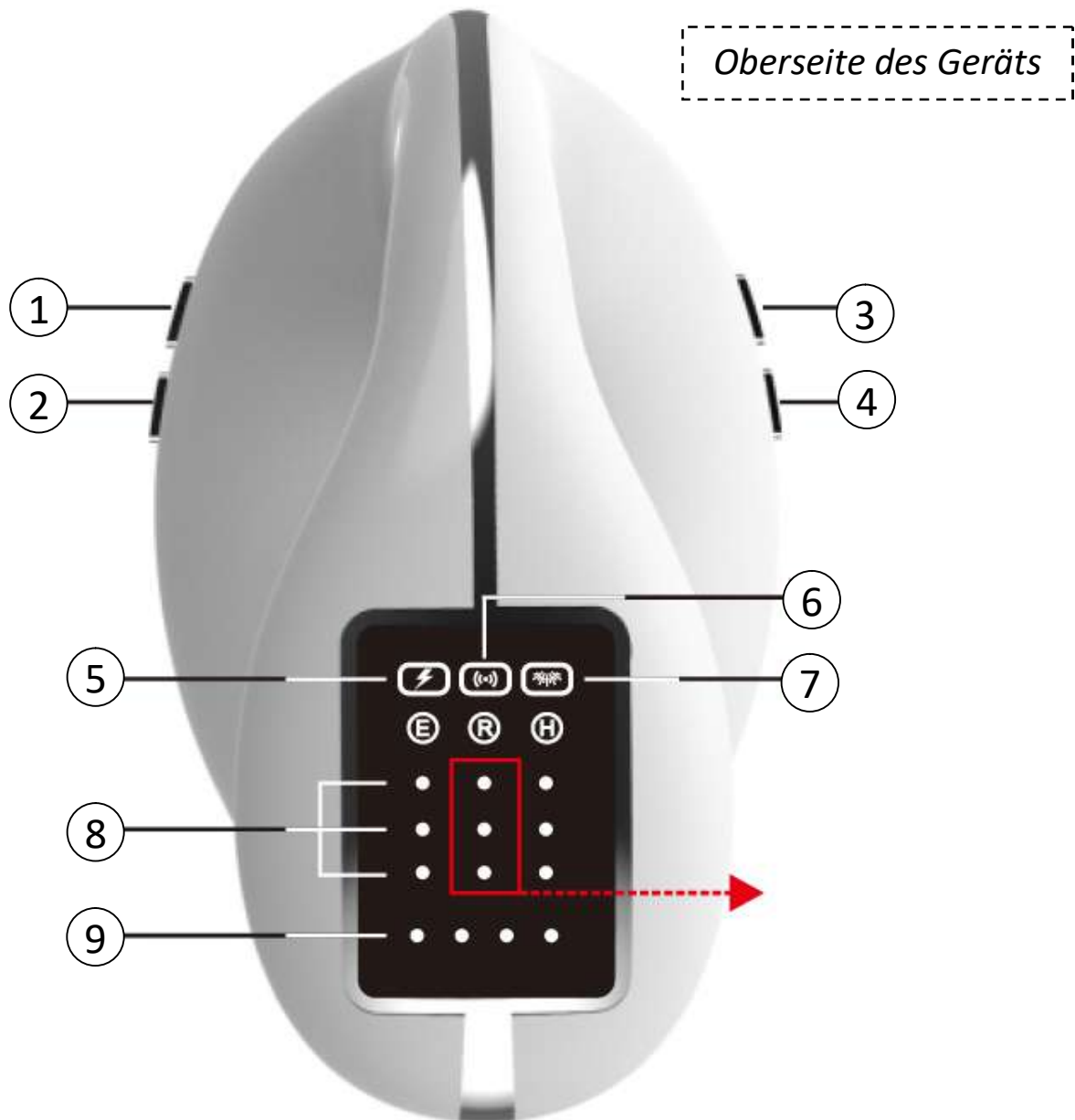


Oberseite des Geräts

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ON/OFF-Taste | 6. RF-Symbol für die Funkfrequenz |
| 2. MODE-Taste | 7. HIFU-Ultraschallwellen-Symbol |
| 3. Taste POWER INCREASE | 8. Anzeige der Leistungseinstellung |
| 4. Taste POWER REDUCTION | 9. Anzeige, dass das Gerät eingeschaltet ist |
| 5. EMS-Mikroimpuls-Symbol | |


BESCHREIBUNG DES INSTRUMENTS

Die Unterseite des Geräts

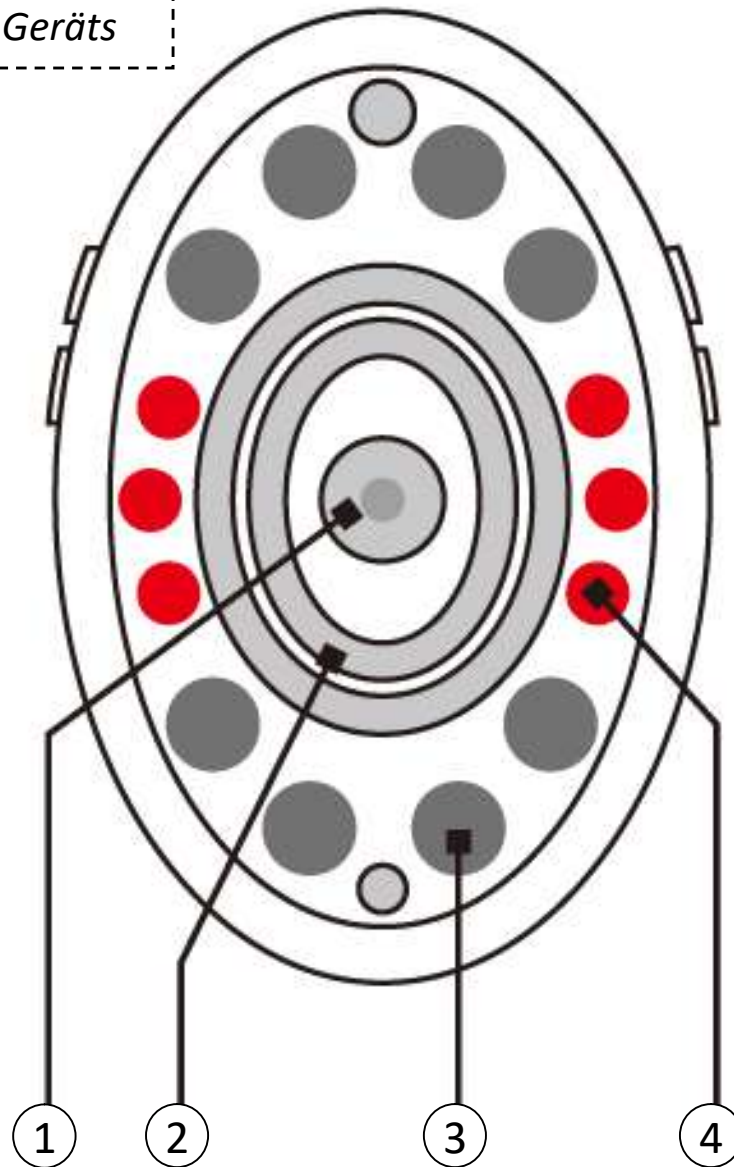

- 1. HIFU-Ultraschallwellen**
- 2. RF Funkfrequenz**
- 3. Massagebälle mit EMS-Impulsen**
- 4. Lichttherapie - Rotlicht**

BESCHREIBUNG DER ANZEIGE

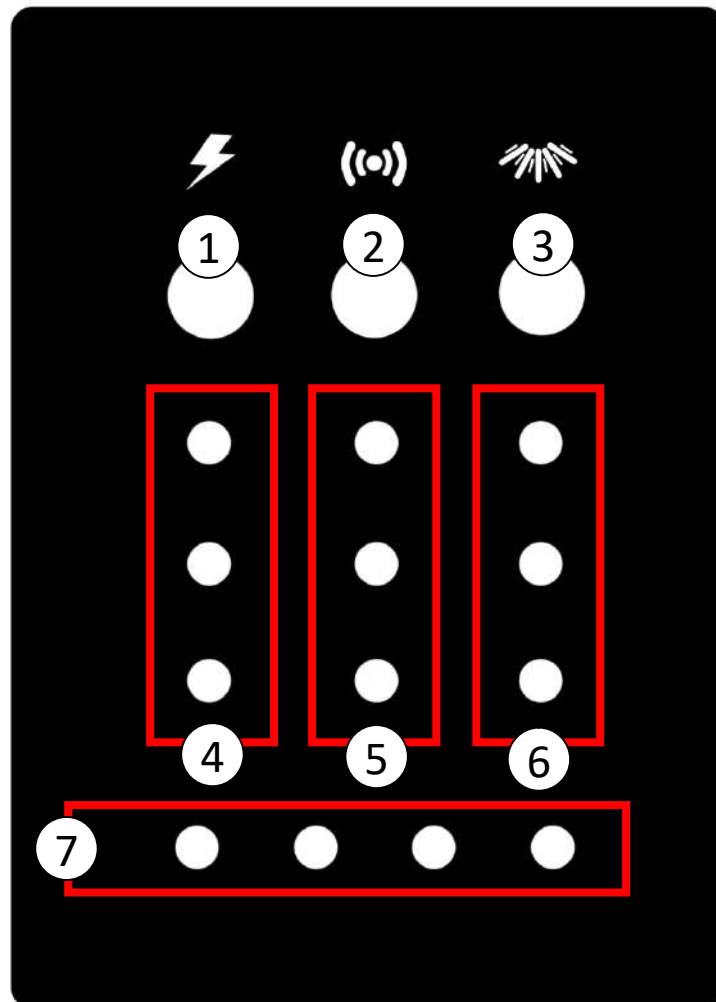

1. Anzeige der EMS-Pulsfunktion + rotes Licht
2. Anzeige der RF-Funkfrequenzfunktion + rotes Licht
3. HIFU-Ultraschall-Funktionsanzeige + rotes Licht
4. EMS-Impulsintensitätsstufe
5. Intensität der Funkfrequenz RF
6. HIFU-Ultraschall-Anzeigeebene
7. Anzeige des Gerätebetriebs

KONTROLLE UND VERWENDUNG DES GERÄTS

- 1.** Die Haut sollte vor jeder Anwendung gründlich gereinigt werden. Es ist ideal, die Behandlung nach einem Ganzkörperbad vorzunehmen. Die Haut sollte idealerweise frei von Haaren sein. Haare könnten eine unerwünschte Barriere zwischen dem Applikationskopf und der Haut bilden.
- 2.** Die Anwendung des Geräts sollte immer mit einem klaren, leitfähigen Gel (nicht im Lieferumfang enthalten) kombiniert werden. Das Anwendungsgel, SONOGEL genannt, kann in jedem Sanitätshaus (auch in der Apotheke) erworben werden. Das Gel ist für die Anwendung des Geräts sehr wichtig. Es bildet eine notwendige Haftschrift zwischen dem Applikator und der Haut. Es ist auf Wasserbasis. Es kann den Applikatorkopf nicht beschädigen. Die Verwendung des Applikatorgels ist unerlässlich. RF-Radiofrequenz, HIFU-Ultraschall und EMS-Impulse können sich besser mit der Haut verbinden. Verwenden Sie **keine anderen Arten von kosmetischen Produkten**.
- 3.** Laden Sie den Akku des Geräts nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör auf. Wenn Sie andere Typen verwenden, die nicht kompatibel sind, kann der Akku irreversibel beschädigt werden.
- 4.** Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der ON/OFF-Taste **(1)** ein. Das EMS-Programm wird automatisch aktiviert. Die Standard-Intensitätsstufe ist die niedrigste auf Stufe 1.
- 5.** Verwenden Sie die Tasten **INCREASE (3)** und **DECREASE (4)**, um die Intensität des EMS-Impulsausgangs einzustellen.
- 6.** Drücken Sie kurz die MODE-Taste **(2)**, um das HF-Programm zu ändern.
- 7.** Verwenden Sie die Tasten **INCREASE (3)** und **DECREASE (4)**, um die HF-Leistungsintensität einzustellen.
- 8.** Drücken Sie kurz die MODE-Taste **(2)**, um das HIFU-Ultraschallprogramm zu wechseln. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Um die HIFU-Ultraschallfunktion zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste **REDUCE (4)**. Das HIFU-Ultraschallprogramm wird aktiviert. Die voreingestellte Intensitätsstufe ist 1. Der Betrieb der HIFU-Ultraschallfunktion wird von einem akustischen Signal - einem Piepton - begleitet. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion, sondern um ein absichtliches akustisches Signal.

9. Verwenden Sie die Tasten **INCREASE (3)** und **DECREASE (4)**, um die Intensität des HIFU-Ultraschalls einzustellen.
10. Jedes Programm hat eine automatische Zeitvorwahl von 5 Minuten. Nach dieser Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
11. Sie können das Gerät jederzeit durch langes Drücken der ON/OFF-Taste **(1)** ausschalten.
12. Behandeln Sie ausgewählte Körperpartien. Bewegen Sie den Applikationskopf in kreisenden oder langen Bewegungen über den ausgewählten Bereich. Sie können auch die Stempelmethode verwenden. Weitere Informationen zu Körperbehandlungen finden Sie in den Abschnitten: **BODY TREATMENT OPTIONS** und **FACE AND NECK TREATMENT METHOD**.
13. Achten Sie immer darauf, dass die Kontaktflächen an der Unterseite des Geräts in vollem Kontakt mit der Haut stehen (sofern das Hautrelief dies zulässt). Dadurch wird eine maximale Wirksamkeit der Behandlung gewährleistet.
14. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, wischen Sie die Reste des Kontaktgels vom Gerätegehäuse und vom Applikationskopf ab. Weitere Informationen zur Pflege des Applikatorkopfes finden Sie im Abschnitt **Reinigung und Wartung**.
15. Wenn Sie den Akku aufladen müssen, gehen Sie wie im Abschnitt beschrieben vor: **AUFLADEN DES AKKUS**.
16. Nach der Behandlung mit dem Gerät können Sie eine feuchtigkeitsspendende kosmetische Creme auf Ihre Haut auftragen und sie natürlich trocknen lassen.



HINWEISE ZUR VERWENDUNG DES GERÄTS

1. Wie wir Ihnen in der Einleitung dieses Handbuchs bereits mitteilen konnten. Die Verwendung des Geräts ist eng mit dem Kontaktgel - dem sogenannten Sonogel - verbunden. Dies ist das gleiche Verfahren, das in ästhetischen Studien verwendet wird. Das Gel bildet eine notwendige Haftschrift zwischen den Kontaktflächen des Applikationskopfes des Geräts und Ihrer Haut. Wenn Sie das Gerät benutzen, kann das Gel allmählich auf der Hautoberfläche austrocknen. Behalten Sie die Gelschicht auf Ihrer Haut im Auge und tragen Sie bei Bedarf zusätzliche Mengen auf. Das Gel neigt dazu, allmählich an der Hautoberfläche zu trocknen. Der Applikationskopf ist für den Kontakt mit dem Gel ausgelegt. Das Gel kann das Gerät in keiner Weise beschädigen.
2. Das allmähliche Austrocknen des Gels während der Anwendung des Geräts äußert sich meist durch ein zwickendes Gefühl auf der Hautoberfläche. Tragen Sie in diesem Fall eine weitere Menge des Gels auf die Haut auf.
3. Verwenden Sie keine anderen kosmetischen Produkte in Verbindung mit der Verwendung des Geräts. Versuchen Sie auch, Sonogele mit anderen Zusatzstoffen zu vermeiden. In Verbindung mit der Radiofrequenztechnologie könnten sie bei empfindlicheren Personen eine allergische Reaktion hervorrufen.
4. Wenn Sie sich gerade erst mit dem Gerät vertraut machen, nehmen Sie sich Zeit. Versuchen Sie zu spüren, wie Ihr Körper die Technologie über die Hautoberfläche wahrnimmt.
5. Der Akku sollte über eine ausreichende Leistung verfügen, damit alle Funktionen des Geräts ordnungsgemäß funktionieren. Verwenden Sie zum Aufladen die im Lieferumfang enthaltene Ladestation.
6. Wenn Sie gezielt Falten im Gesicht behandeln, die Hautelastizität und Ihr eigenes Kollagen erhöhen möchten, ist die **RF-Behandlung** der wichtigste Modus. Wenn Sie sich auf die Stimulierung des Fettgewebes im Kinnbereich konzentrieren möchten, teilen Sie Ihre Behandlungszeit zwischen den Programmen **RF** und **HIFU** auf.
7. Das Produkt ist für alle Hauttypen mit unterschiedlichem Empfindlichkeitsgrad geeignet. Besonders im Gesichtsbereich gibt es Bereiche mit höherer Empfindlichkeit und weniger Unterhautfett. Die hohe Variabilität der Anwendung wird durch die Möglichkeit der Dosierungsleistung ermöglicht.

DAUER UND HÄUFIGKEIT DER NUTZUNG - KÖRPER

In der Einleitung des Benutzerhandbuchs haben wir beschrieben, welche Körperteile Sie mit dem Gerät ansprechen können. Jetzt werden wir versuchen zu erklären, wie Sie die Verwendung des Geräts am besten planen und welche Regeln Sie beachten sollten. Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die folgenden Richtlinien:

- Pro Tag kann nur ein Körperteil behandelt werden. Der gepaarte Körperbereich wird als ein Teil betrachtet. Sie können also an einem Tag den Bauch oder die Arme (rechte und linke Hände zusammen) oder die Innenseite der Oberschenkel (rechte und linke Beine zusammen) behandeln.
- Die Benutzung des Geräts sollte an einem Tag nicht länger als 25 Minuten dauern.
- Wenn Sie eine aktive Stimulation des Fettgewebes bevorzugen, ist die optimale empfohlene Programmkombination wie folgt: 5 Minuten **[EMS]** + 10 Minuten **[RF]** + 10 Minuten **[HIFU]** (Sie können die Programme in der gleichen Reihenfolge durchführen).
- Wenn Sie eine aktive Stimulation zur Hautstraffung im Gesichtsbereich bevorzugen, ist die optimale empfohlene Programmkombination wie folgt: 5 Minuten **[EMS]** + 20 Minuten **[RF]** (Sie können die gleiche Reihenfolge anwenden).
- Das Gerät kann maximal 3 Mal pro Woche verwendet werden (dies gilt für dieselben und verschiedene Körperteile).
- Die optimale Nutzungshäufigkeit ist daher z. B. Montag, Mittwoch, Samstag.
- Wiederholen Sie dieses Wochenprogramm innerhalb eines Monats.
- Wenn Sie das Gerät drei Wochen lang verwenden, empfehlen wir, die vierte Woche ganz auszulassen.
- Nehmen Sie das Gerät dann innerhalb eines dreiwöchigen Zyklus wieder in Betrieb.

DAUER UND HÄUFIGKEIT DER NUTZUNG - GESICHT

Im vorigen Absatz haben wir kurz die Dauer der Anwendung im Gesichtsbereich erwähnt. Es ist jedoch nicht möglich, die Dauer der Hautbehandlung auf die Sekunde genau nach vorgegebenen Tabellen zu bestimmen. Die Dauer der Hautstimulation mit Radiofrequenzwellen hängt in erheblichem Maße von mehreren Faktoren ab - Hautzustand, Alter des Anwenders, Hauttyp, Hautempfindlichkeit oder die Art und Weise, wie der Anwender seine Haut über einen längeren Zeitraum pflegt. Im Allgemeinen sollte die Behandlung bei der allerersten Anwendung einige Minuten dauern. Während der ersten Anwendung kann man schrittweise analysieren, wie die Haut auf die Radiofrequenzwellen-Technologie reagiert oder wie lange es dauert, bis die Haut nach der Behandlung nicht mehr berührungsempfindlich ist. Auf diese Weise lässt sich der zeitliche Abstand zwischen den Behandlungen bestimmen. Bei der Dauer der Behandlung sollte auch die Größe der Oberfläche des ausgewählten Bereichs berücksichtigt werden. Die Behandlung des gesamten Gesichtsbereichs dauert länger, da das Oberflächenrelief rauer ist.

HAUTTEST

Wir sind alle Originale. Es gibt eine Vielzahl von Hauttypen. Obwohl die Verwendung des Geräts vollkommen sicher ist, wird empfohlen, einen Hauttest durchzuführen, um festzustellen, ob die Verwendung unerwünschte Hautreizungen oder allergische Reaktionen verursacht.

1. Tragen Sie eine ausreichende Schicht Sonogel auf die Haut auf (z. B. auf einen Teil des Oberschenkels oder der Wade).
2. Behandeln Sie einen kleinen Teil der Haut abwechselnd mit den Programmen **[EMS] [RF] und [HIFU]** für insgesamt 15 Minuten.
3. Wenn auf der Haut innerhalb von 24 Stunden keine anormale Verfärbung aufgrund einer allergischen Reaktion auftritt, können Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung sicher verwenden.




WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DER HOCHFREQUENZ

- BeautyRelax Celluform Ultimate ist eine neue Generation von Kosmetikgeräten, die für nicht-invasive Hautbehandlungen entwickelt wurden. Das bedeutet, dass kein Teil des Applikationskopfes physisch unter die Haut eindringt.
- Voraussetzung für die Verwendung des Geräts durch den Benutzer in der häuslichen Umgebung ist ein nicht-invasiver Betrieb. Die Verwendung des Geräts erfordert nicht die Aufsicht eines ausgebildeten medizinischen oder kosmetischen Ästhetikers. Es ist jedoch unerlässlich, die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung stets zu befolgen. Nur so wird die Anwendung des Geräts so sicher und effektiv wie möglich sein.
- Die Behandlung sollte immer mit einem klaren, leitfähigen Gel kombiniert werden. Kann in jeder Apotheke oder jedem Sanitätshaus gekauft werden. Es kostet ein paar Dutzend Kronen. Auf jeden Fall ist das billigste genug. Zahlen Sie nicht, je teurer, desto besser. Der Hauptzweck des Auftragens einer feinen Gelschicht auf die Haut besteht darin, die Leitfähigkeit zu erhöhen. Radiofrequenzwellen, Ultraschallwellen und EMS-Impulse können sich so besser mit der Haut verbinden.
- **Beginnen Sie bei der Behandlung der Haut im Radiofrequenz-Modus immer mit der Intensitätsstufe 1. Erhöhen Sie die Intensität langsam und mit Bedacht. Bei höheren Intensitätswerten erreicht das Gerät eine sehr starke Hochfrequenzwellenleistung. Bitte beachten Sie dies genau und nehmen Sie die Anwendung des Gerätes nicht auf die leichte Schulter. Wenn Sie die Hitze zu stark spüren, reduzieren Sie die Leistung, beschleunigen Sie die Bewegung des Geräts über die Haut oder verkürzen Sie die tatsächliche Kontaktdauer des Applikationskopfes mit der Haut.**
- **Wenn Sie den Applikatorkopf zu lange an der gleichen Stelle auf die Haut halten und zudem die höchste Behandlungsstufe (Radiofrequenz) eingestellt haben, ist das Gerät stark genug, um Ihre Haut unangenehm zu verletzen. Gehen Sie daher bitte mit äußerster Vorsicht und Behutsamkeit an die Behandlung heran. Wenn das Gerät nicht stark genug ist, können die gewünschten Ergebnisse nicht erzielt werden.**
- **Sie können den Auftragskopf auf unterschiedliche Weise über die Haut bewegen. In kurzen, langen Strichen oder in kreisenden Bewegungen. Wenn Sie den Kopf zu lange in Kontakt mit der Haut halten (Radiofrequenz), sammelt sich eine Energiemenge an, die die Temperatur des Applikators erhöht. Die Temperaturerhöhung des Applikators ist keine Fehlfunktion des Geräts, sondern eine Nebenwirkung der Einwirkung von Hochfrequenzwellen über einen längeren Zeitraum hinweg.**
- Wenn möglich, vermeiden Sie mit dem Applikationskopf Bereiche mit sehr dünner und empfindlicher Haut. Wenn eine kleinere Schicht subkutanen Fett vorhanden ist, arbeiten Sie mit niedrigeren Leistungsstufen oder vermeiden Sie diesen Hautbereich ganz.
- Reinigen Sie die Kontaktflächen des Applikationskopfes nach jeder Behandlung gründlich. Ideal ist die Verwendung von reinem Alkohol zur Desinfektion. Trocknen Sie den Applikator in der letzten Phase gründlich ab. Feuchtigkeit kann zur Oxidation der Kontakte des Applikators führen. Dadurch wird die Lebensdauer der Kontaktfläche des Applikators erheblich verlängert.
- Ein Augenschutz ist bei der Verwendung des Rotlichts nicht erforderlich. Es wird jedoch dringend empfohlen, bei der Verwendung nicht längere Zeit direkt in die Lichtquelle zu schauen. Ein flüchtiger Blick stellt sicherlich kein Risiko dar.




OPTIONEN ZUR KÖRPERBEHANDLUNG

UNIVERSELLE MASSAGETECHNIK

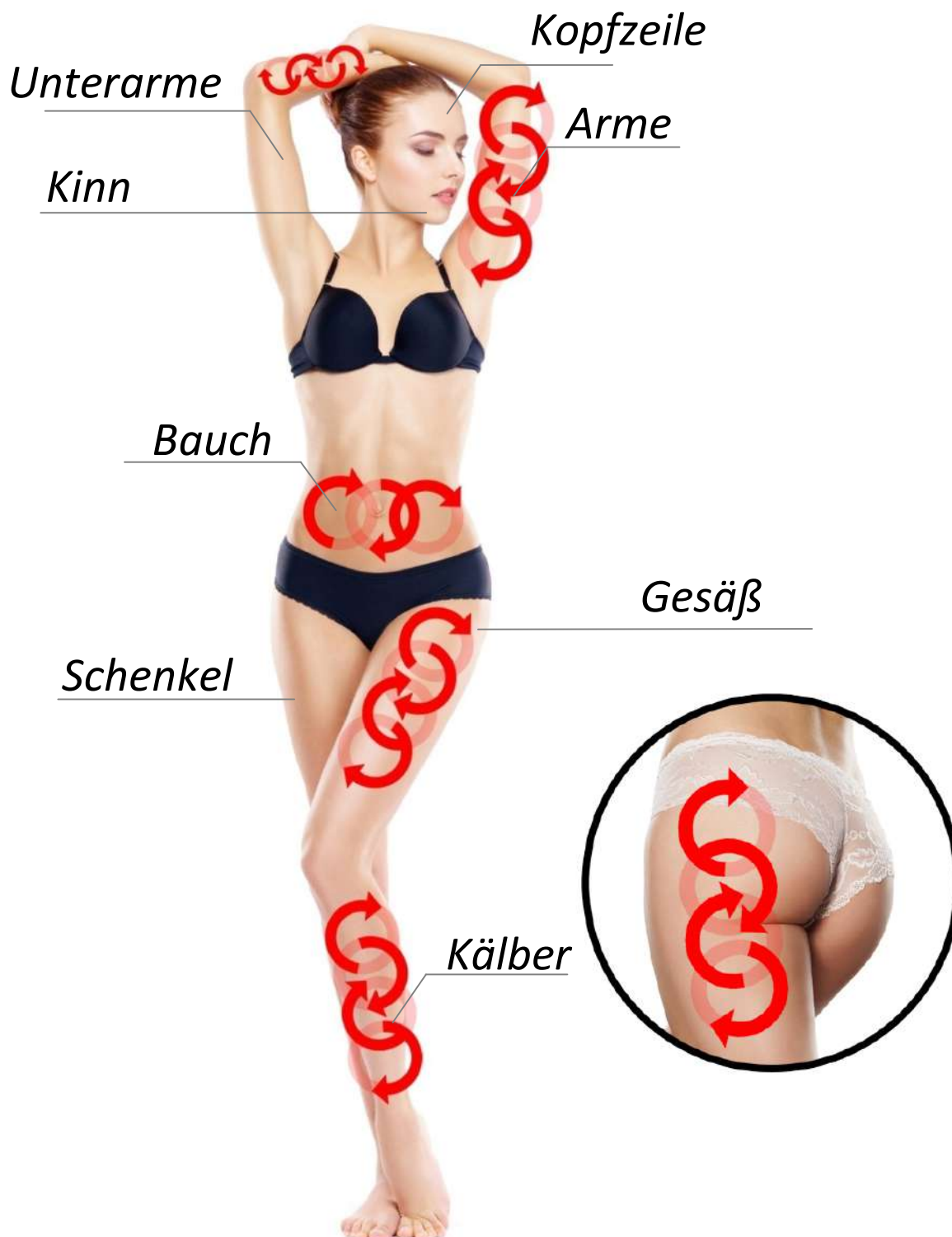

BART

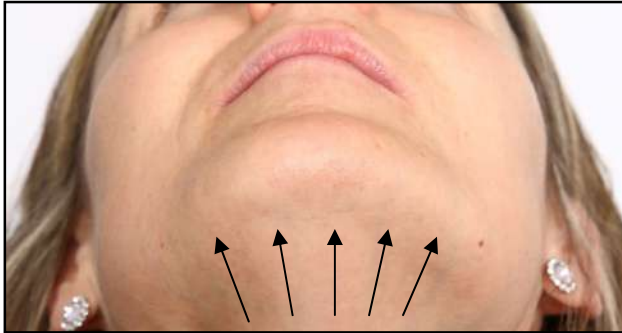

Bewegen Sie den Auftragskopf in kurzen, langen oder kreisenden Bewegungen. Sie können den Applikator auch an einer Stelle stehen lassen und ihn langsam bewegen. Versuchen Sie, den Schilddrüsenbereich so weit wie möglich zu vermeiden. Bringen Sie das Gerät so weit wie möglich, um möglichst viel vom

ARME



Machen Sie es sich bequem und entspannen Sie die Muskeln in Ihren Armen. Bewegen Sie den Applikationskopf des Geräts in Richtung der Schulter. Behandeln Sie nach und nach die Außen- und Innenseite des Arms. Führen Sie kurze, gerade Bewegungen aus, wie in der Abbildung gezeigt. Versuchen Sie, sich auf die Teile des Arms zu konzentrieren, an



Gehen Sie genauso vor wie im vorherigen Schritt. Führen Sie nun kreisende Zugbewegungen aus. Behandeln Sie auf diese Weise den ganzen Arm nach und nach. Konzentrieren Sie sich dabei auf den Bereich mit vermehrtem Fettgewebe.



Bewegen Sie den Applikationskopf in kreisförmigen Bewegungen. Behandeln Sie auf diese Weise den gesamten Bauchbereich. Versuchen Sie immer, den direkten Bereich des Bauchnabels zu vermeiden. Sie können sich im oder gegen den Uhrzeigersinn bewegen.



Bewegen Sie den Applikatorkopf in langen Strichen mit kleineren Kreisen. Behandeln Sie auf diese Weise den gesamten Bauchbereich. Versuchen Sie immer, den direkten Bereich des Bauchnabels zu vermeiden. Sie können sich im oder gegen den Uhrzeigersinn bewegen.



Bewegen Sie den Applikationskopf in langen, runden Bewegungen. Versuchen Sie, sich auf die Seite der Taille zu konzentrieren. Arbeiten Sie von oben nach unten und wiederholen Sie den Vorgang.

GESÄß



Bewegen Sie den Applikatorkopf in langen, runden Bewegungen von der Mitte des Gesäßes nach oben in Richtung Taille.



Bewegen Sie den Applikatorkopf in langen, runden Bewegungen von der Mitte des Gesäßes aus U-förmig nach oben zur Taille.



Bewegen Sie den Applikationskopf in langen, kurzen Bewegungen mit einer Schleife in der Mitte des Weges. Sie können auf diese Weise den gesamten Gesäßbereich behandeln



OBERSCHENKEL UND WADEN

Bewegen Sie den Applikationskopf in kurzen, geraden Bewegungen. Am besten von der Unterseite der Gliedmaße nach oben.



Bewegen Sie den Applikationskopf in langen, langen kreisenden Bewegungen. Am besten von der Unterseite der Gliedmaße nach oben.



Bewegen Sie den Applikationskopf in einer bogenförmigen Bewegung. Auf diese Weise können Sie sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite der Gliedmaße behandeln.

EMPFOHLENE TECHNIK FÜR DIE VERWENDUNG DES GERÄTS

Beim Auflegen des Applikationskopfes auf ausgewählte Körperteile können mehrere Massagetechniken angewendet werden. Auf diese Weise können Sie die Bewegungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Bei der Behandlung des Gegenübers durch aktive Kommunikation ist zu beobachten, inwieweit er die Wärmeeinwirkung der Radiofrequenz wahrnimmt. Hier werden zwei Arten der Arbeit mit dem Applikationskopf empfohlen:

reibungslose Bewegung

Führen Sie den Applikationskopf in längeren und kürzeren Abschnitten über den Körper - siehe Abbildung. Dehnen Sie mit der freien Hand die Haut so weit wie möglich. Das Gleiten über die Haut wird dadurch wesentlich erleichtert. Achten Sie immer darauf, dass die Haut mit dem Sonogel **so gut wie möglich befeuchtet wird**. **Stimulieren Sie die Haut niemals mit dem Applikationskopf "trocken"**. Durch die Stimulation der Haut in einer gleichmäßigen Bewegung wird die Gesamtkontaktzeit der Applikationsstifte mit der jeweiligen Stelle verkürzt. **Wenn Sie die Intensität der Radiofrequenz konstant halten, können Sie bei schnellerer Bewegung eine geringere Radiofrequenzexposition wahrnehmen als bei langsamer Bewegung.**

Stanzen

Halten Sie den Applikationskopf immer einige Sekunden lang auf die Haut (Stamping). Steigern Sie die Intensität immer je nach Gefühl. Bewegen Sie den Applikatorkopf kurz vor dem Erreichen des maximalen Wärmegefühls ein Stück weg. Die Hautbehandlung sollte nie unerträglich schmerzhaft, sondern angenehm sein. Nur ein erträgliches Wärmeempfinden ist akzeptabel. Wenn Sie den Applikatorkopf zu lange auf der Haut halten und zudem die höchste Behandlungsstufe eingestellt haben, ist das Gerät stark genug, um Ihre Haut unangenehm zu verletzen. Gehen Sie daher bitte mit äußerster Vorsicht und Behutsamkeit an die Behandlung heran.





Bemerkung:

Das gleiche Prinzip der Massagetechnik kann auch auf das Gesicht und die Kinnpartie angewendet werden.

METHODE ZUR BEHANDLUNG VON GESICHT UND HALS



Kopfzeile: von der Mitte weg bewegen
Stirn bis zum Rand, nach und nach den gesamten




Nase: von der Stirn um die Nase herum zur
Wange bewegen, von oben nach unten



Gesicht: Bewegen Sie Ihr Gesicht in Richtung des
von unten nach oben



Kinn: von der Kinnspitze entlang der
Gesichtskonturen, von unten nach oben bewegen

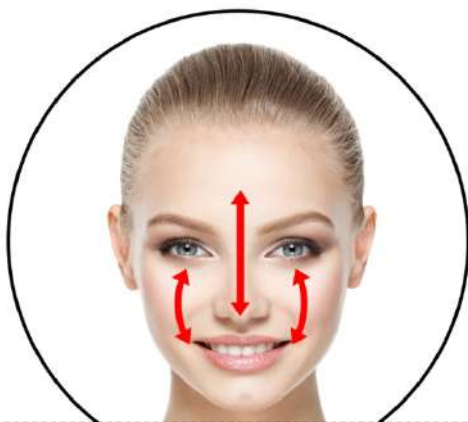

T zone: von der Stirn zur Nasenspitze bewegen
und Gesicht, Bewegung in beide Richtungen



Nacken: vom Kinn hinauf zum Ohr und dann
hinunter zum Hals bewegen

REINIGUNG UND WARTUNG

Die Verwendung des Geräts ist immer mit der Anwendung des Sonogels verbunden. Achten Sie stets darauf, dass der Applikationskopf nach Abschluss der Behandlung gereinigt wird. Wenn mehr als eine Person das Gerät benutzt, sollte die Oberfläche des Applikatorkopfes desinfiziert werden. Am besten mit einer alkoholischen Sprühlösung. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Applikator nach der Reinigung gründlich ab. Dadurch wird seine Lebensdauer erheblich verlängert.


BATTERIEAUFLADUNG

Das Gerät verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Das Gerät wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ständer aufgeladen. Laden Sie den Akku immer auf, wenn sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt. Um den Ladevorgang zu starten, stellen Sie das Gerät einfach auf den Ständer. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.

Verfahren zum Aufladen:

1. Verwenden Sie zum Aufladen nur das im Paket enthaltene Zubehör.
2. Verbinden Sie die Ladestation und den 220-V-Adapter mit einem USB-Kabel.
3. Der Ladevorgang beginnt automatisch, wenn Sie das Gerät in den Ständer stellen.
4. Am Ständer befinden sich zwei Kontaktstifte, die in die Stifte an der Unterseite des Geräts passen müssen.
5. Der Ladevorgang wird durch einen blinkenden Punkt auf dem Display angezeigt.
6. Wenn alle drei Punkte vertikal aufleuchten, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
7. Die Dauer des Ladevorgangs hängt vom Zustand des Akkus ab. Sie kann bis zu zwei Stunden dauern.

VOLL AUFGELADENER AKKU

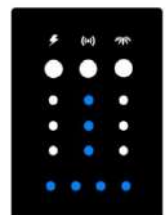

MÖGLICHE PROBLEME ZU LÖSEN

Das Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Batterie hat zu wenig Energie	Laden Sie den Akku des Geräts mit der Ladestation auf
Das Gerät schaltet sich nach ein paar Minuten automatisch aus	Der Timer hat sich aktiviert	Der Timer ist auf 5 Minuten eingestellt. Zur weiteren Verwendung muss das Gerät wieder eingeschaltet werden
Ich spüre die Auswirkungen der EMS-Impulse nicht	Die Haut ist zu trocken	Eine größere Menge auf die Haut auftragen Kontaktgel
	Sie bewegen den Applikationskopf zu schnell	Mit langsamen Bewegungen über die Haut fahren
	Anwendungsbälle sind nicht in vollem Kontakt mit der Haut	Die Kontaktflächen der Perlen des Applikationskopfes sollten in bestmöglichem Kontakt mit der Haut sein
Radiofrequenz verbrennt zu stark	Sie bleiben bei dem Gerät zu lange an einem Ort bleiben	Passen Sie die Bewegung des Applikatorkopfes auf der Haut an oder verkürzen Sie die Kontaktzeit mit der Haut
	Hohe Intensität	Reduzieren Sie die Intensität der RF-Funktion um eine Stufe oder auf 1 Stufe
	Die Haut ist zu trocken	Eine größere Menge auf die Haut auftragen Kontaktgel
Die Wirkung des HIFU-Ultraschalls ist zu intensiv	Die HIFU-Programstufe ist zu hoch eingestellt	Reduzieren Sie die Intensität der HIFU-Funktion um eine Stufe niedriger oder auf 1 Stufe

EMPFOHLENE INSTRUMENTE IM ZUSAMMENHANG

Eine nicht-invasive instrumentelle Behandlung des Fettgewebes wird idealerweise empfohlen, um die Aktivität des Lymphsystems des Körpers zu unterstützen. Professionelle Massagestudios bieten ähnliche Behandlungen auf die gleiche Weise an. Die Lymphmassage und die Unterstützung der Blutzirkulation tragen wesentlich dazu bei, die Gliedmaßen zu entwässern und alle unerwünschten Schadstoffe aus dem Blutkreislauf auszuspülen. Im Rahmen unseres Sortiments können wir Ihnen folgende Produkte zur Inspiration empfehlen, die sich effektiv mit dem BeautyRelax Celluform Ultimate kombinieren lassen:



BeautyRelax Massagegerät
Vacuform Premium



BeautyRelax Massagegerät
Vacuform



BeautyRelax Vacuform Exklusives
Vakuum-Drainage-Massagegerät



BeautyRelax Massagegerät
Lymfopress Premium

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND

ANTWORTEN

Wie sollte die Behandlung in der häuslichen Umgebung richtig durchgeführt werden?

Bitte lesen Sie alle Angaben in dieser Gebrauchsanweisung sehr sorgfältig, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Achten Sie besonders auf die Kontraindikationen. Wenn Sie sich über Ihren Gesundheitszustand unsicher sind, fragen Sie Ihren Hausarzt um Rat. Studieren Sie auch die Liste der Bereiche, die für die Behandlung mit jeder Technologie genau definiert sind. Nehmen Sie während der Behandlung eine liegende oder sitzende Position ein. Machen Sie es sich bequem. Tragen Sie etwas Leichteres, Bequemes.



Ich bin stark fettleibig. Ich bin stark übergewichtig. Ist die Anwendung der BeautyRelax Celluform Ultimate die richtige Lösung für mich?

Leider nein. In diesem Fall raten wir davon ab, das Gerät unter den oben genannten Umständen zu verwenden. Ein ästhetisches Gerät kann einen ungesunden Lebensstil nicht ausgleichen, bei dem Sie regelmäßig mehr Kalorien zu sich nehmen, als Ihr Körper auf Dauer verstoffwechseln kann. Wenn Sie stark übergewichtig sind, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Hausarzt oder einen Ernährungsberater zu wenden und den Prozess der Gewichtsabnahme unter professioneller Aufsicht anzugehen.

Für wen ist die BeautyRelax Celluform Ultimate geeignet?

Das ästhetische Gerät ist für alle geeignet, die innerlich davon überzeugt sind, dass sie wirklich an ihrem Aussehen arbeiten wollen. Trotz aller Bemühungen ist es nicht möglich, die unerwünschte Fettgewebeschicht an ausgewählten Körperstellen zu reduzieren. Dennoch ist er bereit, den nicht-invasiven Weg zu gehen und eine Operation mit dem Skalpell zu vermeiden. Das Gerät ist für alle gedacht, die bereits eine gewisse Ermüdung im Gesichtsbereich spüren. Die Haut hat ihre ursprüngliche Elastizität verloren. Das Auftreten von Falten ist erhöht.

Muss ich meine Ernährung während der Verwendung des Geräts in irgendeiner Weise anpassen?

Das stimmt. Wenn möglich, sollten Sie an dem Tag, an dem Sie das Gerät benutzen, keine wirklich schweren, fettigen Speisen essen. Wir denken dabei vor allem an Gerichte, die mit der Technik des Ölbratens zubereitet wurden. Wir empfehlen auch, auf gesüßte Getränke zu verzichten. Trinken Sie am besten nur reines Wasser oder mit frischem Fruchtsaft aromatisiertes Wasser. Durch eine leichtere Ernährung helfen Sie Ihrem Körper während der Anwendung des Geräts erheblich.

Muss ich während der Benutzung des Geräts irgendwelche Einstellungen an der Bewegung vornehmen?

Sie müssen die Nutzung des Geräts keineswegs mit sportlichen Höchstleistungen verbinden. Es ist jedoch ratsam - idealerweise am Tag der Nutzung - einen kurzen Spaziergang zu machen, zu laufen oder auf einem Laufband oder Fahrrad zu fahren. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Haus zu verlassen, sollten Sie sich zumindest leicht dehnen. Nutzen Sie Übungen, die Ihnen helfen, ein wenig außer Atem zu kommen. Wir betonen nochmals. Es besteht keine Notwendigkeit, sich extrem körperlich zu betätigen. Der Hauptzweck besteht darin, Ihr Lymphsystem und Ihren Stoffwechsel zu unterstützen, damit die bei der Stimulation des Fettgewebes freigesetzte Energie effizient genutzt wird. Das Timing nach der Anwendung des Geräts ist optimal.

Ist die BeautyRelax Celluform Ultimate-Behandlung schmerzhaft?

Die Behandlung ist völlig schmerzfrei und sicher, wenn alle Anweisungen in der Gebrauchsanweisung befolgt werden. Bei der Anwendung des EMS-Impulsprogramms können Sie ein Kribbeln auf der Haut spüren, sogar ein leichtes Kribbeln. Die begleitende Wirkung der Radiofrequenz ist ein Wärmegefühl. Die HIFU-Ultraschallwellen haben eine Abstufung von Wärme bis hin zu einem leichten "stechenden" Gefühl.

Welche Ergebnisse können bei der Stimulation des Fettgewebes erzielt werden?

Das Ergebnis wird von mehreren Faktoren stark beeinflusst. Das freigesetzte Fett muss vom Körper verarbeitet werden. Wie schnell er es verarbeitet, hängt in erster Linie von Ihrer Stoffwechselrate, der Art des Fettes (ob es in Muskelgewebe eingewachsen ist), dem Zustand Ihres Lymphsystems oder Ihrem Lebensstil ab. Betrachten Sie ein ästhetisches Gerät als ein nützliches Hilfsmittel, das Sie in Ihrem Bestreben, besser auszusehen, unterstützt. Um Ihre Traumziele zu erreichen, müssen Sie Ihren Lebensstil anpassen und sich mehr bewegen (wir sprechen immer noch von leichter körperlicher Betätigung, nicht von extremer körperlicher Anstrengung, an die Sie vielleicht nicht gewöhnt sind). Dies ist wichtig, damit die Prozesse, die das ästhetische Gerät in Ihrem Körper in Gang setzen wird, erfolgreich und effizient ablaufen können.

Warum ist es so wichtig, die Kontaktflächen des Auftragskopfes nach jedem Gebrauch zu pflegen?

Kontaktflächen sollten sorgfältig von Kontaktgel gereinigt und nach jeder einzelnen Anwendung gründlich desinfiziert werden. Von Zeit zu Zeit ist es ideal, ein Spray auf Alkoholbasis zu verwenden. Dadurch wird die Möglichkeit der Verbreitung von Bakterien verhindert und eine maximale Betriebshygiene gewährleistet. Wenn das Gerät von mehreren Personen benutzt wird, ist eine Desinfektion mit dem Spray nach jedem Gebrauch unerlässlich. Achten Sie darauf, den Applikationskopf gründlich mit einem Tuch zu trocknen. Dadurch wird die Lebensdauer der Kontaktflächen vervielfacht.

Kann mehr als eine Person das Gerät benutzen?

Ja, das ist möglich, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Achten Sie besonders auf die Desinfektion des Applikationskopfes. So verhindern Sie die Übertragung von Bakterien oder möglichen Hautkrankheiten. Verwenden Sie zur Desinfektion am besten eine alkoholische Sprühlösung. Trocknen Sie die Oberfläche des Applikationskopfes immer gründlich ab.

In welchem Zustand sollte die Haut unmittelbar vor der Anwendung von Radiofrequenz sein?

Die Haut sollte so sauber wie möglich sein. Frei von allen oberflächlichen Verunreinigungen. Der ideale Zeitpunkt ist nach dem Bad. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass es nicht ratsam ist, die Haut zu sehr mit heißem Wasser zu erwärmen.

Welche Produkte sollte ich nach der Behandlung mit dem Gerät verwenden?

Die Haut sollte nach der Anwendung des Geräts ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt werden. Wir empfehlen die Verwendung einer regelmäßigen Feuchtigkeitscreme. Die Haut braucht eine ausreichende Feuchtigkeitszufuhr für ihre Regeneration. Es ist ratsam, kosmetische Behandlungen wie Tiefenreinigung mit Diamant-Mikrodermabrasion oder heißen Dampf zumindest am Tag der Behandlung zu vermeiden. Nach der Radiofrequenzbehandlung ist die Haut leicht gereizt und kann sich röten. Nach der Radiofrequenzstimulation benötigt die Haut einige Zeit für die anschließende Regeneration.

Welche Ergebnisse kann ich erwarten? Wie wird sich die Radiofrequenz auf meine Haut auswirken?

Die Wirkung der Radiofrequenz ist sehr individuell und das Ergebnis hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn sich die Haut nach der Behandlung rötet, ist dies eine häufige Begleiterscheinung. Die Haut ist nach der Behandlung an der Oberfläche wärmer. In den folgenden Tagen werden die kollagenen und elastischen Fasern, die für die Qualität der Hautelastizität verantwortlich sind, allmählich neu modelliert. Die nicht-invasive Hautstraffung mit Radiofrequenz ist kein endgültiges Verfahren mit einer endgültigen Wirkung. Die Haut sollte regelmäßig entsprechend der empfohlenen Dauer und Häufigkeit der Anwendung stimuliert werden.

Wie kann Hochfrequenz wahrgenommen werden?

Wenn der Applikationskopf die Haut berührt, strömen Radiofrequenzwellen durch die Hautoberfläche in die Dermis und das Fettgewebe. Dieser Vorgang kann als Wärme wahrgenommen werden, die allmählich abnimmt. Das Wärmegefühl wird nicht durch die "Erwärmung" der Haut verursacht, sondern ist eine Nebenwirkung der Radiofrequenzenergie. Der Hauptzweck und das Wesen des Einsatzes von Radiofrequenzwellen besteht darin, die Dermis und die Fettgewebeschichten mit einer bestimmten Frequenz und Leistung genau zu treffen.

Kann der Applikatorkopf die Hautoberfläche verletzen?

Wenn das Gerät falsch verwendet wird, kann es das. Der Leistungsbereich ist bewusst so eingestellt, dass das gesamte Spektrum von Anwendern mit unterschiedlichen Hautempfindlichkeiten und unterschiedlichem Fettgewebe behandelt werden kann. Daher kann die Leistung des Geräts als leicht "überdimensioniert" bezeichnet werden. Einer der Hauptvorteile des Geräts ist die Flexibilität bei der Anwendung mit gezielten und ausgewählten Körperteilen. Die Anpassung der Leistungsdosierung ermöglicht die Behandlung auch sehr empfindlicher Bereiche. Bei größeren Flächen, die weniger empfindlich sind, kommt eine höhere Leistung zum Einsatz. Ein ästhetisches Gerät muss über ein ausreichendes Leistungspotenzial verfügen. Andernfalls wäre es nicht möglich, Behandlungen mit hoher Effektivität durchzuführen. Bei der Leistungsabgabe ist stets äußerste Vorsicht geboten.

Warum bietet das Gerät mehrere Technologien an? Gibt es angesichts der erwarteten Ergebnisse einen Zusammenhang zwischen den Technologien, die in den einzelnen Modi funktionieren?

Körperästhetik ist nicht nur ein Versuch, Fettgewebe zu reduzieren. Der menschliche Körper kann von einer Reihe unerwünschter Erscheinungen wie Cellulitis, schlaffer Haut mit verminderter Elastizität und schlaffen Muskeln begleitet sein. Jede Technologie hat ihre spezifische Bedeutung. Die Technologien schließen sich nicht gegenseitig aus. Bei der Verwendung des Geräts können die Programme untereinander ausgetauscht werden. In stark vereinfachter Form. Die Radiofrequenz wirkt in zwei Ebenen. Sie regt die Bildung von körpereigenem Kollagen an und stimuliert die Fettzellen. EMS-Impulse stärken aktiv die schlaffe Muskelstruktur. HIFU-Ultraschallwellen versuchen auf sehr einfache Weise, die Oberfläche der Fettzellen zu zerstören und die Energie freizusetzen, die die Fettzellen speichern. Rotes Licht ist eines der am häufigsten verwendeten Mittel im Bereich der Photonentherapie. Es hilft, die Pigmentproduktion zu unterdrücken.

Ist die Bewegungsrichtung des Geräts auf der Haut wichtig?

Ich bin sicher, dass es nicht so ist. Es spielt keine Rolle, ob Sie Kreise oder Linien auf Ihrer Haut "erschaffen". Sie können auf der Haut stehen bleiben und sich ein wenig weiterbewegen. Diese Methode nennt man Stamping. Das Wichtigste ist, die Geschwindigkeit zu beobachten, mit der sich der Applikationskopf über die Haut bewegt, und die Intensität entsprechend der Wahrnehmung der

Technik anzupassen. Die Behandlung sollte sich angenehm anfühlen. Nicht schmerzhaft. Wenn die Intensität höher ist, versuchen Sie, die Bewegung des Kopfes über die Haut zu beschleunigen.

Ist das Produkt ein Medizinprodukt?

Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Es gehört zur Kategorie der Massagegeräte. Das Gerät dient nicht der Behandlung von Fettleibigkeit oder einer anderen Krankheit. Das Gerät bietet Technologien, die bei Anwendung unter bestimmten Bedingungen dazu beitragen, subkutanen Fett zu reduzieren, das Erscheinungsbild von Cellulite zu verringern und die Elastizität der Haut zu erhöhen.

Verfügt das Gerät über eine Zertifizierung?

Instrument für die europäische Standardzertifizierung. Es erfüllt alle Normen, die für Geräte dieser Art vorgeschrieben sind. Um die Verwendung des Geräts so sicher wie möglich zu gestalten, befolgen Sie bitte sorgfältig alle in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Wo wird das Gerät hergestellt?

Wir lassen das Gerät in China nach unseren Anforderungen und Spezifikationen herstellen. Wir garantieren Standard-Garantie und Nachgarantieservice.

Ist das Gerät wasserdicht?

Ja, das Gerät ist wasserdicht nach IPX7-Standard zertifiziert.

EIN PAAR SÄTZE ZUM SCHLUSS

Die BeautyRelax Celluform Ultimate - so sagt man - täuscht den Körper. Und für dieses besondere Modell gilt das doppelt. Auf den ersten, zweiten und dritten Blick wirkt es klein und sehr leicht. Konservative Kunden könnten von dieser Tatsache überrascht sein. "Schließlich muss ein Gerät, um gut zu funktionieren, groß und schwer sein". Auf dem Gebiet der Ästhetik war und ist dies sicherlich nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Bei der Entwicklung neuer Modelle wird großer Wert auf einen hohen Benutzerkomfort gelegt. Das Gerät muss ergonomisch geformt sein, damit es gut zu halten ist. Es muss sehr leicht sein, damit man sich voll und ganz auf die Anwendung des Geräts konzentrieren kann. Eine Gesichtsbehandlung beispielsweise erfordert ein höheres Maß an Sorgfalt und Konzentration. Die Arbeit mit einem leichten Gerät ist in diesem Fall ein großer Vorteil. Die Abmessungen des Geräts werden vor allem durch die Vielseitigkeit der Anwendung beeinflusst. Das Design des Geräts stellt einen gewissen Kompromiss dar, wenn es darum geht, eine große Fläche an ausgewählten Körperteilen zu behandeln, gleichzeitig aber auch eine sehr kleine Fläche im Gesicht. Das Celluform Ultimate gehört definitiv zum Besten, was ästhetische Geräte für Endverbraucher in ihrer Kategorie zu bieten haben. Wie in der Gebrauchsanweisung angegeben. Das Gerät erbringt eine wirklich solide Leistung. Um einer Vielzahl von Anwendern gerecht zu werden und die geforderten Eigenschaften zu erfüllen, ist ein höherer Leistungsbereich notwendig. Man braucht keine Angst vor der Benutzung zu haben, aber ein gewisser Respekt vor der Leistung des Gerätes ist durchaus angebracht.



Martin Hrbek

www.beautyrelax.cz

ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf Produkten oder in Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden dürfen. Bringen Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiederaufbereitung und zum Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. In einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern können Sie Ihre Produkte auch bei Ihrem örtlichen Händler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu erhalten und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Abfallentsorgung ergeben können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, erkundigen Sie sich bitte bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Händler nach der korrekten Entsorgungsmethode.

ZERTIFIZIERUNG



Das Produkt ist für die Verwendung in den Ländern der Europäischen Union zugelassen und trägt das CE-Zeichen. Die Konformitätserklärung und alle Unterlagen sind beim Importeur erhältlich.

IMPORTEUR

SANTADRIA s.r.o. , Mojmírovo nám. 75/2 Brunn, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:

E-Mail: mh@santadria.cz

Druckfehler, Besonderheiten und Änderungen der technischen Parameter vorbehalten.

ES KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner, der das Unternehmen vertritt

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brunn 612 00

ID: 29195454

erklärt hiermit, dass das Produkt

Massagegerät zur Körperformung

eingeführt unter dem Modellnamen: **BeautyRelax Celluform Ultimate BR-2720**

EAN 8594166119604

mit den folgenden europäischen Normen übereinstimmt:

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3: 2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2: 2015

Aufgrund der Übereinstimmung mit diesen Richtlinien wurde das Produkt mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Das Produkt entspricht auch der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS). Alle Materialien sind gesundheitlich unbedenklich. Sie enthalten keine Schwermetalle wie Cadmium und andere giftige Stoffe.

Für einen sicheren Gebrauch ist es unerlässlich, die Anweisungen in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung genau zu befolgen.



Ort der Ausstellung Brno
Erscheinungsdatum: 1.3.2022
Geschäftsführer

The image shows a signature in blue ink over a company stamp. The stamp includes the company name 'SANTADRIA s.r.o.', the address 'Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno', and the identification number 'DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160'.

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek,