

MASSÁZS PISZTOLY MG10 PROFFESIONAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Köszönjük, hogy megvásárolta a
terméket
BODYSONIC Proffesional sorozat!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, olvassa el figyelmesen.


CHARGE

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort
2. Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd egy konnektorhoz.
3. A LED piros fény jelzi a töltést
4. Teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény zöld színű
5. Az akkumulátor bármikor újratölthető
6. Ne hagyja az akkumulátort 1 hónapnál hosszabb ideig lemerülni, mert visszafordíthatatlan károsodás következhet be, amelyre a garancia nem terjed ki.

A BODYSONIC masszázspisztoly egy mechanikus eszköz elektromos alkatrészekkel. Ha a készüléket vagy annak részét nem az utasításoknak megfelelően használják, fennáll a sérülés, az elektromos kisülés és a tűzveszély veszélye.

A MŰSZER LEÍRÁSA

1. Nyomásérzékelő és nyomásjelzés
2. Sebesség kiválasztása
3. Impulzus frekvencia kijelző
4. Az akkumulátor állapotjelzője

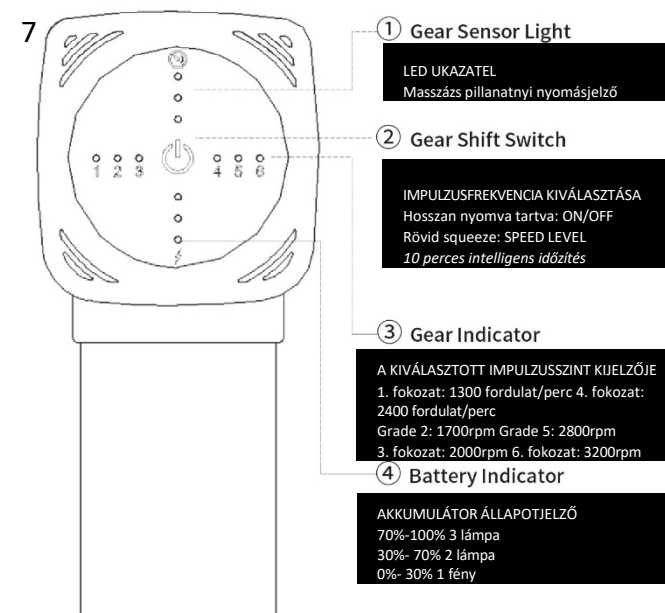

USE

A Bodysonic masszázspisztoly segít a testnek az edzés utáni regenerálódásban, és felgyorsítja az izmok bemelegedését az edzés előtt.

Használata ellazítja a triggerpontokat és javítja az izomkoordinációt és a mobilitást. Ez lehetővé teszi a sérülések és sérülések megelőzését a sportban vagy a fitnessben. A masszírozó emellett enyhíti a fájdalmat és elősegíti a jobb testtartást. Ellazítja a merev izmokat, beleértve az izomgörcsöket is. Mindez segít

az izmok jobb hidratálása és az izmok energiaellátásának helyreállítása érdekében. A BODYSONIC használatával kiválthatja a napi nyújtást.

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan az ON gombot (2. gomb) A hátoldalon lévő LED világít az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére.

2. Válassza ki a megfelelő masszázsféjet, és helyezze be a készülék elejébe. Ügyeljen arra, hogy a behelyezés egyenes legyen. Felszerelések cseréjekor óvatosan fogja meg a hüvelyt, és vegye ki a fejet. Soha ne vegye ki a tartozékokat a készülékből a masszázsrésznél fogva. A tartozékok kezelésénél fokozott óvatossággal kell eljárni a tartozék esetleges sérülése miatt.

4. Nyomja meg újra röviden a 2. gombot a pulzusszám aktiválásához. 01=1300rpm, minden további megnyomás növeli az impulzusszámot. A legmagasabb, 6-os szint

3200 impulzusnak felel meg percenként. A 2. gomb hosszú megnyomása kikapcsolja a készüléket.

5. A készülék elindítása után helyezze a testére, és lassú mozdulatokkal masszírozza a kívánt területeket. Használja az Önnek kényelmes nyomást. Nem kell sietnie, masszírozza lassan - minél lassabban, annál jobb (kb. 3 cm másodpercenként). Az egész testre maximum 10 percig tartó masszázs alkalmas; rendkívül fájó izmok esetén akár napközben is lehet 30-60 másodpercig alkalmazni a masszázst.

A készülék nem használható a fejen, a nemi szervek területén, a pajzsmirigyben, csontkinövésekkel vagy nyirokcsomókkal rendelkező területeken.

Ne használja a készüléket nyílt sebek esetén. Ha bizonytalan az eszköz használatával kapcsolatban, forduljon terapeutájához vagy orvosához.

6. Ha a masszázs befejeződött, kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gomb (2. gomb) hosszú megnyomásával.

7. A tartozékok cseréjekor óvatosan fogja meg a műanyag hüvelyt, és vegye ki a fejet. Soha ne vegye ki a tartozékokat a készülékből a masszázsrésznél fogva. A tartozékok kezelésénél fokozott óvatossággal kell eljárni a tartozék esetleges sérülése miatt.

8. Az MG10 Proffesional masszázspisztoly intelligens időzítővel és nyomásérzékelővel van felszerelve. Az Ön biztonsága és védelme érdekében a masszázspisztoly 10 perc után kikapcsolja magát, vagy ha túl nagy a nyomás a masszázs során.

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, hagyja 1,5-2 órán át töltődni. Töltés közben a töltésjelző világít. SOHA NE HAGYJA AZ AKKUMULÁTORT FELÜGYELET NÉLKÜL TÖLTŐDNI. SZAG VAGY EGYÉB GYANÚ ESETÉN AZONNAL VÁLASSZA LE A KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATRÓL!!!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készüléket az alábbi biztonsági előírásoknak megfelelően kell használni.

1. A készülék kizárólag felnőttek számára készült
2. Ne végezzen masszázst a csupasz testen. A masszázs területét ruhával vagy tiszta, száraz törölközővel kell letakarni. Kezdje a gyengéd alkalmazást alacsony sebességgel.
3. Az egy ponton végzett masszázs időtartama nem haladhatja meg a 60 másodpercet!
4. A legnagyobb sebességet csak a test lágy szöveti területein használja. A masszázs nem lehet fájdalmas vagy kényelmetlen.
5. Soha ne használjon nagy sebességet és nagy nyomást olyan területeken, ahol csontok és ízületek vannak.
6. Mindig megfelelő masszázsfejet használjon

7. A nagy sebesség és a nagy nyomás gyakori használata ugyanazon a helyen bőrhorzsolásokat és egyéb problémákat okozhat. Ha fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a használatát.

8. Tartsa az ujjakat, a haját és más testrészeket biztonságos távolságban a gép elejétől és a motortól. Sérülés történhet

9. Ne takarja le a motor szellőzőnyílásait

10. A készülék nem érintkezhet vízzel

11. Ne szedje szét vagy javítsa meg a készüléket saját maga.

12. NE használja a készüléket töltés közben

KARBANTARTÁS

Használat után nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd száraz ruhával szárítsa meg.

A masszázsfőket átlagosan 90 naponta kell cserélni. Intenzív használat esetén 30 napos használat után.

MEGJEGYZÉS

Soha ne végezzen masszázs víz alatt, tartsa a készüléket távol a víztől és más folyadékoktól vagy hőforrásoktól. Mindig ellenőrizze a motor szellőzőnyílásait, hogy azokat semmi ne zárja el.

Soha ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket.

Ne használja a készüléket a harapási területen vagy a C4-es és a feletti nyakcsigolyáknál.

Legalább 1 óra használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja pihenni 30 percig.

A töltés után húzza ki a töltőt a konnektorból.

Ne kapcsolja be a készüléket töltés közben.

A MASSZÍROZÓ HASZNÁLATA A SÉRÜLT TESTRÉSZEKEN TILOS. HASZNÁLATÁHOZ MINDIG FORDULJON ORVOSHOZ.

Ne használja a készüléket orvosa jóváhagyása nélkül, ha Ön:

Terhes, szövődényes cukorbeteg, például neuropátia, friss műtéten átesett, migrénben szenvedő epilepsziás, ízületi pótláson átesett, nem teljesen cselekvőképes vagy 18 év alatti és nem illetékes felügyelet alatt álló, illetve sérült retinával, pacemakerrel, sérvvel, gerincsérvvel, műízülettel vagy a test bármely részének fém pótlásával rendelkező személy.


Ezek a diagnózisok nem zárják ki teljesen a vibrációs eszköz használatának lehetőségét, de felhívják a figyelmet arra, hogy használat előtt konzultáljon egy hozzáértő orvossal. A vibrációs berendezések és a testmozgás konkrét egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatásainak kutatása folyamatban van. Ez valószínűleg azon állapotok fenti listájának rövidüléséhez vezet, amelyek esetében nem helyénvaló a készülék használata. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs eszközök használata a kezelésben és a rehabilitációban számos esetben megfelelő eszköznek bizonyul. A vibrációs eszközök használatát azonban mindig az adott esetben az orvos vagy fizioterapeuta konzultációjával összhangban kell végezni.

AZ ALAPFEJEK ÉS A MASSZÁZS TÍPUSÁNAK LEÍRÁSA



Stainless Steel Head

Strong massage and good feeling

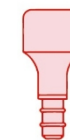

Stainless Steel Cylinder Head

Strong massage and good feeling



Ball Head

for large muscle groups (quads, glutes, etc.) Or extrem soreness.



Fork Head

for neck, spinal, calves, etc



Cone Head

Apply to strike the deep tissue, joint, feet, wrist, etc



Flat Head

For general use, relax for whole body muscles.

Rozsdamentes acél fej: erős masszázs. Könnyen tisztítható és karbantartható, érzékeny bőrre és olajos masszázsra alkalmas.

Rozsdamentes acél hengerfej: erős masszázs. Könnyen tisztítható és karbantartható, érzékeny bőrre és olajos masszázsra alkalmas.

Gömbfej:

A masszázsfő gömb alakú kialakítása alkalmas az izmok edzés előtti és utáni ellazítására, kompromisszumot teremtve a pontstimuláció és a masszázs között.

az érintett izomzat és a környező izomszövetek gyengéd ellazításával. Ez a fejtípus lehetővé teszi mind az érintett terület erősebb nyomását, mind a környező pontok gyengéd stimulálását. A masszázsfajda gömb alakja alkalmas a derék, a has, a combok és a fenék lazítására és ellazítására.

Villásfej: Az érintett izom a másodlagos pontokon közvetve is stimulálható. Masszázsfajda alakú az "U" betű lehetővé teszi az érintett terület közvetlenül szomszédos izmainak aktív masszírozását. A fej formájának köszönhetően hosszú és keskeny izmok masszírozására alkalmas a gerinc, a vádli izmai, a nyak területe stb. Az érzékeny terület közvetett masszírozása nem okoz fájdalmat.

Kúp alakú fej: Az egyszerű, kúpos forma lehetővé teszi a közvetlen hatást a mélyszöveti masszázsa. Alkalmas a lábfej, a kéz, a csukló, a hát és az izmok kisebb területeinek stimulálása és a Trigger Pontok aktiválása.

Lapos fej: Kisebb és rövidebb gomba alakú kialakítás, amely enyhén lekerekített masszázsfajdával rendelkezik, és a következőkre van szabva az egész test masszírozására és ellazítására, különösen a lapos izmok, hátizmok stb. területén.

Szolgáltatás.

Az ügyfelek az értékesítés utáni szolgáltatásokhoz a vállalat műszaki ügyfélszolgálatához fordulhatnak: servis@bodysonic.cz, vagy a www.bodysonic.cz weboldalon a Carefree Panaszok opciót használhatják. kérjen segítséget közvetlenül a kereskedőtől.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ESIN s.r.o. kijelenti, hogy a berendezés megfelel az Európai Közösség vonatkozó előírásainak. A termék CE-jelöléssel van ellátva.

A készülék akkumulátorral van felszerelve. Ne dobja az elemeket a háztartási hulladékba. Cégünk a REMA kollektív rendszer tagja. A gyűjtőpontok listája a www.remabattery.cz oldalon érhető el.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot kérésre a info@bodysonic.cz címen lehet beszerezni.

Ez a termék nem szolgál szakmai diagnózissal, krónikus betegségek kezelésére, és nem helyettesíti az orvosi kezelést.

IMPORTŐR: ESIN s.r.o.

Plaská 622/3, 150 00 Prága

www.bodysonic.cz

info@bodysonic.cz



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Shenzhen BYS Testing Co., Ltd.
Floor 4, Building 2, No.38 Guangda Road, Yuanshan Street,
Longgang district, Shenzhen, China
Tel:0755-28268814 Web:Http://www.bys-cert.com

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo certifikátu : **BYS-C201902590C**

Sestavitel : **Shenzhen Yuway Technology Co., Ltd.**
dokumentace: 2F Building A, 58# 2nd Industrial Area, Houting, Shajin, Bao'an,
Shenzhen, China
Výrobce : **Hopthink (Shenzhen) Industry Co., Ltd.**
4F,18-2 Yuquan east road, Gongming street, guangming new district,
Shenzhen, China
Produkt : **Elektrický masáže**
Model : **YWMG-03**
YWMG-01, YWMG-02, YWMG-04, YWMG-05, YWMG-06, YWMG-07,
YWMG-08, YWMG-09, YWMG-10, YWMG-11, YWMG-11, YWMG-12,
YWMG-13, YWMG-14, YWMG-15, YWMG-16, YWMG-17, YWMG-18,
YWMG-19, YWMG-20
Test Standardy : EN 55014-1:2017,
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55014-2:2015
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010,
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2004+A1:2017

EUT popsaný výše byl testován podle uvedených standardů a shledán ve shodě s rozhodnutím EMC directive 2014/30/EU. Je možné používat označení CE pro ujištění o shodě s tímto EMC nařízením. Je platné pouze s test reportem číslo: **BYS-C201902590R**.



Shenzhen BYS Testing Co., Ltd.
Floor 4, Building 2, No.38 Guangda Road, Yuanshan Street,
Longgang district, Shenzhen, China
Tel:0755-28268814 Web:Http://www.bys-cert.com

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo certifikátu : **BYS-C201902591C**

Sestavitel : **Shenzhen Yuway Technology Co., Ltd.**
dokumentace: 2F Building A, 58# 2nd Industrial Area, Houting, Shajin, Bao'an,
Shenzhen, China
Výrobce : **Hopthink (Shenzhen) Industry Co., Ltd.**
4F,18-2 Yuquan east road, Gongming street, guangming new district,
Shenzhen, China
Produkt : **Elektrický masáže**
Model : **YWMG-03**
YWMG-01, YWMG-02, YWMG-04, YWMG-05, YWMG-06, YWMG-07,
YWMG-08, YWMG-09, YWMG-10, YWMG-11, YWMG-11, YWMG-12,
YWMG-13, YWMG-14, YWMG-15, YWMG-16, YWMG-17, YWMG-18,
YWMG-19, YWMG-20
Test Standardy : EN 60335-1:2012+A11:2014

EUT popsaný výše byl testován podle uvedených standardů a shledán ve shodě s rozhodnutím LVD directive 2014/35/EU. Je možné používat označení CE pro ujištění o shodě s tímto LVD nařízením. Je platné pouze s test reportem číslo: **BYS-C201902591R**.

