


návod k použití šiacu masážní polštář NP-PM01

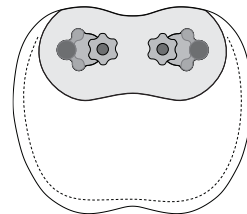

Důležité

Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit. Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtete pokyny.

Omezení záruky


1. Nepovolená údržba, chybné zacházení, náraz, nedbalost, zneužití, vylití kapaliny, nehody, úpravy, použití jiného než dodávaného příslušenství, stržení nebo úprava nálepek nebo značek proti padělání.
2. Vypršení záruční lhůty.
3. Jakékoliv ztráty zapříčiněné zásahem vyšší moci.
4. Jiné závady než: výrobek nelze zapnout; masážní funkci nelze po zapnutí přístroje spustit; vyhřívání nelze po zapnutí přístroje spustit; jiné závady hardwaru způsobující nepoužitelnost výrobku.
5. Jiné než výše uvedené závady vzniklé působením lidského faktoru.

Údržba výrobku

1. Masážní polštář je třeba skladovat na suchém a chladném místě. Nesmí být vystaven slunečnímu světlu a vysokým teplotám a nesmí být omýván vodou. Nerozebírejte polštář sami, nepřekrucujte jej, netahujte za něj, nepůsobte na něj velkým tlakem delší dobu a zabraňte vzniku plísní a srážení vlhkosti na těle polštáře.
2. Osoby, které byly zvyklé používat tradiční polštáře, si budou muset zhruba jeden týden na výrobek zvykat.

Představení výrobku

Tento výrobek odpovídá ergonomickým proporcím a napodobuje šijové masážní techniky. Je doplněný vyhříváním, fyzicky masíruje krční svaly a kosti. Spojuje tradiční domácí textilie s moderním masážním mechanismem. Poskytuje masáž krku a úlevu tělu.

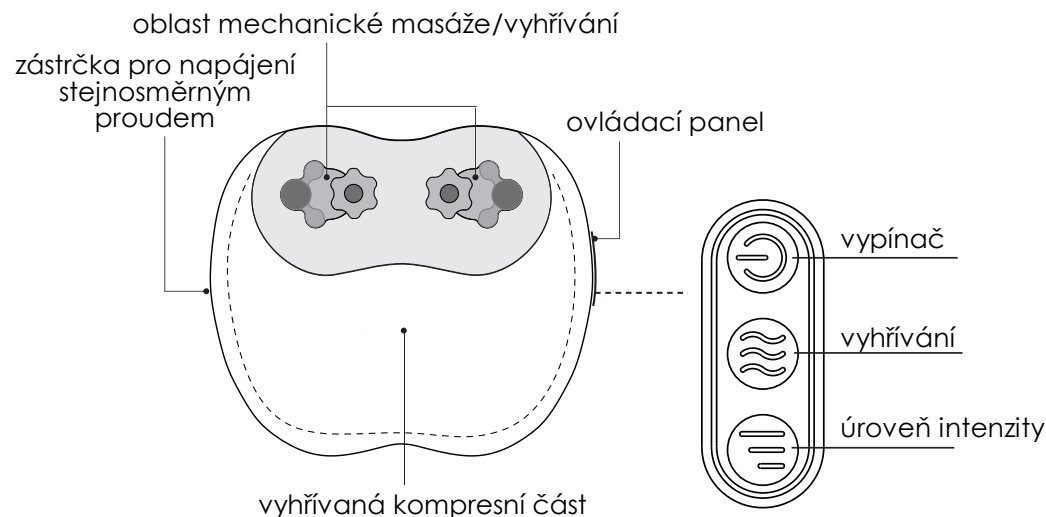

Jak přístroj použít

- Ověřte si, zda jsou všechny součásti přístroje v pořádku.
- Připojte kabel adaptéru do zdířky v polštáři.
- Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do správné elektrické zásuvky.
- Po použití přístroj vypněte, odpojte kabely. Pokud přístroj pracuje, vypněte jej tlačítkem a odpojte kabely.

Pokyny k používání

Zapnutí/vypnutí

- Přidržením tlačítka  po dobu 1,5 sekundy přístroj zapnete. Výchozí režim je nastavený na jednu minutu standardní masáž, jednu minutu přední masáž, jednu minutu zpětná masáž. Ve výchozím režimu je zapnuto vyhřívání polštáře.

Funkce vyhřívání

- Krátkým stiskem  vypnete či zapnete masážní hlavici a druhou vyhřívací zónu.

Přepínání intenzity

- Krátkým stiskem  přepínáte úrovně 1, 2 a 3. Po startu je zapnuta intenzita číslo 2.

Automatické vypnutí

- Po zapnutí se přístroj po 15 minutách činnosti automaticky vypne.

Pozor

- Přístroj nepoužívejte, máte-li implantovaný kardiostimulátor.
- Přístroj není určen pro osoby s maligním nádorem.
- Přístroj není určen pro osoby s poruchami nervových zakončení souvisejících s diabetem.
- Nepoužívejte přístroj, máte-li teplotu.
- S přístrojem nemohou manipulovat a neměly by používat osoby, které nedokáží vyjádřit svoji vůli.
- Vyhřívané povrchy by neměly používat osoby citlivé na teplo.
- Přístroj nevystavujte vysokým ($\geq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) ani nízkým teplotám ($\leq -5\text{ }^{\circ}\text{C}$). Neumísťujte jej na vlhká místa, abyste předešli poškození elektronických součástí.
- Zabraňte pádům a nárazům přístroje. Mohlo by dojít k poškození elektronických součástí a přístroj by se tak stal nepoužitelným.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu a zdrojům tepla.
- Přístroj sami nerozebírejte, neopravujte a neupravujte.
- Přístroj nesmí přijít do styku s chemikáliemi typu benzenu a rozpouštědel.
- Polštář není voděodolný a neměly by na něj dopadat kapky tekutiny.
- Do výrobku se nesmí dostat cizí předměty.
- Mechanická masáž pracuje 15 minut a pak se automaticky zastaví. Vyhřívání pracuje 15 minut od zapnutí a pak se automaticky vypne.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Prohlášení o obsahu jedovatých a nebezpečných látek ve výrobku

název součásti	nebezpečné látky					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBBs	PBDEs
tělo polštáře	○	○	○	○	○	○
síťový adaptér	X	○	○	○	○	○
ovladač	X	○	○	○	○	○

Tato tabulka je v souladu s nařízením SJ/T11364:

O: Značí, že obsah nebezpečných látek ve všech jednotlivých materiálech výrobku je v souladu s nařízením GB/T26572-2011.

X: Značí, že obsah nebezpečných látek je nejméně v jednom jednotlivém materiálu součásti výrobku nad limit nařízení GB/T, jak je stanovený v 26572-2011.

Poznámka: Některé součásti značené „X“ obsahují nebezpečné látky, které překračují standardy kvůli platným průmyslovým standardům. V současné době není možné tyto látky nahradit nebo jejich množství omezit.

Technické údaje

Název výrobku: šiacu masážní polštář

Modelové číslo přístroje: NP-PM01

Rozměry: 33 x 38 x 9 cm,

Hmotnost: 1350 g

Příkon: 24 W

Napájení: 12 V $\equiv$ 2 A

Poznámka: Jako zdroj napájení lze použít pouze přiložený síťový adaptér.

Seznam příslušenství: 1x masážní polštář, 1x síťový adaptér, 1x návod k použití

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz