



VIBRATION PLATE



SVP01

A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a HASZNÁLATI KÉZIKÖNYVET, és fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre.

Figyelem

Használati környezet..

Ne használja a terméket nedves vagy poros környezetben, hogy elkerülje az áramütést vagy a mechanikus alkatrészek meghibásodását. .

Ne használja a terméket, ha a beltéri hőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot.

Ne használja a terméket a szabadban vagy közvetlen napfényben.

Kérjük, használja a terméket sima padlón.

Kérjük, várjon egy órát a termék használata előtt, amikor az alacsony hőmérsékletről magas hőmérsékletre vált, hogy megakadályozza a vízgőz lecsapódását a gépen, ami meghibásodást okozhat.

Az alább felsorolt feltételek mellett nem ajánlott a Termék használata:

(Használat előtt feltétlenül konzultáljon orvosával)

A betegek, akik udner kezelés vagy nem érzik jól magukat;

Pateints with malignant tumor;

Terhes nők vagy menstruációs időszakban lévő nők;

Szívbeteg;

Csontritkulásos betegek;

Szívrítmus-szabályozóval vagy más orvosi elektronikus eszközzel beültetett személyek;

Művégtaggal rendelkező emberek;

A rezgésre és megerőltető testmozgásra érzékeny emberek.

Figyelmeztetés működés közben

Használat előtt kérjük, vegye le az órát, karperecet, telefonkagylót vagy más értékes tárgyakat és kulcsokat, kést vagy más metsző tárgyakat, hogy elkerülje a sérülést vagy a test sérülését.

Ne dohányozzon a termék használata közben.

Kérjük, ne használja a terméket más orvosi berendezésekkel együtt.

Kérjük, ne használja a terméket orvosi kezelésre.

Ne használja a terméket közvetlenül étkezés vagy ital után.

Használat közben kérjük, tartsa távol a gyermeket vagy a háziállatot a terméktől. Tilos az ujjakat vagy más idegen testeket a középső fedél és az alapfedél közötti részbe helyezni.

A 10 év alatti gyermekek és a 60 év feletti személyek felügyelete szükséges a termék használata során.

A termék terhelhetősége 150 kg; ennél nagyobb súlyú személyek számára nem ajánlott a termék használata.

Ez a termék csak egyszemélyes használatra korlátozódik.

FIGYELMEZTETÉS

Engedély nélküli szétszerelés, szétszerelés vagy felújítás nem megengedett az áramütés vagy a meghibásodások megelőzése érdekében. Kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a helyi kereskedővel, ha bármilyen szervizmunkára van szükség.

Az alábbi feltételek mellett hagyja abba a Termék használatát, majd kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a tápegységből.

Véletlenül víz vagy más folyadék fröccsen a Termékre vagy a vezérlőegységre.

Bármely tartozék sérült, vagy belső alkatrész van kitéve.

Feelabnormális vagy súlyos nyereség a használat során.

Áramkimaradás.

Viharos vagy villámlo időjárás.


Dugó és tápkábel

Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a termékhez megadott feszültségnek. Az áramütés elkerülése érdekében ne húzza be a hálózati dugót nedves kézzel. A tápkábel kihúzásához inkább a dugót fogja meg, mint a tápkábelt. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és húzza ki a dugót a tápegységből, ha elektromos hiba van, vagy hosszabb ideig nem használja. Hagyja abba a termék használatát, ha a tápkártya ha sany sérülést, kapcsolja ki a ower kapcsolót, húzza ki a dugót, és forduljon szakemberekhez javítás céljából.


A termék funkciója



PROGRAMOK

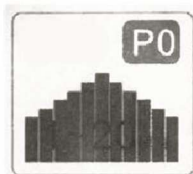

P0 - hasi nyújtás

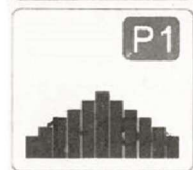


P1 - relax stretching



P2 - gyengéd mozgás nyújtás



P3 - futó nyújtás

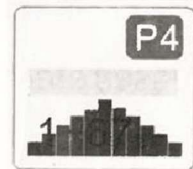


P4 - kocogva nyújtás



P5 - gyors gyalogló nyújtás



P6 - séta nyújtás

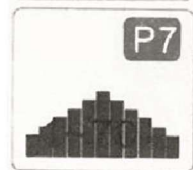

P7 - átlagos nyújtás



P8 - magas szintű nyújtás



P9 - szívnyújtás



START/STOP: Helyezze be a hálózati csatlakozót, kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a gombot a termék leállításához. A gép működése közben nyomja meg ezt a gombot a működés leállításához.

TIME: Időcsökkentés: az alapértelmezett munkaidő 10 perc, 10 szintre osztva, az idő csökkentéséhez nyomja meg ezt a gombot.









Sebesség +: Sebességnövelés: kézi 1-20. Nyomja meg ezt a gombot a sebesség növeléséhez, amikor a gép működik.

Time +: Időnövelés: az alapértelmezett munkaidő 10 perc, 10 szintre osztva, az idő növeléséhez nyomja meg ezt a gombot.

Sebesség -: Sebességcsökkentés: kézi 1-20. Nyomja meg ezt a gombot a sebesség csökkentéséhez, amikor a gép működik.

Megjegyzés: a távirányító jelének hatékony vételi tartománya 2,5 méter, a vezérlő infravörös sugárzási jelzőjének a termék infravörös vételi ablakához kell igazodnia.

Módszer használata


			
<p>EGÉSZTEST-GYAKORLATI TARTÁS: Állj a tányérra, és nyújtsd ki a lábad olyan szélesre, mint a vállad. Ez segít javítani az általános keringést és az izomtónust.</p>	<p>GUGGOLÁSI TARTÁS: Guggolás közben a lábadat nyújtsd ki olyan szélesre, mint a vállad, a térdeidet pedig hajlítsd be 90 fokig, ha tudod, és tartsd meg a pozíciót. Ez remekül alkalmas a comb edzésére.</p>	<p>PRESS-UP POSTURE: Nyújtsa ki a karját olyan szélesre, mint a válla. Ha jobban szeretné megmozgatni az izmokat, hajlítsa be a könyökét 90 fokban, és tartsa ezt a pozíciót.</p>	<p>ALACSONY LÁBAK PÓZÍCIÓ: Az alsó lábszáradat, mint látható, tedd a tányérra, a kezed pedig támaszd magad mögött a földre. A mélyebb gyakorlathoz emelje fel az ülését a padlóról, és nyomja le a vádliját.</p>
			
<p>HÁJHEGYELEM HÁBORÚ PÓZIS: Nyújtsa ki a lábát, hajoljon derékban, és tegye a kezét a tányérra. A mélyebb gyakorlathoz hajlítsa be a könyökét.</p>	<p>EGYLÁBOS LÁB PÓZÍCIÓ: Tegye az egyik lábát a pedálra, és lazítson. A mélyebb gyakorlathoz lökdössön előre, nagyobb testsúlyt helyezve a tányérra.</p>	<p>ÜLŐPÓTIKA I: Üljön úgy, hogy a fenéke a rezgő lemezen legyen. Üljön kényelmesen, egyenes háttal.</p>	<p>ÜLŐTARTÁS II: Széken ülve tegye a lábát a tányérra. Ez remek módja a feszültség oldásának, és segíthet javítani a lábak keringését.</p>

Funkció és jellemzők

Testszépség: a nyugodt és nagyfrekvenciás rezgés és a különböző edzés utáni gyakorlatokkal kombinált módon ez a gép mélyen stimulálja az izomszövetet, csökkenti a zsírfelhalmozódást, rehabilitálja az izom rugalmasságát, gyönyörű testformát, majd a felhasználók vitalizálódnak és magabiztosak.

Mozgó módszer

Két fogantyú a középső fedél két végén. A Termék mozgatasakor emelje fel a görgővel ellentétes végét, fogja meg a fogantyút, és mozgassa a terméket a kívánt helyre.

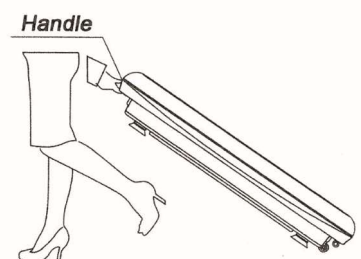

Tárolás és karbantartás Felület tisztítása

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, és a csatlakozó dugót kihúzta a csatlakozóaljzatból. A gumipedál és a burkolatok tisztíthatók mosószert tartalmazó ruhával, a mosószert azonban egy ronggyal el kell távolítani.



FIGYELMEZTETÉS: Ne tisztítsa a terméket maró hatású tisztítószerrel, például benzollal vagy hígítóval, mivel ez a termék kifakulását, korrózióját vagy repedését okozhatja. A rövidzárlat elkerülése érdekében ne fröccsenjen víz a Termékbe.

Tárolás és karbantartás

meghibásodását okozhatják, csak száraz ruhát használjon.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, és a dugó ki van húzva a tápegységből.

Tisztítsa meg a portól és a szennyeződésektől a terméket, és tartsa tisztán, és tartsa távol a magas hőmérsékletű és páratartalmú helyektől.

Gyakori problémák és megoldások hálózatban, a por bejutásának megakadályozása érdekében a Termékre porálló borítást (de magára) kell helyezni.

1. Vészleállás: A konzolon lévő led mutatja az "Er-3" jelzést, a NYÁK-on lévő led háromszor villog.
2. Csatlakozási hiba: A konzolon az "ER-4" jelzést mutatja, a nyomtatott áramkörön négyszer villog.
3. Az elektronteljesítményű elektroncső meghibásodása: A konzolon lévő LED "ER-5"-öt mutat, a NYÁK-on lévő LED ötször villog.
4. Áram túlterhelés: A konzolon lévő led mutatja az "ER-6" jelzést, a NYÁK-on lévő led hatszor villog.
5. Hirtelen leállás: A konzolon a LED "ER-7" jelzést mutat, a NYÁK-on lévő LED hét alkalommal villog.
6. Blokkolt memóriák: A konzolon lévő LED "ER-8" jelzést mutat, a NYÁK-on lévő LED nyolcszor villog.
7. Alacsony feszültség: A konzolon lévő led "ER-9" jelzést mutat, a NYÁK-on lévő led kilencszer villog.

Műszaki leírás

Névleges feszültség: 220-240 VAC 100-120 VAC

Névleges teljesítmény: 200 W

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Maximális felhasználói súly: 150 kg

Cikk neve:	
EAN-kód:	
Az értékesítés	

GARANCIÁLIS

GARANCIA KÁRTYA

1. Az Eladó a Kezes nevében a Lengyel Köztársaság területén az eladástól számított 24 hónapos időtartamra garanciát vállal: 24 hónap.
2. A Garanciát az üzlet vagy a szervizközpont az ügyfél által nyújtott garancia után ismeri el:
 - egyértelműen és helyesen kitöltött garanciajegy az eladási bélyegzővel és az eladó aláírásával - érvényes vásárlási igazolás a berendezésről, amely tartalmazza az eladási dátumot / számlát / - kifogásolt termék.
3. A garanciaidő alatt feltárt esetleges hibákat és károkat a terméknek az üzletbe vagy a szervizbe történő átadásától számított legfeljebb 21 napon belül díjmentesen ki kell javítani.
4. Amennyiben egyes alkatrészek behozatalára van szükség, a garancia időtartama meghosszabbítható az ilyen alkatrész behozatalához szükséges időtartammal, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 40 napnál.
5. A garancia nem terjed ki:
 - mechanikai sérülések és későbbi hibák,
 - a berendezés helytelen tárolásából és rendeltetésellenes használatából eredő károk és hibák,- helytelen összeszerelés és karbantartás,
 - az olyan elemek sérülése és fogyasztása, mint: kábelek, szíjak, gumi alkatrészek, pedálok, szivacsmarkolatok, kerekek, csapágyak stb.
6. A garancia megszűnik, ha:
 - az érvényességi idő lejárt,
 - önjavítás,
 - a helyes működés szabályainak be nem tartása.
7. A garanciajegyekből nem állítanak ki másodpéldányokat.
8. A javításra átadott terméknek teljesnek és tisztának kell lennie. Ha egyes alkatrészek hiányoznak, a szerviz jogosult megtagadni a termék javításra történő átvételét. A szerviz az ügyfél írásbeli engedélye után megtagadhatja a szennyezett termék átvételét, vagy az ügyfél költségére kitaríthatja azt.
9. A garancia nem terjed ki az összeszereléssel, karbantartással kapcsolatos tevékenységekre, amelyeket a használati utasítás szerint a felhasználó köteles maga elvégezni.
10. A Garanciavállaló arról is tájékoztat, hogy garanciavállalás utáni szolgáltatást is nyújt.
11. A terméket az eredeti csomagolásában kell benyújtani, és a szállításhoz biztosítani kell.

Az eladott árukra vonatkozó garancia nem kizárólagos, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő azon jogosultságait, amelyek a terméknek a megállapodásnak való meg nem feleléséből erednek.

A BERENDEZÉS NEM REHABILITÁCIÓS ÉS TERÁPIÁS CÉLOKRA SZOLGÁL

MEGJEGYZÉSEK A JAVÍTÁSOK MENETÉRŐL

Tétel	A bejelentés dátuma	A rendelkezés időpontja	A javítások menete	A címzett aláírása (üzlet, tulajdonos)
