


ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE LAIFEN WAVE

Kurzanleitung für die Benutzung

Die Wahl des richtigen Bürstenkopfes

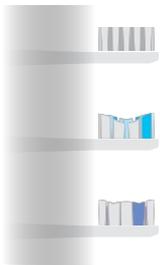

Zahnfleischpflege - extra sanft
Für sanftes und komfortables tägliches .

Super-Clean - Super-Reinigung
Hochwirksame Reinigung, die ein frisches Gefühl hinterlässt.


Ultra-Whitening - mit Bleicheffekt
Wirksame Reinigung, die die Zähne aufhellt und glättet.

Starten und Auswählen eines Modus

- 1) Setzen Sie den ausgewählten Bürstenkopf ein.
- 2)  Halten Sie den Schaltknopf zwei gedrückt, um den Flugmodus auszuschalten.
 - * Drücken Sie leicht auf die Taste.
 - * Zwischen dem Griff und dem Bürstenkopf befindet sich ein 1 mm breiter Spalt, um die Übertragung von Vibrationen zwischen den beiden Teilen der Bürste zu reduzieren.
- 3)  Einfaches Drücken - Einschalten/Pause; doppeltes Drücken - Umschalten des Modus
 -  Modus 1 / Modus 2 / Modus 3

Wenn die Zahnbürste in ist, drücken Sie die Taste, um sie zu unterbrechen. Wenn die Pause länger als 10 Sekunden dauert, schaltet die Zahnbürste automatisch in den Schlafmodus.

* Weitere Informationen zu den Modi finden Sie im detaillierten .

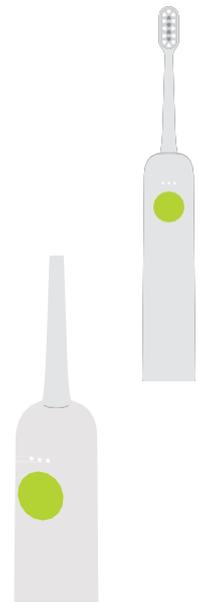

Einstellen der Reinigungsmodi

Verwendung der Laifen-App

- 1) Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den App-Store, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Android




iOS



- 2) Schalten Sie die Zahnbürste ein. Die Aktivitätsanzeige muss leuchten.
 - * Wenn Sie Hilfe beim Anschließen von Laifen benötigen, lesen Sie bitte das ausführliche .
- 3) Öffnen Sie die App und tippen Sie auf , um Ihr Gerät zu finden.
Tippen Sie dann auf das Gerät mit der Bezeichnung LFTB01-X-XXXX, um es zu verbinden (XXXX ist die Geräteidentifikationsnummer).
- 4) Stellen Sie die Reinigungsmodi über die Parameter Vibrationsstärke, Rotationsbereich und Rotationsgeschwindigkeit ein.

Professionelle Zahnreinigung

- 1) Geben Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf den Zahnbürstenkopf, befeuchten Sie ihn mit Wasser und schalten Sie die Zahnbürste ein.
Bevor Sie die Zahnbürste einschalten, nehmen Sie sie in den Mund, um Spritzer der Zahnpasta zu vermeiden.
- 2) Richten Sie die Zahnbürste so aus, dass sie sich an der Grenze zwischen Zahnfleisch und Zähnen befindet. Kippen Sie die Zahnbürste in einem Winkel von 45° nach oben und führen Sie sie so, dass sie einige Sekunden lang auf jedem Zahn bleibt.
- 3) Alle 30 Sekunden vibriert die Bürste, um Sie daran zu erinnern, den Reinigungsbereich zu wechseln.*
Nach 2 Minuten Putzen schaltet die Zahnbürste automatisch in den Schlafmodus.
*Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert. Sie muss von der Anwendung aktiviert werden Laifen.
- 4) Spülen Sie den Mund mit Wasser aus, wenn Sie mit dem Zähneputzen fertig sind.

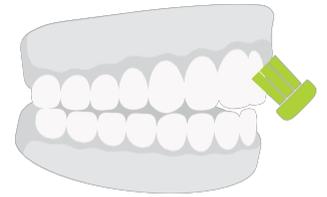

Ausführlichere Informationen über das Produkt und seine Verwendung sind auf der offiziellen Laifen-Website zu finden:
www.laifentech.com

Garantie und technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe benötigen, um Probleme bei der Verwendung des Produkts zu lösen, andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen usw., kontaktieren Sie uns bitte über die Website

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Garantiezeit 2 Jahre ab dem Kaufdatum.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Prag 9 - Horní Počernice 193 00, Tschechische Republik



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz