




X Pro Elite

Užívateľský manuál SK

Popis zariadenia

Dotykový displej
Ovládanie posúvaním prstom nahor a nadol.

Bezdrôtové nabíjanie
Bezdrôtová nabíjacia základňa sa používa spolu so silikónovým držiakom.

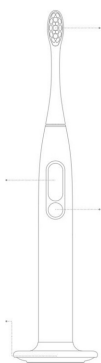

Hlavica kefy
Pri výmene hlavice kefy ju vytiahnite a nasadte vo zvislej polohe. Neotáčajte ju doľava ani doprava. Zubní lekári odporúčajú vymeniť hlavicu kefy každé dva až tri mesiace.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Po zapnutí zubnej kefy krátkym stlačením tlačidla počas chodu zubnej kefy pozastavíte prevádzku, ďalším krátkym stlačením do 15 sekúnd prevádzku obnovíte. Ak nevykonáte žiadnu operáciu dlhšie ako 15 sekúnd, displej sa vypne a zubná kefka sa prepne do režimu spánku.

Začínáme

Tlačidlom zapnutia/vypnutia zapnete zubnú kefku a aktivujete funkciu Bluetooth. Zubná kefka potom zostane v pohotovostnom režime. Funkcia Bluetooth bude tiež trvalo zapnutá.

Program čistenia zubov

Bez akýchkoľvek zmien nastavenia bude zubná kefka v prednastavenom režime pracovať 2 minúty v základom čistiacom programe (Standard Clean). Zubná kefka upozorní používateľa na potrebu zmeny oblasti čistenia zmenou intenzity vibrácií každých 30 sekúnd a automaticky sa zastaví po 2 minútach prevádzky.

Inštalácia aplikácie a nastavenie zubnej kefy

Môžete si stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Oclean App a v nej zubnú kefku pripojiť a nastaviť. Po naskenovaní QR kódu na stiahnutie aplikácie Oclean APP vyhľadajte a pripojte svoju zubnú kefku v aplikácii.

Poznámka: Pokus o pripojenie zubnej kefy v ponuke „Systémové nastavenia – Nastavenia Bluetooth“ v telefóne nebude fungovať.

Naskenovaním kódu QR sa spustí inštalácia aplikácie, ktorá vám umožní nastaviť rôzne funkcie zubnej kefy, napríklad: zapnutie/vypnutie funkcie „upozornenie na zmenu oblasti čistenia po 30 sekundách“, zapnutie/vypnutie funkcie „automatické zníženie frekvencie čistenia zubov“ atď. Okrem toho si môžete prispôsobiť vlastný program čistenia zubov a odoslať ho priamo do zubnej kefy.

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie sonickej zubnej kefy Oclean X Pro Elite. Pre plné využitie všetkých funkcií si stiahnite aplikáciu a preveďte osobné nastavenie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na predajcu, alebo distribútora produktu.

Distribútor:

BELdental s.r.o., Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika, tel: + 420 596 638 223, email: obchod@beldental.cz

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento výrobok je určený osobám starším 12 rokov.
- Tento výrobok sa môže používať len s originálnymi náhradnými hlavicami Oclean. Výrobca nezodpovedá za škody vyplývajúce z použitia necertifikovaných hlavic kefiel iných výrobcov.
- Tento výrobok je určený len na osobné použitie a neodporúča sa na lekárske účely ani na použitie viacerými používateľmi.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Zubnú kefku neumiestňujte na priame slnečné svetlo. Odporúčame ju umiestniť na suchom, dobre vetranom mieste.
- Pred nabíjaním udržiajte telo zubnej kefy a nabíjajúcu základňu v suchu a čistote. Pravidelne čistite suchou handričkou.

Varovanie

- Neodporúča sa, aby kefku používali osoby, ktoré v poslednom čase podstúpili chirurgický zákrok v ústnej dutine. Ak sa liečite s ochorením ústnej dutiny, máte ochorenie ďasien, alebo nestabilnú protézu, konzultujte použitie tejto kefy so zubným lekárom.
- Osoby so zdravotným a/alebo telesným postihnutím by mali výrobok používať iba pod dohľadom opatrovníka.
- Zubná kefka nie je vhodná pre osoby so zníženými duševnými a fyzickými schopnosťami. Nie je vhodná pre deti do 12 rokov. Deti, ktoré tento výrobok používajú, by mali byť pod príslym dohľadom dospelých osôb.

Nastavenia zubnej kefy je možné vykonať aj prostredníctvom dotykovej obrazovky bez pripojenia k aplikácii. Môžete si vybrať zo štyroch režimov: Standard Clean (bežné čistenie), Massage (masážne), Whitening (bielenie) a Sensitive (jemné čistenie), ako aj zvoliť dĺžku a intenzitu čistenia.

Správa o čistení zubov

Po dokončení čistenia zubov sa na displeji výrobku zobrazí čas čistenia, výsledky čistenia a upozornenie na „slepé“ miesta práve dokončeného čistenia zubov (detekcia nevyčistených zón pomocou 6osého gyroskopu na detekciu pohybu upozorní na miesta, ktoré nečistíte dobre).

Ak chcete získať prístup k nastaveniam, potiahnite prstom nahor a nadol po obrazovke alebo potiahnite prstom doľava a doprava po displeji. Po dokončení nastavenia si zubná kefka nastavenia automaticky zapamätá a následná prevádzka sa bude riadiť novými nastaveniami.

Ak chcete upraviť intenzitu, potiahnutím prsta po obrazovke nahor a nadol zmeníte úroveň intenzity na „plus 1“ alebo „minus 1“ a potiahnutím prsta po okraji obrazovky nahor a nadol zmeníte úroveň intenzity na „plus 5“ alebo „minus 5“.



Potiahnite prstom nahor/nadol.



Stlačením tlačidla ON/OFF potvrdíte nastavenie.

Nabíjanie zubnej kefy

Pred nabíjaním osušte telo a potom ho položte na bezdrôtovú nabíjajúcu základňu na nabíjanie. Stav nabíjania môžete zistiť pomocou indikátora na bezdrôtovej nabíjajúcej základni a úroveň nabitia batérie pomocou percentuálneho stavu batérie zobrazeného na displeji. Nenechávajte zubnú kefku na bezdrôtovej nabíjajúcej základni zbytočne dlho po úplnom nabití. Keď je zubná kefka úplne nabitá, vždy ju vyberte z bezdrôtovej nabíjajúcej základne a dobite ju, až keď vás zubná kefka upozorní na vybitú batériu.

Tento výrobok používa mechanizmus bezdrôtového nabíjania. Odporúčame prístroj nabíjať len v prípade potreby. Ponechanie zubnej kefy na bezdrôtovej nabíjajúcej základni dlhší čas než je nevyhnutné, môže viesť k predčasnému vybitiu zabudovanej batérie, čo môže ovplyvniť zážitok z používania.

Montáž na stenu

Zubná kefka sa dodáva s držiakom na stenu, ktorý šetrí miesto.



Inštalácia spodnej časti nástenného držiaka

Pri umiestňovaní zubnej kefy na nástenný držiak sa ubezpečte, že smeruje nahor.

Odporúčaná technika čistenia zubov



Pomaly pohybujte zubnou kefkou pod uhlom 45° medzi zubnou kefkou a líniou ďasien. Počas tohto procesu nie je potrebné ručne pohybovať kefkou nahor a nadol.



Rukoväť zubnej kefky držte jemne, pohybujte ňou pomaly krúživými pohybmi a nevyvíjajte nadmerný tlak.



Po vyčistení zubov si vypláchnite ústa čistou vodou.

Technické údaje

Názov produktu	Sonická zubná kefka Oclean
Číslo modelu	Y2087
Model	X Pro Elite
Stupeň ochrany IP	IPX7
Výkon tela zubnej kefky	1,5 W
Nabíjanie	nabíjacia základňa WP01
Vstup	5 V 0,3 A
Dĺžka prevádzky*	35 dní (v základnom režime)
Kapacita batérie	800 mAh
Čas nabíjania	3,5 h
Bluetooth	Bluetooth 5.0 a vyšší

* Pri čistení dvakrát denne po dobu 2 min.



- Spotrebič nerozoberajte, sami neopravujte, nestláčajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Zubnú kefku nepoužívajte, ak je batéria poškodená (napr. vypuklá).
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám.
- Batériu nepoužívajte, ak bola vystavená vlhkosti.
- Na nabíjaciú základňu neumiestňujte žiadny iný kov, iba zubnú kefku.
- Pred likvidáciou batérie ju treba zo spotrebiča vybrať.
- Pred vybratím batérie musí byť spotrebič vypnutý.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Záručné podmienky

Na nový výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, pričom je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržovanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je snečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

5

6

Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste.



EÚ vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Distribútor:
BELdental, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
IČ: 28570219

Dovozca: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Predmet vyhlásenia:
Názov: Oclean sonická zubná kefka
Model: Oclean X Pro Elite, Y2087

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach:

Smernica 2014/35/EU, Smernica 2014/53/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU



7