



Rio FASS – Obličejová ultrazvuková špachtle - CZ

Návod k použití

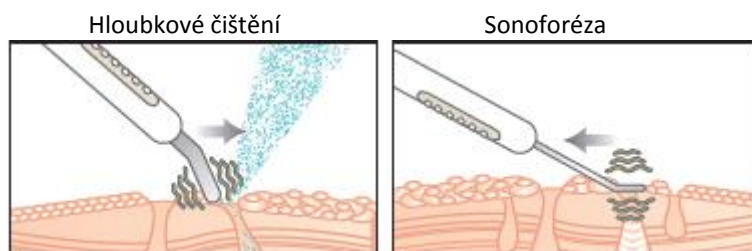
UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si prosím všechny pokyny k použití tohoto přístroje a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento produkt mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo pokud dostaly instrukce týkající se použití výrobku bezpečným způsobem a pochopily rizika.
- Nepoužívejte na jizvy, porušenou kůži, při onemocnění růžovkou, při pustulárním nebo zaníceném akné, odřené kůži, ekzému, zanícené nebo nemocné kůži, nebo při jakýchkoliv jiných kožních onemocněních. Pokud si nejste jisti, doporučujeme vám poradit se s lékařem.
- Výrobek je určen pouze pro vnější použití.

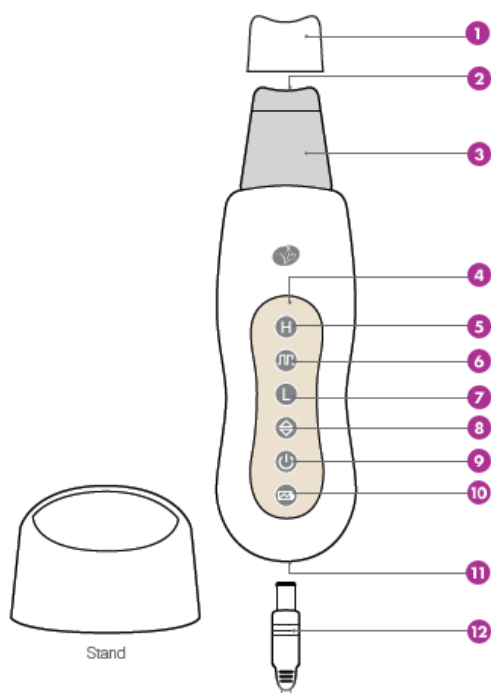
VÍTEJTE

ULTRASONIC FACIAL™ kombinuje dvě obličejové kosmetické procedury. Používá se přímo na vlhkou pokožku, jemným ošetřením hluboce čistí pokožku drobnými ultrazvukovými vibracemi, které pomáhají odstranit odumřelé kožní buňky, nečistoty a maz. Pletť je okamžitě hladší a jemnější.

Druhý režim využívá techniku kosmetických salónů – vysokofrekvenční sonoforézu, která zvyšuje účinnost aktivních látek obsažených v hydratačních krémech, sérech a přípravcích proti stárnutí pleti.



POPIS PŘÍSTROJE



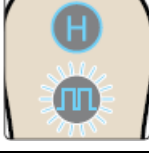
1. Ochranné pouzdro
2. Koncovka čepele
3. Ultrazvuková čepel
4. Ovládací panel
5. Vysoká světelná intenzita
6. Pulzující světelná vlna
7. Nízká světelná intenzita
8. Tlačítko pro výběr programu
9. Vypínač
10. Indikátor baterie
11. Nabíjecí zásuvka
12. Nabíjecí kabel USB

DOBÍJENÍ

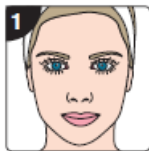
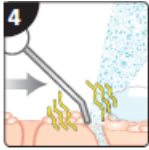
V případě vybité baterie, jednotka pípne 6 krát, a pak se automaticky vypne.

	Připojte nabíjecí kabel USB k nabíjecí zásuvce a zapojte do zdroje napájení USB.
	Při nabíjení se kontrolka baterie rozsvítí červeně.
	Když je jednotka plně nabitá, indikátor baterie zhasne a váš produkt je připraven k použití. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel USB od přístroje a odpojte jej od zdroje napájení. POZNÁMKA: Může to trvat až 8 hodin

VOLBA PROGRAMU

	Zapněte přístroj stiskem tlačítka vypínače.
	Program s nízkou intenzitou nepřetržitého vlnění Při zapnutí přístroje je automaticky vybrán program s nízkou intenzitou impulzů. Doporučujeme zahájení ošetřování programem s nízkou intenzitou impulzů.
	Stiskněte dvakrát tlačítko volby programu pro volbu vysoké intenzity impulzů.
	Program s vysokou intenzitou nepřetržitého vlnění Když je zvolen program s nízkou intenzitou impulzů, kontrolka se rozsvítí modře.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

	Naneste na obličej teplou vodu. Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledků použijte přístroj po koupání nebo sprchování. Doporučujeme 1-2 ošetření týdně.
	Zapněte přístroj stiskem tlačítka vypínače. Zvolte program s vysokou nebo nízkou intenzitou impulsů.
	Napustěte kousek vaty vodou a držte přístroj tak, aby ovládací panel byl směrem ven od vašeho obličeje.
	Pohybujte mokrou vatou před čepelí ve stejném směru, udržujte na kůži a zachovejte v nízkém až středním styku s pokožkou. Uvidíte jemnou spršku vody, nečistoty a špína budou stírány přední hranou čepele.

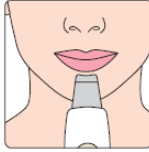
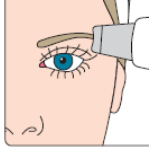
Po použití přístroj vypněte stiskem tlačítka vypínače. Čepel lze čistit otřením vlhkým hadříkem.

Přístroj skladujte s ochranným pouzdem na čepeli.

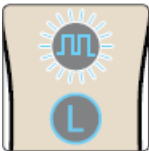
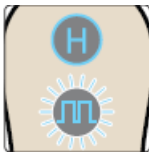
Poznámka: Pokud přístroj ponecháte ležet zapnutý, přístroj se automaticky vypne po 10 minutách.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ

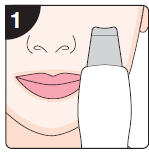
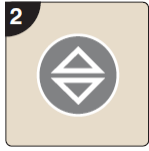
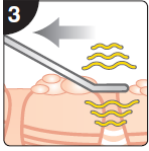
Doporučujeme použít metody uvedené níže, neboť podporují přirozenou lymfatickou drenáž těla. Pro dosažení nejlepších výsledků, používejte krátké překrývající se tahy.

	Pohybujte přístrojem od krku směrem nahoru po tváři v horizontálním směru tahem po obou stranách tváře. Systematicky pracujte přes všechny oblasti obličeje, jak je znázorněno na obrázku.
	Změňte směr práce přístroje a sestupujte ve vertikálních úsecích / tazích od oblasti krku, pracujte od čelisti k vlasové části.
	Čištění kolem křivky nosní dírky provádějte pomocí zakřiveného ostří.
	Použijte prohnutou prostřední část ostří pro očištění oblasti brady pod spodním rtem svislými tahy směrem dolů.
	Vyberte nastavení nízké intenzity pro oblast obočí. Při hloubkovém čištění byste se měli vyhnout jemné pleti pod očním okolím.

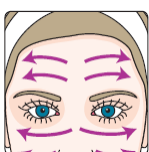
PROGRAMY SONOFORÉZY

	Ošetření sonoforézou používá pulzující vlny k efektivnímu vstřebávání hydratačních nebo vyživujících krémů. Doporučujeme nejprve provést hloubkové čištění pleti. Zapněte přístroj stiskem tlačítka vypínače.
	Stiskněte jednou tlačítko volby programu pro výběr programu nízké intenzity nebo 3x pro program vysoké intenzity impulzů.
	Nízká intenzita impulzů Když je zvolen tento program, uslyšíte přerušované zvukové vibrace, rozsvítí se modře světlo nízké intenzity a pulzující vlna bude blikat.
	Vysoká intenzita impulzů Když je zvolen tento program, uslyšíte přerušované zvukové vibrace, rozsvítí se modře světlo vysoké intenzity a pulzující vlna bude blikat.

OŠETŘENÍ SONOFORÉZOU

	1 Naneste hydratační krém, sérum nebo přípravek proti stárnutí pleti dle vašeho výběru. Držte přístroj tak, aby se čepel dotýkala plochou částí vaší kůže.
	2 Zapněte přístroj stiskem tlačítka vypínače. Zvolte program vysoké nebo nízké intenzity impulzů. Doporučujeme začít programem nízké intenzity.
	3 Za mírného tlaku ved'te čepel přes povrch kůže pomocí zpětného pohybu. Pro dosažení nejlepších výsledků si udělejte čas a pracujte pomalu, pokryjte celou plochu obličeje. Po použití přístroj vypněte stiskem tlačítka vypínače. Poznámka: Pokud přístroj nevypnete, přístroj se automaticky vypne po 10 minutách.

TIPY PRO APLIKACI

	Začněte v oblasti krku, za mírného tlaku pohybujte čepelí po povrchu pokožky. Pomocí zpětného pohybu pracujte od středu obličeje směrem ven.
	Pokračujte nahoru na obličej přes čelisti k vlasům. Přejíždějte přes obličej, dokud se veškerý produkt neabsorbuje.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Neponořujte tento výrobek do vody.
- Tento výrobek není odolný proti vodě, proto jej neumísťujte na místo, kde může spadnout nebo může být stažen do vody.
- Jednotka může být čištěna otřením vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky.
- Čepel může být čištěna otřením teplou vodou. Před použitím důkladně očistěte. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky.
- Nepokládejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud nepracuje správně, nebo pokud spadl na zem nebo byl poškozen.
- K dispozici nejsou žádné části opravitelné uživatelem jednotky.
- Zneužití tohoto produktu může způsobit škodu.

LIKVIDACE

Směrnice o Likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE) směrnice (2002/96/EC) platí pro recyklaci produktů použitím nejlepších technik k minimalizaci dopadu na životní prostředí, odstraněním nebezpečných látek a zabráněním zvyšování odpadu.

Výrobek je klasifikován jako Elektrické nebo elektronické zařízení, proto zajistěte na konci jeho životnosti správnou likvidaci správným způsobem v souladu s místními předpisy. Nesmí se likvidovat společně s běžným domovním odpadem.



SPECIFIKACE

Nabíjecí kabel USB:

Vstup: 5V  1A Max

Jednotka:

Výstup: 25 kHz

Baterie: 3.7V / 900mAh



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a poté je uschovejte pro budoucí použití.



Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii.



Tento produkt není vhodný pro nabíjení v koupelně.



Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento produkt je v souladu s platnými právními předpisy EU týkajícími se výrobků.



Vstupní zásuvková koncovka kladná.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamace / servis

Hluchov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz