

TANITA BC-545N szegmentációs elemzéses egyéni digitális mérleg



Használati utasítás és reklamációs szabályzat

Köszönjük, hogy a **TANITA** testfunkció-elemzéses mérleget választotta. Ez a mérleg a széles kiterjedésű **TANITA** egészségápoló termékcsalád egyik képviselője. Jelen utasítás végigvezeti Önt a telepítés menetén, és felvázolja a nyomógombok funkcióit. Az egészséges életvitelről szóló további információt megtalálja www.osobni-vahy.cz honlapunkon.



A **TANITA** márkás termékek a legmodernebb klinikai kutatások eredményeire támaszkodnak, és a legújabb technológiai újításokat használják ki. A lehető legmagasabb pontosság elérésének érdekében, valamennyi adat állandó jellegű felmérésen esik keresztül a **TANITA** orvosi tanácsadó testület keretén belül.

Megjegyzés:

Jelen utasítást olvassa el teljes terjedelmében, és őrizze meg későbbi használatra.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

A testfunkció-elemzéses mérleg használatát nem ajánljuk beültetett testfunkciót serkentő készülékkel (pl. szívszabályozó) rendelkező egyéneknek. A mérleg a méréseknél gyenge villamos áramot használ, amelynek hatása befolyásolhatja a beültetett készülék működését. Várandós kismamáknak csak a testsúly mérési funkció használatát ajánljuk, a többi funkció számukra nem alkalmas.

A mérleget ne helyezze csúszós felületre (pl. nedves padlóra).

Kérjük, ne használja a mérleget azonnal fürdés vagy igényesebb testedzés után. A mérőfelületek benedvesedhetnek – kérjük, törölje meg azokat alaposan száraz ronggyal.

FONTOS MEGJEGYZÉS FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE

Ez a testfunkció-elemzéses mérleg **felnőttek és 5-17 életkorú gyermekek, standard és atléta testalkatú egyének** részére alkalmas. Az „atléta” testalkat alapfeltételeit a **TANITA** cég akképp értelmezi, hogy az rendszeres, kb. heti 10 óra terjedelemben intenzív testmozgást űző személyeket jelent, akiknél nyugalmi állapotban percenként kb. 60, illetve annál alacsonyabb dobantású szívritmus mérhető. „Atléta” megjelölés alá továbbá a fitness életstílust folytató egyének is beleszámítanak, akik több éven át intenzív edzésen estek át, és az edzésre jelenleg már csak heti 10 óránál kevesebb időt áldoznak. A mérleg testfunkciót elemző funkciói nem alkalmasak várandós kismamáknak, profi sportolóknak, sem testépítőknak.


A készülék helytelen használata esetén, vagy ha az túlfeszültség hatásának van kitéve, az elmentett adatok elveszhetnek. Az elmentett adatok elvesztését illetően, a **TANITA** cég nem vállalja a felelősséget. Továbbá, a **TANITA** cég nem vállalja a felelősséget ilyen jellegű egységek által okozott bármilyen kárt, vagy veszteséget, sem harmadik személy oldaláról jelentkező bármilyen igényt illetően.

Megjegyzés:

A test zsírkészletének felbecsülése a test vízkészletétől függően változó, és befolyással lehet rá a dehidráció vagy a túlvizesedés – mindkét faktor pl. alkoholfogyasztás, menstruáció, betegség, intenzív torna stb. folytán jelentkezhet.

JELLEMZÉS, FUNKCIÓK

Mérőfelület

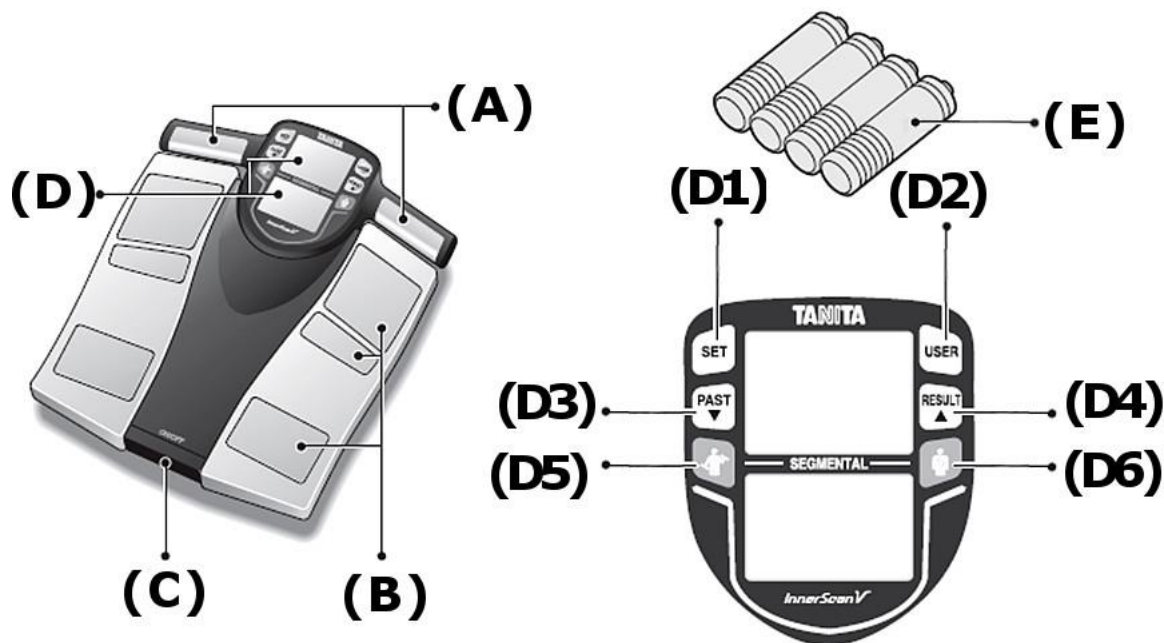

- (A) Kézi elektródák
- (B) Érzékelőfelületek
- (C) Nyomógomb – bekapcsolás / kikapcsolás
- (D) Kijelző
- (E) AA szárazelemek

- (D1) SET – Beállítások
- (D2) USER – Felhasználó
- (D3) PAST – Előző adat
- (D4) RESULT – Eredmény
- (D5) Izomtömeg
- (D6) Test %-os zsírkészlete

HASZNÁLATOT MEGELŐZŐ ELŐKÉSZÜLETEK

▲ Szárazelemek behelyezése



Nyissa fel a képen látható módon



Elemek pozíciója

Nyissa fel a szárazelemek hátoldalon található helyének fedelét. Helyezze be a csomagolásban mellékelt AA szárazelemeket – lásd a képen.

Megjegyzés:

Győződjön meg, helyes pozícióban vannak-e a szárazelemek behelyezve. Hogyha a szárazelemek fordított polaritással kerülnek a helyükre, azokból kiszivároghat az elektrolit, és kárt tehet a padlóborításban. Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem használja, ajánlatos a szárazelemeket kivenni.

Kérjük, tudatosítsa, hogy a gyári kiszállítás részét képező szárazelemek kapacitása korlátozott.

▲ Mérleg elhelyezése



Biztonságos és pontos mérés érdekében, a készüléket szilárd sík felületre állítsa, ahol minimális mértékű rezgések feltételezhetők (legjobb közvetlenül a padlóra; szőnyegre nem éppen ideális).

Megjegyzés:

Esetleges sérülés elkerülése érdekében, ne lépjen a mérőfelület peremére.

▲ A KÉZI ELEKTÓDÁK VEZETÉKÉT NE HÚZZA TÚL A PIROS JELZÉSEN!!

TIPPEK KEZELÉSHEZ:

A mérleg a legújabb technológiai vívmányokat használó precíz műszer.

A készülék megfelelő állapotának megőrzése érdekében, kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Ne próbálkozzon a mérőfelületet szétszerelésével.
- A terméket – elraktározáskor is – vízszintes helyzetben tartsa, és úgy helyezze el, hogy ne kerülhessen sor a nyomógombok akaratlan megnyomására.
- Kerülje a túlzott behatásokat, rezgéseket.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütésnek, vagy szélsőséges hőingadozásoknak, ne tartsa sem fűtőtest közelében, sem magas páratartalmú illetve nedves helyen.
- Semmi esetre ne merítse vízbe. Az elektródák és az üveglap tisztításához használjon alkoholt (száraz rongyba beitatva) – így az csillogó marad. Ne használjon szappant.
- Ne lépjen a mérőfelületre nedves lábbal.
- Vigyázzon, nehogy a mérőfelületre ráessen valamilyen tárgy.
- A mérleget ne a kézi elektródák vezetékével emelve helyezze más helyre.
- A kézi elektródákat ne engedje el, míg a vezeték teljesen vissza nem csévélődött a készülékbe.

PONTOS ÉRTÉKEK ELÉRÉSE

Pontos értékek elérésének érdekében, a mérést mindig nehéz felsőruházat nélkül, megegyező hidrációs feltételek mellett végezze. Ha ruhában van, minden esetben vesse le lábáról a zoknit illetve harisnyát, és a mérőfelületre történő ráállást megelőzően győződjön meg, tiszták-e a talpai. Győződjön meg, megfelelően rálépett-e a talpakkal a mérő elektródák felületeire. Ha az Ön lábmérete a mérő felületnél valamivel nagyobb, semmi gond – pontos adatok érhetők el akkor is, ha a lábujjak a mérőfelület szélén egy kicsit túlérnek. Legjobb, ha a mérést minden alkalommal a nap ugyanazon órájában végzi. Mérés előtt ajánlatos kivárni étkezés vagy testmozgás után kb. 3 órányi időt, mivelhogy az eltérő feltételek mellett mért értékek nem biztos, hogy hűen fogják tükrözni a valóságot. A százalékos változások pontos értékeinek elérése akkor lehetséges, ha az adatok következetesen, torzításmentesen kerülnek leolvasásra. A pozitív fejlődés figyeléséhez, a testsúly és a test zsírkészletének összehasonlításához, mindig ugyanazon körülmények mellett, ugyanazon időpontban végezze a méréseket.

Megjegyzés:

Piszkos talpakkal rálépve, vagy megroggyant térdekkel rajta állva, vagy ülő helyzetben mérve nem lehetséges pontos értékek elérése.

ÖNMŰKÖDŐ KIKAPCSOLÁS

A készülék táplálása önműködően kikapcsol:

- a mérés megszakítása esetén; az önműködő kikapcsolás 20 - 60 s elteltével aktiválódik (a mérés jellegétől függően).
- programozás folyamán – ha 60 s elteltével nem nyom meg semmilyen gombot.
- mérés befejeztével.


* Megjegyzés:

Amennyiben a készülék táplálása önműködően kikapcsol, ismételje meg a SZEMÉLYES ADATOK BEÁLLÍTÁSA, MEMÓRIÁBA TÖRTÉNŐ ELMENTÉSE fejezetben leírt lépéseket.

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA / ÁTÁLLÍTÁSA


1. Év beállítása:

Helyezze be a szárazelemeket a helyükre, majd az év beállításához nyomja meg az **ON / OFF** gombot. A **Fel** vagy a **Le** gomb megnyomásával válassza meg az aktuális évszámot, majd nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá.

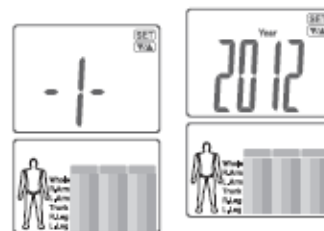

2. Hónap beállítása:

A **Fel** vagy a **Le** gomb megnyomásával válassza meg az aktuális hónapot, majd nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá.

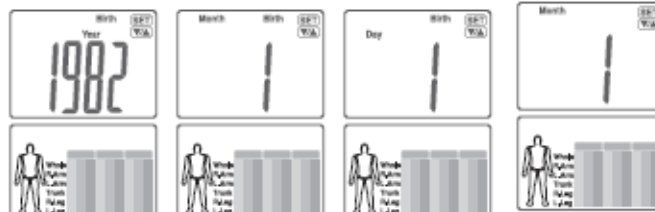

3. Nap beállítása:

A **Fel** vagy a **Le** gomb megnyomásával válassza meg az aktuális napot, majd nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá.



4. Óra beállítása:

A **Fel** vagy a **Le** gomb megnyomásával válassza meg az egész óra időpontját, majd nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá.



5. Perc beállítása:

A **Fel** vagy a **Le** gomb megnyomásával válassza meg a perc-értéket, majd nyomja meg a **SET** gombot. A készülék két hangjelzéssel hagyja jóvá a végrehajtott programozást. A készülék ezt követően önműködően kikapcsol.



Megjegyzés:

- Szárazelemek cseréjét követően, vagy amennyiben Ön nulla értékre szeretné lehúzni a dátumot, illetve az időt, nyomja meg a **Le** gombot és tartsa lenyomva – ezzel beindul a *Dátum és idő beállítása* funkció. Szárazelemek cseréjét követően, a dátum és idő visszaállítódik a gyárilag betáplált alapértelmezett időpontra.
- Beállítás folyamán, 60 és több s elteltével a készülék táplálása önműködően kikapcsol, és az addig beállított időértékek elvesznek.
- Hogyha Ön beállításkor valamilyen hibás lépést követ el, vagy a készüléket még a programozás befejezte előtt ki szeretné kapcsolni, nyomja meg az **ON / OFF** gombot. Az addig beállított időértékek elvesznek.

SZEMÉLYES ADATOK BEÁLLÍTÁSA, MEMÓRIÁBA TÖRTÉNŐ ELMENTÉSE

A mérleg üzemelése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben megtörtént a személyes adatok bevitele valamelyik memóriába.

1. Míg a kézi elektródák a mérleg mérőfelületére vannak letéve, nyomja meg az **ON / OFF** gombot – "**0.0**" kijelzés jelenik meg.
2. Beállítás indul (hogya ennek a felhasználónak még eddig nincsenek elmentve beállításai) Nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá, és megjelenik a személyes adatok számmegjelölése. A kijelző villogni kezd.

Megjegyzés:

Ha bekapcsolástól számított 60 s elteltével nem kezdi el a beállítási műveletet, a készülék táplálása önműködően kikapcsol.

Megjegyzés:

Hogya Ön beállításkor valamilyen hibás lépést követ el, vagy a készüléket még a programozás befejezte előtt ki szeretné kapcsolni, nyomja meg az **ON / OFF** gombot.

3. Válassza meg a személyes adatok számmegjelölését.
Fel vagy **Le** gomb lenyomásával megválasztható a személyes adatok (**1, 2, 3, 4, 5**) számmegjelölése. Mihelyt a kiválasztott szám megjelenik, nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá.
4. Születésnap beállítása.
Születésnap (év / hónap / nap) **Fel** vagy **Le** gomb lenyomásával állítható be. Mindegyik adat jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá.

Megjegyzés:

5 – 99 év közötti életkor lehetséges.

5. Válassza meg nemét – Nő vagy Férfi.
Fel vagy **Le** gomb lenyomásával válassza meg nemét:  = Nő,  = Férfi,  = Atléta nő,  = Atléta férfi; jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá.

6. Adja meg testmagasságát.
A kijelzőn "**170 cm**" (vagy "**5' 7.0''** ") jelenik meg. Testmagasság <cm> mértékegységben 90 - 220 között, vagy pedig <' (foot = láb) és '' (inch = coll)> mértékegységben 3' 0.0'' - 7' 3.0'' között adható meg. **Fel** vagy **Le** gomb lenyomásával adja meg testmagasságát, majd nyomja meg a **SET** gombot. A készülék hangjelzéssel hagyja jóvá. A kijelzőn jóváhagyásra még egyszer megjelenik valamennyi személyes adat, majd "**0.0**" jelenik meg – ekkor a készülék mérésre készen áll.

7. Testsúly és test zsírkészletének mérése.
Fogja meg a kézi elektródákat, és a kijelzőn megjelenő "**0.0**" érték kijelzésétől számított 30 s idő alatt lépjen rá a mérlegre.

A mérlegre mindig mezítláb lépjen rá.

A mérlegről ne lépjen le, míg a készülék öt hangjelzést nem ad.

A számértékek 40 s ideig vannak kijelezve. Ezt követően – az értékek memóriába történt elmentésének elvégzésével – a készülék önműködően kikapcsol.

Megjegyzés:

Hogyha a mérlegre Ön még a kijelzőn "**0.0**" érték megjelenése előtt lép rá, "**Error**" hibajelentés jelenik meg – ekkor arról le kell lépnie és a folyamatot újra előlről kell kezdenie. Hogyha a mérlegre Ön nem áll rá a "**0.0**" kijelzés megjelenésétől számított 30 másodpercen belül, a mérleg önműködően kikapcsol. Kérjük, ilyenkor próbálja ismételtelen elvégezni a személyes adatok beállítását és elmentését.

Megjegyzés:

A születésnap, és/vagy a nem módosítása esetén, a készülék "**CLR**" jelentést fog kijelezni.

Ha Ön az Igen (**YES**) lehetőséget választja, a **Fel** vagy **Le** gomb lenyomásával a meglévő személyes adatok törlésre kerülnek.



Ha Ön a Nem (**NO**) lehetőséget választja, a **Fel** vagy **Le** gomb lenyomásával nem kerül elmentésre semmilyen új adat (a meglévő adatok nem lesznek módosítva), majd ezt követően a készülék kikapcsol.



TESTSÚLY ÉS TESTJELLEMZŐK MÉRÉSE

Személyes adatai beállítását követően megkezdheti a mérést.

1. Míg a kézi elektródák a mérleg mérőfelületére vannak letéve, nyomja meg az **ON / OFF** gombot. "**0.0**" kijelzés jelenik meg.
2. **Adatai eléréséhez – A MÉRLEG ÖNMŰKÖDŐEN KÉPES MEGKÜLÖNBÖZTETNI A BEOLVASOTT FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉT, A FELHASZNÁLÓT NEM SZÜKSÉGES KÜLÖN MEGVÁLASZTANI.**

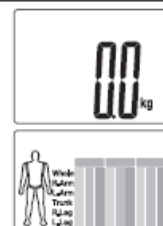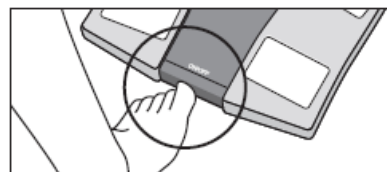


Fogja meg a kézi elektródákat, és lépjen rá a mérlegre.

A mérlegre mindig mezítláb lépjen rá.

Elsőként az Ön testsúlyának számértéke jelenik meg. Maradjon a mérlegen állva. A kijelzőn megjelennek az Ön beolvasott személyes adatai, majd ezt követően 40 s időre kijelzésre kerül az Ön testsúlya, BMI értéke, és a test %-os zsírkészlete.

Megjegyzés:



A mérlegről ne lépjen le, míg a készülék két hangjelzést nem ad.

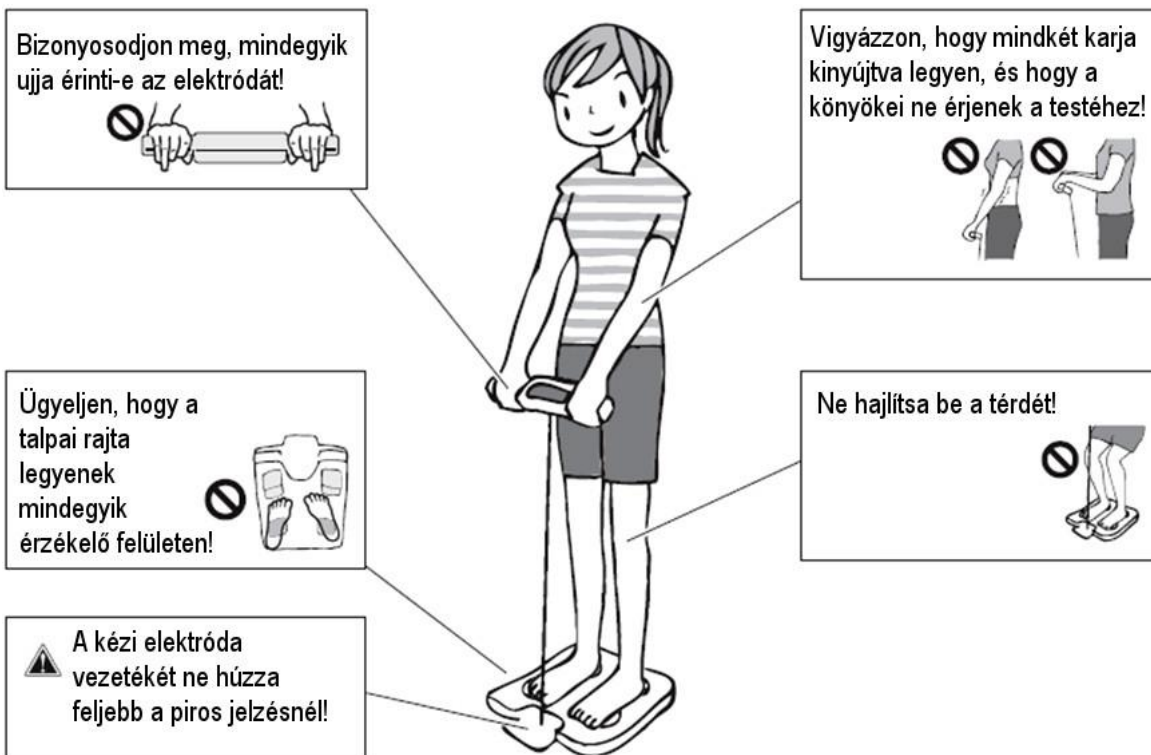


Megjegyzés:

Ha a kijelzőn nem a megfelelő felhasználói sorszám jelenik meg, a személyes adatok számmegjelölése az **USER** gomb segítségével módosítható.

Nyomja meg az **USER** gombot, míg meg nem jelenik az Ön saját számmegjelölése, és kijelződik a profil. A megfelelő felhasználói sorszám megválasztását követően, nyomja meg a **SET** gombot – a kijelzőn önműködően megjelennek az Ön saját számmegjelölése alatti megfelelő adatok. Ezek az értékek saját számmegjelölés alatt kerültek elmentésre a memóriába.

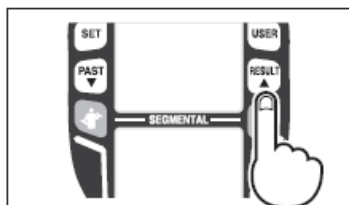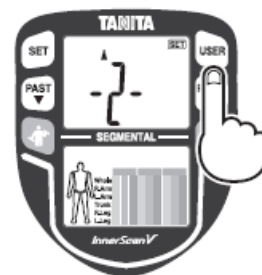


Lépjen le a mérlegről, és a kért értékek megjelenítéséhez nyomja meg a **RESULT** gombot.

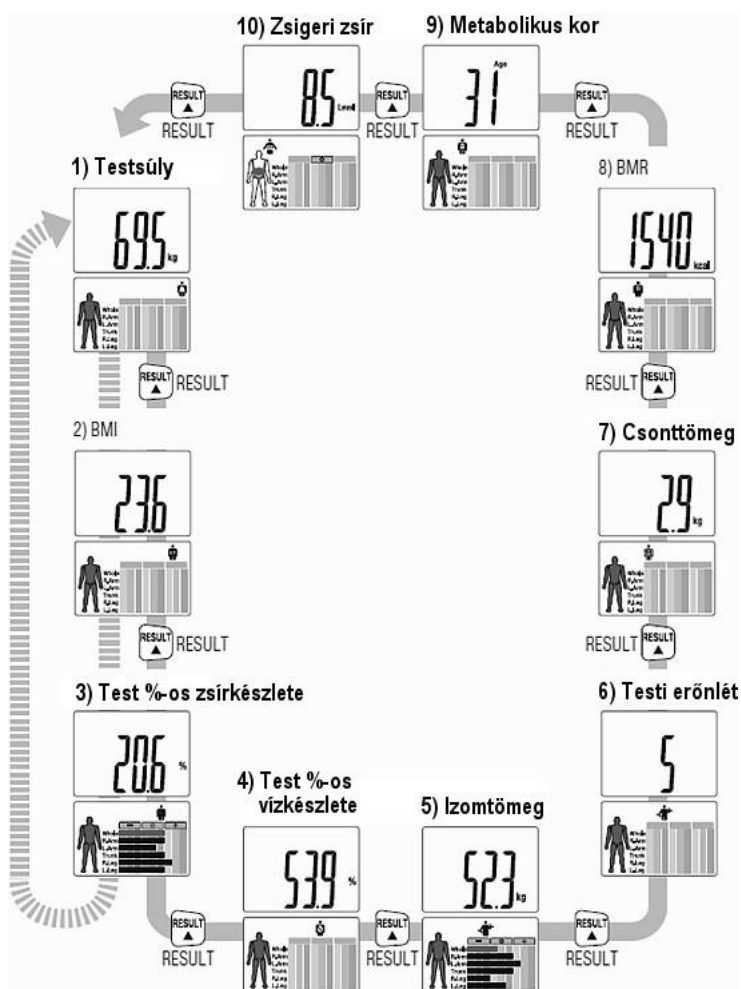

VALAMENNYI SZEGMENS ÉRTÉKEINEK MEGJELENTETÉSE

Jobb kari, bal kari, jobb lábi, bal lábi, törzsi mért értékek megjelenítéséhez - aktuálisan kijelzett adatoknál - nyomja meg a , vagy a  gombot.

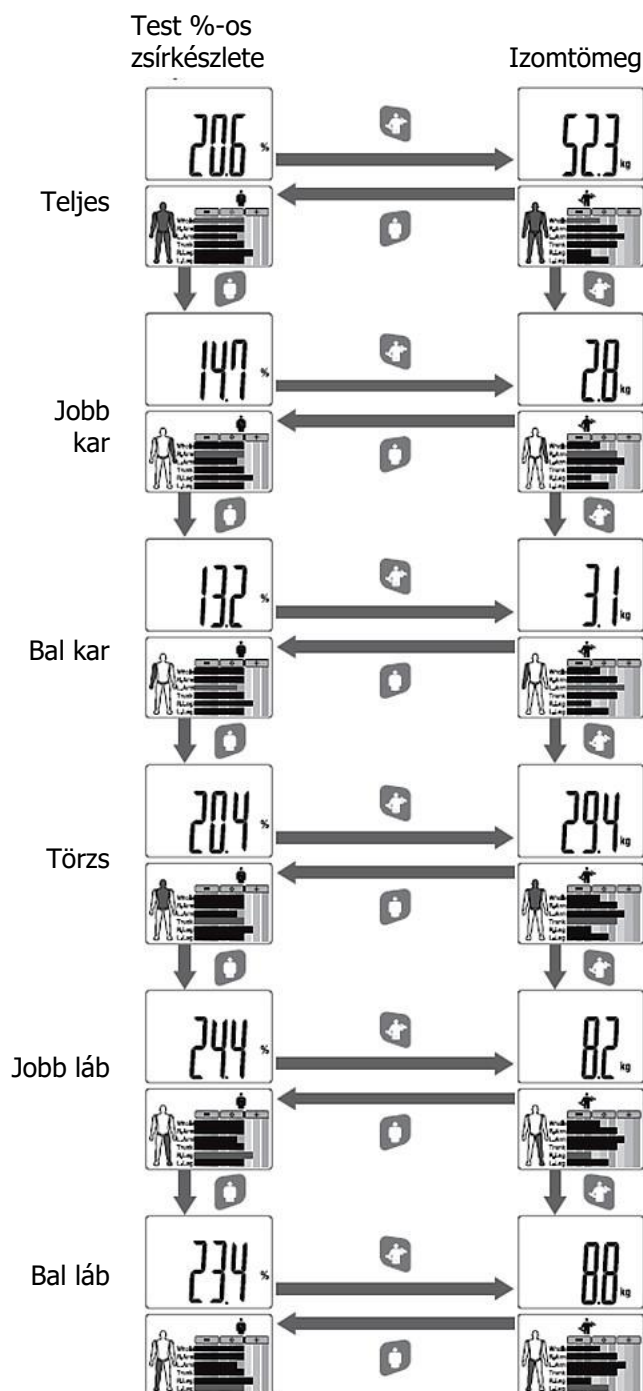

5 – 17 éves életkorú gyermekek esetén, a kijelzőn a testsúly, a BMI érték, valamint a test %-os zsírkészlete kerül kijelzésre.

ELŐZŐ MÉRT ÉRTÉKEK

Előző mért adatok kiolvashatók az arra kijelölt funkció hívásával.

Előző mért adatok kiolvasásához - aktuálisan kijelzett adatoknál - nyomja meg a **PAST** gombot. További előző mért adatok kiolvasásához, minden egyes keresett értéknél nyomja meg a **RESULT** gombot. A **PAST** gomb megnyomásával visszaugrik a kijelzőn aktuálisan megjelent adatokra.


Megjegyzés:

Előző időszak mért adatainak kiolvasása, mérés elvégzése nélkül:

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot - "0.0" jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg az **USER** gombot, míg meg nem jelenik az Ön saját felhasználói sorszáma.

Előző mért adat kiolvasásához, nyomja meg a **SET** gombot, majd a **PAST** gombot.

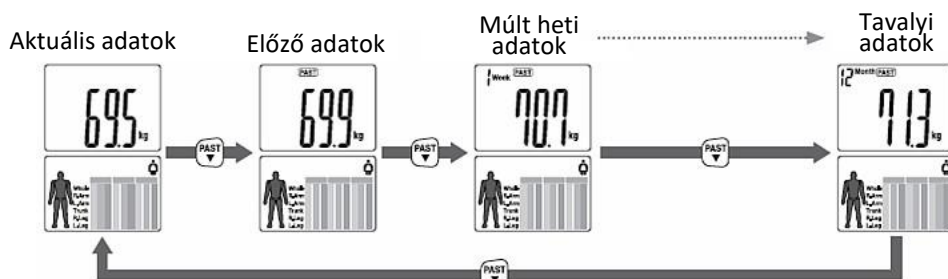

Valamennyi szegmens értékeinek megjelentetéséhez - aktuálisan kijelzett adatoknál - nyomja meg a , vagy a  gombot.

Megjegyzés:

5 – 17 éves életkorú gyermekek esetén, a kijelzőn a testsúly, a BMI érték, valamint a test %-os zsírkészlete kerül kijelzésre.

GUEST (VENDÉG) ÜZEMMÓD

A Guest üzemmód lehetővé teszi a készülék beállítását egyszeri használatra, a személyes adatok alatt található értékek törlése nélkül.


Míg a kézi elektródák a mérleg mérőfelületére vannak letéve, nyomja meg az **ON / OFF** gombot – "0.0" jelenik meg. Ekkor nyomja meg az **USER** gombot, míg meg nem jelenik a "Guest" kijelzés.

Nyomja meg a **SET** gombot, és táplálja be a személyes adatokat életkor, nem, testmagasság – aprólékos leírást lásd a SZEMÉLYES ADATOK BEÁLLÍTÁSA, MEMÓRIÁBA TÖRTÉNŐ ELMENTÉSE fejezetben.

Amikor "0.0" értéket jelez ki, lépjen rá a mérlegre, és vegye kezébe a kézi elektródákat.

A mérlegről ne lépjen le, míg a készülék két hangjelzést nem ad.

Az értékek 40 s időig maradnak a képernyőn.

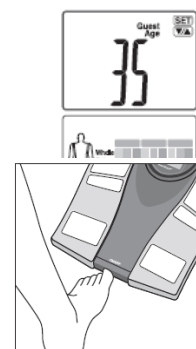

TESTSÚLY KÜLÖN MÉRÉSE

Míg a kézi elektródák a mérleg mérőfelületére vannak letéve, nyomja meg az **ON / OFF** gombot. 2 - 3 s elteltével a kijelzőn "0.0" érték jelenik meg, és a készülék hangjelzést ad – a mérlegre csak


ekkor álljon rá. Kiíródik a testsúly számértéke, és a mérleg ezt követően 30 s elteltével önműködően kikapcsol.

MÉRÉSI EGYSÉGEK ÁTKAPCSOLÁSA

Megjegyzés:

Csak azoknál a modelleknél lehetséges, amelyeknél támogatva van a mérési egységek átkapcsolása.

A mérési egységek átkapcsolása (**kg** / **lb** / **st lb**) a mérleg hátoldalán található kapcsolóval lehetséges.

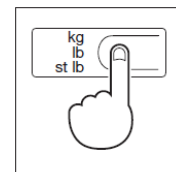

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK

A ☹ probléma felmerülése esetén ez ➡ a teendő:

- ☹ Testsúly érték helytelen formátumban van kiírva.

➡ Lásd a MÉRÉSI EGYSÉGEK ÁTKAPCSOLÁSA fejezetet.

- ☹ Kijelzőn jelenik meg, vagy az értékek megjelenítésüket követően azonnal eltűnnek.

➡ Kimerültek a szárazelemek. Ha ilyen jelentés íródik ki, a szárazelemeket azonnal le kell cserélni – a gyenge szárazelemek befolyással vannak a mérés eredményeire. Valamennyi szárazelemet egyszerre cserélje le újakra.

Megjegyzés:

A beállítások és a memória tartalma az elemek kivételkor nem törlődik.

- ☹ Méréskor jelentés íródik ki.

➡ Kérjük, álljon nyugodtan a mérőfelületen, ne mozogjon feleslegesen. A készülék nem képes pontos mérés elvégzésére, hogyha mozgást érzékel.

➡ Test zsírkészletének 75%-tól magasabb értéke nem érhető el.

- ☹ Kijelzőn "**ErrA**" jelent meg.

➡ Nem volt önműködően felismerve a mért személy. A mérleget kikapcsolást követően ismételten kapcsolja be, és az **USER** gombbal válassza meg az elmentett felhasználó számmegjelölését.

➡ A mért személy valószínűleg egy másik felhasználói számmegjelölés alatt volt elmentve.

- ☹ Test százalékos zsírkészlete nem jelenik meg.

➡ Győződjön meg, levetette-e a zoknit illetve a harisnyát a lábáról, valamint, hogy a talpai tiszták-e, és helyesen fekszenek-e a mérőfelületeken.

- ☹ Méréskor jelent meg.

➡ Amennyiben a mérés eredménye túllépi a mérleg tartományának határértékét, akkor azt a készülék ill. a kijelző nem képes kijelezni.

KARBANTARTÁS

A mérleget semmi esetre ne próbálja önerőből szétszerelni. A szárazelemek cseréjét kivéve, minden további javítási munkálatot ill. beavatkozást bízson rá az arra specializálódott szervizszolgáltatóra. A mérleg nem vízálló = ne mossa vízzel. A készüléket időnként törölje meg puha ronggyal. A mérlegre semmi esetre ne ugorjon rá. A mérleget a szárazelemekkel együtt szállítjuk ki. Mindennapos használat mellett a szárazelemek 1 teljes éven át képesek táplálni a készüléket. Mind a 4 szárazelemet egyszerre cserélje le újakra. A gyári kiszállítás részét képező szárazelemek kapacitása korlátozott lehet.

MŰSZAKI ADATOK

Testsúly mérés tartományának határértéke:	150 kg
Mérés pontossága (súlykijelzés lépése):	0,1 kg
Test százalékos zsírkészletének lépése:	0,1 %
Személyes adatok:	5 memória
Tápforrás:	4 x AA szárazelem (szállítás részét képezi)
Névleges áramfelvétel:	max. 60 mA
Mérőfrekvencia:	50 kHz

REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

Garanciafeltételek:

Jelen termékre a fogyasztó általi megvásárlástól számított 36 hónapos jótállást nyújtunk. Jótállás időtartama alatt érvényesített reklamációt javítás, vagy csere útján orvosolunk.

A garancia a termék helyes működésére, valamint a gyártási- illetve anyaghibákra terjed ki.

A garancia nem terjed ki sem szakavatatlan beavatkozás okozta hibákra, sem külső behatások által okozott károsodásokra (ütés, anyag kezelés stb.), sem kétes minőségű tápforrás használatából fakadó hibákra.

Reklamáció:

Vásárló köteles a kiszállított terméket azonnal átellenőrizni, és az esetlegesen észlelt hibákat legkésőbb három napon belül jelenteni Értékesítőnek (legmegfelelőbb írásban, e-mail levél formájában).

Az írásos értesítésben Vásárló feltünteti az észlelt hibát/hibákat (jellegét, és hogy miben mutatkozik ki).

A reklamáció megítélésére Értékesítő törvény által előírt 30 napos határidőt szab ki. A hiba elismerésének esetén, a készüléket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy vadonatúj darabra.

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

MODELL: TANITA BC-545 N

Értékesítés napja:

Bélyegző:

Reklamáció napja:



Az Ön által megvásárolt termék szárazelemes táplálású. Kérjük, ügyeljen a következő utasításokra: a szárazelemet tilos háztartási hulladék közé kidobni. Ön, mint fogyasztó, a hatályos törvényes előírások értelmében köteles a kimerült szárazelemeket / akkumulátorokat leadni saját településén, városrészben, vagy boltban működő gyűjtőhelyen, hogy azok környezetkímélő módon lehessenek megsemmisítve.



A terméken elhelyezett, vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett jelölés jelentése annyi, hogy az elhasznált villamos-, illetve elektronikus termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt felszámolni. A termék előírásos és megfelelő felszámolása érdekében, azt adja le az erre a célra alapított gyűjtőhelyen, ahol az ingyenesen lehelyezhető. A kiselejtezett termék előírásos megsemmisítésével Ön is elősegítheti az értékes nyersanyagok újrahasznosítását, és ezáltal a természeti források megkímélését, valamint hozzájárulhat úgy életkörüzetünk, úgy egészségesebb életünk támogatásához. Kérjen további részletes tájékoztatást a helyi városháza hivatalánál, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen. Ilyen jellegű hulladék nem megfelelő felszámolása esetén, a nemzetközi egyezmények rendeleteinek értelmében bírság róható ki.

A mérleg a 2004 / 108 / EC sz. rendelet szerint zavarmentesített.