

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ultrahangos kozmetikai eszköz
fotonterápiával

BR-1150



TARTALOMJEGYZÉK:

BEVEZETŐ	3
SPECIFIKÁCIÓK	3
CSOMAG TARTALMA	4
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS	4
FELHASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK	5
ULTRAHANG HULLÁMOK	5
FOTONTERÁPIA	5
IONIZÁCIÓ	6
MAGASFREKVENCIÁJÚ MASSZÁZS	6
ESZKÖZ LEÍRÁSA	7
GOMB LEÍRÁSA	8
KÉPERNYŐ LEÍRÁSA	8
ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSOK	9
ULTRAHANG HULLÁMOK	9
FOTONTERÁPIA	9
IONIZÁCIÓ	10
MAGASFREKVENCIÁJÚ MASSZÁZS	10
FUNKCIÓK KOMBINÁCIÓJA	10
ARC ÉS NYAK KEZELÉSÉRE AJÁNLOTT ELJÁRÁSOK	11
ALAPKEZELÉS NÉGY LÉPSÉBEN	12
PIGMENTFOLTOK ELTÜNTETÉSE	12
AKNÉS BŐR KEZELÉSE	13
SZEM ALATTI SÖTÉT KARIKÁK KEZELÉSE	13
ÉRZÉKENY BŐR KEZELÉSE	13
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK	13
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	14
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	14
TECHNIKAI PARAMÉTEREK	14
A HASZNÁLT ELEKTROMOS ESZKÖZÖK HULLADÉK KEZELÉSE	14
IMPORTŐR	14

Bevezetés

Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt használatba venné a terméket, és tartsa meg későbbre.

A BeautyRelax BR-1150 számos technológiával segít a bőrén: ultrahang hullámok, fotonterápia, ionizáció és magas frekvenciás masszázs. És mindez hatékony, fájdalommentes, nem invazív eljárás!

A BR-1150 ezeket a technológiákat kínálja:

1. Ultrahang hullámok
2. Fotonterápia
3. ionizációs
4. Magas frekvenciás masszázs

Specifikációk

- Ultrahang hullám technológia 3MHz frekvenciával.
- 3 fény mód a fotonterápiához: piros, kék és zöld.
- Magas frekvenciájú masszázs.
- Rozsdamentes applikátor.
- Biztonságos és fájdalommentes használat.
- Érzékeny a bőrhöz.
- Minden bőrtípusra.
- Könnyen használható a gombok segítségével.
- Kompakt, kicsi és könnyű.

Csomag tartalma

- Ultrahangos kozmetikai eszköz foton terápiával.
- USB kábel.
- 220V-os adapter.
- Védőszemüveg.
- Használati utasítás.

Biztonsági figyelmeztetések

- Az első használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, ellenőrizze az ábrákat és tartsa meg a későbbi felhasználás esetére.
- Ne használja a készüléket, ha súlyos bőrbetegsége van. Ha nem biztos benne, először konzultáljon az orvosával.
- Az eszközt egyéni használatra tervezték. Ne ossza meg családtagjaival vagy barátaival.
- Ha a készülék leesik a talajra, megsérül, vagy nem működik megfelelően, vagy a vízbe esik, soha ne helyezze üzembe.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy olyan helyeken, ahol magas a páratartalom.
- A készüléket gyermekek és olyan emberek nem használják, akiknek fizikai vagy szellemi állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.
- Ne helyezze vagy használja a készüléket forró felületeken (radiátor, tűzhely, tűz stb.).
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy önállóan megjavítani a készüléket.
- Ha a készülék leesik a talajra, megsérülhet. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az eladóval.
- Ha befejezte a töltést, húzza ki az adaptert a 220V-os elektromos aljzatból.
- A forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért. Nem vállal felelősséget a biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásával járó következményekért.
- A készüléket csak otthoni használatra szánják. A forgalmazó nem vállal felelősséget semmilyen egészségkárosodásért vagy egyéb anyagi kárért.

FELHASZNÁLT TECGNOLÓGIÁK

ULTRAHANG HULLÁMOK

A rozsdamentes acél applikátor 3MHz frekvenciájú energiát bocsát ki, amikor a kezelt felületre kerül. Az értékek optimálisak ahhoz, hogy a termikus gradiens kifejthesse jótékony hatását a bőr mélyebb rétegeiben. Az energia aktiválja a kollagénszálak és az elasztin átalakulását. Az energia lehető legnagyobb átvitele még a vastagabb zsírréteggel rendelkező helyeken és a későbbi metabolikus folyamatokra is jelentős hatással van és a deformált kontúrok nagyon hatékony kiegyenlítésére is.

Fő előnyök

- A kezelés teljes mértékben természetes és nem invazív eljárás.
- Biztonságos, fájdalommentes eljárás.
- Hatékony a vékony és nem egészséges bőrön is.
- A bőr étellel telinek és fiatalosnak látszik.

Figyelmeztetés:

Amikor ultrahangos hullámokat használ, mindenkor használjon világos vezetőképes gél, amelyet bármely egészségügyi boltban megvásárolhat. Használat előtt finom réteget vigyen fel a készülék fejére. A gél javítja a vezetőképesességet és a teljes hullámátvitelt az eszköz fejtől a bőríg. A kezelés befejezése után óvatosan tisztítsa meg az eszköz fejét száraz ruhával (ne használjon tisztítószereket vagy oldatokat).

FOTONTERÁPIA

A fényterápia az egyik legrégebbi módszer a különböző bőrhibák leküzdésére. A fényterápia a természetes fényhullámokat használja, amelyeket a LED generál. A meghatározott hosszúságú hullámok a bőrbe kerülnek. A fény behatol a testbe, mint egy energiaáram (fotonok formájában), amelyet a bőr egyes komponensei elnyelnek. A fény különböző hullámhossza bizonyos bőrpoló hatásokat eredményez. A fény beléphet a sejt belsejébe, ez nem invazív és fájdalommentes. A fény aktiválja a fotoreceptorokat a sejtekben. A fotonterápia nem okoz semmilyen mellékhatást vagy károsodást a szervezetben. A BR-1150 három típusú lámpát (piros, kék, zöld) kombinál.

PIROS FÉNY (hullámhossz 625nm)

- Támogatja a természetes kollagén termelést.
- A kozmetikai termékekben lévő hatóanyagok felszívódásának hatékonyságának növelése.
- Javítja a vérkeringést a szubkután szövetben.
- Megakadályozza a pigmentfolt képződést.

KÉK FÉNY (hullámhossz 465nm)

- Aktiválja a porfirineket (kémiai reakciót indít, amely káros baktériumokat pusztít).
- Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatás.
- Akné képződés megelőzése.
- Biztonságos és hatékony kezelés.

ZÖLD FÉNY (hullámhossz 525nm)

- Hozzájárul az epidermális pigmentfoltok eltávolításához.
- 40-60% -kal lassítja a melanin termelését.
- Kiegyensúlyozza a bőr színtónusát.
- Gyulladáscsökkentő hatás.
- Minden bőrtípusra alkalmas.

IONIZÁCIÓ

Az ionizáció az a folyamat, amelyen keresztül az ionok közvetlenül behatolnak a bőr egyes rétegeibe. A bőr pórusai felszabadulnak. Az ionok hatására a sejtek jobban képesek felszívni a tápanyagokat a krémekből, maszkokból és szérumokból. A kezelés alkalmas száraz, zsíros és érzékeny bőrre. Az ionkezelés vitathatatlan előnye a természetes nedvesség felszívódása.

NEGATÍV IONOK

Sápadt, fáradt kinézet.
Stressz jelei.
Duzzadt arc.

SEMLEGES IONOK

A bőr alapos tisztítása.
Sötét foltok a szem területén.
Szennyeződés a bőrön.

MIÉRT A NEGATÍV IONOK?

Megnöveli a bőr képességét, hogy felszívja a tápanyagokat a krémekből, maszkokból és szérumokból. Összességében frissíti a bőrt, felszabadítja az izomszöveteket és antimikrobiális hatású.


MIÉRT KELL KEZELNI AZ IONOKAT?

Segít a kollagénszálak helyreállításában.
Segít az alapos tisztításban.

MAGAS FREKVENCIAJÚ MASSZÁZS

Az alkalmazás fejének magas frekvenciás masszázs funkciója van. Jó oszcillációt generál 12 000 ütem / másodperc gyakorisággal. A fő hatás, hogy javítja a vérkeringést az arc nyirokrendszerének stimulálásával. Az eredmény simább, frissebb bőr. Jobb tónus (a bőr egyenletesebb színű). Ugyanakkor mechanikusan stimulálja a kollagént és az elasztikus rostokat.

Eszköz leírás

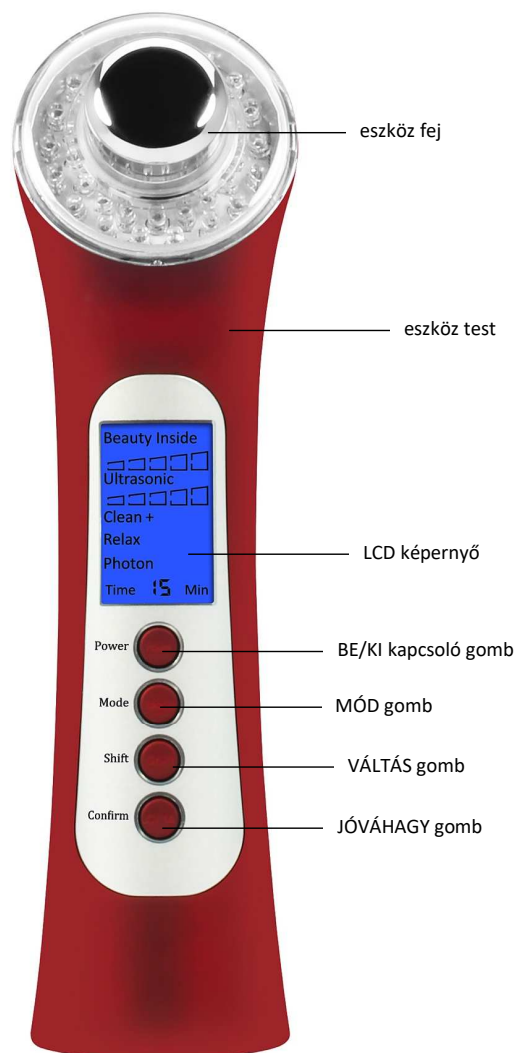

Gombok leírása

POWER – BE/KI KAPCSOLÓ GOMB

A POWER gomb BE/KI kapcsoló gombként működik a készülék be- és kikapcsolásához. A készüléket bármikor kikapcsolhatja a POWER gomb segítségével.

MÓD

A mód gomb a funkciók közötti váltáshoz használható. A funkcióválasztás mindig megerősíti a funkció nevének villogását (Ultrahang, Tiszta +, Nutri -, Relax, Foton, Idő). Ha nincs beállítva funkció, a készülék automatikusan kikapcsol 1 perc elteltével.


VÁLTÁS

A VÁLTÁS gomb segítségével állíthatja be a kiválasztott funkciók szintjét és intenzitását. A vibrációs funkcióhoz választhat szakaszos vagy folyamatos üzemmódot.

JÓVÁHAGY

Ha befejezte az összes funkció beállítását, nyomja meg a JÓVÁHAGY gombot a művelet megkezdéséhez. A JÓVÁHAGY gomb START / SZÜNET gombként is működik. Leállíthatja, és folytathatja a JÓVÁHAGY gombot.

Képernyő leírása

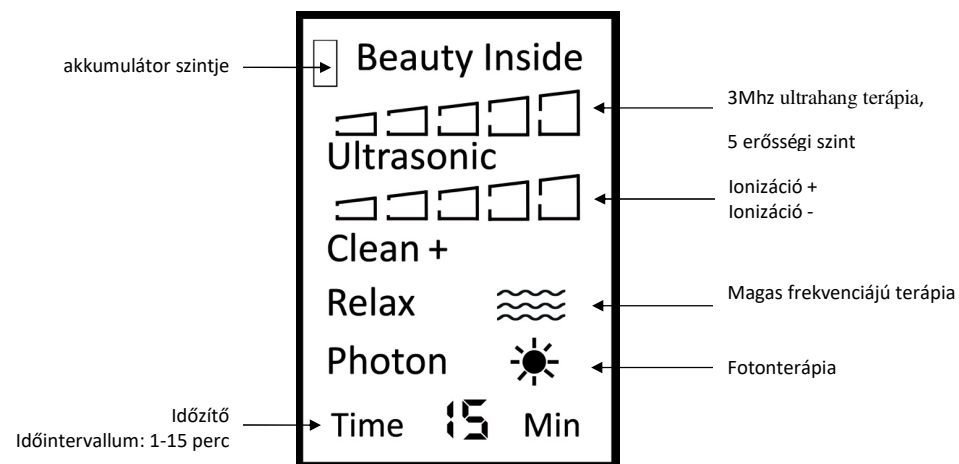

ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSOK

Most olvassa el, hogyan kell beállítani az egyes eszközök funkcióit. Mindig a POWER gomb megnyomásával bekapcsoláskor az eszköz készenléti állapotba kerül.

ULTRAHANG HULLÁMOK

- 1) Nyomja meg a MÓD gombot egyszer ("Ultrasonic" starts blinking).
- 2) Használja a VÁLTÁSGombot, hogy beállítsa az ultrahang erősségét. 1-15-ig lehet beállítani.
- 3) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. The head starts generating ultrasound waves and you can start with skin treatment. A fej elkezd az ultrahanghullámokat generálni, és kezelheti a bőrkezelést. Az ultrahang hullám funkciót jelzi a hullámszint jelzés villogása.
- 4) Nyomja meg a MÓD gombot hatszor. Használja a VÁLTÁS gombot a kezelési idő beállításához, 1-15 percre.
- 5) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. Az ultrahang hullám funkció aktiválódik a beállított időre.
- 6) Az ultrahang hullámfunkció bekapcsolása kb. 4 másodpercre lágy hangjelzést ad.
- 7) A funkciót bármikor szüneteltetheti / elindíthatja a JÓVÁHAGY gomb megnyomásával.
- 8) A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés:

Amikor ultrahang hullámokat használ, mindenkor használjon világos színű vezetőképes gélt, amelyet minden egészségügyi boltban megvásárolhat. Használat előtt finom réteget alkalmazzon a készülék fejére. A gél javítja a vezetőképeséget és a teljes hullámátvitelt az eszköz fejtől a bőrig. A kezelés befejezése után óvatosan tisztítsa meg az eszköz fejét száraz ruhával (ne használjon tisztítószerkelet vagy oldatokat).

Információ:

Egyszerűen ellenőrizheti az ultrahang hullámok jelenlétét. Amikor ultrahang hullámfunkciót használ, két vagy három kis csepp vizet kell alkalmazni az eszköz fején. Az így felhalmozott vízmintát azonnal elpárologtatják ultrahanghullámok.

FOTON TERÁPIA

!!! Figyelem !!! A fotonterápia beállítása előtt használja a csomagban található védőszemüveget.

- 1) Nyomja meg a MÓD gombot ötször (a "Foton" szöveg villogni kezd).
- 2) A VÁLTÁS gomb segítségével állítsa be a fotonterápia színét: piros, kék, zöld.
- 3) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. A fej elkezd fotonfényt termelni, és elkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg egyszer a MÓD gombot. A VÁLTÁS gombbal állítsa be a fotonterápia színét: piros, kék, zöld. A kezelés időtartama 1-15 perc.
- 5) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. A fotonterápiás funkció a beállított idő alatt fut.
- 6) A fotonterápiás funkció bekapcsolása kb. 4 másodperc alatt halk hangjelzéssel jár.
- 7) A JÓVÁHAGY gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja / elindíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

IONIZÁCIÓ

POZITÍV ION

- 1) Nyomja meg kétszer a MÓD gombot (a "Clean +" felirat villogni kezd).
- 2) Használja a VÁLTÁS gombot az ionizációs szint beállításához. 1 és 5 közötti tartomány áll rendelkezésre.
- 3) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. A készülék fején pozitív ionok keletkeznek, és elkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg négyszer a MÓD gombot. A VÁLTÁS gombbal állítsa be a kezelés időtartamát, 1-15 percre.
- 5) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. Az ionizációs funkció a beállított időtartamig fut.
- 6) A terápiás ionizációs funkció bekapcsolása kb. 4 másodperc alatt halk hangjelzéssel jár.
- 7) A JÓVÁHAGY gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja / elindíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

NEGATÍV ION

- 1) Nyomja meg a MÓD gombot háromszor (a "Nutri -" felirat villog).
- 2) Használja a VÁLTÁS gombot az ionizációs szint beállításához. 1 és 5 közötti tartomány áll rendelkezésre.
- 3) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. A készülék feje negatív ionokat hoz létre és elkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg háromszor a MÓD gombot. A VÁLTÁS gombbal állítsa be a kezelés időtartamát, 1-15 percre.
- 5) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. Az ionizációs funkció a beállított időtartamig fut.
- 6) A terápiás ionizációs funkció bekapcsolása kb. 4 másodperc alatt halk hangjelzéssel jár.
- 7) A JÓVÁHAGY gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja / elindíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

MAGAS FREKVENCIAJÚ MASSZÁZS

A készülék két vibrációs masszázsmódot kínál. Időszakos és folyamatos módot.

- 1) Nyomja meg a MÓD gombot négyszer (a "Relax" felirat villogni kezd).
- 2) Használja a VÁLTÁS gombot a szakaszos vagy folyamatos masszázsmódot beállításához. Megszakadt (hullámtörés szaggatott) Folyamatos (fodros szilárd).
- 3) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. A készülék vezetője elkezd rezegni, és elkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg a MÓD gombot hatszor. A VÁLTÁS gombbal állítsa be a kezelés időtartamát, 1-15 percre.
- 5) Nyomja meg egyszer a JÓVÁHAGY gombot. A rezgés funkció aktiválódik a beállított ideig.
- 6) A rezgés funkció bekapcsolása kb. 4 másodperc alatt lágy hangjelzéssel jár.
- 7) A JÓVÁHAGY gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja / elindíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

FUNKCIÓ KOMBINÁCIÓK

Az összes fenti funkciót szabadon használhatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy vagy több funkcióval egyszerre kezelheti a bőrt. A következő szabályok érvényesek a funkciók beállításakor:

- 1) A MÓD gombbal változtathatja meg az egyes funkciókat.
- 2) Használja a VÁLTÁS gombot a funkciók szintjének vagy intenzitásának beállításához.

Használja a MÓD és VÁLTÁS gombokat a kezelés alatt elindítandó összes funkció beállításához. Ha a funkció mutató nulla (a jelölőnégyzet nincs kitöltve), a funkció nem működik. Ha mindent beállít, beleértve az időt is, nyomja meg a JÓVÁHAGY gombot. Ez aktiválja az előző lépésben aktivált funkciókat.

ARC ÉS NYAK KEZELÉSÉRE AJÁNLOTT ELJÁRÁSOK

		
Arc	Orr	Száj
belülről kifelé mozgassa	fentről lefelé mozgassa	fentről lefelé mozgassa
		
Homlok	Szemkörnyék	Nyak
középről mozgassa a szélek felé	mozog a szemről a hajra	mozdítsa le az állát

Megjegyzés:

A kezelés során győződjön meg róla, hogy az eszköz feje a lehető legközelebb van a bőrhöz.

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a bőrt a készülékkel 30 percig körülbelül hetente háromszor kezelje.

1. lépés: Mélytisztítás

- Válassza ki az ionizáló funkciót [Clean +] és az ultrahangos hullám [Ultrahang] és a rezgésmasszázs [Relax] funkciókat is. Válassza ki a megfelelő intenzitást, ami kényelmesebbé teheti a kezelést.
- A bőr fölös nedvességének eltávolításához használjon gyapotszövetet. Most elkezdheti a bőrápolást. Optimális idő 8-10 perc. Használja az eszköz fejet lassan a bőrén. A használat után mossa le a bőrt vízzel a tisztítás befejezéséhez.

2. lépés: A tápanyagok jobb felszívódása a szérumból és egyéb készítményekből

- Válassza ki az ionizációs funkciót [Nutri -] és ultrahang [ultrahang] és vibrációs masszázst [Relax] funkciókat. Válassza ki a megfelelő intenzitást, ami kényelmesebbé teheti a kezelést.
- Ebben a lépésben kombinálhatja a műszereket a következő kozmetikai termékekkel: tonizáló, tápláló készítmények, illóolaj, aloe vera gél, ...)

Optimális idő 8-10 perc. Alkalmazza az eszköz fejet lassan a bőrén.

3. lépés: Foton terápia

- Válassza ki a [Photon] foton terápiát, és válassza ki az igényeinek megfelelő szint.

PIROS FÉNY (hullámhossz 625 nm)

Támogatja a természetes kollagén termelést. Javítja a hatóanyagok felszívódásának hatékonyságát a kozmetikai termékekből. Javuló vérkeringés a szubkután szövetben. Megakadályozza a pigment képződést.

KÉK FÉNY (hullámhossz 465 nm)

Aktiválja a porfirineket (kémiai reakciót indít el, amely káros baktériumokat pusztít). Antibakteriális és gyulladásgátló hatás. Akné megelőzésére. Biztonságos és hatékony kezelés.

ZÖLD FÉNY (hullámhossz 525 nm)

Segíti az epidermális pigmentfoltok eltávolítását. Ez fokozza a melanin termelést 40-60% -kal. Kiegyenlíti a bőr színtónusát. Gyulladáscsökkentő hatású. Alkalmaz minden bőrtípusra.

- Optimális kezelési idő 8-10 perc. Alkalmazza az eszköz fejet lassan a bőrén.

4. lépés: Relaxálás és vérkeringés fokozása

- Válassza ki a [Relax] vibrációs masszázst funkciókat, szakaszos vagy folyamatos üzemmód közül. Alkalmazza az eszköz fejet a bőrén. Körülbelül 10 másodperccel később, mozgassa a fejét egy kicsit tovább. Ezt az úgynevezett pontmozgást végezzük az egész arcon. Mozdítsa a fejét a bőr fölött, ott, ahol a rezgéskezelés kellemes.
 - Optimális kezelési idő 8-10 perc.
- Ez a fajta kezelés ideális a végső bőrkezelési lépésként. Lazítja a bőrt, enyhíti a merev izmokat és segíti az arc nyirokrendszerének működését.

Pigment folt eltávolítás (minden második nap)

1. lépés: Mély intenzív bőrtisztítás (ugyanúgy, mint az előző bekezdésben).
 2. lépés: Javítja a tápanyagok felszívódását (ugyanúgy, mint az előző bekezdésben).
 3. lépés: Foton terápia (válassza a piros és a zöld fényt). Mindig viseljen védőszemüveget!
- Minden szint 10-15 percig alkalmazzon.

Akné kezelés (minden nap)

1. lépés: Tisztítsa meg a bőrt. Használja az ultrahang hullámfunkciót és válassza ki a megfelelő intenzitást. Ultrahanggal kezelje a bőrt 5 percig. Mossa le a bőrt vízzel és szárítsa meg.

2. lépés: Használja az ultrahang hullámfunkciót fotonfényrel (kék fény) együtt. Mindig viseljen védőszemüveget!
Ajánlott kezelési idő: 10-15 perc.
3. lépés: Használja az ultrahang hullámfunkciót rezgésekkel együtt. Szakaszos vagy folyamatos üzemmód kiválasztásával. Ajánlott kezelési idő: 5 perc.

Megjegyzés: Az ultrahanghullámok és rezgések használata a bőr enyhe felmelegedését okozhatja. Ez teljesen normális, és nem kell aggódnia. A bőrápolás során a kozmetikumokat lassan vigye fel a bőrre. Ne nyomja erősen az eszközt.

Szem aatti sötét foltok kezelése(heti egyszer)

1. lépés: Mély intenzív bőrtisztítás (ugyanúgy, mint az előző bekezdésben). Fókuszáljon elsősorban a szem környékére. Alaposan mossa meg a bőrt vízzel és szárítsa meg.
2. lépés: Válassza ki az ultrahang hullámfunkciót, és állítsa be a nagyon finom intenzitást (1. szint, maximum 2.). Adja hozzá a fotonterápiás funkciót (vörös vagy kék fény Javasolt idő: 10 perc. Mindig használjon védőszemüveget!).
3. lépés: Válassza ki a vibrációs funkciót. Szakaszos vagy folyamatos üzemmódot állítson be az Önnek leginkább megfelelő módon. A fej és a szem körüli területre kell felhordani a hatóanyagot. Ajánlott kezelési idő: 5 perc.

Érzékeny bőr kezelése(heti egyszer)

1. Válassza ki az ultrahang hullámfunkciót.
2. Válassza ki a fotonterápiás funkciót (zöld és kék fény). Ajánlott kezelési idő minden fénynél: 10 perc.

!!! Figyelem !!! A fotonterápia beállítása előtt használja a csomagban található védőszemüveget.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A kezelés befejezése után a bőr kissé kipirulhat. A vörösséget a megnagyobbodott vérerek okozzák, és a véráramlás is megnő. Bizonyos esetekben enyhe duzzanat jelentkezhet, ami különösen bizonyos helyeken több folyadékot okoz, mint más helyeken. Ezek a tünetek azonban azt jelentik, hogy elérték a kívánt célt. Mindezek első látásra a negatívnak tűnhetnek, de a tünetek eltűnnek lassan, röviddel a kezelés befejezése után.

A kezelés eredménye a bőr rugalmasságának és textúrájának látható javulása lesz. A bőr simább lesz és lágyítja az átmenetet a bőr durvább területein. A bőr kezelt területe jelentősen finomabb mimikával és kevesebb ráncokkal rendelkezik. Az eredmények elsősorban az összes bőr- és bőrkezelési lépést követik.

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a megfigyelt felhasználók a finom vonalak 30% -os csökkenését és a ráncok 16% -ának csökkenését figyelték meg 4 hét alatt. Összességében a bőrminőség drámaian javult mind vizuálisan, mindérzékelhetően. Az eredmények a felhasználó egyedi bőr tulajdonságai, kora és neme szerint változtak.

Akkumulátor töltése

A készülék beépített, újratölthető Li-ion 1150mAh akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor a csomagban feltüntetett kábellel kerül feltöltésre. Mindig győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült meg. Kétféleképpen töltheti fel:

- 1) a számítógép USB portján keresztül
- 2) 220V-os adapterrel (mellékelve)

Karbantartás és tisztítás

Mindig győződjön meg róla, hogy az alkalmazás fejét a kezelés befejezése után megtisztította. Ne használjon erős fertőtlenítőszert. Javasoljuk, hogy speciális fertőtlenítő spray-ket használjon az egészségügyben vagy szépségszalonokban használt tisztítóeszközökhöz hasonlóan. Használja ezt a terméket kizárólag a rozsdamentes acél eszközök tisztításához. Győződjön meg róla, hogy nem kerül nedvesség a készülékbe.

Technikai paraméterek

- Frekvencia: 3 MHz.
- Piros fény hullámhossza: 625nm.
- Kék fény hullámhossza: 465 nm.
- Zöld fény hullámhossza: 525 nm.
- A foton terápiához összesen 16 LED fény áll rendelkezésre.
- Akkumulátor szint jelzés.
- Védőszemüvegek (foton terápia esetén) a csomagban mellékelve.
- Méret: 5x17x5 cm.
- Súlya: 165 g.
- Akkumulátor: Beépített 1150mAh Li-ion.
- Tápegység: 220V fő adapter (mellékelve).

A használt elektromos eszközök hulladék kezelése



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a közönséges hulladékhoz. A megfelelő ártalmatlanításhoz, helyreállításához és újrahasznosításhoz ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre kell továbbítani. Alternatív megoldásként, az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékeket a helyi viszonteladóhoz visszajuttathatja, ha egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanítása segít az értékes természeti erőforrások megőrzésében és a potenciálisan negatív környezeti és emberi egészségre gyakorolt hatások megelőzésében, ami a hulladék nem megfelelő megsemmisítésének következménye lehet. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi begyűjtőhelyhez. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. A termék ártalmatlanításához kérje ki a megfelelő ártalmatlanítási információkat a helyi hatóságoktól vagy a forgalmazójától.



Ez a termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról és az elektromos biztonságról szóló EU irányelvek követelményeinek.

Importőr

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
Cégjegyzékszám: 29195454 | Adószám: CZ29195454 | Email: mh@santadria.cz