

PHILIPS

Lumea


BRI959, BRI956,
BRI954, BRI953,
BRI950




**Skin tone table /Tabulka odstínů pleti/Tablica nijansi
kože/Bőrszín-táblázat/Tabela odcieni skóry/
Tabel nuanțe de piele/Tabuľka odtieňov pokožky/
Таблица за цвета на кожата**



**Hair color table /Tabulka barev chloupků/Tablica
boja dlačica/Szőrzetszín-táblázat/Tabela kolorów
włosów/Tabel culori de păr/Tabuľka odtieňov vlasov/
Таблица за цвят на телесно окосмяване**

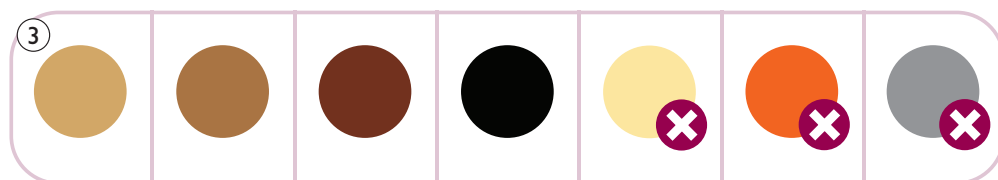

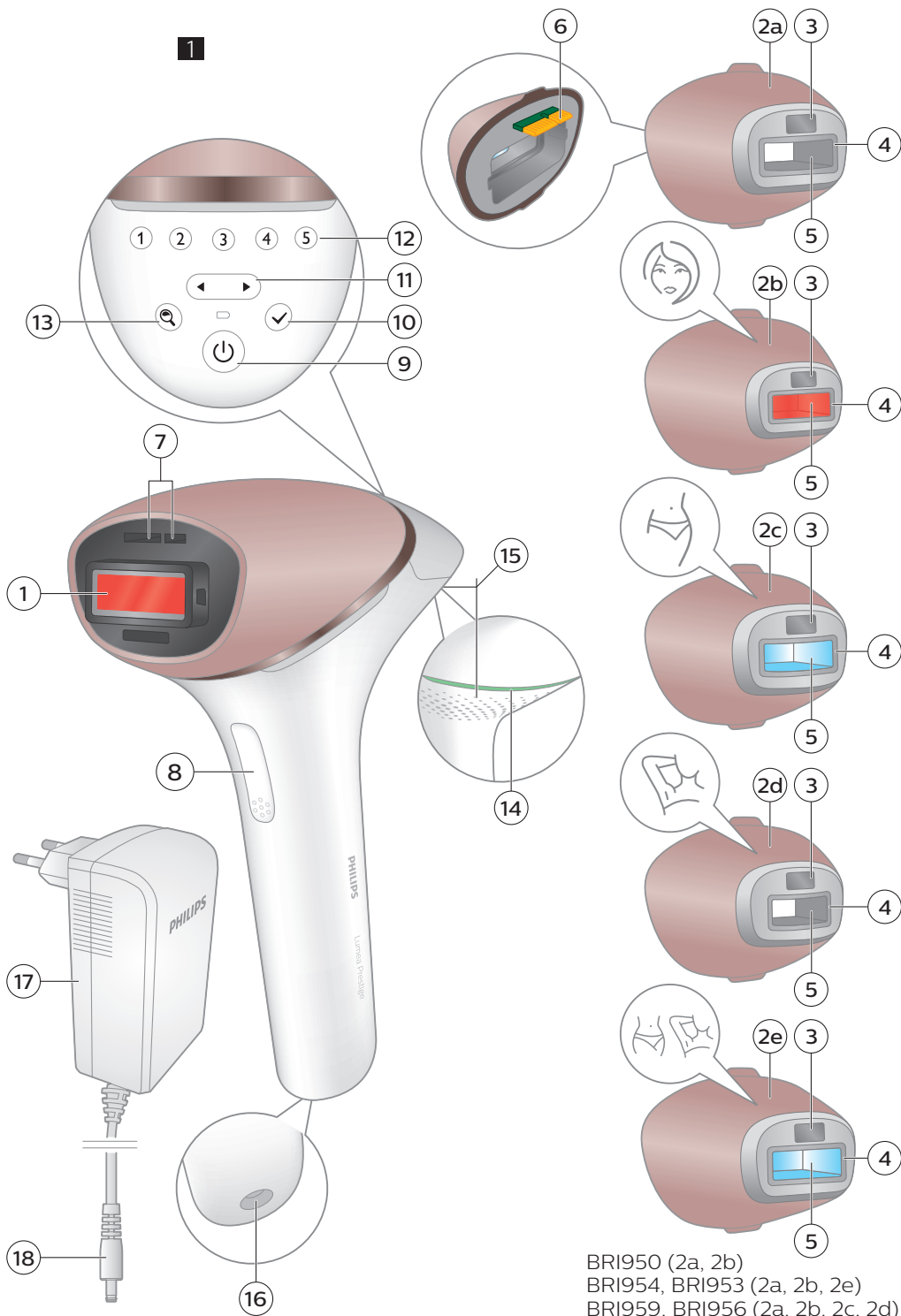

Tartalom

Üdvözljük!	82
A készülék bemutatása	82
Ki nem használhatja a Lumea készüléket? Ellenjavallatok	83
Általános feltételek	83
Gyógyszerek és előzmények	83
Betegségek és rendellenességek	84
Bőrbetegségek	85
Helyek és területek	85
Fontos!	86
Veszély	86
Figyelmeztetés	86
A sérülések elkerülése érdekében	88
Figyelem!	88
Elektromágneses mezők (EMF)	90
Az IPL működése	90
Alkalmas testszőrzetszínek:	90
Javasolt kezelési időrend	91
Kezdeti szakasz	91
Fenntartó szakasz	91
Kezelési idő területenként	92
A termék tulajdonságai	93
A kezdeti kezelési fázis után	93
A fenntartó kezelési fázis során	93
A Lumea Prestige készülék használata barnulás előtt és után	93
Barnulás napfénnel vagy mesterséges fénnel	93
Barnulás krémmel	93
A Lumea Prestige készülék használata előtti teendők	94
A bőr előkészítése	94
Bőrteszt	94
A Lumea Prestige használata	95
Bőrszínérzékelő	95
Tartozékok	95
Testszőrtelenítő tartozék	95
Arckezelő tartozék	95
Hónaljkezelő tartozék (BRI956, BRI959)	96
Bikínivonal-formázó tartozék (BRI956, BRI959)	96
Precíziós tartozék (BRI953, BRI954)	96
A megfelelő fényintenzitás kiválasztása	96
A készülék kezelése	97
Kétféle módszer használható: „ráhelyez és villant”, illetve „csúsztat és villant”	99
A használat után	99
Gyakori bőrreakciók	99
Ritka mellékhatások	100
Kezelés után	101
Töltés	101
Tisztítás és tárolás	102

Garancia és terméktámogatás	102
Újrahasznosítás	102
Műszaki jellemzők	103
Hibaelhárítás	104

Üdvözljük!

A Lumea üdvözlí Önt a szépség világában. Már csak néhány hét választja el Önt a selymes bőrtől.

A Philips Lumea az „intenzív pulzáló fény” (IPL) technológiát alkalmazza; erről ismert, hogy az egyik leghatékonyabb módszer a szőrszálak újránövekedésének tartós megelőzésére. Bőrápolási szakértőkkel szoros együttműködésben az eredetileg csak professzionális szépségszalonokban használt, villanófény-alapú technológia átdolgozásával lehetővé tettük a kényelmes és hatékony használatát az otthon biztonságában. A Philips Lumea kényelmes és hatékony kezelést tesz lehetővé az Ön számára megfelelő fényintenzitás mellett. A nem kívánt szőrnövekedés végleg a múlté. Élvezze minden nap a szőrtelenység érzését, a csodálatos kinézetet és a nagyszerű érzést.

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen. További információkért keresse fel a www.philips.com/lumea internetes oldalt, ahol a szakértőink tanácsait, oktatóvideókat és a gyakori kérdésekre adott válaszokat találja, hogy a legtöbbet hozhassa ki Lumea készülékéből.



Megjegyzés: Ezt a használati útmutatót mindig tartsa a készülék mellett.

A készülék bemutatása

- 1 Fénykibocsátó ablak beépített UV-szűrővel
- 2 Tartozékok
 - a Testszőrtelenítő tartozék
 - b Arckezelő tartozék
 - c Bikinivonal-formázó tartozék (BRI956, BRI959)
 - d Hónaljkezelő tartozék (BRI956, BRI959)
 - e Precíziós tartozék (BRI953, BRI954)
- 3 Bőrszínérzékelő
- 4 Beépített biztonsági rendszer
- 5 A tartozékon belül reflektor
- 6 Elektronikus érintkezők
- 7 Elektronikus érintkezők nyílása
- 8 Villantás gomb
- 9 Be-/kikapcsoló gomb
- 10 Megerősítés gomb
- 11 Váltó gombok
- 12 Intenzitásjelző fény
- 13 Beállítási tanács gomb
- 14 „Villanófény kész” jelző
- 15 Szellőzőnyílások

- 16 Készülék csatlakozóaljzata
- 17 Adapter
- 18 Kisméretű csatlakozódugasz
- 19 Luxus hordtáska (nincs a képen)
- 20 Tisztítókendő (nincs a képen)

Ki nem használhatja a Lumea készüléket? Ellenjavallatok

Általános feltételek

- Soha ne használja a készüléket, ha bőrszíne VI-os típusú (ritkán vagy soha ne ég le, nagyon sötétre barnul). Ilyen esetekben a készülék használata a bőrreakciók, így a hiperpigmentáció vagy hipopigmentáció, a bőr erős pirosodása vagy égése nagy kockázatát okozza.

Megjegyzés: Tekintse meg a kihajtható oldalon lévő 2-es számú bőrszín-táblázatot, hogy kiderüljön, használhatja-e a készüléket a bőrtípusával.



- Semmiképpen ne használja a készüléket, ha terhes vagy szoptat, mert nem próbálták ki a készüléket terhes vagy szoptató nőknél.
- Semmiképpen ne használja a készüléket, ha aktív beültetett orvostechnikai eszköze van, például szívritmusszabályzó, idegstimulátor, inzulinadagoló stb.

Gyógyszerek és előzmények

Soha ne használja a készüléket, ha az alábbi gyógyszerek bármelyikét szedi:

- ha a bőrét jelenleg alfa-hidroxi-savakkal (AHA-k), béta-hidroxi-savakkal (BHA-k), helyileg alkalmazott izotretinoinnal vagy azelainsavval kezelik, vagy nemrégiben ilyennel kezelték,
- ha az elmúlt hónapban izotretinoint tartalmazó gyógyszert szedett bármilyen formában, ilyen az Accutane és a Roaccutane. A kezeléstől a bőr megrepedezhet, kisebesedhet vagy irritálódhat.

- ha fényérzékenységet okozó hatóanyagokat vagy gyógyszereket szed, ellenőrizze a gyógyszer betegtájékoztatóját, és soha ne használja a készüléket, ha a betegtájékoztatóban az van írva, hogy a gyógyszer fotoallergiás vagy fototoxikus reakciókat okozhat, vagy kerülnie kell a napfényt a gyógyszer szedése alatt,
- ha véralvadásgátló gyógyszert szed, ilyen a nagy mennyiségű aszpirin is, ha a kezelés előtt legalább 1 héttel nem hagyja abba a kezelést, hogy kiürüljön a szervezetből,

Semmiképp ne használja a készüléket a következő esetekben:

- Ha terápiás sugárkezelést vagy kemoterápiát kapott az elmúlt 3 hónapban.
- ha olyan fájdalomcsillapítót szed, amely csökkenti a hőre való érzékenységet,
- ha immunszuppresszív gyógyszereket szed.
- Ha az elmúlt három hétben műtété volt a kezelendő területen.

Betegségek és rendellenességek

Semmiképp ne használja a készüléket a következő esetekben:

- Ha cukorbetegsége vagy más szervi vagy anyagcsere-betegsége van.
- Ha pangásos szívbetegsége van.
- Ha fényérzékenységgel kapcsolatos betegsége van, például polimorfikus fény-erupció (PMLE), napfény hatására kialakuló csalánkiütés, porfíria, stb.
- ha volt valaha kollagénbetegsége, ilyenek például a bőrkínövések vagy a rossz sebgyógyulás,
- ha epilepsziás, és érzékeny a villanófényekre,
- ha bőre érzékeny a fényre, és könnyen alakulnak ki rajta kiütések vagy allergiás reakciók,
- ha olyan bőrbetegsége van, mint az aktív bőrrák, vagy a kórtörténetében bőrrák vagy bármely más lokalizált rosszindulatú daganat szerepel a kezelendő területen,

- ha volt valaha a kezelni kívánt területeken érrendszeri rendellenessége, például visszér vagy értágulat,
- ha bármilyen vérzési rendellenességben szenved,
- Ha immunszuppresszív betegség (beleértve a HIV-fertőzést és az AIDS-betegséget is) szerepel a kórtörténetében.

Bőrbetegségek

Semmiképp ne használja a készüléket a következő esetekben:

- Ha fertőzése, ekcémája, égési sérülése, szőrtüszőgyulladása, felszakadt sebe, horzsolása, herpesze, sebe, sérülése vagy hematómája van a kezelni kívánt területen.
- Irritált (kipirult vagy sebes), leégett, nemrégiben barnított vagy mesterségesen barnított bőrön.
- A következő területeken: Anyajegyeken, szeplőkön, nagyobb vénákon, sötétebb, pigmentált területeken, hegeken, bőrrendellenességeken az orvossal történő konzultáció nélkül. Ez a bőr égését és a bőrszín változását okozhatja, ami megnehezítheti a bőrbetegségek felismerését.
- A következő területeken: Szemölcsön, tetováláson vagy sminktetováláson.

Helyek és területek

Soha ne használja a készüléket a következő területeken:



- A szem környékén és a szemöldökön vagy körülötte.
- A mellbimbón, a mellbimbóudvaron, a kis szeméremajkakon, a hüvelyben, a végbélnyílásnál, az orrnyílásokon és fülön belül.
- Férfiak ne használják arcukon és nyakukon, azokon a részeken ahol szakálluk nő, és a nemi szerveken.
- Ha hosszan tartó dezodort használ. Ilyenkor bőrirritáció léphet fel.

- Semmilyen mesterséges dolog közelében, ilyen a szilikon implantátum, a bőr alatti injekcióbeadási hely (például inzulinadagoló) vagy a piercing.

Megjegyzés: Ez a felsorolás nem teljes. Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a készüléket, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.

Fontos!

Veszély



- Tartsa a készüléket és a hálózati adaptert szárazon.
- Ha a készülék eltörik, az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg egyik belső alkatrészt sem.
- A víz és áram együtt veszélyes kombináció. Ne használja a készüléket nedves környezetben (pl. vízzel teli fürdőkád, megnyitott zuhanyozó vagy úszómedence mellett).

Figyelmeztetés

- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességűek, hacsak nem állnak felügyelet alatt, vagy a biztonságukért felelős személytől nem kaptak megfelelő utasítást a készülék használatára vonatkozóan.
- A terméket gyermekek előtt elzárva kell tárolni.
- A készüléket 15 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. A 15–18 éves kamaszok szülei vagy a felettük szülői jogokkal rendelkező személyek beleegyezésével és/vagy segítségével használhatják a készüléket. 18 év feletti felnőttek szabadon használhatják a készüléket.

- Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket. Ne használja a készüléket, illetve az adaptert, ha megsérült. Minden esetben eredeti típusúra cserélje ki a sérült alkatrészt.
- Ne használja a készüléket, ha a fénykibocsátó ablak UV-szűrője és/vagy toldata törött.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa és ne vágja el az adapter és a kábel semelyik részét.
- Ne használjon ceruzát vagy tollat a kezelendő terület megjelölésére. Ez égési sérülést okozhat a bőrén.
- Ha sötétebb tónusú a bőre, óvatosan kezeljen sötétebb területet közvetlenül egy világosabb terület után. A bőrszínérzékelő esetleg nem gátolja azonnal a kezelést a sötétebb bőrfelülethez érve.
- Egyeseknél a lézerrel vagy intenzív fényimpulzusokkal való szőrtelenítés fokozott szőrnövekedést okozhat. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint ennek a kockázatnak legjobban a Földközi-tenger medencéjében, a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában élő hölgyek vannak kitéve arcuk és nyakuk kezelése során.
- Az adapter, a fénykibocsátó ablak és a toldatok szűrői használat közben erősen felforrósodhatnak. Ne érintse meg az adaptert, a fénykibocsátó ablak belsejét, valamint a toldatok ablakát és belső részeit, csak ha már lehűltek.



- A készülék levehető hálózati adapterrel rendelkezik (lásd a szimbólumot). Kizárólag a készülékhez kapott adaptert használja. A referenciaszám (AD2069x20020HF) a készüléken található. A referenciaszámban lévő "x" az országban használt csatlakozótípusra vonatkozik.

Megjegyzés: Ha a legutóbbi kezelés óta bőrszínváltozást tapasztal (pl. barnítás miatt), javasoljuk, hogy végezzen bőrtesztet és várjon utána 30 percet a következő kezelés megkezdéséig.

A sérülések elkerülése érdekében

- Ügyeljen rá, hogy semmi se akadályozza a levegő áramlását a készülék szellőzőnyílásain keresztül.
- Soha ne tegye ki a készüléket nagy ütésnek; ne rázza, és ne ejtse le a készüléket.
- Ha a készüléket nagyon hideg környezetből nagyon meleg környezetbe viszi, vagy fordítva, a használat előtt várjon legalább 3 órát.
- Száraz, biztonságos helyen tárolja a készüléket.
- Használat közben ne tegye ki a készüléket 15 °C-nál alacsonyabb vagy 35 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.
- A károsodás elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket több órán át közvetlen napsütésnek vagy UV-fénynek.

Figyelem!

- A készülék csak az arccsont alatti területeken használható a nem kívánt szőrzet eltávolítására. Ne használja más célra. Ellenkező esetben veszélynek teszi ki magát. Férfiak ne használják arcukon és nyakukon, azokon a részekon ahol szakálluk nő és a nemi szerveken.




- A készülék nem mosható. Ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le vízcsap alatt.
- A készüléket higiéniai okokból csak egy személy használhatja.
- Csak a bőrtípusának megfelelő beállításokkal használja a készüléket. Ha a javasoltnál magasabb beállítással használja, növekedhet a bőrreakciók és mellékhatások kockázata.
- A készülék tisztításához ne használjon sűrített levegőt, dörzsszivacsot, maró hatású tisztítószer vagy súrolószert (pl. benzint vagy acetont).

- A készülék által kibocsátott szórt fény nem árt a szemnek. A készülék használata során ne nézzen a villanófénybe. A használat során nem szükséges védőszemüveget viselni. A készüléket jól megvilágított helyiségben használja, hogy a fény ne vakítsa el.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet.
- Bekapcsolt állapotban soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha a „Ki nem használhatja a Lumea készüléket?” és az „Ellenjavallatok” című részben leírtak bármelyike igaz Önre.
- A természetes napfénnel vagy mesterséges fénnel történő barnulás befolyásolja a bőre érzékenységet és színét. Végezzen bőrtesztet a megfelelő fényintenzitás meghatározásához.
- A Lumea használata előtt tisztítsa meg bőrét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta szőrszálak, teljesen száraz-e, és olajos anyagoktól mentes-e.
- Egy kúra során ugyanazt a bőrfelületet csak egyszer kezelje. Az nem javítja a kezelés hatékonyságát, de növeli a bőrreakciók kockázatát.
- A Lumea készülékkel végzett kezelés nem szabad, hogy fájdalmas legyen. Csökkentse a fényintenzitást, ha kellemetlen érzést tapasztal.


Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.


Az IPL működése

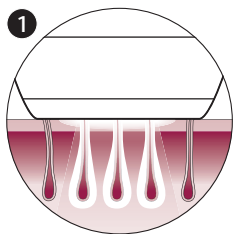

Az intenzív pulzáló fény (IPL) technológia fényimpulzusokat küld a bőrbe, melyeket a szőr tüszők elnyelnek. Minél világosabb a bőr és sötétebb a szőr, annál jobb a fényimpulzusok elnyelődése.

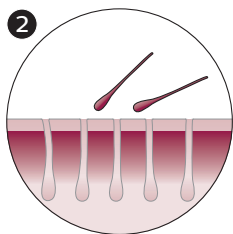

A fényimpulzusok hatására a szőrszál nyugalmi fázisba kerül. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik, és az újránövekedést is gátolja.

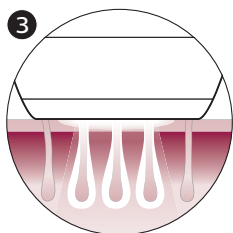

A szőrszálak növekedésében különböző fázisok váltják egymást. Az IPL technológia csak akkor hatékony, ha a szőrszál a növekedési fázisban van. Egy időben nem minden szőrszál van növekedési fázisban. Ezért javasoljuk, hogy végezze el az első kezelési szakaszt (4–5 kezelés, köztük 2 hetes szünetekkel), majd az utókezelési szakaszt (4–8 hetente fenntartó kezelés), hogy minden szőrszálat biztosan a növekedési fázisban érjen a kezelés.

Tipp: A hosszú időn át tartós szőrtelenítéshez a 4 hetenkénti fenntartó kezelést javasoljuk.

Megjegyzés: A Lumea készülékkel végzett kezelés nem hatásos, ha világos szőke, ősz, vörös vagy fehér a haja színe, mert a világos színű szőrök nem nyelnek el kellő mennyiségű fényt. Az alábbiakban láthatja azokat a hajszíneket, amelyek esetén a Lumea alkalmas és hatékony.

Alkalmas testszőrzetszínek:

Megjegyzés: Tekintse meg a kihajtható oldalon lévő 3-as számú szőrzetszín-táblázatot, hogy kiderüljön, használhatja-e a készüléket testszőrzetszínével.



Javasolt kezelési időrend

Kezdeti szakasz



Az első 4 vagy 5 kezeléshez azt javasoljuk, hogy a Lumea Prestige készüléket kéthetente használja, hogy biztosítsa az összes szőrszál kezelését.

Megjegyzés: Ha egy IPL-kezelés helyett más szőrtelenítési módszert (pl. gyantázást vagy epilálást) alkalmaz, az gátolja a kívánt szőrtelenítés elérését.

Megjegyzés: ha a Lumea kezelések közötti időszakokban akar szőrteleníteni, alkalmazhatja normál szőrtelenítési módszerét.

Fenntartó szakasz




A kezdeti szakasz (4 vagy 5 kezelés) után azt ajánljuk, hogy 4–8 hetenként végezzen fenntartó kezelést, ha úgy látja, hogy újra nőni kezdenek a szőrszálak. Ez az időrend biztosítja az eredmény fenntartását és a bőr hónapokig tartó simaságát. A kezelések között eltelt idő változhat a szőr-újranövekedés egyéni jellemzőitől és a testtájtól függően.

Tipp: A kezelések ütemezését írja be a naptárába, hogy ne feledkezzen el a kezelésekről.

Megjegyzés: A készülék gyakoribb használata nem növeli a hatékonyságát.

Kezelési idő területenként

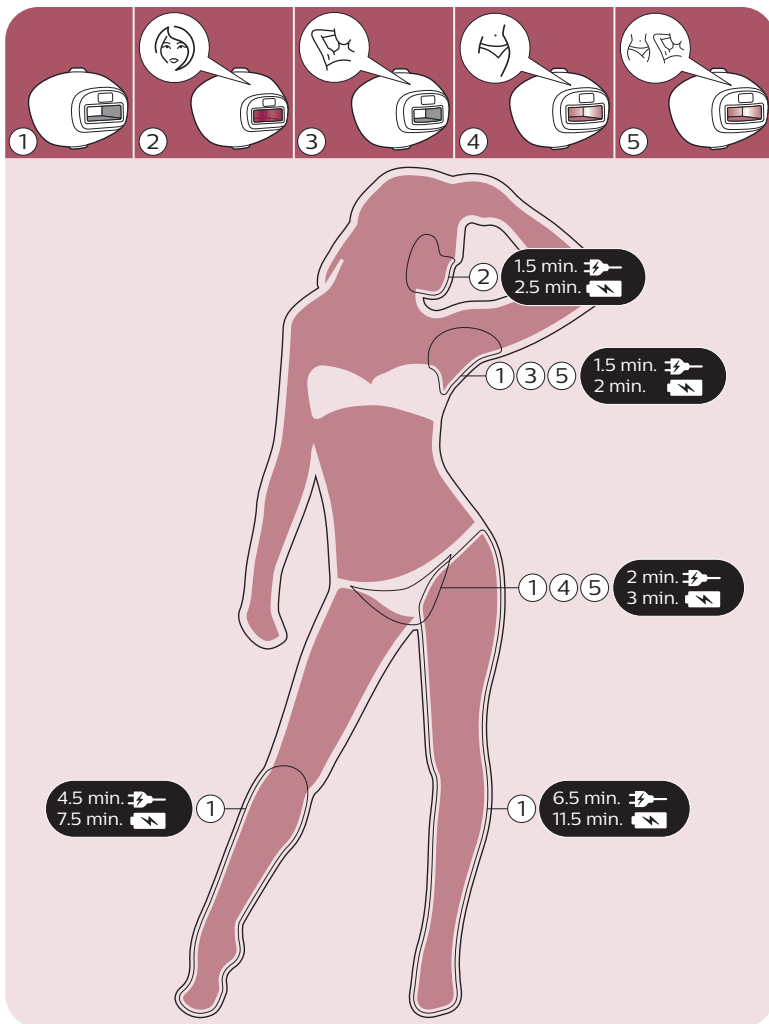

A szimbólum jelentése: Vezetékkel használja a készüléket.



A szimbólum jelentése: Vezeték nélkül használja a készüléket.

BRI950
(1, 2)

BRI953, BRI954
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959
(1, 2, 3, 4)

A termék tulajdonságai

A kezdeti kezelési fázis után

- Az első használat után 1–2 hétig tarthat, amíg kihullanak a szőrszálak. Az első néhány használat utáni első hetekben látszani fognak növekedő szőrszálak. Ezek valószínűleg olyanok, amelyek az első néhány használat idejében nem voltak a növekedési fázisban.
- 2–3 kezelés után a szőrnövekedés észrevehető csökkenése tapasztalható. Az összes szőrszál hatékony kezeléséhez azonban fontos, hogy folytassa a használatot a javasolt időrendnek megfelelően.
- 4–5 kezelés után a szőrnövekedés jelentősen csökken a Lumea készülékkel kezelt területeken. A szőrzet sűrűségének is láthatóan csökkennie kell.

A fenntartó kezelési fázis során

- Az eredmény fenntartásához továbbra is gyakran (4–8 hetenként) meg kell ismételni a használatot.

A Lumea Prestige készülék használata barnulás előtt és után

Barnulás napfénnel vagy mesterséges fénnel



Ha szándékosan természetes napfénynek vagy mesterséges fénynek teszi ki a bőrét barnulás céljából, ez befolyásolja a bőre érzékenységét és színét. Ezért fontos a következő:

- A kezelés után várjon legalább 48 órát, mielőtt a kezelt területet napfénynek tenné ki. 48 óra eltelte után is ellenőrizze, hogy a bőrén nem látható pirosság a kezelésből eredően.
- Ha bőrét napfénynek teszi ki (nem barnulás céljából) a kezelés utáni 48 órán belül, a kezelt területeken használjon legalább 50-es faktorú naptejet. Ennek az időnek az elteltével még két hétig használjon legalább 30-as faktorú naptejet.
- A barnulás után várjon legalább 2 hetet, mielőtt a Lumea készüléket használja.
- Ha a közelmúltban napozott, végezzen bőrtesztet a megfelelő fényintenzitás meghatározásához. A további tudnivalókat a „Bőrteszt” c. fejezetben találja.
- Ne használja a Lumea készüléket leégett bőrterületeken.


Megjegyzés: Az alkalmi vagy nem közvetlen napfény nem minősül szándékos barnulásnak.

Barnulás krémmel

Ha mesterséges barnító krémet használt, a készülék használata előtt várjon, amíg a mesterséges barnaság teljesen el nem tűnt.

A Lumea Prestige készülék használata előtti teendők

A bőr előkészítése

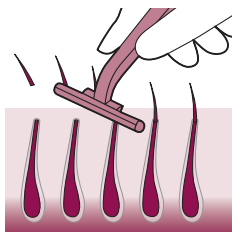

A Lumea készülék használata előtt a bőrt elő kell készíteni a bőr felületén található szőrszálak eltávolításával. Ennek hatására a fényt a szőrszálak bőrfelület alatti része nyeli el, biztosítva a kezelés hatékonyságát. A szőrtelenítéshez végezhet borotválást, rövidre vágást, epilálást vagy gyantázást. Ne használjon szőrtelenítő krémet, mert a vegyszerek bőrreakciót okozhatnak.



Ha a gyantázást választja, a Lumea használata előtt várjon 24 órát, hogy a bőre megnyugodhasson. Javasoljuk, hogy a kezelés előtt zuhanyozzon le, hogy minden gyantamaradványt eltávolítson a bőréről.

- 1 Végezzen előkezelést a Lumea készülékkel kezelni kívánt területeken.
- 2 Tisztítsa meg bőrét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta szőrszálak, teljesen száraz-e, és olajos anyagoktól mentes-e.

Megjegyzés: ha a borotválás bőrirritációt okoz, akkor ne használja a készüléket, míg az irritáció el nem múlik.

Bőrteszt

Ha első alkalommal vagy közelmúltbeli napozás után használja a Lumea Prestige készüléket, végezze el a bőrtesztet minden kezelendő területen. A bőrteszt szükséges a bőr reakciójának ellenőrzéséhez és a megfelelő fényintenzitás meghatározásához minden testtájon.

- 1 Helyezze fel a kezelni kívánt területnek megfelelő tartozékot. Lásd a következő fejezetet: „Tartozékok”.

Megjegyzés: ne nehezen elérhető vagy érzékeny területeken próbálja ki a készüléket (boka és csontos részek).

- 2 Kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze, hogy az 1-es szint van-e beállítva.
- 3 Helyezze a készüléket merőlegesen a bőrfelületre, hogy a beépített biztonsági rendszer érintkezzen a bőrrel.

A beépített biztonsági rendszer megakadályozza a bőrrel való érintkezés nélküli, nem kívánt villantást.

- 4 Villantás kibocsátásához nyomja meg a villantás gombot.
- 5 Csúsztassa a készüléket a bőrén a következő kezelendő területre.
- 6 Állítsa az intenzitást egy szinttel magasabbra, villantson egyet, majd vigye a készüléket a következő területre. Ismételje ezt addig, amíg az adott intenzitási szint még kellemes. Lásd a táblázatot: „A megfelelő fényintenzitás kiválasztása”.
- 7 A bőrteszt után várjon 24 órát, és ellenőrizze, hogy jelentkezik-e bármilyen reakció a bőrön. Ha bőre reakciót mutat, a következő használathoz válassza azt a legmagasabb beállítást, amely nem eredményezett bőrreakciót.

A Lumea Prestige használata

Bőrszínérzékelő



A tökéletes biztonság érdekében a Lumea Prestige beépített bőrszínérzékelője méri a bőrszínét minden használat kezdetekor és alkalmanként a kezelés közben is. Ha azt állapítja meg, hogy a bőrszíne túl sötét a Lumea készülékkel való kezeléshez, a „Villanófény kész” jelzőfény narancssárga fénnel villogni kezd, és a készülék automatikusan letiltja a villantást, hogy megvédje Önt a bőrreakcióktól. Ez azt jelenti, hogy nem villant, ha megnyomja a villantás gombot.

Tartozékok

Az optimális eredmény és a biztonság érdekében fontos, hogy testtájanként cserélje a tartozékokat. A Lumea Prestige akár négy különböző, megfelelően kialakított tartozékkal a teljes testfelületen specifikus kezelést nyújt.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a készülék leáll és hibát jelez, amikor piszkos van a tartozék csatlakozóján. Tisztítsa meg az érintkezőket, ha ez előfordul.

A tartozék felhelyezéséhez egyszerűen pattintsa a fénykibocsátó ablakra.

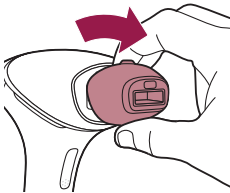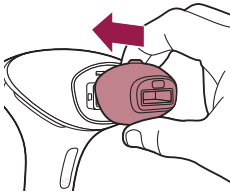

A tartozék eltávolításához egyszerűen húzza le a fénykibocsátó ablakról.

Testszűrőtelenítő tartozék

A testszűrőtelenítő tartozék rendelkezik a legnagyobb kezelőablakkal, valamint ívelt kialakítású, így nyaktól lefelé minden testtáját hatékonyan lefed és kezel. Különösen a nagyméretű területeket, például a lábat, a kart és a hasat.

Arckezelő tartozék

Az arckezelő tartozék precíz és lapos kialakítású, valamint egy beépített szűrővel rendelkezik a felső ajak, az áll és a pajesz érzékeny bőrének biztonságos és pontos kezeléséhez.




Figyelem!

- Ne kezelje a szemöldökét a Lumea készülékkel.
- Ha a felső ajka fölötti területet kezeli, vigyázzon, nehogy az ajkára villantson.



Hónaljkezelő tartozék (BRI956, BRI959)

A hónaljkezelő tartozék kifejezetten ívelt kialakítású a nehezen elérhető hónaljszőrök kezeléséhez.

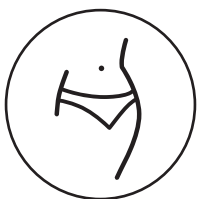

Bikinivonal-formázó tartozék (BRI956, BRI959)

A bikinivonal-formázó tartozék speciális kialakítású a bikiniterület hatékony kezelése érdekében. Ívelt kialakítással és átlátszó bikiniszűrővel rendelkezik. A bikiniterületen található szőrzet általában vastagabb és erősebb, mint a láb szőrzete, ezért a bikinivonal-formázó tartozék speciális szűrővel van ellátva a bikiniterületen található vastagabb szőr kezelésére.



Precíziós tartozék (BRI953, BRI954)

A precíziós tartozék ívelt kialakítású a bikini- és hónaljterület kezeléséhez. Egy extra átlátszó szűrővel ellátott közepes méretű ablakkal rendelkezik. A bikini- és hónaljterület pontos és hatékony kezelésére szolgál.


A megfelelő fényintenzitás kiválasztása

A Lumea 5 különböző fényintenzitással rendelkezik, és javaslatot tesz az Ön bőrszínéhez legjobban megfelelő beállításra. Bármikor módosíthatja a fényintenzitást olyanra, amelyet megfelelőnek érez.

- 1 A be- és kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. A készülék az 1. fényintenzitással kezd működni.

Megjegyzés: Ha a bőréhez kapott javaslatlót eltérően kívánja beállítani a fényintenzitást, nyomja meg az átkapcsoló gombot egyszer vagy többször, amíg el nem éri a kívánt beállítást. A megfelelő intenzitást jelző fény fehér fénnel világít.

- 2 Nyomja meg a SmartSkin érzékelő gombot (☺), és helyezze a készüléket a bőrére.
- 3 Miután a készülék végigpásztázta a bőrt, a javasolt fényintenzitások jelzőlámpái fehér fénnel villogva jelzik, hogy a bőrszíne alapján mely intenzitásokat használhatja.
- 4 Nyomja meg a jóváhagyás gombot (☑) annak megerősítéséhez, hogy a javasolt beállítással kívánja használni a készüléket.

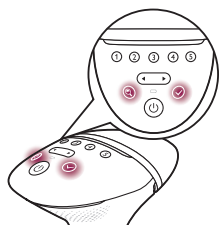

A Philips Lumea automatikusan a legmagasabb javasolt intenzitást használja, amit a LED jelzőfény folyamatosan világítva jelez.

A Lumea lehetővé teszi, hogy azt a fényintenzitást válassza ki, amelyet a legkényelmesebbnek talál. Ha manuálisan szeretné beállítani a fényintenzitást, az alábbi táblázat alapján teheti meg. Ebben a táblázatban olyan beállításokat talál, amelyek a felhasználók többségének kényelmes, de hatékony megoldást adnak.

- 5** A Lumea készülékkel végzett kezelés nem szabad, hogy fájdalmas legyen. Csökkentse a fényintenzitást, ha kellemetlen érzést tapasztal. használatá: Ezt a fel- és lefelé mutató nyílombokkal teheti meg.


Megjegyzés: A készülék automatikusan letiltja a villantást, ha a bőrszíne túl sötét (VI. bőrtípus), hogy megvédje Önt a bőrreakcióktól. A „Villanófény kész” jelzőfény narancssárga fénnel villogva jelzi, ha a bőrszíne túl sötét.

- 6** Egy újabb testfelületre való áttéréskor, vagy ha a közelmúltban napozott, végezzen bőrtesztet a megfelelő fényintenzitás meghatározásához. A beállítási tanács funkció újbóli bekapcsolásához nyomja meg a nagyítóüveg szimbólumot.

Megjegyzés: Mivel a test különböző részein a bőrszín eltérő lehet, minden testfelülethez külön kell kiválasztania a megfelelő beállítást.

Bőrtípus	Bőrszín	A fényintenzitás beállítása
I	Fehér: mindig leég, nem barnul.	4/5
II	Bézs: könnyen leég, minimálisan barnul.	4/5
III	Világosbarna: könnyen leég, lassan barnul világosbarna színre.	4/5
IV	Középbarna: ritkán ég le, könnyen barnul.	3/4
V	Sötétbarna: ritkán ég le, nagyon könnyen barnul.	1/2/3
VI	Barnásfekete és sötétebb: ritkán vagy soha ne ég le, nagyon sötétre barnul.	Ön nem használhatja a készüléket.


Megjegyzés: Tekintse meg a kihajtható oldalon lévő 2-es számú bőrszín-táblázatot, hogy kiderüljön, használhatja-e a készüléket a bőrtípusával.

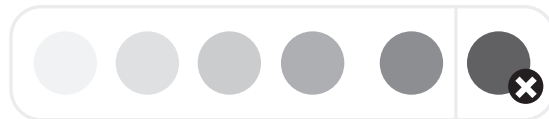

Megjegyzés: Számos tényező okozhatja, hogy bőre különbözőképpen reagálhat különböző napokon vagy alkalmakkor.


A készülék kezelése

- 1** Használat előtt tisztítsa meg a tartozékot és a fénykibocsátó ablakot.

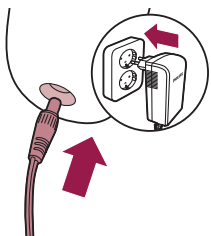

- 2 Dugja a kis méretű dugót a készülékbe, és csatlakoztassa az adaptert a fali aljzatba.


Megjegyzés: Ha a készülék a kezelés megkezdésekor nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor az egész test kezelése során lemerül. Javasoljuk, hogy a kezelés megkezdése előtt teljesen töltsen fel a készüléket, vagy használja hálózatról.

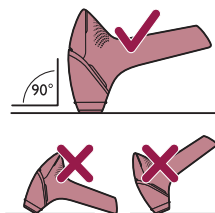

- 3 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki és a bőrszínhez való fényintenzitást. A megfelelő bőrszín kiválasztásához hasznos lehet a beállítási tanács, amelynek leírását a következő fejezetben találja: „A megfelelő fényintenzitás kiválasztása”.

- 4 Helyezze a készüléket merőlegesen a bőrfelületre, hogy a beépített biztonsági rendszer érintkezzen a bőrével.

A beépített biztonsági rendszer megakadályozza a bőrrel való érintkezés nélküli, nem kívánt villantást.

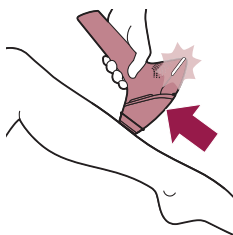

- 5 Nyomja a készüléket erősen a bőrre, hogy tökéletesen érintkezzen a bőrrel. A készülék hátoldalán található „Villanófény kész” jelzőfény zöld fénnel világít, ami azt jelzi, hogy folytathatja a kezelést.

Megjegyzés: Ha a „Villanófény kész” jelzőfény gyorsan, narancsszínű fénnel villog, az azt jelenti, hogy a bőre nem alkalmas a kezelésre. Ebben az esetben a készülék automatikusan letiltja a villantás kibocsátását. Megpróbálhatja a készülék használatát más területeken, ahol világosabb a bőrszíne.

Megjegyzés: Ha a „Villanófény kész” jelzőfény folyamatos fehér fénnel világít, a készülék nem érintkezik megfelelően a bőrével.


Tipp: Ha a Lumea készüléket a bikinivonal területén használja, és valamennyi szőrt meghagy, ügyeljen arra, hogy a bőrszínérzékelőt ne a megmaradt szőrré helyezze, mivel ez leállíthatja a készüléket..



- 6 Villantás kibocsátásához nyomja meg a villantás gombot. A készülék egy halk, pattanáshoz hasonló hangot ad. Melegséget kell éreznie a villantás miatt.

Megjegyzés: A készülék által kibocsátott szórt fény nem árt a szemnek. A készülék használata során ne nézzen a villanófénybe. A használat során nem szükséges védőszemüveget viselni. A készüléket jól megvilágított helyiségben használja, hogy a fény ne vakítsa el.

- 7 Helyezze a készüléket a bőrön a következő kezelendő területre. Az egyes villantások után legfeljebb 2 másodpercig tart, amíg a készülék újból kész villantani. Ha a „Villanófény kész” jelzőfény fehér fénnel világít, újra kibocsáthat egy villantást.

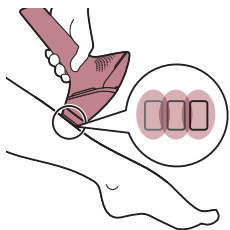

- 8 Hogy biztos lehessen abban, hogy minden területet kezelt, a villantásokat egymáshoz közel alkalmazza. Hatásos fény kizárólag a fénykibocsátó ablakon keresztül lép ki. A készüléknek a bőrével érintkező része ennél kicsivel nagyobb, ezért szükséges némi átfedés. Viszont minden területen csak egyszer villantson.


Megjegyzés: Ha ugyanazon a területen kétszer villant, az nem javítja a kezelés hatékonyságát, de növeli a bőrreakciók kockázatát.

Megjegyzés: Ne használjon ceruzát vagy tollat a kezelendő terület megjelölésére, mivel ez mellékhatásokat okozhat a bőrén.


- 9 A kezelés befejezése után nyomja meg és tartsa megnyomva a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához. Húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, ha hálózatról használta a készüléket.

Megjegyzés: Ha hosszú ideig nem használta a készüléket, fontos a bőrteszt megismétlése, valamint a készülék feltöltése a teljes lemerülés elkerülésére.

Kétféle módszer használható: „ráhelyez és villant”, illetve „csúsztat és villant”

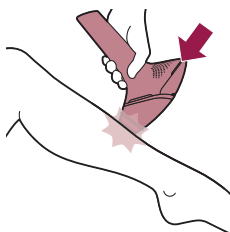

- A Philips Lumea készülék két kezelési módszerrel használható, hogy kényelmesebb legyen a különböző testterületek kezelése.
- A „ráhelyez és villant” módszer a kisméretű vagy ívelt területek, például a térd és az alkar kezelésére ideális. Egyszerűen nyomja a készüléket a bőrre, majd nyomja meg a villantás gombot egy villantás kibocsátásához.

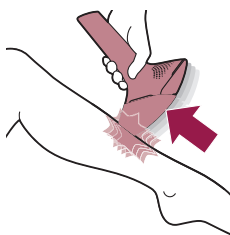

- Ez a „csúsztat és villant” módszer különösen kényelmes nagyobb területek, mint például a láb kezelésére. Tartsa lenyomva a villantás gombot, miközben a készüléket a bőrén csúsztatja, és a készülék egymás után több villantást bocsát ki.

Megjegyzés: Két villantás között a készüléknek kb. 2 másodpercre van szüksége, ha hálózatról használják, illetve kb. 3,5 másodpercre, ha akkumulátorról használják, ezért ügyeljen arra, hogy minden kezelni kívánt területre villantson. Ha túl gyorsan csúsztatja a bőrén, vakfoltokat hagy.

A használat után

Gyakori bőrreakciók

A bőr kipirosodhat, bizseregphet, csiklandozhat vagy melegnek érezheti. Ez a reakció teljesen normális, és gyorsan megszűnik.

Bőre lehetséges, hogy száraznak fog tűnni, vagy viszketni fog, mivel a borotválás vagy a borotválás melletti fénytechnológias kezelés kiszáríthatja bőrét. Hűtőborogatással vagy nedves arcotörölő kendővel hűtheti a területet. Ha a szárazság hosszabb ideig fennáll, a kezelés után nem illatosított testápolót használhat a kezelt területen.

Ritka mellékhatások

- Égési sérülések, erős kipirosodás (pl. a hajtűszők körül) és duzzanat: ezek a reakciók nagyon ritkán fordulnak elő. és a bőrszínhez képest túl erős fényintenzitás eredményei. Ha a reakciók nem múlnak el 3 napon belül, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. A következő kezeléssel várjon addig, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyult, és használjon alacsonyabb fényintenzitást.
- A bőr elszíneződése: nagyon ritkán fordul elő. A bőr elszíneződése a környező területhez képest sötétebb (hiperpigmentáció) vagy világosabb (hipopigmentáció) foltként észlelhető. A bőrszínhez képest túl erős fényintenzitás eredményezi. Ha a bőr elszíneződése nem múlik el 2 héten belül, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. Ne kezelje az elszíneződött területeket, amíg az elszíneződés el nem tűnt, és a bőr vissza nem nyerte rendes bőrszínét.
- A bőrfertőzés nagyon ritkán, de előfordulhat (mikro)sérülés, a bőr égése vagy irritációja stb. esetén.
- A felhám kimelegedése (éles határvonalú, barnás terület, amely sötétebb bőrszín esetén gyakran előfordul, és nem társul hozzá a bőr szárazsága): Ez a reakció nagyon ritkán fordul elő. Ha a reakció nem múlik el 1 héten belül, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. A következő kezeléssel várjon addig, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyult, és használjon alacsonyabb fényintenzitást.
- Felhólyagzás (mintha apró buborékok lennének a bőr felszínén): nagyon ritkán fordul elő. Ha a reakció nem múlik el 1 hónapon belül, vagy ha a bőr elfertőződik, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. A következő kezeléssel várjon addig, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyult, és használjon alacsonyabb fényintenzitást.
- Hegesedés: gyakran egy égés másodlagos hatása, amelynek gyógyulása több, mint egy hónapig tarthat.

- Szőrtüszőgyulladás (szőrtüszők körüli duzzanat, amelyhez gennyes pattanások kialakulása társul): ez a reakció nagyon ritkán fordul elő, a sérült bőrfelület bakteriális fertőzése okozza. Ha a reakció előfordul, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz, mivel a szőrtüszőgyulladásra antibiotikumos gyógykenőcsöt kell használni.
- Túl erős fájdalom: akkor fordulhat elő kezelés közben vagy után, ha nem szőrtelen(ített) területen vagy a bőrszínhez képest túl erős fényintenzitással használja a készüléket, ha egynél többször villant ugyanarra a területre, illetve ha nyílt seben, gyulladásos, fertőzésen, tetováláson, égési seben, stb. használja a készüléket.

Kezelés után

A kezelés után biztonságosan használhat testápoló tejet, krémet, dezodort, hidratáló testápolót vagy kozmetikumot. Ha a kezelés után a bőr irritációját vagy kipirulását tapasztalja, várja meg, amíg elmúlik, mielőtt más termékeket alkalmazna a bőrén. Ha egy termék alkalmazása után a bőr irritációját tapasztalja, mossa le vízzel.

Megjegyzés: akkor is tapasztalhat bőrreakciókat, ha minden utasítást betart. Ebben az esetben hagyja abba a készülék használatát, és forduljon országa vevőszolgálatához.

Töltés

Első használat előtt, illetve ha az akkumulátorok lemerültek, töltsse fel teljesen az akkumulátorokat. Az akkumulátorok teljes feltöltése kb. 1 óra 40 percet vesz igénybe. Töltsse fel a készüléket, ha a töltésjelző fény a használat alatt narancssárga fénnel világít, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, és hamarosan lemerül. A teljesen feltöltött akkumulátor legalább 130 villantásra elég 5-ös fényintenzitás mellett. 3–4 havonta teljesen töltsse fel az akkumulátort, még akkor is, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

A készülék töltése:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Illesse a kis csatlakozódugót a készülékbe, majd a hálózati adaptert a fali aljzatba.
 - A töltésjelző fény fehéren villog, ha a töltés folyamatban van.
 - Az akkumulátorok teljes feltöltöttségét folyamatosan világító fehér fény jelzi.

Megjegyzés: Az adapter és a készülék töltés közben felmelegszik. Ez normális jelenség.

Megjegyzés: A készülék az akkumulátor túlmelegedése elleni védelemmel rendelkezik, és nem töltődik, ha a szobahőmérséklet 40 °C fölött van.


- Ne takarja le a készüléket és az adaptert töltés közben.

- 3 Ha a töltés kész, húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, majd húzza ki a kis méretű dugaszt a készülékből.

Megjegyzés: Az akkumulátor energiája nem elegendő a teljes testfelület kezeléséhez. Javasoljuk, hogy csatlakoztassa a készüléket a fali aljzatba nagyobb testfelületek kezelése során, mint például a láb- vagy karfelületek.

Tipp: Minden használat után töltsse fel a készüléket a hosszabb üzemidő érdekében.


Tisztítás és tárolás

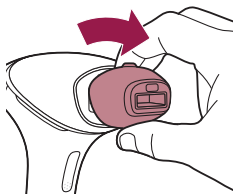

- 1 A használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból, és hagyja kihűlni.

Megjegyzés: A fénykibocsátó ablak és a tartozék használat közben erősen felforrósodhat.

- 2 Vegye le a tartozékot.

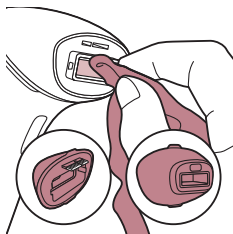

- 3 Néhány csepp vízzel nedvesítse meg a tartozékhoz mellékelt puha törölkendőt, és ezzel tisztítsa meg a következő alkatrészeket:

- a készüléken található fénykibocsátó ablak
- a tartozékok külső felszínét,
- illetve a tartozékon belüli reflektort.
- a bikinivonal-formázó és precíziós tartozékban található átlátszó szűrőüveg
- az arckezelő tartozék belsejében lévő pirosas szűrőüveget
- a bőrszínérzékelő ablak

- 4 Gondosan szárítsa meg levegőn az összes alkatrészt.

- 5 A készüléket tárolja pormentes helyen, -25° és $+70^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, valamint 15 és 90% közötti páratartalom-tartományban.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.

Újrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad háztartási hulladékként kezelni (2006/66/EK). Kérjük, hogy vigye el a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort.
- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok és egyszer használatos elemek külön történő hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

A Philips Lumea termékek újrahasznosított anyagokat tartalmaznak ezért nem vegyíthetők a kommunális hulladékkal. Tájékozódjon a Philips Lumea weboldalán az újrahasznosítási lehetőségekről. Ne dobja tűzbe.

Műszaki jellemzők

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Névleges feszültség	100–240 V
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény	65 W
Áramütés elleni védelem	II. osztály
Védelmi osztály:	IP 30 (EN 60529)
Működtetési feltételek	Hőmérséklet: 5 °C – 35 °C
	Relatív páratartalom: 15–90% (nem lecsapódó)
Tárolási környezeti hőmérséklet	-25° és +70°C között
Tárolási környezeti páratartalom	Kevesebb, mint 90% (nem lecsapódó)
A fénykibocsátás maximális eltérése a kezelt terület fölött	<20%
Működési nyomás	700–1060 hPa
Az impulzus időtartama	Egy impulzus
Kibocsátott hullámhossz	565–1400 nm
Lítiumion akkumulátor	2 x 3,6 V, 1000 mAh
Optikai expozíció	2,4–6,5 J/cm ²
Maximális optikai energia	4,8–23 J
Optikai homogenitás	Max. +/- 20% eltérés az átlagos optikai expozíciótól a kezelt területen
Ismétlési idő	1–3,5 mp

Impulzus időtartama	<2,5 ezredmásodperc
Villantási időköz	1–3,5 mp, attól függően, hogy a készülék akkumulátorról vagy hálózatról működik
Impulzussorozat	Egy impulzus
Optikai tartomány	560–1200 nm

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék vagy az adapter használat közben felmelegszik.	Normális, hogy a készülék és a testszörtelenítő tartozék felmelegszik (de nem túlságosan) a használat alatt.	Használja a készüléket kissé hűvösebb környezetben, vagy hagyja lehűlni, mielőtt tovább használja.
	Nem működik a ventilátor.	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a toldatot. Szükség esetén tisztítsa meg a toldat érintkezőit. Ha a toldat megfelelően csatlakozik, és a készülékkel lehet villantani, forduljon a vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a Philips szakszervizhez.
	A ventilátor hűtő légáramát a kezével vagy a törölközővel elzárja.	Ne akadályozza a ventilátor hűtő légáramát.
Ha a bőrre helyezem a készüléket, nem bocsát ki villantást. A „Villanófény kész” jelzőfény narancssárga fénnel villog.	Túl sötét a bőrszíne a kezelendő területen.	A Lumea készülékkel bőrre más, világosabb területeit kezelheti.
A „Villanófény kész” jelzőlámpa narancssárga fénnel villog, és villog mind az 5 intenzitásjelző lámpa is.	A készüléket újra kell indítani.	Az újraindításhoz húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból, és várjon 30 percig, amíg a készülék lehűl. A készüléknek ismét normálisan kell működnie. Ha mégsem, forduljon az országa vevőszolgálatához.
A „Villanófény kész” jelzőfény nem világít fehér fénnel.	A készülék nem ér megfelelően a bőrhöz.	Helyezze a készüléket merőlegesen a bőrfelületre, hogy a beépített biztonsági rendszer érintkezzen a bőrével.
A készülék használatakor furcsa szag keletkezik.	A fénykibocsátó ablak vagy a bőrszínérzékelő piszkos.	Gondosan tisztítsa meg a fénykibocsátó ablakot és a bőrszínérzékelőt.
	Nem távolította el megfelelően a szőrszálakat a kezelendő felületről. A szőrszálak megégnek, és ez okozza a szagot.	A Lumea készülék használata előtt végezze el a bőr előkészítést.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem villan, a ventilátor nem kapcsolódik be, és az 5 intenzitásjelző lámpa villog.	Nem megfelelően rögzítette a toldatot.	Győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzítette a toldatot. Szükség esetén tisztítsa meg a toldat elektromos csatlakozóit.
A bőr a szokottnál érzékenyebb a kezelés alatt. A készülék használata kellemetlen érzést okoz.	A fényintenzitás túl magasra van beállítva.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő fényintenzitást választotta-e ki. Ha szükséges, válasszon alacsonyabb fényintenzitást.
	Nem távolította el megfelelően a szőrszálakat a kezelendő felületről.	A Lumea készülék használata előtt végezze el a bőr előkészítését.
	A fénykibocsátó ablak UV-szűrője eltört.	Ha az UV-szűrő eltört, ne használja tovább a készüléket. Forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
	Olyan területen használta a készüléket, amelyen nem lett volna szabad.	Soha ne használja a készüléket a következő területeken: a belső szeméremajkakon, a végbélnyílásnál, a mellbimbón, a mellbimbóudvaron, az ajkakon, szemölcsökön, szeplőkön, tetoválásokon, piercingeken, az orrnyílásokon, a szem körül és a szemöldök közelében. Férfiak ne használják arcukon és nyakukon, azokon a részekon ahol szakálluk nő, és a nemi szerveken.
A toldatban nincs üvegszűrő.	Ez normális jelenség.	Nem kell semmit sem tennie: a test- és hónalj-szőrtelenítő toldatban nincs szűrő. Speciális szűrővel csak az arc, a precíziós és a bikinivonal kezeléséhez való toldatok rendelkeznek.
A kezelés utáni bőrreakció a szokásosnál tovább tart.	Az Ön számára túl magas fényintenzitási beállítást használt.	A következő alkalommal használjon alacsonyabb intenzitást. Lásd „A Philips Lumea használata” című fejezet „A fényintenzitás beállítása” bekezdését.
A fény túl erős a szememnek. Viseljek védőszemüveget?	Nem szükséges, a Philips Lumea nem károsítja a látását.	A készülék által kibocsátott szórt fény nem árt a szemnek. A készülék használata során ne nézzen a villanófénybe. A használat során nem szükséges védőszemüveget viselni. A készüléket jól megvilágított helyiségben használja, hogy a fény ne vakítsa el. Ügyeljen a jó bőrkontaktusra, hogy elkerülje a fény szóródását.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A szőrtelenítés eredménye nem kielégítő.	Az Ön számára túl alacsony fényintenzitási beállítást használt.	Következő alkalommal válasszon magasabb beállítást.
	Nem villantott egy olyan területen, amely melletti területen villantott.	A villantásokat egymáshoz közel alkalmazza, és a villantások között legyen egy kis átfedés.
	A készülék nem hatásos a testszőrzete színe miatt.	A kezelés nem hatásos, ha világosszőke, ősz, vörös vagy fehér a szőrszíne.
	Nem a javasolt gyakorisággal használja az eszközt.	Az összes szőrszál sikeres eltávolítása érdekében használja a készüléket a javasolt időrendnek megfelelően. Csökkentheti a kezelések közötti időt, de ne végezzen kezelést gyakrabban, mint kéthetente.
	Ön lassan reagál az IPL-kezelésre.	Folytassa a készülék használatát legalább 6 hónapig, mivel ezalatt az idő alatt a szőrszálak újránövekedése még csökkenhet.

