

Slovenský jazyk

Manuál

3in1 Skin

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho na ďalšie použitie.

Bezpečnostné opatrenia

- Tento výrobok je určený hlavne na starostlivosť o pleť.
- Ak sa v produkte pri jeho používaní objaví nezvyčajná reakcia na koži či abnormalita samotného produktu, ihneď ho prestaňte používať.
- Následné používanie povedie k ďalšiemu poškodeniu prístroja a môže dôjsť k poraneniu pleti.

 Pozor	Pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť ku zraneniu.
 Varovanie	Nesprávna manipulácia môže viesť k zraneniu používateľa.
 Upozornenie	Nesprávna manipulácia môže viesť k ohrozeniu používateľa alebo k poškodeniu produktu.



Pozor

 Riziko požiaru	Uistite sa, že na nabíjanie výrobku používate 5 V/1 A DC nabíjačku, ktorá zodpovedá súčasným bezpečnostným normám. Pri nabíjaní musí byť nabíjačka správne zapojená do zásuvky, aby nedošlo k poruche, vznieteniu alebo nebezpečenstvu z prehriatia produktu.
 Zákaz	V tomto výrobku je integrovaná dobíjacia batéria. Nepoužívajte výrobok v blízkosti ohňa, v prostredí s vysokou teplotou alebo v prostredí, kde hrozí prehriatie. Môže dôjsť k poruche či k vznieteniu výrobku.
 Zákaz	Batéria vo výrobku má obmedzenú životnosť. Pokiaľ ju budete používať po vypršaní životnosti, môže dôjsť k chemickej reakcii vedúcej k expanzii a deformácii batérie. K deformácii výrobku môže dôjsť aj pôsobením vysokej teploty alebo silným úderom. Ak je výrobok deformovaný, nepoužívajte ho, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pozor

	Nepoužívajte rozbitú nabíjačku ani príliš voľný kábel. Nabíjačka by nemusela byť správne zapojená do zásuvky. To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo vznieteniu.
Zákaz 	Nepoužívajte na nabíjanie výrobku nabíjačku, ktorá nespĺňa uvedené podmienky, vyhnete sa tak poškodeniu výrobku, riziku požiaru alebo poraneniu el. prúdom.
Zákaz 	Používajte tento výrobok len na účely uvedené v tomto manuáli, aby ste predišli poškodeniu výrobku, riziku požiaru alebo vznieteniu z prehriatia.
Zákaz 	Tento výrobok nie je vhodný pre deti a osoby so zníženými schopnosťami. Mladiství môžu produkt používať iba pod dohľadom dospelšej osoby.
Obmedzenie použitia 	Prosíme, uchovávať tento výrobok mimo dosahu detí.
Mimo dosahu detí 	<u>Pokiaľ dôjde k prehriatiu výrobku, okamžite ho prestaňte používať alebo ho v prípade nabíjania odpojte od nabíjačky.</u>
Zákaz používania pri prehriatí 	Nasledujúce osoby nesmú výrobok používať: Osoby s nádorovým ochorením, osoby s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami,
Zákaz použitia 	napr. kardiostimulátor, (tehotné – funkcia „import“), súčasne menštruujúce ženy, osoby so zníženou schopnosťou vnímania, osoby s ochorením srdca a osoby trpiace vyčerpaním.


Zákaz použitia

Je prísne zakázané používať ultrasonickú hlavicu v oblasti očí, hrtana, uší atď. Pri používaní dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Upozornenie

 Potrebné dodržať	Pred použitím výrobku sa uistite, že nie je poškodený, indikátor zapnutia svieti a výrobok má normálnu teplotu.
 Potrebné dodržať	Uistite sa, že pri použití výrobku postupujete podľa inštrukcií v tomto manuáli.
 Zákaz	Nerozoberajte ani neupravujte výrobok sami, aby nedošlo k poruche.
 Zákaz	Vyhnite sa spusteniu výrobku na zem, aby nedošlo k jeho poruche.
 Upozornenie	Tento výrobok je vhodné po každom použití očistiť, aby nedošlo k hromadeniu mastnoty a iných nečistôt.

Popis výrobku

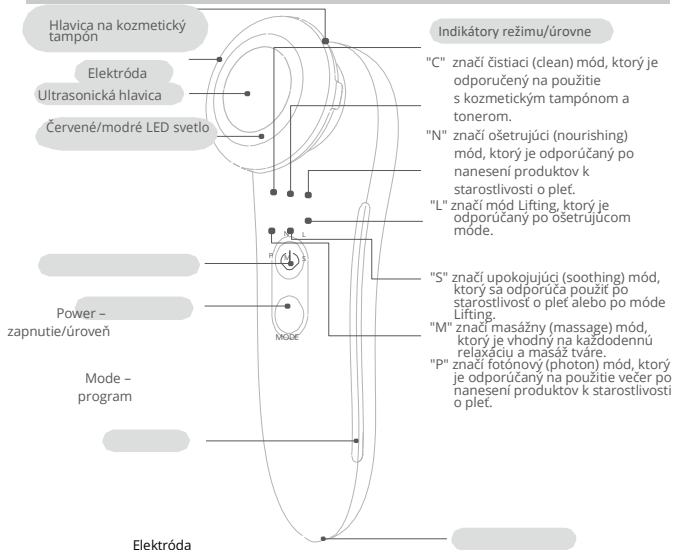

Nabíjací port

Obsah balenia



Produkt × 1



Manuál × 1



Nabíjačka a kábel × 1



Nadstavec na
kozmetický tampón ×
1

Nabíjanie

1. Pred prvým použitím výrobok nabíte. Uistite sa, že nabíjačka spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Pokiaľ výrobok nabíjate v cudzine, najprv sa uistite, či sú tunajšie zásuvky a napätie vhodné pre tento výrobok.
2. Pred nabíjaním výrobok vypnite. Pripojte ho do nabíjačky pomocou USB kábla, ktorý bol dodaný s výrobkom. Zapojte nabíjačku do zásuvky.
3. Na výrobku sa rozsvieti svetelný indikátor značiaci nabíjanie. Keď sa rozsvietia všetky svetelné indikátory, výrobok je plne nabitý. Odpojte výrobok od USB kábla a odpojte nabíjačku zo zásuvky. Mierne zahriatie výrobku a nabíjačky je úplne bežné.
4. Pri použití vhodnej nabíjačky trvá kompletne nabitie výrobku asi 2 hodiny. To sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácie.

Varovanie	Nepripájajte kábel k výrobku mokrými rukami. (Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku skratu)
	Nepoužívajte výrobok priamo v dosahu vody, napr. vo vani alebo vo vlhkom prostredí, aby nedošlo k poruche alebo skratu.
	Je nutné používať nabíjačku, ktorá spĺňa požiadavky na bezpečné nabíjanie.
	V priebehu nabíjania by ste sa nemali zdržiavať v prílišnej blízkosti výrobku; ak odídete na dlhšiu dobu z dohľadu produktu, ukončíte nabíjanie.
	Ak dôjde pri nabíjaní k nezvyčajnej situácii, ihneď prestaňte výrobok nabíjať. Ak je kábel poškodený alebo príliš voľný, ihneď prestaňte v nabíjaní.
	Nabíjací kábel používajte a skladujte podľa inštrukcií. Neskladajte ho, nenaťahujte, neprekrúčajte, nestláčajte ani ho neomotávajú okolo nabíjačky.

Použitie produktu

1. Prepínanie medzi programami: Tento výrobok má 6 programov, Clean (čistiaci), Nourishing (starajúci), Lifting (spevňujúci), Photon (fotónový), Massage (masážny), Soothing (upokojujúci). Dlhým stlačením tlačidla „zapnúť/vypnúť“ produkt spustíte.
2. Program Clean: Indikátor "C" bude svietiť, krátkym stlačením tlačidla "power" môžete meniť úroveň (3 úrovne). V tej chvíli budú sonické vibrácie, funkcia horúci obklad a iónový export synchronne. Pri využití tohto programu použite nastavac na upevnenie kozmetického tampónu a pleťové tonikum.
3. Program Nourishing: Indikátor "N" bude svietiť, krátkym stlačením tlačidla „zapnúť/vypnúť“ môžete meniť úroveň (3 úrovne). V tej chvíli budú sonické vibrácie, funkcia horúci obklad, ultrasonická funkcia a elektroporácia synchronne. Program „import“ je vhodný na použitie po aplikácii produktov na starostlivosť o pleť.
4. Program Lifting: Indikátor "L" bude svietiť, krátkym stlačením tlačidla „zapnúť/vypnúť“ môžete meniť úroveň (3 úrovne). V tej chvíli budú sonické vibrácie, funkcia horúceho obkladu, ultrasonický lifting a mikro masáž synchronne. Tento mód je vhodný na večernú starostlivosť o pleť.
5. Program Photon: Indikátor "P" bude svietiť, krátkym stlačením tlačidla „zapnúť/vypnúť“ môžete meniť úroveň (3 úrovne). V tej chvíli budú sonické vibrácie a striedanie červeného a modrého LED svetla synchronne.
6. Program Massage: Indikátor "M" bude svietiť, krátkym stlačením tlačidla „zapnúť/vypnúť“ môžete meniť úroveň (3 úrovne). V tej chvíli budú vibrácie, funkcia horúci obklad a červené LED svetlo synchronne.
7. Program Soothing: Indikátor "S" bude svietiť, krátkym stlačením tlačidla „zapnúť/vypnúť“ môžete meniť úroveň (3 úrovne). V tej chvíli budú sonické vibrácie, funkcia horúci obklad a modré LED svetlo synchronne.
8. Štart a pauza: Tento prístroj je vybavený funkciou inteligentného ovládania. Pokiaľ používateľ drží elektródu v ruke a hlavica sa dotkne pokožky, výrobok sa aktivuje. Keď dôjde k strate kontaktu s pokožkou, zariadenie sa pozastaví.

Tipy na používanie

- Vyberte si program, ktorý vyhovuje typu vašej pleti a vašim zvykom v starostlivosti o ňu.

- Nepoužívajte výrobok príliš často. Časté používanie môže negatívne ovplyvniť zdravie vašej pleti.
- Odporúča sa využívať čistiaci program každé 2 – 3 dni. Ostatné programy sa odporúčajú využívať podľa vašej individuálnej večernej rutiny (a možno ich využiť každý deň). Zariadenie by sa malo používať počas 3 – 5 minút a nikdy nie viac ako 8 minút.
- Aby bola zaistená správna funkcia výrobku, pri používaní je nevyhnutné dotýkať sa elektródy.

Informácie o výrobku

Názov výrobku	
Batéria	3,7 V , 800 mAh
Doba nabíjania	Cca 2 hodiny
Spotreba energie	Cca max. 3 W
Požiadavky nabíjačky	Output 5 V/1A
Pohotovostná spotreba	Menej než 20 uA
Model	F65U
Programy	Clean, Nourishing, Lifting, Photon, Massage, Soothing
Základné ovládanie	Stlačenie tlačidla „power“ na zapnutie výrobku, krátke stlačenie na výber úrovne, krátke stlačenie tlačidla „mode“ na zmenu programu.
Ďalšie funkcie	Štart/pauza pri kontakte s pokožkou
Hmotnosť	Cca 145 g

Poznámka: Vezmite prosím na vedomie, že v záujme zákazníka môžu byť niektoré parametre optimalizované alebo pozmenené bez predchádzajúceho oznámenia.

Bežné otázky a poznámky k produktu

Q: Aký je efekt tohto produktu?

Čistiaci program tohto výrobku pracuje v závislosti od sonických vibrácií a funkcia horúci obklad pomáha otvárať póry. Kozmetický tampón s tonikom čistí póry adsorpciou iónov. Ošetrojúci program póry zrelaxuje a otvorí vďaka sonickými vibráciám a funkcii horúci obklad. Duálny efekt ultrasonických vibrácií a elektroporácie napomáha pleti absorbovať ošetrojuce produkty. Spevňujúci program spája sonickú masáž, funkciu horúci obklad, ultrasonický lifting a mikro lifting, čo podporí následnú premenu a absorpciu produktov v starostlivosti o pleť. Tiež napomôže pri povzbudení a vypnutí pleti. Fotónový program využíva najmä omladzujúci účinok fotónov. Masážny a upokojujúci program pomáha pri relaxácii a upokojení pleti.

Q: Ako správne používať tento výrobok?

A: Čistiaci program sa odporúča používať každé 2 – 3 dni. Ošetrojúci program možno používať každodenne po nanosení produktov na starostlivosť o pleť, a to na dobu 2 – 3 minút, nie príliš dlho. Ostatné programy môžu byť použité po ošetrojúcom programe (záleží od stavu vašej pleti), alebo každý druhý/tretí deň. Pri používaní zariadenia sa uistite, že sa rukou, ktorou ho držíte dotýkate elektródy umiestnenej na boku. Zariadenie sa potom aktivuje, keď sa kovová časť hlavice dotkne pokožky. Počas používania sa ľahko dotýkajte pleti, zariadením pomaly pohybujte po pleti, vyhnite sa prudkým pohybom či stlačeniu výrobku.

Q: Je tento výrobok vodoodolný?

A: Výrobok je určený na starostlivosť o pleť pri toaletnom stolíku, takže hlavica výrobku je vodoodolná, ale telo výrobku nie. Produkt nepoužívajte vo vode a neumývajte ho. Možno ho utrieť papierovým obrúskom alebo bavlnenou handričkou.