

Ultrahangos kavitációs rendszer 3in1

Használati útmutató



Tartalom:

A használatának fő jellemzői.....	3
Figyelem.....	3
Ellenjavallat	4
A testrészek, amelyek nem kezelhetők	4
A testrészek, amelyek kezelhetők a javasolt kezelési idővel	4
Eszköz - teljesítmény és műszaki technológiák	5
Jellemzők és műszaki adatok	6
Technikai paraméterek.....	6
Eszköz és készülék alkatrész leírása	6
Ultrahang kavitációs funkció - alkalmazási folyamat	7
Infravörös fényfunkció - alkalmazási folyamat	9
Elektrostimulátor - alkalmazási folyamat	10
Veszélyek.....	10
Figyelem.....	10
Megjegyzés.....	11
GYIK. [kavitáció]	14
Tanúsítvány.....	15
Importőr.....	15

Tisztelt Ügyfelünk,

nagyon köszönjük a termék megvásárlását. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatóban található valamennyi információt. Ügyeljen a biztonsági figyelmeztetésekre. Használja az eszközt az utasításoknak megfelelően. Mindezek a lépések a készülék összes funkciójának maximális kihasználását eredményezik.

A használati utasítást meg kell őrizni a későbbi felhasználásra.

A használatának fő jellemzői

A készülék olyan technológiákkal rendelkezik, amelyek tudományos ismeretekkel vannak alátámasztva, mivel pozitív hatással van a többlet zsírrétegek csökkentésére és az általános keményedési képességre. Az alkalmazott technológia nem invazív. A készülék kizárólag esztétikai célokat szolgál. Mindenesetre az eszközt nem használják orvosi kezelésre.

Figyelem

- Az első használat előtt alaposan olvassa el a használati utasítást
- Az összes kábelt és tartozékot pontosan a kézikönyvben leírt módon kell csatlakoztatni
- Ne használja olyan helyeken, ahol olaj, füst, por, piszokkal vagy vízzel érintkezhet
- Tartsa be szigorúan a kezelés hosszát és módját
- Ne keverje a készüléket más gyártó készülékével
- Ha használat közben nem jól érzi magát, kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg használatát, forduljon orvosához
- Használat után mindig húzza ki a tápkábelt
- Ha az eszköz nincs használatban, ne hagyja bedugva
- Ne hajlítsa meg a tápkábelt; Ne helyezzen éles, nehéz vagy nedves tárgyakat rá
- A csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer megfelel-e a kívánt feszültségnek
- Működés közben elkerülendő ezek a tárgyak, például gyertyákat, cigarettákat, szeszesitalokat
- Ha az eszközön bármilyen technikai problémát tapasztal, forduljon a forgalmazóhoz
- A készülék használata nem alkalmas:
 - epilepsziában szenvedők számára
 - magas lázzal rendelkező személyeknek
 - terhes nőknek
 - az emberek, akik az alkalmazás helyén bőrbetegséggel küzdenek
 - fáradásos szindrómában szenvedők számára
 - az állandó felügyeletet igénylő személyeknél az egységet csak orvosával történő előzetes egyeztetés után szabad használni
 - Ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani - megsérülhet, és érvénytelenítheti a garanciát
 - Ha ilyen helyzetek valamelyikét tapasztalja, az egységet soha ne használja:
 - a tápkábel sérült
 - vízbe kerül
 - a nehéz tárgy rá esett vagy nagy magasságból a talajra esett
 - A készüléket semmiképpen sem szabad használni a terhes nőknek vagy a szívritmusszabályzó készüléket használó személyeknek



- Kerülje a gép használatát, ha beteg
- A készüléket kizárólag egy fajta elektromos kábel biztosítja (Egy másik típusú kábelt tilos használni)
- Ne használja az eszközt más elektromos berendezések közvetlen közelében
- Győződjön meg arról, hogy a készülék és az összes alkatrész mindig száraz
- A lapos felhordó fejet minden használat után tisztítsa puha nedves szivaccsal és alkoholos oldatban, és a másikat pedig száraz szivaccsal
- Soha ne húzza ki a tápkábelt az aljzatból úgy, hogy a kábelt húzza ki, mindig a dugót húzza meg

Ellenjavallat

Az eszközt semmilyen esetben sem használhatják olyan személyek, akik szenvednek az alábbi betegségek közül bármiben:

- rák, epilepszia, cukorbetegség
- súlyos vese- vagy májbetegség
- Magas koleszterin
- Bőrbetegségek
- Szívbetegség, pacemaker, magas vérnyomás
- Fém implantátumok a testben
- Érbetegségek vagy artroszklerózis
- Terhesség
- Menstruáció
- A vérhígítót szedő személyek
- Transzplantációs operációs beavatkozáson átesett betegek



A testrészek amelyek nem kezelhetők

- fej (az áll alatti terület kivételével)
- a szív körüli terület
- hónalj
- tenyér
- láb
- könyökterület
- gerinc



Testrészek melyek kezelhetők + ajánlott kezelési idő

Testrészek	Ajánlott kezelési idő
• toka	5 perc
• dekoltázs	10 perc !! Kerülje el a területeket, ahol a szíve van!
• csípő	20 perc
• comb	20 perc
• Kar	20 perc
• Has	20 perc
• vádli	20 perc

Legfeljebb két testrészt kezelhet együtt. További kezelés végezhető 7-10 napig. Megjegyzés: az álla területét csak akkor lehet kezelni, ha a felhasználó nem rendelkezik semmilyen fém implantátummal, protézissel vagy idegen tárggyal.

Eszköz - teljesítmény és műszaki technológiák

Az ultrahang kavitációs rendszer 3in1 egy hiteles forradalmian új készülék, mely otthona kényelmében, szépségstúdióvá alakul! A három funkció kombinációjával hatékony eszközzé válik a túlzott zsír, a cellulitisz és a bőr megereszkedés elleni küzdelemben. A szalonokban végzett kezeléseknél tízezreket fizetnek. Most a szakemberek által használt technológia a költségek töredékéért!

Ultrahang kavitáció

Készülék az otthoni kavitációhoz, amely nagy a applikátorfejen ultrahanghullámokon keresztül jön létre, amelyek áthatolnak a bőrön. A szövetek ezután felszívják ezt az ultrahangos energiát. Megszüntetik a zsírs sejtek és a zsír integritását. A felszabadított zsírt glicerinnek és szabad zsírsavaknak formálja át. A glicerin energiaforrásként szolgál, míg a zsírsavak átjutnak a májba, ahol normális zsírsavakként kezelik, mint az élelmiszerből kapható és természetesen kiürülnek a szervezetből. Az eltávolított zsírszövet felszívódásra kerül. Az ultrahangos kavitáció fájdalommentes, nem invazív, gyengéd, hatékony és legmeghatározóbb módszer a zsírszövet eltávolítására, a cellulitisz csökkentésére és a bőr feszesítésre.

Infravörös fényterápia

A felhordófej-egységek területén 4 infravörös sugárzó van beépítve. Az infravörös sugarak 8-12 nm hullámhossz-tartományba kerülnek a testbe. Az infravörös sugárzás a többi hőforráshoz képest jobban behatol a bőr alatti szövetbe. Az infravörös hő erősen támogatja a keringést. A szervezet ezután képes gyorsan megszabadulni a káros anyagoktól és a hulladéktermékektől. Hozzájárul a test teljes regenerációjához és helyreállításához.

Elektrostimulátor (EMS)

Az otthoni kavitáció elektrosztimulátor funkcióval is rendelkezik. A szervezet izomösszehúzódnásainak mozgásának alapja, amelyek parancsokat kapnak az agyból átadott üzleti impulzusokon keresztül. Az izmok mozgása természetesen erősíti. Az izmok csak azokon a részeken működnek, ahol a gélelektroda feltapad. Könnyedén beállíthatja az impulzusok erejét, amelyeket a bőrelektrodákon keresztül továbbítanak az izmokba. Erősebb impulzusok az izmok aktív erősítésére. Finomabb, mint fizikai erőfeszítés után. Használhat az eszközön két elektródot egyidejűleg.


Jellemzők és műszaki adatok


- ajánlott eszköz
- teljesen biztonságos kezelés
- könnyen használható, könnyen kezelhető
- kezelések otthoni kényelmében
- Az angol használati útmutató részletesen leírja az összes utasítást
- technológiák: ultrahang kavitáció, infravörös fényterápia, elektromos izomstimuláció

Technikai paraméterek

- Európai tanúsítvány: Igen
- Méretek: 18,7x8x6cm
- Súly: 240 gramm
- Teljesítmény: DC15V adapter 220V-tól
- Tartalom: készülék házi kavitációs 3v1 hálózati adapter, 2 gélelektroda, használati utasítás

Eszköz és készülék részek leírása

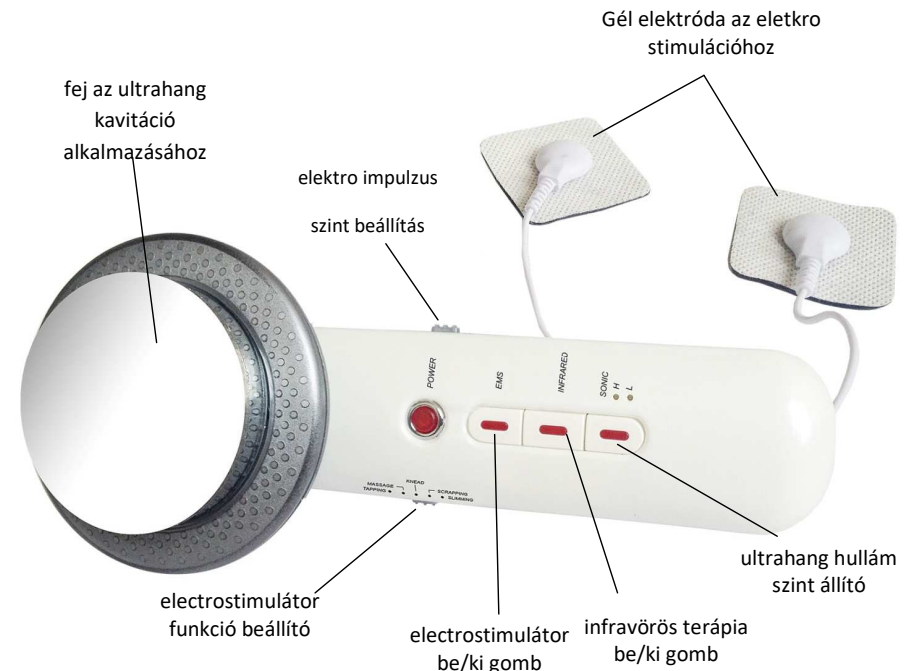

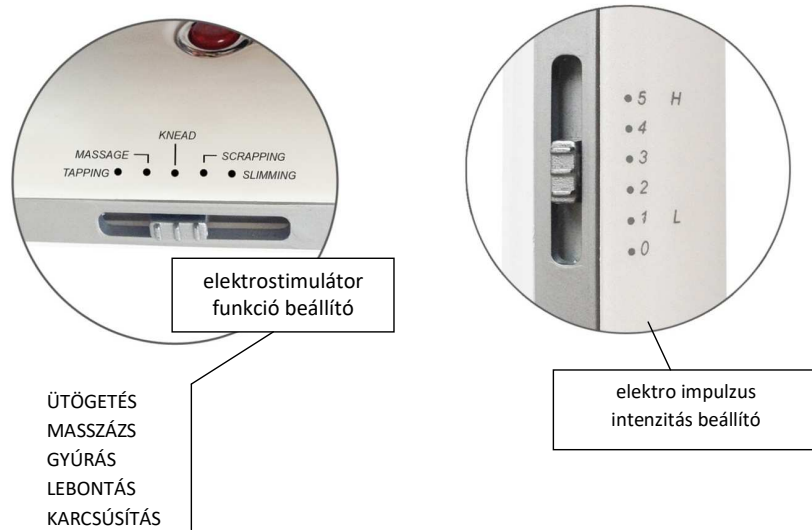

Ultrahang kavitációs funkció - alkalmazási folyamat

Az ultrahangos kavitáció funkció használata:

Tegye a vékony réteg gél a kezelt bőrterületre (a gél nincs mellékelve). Az alkalmazandó gél fel van tüntetve. A Sonogel megvásárolhatja bármilyen boltokban (a gyógyszertárban megvásárolható). A gél nagyon fontos az eszköz használatához. Megteremti a szükséges kötési réteget az alkalmazási fej és a bőr között. Víz alapú. Nem károsíthatja az alkalmazás fejét. A gél használata szükséges. Az eszköz ultrahangos kavitációját nem lehetséges használni a gél jelenléte nélkül a bőrön.

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékbe (alul). Csatlakoztassa az adaptert 220V-ig.

Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a POWER gombot - a gomb pirosan világít és sípoló hangot hall.

Funkcionális ultrahanghullámok bekapcsolják a SONIC nyomását.


Az egyik nyomógomb a LOW (alacsony) üzemmódot kapcsolja be - a LED-diódát az "L"
Egy második nyomógomb bekapcsolja a HIGH (magas szintű) üzemmódot - a "H" jelű LED dióda világít

A felhordó fej körkörös mozdulatokon mozog a kiválasztott testrészen (lásd a következő ábrákat).
SOHA Az alkalmazási fej nem maradhat egy helyen. Az ultrahangos kavitáció funkció automatikusan beállítja a 10 perc időzítőt. Ezután az egység automatikusan kikapcsol (megerősítő hangjelzés)

Megjegyzés: Az ultrahanghullámok hatása nem érezhető a bőrön. A jó hallással rendelkező felhasználók érzékelik a folyamatosan hallható hangot. Bizonyos, hogy ez az akció az ultrahangos hullám funkció, sprayt alkalmazva a fejen néhány apró csepp vízzel megtekinthető. Ezután láthatja az oszcillációkat. A vizsgálat után azonnal törölje le a fejet.

Illusztráció az alkalmazás fejének az egyes testrészeken történő mozgásáról:



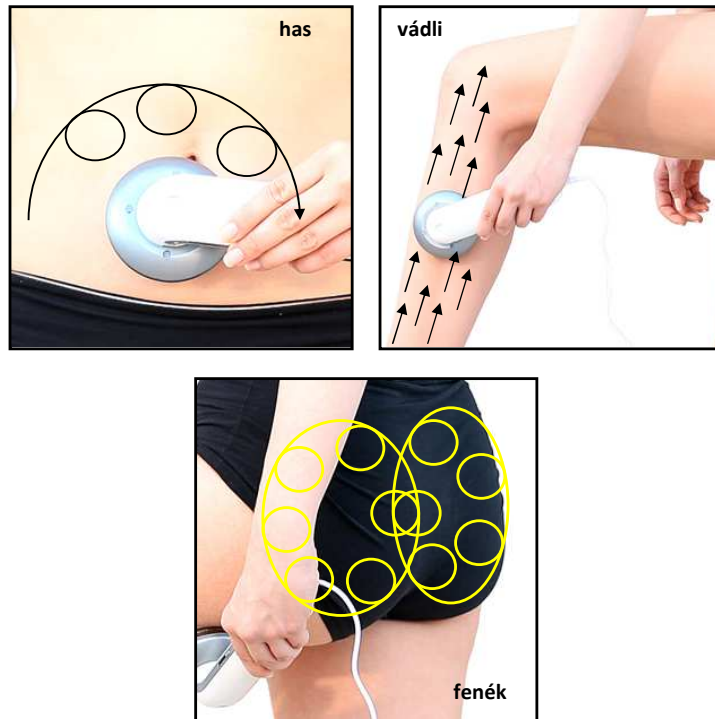

Infravörös fényfunkció - alkalmazási folyamat

Az ultrahangos kavitáció során a hatékonyabb testformáznál az infravörös fény is aktiválható. A felhordó fej-egységek kerületén 4 infravörös sugárzó van beépítve. Az infravörös sugarak 8-12 nm hullámhossz-tartományba kerülnek a testbe. Az infravörös sugárzás a többi hőforráshoz képest jobban behatol a bőr alatti szövetbe. Az infravörös hő erősen támogatja a keringést. A szervezet ezután képes gyorsan megszabadulni a káros anyagoktól és a hulladéktermékektől. Hozzájárul a test teljes regenerációjához és helyreállításához.

Az infravörös funkciók használata:

1. Miután csatlakoztatta a készüléket a hálózati kábelhez, nyomja meg az INFRARED gombot.
2. A funkciót aktiváló gomb infravörös világít és 4 LED világít az applikátor fej kerületén.
3. A bőrön keresztüli mozgás közben meleg lesz.
4. Az infravörös fény funkciói 10 perc elteltével automatikusan kikapcsolnak, vagy kikapcsolhatók az INFRARED gomb megnyomásával (a LEDEK és a gomb ki van kapcsolva).

Elektrostimulátor - alkalmazási folyamat

Kérjük, hogy szánjon időt az utasítások követésére, hogy megfelelően és biztonságosan használja az eszközt.

Veszélyek

Az elektrosztimulátor használata tilos, kivéve, ha ezeket az eszközöket egyszerre használja:

1. Orvosi elektronikus eszközök (pl. Pacemaker).
2. Olyan orvosi elektronikus eszközök, amelyek támogatják a létfontosságú funkciókat (pl. mesterséges szív, tüdő, máj stb.).
3. Egyéb orvosi eszközök (pl. Elektrokardiográf).



Figyelem

Ha az alábbi tünetektől szenved, forduljon orvosához vagy orvosi segítségéhez:

1. akut problémák
2. szívproblémák
3. magas láz
4. terhesség
5. rosszindulatú daganatok
6. tartósan alacsony vagy magas vérnyomás
7. fertőzött seb vagy hasonló súlyos sérülés
8. allergiás bőrproblémák
9. az orvosi diagnosztikai terápia benyújtása
10. kellemetlen folyamatos izomfájdalom túlzott túlterhelésük miatt



Ha a fentiek bármelyike érinti, tilos az elektrostimulátort használni.

Tartsa be az alábbi irányelveket:


1. Tilos az elektródát a szív, a nyak és a fej területére helyezni a nemi szervek területére. Ne használjon elektródákat olyan területekre, amelyek bőrbetegségekben vagy sömörben szenvednek.
2. A készüléket nem szabad más orvosi eszközökkel kombinálni. Használat előtt ne használjon krémeket vagy permeteket. Ez károsíthatja a bőrt.
3. A készülék a jelen útmutató szigorú utasításainak megfelelően használja. Az eszközt nem szabad más célra használni, mint az izomfájdalom, a nyomás és az izomerősítés.
4. Elektródák, amelyek a csomag részét képezik. Kizárólag az elektrostimulátor eszközhöz való csatlakozásra tervezték.
5. Magát a készüléket ne javítsa, ne szerelje szét és ne távolítsa el az alkatrészeit. A garancia elveszti az érvényességét és esetleg károkat okoz az egészségre, ezért nem vállalunk felelősséget.
6. A kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül nem szabad használni a készüléket.

Megjegyzés

1. Ha rosszul érzi magát a gép használatakor, vagy váratlan orvosi szövődmények vannak, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon orvosához.
2. Ha az elektródát a test másik részére kívánja helyezni, először kapcsolja ki a készüléket.
3. Ezután biztonságosan mozgathatja az elektródát, és újraindíthatja az eszközt. A harmadik számára a készülék maximális hatékonyságának biztosítása érdekében kapcsolja ki az összes használható elektronikus eszközt (MP3 lejátszó, mobiltelefon hívás közben).
4. A készüléket nem szabad alvás közben használni, ha nem tudja teljes mértékben vezérelni az egységet. Ez súlyos sérülést okozhat.
5. Az elektróda egy helyen több mint 30 percig használható.
6. Győződjön meg arról, hogy használat közben az elektróda nem érintkezik a fém vezetőképes tárgyakkal (például nyakláncokkal, karkötőkkel, gyűrűkkel ...)



Ne tegye az elektróda betéteket a lenti kombinációkban feltüntetett módon a testre. Az elektromos impulzusok közvetlenül a szíven keresztül áramlanak, ami szigorúan tilos!

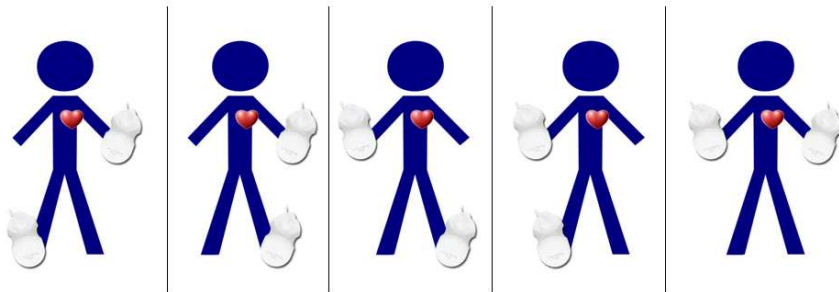

Az elektrostimulátor funkció használata

1. Először alaposan tisztítsa meg a bőrt, ahol a gélelektrodát fogja alkalmazni. Ez nagyon fontos a bőrön keresztül történő impulzusok megfelelő átviteléhez.

2. Minden elektródát csatlakoztasson a lapos csatlakozóhoz.



3. Az elektródákat ragassza ahhoz a testrészhez, amelyet kezelni kíván.



4. Kábelelektrodákat csatlakoztassa a készülékhez. Az aljzat az applikátorfej kavitációjának felülete alatt helyezkedik el.

5. A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az oldalsó gomb a 0 értéknél van.

6. Ha csatlakoztatja az eszközt az elektromos csatlakozóhoz, nyomja meg a POWER gombot. (A POWER gomb világít)



7. Nyomja meg az EMS gombot (az elektrostimulátor funkció be van kapcsolva).

8. Az elektromos impulzusok elkezdnek átvutni a bőrre, mihamarabb az 1-es ponton áll.

9. A készülék másik oldalán válassza ki a leginkább megfelelő elektromos impulzusok módját. Ezek a következők:

Ezek az üzemmódok hasznosak az izomlazításhoz:

ÜTÖGETÉS

MASSZÁZS

GYÚRÁS

Ezek a módok alkalmasak az aktív izmok erősítésére:

LEBONTÁS


KARCSÚSÍTÁS

10. Az elektrostimulátorral végzett kezelés során megváltoztathatja az EMS funkciót: (ÜTÖGETÉS, MASSZÁZS, GYÚRÁS, LEBONTÁS, KARCSÚSÍTÁS). Az EMS funkció teljesítményszintjét is megváltoztathatja (0 - ki, 1,2,3,4,5).

1. Az elektrostimulátor 10 perc után automatikusan kikapcsol, vagy az EMS gomb megnyomásával kikapcsolhatja (a LED gomb világít).

Megjegyzés: Ha elkezdte az eszköz használatát, azt javasoljuk, hogy az alkalmazás hossza 10 perc legyen, később 20 perc. Soha ne használjon elektromos stimulációt egyetlen helyen több mint 30 percig!

A képen látható, hogyan kell elektróda betéteket alkalmazni a testen:

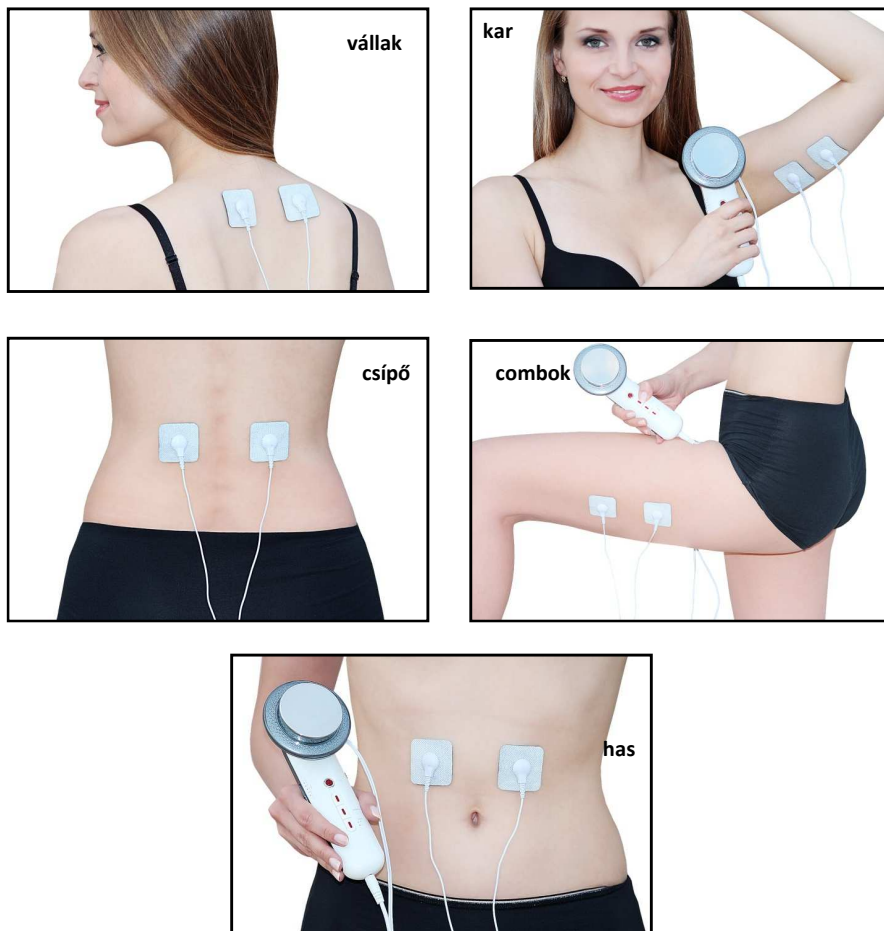

GYIK. [kavitáció]

Mi az ultrahangos kavitáció?

Készülék az otthoni kavitációhoz, amely nagy a applikátorfejen ultrahanghullámokon keresztül jön létre, amelyek áthatolnak a bőrön. A szövetek ezután felszívják ezt az ultrahangos energiát. Megszüntetik a zsírsejtek és a zsír integritását. A felszabadított zsírt glicerinnel és szabad zsírsavakkal formálja át. A glicerint energiaforrásként szolgál, míg a zsírsavak átjutnak a májba, ahol normális zsírsavakként kezelik, mint az ételből kapható és természetesen kiürülnek a szervezetből. Az eltávolított zsírszövet felszívódásra kerül. Az ultrahangos kavitáció fájdalommentes, nem invazív, gyengéd, hatékony és legmeghatározóbb módszer a zsírszövet eltávolítására, a cellulitisz csökkentésére és a bőrfeszítésre.

Hogyan kell a kezelést otthon megfelelően végezni?

A kezelés megkezdése előtt nagyon alaposan olvassa el az ebben a kézikönyvben említett összes részletet. Különös figyelmet fordítsanak bizonyos ellenjavallatokra. Ha nem biztos benne, használja a GP-t. Kérjük, sorolja fel a tételeket az ultrahangos kavitáció pontos kezelésére. A kezelés alatt fekvő vagy ülő helyzetben legyen. Hozzon létre megfelelő kényelmet.

Milyen kezelést kell végrehajtani a kezelés előtt és után?

Az ultrahangos kavitáció előtt legalább 4 órával ne fogyasszon nehéz vagy zsíros ételeket. Javasoljuk a könnyű ételeket (pl. Zöldség saláta, joghurt). A kezelést megelőző nap, a kezelés napja és néhány nappal a kezelés után növelje a folyadék bevitelét napi 2 és 2,5 liter tiszta víz között. Kerülje a szénsavas és édesített vizeket. Az ultrahangos kezelés után egy héttel el kell kerülni az alkoholt, koffeint, nikotint, nehéz és zsíros ételeket. Mindezek a tényezők megterhelik a májat, amelyet már megterheltek a laza zsírszűrővel a testből. Továbbá a terhelés hányingert okozhat. A kezelést követően fokozni kell a fizikai aktivitást. Növeli a vérkeringést és az anyagcserét, ami elősegíti a felszabaduló zsír ürülését a testből.

A kezelés fájdalmas eszköz?

Az ultrahangos hullámkezelés teljesen fájdalommentes.

Honnan tudhatom, hogy az ultrahangos eszközök tényleg működnek?

A kezelés alatt csak egy kis csikorgást hall, melyet az ultrahang ad. Érzékeny személyek fura bizsergést érezhetnek. Vizsgálatként alkalmazhat kis mennyiségű vízceppet az alkalmazás fején. Az ultrahanghullámok rezgetik a vízmolekulákat.

Milyen eredményeket lehet elérni?

Az eredményt sok tényező befolyásolja. A letapadt testzsírt kell feldolgozni. Milyen gyorsan, az függ a metabolizmustól, a zsírállapotot nyirokrendszer típusától vagy a kezeléstől. Optimális körülmények között több centiméteres veszteség állhat fenn ismételt kezelés után.

Az ultrahangos kavitáció biztonságos a test számára?

Ha a készüléket a megfelelő részegységekben használják, és a felhasználók nem felelnek meg az ellenjavallatoknak, az ultrahangos kavitáció teljesen biztonságos. A felszabadult zsírt a test fokozatosan feldolgozza.

Milyen elvek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a kívánt fogyókúra hatásnak?

Amint az előzőekben említettük, módosítani kell a diétát és megnövekedett folyadékbevitelt. Az ultrahangos kavitáció kezelésére biztonságosan 7-10 nap elteltével kerülhet sor. Nem javasoljuk, hogy egyidejűleg több mint két részt kezeljünk. Ha a kezelendő részek közel vannak egymáshoz a kavitáció hatása megszorozódik. Ellenkező esetben (távoli részek) az effektus felszakad.

Tanúsítvány



A terméket az Európai Unióban és CE jelzéssel engedélyezték.

Megfelelőségi nyilatkozat és az összes dokumentáció elérhető az importőről.

Importőr

SANTADRIA s.r.o., Mojmirovo nam. 75/2 Brno, 612 00
vállalat azonosító: 29195454 | VAT: CZ29195454

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal:
Email: rma@santadria.cz