

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ultrasound cosmetic device
with photon therapy

BR-1150(W)



CONTENT:

BEVEZETŐ	3
SPECIFIKÁCIÓK	3
DOBOZ TARTALMA	4
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS	4
HASZNÁLT TECHNOLOGIÁK	5
ULTRAHANGOS HULLÁMOK	5
FOTÓ TERÁPIA	5
IONIZÁCIÓ	6
MAGAS FREKVENCIÁJÚ MASSZÁZS	6
KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	7
GOMB LEÍRÁS	8
KIJELZŐ LEÍRÁS	8
KÉSZÜLÉK FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁS	9
ULTRAHANGOS HULLÁMOK	9
FOTO TERÁPIA	9
IONIZÁCIÓ	10
MAGAS FREKVENCIÁJÚ MASSZÁZS	10
FUNKCIÓ KOMBINÁCIÓ	10
AJÁNLOTT HASZNÁLAT ARC ÉS NYAK KEZELÉSRE	11
ALAP KEZELÉS 4 LÉPÉSBEN	12
PIGMENT PONTOK ELTÁVOLÍTÁSA	12
PATTANÁSOS BŐR KEZELÉSE	13
TÁSKÁS SZEM KEZELÉSE	13
ÉRZÉKENY BŐR KEZELÉSE	13
MIT VÁRHATSZ EL	13
AKKUMULÁTOR TÖLTÉS	14
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	14
TECHNIKAI PARAMÉTEREK	14
MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT ELEKTRONIKAI ESZKÖZTŐL	14
IMPORTŐR	14

Bevezető

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt első alkalommal használja, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A BeautyRelax BR-1150 számos technológiával gondoskodik a bőréről: ultrahanghullámok, fototerápia, ionizáció és nagyfrekvenciás masszázs. És mindez hatékonyan, fájdalommentes, nem invazív!

A BR-1150 ezeket a technológiákat kínálja:

1. Ultrahangos hullámok
2. Foton terápia
3. Ionizáció
4. Magas frekvenciájú masszázs

Specifikációk

- Ultrahangos hullámtechnika 3MHz frekvenciával.
- A fototerápia három világító móddal: piros, kék és zöld.
- Nagyfrekvenciás masszázs.
- Rozsdamentes acél felhordó készülék.
- A használat teljesen biztonságos és fájdalommentes.
- Gyengéd a bőrön.
- Alkalmas minden bőrtípusra.
- Könnyen kezelhető gombjaival a testen.
- Kompakt, kicsi és könnyű.

Doboz tartalma

- Ultrahang kozmetikai eszköz fototerápiával.
- USB kábel.
- 220V adapter.
- Védőszemüveg.
- Használati utasítás.

Biztonsági előírás

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, ellenőrizze az összes ábrát, és őrizze meg az utasításokat a későbbi felhasználáshoz.
- Ne használja a készüléket, ha bőrét súlyos bőrbetegségek sújtják. Ha nem biztos benne, először forduljon orvosához.
- A készüléket személyes használatra tervezték. Ne ossza meg családtagjaival vagy barátaival.
- Ha a készülék a földre esik, megsérült és nem működik megfelelően, vagy beleesik a vízbe, soha ne használja üzembe.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy magas páratartalmú helyeken.
- A készüléket nem szánják gyermekeknek, és azoknak, akik fizikai vagy szellemi állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.
- Ne tegye a készüléket forró hőforrásokra (radiátor, tűzhely, tűz stb.)
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- Ha a készülék a földre esik, megsérülhet. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot az eladóval.
- Miután befejezte az eszköz feltöltését, húzza ki az adaptert a 220 V-os elektromos aljzatból.
- Az eladó nem vállal felelősséget az esetleges visszaéléseket okozó károkért. Nem felel a következményekért, amelyeket a biztonsági figyelmeztetések be nem tartása okozott.
- A készüléket csak otthoni használatra szánják. A Forgalmazó nem felelős az egészség vagy anyagi károkért, bármilyen más felhasználás esetén.

HASZNÁLT TECHNOLOGIÁK

ULTRAHANGOS HULLÁMOK

A rozsdamentes acélból készült készülék meghatározott energiával és 3MHz frekvenciával bocsát ki energiát, amikor a kezelt területre alkalmazzák. Az értékeket úgy optimalizálják, hogy olyan termikus gradienst hozzanak létre, amely jelentősen befolyásolja a dermisréteg folyamatait. A szállított energia aktiválja a kollagénszálak és az elasztin átalakulását. Az energia maximális lehetséges megcélzása még kifejezettebb zsírréteggel rendelkező helyeken is, és az anyagcserének későbbi izgalma jelentős hatással van a túlterhelt és deformált kontúrok nagyon hatékony simítására..

Fő előnyei

- A kezelés teljesen noninvazív jellege.
- Biztonságos, fájdalommentes és kellemetlen érzések nélkül.
- Hatékony a sovány és egészségtelen bőrre.
- A bőr megfiatalodott és fényesebb.

Jegyzet:

Ultrahangos hullámok használatakor mindig használjon tiszta vezetőképes gél, amelyet az összes egészségügyi üzletben vásárolhat. Használat előtt finoman fedje le a készülék fejét. A gél javítja a vezetőképeséget és az általános hullámátvitelt a fejről a bőrre. A kezelés befejezése után óvatosan tisztítsa meg az alkalmazás fejét egy száraz ruhával (ne használjon semmilyen agresszív tisztítószer vagy oldatot).

FOTON TERÁPIA

A fényterápia az egyik legrégebbi módszer a különféle bőrhibák leküzdésére. A fotonterápia a természetes fényhullámokat használja, amelyeket a LED generál. Meghatározott hosszúságú hullámok kerülnek a bőrbe. A fény a testbe energiahatásként (fotonok formájában) hatol be, amelyet a bőr egyes alkotóelemei abszorválnak. A különböző hullámhosszúság speciális bőrápolási hatásokat eredményez. A fény bejuthat a sejt belsejébe, és nem invazív és fájdalommentes. A fény aktiválja a sejtekben a fotoreceptorokat. A fotonterápia nem okoz semmilyen mellékhatást vagy kárt a testben. A BR-1150 háromféle fényt kombinál (piros, kék, zöld).

VÖRÖS FÉNY (hullámhossz 625nm)

- Támogatja a természetes kollagéntermelést.
- A kozmetikai termékekben a hatóanyagok felszívódásának hatékonyságának javítása.
- Javítja a bőr alatti szövet vérkeringését.
- Megakadályozza a pigmentképződést.

KÉK FÉNY (hullámhossz 465nm)

- Aktiválja a porfirint (kémiai reakciót indít, amely elpusztítja a káros baktériumokat).
- Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatás.
- A pattanások kialakulásának megelőzése.
- Biztonságos és hatékony kezelés.

ZÖLD FÉNY (hullámhossz 525nm)

- Hozzájárul az epidermális pigmentfoltok eltávolításához.
- 40-60% -kal lelassítja a melanin termelését.
- Kiegyensúlyozza a bőr színárnyalatát.
- Gyulladáscsökkentő hatás.
- Alkalmas minden bőrtípusra.

IONIZÁCIÓ

Az ionizáció az az eljárás, amelyen keresztül az ionok közvetlenül behatolnak a bőr egyes rétegeibe. A bőr pórusai felszabadulnak. Az ionok hatására a sejtek jobban képesek felszívni a krémek, maszkok és szérum tápanyagait mélyebben a bőrbe. A kezelés száraz, zsíros és érzékeny bőrre alkalmas. Az ionkezelés vitathatatlan előnye a jobb természetes nedvességelnyelés.

NEGATÍV IONOK

Halvány, fáradt külső.

Stressz nyomai.

Arcduzzanat.

SEMLEGES IONOK

A bőr alapos tisztítása.

Sötét foltok a szem területén.

Ragacsos szennyeződés a bőrben.

MIÉRT NEGATÍV IONOK?

Szorozzuk meg a krémek, maszkok és szérumok tápanyagainak felszívódásának mélységét a bőrön. Összességében frissíti a bőrt, felszabadítja az izomszövetet és antimikrobiális hatást fejt ki.

MIÉRT ION KEZELÉS?


Segít helyreállítani a kollagén rostokat.

Segít az alapos tisztításban.

MAGAS FREKVENCIÁJÚ MASSZÁZS

Az alkalmazás fejének magas frekvenciájú masszázsfunkciója van. Finom oszcillációkat generál, másodpercenként 12.000 ütés frekvencián. Ennek fő hatása a vérkeringés javítása az arc nyirokrendszerének stimulálásával. Az eredmény simább, friss bőr. Jobb tónus (a bőr egyenletesebb színű). Ugyanakkor a kollagén és az elasztikus rostok mechanikus stimulálása is történik.

Készülék leírás

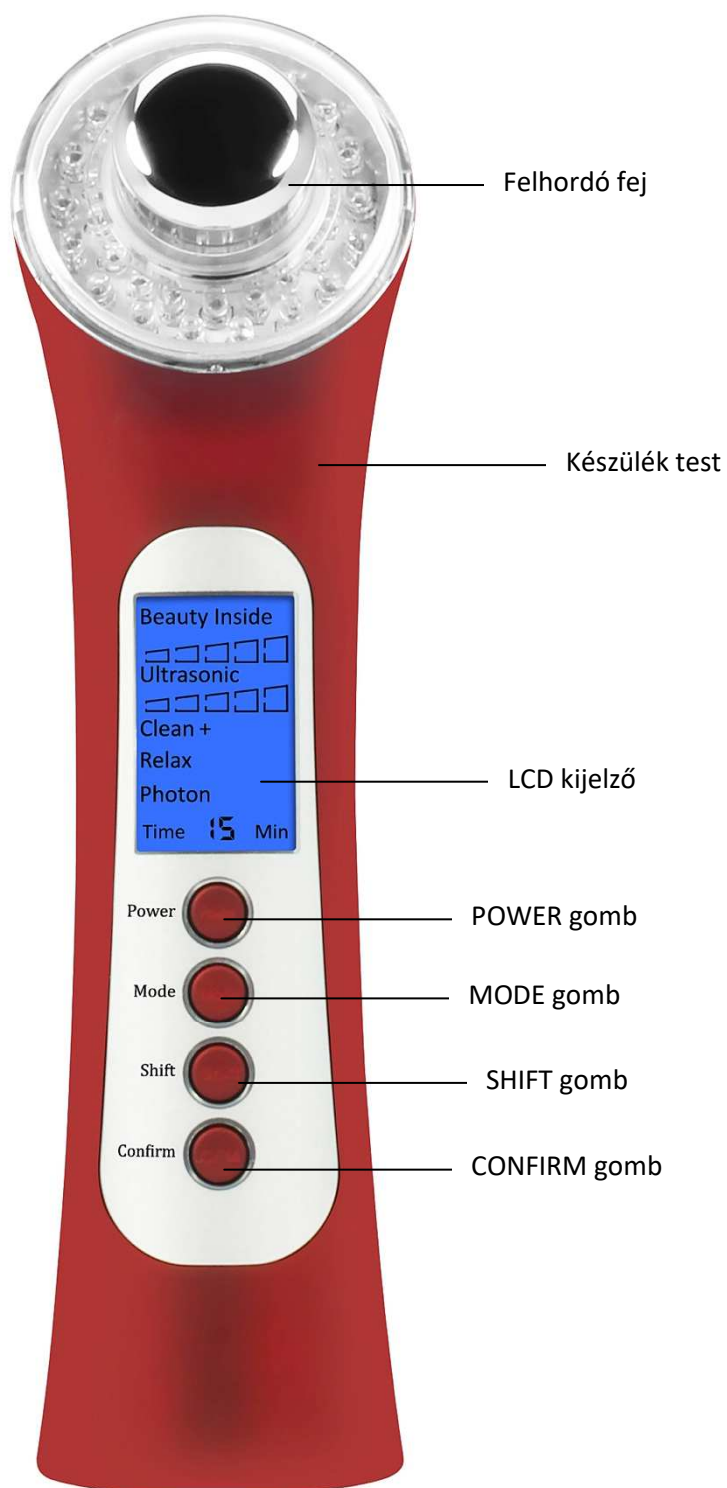

Gomb leírás

POWER

A POWER gomb ON / OFF gombként működik az eszköz be- és kikapcsolása érdekében. A készüléket bármikor kikapcsolhatja a POWER gombbal.

MODE

Az üzemmód gombbal válthat a funkciók között. A funkcióválasztás mindig megerősíti a funkcionév villogását (Ultrahangos, Tiszta +, Nutri -, Relax, Foton, Idő). Ha nincs beállítva funkció, a készülék 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.


SHIFT

A SHIFT gombbal állíthatja be a kiválasztott funkciók szintjét és intenzitását. A rezgés funkcióhoz választhat szakaszos vagy folyamatos üzemmódot.

CONFIRM

Miután befejezte az összes funkció beállítását, nyomja meg a CONFIRM gombot a művelet elindításához. A JÓVÁHAGYÁS gomb ugyanúgy működik, mint a START / SZÜNET gomb. Szüneteltetheti és folytathatja a CONFIRM gombot.

Kijelző Leírás

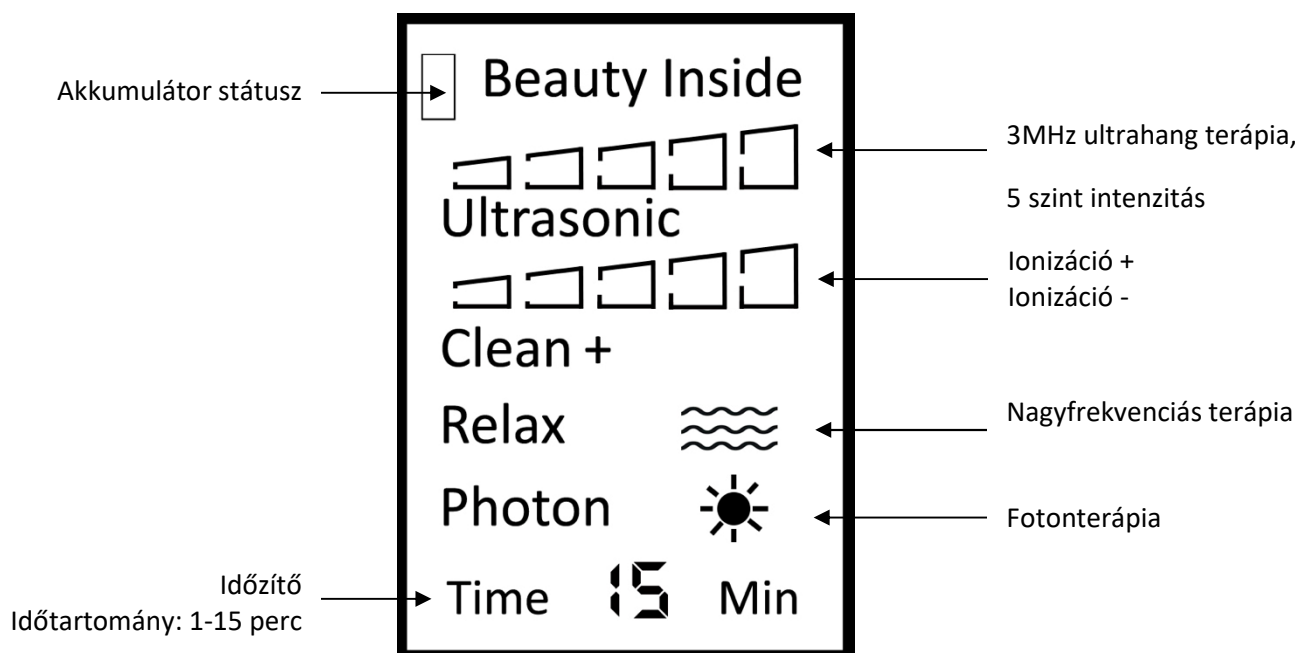

KÉSZÜLÉK FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁS

Most írjuk le, hogyan állítsuk be az egyes eszközök funkcióit. Mindig azon a kezdeti készenléti állapotban alapul, amely akkor fordul elő, amikor a készüléket bekapcsolják a POWER gomb megnyomásával.

ULTRAHANG HULLÁMOK

- 1) Nyomja meg egyszer a MODE gombot (az "Ultrahangos" villogni kezd).
- 2) Az SHIFT gomb segítségével állítsa be az ultrahang hullámok szintjét. 1 és 5 közötti tartomány érhető el.
- 3) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. A fej ultrahanghullámokat generál, és megkezdheti a bőrkezelést. A bekapcsolt ultrahangos funkciót a hullámszint jelzés villogása jelzi.
- 4) Nyomja meg hatszor a MODE gombot. A SHIFT gomb segítségével állítsa be a kezelés időtartamát 1 és 15 perc között.
- 5) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. Az ultrahang hullám funkció a beállított időtartamra bekapcsol.
- 6) Az ultrahanghullám funkció bekapcsolását lágy sípolás kíséri körülbelül 4 másodpercenként.
- 7) A CONFIRM gomb megnyomásával bármikor szüneteltetheti / indíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő eltelte után az egység automatikusan kikapcsol.

Jegyzet:

Ultrahangos hullámok használatakor mindig használjon tiszta vezetőképes gél, amelyet az összes egészségügyi üzletben vásárolhat. Használat előtt finoman fedje le a készülék fejét. A gél javítja a vezetőképeséget és az általános hullámátvitelt a fejről a bőrre. A kezelés befejezése után óvatosan tisztítsa meg az alkalmazás fejét egy száraz ruhával (ne használjon semmilyen agresszív tisztítószer vagy oldatot).

Infó:

Az ultrahanghullámok jelenlétét egyszerű módon ellenőrizheti. Ultrahangos hullám funkció használatakor vigyen fel két-három kis csepp vizet az alkalmazás fejére. Az így lerakódott vízmintát ultrahangos hullámok azonnal megolvasztják.

FOTON TERÁPIA

!!! Figyelem !!! Mielőtt elkezdené a fotonterápiát, használjon a csomagban található biztonsági szemüveget.

- 1) Nyomja meg ötször a MODE gombot (a "Photon" szöveg villogni kezd).
- 2) A SHIFT gomb segítségével állítsa be a fototerápia színét: piros, kék, zöld.
- 3) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. A fej fotonfényt generál, és megkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg egyszer a MODE gombot. A SHIFT gomb segítségével állítsa be a kezelés időtartamát 1 és 15 perc között.
- 5) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. A fototerápiás funkció a beállított ideig működik.
- 6) A fototerápiás funkció bekapcsolását enyhe sípolás kíséri, körülbelül 4 másodpercig.
- 7) A CONFIRM gomb megnyomásával bármikor szüneteltetheti / indíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő eltelte után az egység automatikusan kikapcsol.

IONIZÁCIÓ

POZITÍV ION

- 1) Nyomja meg kétszer a MODE gombot (a "Tiszta +" szöveg villogni kezd).
- 2) Az SHIFT gombbal állítsa be az ionizációs szintet. 1 és 5 közötti tartomány érhető el.
- 3) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. Az eszköz feje pozitív ionokat generál, és megkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg négyszer a MODE gombot. A SHIFT gomb segítségével állítsa be a kezelés időtartamát 1 és 15 perc között.
- 5) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. Az ionizációs funkció a megadott ideig fut.
- 6) A terápiás ionizációs funkció bekapcsolását egy lágy sípolás kíséri, körülbelül 4 másodpercig.
- 7) A CONFIRM gomb megnyomásával bármikor szüneteltetheti / indíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő eltelte után az egység automatikusan kikapcsol.

NEGATÍV ION

- 1) Nyomja meg háromszor a MODE gombot (a "Nutri -" felirat villog).
- 2) Az SHIFT gombbal állítsa be az ionizációs szintet. 1 és 5 közötti tartomány érhető el.
- 3) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. Az eszköz feje negatív ionokat generál és megkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg háromszor a MODE gombot. A SHIFT gomb segítségével állítsa be a kezelés időtartamát 1 és 15 perc között.
- 5) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. Az ionizációs funkció a megadott ideig fut.
- 6) A terápiás ionizációs funkció bekapcsolását egy lágy sípolás kíséri, körülbelül 4 másodpercig.
- 7) A CONFIRM gomb megnyomásával bármikor szüneteltetheti / indíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő eltelte után az egység automatikusan kikapcsol.

MAGAS FREKVENCIÁJÚ MASSZÁZS

A készülék két rezgésmasszázs üzemmódot kínál. Szakaszos és folyamatos.

- 1) Nyomja meg négyszer a MODE gombot (a "Relax" felirat villogni kezd).
- 2) A SHIFT gomb segítségével állítsa be az időszakos vagy folyamatos masszázst. Megszakítva (a hullámok szaggatottak) Folyamatos (a hullámok szilárdak).
- 3) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. A műszer feje rezegni kezd, és megkezdheti a bőrkezelést.
- 4) Nyomja meg hatszor a MODE gombot. A SHIFT gomb segítségével állítsa be a kezelés időtartamát 1 és 15 perc között.
- 5) Nyomja meg egyszer a CONFIRM gombot. A rezgés funkció a beállított időre bekapcsol.
- 6) A rezgés funkció bekapcsolását egy lágy sípolás kíséri körülbelül 4 másodpercenként.
- 7) A CONFIRM gomb megnyomásával bármikor szüneteltetheti / indíthatja ezt a funkciót.
- 8) A beállított idő eltelte után az egység automatikusan kikapcsol.

FUNKCIÓ KOMBINÁCIÓ

A fenti funkciókat szabadon kombinálhatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyszerre kezelheti a bőrt az egyik vagy az összes funkcióval. A következő szabályok vonatkoznak a funkciók beállítására:

- 1) Használja a MODE gombot az egyes funkciók megváltoztatásához.
- 2) A SHIFT gombbal állítsa be a funkciók szintjét vagy intenzitását.

A MODE és a SHIFT gombokkal állítsa be a kezelés alatt elindítandó összes funkciót. Ha a funkció mutatója nulla (a jelölőnégyzet nincs kitöltve), akkor a funkció nem áll készen a futtatásra. Amikor minden beállítva, beleértve az időt is, nyomja meg a CONFIRM gombot. Ez elindítja az előző lépésben aktivált funkciókat.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT ARC ÉS NYAK KEZELÉSÉRE

		
Arc	Orr	Száj
Belülről kívültre	Fentről lefele	Fentről lefele
		
Homlok	Szem körüli terület	Nyak
Középről oldalra	a szem sarkától a haj-ig	Az álltól a nyakig

Jegyzet:

A kezelés során ügyeljen arra, hogy a felhordó fej a lehető legközelebb legyen a bőrhez.

A legjobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy a bőrt kevesebb mint 30 percig kezeljék a készülékkel hetente háromszor.

1.lépés: mélytisztítás

1. Válassza ki az ionizációs funkciót [Tiszta +] és ultrahangos hullám [Ultrahang] és rezgésmasszázs [Relax]. Válassza ki a megfelelő intenzitást, amely kényelmet nyújt Önnek.
2. Vattacsomó segítségével távolítsa el a bőr maradvány nedvességtartalmát. Most megkezdheti a bőrápolást. Optimális idő 8-10 perc. Lassan vigye fel a felhordófejet a bőrre. A készülék után mossa le vízzel a bőrt a tisztítási folyamat befejezéséhez.

2.lépés: A tápanyagok jobb felszívódása a szérumokból és készítményekből

1. Válassza ki az ionizációs funkciót [Nutri -] és ultrahang [Ultrahang] és rezgésmasszázs [Relax]. Válassza ki a megfelelő intenzitást, amely kényelmet nyújt Önnek.
2. Ebben a lépésben a műszereket a következő kozmetikai termékekkel kombinálhatja: tonizáló krém, tápláló készítmények, illóolaj, aloe vera gél, ...) Optimális idő 8-10 perc. Lassan vigye fel a felhordófejet a bőrre.

3.lépés: Foton terápia

1. Válassza a [Foton] fotonterápia lehetőséget, és válassza ki az igényeinek megfelelő szint.

VÖRÖS FÉNY (hullámhossz 625nm)

Támogatja a természetes kollagéntermelést. A kozmetikai termékekben a hatóanyagok felszívódásának hatékonyságának javítása. Javult a vérkeringés a bőr alatti szövetben. Megakadályozza a pigment képződését.

KÉK FÉNY (hullámhossz 465nm)

Aktiválja a porfirint (kémiai reakciót indítanak, amely elpusztítja a káros baktériumokat). Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatás. A pattanások megelőzése. Biztonságos és hatékony kezelés.

ZÖLD FÉNY (hullámhossz 525nm)

Segít eltávolítani az epidermális pigmentfoltokat. 40-60% -kal lelassítja a melanin termelését. Kiegyensúlyozza a bőr színárnyalatát. Gyulladáscsökkentő hatás. Alkalmas minden bőrtípusra.

2. Az optimális idő 8-10 perc. Lassan vigye fel a felhordófejet a bőrre.

4.lépés: A vérkeringés relaxálása és támogatása

1. Válassza a [Relax] rezgésmasszázs funkciót. Válasszon szakaszos vagy folyamatos módot. Vigye fel a felhordó fejet a bőrre. Körülbelül 10 másodperc múlva mozgassa kissé tovább a fejét. Ez úgy történik, hogy az úgynevezett pontmozgatással az arcodon keresztül. Vigye a fejét a bőrre, ahol a rezgéskezelés kellemes.
2. Az optimális idő 8-10 perc. Ez a fajta kezelés ideális a bőrkezelés utolsó lépéseként. A bőr ellazítja, enyhíti a merev lágy izmokat és támogatja az arc nyirokrendszerét.

Pigment foltok eltávolítása (minden második napon)

1. lépés: Mély intenzív bőrtisztítás (ugyanúgy, mint az előző bekezdésben).
2. lépés: Javítsa a tápanyagok felszívódását (az előző bekezdéshez hasonlóan).
3. lépés: Fotonterápia (válassza a piros és a zöld fényt). Mindig viseljen védőszemüveget !!
Minden szín 10-15 percig tart.

Pattanáskezelés (minden nap)

1. lépés: Tisztítsa meg a bőrt. Használja az ultrahang hullám funkciót és válassza ki a megfelelő intenzitást. Ultrahanggal kezeljük a bőrt 5 percig. Mossa le a bőrt vízzel és szárítsa meg.
2. lépés: Használja az ultrahangos hullám funkciót fotonfényel (kék fény) kombinálva. Mindig viseljen védőszemüveget !! Ajánlott idő: 10-15 perc.
3. lépés: Használja az ultrahanghullám-funkciót rezgésekkel kombinálva, ha szükséges. Válasszon szakaszos vagy folyamatos módot. Ajánlott idő: 5 perc.

Jegyzet: Az ultrahangos hullámok és rezgések használata a bőr enyhe felmelegedését okozhatja. Ez teljesen normális, és nem kell aggódnia. A bőrápolás során lassan vigye fel a bőrfelületet. Ne nyomja meg túl sokat a készüléket.

Táskás szem kezelés(hetente)

1. lépés: Mély intenzív bőrtisztítás (ugyanúgy, mint az előző bekezdésben). Különösen a szem környékére összpontosítson. Alaposan mossa le a bőrt vízzel és szárítsa meg.
2. lépés: Válassza ki az ultrahangos hullám funkciót, és állítsa be a nagyon finom intenzitást (1. szint, maximum 2). Adja hozzá a fotonterápiás funkciót (piros vagy kék fény Ajánlott idő: 10 perc Mindig használjon védőszemüveget !!).
3. lépés: Válassza ki a rezgés funkciót. Állítsa az időszakos vagy folyamatos módot a legmegfelelőbbre. Vigye fel a fejét a szem környékére. Ajánlott idő: 5 perc.

Érzékeny bőrápolás(hetente)

1. Válassza ki az ultrahang hullám funkciót.
2. Válassza ki a fotonterápiás funkciót (zöld és kék fény). Ajánlott idő minden lámpánál: 10 perc.

!!! Figyelem !!! Mielőtt elkezdené a fotonterápiát, használjon a csomagban található biztonsági szemüveget.

VÁRHATÓ EREDMÉNY

A kezelés befejezése után a bőr kissé megpirulhat. A vörösséget a megnagyobbodott erek és a fokozott véráramlás okozza. Bizonyos esetekben enyhe duzzanat léphet fel, ami különösen folyadék előfordulását okozza bizonyos helyekben, mint más helyeken. Ezek a tünetek azonban azt jelentik, hogy elérte a kívánt célt. Mindezek első pillantásra a negatív tünetek lassan eltűnnek, röviddel a kezelés befejezése után.

A kezelés eredménye a bőr rugalmasságának és textúrájának látható javulása lesz. A bőr simább lesz, és enyhíti az átmenetet a bőr durvabb területein. Az arc bőr kezelt területén szignifikánsan finomabb ráncok lesznek. Az eredmények elsősorban az összes bőr- és bőrkezelési lépés elvégzésétől függenek.

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a megfigyelt felhasználók a finom vonalak 30% -kal és a ráncok 16% -kal csökkentek 4 hét alatt. Összességében a bőr minősége drámai módon javult mind vizuálisan, mind pedig érintéssel. Az eredmények a felhasználó egyedi tulajdonságaitól, korától és nemétől függően változtak.

Akkumulátor töltés

A készülék beépített belső újratölthető Li-ion 1150mAh akkumulátorral rendelkezik. A csomagban található kábellel tölts fel. Mindig ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e. Kétféle módon töltheti fel:

- 1) a számítógép USB portján keresztül
- 2) 220 V-os adapterrel (tartozék)

Karbantartás és tisztítás

A kezelés befejezése után mindig ellenőrizze, hogy a felhordó fej megtisztult-e. Ne használjon agresszív mosószert. Javasoljuk, hogy használjon speciális fertőtlenítő spray-eket, amelyeket általában használnak az egészségügyi vagy kozmetikai szalonokban az eszközök tisztításához. Ezt a terméket csak a rozsdamentes acél fej tisztításához használja. Ügyeljen arra, hogy a nedvesség ne kerüljön be az eszközbe.

Teknikai paraméterek

- Frekvencia: 3 MHz.
- Vörös fény hullámhossza: 625nm.
- Kék fény hullámhossza: 465 nm.
- Zöld fény hullámhossza: 525 nm.
- A fotonterápia összesen 16 nagy teljesítményű LED-et biztosít.
- Az akkumulátor állapotának jelző.
- A védőszemüveget (fototerápiában) a csomag tartalmazza.
- Méretek: 5x17x5 cm.
- Tömeg: 165 g.
- Akkumulátor: Beépített 1150mAh Li-ion.
- Tápegység: 220 V hálózati adapter (tartozék).

Disposal of used electrical and electronic equipment



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket szállítsa a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti az értékes természeti erőforrások megővését, és megelőzi a potenciális negatív környezeti és emberi egészségi hatásokat, amelyek a hulladékok nem megfelelő ártalmatlanításának következményei lehetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. A termék ártalmatlanításához kérje a megfelelő hulladékkezelési információkat a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől.



Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

Importőr

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
company ID: 29195454 | VAT number: CZ29195454
contact email: mh@santadria.cz

A nyomtatási hibákat, a szolgáltatásokat és a műszaki paraméterek változásait fenntartjuk.