

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

multifunctional body massager
model BR-1220

CELLUFORM



TARTALOM:

MEGFELELŐ HASZNÁLAT	3
FIGYELMEZTETÉS	3
ELLENJAVALLAT	4
TILTOTT HASZNÁLAT	4
TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA	5
FŐBB ELŐNYÖK	6
MIT VÁRHATSZ EL	6
TEKNIKAI PARAMÉTEREK	6
KÉSZÜLÉK ÚTMUTATÓ	7
KIJELZŐ ÚTMUTATÓ	8
HOGYAN HASZNÁLD A KÉSZÜLÉKED	9
MÓDOK ÚTMUTATÓJA	10
KEZELÉS MENETE	11
TESTRÉSZEK KEZELÉSE	12
KEZELÉS IDEJE	12
TÖLTÉS	12
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	13
GYIK	13
MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT ELEKTRONIKAI ESZKÖZTŐL	15
HITELESSÉG	15
IMPORTŐR	15
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	16

Kedves Vásárló, Köszönjük a bizalmát a termékünk megvásárlásáért. Kérjük figyelmesen olvassa el a készülék részletes leírását az első használat előtt, a megfelelő használat érdekében.

Tartsa be körültekintően a biztonsági előírásokat. Használja a készüléket a leírtak szerint. Ezek a lépések segítenek önnek, hogy kihasználhassa minden tulajdonságát eszközének. Ebben a bemutatóban, megpróbáljuk kihozni a lehető legtöbbet készülékéből.

Ha bármi kérdése adódik keressen minket elérhetőségünkön: rma@santadria.cz

Őrizze meg ezt a tájékoztatót.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készülék olyan technológiákkal rendelkezik, amelyek a tudományos eredmények szerint pozitív hatással vannak a felesleges zsírrétegek csökkentésére és a test formálására. Az összes alkalmazott technológia nem invazív és fájdalommentes. A készüléket kizárólag esztétikai célokra tervezték. Semmilyen módon nem használható bőrhibák kezelésére. Ez nem orvosi eszköz.

FIGYELMEZTETÉS

- Figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol füst, por, szennyeződés vagy ahol vízzel érintkezhet.
- Tilos a készüléket a fürdőszobában használni.
- Kövesse a kezelés folyamatát lépésről lépésre.
- Ne kombinálja a készüléket hasonló eszközzel.
- Ha használat közben nem érzi jól magát, kapcsolja ki a készüléket és forduljon orvosához.
- Ne hagyja a készüléket a tápkábelhez csatlakoztatva, ha hosszú ideig nem használja.
- Ne hajlítsa meg a tápkábelt. Ne tegyen éles, nehéz vagy nedves tárgyakat a készülékre.
- Használat közben kerülje a készülék érintkezését gyertyákkal, cigarettával és egyéb gyúlékony tárggyal.
- Ha az eszközön technikai problémák merülnek fel, forduljon a forgalmazóhoz.
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket, mert megsérülhet.
- Ha a fentiek bármelyike előfordul, soha ne használja az eszközt, ha:
 - a tápkábel megsérült.
 - víz került a készülékbe.
 - egy nehéz tárgy esett vagy nagy magasságból esett le a készülék.
- Ne használja a készüléket más elektromos berendezés közelében.
- Ügyeljen arra, hogy az eszköz és minden alkotóeleme mindig száraz legyen.
- Minden egyes használat után tisztítsa meg az adagolófejet enyhén nedves ruhával az alkoholos oldatban, és szárítsa meg teljesen egy másik ruhával.
- az eszköz használata nem megfelelő:
 - személyeknek magas lázzal
 - Terhes nőknek
 - emberek, akik bőrbetegségekben szenvednek az eszköz számára kijelölt helyeken
 - fáradtság-szindrómában szenvedő emberek
 - A folyamatos felügyeletre szoruló személyek orvosával való konzultációt követően használhatják a készüléket



TILTOTT HASZNÁLAT

A készüléket semmilyen körülmények között nem használhatják az alábbi feltételek bármelyikétől szenvedő emberek:

- Rák, epilepszia, cukorbetegség, vírusos betegség
- Magas láz
- Súlyos vese- vagy májbetegség
- Magas koleszterin
- Bőr betegségek
- Fáradtság szindróma
- Szívbetegség, szívritmus szabályzó használó, magas vérnyomás
- Fém implantátumok a testben
- Érrendszeri rendellenességek vagy artosclerosis
- Terhesség
- Menstruáció
- Vérkoagulációs gyógyszereket használók
- Transzplantációs műtéten átesett betegek
- A folyamatos felügyeletre szoruló személyek csak az orvossal való konzultációt követően használhatják a készüléket



TILTOTT HASZNÁLAT

- Fej
- Nyak (elöl és hátúl)
- Szív körüli területek
- Hóinalj
- Könyök
- Csukló
- Térd
- Boka
- Tenyér
- Lábfej
- Térd mögötti terület
- Gerinc



TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA

A BeautyRelax Celluform egy forradalmian új, tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely segít alakítani karakterét otthonának kényelmében, mint egy szépségszalokban! Több technológiát kombinálva kap egy nagy teljesítményű eszközt a felesleges zsír, a cellulit és a lebukó bőr leküzdésére. Több tízezret fizet a szalokban történő kezelésért. Most, az ár töredékéért, megkaphatja a szakemberek által használt technológiát!

1. Ultrahangos kavitáció

Az otthoni kavitációs készülék ultrahangos hullámokat generál a nagy applikátorfejen keresztül, amelyek behatolnak a bőr alatti szövetbe. A szövetek ezt követően elnyelik az ultrahang energiát. A zsírsejtek integritása romlik és a zsír felszabadul. A felszabadult zsír bomlik glicerinné és szabad zsírsavakká. A glicerint energiaforrásként szolgál, míg a zsírsavak a májba kerülnek, ahol normál étrendi zsírsavakként dolgozzák fel őket, és a testből természetes úton ürül. Az eltávolított zsír nem kerül vissza a szövetekbe. Az ultrahangos kavitáció fájdalommentes, nem invazív, szelíd, hatékony és mindenekelőtt állandó módszer a zsírszövetek eltávolítására, a cellulit csökkentésére és a bőr simítására.

2. Rádiófrekvencia

Az applikátor meghatározott energiával és frekvenciával bocsát ki energiát, amikor a kezelt területre alkalmazzák. A rádiófrekvencia-hullámokat úgy optimalizálták, hogy olyan termikus gradienst hozzanak létre, amely jelentősen befolyásolja a dermisréteg folyamatait. A szállított energia aktiválja a kollagénszálak és az elasztin átalakulását. Az energia maximális lehetséges megcélzása még kifejezettebb zsírréteggel rendelkező helyekben és az anyagcserének későbbi gerjesztése jelentős hatással van a megereszkedett és deformált kontúrok nagyon hatékony simítására.

3. Vörös fény 625nm

A fényterápia az egyik legrégebbi módszer a különféle bőrhibák leküzdésére. A fotonterápia természetes fényhullámokat használ, amelyeket LED-ek generálnak. Meghatározott hosszúságú hullámok kerülnek a bőrre. A fény a testbe energiahatásként (fotonok formájában) hatol be, amelyet a bőr egyes alkotóelemei abszorbeálnak. A különböző hullámhosszúság speciális bőrpolási hatásokat eredményez. A fény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt belsejébe. A fény aktiválja a sejtekben a fotoreceptorokat. A fotonterápia nem okoz semmilyen mellékhatást vagy kárt a testben.

Fő hatása a 625nm vörös fénynek

- Elősegíti a természetes kollagéntermelést
- a kozmetikai termékek aktív összetevőinek abszorpciók hatékonyságának növelése
- a bőr alatti szövet vérkeringésének javítása
- megakadályozza a pigmentképződést

4. Vibrációs masszáz

Ezenkívül a felhordó fej funkciója a vibráló mechanikus masszáz. Javítja a vérkeringést, a sejtek vitalitását és a nyirokrendszer támogatását. A rezgés mechanikusan rezeg a szilárd zsírszövetben. A zsírbontó folyamat sokkal hatékonyabb. A bőr lágyabb és simább tapintású.

FŐBB ELŐNYÖK

- 4 innovatív technológia, amelyek 4 különböző módon működnek
- jobban elérhető eredmények hasonló eszközökhöz képest
- a kezelés teljesen nem invazív jellege
- nem okoz kellemetlenséget
- fájdalommentes és teljesen biztonságos használat
- Időmegtakarítás: egy eljárás 15 percig tart
- mellékhatások nélkül

MIT VÁRHATSZ EL


- elérhető és látható eredmények akkor is, ha a zsír izomtömeg révén növekszik
- (Különösen férfiak vagy sportos nőknél)
- a női és a férfi test problémás részeiből származó zsír csökkentése
- kiemelkedő kontúr kialakítása a kezekre, a lábakra és a testre
- bőrfeszítő

TEKNIKAI PARAMÉTEREK


- ultrahang frekvencia: 300 000 rezgés / másodperc
- vörös fény hullámhossza 625 nm
- LCD kijelző
- időzítő
- akkumulátor állapot jelző (hang- és kijelzőjelzés)
- üzemi feszültség: 8,4 V
- működési áram: 0,14 - 1,4A
- töltési feszültség: 5 V
- Teljesítmény: 12W
- Tápellátás: USB-kábel (tartozék)
- méretek: 12x9x9cm
- súly: 290 g

KÉSZÜLÉK ÚTMUTATÓ


Oldal

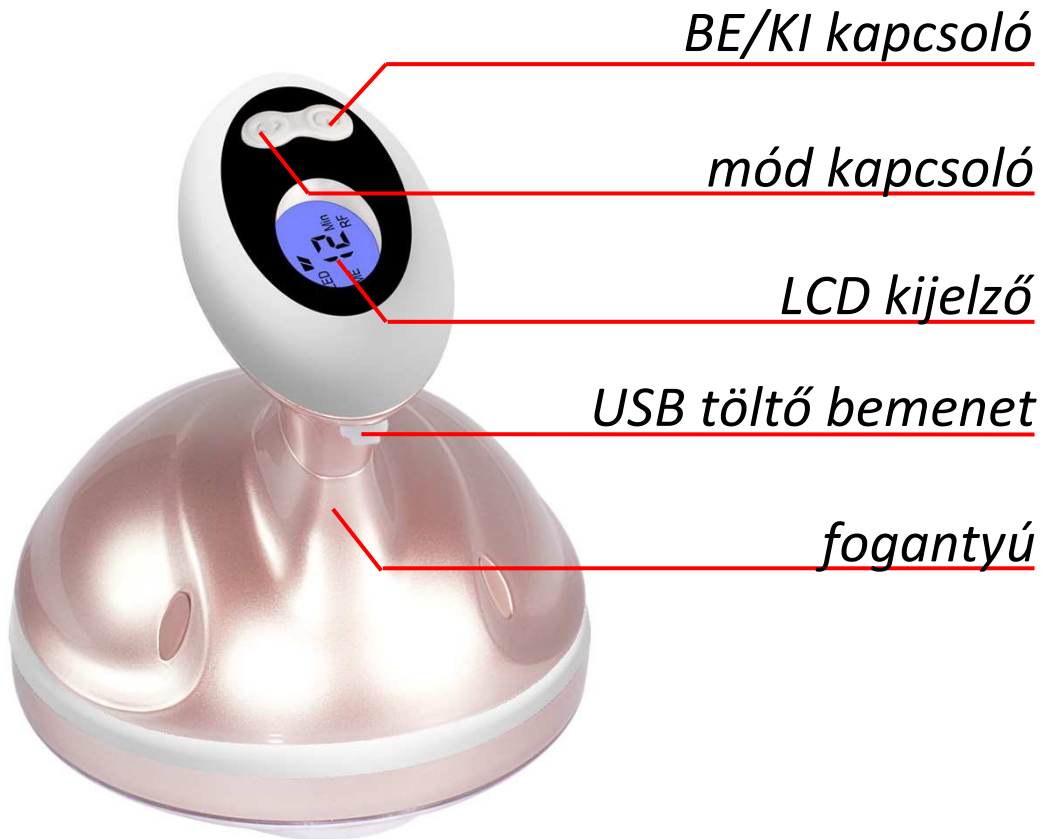

Alsó

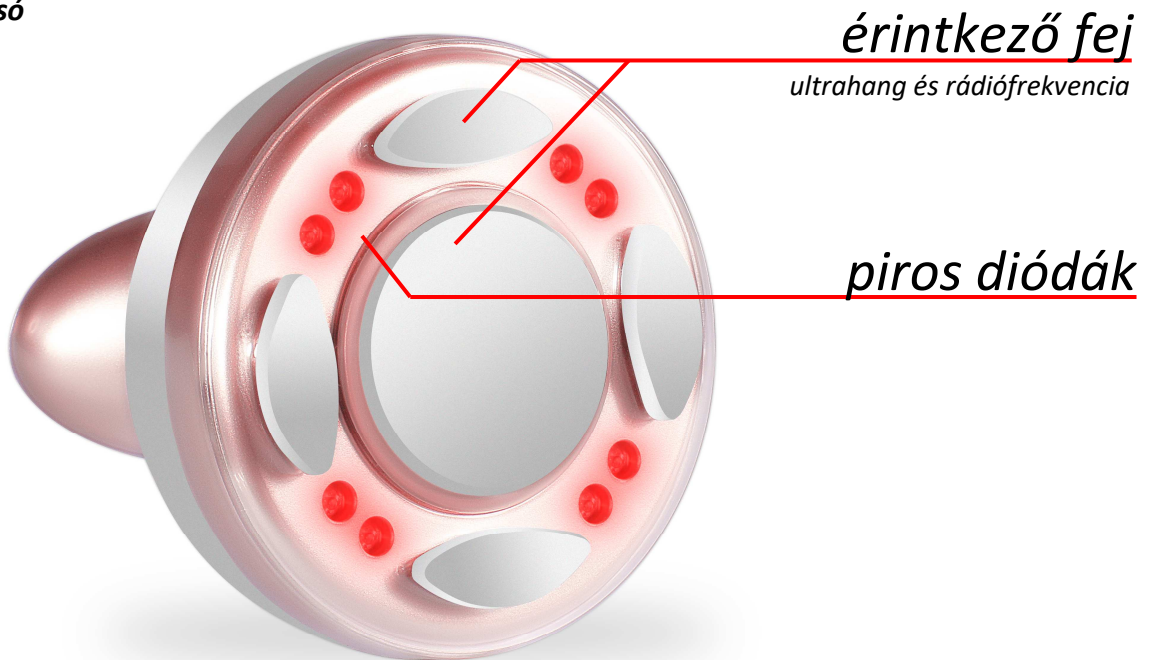

KIJELZŐ ÚTMUTATÓ

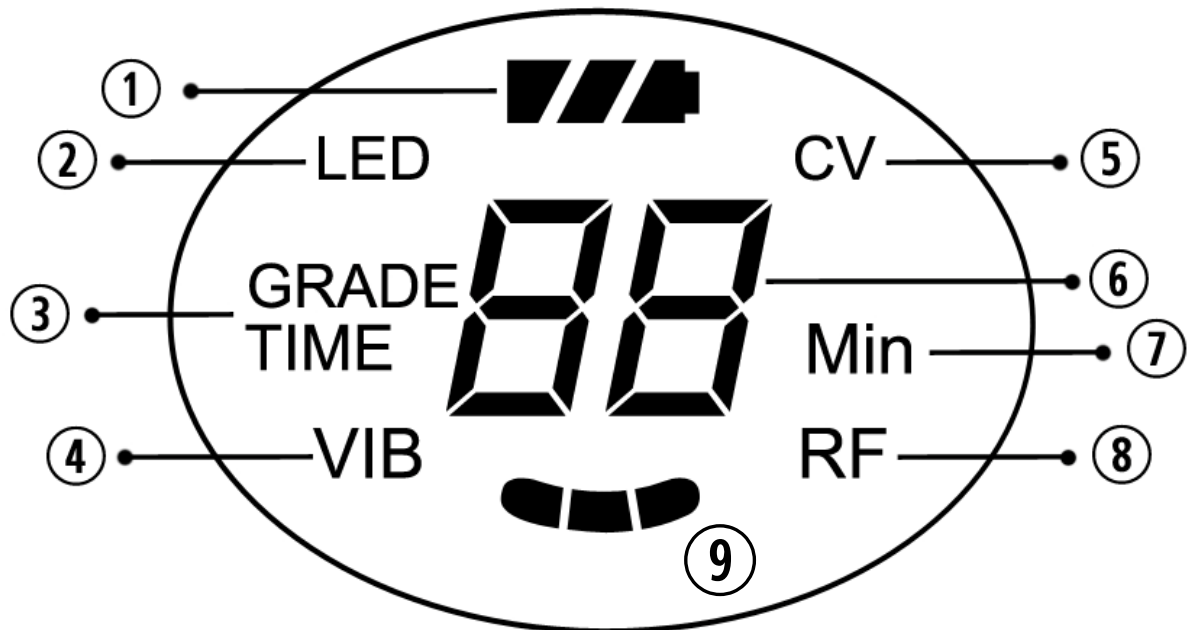

- ① Akkumulátor állapot
- ② Vörös fény LED
- ③ Fokozat és idő
- ④ Vibrációs mód
- ⑤ Ultrahangos mód
- ⑥ Idő
- ⑦ Percek
- ⑧ Rádiófrekvencia mód
- ⑨ Eszköz tevékenység jelző

HOGYAN HASZNÁLD A KÉSZÜLÉKET

1. Minden használat előtt alaposan tisztítsa meg a bőrt. Ideális a teljes testfürdő után a kezelés ütemezése.
2. Vigyen fel egy finom réteg fényes felhordó gél a kezelt területre (nem tartozék). Az alkalmazható gél, az úgynevezett SONOGEL, minden orvostechikai boltban elérhető (gyógyszertárban is kapható). A gél nagyon fontos az eszköz használatához. Ez létrehozza a szükséges réteget a felhordó fej és a bőr között. Vízbázisú. Nem sértheti az alkalmazás fejét. Felhordó gél szükséges. A készülék nem használható ultrahangos kavitációs módban gél jelenléte nélkül a bőrön.
3. Az ON / OFF gombot az eszközök vezérléséhez és az üzemmódok közötti váltáshoz használják.
4. A MODE gombbal állíthatja be a rezgés és a vörös fény módot.
5. Az alkalmazásfej segítségével mozgassa körbe a kiválasztott területen. SOHA ne maradjon egy helyen az alkalmazás fejével.
6. Mindig ellenőrizze, hogy az eszköz alján lévő érintkezőfelek teljes érintkezésben vannak-e a bőrrel. Ez biztosítja a maximális kezelési hatékonyságot.
7. Minden üzemmódban egy 15 perces időzítő automatikusan elindul. Amit mindig láthat, hogy hány perc van hátra a kijelzőn..
8. Amikor a visszaszámlálás befejeződött, kettős hangjelzés hallható, és az egység automatikusan kikapcsol.

Tipp: A kezelt testrész ideális esetben szőr mentes. Ez javítja az applikátorfej mozgását a bőrön. Az ultrahangos hullámok és a rádiófrekvencia jobban behatolnak a bőr alatti szövetbe.

Minden technológiának egyedi, sajátos jellemzői vannak. A bőr kezelésekor kombináció lehetséges. Ez pontosan megadja azokat a hatásokat, amelyeket elvár a Beautyrelax Celluform használatával.

4 mód van, speciális effektusokkal:

~~~~~  
**Világosabb bőr** vörös fény 625nm + rádiófrekvencia  
~~~~~

Zsír égetés vörös fény 625nm + ultrahangos kavitáció
~~~~~

**Zsír lebontás** vörös fény 625nm + rádiófrekvencia + vibráció  
~~~~~

Test formázás vibráció + ultrahangos kavitáció
~~~~~

## MÓDOK ÚTMUTATÓJA

1. A készülék ki van kapcsolva. Röviden nyomja meg a BE / KI gombot. A készülék 1. üzemmódra vált.
2. Röviden nyomja meg a BE / KI gombot a 2. üzemmód aktiválásához.
3. Röviden nyomja meg a BE / KI gombot a 3. üzemmód aktiválásához.
4. Röviden nyomja meg a BE / KI gombot a 4. üzemmód aktiválásához.
5. Tartsa lenyomva az ON / OFF gombot az egység kikapcsolásához.




### **GRADE funkció bemutatása**

Ha a piros lámpa világít, akkor a gomb segítségével állíthatja be a három üzemmód egyikét: **lassan villog, gyorsan villog, folyamatosan világít.**

Ha a rezgés funkció be van kapcsolva, ezzel a gombbal állíthatja be a három üzemmód egyikét: **gyors vibráció, lassú vibráció, folyamatos vibráció.**

1.  
mód

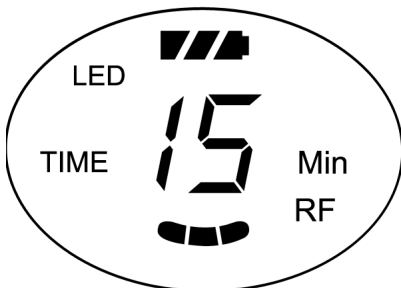


### **Brightening skin**

**LED** vörös fény

**RF** rádiófrekvencia

2.  
mód

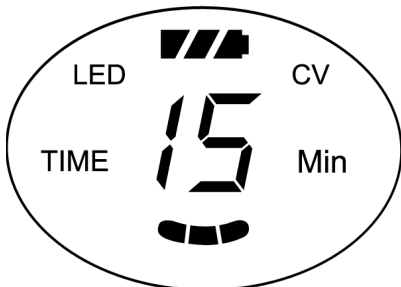


### **Fat Burning**

**LED** vörös fény

**CV** ultrahang kavitáció

3.  
mód

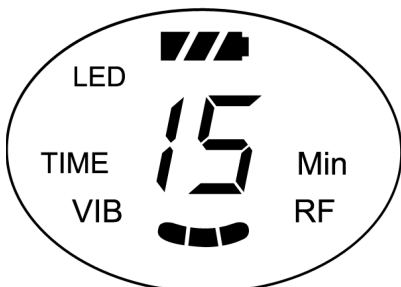


### **Fat destruction**

**LED** vörös fény

**RF** rádiófrekvencia

**VIB** vibráció

4.  
mód

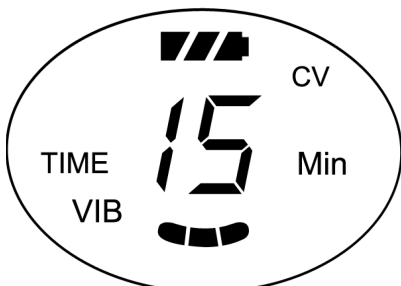

### **Body Shaping**

**VIB** vibráció

**CV** ultrahangos kavitáció

## KEZELÉS MENETE

alkar

kar

has

combok

vádlik

fenék

**Tipp:** Mozgassa a készüléket a bőr körül lassú, körkörös mozdulatokkal, ismételt időközönként. Ne maradjon az alkalmazás fejével egy helyen. Mindig próbáljon meg kezelni több testrész legnagyobb területét.

## TESTRÉSZEK KEZELÉSE

- Alkar
- Kar
- Has
- Combok
- Fenék
- Vádlík

**Jegyzet:** a párosított testfelületet "egy testrésznek" kell tekinteni.

## KEZELÉS IDEJE

A kezelési idő nem haladhatja meg a 15 percet. Párosított test esetén ossza meg ezt az időt felére. Ez 7,5 perc az egyik combra és 7,5 perc a másik combra.

Egyszerre maximum két rész kezelése lehetséges, legfeljebb hetente egyszer. Ugyanaz a rész legalább 7 napig kezelhető.

**Példa egy testkezelési ütemtervre**

| Hétfő        | Kedd | Szerda | Csütörtök     | Péntek | Szombat | Vasárnap |
|--------------|------|--------|---------------|--------|---------|----------|
| kar + vádlík | Ki   | Ki     | comb + vádlík | Ki     | Ki      | Ki       |

### Miért kell a szabadnap?


A Beautyrelax Celluform kezelés után feltétlenül adjon egy kis időt a testnek, mielőtt a folyamat megkezdődne a testben. A felszabadult zsír bontható glicerinné és szabad zsírsavakká. A glicerint energiaforrásként szolgál, míg a zsírsavak a májba kerülnek, ahol normál étrendi zsírsavakként dolgozzák fel őket, és a test természetes úton ürül. A folyamat befejezése után lehetőség van a műszerkezelés biztonságos megismétlésére.

## TÖLTÉS

A készülék beépített 8,4 V-os újratölthető elemmel rendelkezik. Az akkumulátor lemerülésekor a készülék automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor állapotát az akkumulátor ikon jelzi a kijelzőn.

### Töltési eljárás:

1. Dugja a kábelt a készülék USB portjába.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép vagy laptop 220 V-os adapteréhez vagy USB portjához.
3. Töltés közben a „CH” felirat villog a kijelzőn.
4. Amikor a töltés befejeződött, cserélje ki az USB port gumi fedelét.

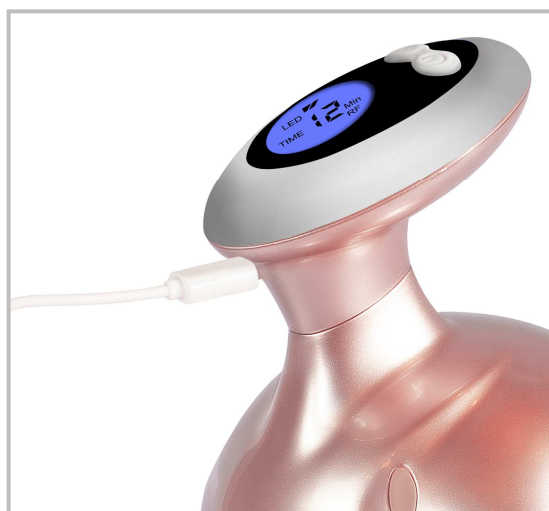

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

Mindig ellenőrizze, hogy a felhordó fej megtisztult-e a kezelés befejezése után. Ne használjon agresszív tisztítószeret. Javasoljuk, hogy használjon speciális fertőtlenítő spray-eket, amelyeket általában az egészségügyi ellátásban vagy a szépségszalonokban használnak szerszámtisztításhoz. Csak a termékkel tisztítsa meg mindkét alkalmazófejet. A nedvesség soha nem juthat be az eszközbe.

## **GYIK**

### **Hogyan kell a kezelést otthon megfelelő módon elvégezni?**

A kezelés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban szereplő összes részletet. Különös figyelmet kell fordítani az ellenjavallatokra. Ha nem biztos benne, forduljon orvosához. Lásd még az ultrahang-kavitáció kezelésére pontosan meghatározott testrészek listáját. A kezelés alatt fekdjön vagy üljön. Helyezd magad kényelembe. Helyezzen valami könnyebb, kényelmesebb ruhát.

### **Milyen óvintézkedéseket kell tenni a kezelés előtt és után?**

Legalább 4 órával a kezelés előtt ne egyen nehéz vagy olajos ételt. Javasoljuk könnyű ételt (például zöldségsalátát, joghurt). A kezelés előtti napon, a kezelés napján és a kezelés után néhány nappal növelje az ivási rendjét napi 2–2,5 liter tiszta vízre. Kerülje a szénsavas és édesített vizet. Az ultrahangkezelés után egy héttel kerülje az alkohol, koffein, nikotin, nehéz és zsíros ételek fogyasztását. Mindezek a tényezők megterhelik a májat, amelyet már megterhel a test laza zsírjainak kiszűrése. Egy másik terhelés hányingert okozhat. A kezelés után javasoljuk, hogy fokozza a fizikai aktivitást. Növekszik a vérkeringés és az általános anyagcsere, támogatva a felszabadult zsírok felszabadulását a testből.

### **A Beautyrelax Celluform kezelés fáj?**

A kezelés teljesen fájdalommentes és biztonságos, a kézikönyvben szereplő összes utasításnak megfelelően.

### **Honnan tudhatom, hogy az ultrahang és a rádiófrekvencia valóban működik?**

A kezelés során csak magas, alacsony hangú sípolást fog hallani, amely ultrahangot bocsát ki. Az érzékeny személyek finom bizsergést érezhetnek. Az ultrahanghullámok működésének ellenőrzéséhez vigyen fel kis mennyiségű vízcseppet az alkalmazás fejére. A vízmolekulák ultrahanghullámai rezegnek. A rádiófrekvencia funkcionalitásának ellenőrzéséhez kenje be egy kis vajszeletet. Felülete jelentősen mozog.

### **Milyen eredményeket lehet elérni?**

Az eredményt számos tényező jelentősen befolyásolja. A laza zsírt a szervezetnek kell feldolgoznia. A folyamatok gyorsasága elsősorban az anyagcserének sebességétől, a zsír típusától, a nyirokrendszer állapotától vagy az étrendjétől függ. Optimális körülmények között ismételt kezelés után néhány centiméter veszteség jelentkezhet, miközben a fent említett étrendet betartja.

### **A Beautyrelax Celluform biztonságos?**

Az ultrahangos kavitáció teljesen biztonságos, ha az eszközt a megfelelő területeken használják, és a felhasználók nem tartják be a fenti ellenjavallatok egyikét sem. A felszabadult zsírt a test fokozatosan dolgozza fel. A teljesítményt kifejezetten úgy állítják be, hogy megakadályozzák más sejtek és erek károsodását.

**Milyen alapelveket kell követni a kívánt fogyás hatás elérése érdekében?**

Mint fentebb említettük, módosítani kell az étrendet és növelni kell a folyadékbevitelt. Az ultrahangos kavitációs kezelés biztonságosan elvégezhető 7-10 nap után. Nem javasoljuk, hogy egyszerre kétnél több testrészt kezeljen. Ha olyan részeket kezel, amelyek közelebb vannak egymáshoz, a kavitációs hatás megsokszorozódik. Ellenkező esetben a hatás megoszlik.

**Miért van jelentős árkülönbség a szépségszalonokban és a háztartási készülékekben?**

A fő ok a használat eltérő gyakorisága. A kozmetikai eszközöknek képesnek kell lenniük folyamatosan működni reggeltől este. Ez fokozott igényt támaszt a felhasznált anyagokkal és az általános technológiai koncepcióval (nagyobb tápegységek, nagyobb hűtési sebesség, stb.). A háztartási kozmetikai felszerelések teljesítményét úgy tervezték, hogy megfeleljenek a felhasználó bejelentett előnyeinek. Magasabb használati gyakoriság = drágább gyártási költségek.

**Mi az oka a felhordó fej tisztításának / fertőtlenítésének?**

Az érintkezőfejeket gondosan meg kell tisztítani a kontaktgélről. A tisztítás megakadályozza a készülékbe való esetleges behatolást és a működés lehető legjobb higiéniáját.

**Meddig kell tartani az egyedi bőrápolást?**

Az egyéni kezelés ajánlott hossza 10-20 perc.

**Ez az eszköz orvosi eszköz?**

Nem.

**Mi a teendő, ha az akkumulátor hosszabb ideig elveszíti kapacitását?**

Ha az akkumulátor kapacitása idővel csökken, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk: mh@santadria.cz. Az akkumulátor cseréjére vonatkozó információkat küldünk Önnek..

**Van-e tanúsítása az eszköznek?**

Szabványos európai tanúsító eszköz. Megfelel az összes szabványnak, amelyet az ilyen típusú eszközökre vonatkoznak. Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot: mh@santadria.cz. Megfelelőségi nyilatkozatot küldünk Önnek elektronikus úton. Ezt a dokumentumot a felhasználói kézikönyv végén láthatja.

**Hol készül a készülék?**

A Kínában gyártott készüléket az előírásaink és előírásaink szerint gyártottuk. A szavatosságot és a jótállás utáni szolgáltatást garantáljuk.

**Több ember is használhatja a készüléket?**

Elsődlegesen nem ajánljuk. Ha azonban családtagok, és az érintkezőfejek tisztítását és fertőtlenítését minden kezelés után követik, a másik személy használhatja az eszközt.

**Vízálló az eszköz?**

Nem az.

## MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT ELEKTRONIKAI ESZKÖZTŐL



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket szállítsa a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti az értékes természeti erőforrások megővését, és megelőzi a potenciális negatív környezeti és emberi egészségi hatásokat, amelyek a hulladékok nem megfelelő ártalmatlanításának következményei lehetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. A termék ártalmatlanításához kérje a megfelelő hulladékkezelési információkat a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől.

## HITELESSÉG



Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

## IMPORTŐR

**SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno**  
Vállalati azonosító 29195454 | VAT number: CZ29195454  
elérhetőségi email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

Print errors, features and changes to technical parameters are reserved.

# EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, a társaságot képviselő

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

Vállalati azonosító: 29195454

kijelenti, hogy a termék

## **multifunctional body massager**

amit BeautyRelax Celluform EAN 8594166106666 néven forgalmaznak  
megfelel a következő európai szabványokkal:

**EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2:2011**

**EN 55014-2: 2015**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013**

Az összes részletes információt a tesztjelentés tartalmazza: **CTA-01-1708001**

### **Ezen irányelveket követve a terméket CE-jelöléssel látják el.**

A termék az RoHS-nak is megfelel a 2002/95 / EK irányelvnek (RoHS). Minden anyag ártalmatlan az egészségre. Nem tartalmaznak nehézfémeket, például kadmiumot és más mérgező anyagokat.

A biztonságos használat érdekében szigorúan be kell tartani a csomagban található üzemeltetési utasítás utasításait.



Kiállítás helye: Brno  
Kiállítási dátum: 31.12.2017

  
**SANTADRIA s.r.o.**  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

.....  
Martin Hrbek, vezérigazgató