

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TENS butterfly messenger

BR-665



JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

- 6 masszázsmód
- 4 jelző LED
- egyedülálló vezeték nélküli megoldás a test nagyon könnyű alkalmazásához
- automatikus kikapcsolás 12 perc elteltével
- kis súly
- kompakt méretek
- Használható a nyakon, vállakon, hason, combon és vádlikon
- aktív izom erősítés és testformálás
- felhasználható az izomfeszültség kellemes felszabadítására is

MŰKÖDÉS ELVE

A testmozgás alapja az izmok összehúzódása, amelyek parancsokat kapnak az agyból küldött impulzusokon keresztül történő fellépéshez. A mozgás révén az izmokat természetes módon erősítik meg. Az elektromos stimulátorok ugyanúgy működnek. Ezek helyettesítik az agy impulzusát és utasítják az izmot, hogy cselekedjen. Az elektrostimulátor két részből áll - a fő vezérlőegységből és a ragasztóelektródból. Az izmok pontosan azokon a részekén működnek, amelyekbe az elektródot ragasztják. A vezérlőegységen könnyen beállíthatja az impulzusok erősségét, amelyeket az elektródok a bőrön keresztül továbbítanak az izmokig. Az erősebb impulzusok az izmok aktív erősítését szolgálják. Ellenkezőleg: lágyabb, ha ellazítja őket fizikai erőfeszítés után.

HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEK

Az elektromos stimulátort olyan testrészekre is használhatja, amelyeket meg kell alakítani, vagy éppen ellenkezőleg, pihentető izommasszázsokkal láthatja el őket. Az alkalmazáshoz leggyakrabban használt testrészek a nyak, a váll, a csípő, a has, a comb és a vádli. Az elektródák alján puha, zselatinszerű szilárd anyag van. Ez pontosan ott tartja őket, ahova rögzíti őket. Használat közben elhasználódnak, és idővel új vásárolni kell. Az elektrostimulátor nagyon széles körű felhasználást kínál. A sportoló aktív edzésének támogatása révén, az általános izomregeneráción keresztül. Rehabilitációban is használják, amikor a kórházban való hosszú tartózkodás után szükség van a gyenge izmok formájának visszaállítására. A pulzusérték helyes beállításával kiküszöbölheti az izomfájdalmakat (tenisz könyök, combfájdalom, térdfájdalmak stb.).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, olvassa el az összes ábrát, és őrizze meg őket későbbi felhasználás céljából.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha leesett, sérült és nem működik megfelelően, vagy ha vízbe esett.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy magas páratartalmú helyeken.
- A készüléket nem szánják gyermekek vagy személyek, akiknek testi vagy szellemi állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.
- Ne tegye a készüléket forró hőforrásokra (radiátor, tűzhely stb.)
- Az eladó nem felelős a nem megfelelő használat által okozott károkért. Nem felelős a biztonsági utasítások be nem tartásának következményeiért.

VESZÉLY

A pacemaker használata tilos, ha a következő eszközöket használja egyszerre:

1. Orvosi elektronikus eszközök (pl. Pacemaker).
2. Orvosi elektronikus eszközök, amelyek támogatják az életfunkciókat (pl. mesterséges szív, tüdő, máj stb.).
3. Egyéb orvostechikai eszközök (pl. Elektrokardiográf).

FIGYELEM

Azonnal vegye fel a kapcsolatot orvosával vagy orvosával, ha a következő egészségügyi tünetekben szenved:

1. Akut problémák
2. Szív problémák
3. Magas láz
4. Terhesség
5. Rosszindulatú daganatok
6. Állandó alacsony vagy magas vérnyomás
7. Fertőzött seb vagy hasonló súlyos sérülés
8. Allergiás bőrproblémák
9. Aláírás orvosi diagnosztikai terápiához
10. Kellemetlen folyamatos izomfájdalom az izmok túlzott terhelése miatt

Ha a fentiek bármelyike vonatkozik rád, tilos elektromos stimulátor használata.

Kövesse ezeket az utasításokat:


1. Tilos az elektródát a szívre, a fejre, a nemi szervekre helyezni. Ne használja az elektródákat olyan területeken, ahol bőrbetegségek vagy kopások vannak.
2. A készüléket tilos más orvosi eszközökkel kombinációban használni. Használat előtt ne használjon krémet vagy spray-t. Károsíthatja a bőrt.
3. A készüléket a használati útmutató pontos utasításai szerint használja. A készüléket csak izomfájdalom és feszültség enyhítésére vagy izmok erősítésére szabad felhasználni.
4. Ne csatlakoztassa a mellékelt elektródát másik eszközhöz.
5. A készüléket csak a használati útmutató gondos elolvasása nélkül szabad használni.
6. Ha nem érzi jól magát az eszköz használatakor, vagy váratlan egészségügyi problémákat tapasztal, azonnal kapcsolja ki az eszközt, és további használat céljából konzultáljon orvosával.
7. Ha az elektródát a test másik részére szeretné helyezni, először kapcsolja ki az eszközt. Ezután biztonságosan mozgathatja az elektródát, és újra bekapcsolhatja a készüléket.
8. A készülék maximális hatékonyságának biztosítása érdekében kapcsolja ki az összes elektronikus eszközt, amelyet használ (MP3 lejátszó, mobiltelefon hívás közben).
9. Az eszközt tilos alvás közben használni, ha nem tudja teljes mértékben irányítani az eszközt. Súlyos sérülés következhet be.
10. Ne használja az elektródát egy helyen 30 percnél hosszabb ideig.
11. Az elektróda használatakor ügyeljen arra, hogy az elektróda ne kerüljön érintkezésbe vezetőképes fémtárgyakkal (láncok, karkötők, gyűrűk,...).
12. Ne tegyen elektródákat a testre a szív, a száj vagy az irritált bőr közelében.
13. Bizonyos körülmények között az eszközt csak gyógytornász részvételével lehet használni.
14. A készüléket kizárólag külső felhasználásra szánják.
15. A készüléket csak 16 éven felüli személyek használhatják.

ELLENJAVALLAT

A készülék használata tilos, ha a következő korlátozások vonatkoznak rád.

1. Ha terhes
2. Ha epilepsziás
3. Ha cukorbeteg
4. Ha a testében fémtárgyak vagy piercingek vannak
5. Ha rákos
6. Ha magas láza van
7. Ha magas vérnyomásban szenved


KOMOLY FIGYELMEZTETÉS

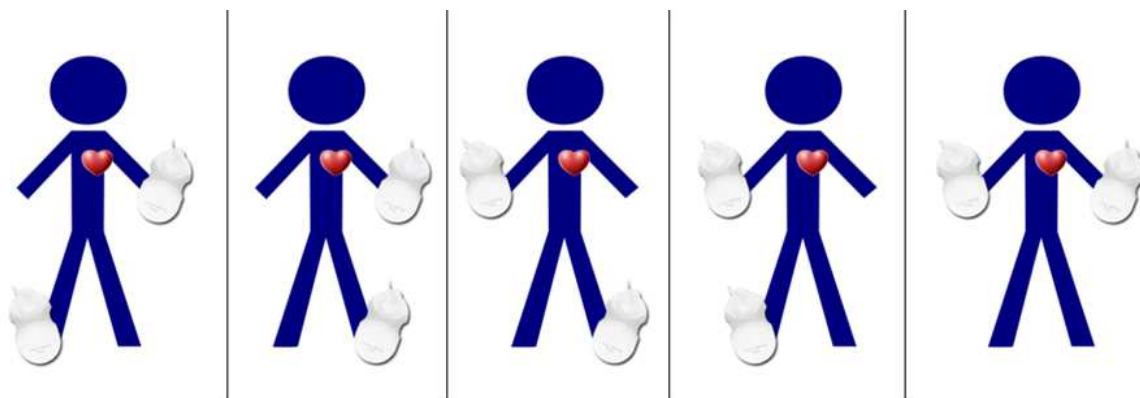


**SOHA NE RAGASSZON A TESTÉRE A LÁTOTT KOMBINÁCIÓKBAN,
AMELYEK BEN TÖBB GÉL-ELEKTÓDÁT HASZNÁLUNK. AZ
ELEKTROMOS HULLÁM KÖZVETLENÜL A SZÍV IRÁNYÁBA HALADHAT,
AMELY SZIGORÚAN TILOS ÉS VESZÉLYES!**

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS

1. ON / INC gomb
2. OFF / DEC gomb
3. PROGRAM gomb
4. LED Indikátor
5. Akkumulátor fedél

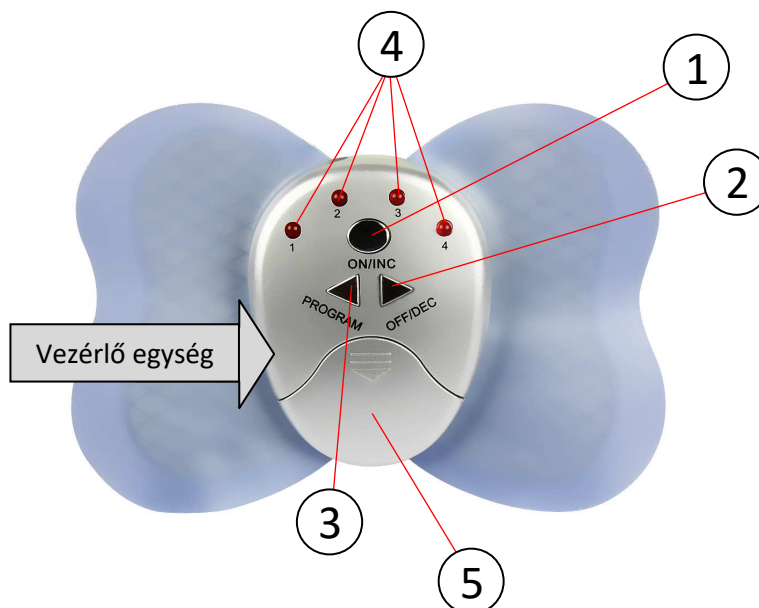

6. Elektroda pad
7. Bemenet

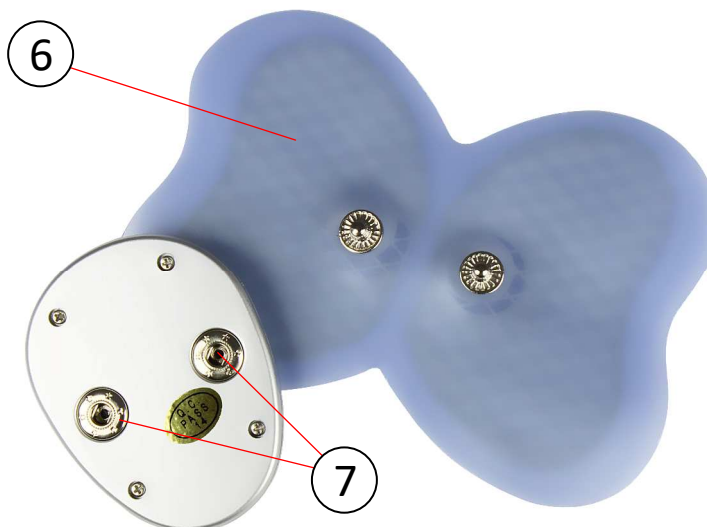

HOGYAN HASZNÁLD

1. Csúsztassa ki a fedelet és helyezze be a CR 2032 3V akkumulátort.
(mindig ellenőrizze a megfelelő polaritást; vegye ki az elemeket, ha hosszú ideig nem használja az eszközt)
2. Csatlakoztassa a gélelektrodát a vezérlőegységhez mindkét csatlakozó érintkező segítségével, és tegye rá az elektródot a választott testre..
3. Az elektromos impulzus funkció bekapcsolásához nyomja meg az ON / INC gombot.
4. Használja ismét az ON / INC gombot az elektromos impulzusok erősségének növeléséhez.
5. Az OFF / DEC gombbal csökkentse az elektromos impulzusok erősségét.
6. A masszázs mód megváltoztatásához nyomja meg a PROGRAM gombot.
7. Az eszköz kikapcsolásához használja az OFF / DEC gombot. A készülék 12 perc működés után automatikusan kikapcsol.

Nagyon figyeljen a test egyes területein az elektromos impulzusok intenzitására. Mindig a legalacsonyabb értéktől kezdje. Növelje fokozatosan a masszázs intenzitását! Ha úgy érzi, hogy nem tetszik a jelenleg beállított intenzitás, csökkentse azt, vagy kapcsolja ki a készüléket!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás és az eszköz bármilyen kezelése előtt távolítsa el az elemeket.
2. A készülék felületét csak nedves ruhával törölje le.
3. Soha ne használjon agresszív tisztítószeret.
4. A karbantartást csak mechanikus tisztítással lehet elvégezni.

DOBOZ TARTALMA

- 1x elektróda vezérlőegység
- 1x gél elektróda

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- tápegység: 1x CR 2032 3V típusú elem
- méretek: 10.7x7.3x1cm
- tömeg: 80g

MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT ELEKTRONIKÁTÓL



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha el akarja dobni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.



Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

IMPORTŐR

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454
Email: mh@santadria.cz

A tipográfiai hibák, a tulajdonságok és a műszaki paraméterek változása fenntartva.