


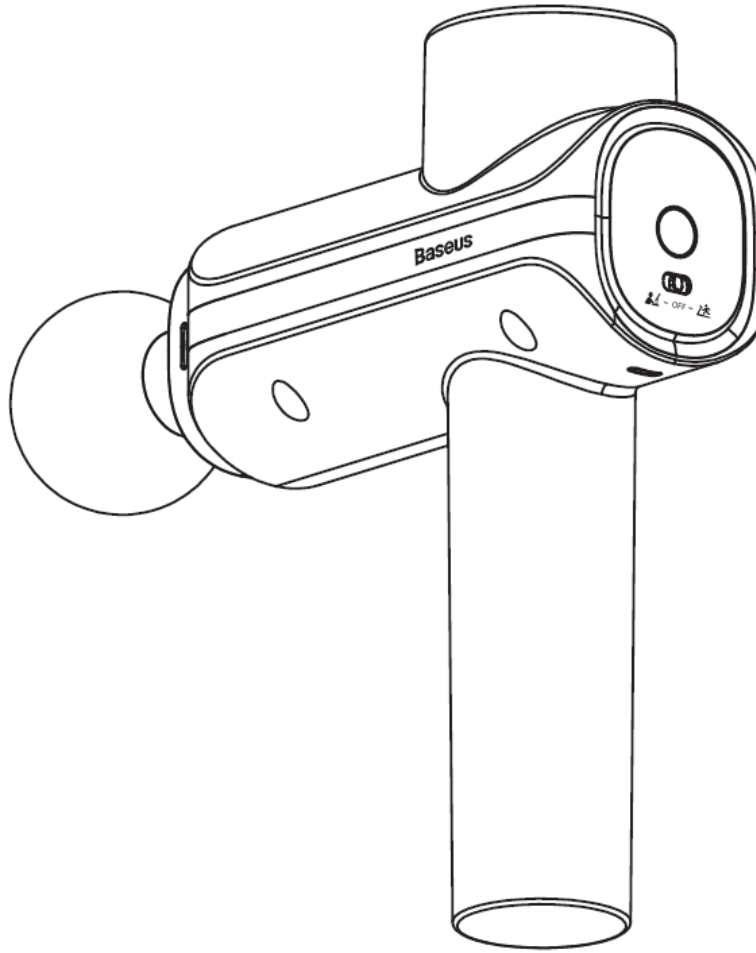

Baseus Booster Dual Mode masszázspisztoly

Használati utasítás

A termék ismertetése

Köszönjük, hogy a Baseus Booster Dual Mode masszázspisztolyt választotta. A termék apró, stílusos és hordozható, sport és relax üzemmóddal áll rendelkezésre. Az aktív sportolókat hatékonyan megmasszírozza, az irodai alkalmazottakat finom masszázssal kényezteti. A zajtalan üzemelés érdekében professzionális, magassebességű, kefe-mentes motorral ellátott. Az akkumulátor készenléti ideje és élettartama rendkívül hosszú, a szokásosnál erősebb és strapabíróbb, a C típusú töltő interfésszel pedig egyszerűen tölthető. Az igények teljeskörű kielégítése érdekében a sport és relax mód egyaránt három erősségi fokozaton működik. A masszázspisztoly egy alapvető egészségügyi segédeszköz, amely segít csökkenteni a fáradtságot és megszabadítja az izomzatot a kellemetlen érzésektől.

Termékjellemzők

1. A kettős üzemmódnak köszönhetően az aktív sportolók és fitneszelők intenzív masszázst-, az ülő munkát végzők pedig gyengéd masszázst élvezhetnek. A készülék négy szett professzionális, puha EVA fejjel áll rendelkezésre masszázssra, kezelésre, akupresszúrára és rehabilitációra.
2. A professzionális, kefe mentes motor és a motorszerkezet löketei kiegyensúlyozot és zavartalan üzemelést tesznek lehetővé.
3. A kompakt testnek és a precíz felépítésnek köszönhetően az ergonomikus kialakítású készülék egyszerűen tárolható.
4. A 29,6 Wh teljesítményű akkumulátor gondoskodik róla, hogy a kis test nagy mennyiségű energiát legyen képes szolgáltatni.
5. A masszázspisztoly egy feltöltéssel 3-5 hónapon át használható, minden USB-töltővel kompatibilis.
6. Egyszerűen tegye a tárolótáskába és vigye magával háton vagy kézben.

Műszaki adatok

Név: Baseus Booster Dual-mode masszázspisztoly

Modell: ACBLD

Alapanyag: ABS+PC

Névleges teljesítmény: 29 W

Bemeneti feszültség: DCSV-3 A vagy 9V-2 A

Üzemmód és fokozat: mindkét üzemmódban 3 fokozat

Az akkumulátor kapacitása: 29, 6 Wh


Interfész típus: Type-C

A masszázspisztoly fejeinek száma: 4

Méret: 206×200×58 mm

Tömeg: hozzávetőlegesen 740 g

A termék részei

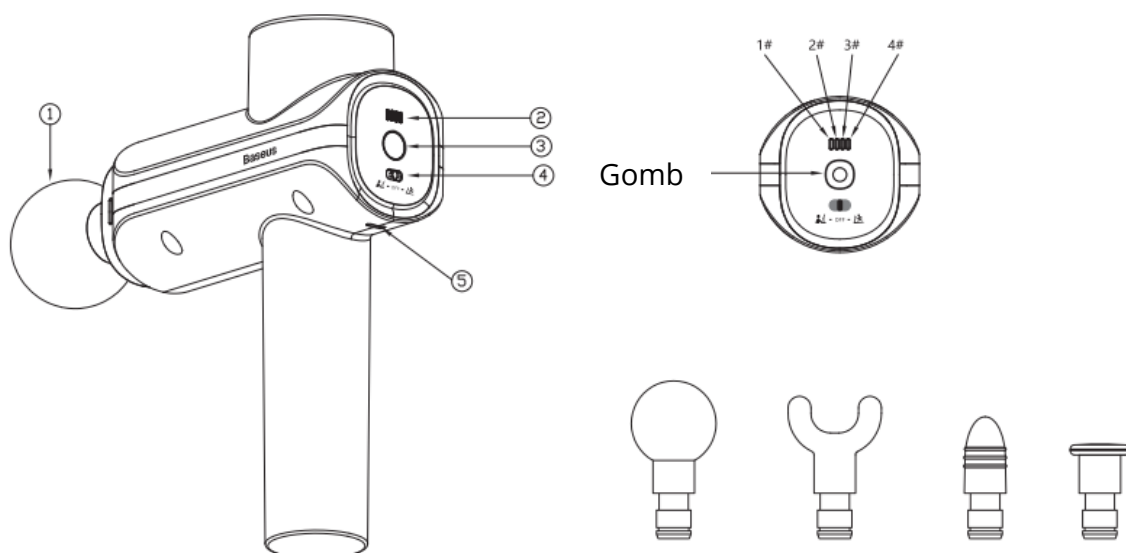


1. Massázspisztoly-fej
2. Jelzőfény
3. Gomb
4. Hálózati kapcsoló
5. Töltőaljzat

1. Nagy kerek fej
2. Dupla villás fej
3. Töltény fej
4. Nagy lapos fej

1. A nagy kerek fej minden testrész masszírozására alkalmas.
2. A dupla villás fejjel a gerinc területét és az izmokat masszírozhatja.
3. A töltény fej a fitnesszelők és testépítők számára ajánlott, az akkupunktúrás pontok-, és az izmok masszírozására.
4. A nagy lapos fej minden terület masszírozására alkalmas.

Használat

1. Válasszon ki egy masszázsféjet.
Elforgatással vegye ki a masszázspisztolyból az előzőleg használt fejet, majd nyomva csavarással csatlakoztassa a választott fejet ütközésig.

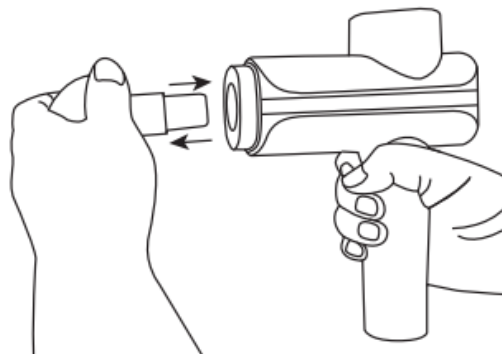


2. A hálózati kapcsoló eltolásával kiválaszthatja a kívánt üzemmódot az interfészen balra tolással (relax szint, relax üzemmód), vagy jobbra tolással (sport szint, sport üzemmód). A sebesség szabályozásáért, vagy a masszírozás szüneteltetéséért nyomja meg a gombot, miután az akkumulátor jelzőfénye villog, és az üzemmód jelző bekapcsol (a választott módnak megfelelően).

Üzemmód és fokozat kiválasztása

Relax üzemmód: Csúsztassa a hálózati kapcsolót balra (zöld), megjelenik az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje és bekapcsol a zöld jelzőfény.

Röviden nyomja meg a gombot: első fokozat relax üzemmódban – második fokozat relax üzemmódban – harmadik fokozat relax üzemmódban – szünet (sorban változtatható).

Sport üzemmód: Csúsztassa a hálózati kapcsolót jobbra (narancssárga), megjelenik az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje és bekapcsol a narancssárga jelzőfény.

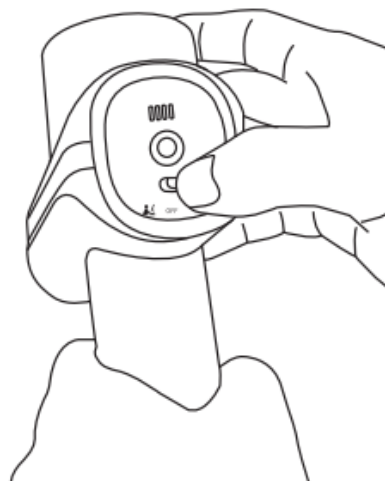

Röviden nyomja meg a gombot: Első fokozat sport üzemmódban – második fokozat sport üzemmódban – harmadik fokozat sport üzemmódban – szünet (sorban változtatható).

3. A megfelelő szint beállítását követően élvezheti az erőteljes masszázst és az izomzat ellazulását. A masszázsfégeket a különböző területek eltérő igényeitől függően cserélheti, leállítást követően.
4. Ha a masszázspisztoly töltöttségi szintje alacsony, vagy töltést igényel, csatlakoztassa a C típusú csatlakozót az aljzatba, a vezeték másik végét pedig egy 5 V/3 A-, vagy 9 V/2 A kimenetű töltőhöz. Ezt követően csatlakoztassa a töltőt egy AC áramforráshoz. Amikor a termék töltődik, a jelzőfény villog, és a négy jelzőfény egyszerre kivilágít, amennyiben teljesen feltöltődött. Töltődés közben a készüléket nem lehet bekapcsolni. A leesés következtében keletkező

meghibásodások megelőzése érdekében töltés közben a készülék legyen stabil felületen.

Fontos figyelmeztetések

1. Ne tárolja a készüléket nyirkos, vagy túl meleg helyen.
2. Használata 18 éven felüliek számára ajánlott, gyermekek és várandós nők ne használják.
3. Sérülés esetén keressen fel orvost, mielőtt újra használná a készüléket.
4. Kérjük ne kapcsolja be, ha a környezet hőmérséklete 5 C° alatt van. Amennyiben mégis ilyen környezetben szeretné használni, a következőképpen járjon el: kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a környezet hőmérséklete magasabb, mint 5 C°. Várja meg, hogy a masszázspisztoly elkezdjen működni, ezt követően vigye vissza a környezetbe, ahol a hőmérséklet nem éri el az 5 C° - ot.
5. Ne masszírozza a termékkel a fejet, a nyakat, a csontokat és ízületeket.
6. A sérülések elkerülése érdekében ne helyezze az ujját vagy egyéb testrészét a fej és a masszázspisztoly elülső vége között található részbe.
7. Ügyeljen rá, hogy semmilyen anyag ne kerüljön a masszázspisztoly tetején található nyílásba.
8. A használat napi ajánlott időtartama az egyén állapotától függ. Amennyiben nem érzi jól magát, ne masszírozza magát a készülékkel.
9. Tilos a készüléket tűzbe vagy tűzforrás közelébe helyezni.

Jogi nyilatkozat

A termék használata előtt kérjük kérje ki kezelőorvosa, gyógytornásza, vagy egészségügyi szakember tanácsát.

A következő nehézségekkel küzdő személyek kizárólag szakember hozzájárulásával használják a masszázspisztolyt: várandósság, diabétesz, ideghártya-leválás, műtét utáni felépülés, ágyéki porckorongsér, ízület pótlás, patológiás ödéma, magas vérnyomás, köszvény, izomgyulladás, visszér, stb.

Gyermekek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a terméket.

GYIK

Q: Mi a teendő, ha a készülék nem kapcsol be?

A: Elsőként ellenőrizze, megfelelő-e a töltöttségi szint. Amennyiben az akkumulátor üres, feltöltés után újra bekapcsolhatja a készüléket.

Ha a masszázspisztoly megfelelő töltöttségi szint esetén sem kapcsol be, előfordulhat, hogy a környezet hőmérséklete túl alacsony. Kérjük, olyan környezetben működtesse a készüléket, ahol a hőmérséklet magasabb, mint 5 C°, vagy növelje a termék hőmérsékletét 5 C° - nál magasabbra, majd vigye vissza arra a helyre, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 5 C°.

Q: Mi a teendő, ha a termék üzemelése zajosabbá válik?

A: A masszázspisztoly hangosabban működik, ha hosszabb ideig használja. Ilyenkor a zajosság csökkentéséért a készülék felületét kenje meg kis mennyiségű műszerolajjal (például varrógép olaj).

Q: Mi a teendő, ha a masszázspisztoly-fejet nehéz levenni, vagy csatlakoztatni?

A: Kihúzással leveheti, és nyomva forgatással felhelyezheti.

Minden jog fenntartva. © 2020 Alza.cz a.s.