

Hibaelhárítás

Ha használat közben az alább felsorolt problémák bármelyike fordul elő, ellenőrizze, hogy nincs-e más elektromos eszköz 30 cm-nél közelebb a készülékhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor tanulmányozza az alábbiakat.

- A készülék nem kapcsol be*
- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően be van-e dugva a falí aljzatba.
 - Ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gomb (I) állapotban legyen.

- A készülék bekapcsol, de az inhalátor nem működik*
- Ellenőrizze, hogy a porlasztófej az inhalátorkészletben van-e, vagy ha az orrzuhanyt használja, akkor ellenőrizze, hogy az orrzuhanyt megfelelően szerelte-e össze.
 - Ellenőrizze, hogy a levegőcső nincs-e összenyomva vagy megtörve.
 - Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nincs-e eltakarva vagy eltömődve. Szükség esetén cserélje.
 - Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű gyógyszert rakott-e az inhalátorkészletbe.

- A készülék működés közben hirtelen leáll*
- A hőérzékelő lekapcsolta a készüléket az alábbi okok egyike miatt:
 - 40°C-nál magasabb környezeti hőmérsékletben használta a készüléket;
 - a szellőzőnyílások el voltak takarva.

Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ne nyissa ki és/vagy ne módosítsa a készüléket. A készülék egyetlen alkatrésze sem javítható a felhasználó által. Vigye vissza a készüléket egy hivatalos OMRON viszonteladóhoz vagy a márkaképviselőhez.

Műszaki adatok

Termékkategória:	Aeroszolterápiás berendezés
A termék adatai:	Kompresszoros inhalátor
Modell (kód):	C102 Total (NE-C102-E)
Besorolás:	230 V ~50 Hz, (biztosíték: T 1,6 AL 250 V)
Áramfelvétel:	150 VA
Használati mód:	Folyamatos használat
Működési hőmérséklet/ Páratartalom/Légnyomás:	+5°C és +40°C között / 15% és 85% relatív páratartalom között / 700 és 1060 hPa nyomás között
Tárolási és szállítási hőmérséklet/ Páratartalom/Légnyomás:	-20°C és +60°C között / 5% és 95% relatív páratartalom között / 500 – 1060 hPa
Súly:	Kb. 1,1 kg (csak a kompresszor)
Méretek:	Kb. 145 (szélesség) × 124 (magasság) × 222 (mélység) mm
Besorolások:	BF típus (érintkező rész): Szájcstora, maszkok és orr adapter IP21 (Behatolás elleni védelem)
Tartozékok:	Kompresszor, Inhalátorkészlet, Orrzuhany, Levegőcső (PVC, 100 cm), Szájcstora, Adapter, Felnőtt maszk (PVC), Gyermekek maszk (PVC), Használati útmutató

	= Class II eszköz		= BF típus érintkező rész	IP21	= Behatolás elleni védelem		= Kikapcsolás
	= Sorozatszám		= Ellenőrizze a használati útmutatóban		= Váltakozó áram		= Bekapcsolás

CE0051


Általános megjegyzések:

- A IP védettség az IEC 60529 szabvánnyal összhangban jelöli a készülék környezeti behatások elleni védetségét. A kompresszor védett a 12 mm átmérőjű vagy annál nagyobb szilárd tárgyak (például emberi ujj) behatásai, és a függőlegesen érkező vízzel szemben, ami a normál működésben zavart okozhat.
- A műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.
- A specifikációban megadottól eltérő hőmérsékleti viszonyok és feszültség esetén a készülék nem biztos, hogy működni fog.
- Az eszköz megfelel az EK 93/42/EGK (Orvosi eszközökre vonatkozó irányelv) irányelvnek és az Európai szabvány EN13544-1:2007+A1:2009, Légzőszervi terápiás eszközök - 1. rész: Inhalátorrendszerek és alkatrészeik.

Inhalátorkészlet:

Hozzávetőleges gyógyszer mennyiség:	maximum 2 ml – maximum 12 ml
A gyógyszer maradáktérfogata:	Kb. 0,7 ml
Hang: Zajszint (1 m távolságban)	Kb. 57 dB
Részecskeméret (MMAD):	*Kb. 2,6 µm MMAD = átlagos szemcsenagyság
Porlasztási sebesség (súlyvesztés alapján):	**Kb. 0,35 ml/perc (NaCl 0,9%)
Aeroszol kibocsátás (2 ml, 1% NaF):	***Kb. 0,25 ml
Aeroszol kibocsátási sebesség (2 ml, 1% NaF):	***Kb. 0,07 ml/min

Inhalátorkészlet: Kaszkád-impaktoros méréssel meghatározott részecskeméret*

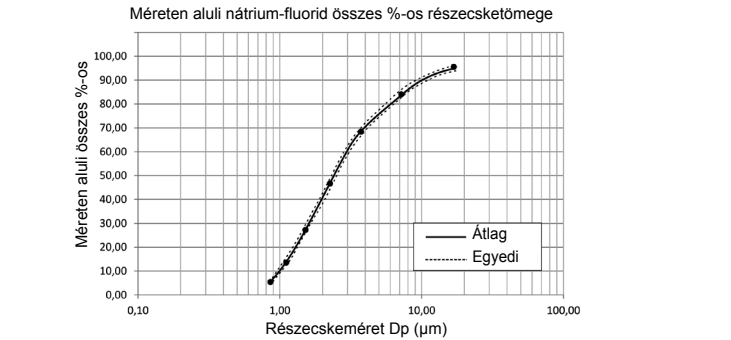

Megjegyzések:

- A teljesítmény a gyógyszerek egyes jellemzőitől függhet, eltérő például szuszpenzió és sűrű oldatok esetében. További részletekért lásd a gyógyszer szállító adatlapját
- * A mért értékek a NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI, új generációs impaktor) által összegyűjtött belső adatokat tükrözik, az EN 13544-1:2007+A1:2009 szabványnak megfelelően.
- ** A porlasztási sebesség mérése 0,9%-os sóoldat használatával, 23°C hőmérsékleten, 3 ml gyógyszerrel történt. A gyógyszer-től és a környezeti körülményektől függően eltérő lehet.
- ***A méréseket az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. végezte.

Orrzuhany:

Megfelelő oldat	
Mennyiségek:	maximum 3 ml – maximum 15 ml
Részecskeméret:	a részecskék 90%-a > 10 µm
Porlasztási sebesség (súlyvesztés alapján):	több, mint 5 ml/perc (NaCl 0,9%)

Garancia

Köszönjük, hogy OMRON terméket vásárolt. Ez a termék magas minőségű anyagokból készült és a gyártása során is nagyfokú gondossággal jártunk el. Úgy terveztük a terméket, hogy Ön megelégedéssel használhassa azt, ha betartja a használati utasításban leírt működtetési és karbantartási szabályokat.

Erre a termékre az OMRON a vásárlást követő 3 évig vállal garanciát. Az OMRON garántálja a termék megfelelő tervezését, kivitelezését és a felhasznált anyagok minőségét. A garanciális időn belül az OMRON munkadíj és anyagköltség felszámolása nélkül megjavítja vagy kicseréli a tönkrement terméket vagy annak bármely meghibásodott alkatrészét. A garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

a. Szállítási költségek és a szállításból eredő kockázatok.

b. Jogosulatlan személy által végzett javításból eredő költségek és problémák.

c. Rendszeres ellenőrzések és karbantartás.

d. A készüléken kívüli kiegészítők vagy egyéb tartozékok meghibásodása vagy egyéb problémái, kivéve, ha azt a garancia külön is jelzi.

e. El nem fogadott reklamáció költségei (melyekért fizetni kell).

f. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű, akár személyi kár. Ha igénybe kell vennie a garanciát, kérjük keresse fel azt a viszonteladót, akinél a terméket vette, vagy egy hivatalos OMRON viszonteladót. A címet a termék csomagolásán vagy a dokumentációban találja vagy kérdezze meg a viszonteladót.

Ha nem tudja, hogy hol van az OMRON ügyfélszolgálat, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségekért.

A garancia ideje alatti javítások vagy cserék nem eredményezhetik a garancia meghosszabbítását. A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a terméket hiánytalanul visszajuttatja az eredeti számlával vagy a kereskedőtől kapott nyugtával együtt. Az OMRON fenntartja magának a jogot a garancia szolgáltatás megtagadására, ha a megadott adatok nem egyértelműek.

Opcionális orvosi alkatrészek

(az EK 93/42/EGK számú orvosi eszközökre vonatkozó irányelve alapján)

A termék adatai	Modell
Inhalátor tartozék készlet (Tartozékok: Inhalátorkészlet, Adapter, Szájcstora, Orrcstora, Felnőtt maszk (PVC), Gyermekek maszk (PVC), Levegőcső, Levegőszűrő)	NEB-ASKIT-11

További opcionális/cserealkatrészek

A termék adatai	Modell
Levegőszűrő szett (tartozékok: 3 darab)	3AC408

Fontos információk az elektromágneses kompatibilitást (EMC) illetően
Ez a 3A HEALTH CARE S.r.l. által gyártott NE-C102-E típusú készülék megfelel az Elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló EN60601-1-2:2015 szabványnak. Ezzel az EMC szabvánnyal kapcsolatos további dokumentációk az OMRON HEALTHCARE EUROPE használati útmutatóban található címén vagy a www.omron-healthcare.com webhelyen érhető el. Az NE-C102-E készülékre vonatkozó EMC információkat ezen a weboldalon találja.

 **ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS (2012/19/EU-WEEE irányelv)**
Ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, a feleslegessé vált készüléket vagy alkatrészeit az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőpontokon kell leadni. További információ az önkormányzatoknál, az önkormányzatok hulladéktalmentesítéssel foglalkozó szervezeteinél, vagy a terméket árusító viszonteladóknaál érhető el.

	3A HEALTH CARE S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS) Olaszország
Márkaképviselő	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com
Leányvállalatok	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NEMETORSZÁG www.omron-healthcare.com OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIAORSZÁG www.omron-healthcare.com

Származási ország: Olaszország