

AngelSounds JPD-100S Mini



Představení produktu


AngelSounds JPD-100S Mini je lehký a přenosný detektor pro poslech srdečních ozev plodu dítěte.

Pozn. Pro správnou funkčnost musí mít plod alespoň 12-14 týdnů, ideálně 16 týdnů. Užívání přístroje konzultujte s lékařem.

Obsah balení

AngelSounds JPD-100S Mini, baterie, sluchátka, manuál.

Základy používání

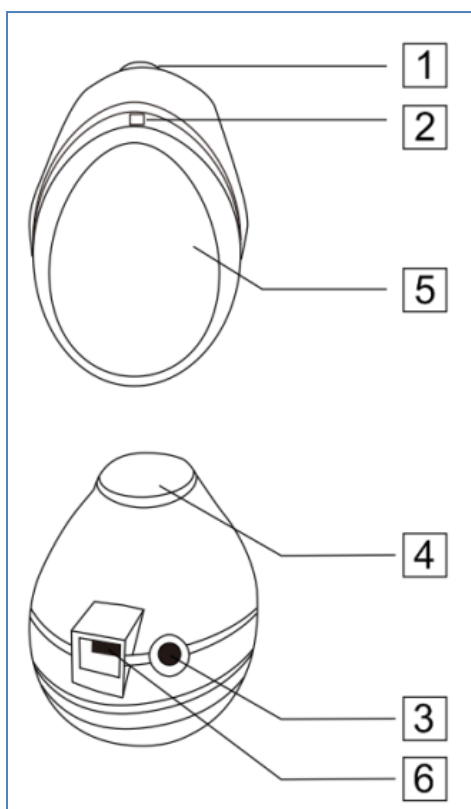


1. Zapnutí / vypnutí, úprava hlasitosti
2. Indikátor zapnutí
3. Konektor pro připojení sluchátek
4. Přenos signálu
5. Kryt baterie
6. Konektor pro audio signál

Zařízení zapnete otočením kolečka (1), zapnutí je indikováno rozsvícením diody. Postupným otáčením kolečka se přidává hlasitost, otočením na opačnou stranu se zvuk postupně snižuje až po úplné vypnutí zařízení.

Zařízení nabízí dva konektory. Konektor pro připojení sluchátek a konektor pro audio signál. Ten můžete využít po připojení nahrávacího kabelu (není součástí

balení) k zaznamenání zvuku srdečních ozev plodu. Pokud nepotřebujete zvuk nahrávat, stačí pro poslech připojit dodávaná sluchátka.


Baterie

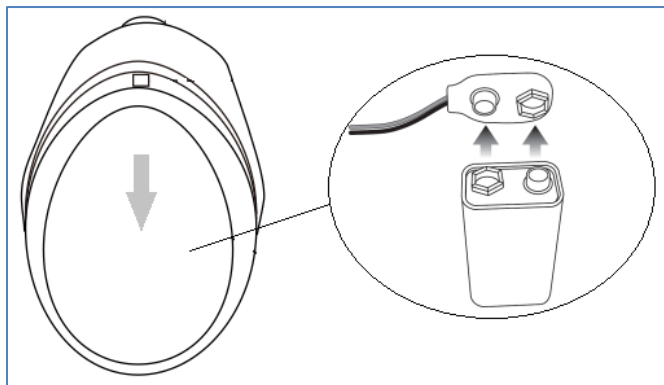

Baterie je součástí balení. Je umístěna přímo v zařízení, ale není připojená. Před prvním použitím je nutné baterii připojit podle následujícího obrázku.

Sejměte kryt (5) a baterii připojte.

Postup nalezení srdce plodu

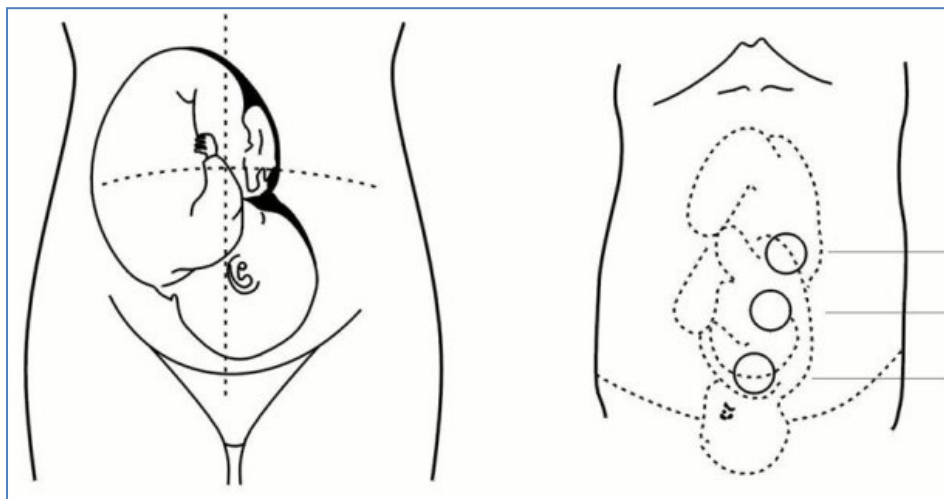

Naneste na místo pro přenos signálu trochu gelu (není součástí balení) a umístěte zařízení na břicho. Pomalu s ním pohybujte a snažte se nalézt srdce plodu. Po nalezení zvuku se sondou nadále pomalu pohybujte a hledejte místo, kde bude zvukový signál nejčistší.

Obvyklou polohu plodu vidíte na následujícím obrázku. Poloha plodu se ale může lišit v závislosti na stupni těhotenství a dalších podmínkách. Spočítejte počet ozev za minutu a získejte informaci o srdečním rytmu. Doporučujeme počítání zopakovat vícekrát.

Nahrávání zvuku

Při poslechu srdečních ozev můžete tyto zvuky také nahrávat. Stačí připojit nahrávací kabel (není součástí balení) do miniUSB konektoru, druhý konec zapojit do zařízení na kterém se bude zvuk nahrávat a spustit nahrávání.

Bezpečnostní upozornění

Vyhňte se používání zařízení v prostředí s potenciálním rizikem výbuchu, prostředí s vysokou či velmi nízkou teplotou nebo vlhkostí, v blízkosti otevřeného ohně. Doporučujeme zařízení nepoužívat ve venkovním prostředí.

Po ukončení sledování ze zařízení vždy setřete gel.

Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky poškození!

Pokud zařízení čistíte, mějte jej vždy vypnuté.

Product Introduction


The AngelSounds JPD-100S Mini is a lightweight and portable detector for listening to the heartbeats of a child's fetus.

Note: For proper functioning, the fetus must be at least 12-14 weeks old, ideally 16 weeks. Consult your doctor about the use of the device.

Package Contents

AngelSounds JPD-100S Mini, battery, headphones, manual.

Basics of use

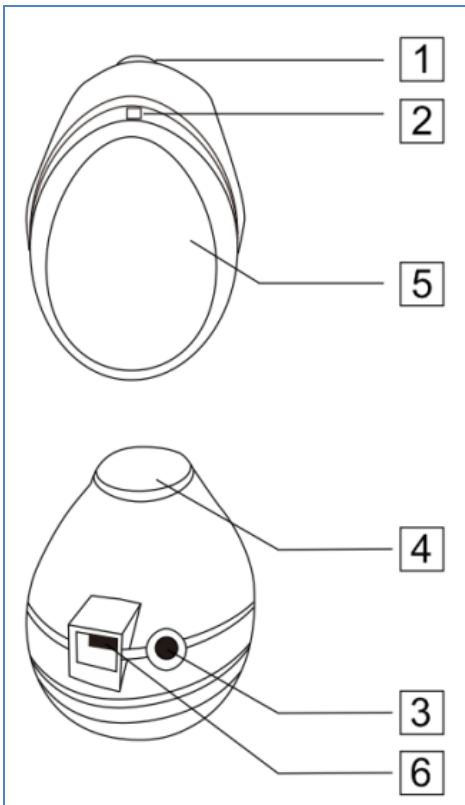

1. Power on/off, adjust volume

2. Power indicator

3. Headphone jack

4. Signal transmission

5. Battery cover


6. Audio signal jack

Turn the wheel (1) on the device, the LED lights up to turn on the device. Gradually turning the wheel adds volume, turning to the opposite side gradually reduces the sound until the device is completely turned off.

The device offers two connectors. Headphone jack and audio jack. You can use this by connecting the recording cable (not included) to record the sound of the fetal heartbeat. If you don't need to

record audio, just connect the supplied headphones to listen.

Battery

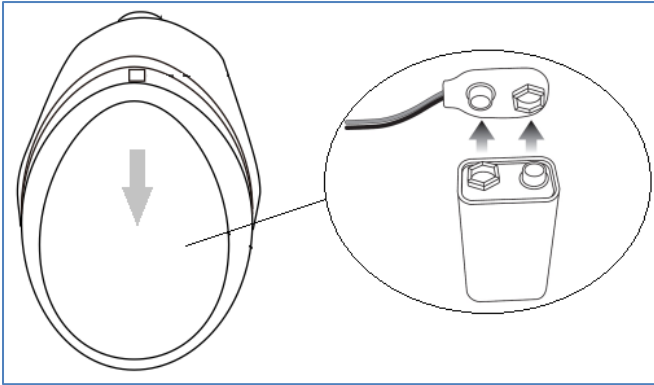


Battery included. It's located directly on the device, but not connected. Before first use, the battery must be connected as shown in the following picture.

Remove the cover (5) and connect the

battery.

How to find the heart of the fetus

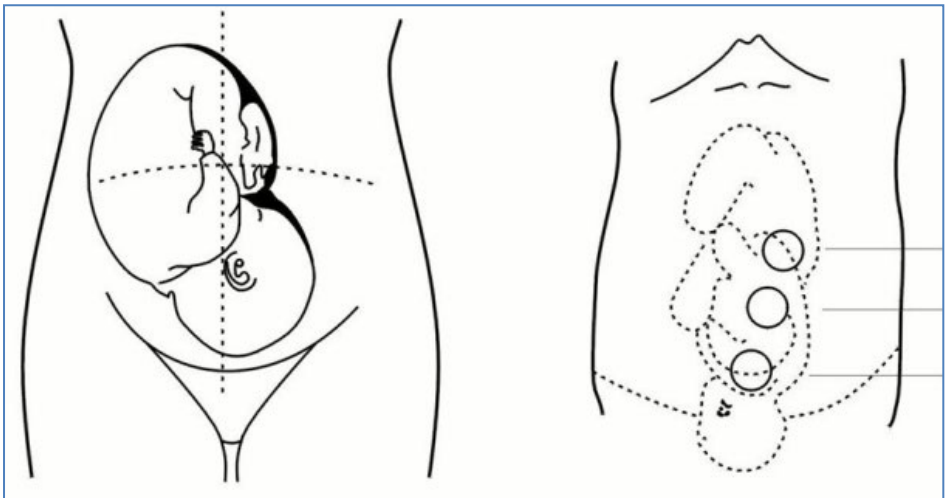

Apply a little gel to the signal transmission site (not included) and place the device on your stomach. Move it slowly, trying to find the heart of the fetus. After finding the sound, continue to move the probe slowly, looking for the place where the sound signal will be clearest.

The usual position of the fetus can be seen in the following picture.

However, the position of the fetus may vary depending on the stage of pregnancy and other conditions.

Count the number of sounds per minute and get information about your heart rhythm. We recommend that you repeat the counting more than once.

Audio recording

You can also record these sounds while listening to heart sounds. Just connect the recording cable (not included) to the miniUSB connector, plug the other end into the device on which the sound will be recorded and start recording.

Safety Warnings

Avoid using the device in an environment with a potential risk of explosion, high or very low temperature or humidity, near an open flame. We recommend that you do not use the device outdoors. Always wipe off the gel from the device after monitoring. Do not use the device if it shows signs of damage! If you clean your device, always keep it turned off

Predstavenie produktu


AngelSounds JPD-100S Mini je ľahký a prenosný detektor na počúvanie srdcového rytmu plodu dieťaťa.

Poznámka: Pre správne fungovanie musí byť plod minimálne 12-14 týždňov starý, ideálne 16 týždňov. O používaní prístroja sa poraďte so svojím lekárom.

Obsah balenia

AngelSounds JPD-100S Mini, batéria, slúchadlá, manuál.

Základy používania

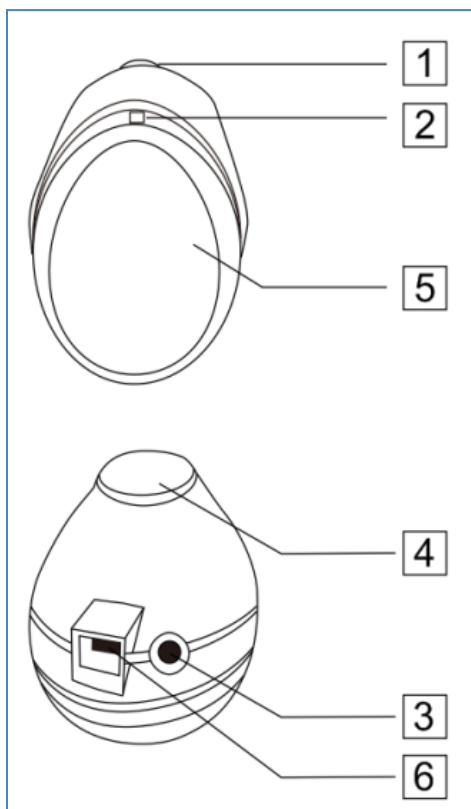


1. Zapnite / vypnite, nastavte hlasitosť
2. Indikátor napájania
3. Konektor pre slúchadlá
4. Prenos signálu
5. Kryt batérie
6. Konektor zvukového signálu

Otočte kolieskom (1) na zariadení, LED dióda sa rozsvieti, aby sa zariadenie zaplo. Postupné otáčanie kolieska dodáva hlasitosť, otáčanie na opačnú stranu postupne znižuje zvuk, až kým sa zariadenie úplne nevypne.

Zariadenie ponúka dva konektory. Konektor pre slúchadlá a zvukový konektor. Môžete to použiť pripojením nahrávacieho kábla (nie je súčasťou dodávky) na nahrávanie

zvuku srdcového tepu plodu. Ak nepotrebujete nahrávať zvuk, stačí pripojiť dodané slúchadlá a počúvať.


Batéria

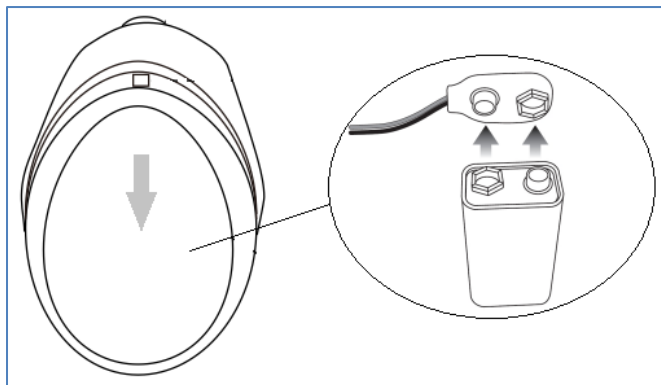

Batéria je súčasťou balenia. Nachádza sa priamo v zariadení, ale nie je pripojený. Pred prvým použitím musí byť batéria pripojená, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Odstráňte kryt (5) a pripojte batériu.

Ako nájsť srdce plodu

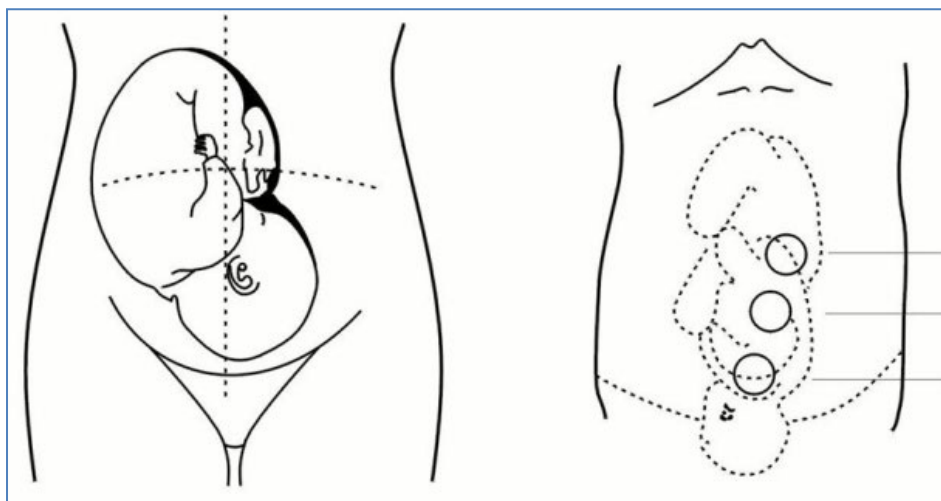

Naneste trochu gélu na miesto prenosu signálu (nie je súčasťou dodávky) a umiestnite zariadenie na žalúdok. Pomaly ho pohybujte a snažte sa nájsť srdce plodu. Po nájdení zvuku pokračujte v pomalom pohybe sondy a hľadajte miesto, kde bude zvukový signál najjasnejší.

Zvyčajná poloha plodu je viditeľná na nasledujúcom obrázku. Poloha plodu sa však môže líšiť v závislosti od štádia tehotenstva a iných podmienok.

Spočítajte počet zvukov za minútu a získajte informácie o svojom srdcovom rytme. Odporúčame, aby ste počítanie opakovali viackrát.

Nahrávanie zvuku

Tieto zvuky môžete nahrávať aj počas počúvania zvukov srdca. Stačí pripojiť nahrávací kábel (nie je súčasťou balenia) ku konektoru miniUSB, druhý koniec zapojiť do zariadenia, na ktorom sa bude zvuk nahrávať a začať nahrávať.

Bezpečnostné upozornenia

Nepoužívajte zariadenie v prostredí s potenciálnym rizikom výbuchu, vysokej alebo veľmi nízkej teploty alebo vlhkosti, v blízkosti otvoreného ohňa. Odporúčame, aby ste zariadenie nepoužívali vonku.

Po monitorovaní vždy utrite gél zo zariadenia.

Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje známky poškodenia!

Ak zariadenie čistíte, nechajte ho vždy vypnuté

Produkteinführung


Der AngelSounds JPD-100S Mini ist ein leichter und tragbarer Detektor zum Abhören des Herzschlags des kindlichen Fötus.

Hinweis: Damit der Fötus richtig funktioniert, muss er mindestens 12-14 Wochen alt sein, idealerweise 16 Wochen. Fragen Sie Ihren Arzt über die Verwendung des Geräts.

Packungsinhalt

AngelSounds JPD-100S Mini, Batterie, Kopfhörer, Bedienungsanleitung.

Grundlagen der Anwendung

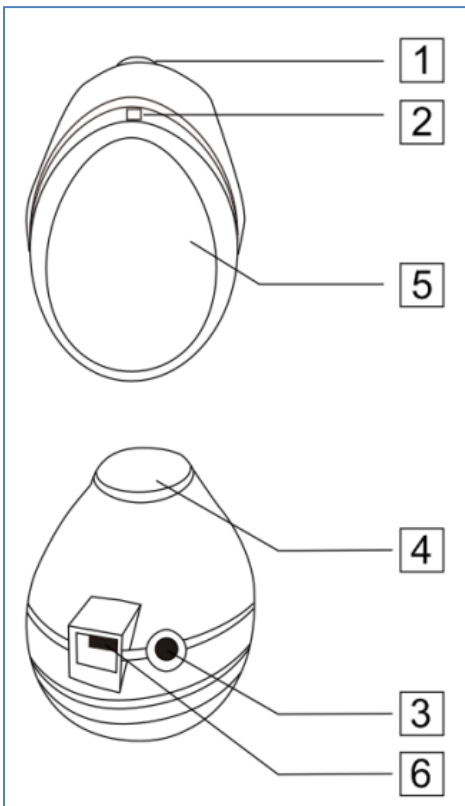


1. Ein-/Ausschalten, Lautstärke einstellen
2. Betriebsanzeige
3. Kopfhöreranschluss
4. Signalübertragung
5. Batterieabdeckung
6. Audiosignal-Buchse

Drehen Sie das Rad (1) am Gerät, die LED leuchtet auf, um das Gerät einzuschalten. Durch allmähliches Drehen des Rades wird die Lautstärke erhöht, durch Drehen auf die gegenüberliegende Seite wird der Ton allmählich reduziert, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.

Das Gerät bietet zwei Anschlüsse. Kopfhörerbuchse und Audiobuchse. Sie können dies verwenden, indem Sie das Aufnahmekabel (nicht im

Lieferumfang enthalten) anschließen, um den Klang des fetalen Herzschlags aufzunehmen. Wenn Sie keinen Ton aufnehmen müssen, schließen Sie einfach die mitgelieferten Kopfhörer an, um zuzuhören.

Batterie

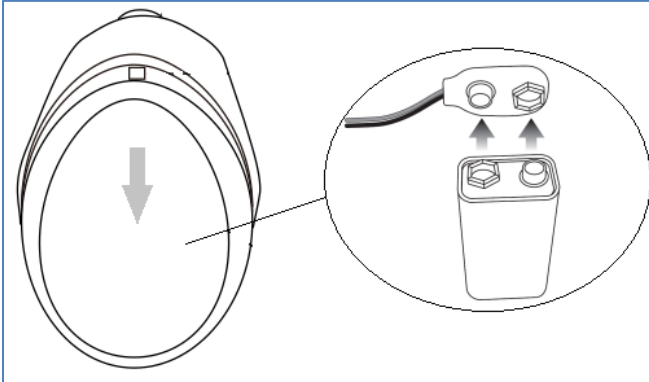


Batterie im Lieferumfang enthalten. Es befindet sich direkt auf dem Gerät, ist aber nicht verbunden. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku wie im folgenden Bild

gezeigt angeschlossen werden.

Entfernen Sie die Abdeckung (5) und schließen Sie die Batterie an.

Wie man das Herz des Fötus findet

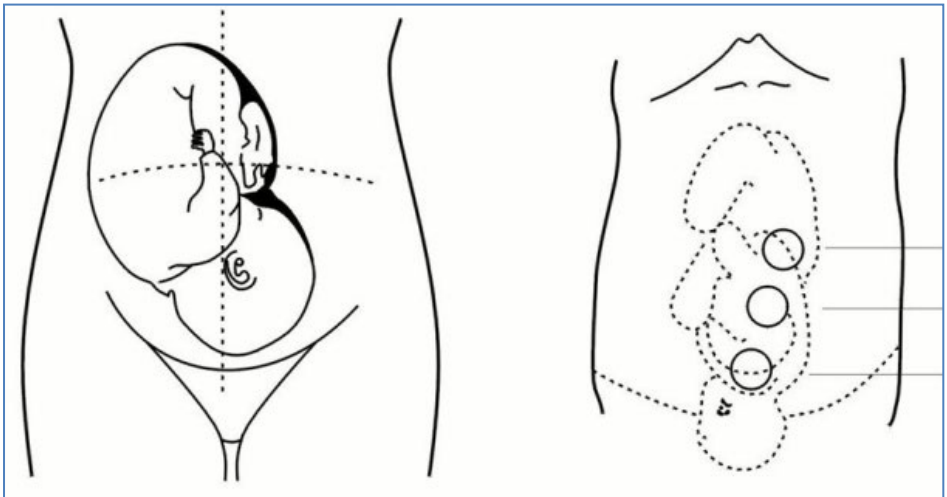

Tragen Sie ein wenig Gel auf die Signalübertragungsstelle auf (nicht im Lieferumfang enthalten) und legen Sie das Gerät auf Ihren Bauch. Bewegen Sie es langsam und versuchen Sie, das Herz des Fötus zu finden. Nachdem Sie den Ton gefunden haben, bewegen Sie die Sonde langsam

weiter und suchen Sie nach der Stelle, an der das Tonsignal am klarsten ist.

Die übliche Position des Fötus ist auf dem folgenden Bild zu sehen. Die Position des Fötus kann jedoch je nach Schwangerschaftsstadium und anderen Bedingungen variieren.

Zählen Sie die Anzahl der Geräusche pro Minute und erhalten Sie Informationen über Ihren Herzrhythmus. Wir empfehlen Ihnen, die Zählung mehr als einmal zu wiederholen.

Audio-Mitschnitt

Sie können diese Geräusche auch aufnehmen, während Sie Herztöne hören. Schließen Sie einfach das Aufnahmekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den miniUSB-Anschluss an, stecken Sie das andere Ende in das Gerät, auf dem der Ton aufgenommen werden soll, und starten Sie die Aufnahme.

Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie es, das Gerät in einer Umgebung mit potenzieller Explosionsgefahr, hoher oder sehr niedriger Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in der Nähe einer offenen Flamme zu verwenden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht im Freien zu verwenden.

Wischen Sie das Gel nach der Überwachung immer vom Gerät ab.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist!

Wenn Sie Ihr Gerät reinigen, lassen Sie es immer ausgeschaltet

Présentation du produit


L'AngelSounds JPD-100S Mini est un détecteur léger et portable pour écouter les battements de cœur du fœtus d'un enfant.

Remarque: Pour un bon fonctionnement, le fœtus doit être âgé d'au moins 12 à 14 semaines, idéalement 16 semaines. Consultez votre médecin au sujet de l'utilisation de l'appareil.

Contenu de l'emballage

AngelSounds JPD-100S Mini, batterie, écouteurs, manuel.

Bases de l'utilisation

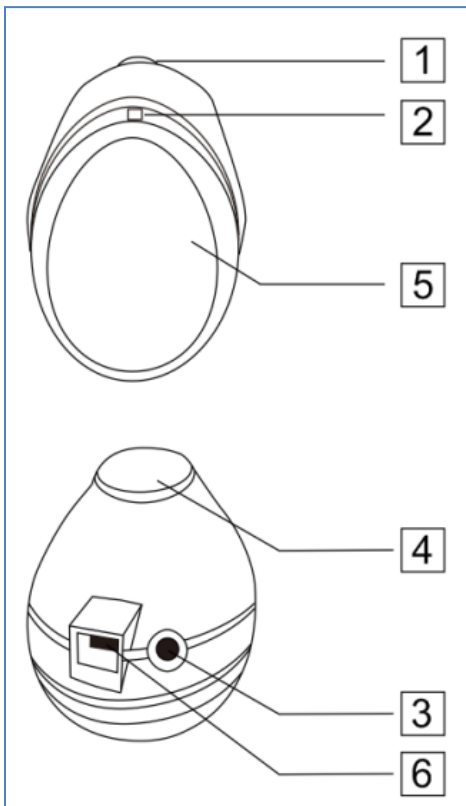


1. Allumer / éteindre, régler le volume
2. Indicateur de puissance
3. Prise casque
4. Transmission du signal
5. Couvercle de la batterie
6. Prise de signal audio

Tournez la roue (1) sur l'appareil, la LED s'allume pour allumer l'appareil. Tourner progressivement la roue ajoute du volume, tourner du côté opposé réduit progressivement le son jusqu'à ce que l'appareil soit complètement éteint.

L'appareil propose deux connecteurs. Prise casque et prise audio. Vous pouvez l'utiliser en connectant le câble

d'enregistrement (non inclus) pour enregistrer le son du rythme cardiaque foetal. Si vous n'avez pas besoin d'enregistrer de l'audio, connectez simplement les écouteurs fournis pour écouter.

Pile

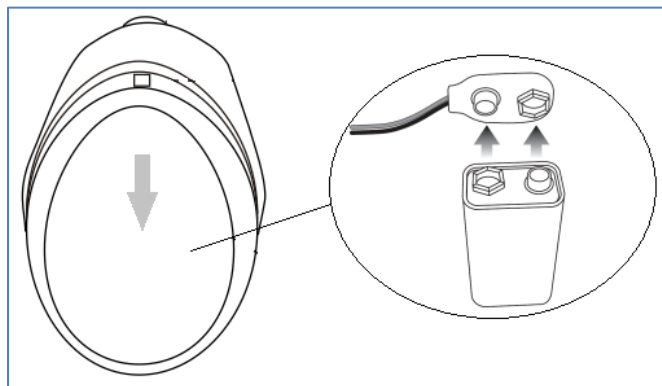


Batterie incluse. Il est situé directement sur l'appareil, mais pas connecté. Avant la première utilisation, la batterie doit être connectée comme indiqué dans l'image suivante.

Retirez le couvercle

(5) et connectez la batterie.

Comment trouver le cœur du fœtus

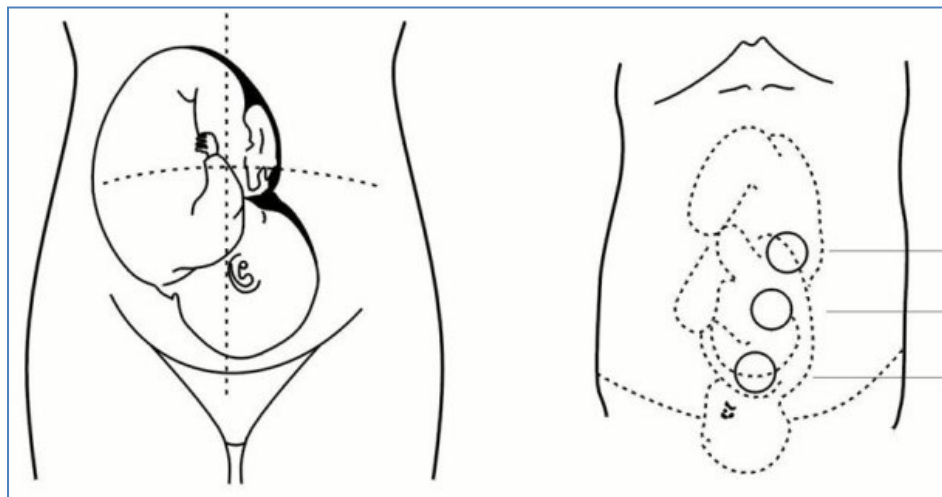

Appliquez un peu de gel sur le site de transmission du signal (non inclus) et placez l'appareil sur votre ventre. Déplacez-le lentement, en essayant de trouver le cœur du fœtus. Après avoir trouvé le son, continuez à déplacer la sonde lentement, à la recherche de l'endroit où le signal sonore sera le plus clair.

La position habituelle du fœtus peut être vue sur l'image suivante. Cependant, la position du fœtus peut varier en fonction du stade de la grossesse et d'autres conditions.

Comptez le nombre de sons par minute et obtenez des informations sur votre rythme cardiaque. Nous vous recommandons de répéter le comptage plusieurs fois.

Enregistrement audio

Vous pouvez également enregistrer ces sons tout en écoutant des sons de cœur. Il suffit de connecter le câble d'enregistrement (non inclus) au connecteur miniUSB, de brancher l'autre extrémité sur l'appareil sur lequel le son sera enregistré et de commencer l'enregistrement.

Avertissements de sécurité

Évitez d'utiliser l'appareil dans un environnement présentant un risque potentiel d'explosion, de température ou d'humidité élevée ou très basse, près d'une flamme nue. Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

Essuyez toujours le gel de l'appareil après la surveillance.

N'utilisez pas l'appareil s'il montre des signes de dommages!

Si vous nettoyez votre appareil, gardez-le toujours éteint

Introduzione al prodotto


AngelSounds JPD-100S Mini è un rilevatore leggero e portatile per ascoltare i battiti cardiaci del feto di un bambino.

Nota: per un corretto funzionamento, il feto deve avere almeno 12-14 settimane, idealmente 16 settimane. Consultare il proprio medico circa l'uso del dispositivo.

Contenuto della confezione

AngelSounds JPD-100S Mini, batteria, cuffie, manuale.

Nozioni di base sull'utilizzo

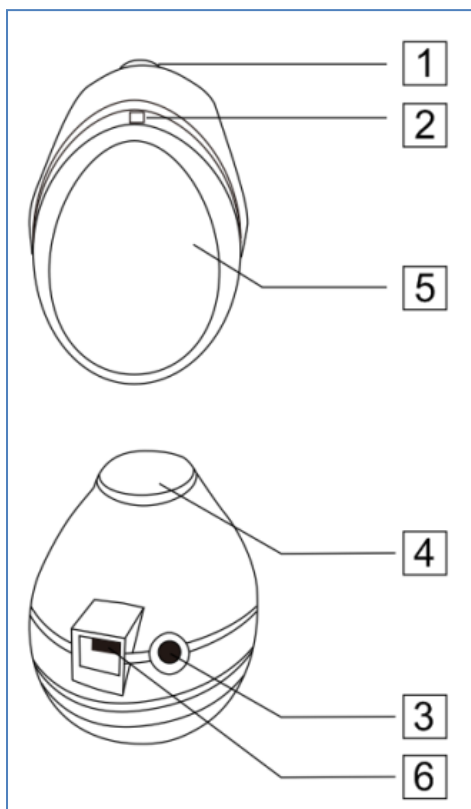


1. Accendi / spegni, regola il volume
2. Indicatore di alimentazione
3. Jack per cuffie
4. Trasmissione del segnale
5. Coperchio della batteria
6. Jack del segnale audio

Ruotare la rotellina (1) sul dispositivo, il LED si accende per accendere il dispositivo. Ruotando gradualmente la rotella si aggiunge volume, girando sul lato opposto si riduce gradualmente il suono fino a quando il dispositivo non è completamente spento.

Il dispositivo offre due connettori. Jack per cuffie e jack audio. È possibile utilizzarlo collegando il cavo di registrazione (non incluso) per registrare il suono del battito

cardiaco fetale. Se non è necessario registrare l'audio, è sufficiente collegare le cuffie in dotazione per ascoltare.

Batteria

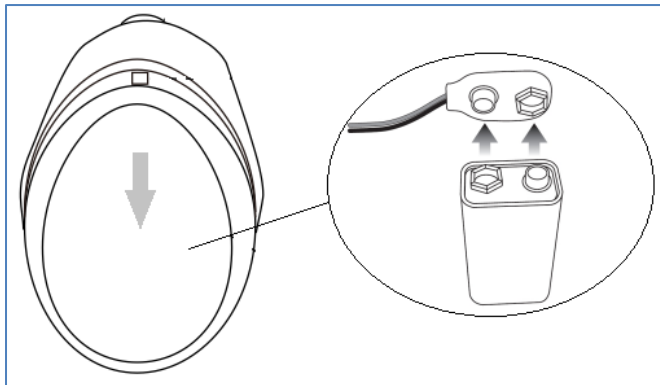


Batteria inclusa. Si trova direttamente sul dispositivo, ma non è connesso. Prima del primo utilizzo, la batteria deve essere collegata come mostrato nella figura seguente.

Rimuovere il

coperchio (5) e collegare la batteria.

Come trovare il cuore del feto

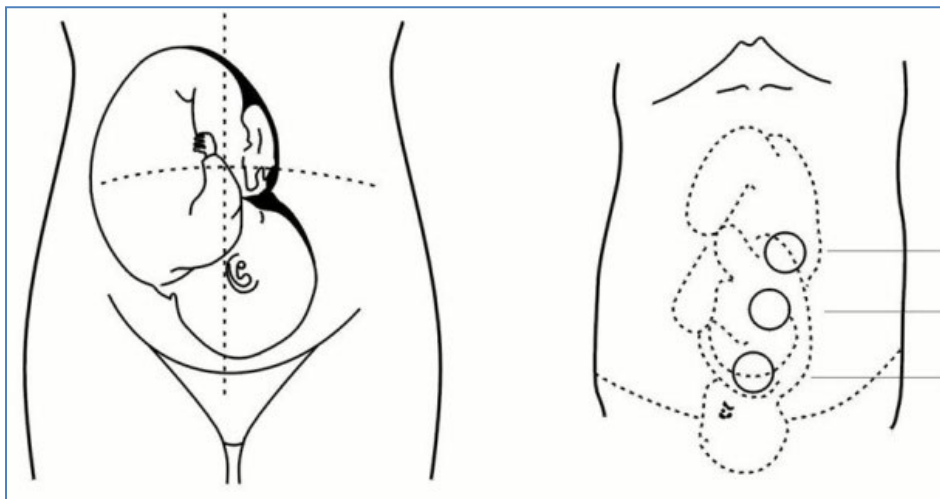

Applicare un po' di gel sul sito di trasmissione del segnale (non incluso) e posizionare il dispositivo sullo stomaco. Muovilo lentamente, cercando di trovare il cuore del feto. Dopo aver trovato il suono, continua a muovere lentamente la sonda, cercando il punto in cui il segnale sonoro sarà più chiaro.

La solita posizione del feto può essere vista nella seguente immagine. Tuttavia, la posizione del feto può variare a seconda della fase della gravidanza e di altre condizioni.

Conta il numero di suoni al minuto e ottieni informazioni sul tuo ritmo cardiaco. Si consiglia di ripetere il conteggio più di una volta.

Registrazione audio

Puoi anche registrare questi suoni mentre ascolti i suoni del cuore. Basta collegare il cavo di registrazione (non incluso) al connettore miniUSB, collegare l'altra estremità al dispositivo su cui verrà registrato il suono e avviare la registrazione.

Avvertenze di sicurezza

Evitare di utilizzare il dispositivo in un ambiente con un potenziale rischio di esplosione, temperatura o umidità alta o molto bassa, vicino a una fiamma libera. Si consiglia di non utilizzare il dispositivo all'aperto.

Rimuovere sempre il gel dal dispositivo dopo il monitoraggio.

Non utilizzare il dispositivo se mostra segni di danni!

Se pulisci il dispositivo, tienilo sempre spento

Product introductie


De AngelSounds JPD-100S Mini is een lichtgewicht en draagbare detector voor het luisteren naar de hartslagen van de foetus van een kind.

Opmerking: Voor een goede werking moet de foetus minstens 12-14 weken oud zijn, idealiter 16 weken. Raadpleeg uw arts over het gebruik van het apparaat.

Inhoud van de verpakking

AngelSounds JPD-100S Mini, batterij, hoofdtelefoon, handleiding.

Basisprincipes van gebruik

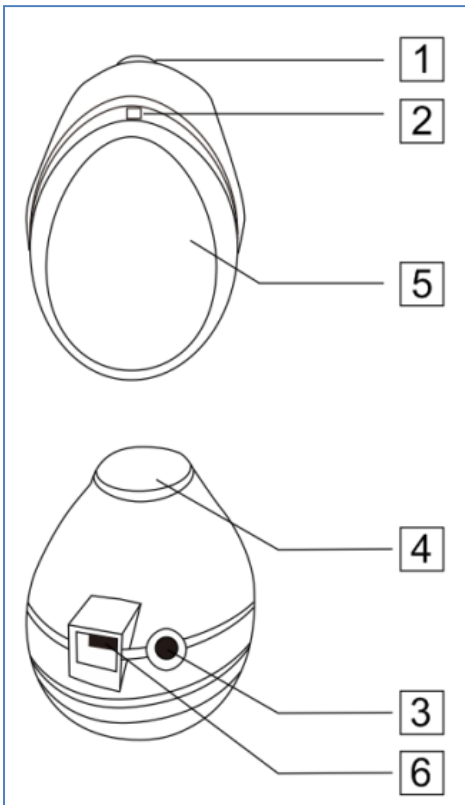


1. Schakel aan / uit, pas het volume aan
2. Stroomindicator
3. Hoofdtelefoonaansluiting
4. Signaaloverdracht
5. Batterijklepje
6. Audiosignalaansluiting

Draai aan het wiel (1) op het apparaat, de LED licht op om het apparaat in te schakelen. Geleidelijk aan het wiel draaien voegt volume toe, draaien naar de andere kant vermindert geleidelijk het geluid totdat het apparaat volledig is uitgeschakeld.

Het apparaat biedt twee connectoren. Hoofdtelefoonaansluiting en audio-aansluiting. U kunt dit gebruiken

door de opnamekabel (niet meegeleverd) aan te sluiten om het geluid van de foetale hartslag op te nemen. Als u geen audio hoeft op te nemen, sluit u gewoon de meegeleverde hoofdtelefoon aan om te luisteren.


Batterij

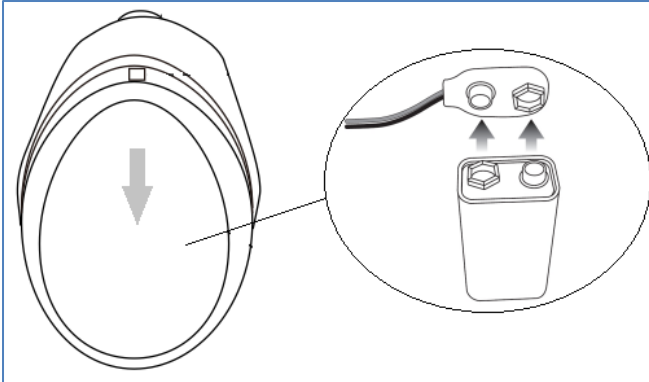

Batterij inbegrepen. Het bevindt zich direct op het apparaat, maar is niet verbonden. Voor het eerste gebruik moet de batterij worden aangesloten zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

Verwijder het klepje (5) en sluit de batterij aan.

Hoe het hart van de foetus te vinden

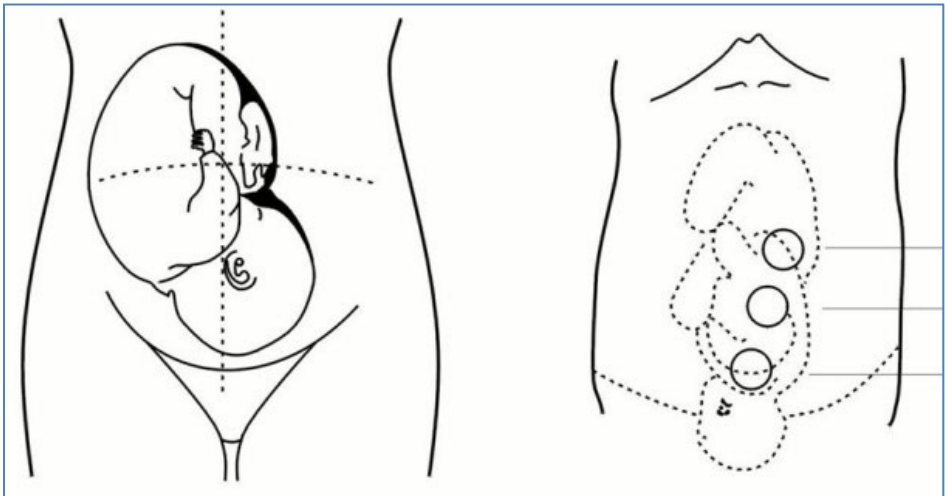

Breng een beetje gel aan op de signaaloverdrachtsplaats (niet inbegrepen) en plaats het apparaat op uw buik. Beweeg het langzaam en probeer het hart van de foetus te vinden. Nadat u het geluid hebt gevonden, blijft u de sonde langzaam bewegen, op zoek naar de plaats waar het geluidssignaal het duidelijkst zal zijn.

De gebruikelijke positie van de foetus is te zien in de volgende afbeelding. De positie van de foetus kan echter variëren, afhankelijk van het stadium van de zwangerschap en andere aandoeningen. Tel het aantal geluiden per minuut en krijg informatie over je hartritme. We raden u aan de telling meer dan eens te herhalen.

Geluidsopname

U kunt deze geluiden ook opnemen terwijl u naar hartgeluiden luistert. Sluit gewoon de opnamekabel (niet meegeleverd) aan op de miniUSB-connector, sluit het andere uiteinde aan op het apparaat waarop het geluid wordt opgenomen en begin met opnemen.

Veiligheidswaarschuwingen

Vermijd het gebruik van het apparaat in een omgeving met potentieel explosiegevaar, hoge of zeer lage temperatuur of vochtigheid, in de buurt van een open vuur. We raden u aan het apparaat niet buiten te gebruiken.

Veeg de gel altijd van het apparaat af na controle.

Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont!

Als u uw apparaat schoonmaakt, moet u het altijd uitgeschakeld houden.

Introducción del producto


El AngelSounds JPD-100S Mini es un detector ligero y portátil para escuchar los latidos del corazón del feto de un niño.

Nota: Para un funcionamiento adecuado, el feto debe tener al menos 12-14 semanas de edad, idealmente 16 semanas. Consulte a su médico sobre el uso del dispositivo.

Contenido del paquete

AngelSounds JPD-100S Mini, batería, auriculares, manual.

Conceptos básicos de uso

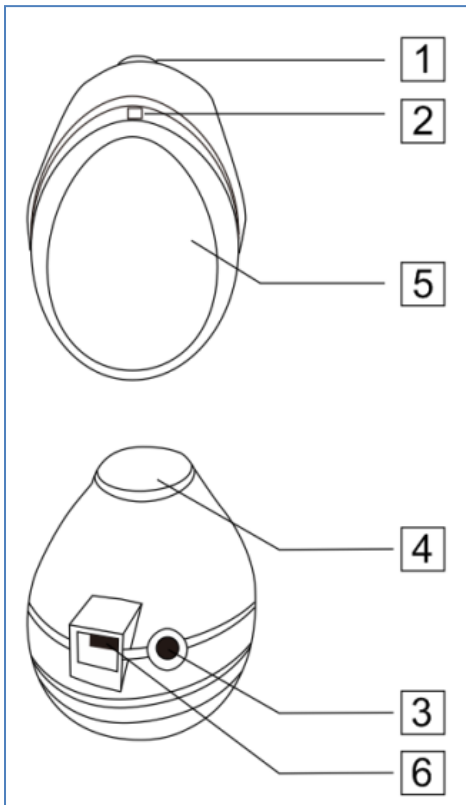


1. Encendido / apagado, ajuste el volumen
2. Indicador de encendido
3. Conector para auriculares
4. Transmisión de señal
5. Tapa de la batería
6. Conector de señal de audio

Gire la rueda (1) en el dispositivo, el LED se enciende para encender el dispositivo. Girar gradualmente la rueda agrega volumen, girar hacia el lado opuesto reduce gradualmente el sonido hasta que el dispositivo se apaga por completo.

El dispositivo ofrece dos conectores. Conector para auriculares y conector de audio. Puede usar esto conectando el cable de grabación (no incluido) para grabar el sonido

de los latidos cardíacos fetales. Si no necesita grabar audio, simplemente conecte los auriculares suministrados para escuchar.


Batería

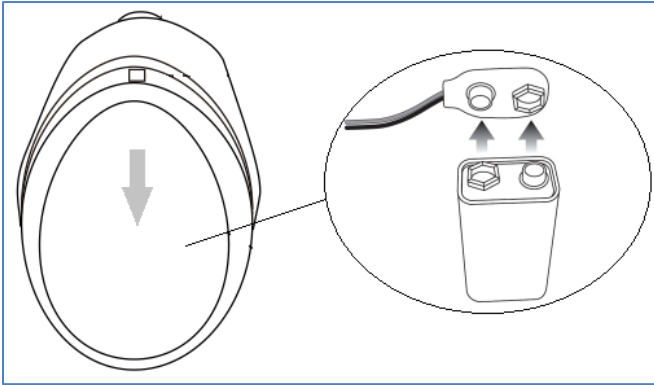

Batería incluida. Se encuentra directamente en el dispositivo, pero no está conectado. Antes del primer uso, la batería debe estar conectada como se muestra en la siguiente imagen.

Retire la tapa (5) y conecte la batería.

Cómo encontrar el corazón del feto

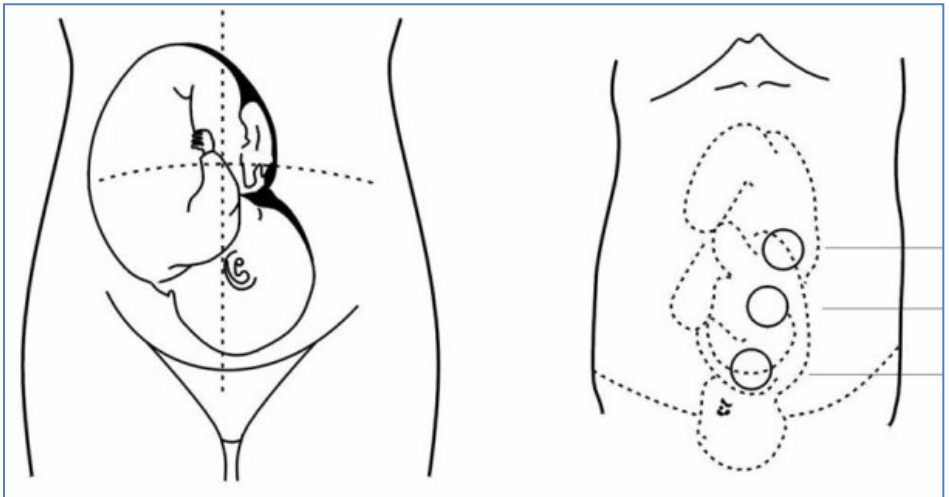

Aplique un poco de gel en el sitio de transmisión de la señal (no incluido) y coloque el dispositivo sobre su estómago. Muévelo lentamente, tratando de encontrar el corazón del feto. Después de encontrar el sonido, continúe moviendo la sonda lentamente, buscando el lugar donde la señal de sonido será más clara.

La posición habitual del feto se puede ver en la siguiente imagen. Sin embargo, la posición del feto puede variar dependiendo de la etapa del embarazo y otras condiciones.

Cuenta el número de sonidos por minuto y obtén información sobre tu ritmo cardíaco. Le recomendamos que repita el conteo más de una vez.

Grabación de audio

También puede grabar estos sonidos mientras escucha los sonidos del corazón. Simplemente conecte el cable de grabación (no incluido) al conector miniUSB, conecte el otro extremo al dispositivo en el que se grabará el sonido y comience a grabar.

Advertencias de seguridad

Evite usar el dispositivo en un ambiente con un riesgo potencial de explosión, temperatura o humedad alta o muy baja, cerca de una llama abierta. Le recomendamos que no utilice el dispositivo al aire libre.

Siempre limpie el gel del dispositivo después de monitorear.

¡No use el dispositivo si muestra signos de daño!

Si estás limpiando el dispositivo, manténlo siempre apagado.

Introdução ao produto


O AngelSounds JPD-100S Mini é um detetor leve e portátil para ouvir os batimentos cardíacos do feto de uma criança.

Nota: Para o bom funcionamento, o feto deve ter pelo menos 12-14 semanas de idade, idealmente 16 semanas. Consulte o seu médico sobre a utilização do dispositivo.

Conteúdos do Pacote

AngelSounds JPD-100S Mini, bateria, fones de ouvido, manual.

Noções básicas de uso

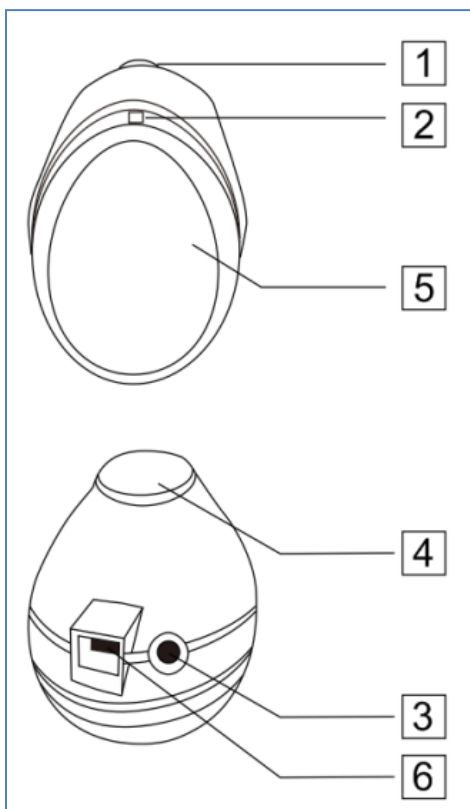


1. Ligar/desligar, ajustar o volume
2. Indicador de potência
3. Entrada para auscultadores
4. Transmissão de sinal
5. Tampa da bateria
6. Tomada de sinal de áudio

Rode a roda (1) no dispositivo, o LED acende-se para ligar o dispositivo. Girar gradualmente a roda adiciona volume, virar para o lado oposto reduz gradualmente o som até que o dispositivo esteja completamente desligado.

O dispositivo oferece dois conectores. Entrada para auscultadores e entrada para áudio. Você pode usar isso conectando o cabo de gravação (não incluído) para gravar o som do batimento

cardíaco fetal. Se não precisar de gravar áudio, basta ligar os auscultadores fornecidos para ouvir.


Bateria

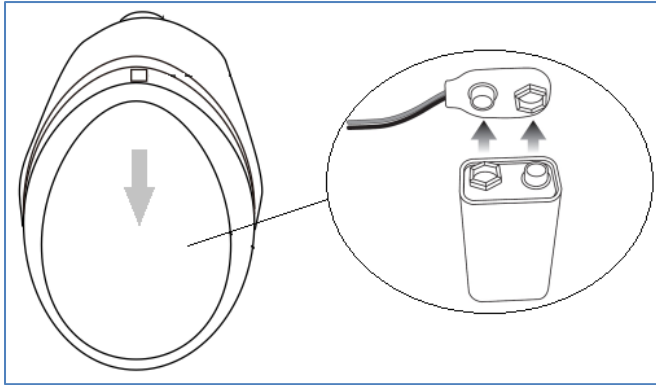

Bateria incluída. Ele está localizado diretamente no dispositivo, mas não conectado. Antes do primeiro uso, a bateria deve ser conectada como mostrado na imagem a seguir.

Retire a tampa (5) e ligue a bateria.

Como encontrar o coração do feto

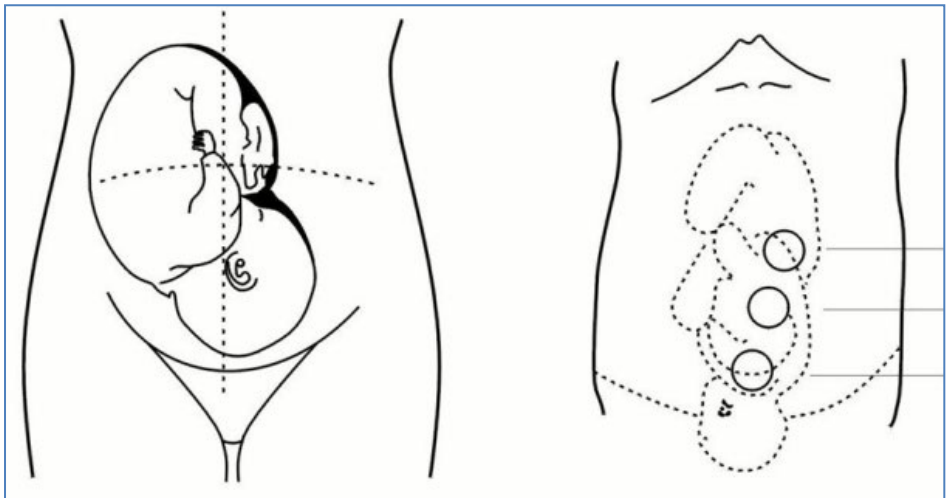

Aplique um pouco de gel no local de transmissão de sinal (não incluído) e coloque o dispositivo no estômago. Mova-o lentamente, tentando encontrar o coração do feto. Depois de encontrar o som, continue a mover a sonda lentamente, procurando o local onde o sinal sonoro será mais claro.

A posição habitual do feto pode ser vista na imagem a seguir. No entanto, a posição do feto pode variar dependendo do estágio da gravidez e outras condições.

Conte o número de sons por minuto e obtenha informações sobre o seu ritmo cardíaco. Recomendamos que repita a contagem mais do que uma vez.

Gravação de áudio

Você também pode gravar esses sons enquanto ouve sons cardíacos. Basta conectar o cabo de gravação (não incluído) ao conector miniUSB, conectar a outra extremidade ao dispositivo no qual o som será gravado e iniciar a gravação.

Avisos de segurança

Evite utilizar o dispositivo num ambiente com risco potencial de explosão, temperatura ou humidade elevada ou muito baixa, perto de chama aberta. Recomendamos que não utilize o dispositivo no exterior.

Limpe sempre o gel do dispositivo após a monitorização.

Não utilize o dispositivo se este mostrar sinais de danos!

Se estiver a limpar o dispositivo, mantenha-o sempre desligado.

Termék bemutatása


Az AngelSounds JPD-100S Mini egy könnyű és hordozható érzékelő a gyermek magzatának szívverésének meghallgatására.

Megjegyzés: A megfelelő működéshez a magzatnak legalább 12-14 hetesnek, ideális esetben 16 hetesnek kell lennie. Forduljon orvosához a készülék használatáról.

Csomag tartalma

AngelSounds JPD-100S Mini, akkumulátor, fejhallgató, kézikönyv.

A használat alapjai

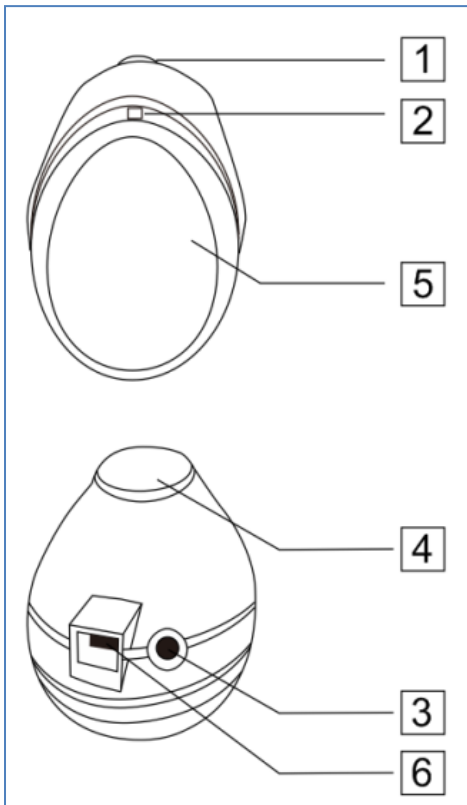


1. Be- és kikapcsolás, hangerő beállítása
2. Teljesítményjelző
3. Fejhallgató-csatlakozó
4. Jelátvitel
5. Az akkumulátor fedele
6. Audio jelcsatlakozó

Forgassa el a kereket (1) a készüléken, a LED világít a készülék bekapcsolásához. A kerék fokozatos elforgatása növeli a hangerőt, az ellenkező oldalra fordulás fokozatosan csökkenti a hangot, amíg a készülék teljesen ki nem kapcsol.

A készülék két csatlakozót kínál. Fejhallgató-csatlakozó és audiocsatlakozó. Ezt a felvevőkábel csatlakoztatásával (nem tartozék)

használhatja a magzati szívverés hangjának rögzítéséhez. Ha nem kell hangot rögzítenie, csak csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót a hallgatáshoz.

Akkumulátor

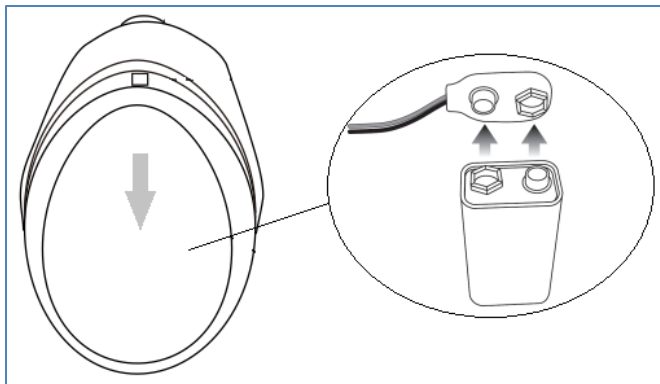


Akkumulátor mellékelve. Közvetlenül az eszközön található, de nincs csatlakoztatva. Az első használat előtt az akkumulátort az alábbi képen látható módon kell

csatlakoztatni.

Távolítsa el a fedelet (5), és csatlakoztassa az akkumulátort.

Hogyan találjuk meg a magzat szívét?

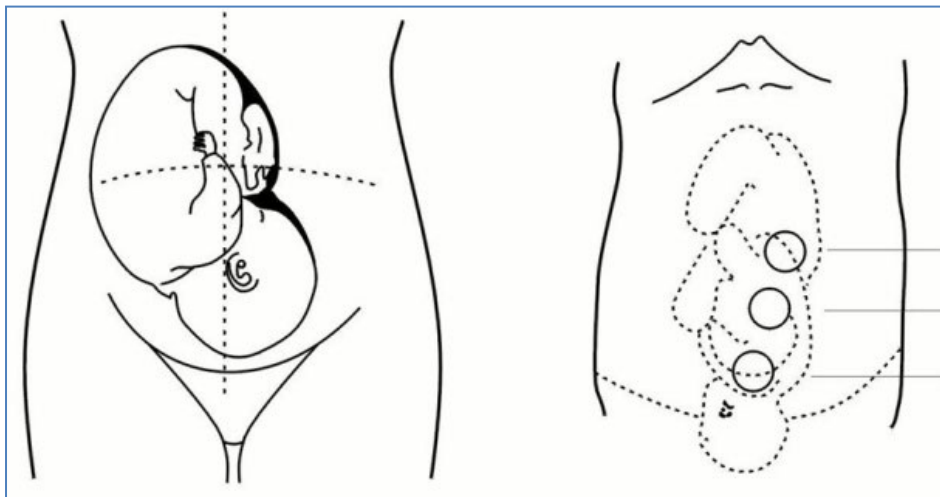

Vigyen fel egy kevés gélt a jelátviteli helyre (nem tartozék), és helyezze a készüléket a hasára. Mozgassa lassan, próbálja megtalálni a magzat szívét. Miután megtalálta a hangot, lassan mozgassa tovább a szondát, és keresse meg azt a helyet, ahol a hangjel a legtisztább lesz.

A magzat szokásos helyzete a következő képen látható. A magzat helyzete azonban a terhesség stádiumától és más körülményektől függően változhat.

Számolja meg a percenkénti hangok számát, és szerezzen információt a szívritmusáról. Javasoljuk, hogy többször ismétlje meg a számlálást.

Hangfelvétel

Ezeket a hangokat szívhangok hallgatása közben is rögzítheti. Csak csatlakoztassa a felvevőkábelt (nem tartozék) a miniUSB csatlakozóhoz, dugja be a másik végét abba a készülékbe, amelyen a hangot rögzíti, és indítsa el a felvételt.

Biztonsági figyelmeztetések

Ne használja a készüléket robbanásveszélynek kitett környezetben, magas vagy nagyon alacsony hőmérsékleten vagy páratartalom mellett, nyílt láng közelében. Javasoljuk, hogy ne használja a készüléket a szabadban.

Megfigyelés után mindig törölje le a gélt a készülékről.

Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja!

Ha tisztítja a készüléket, mindig tartsa kikapcsolva.

Wprowadzenie produktu


AngelSounds JPD-100S Mini to lekki i przenośny detektor do słuchania bicia serca płodu dziecka.

Uwaga: Dla prawidłowego funkcjonowania płód musi mieć co najmniej 12-14 tygodni, najlepiej 16 tygodni. Skonsultuj się z lekarzem na temat korzystania z urządzenia.

Zawartość opakowania

AngelSounds JPD-100S Mini, bateria, słuchawki, instrukcja.

Podstawy użytkowania

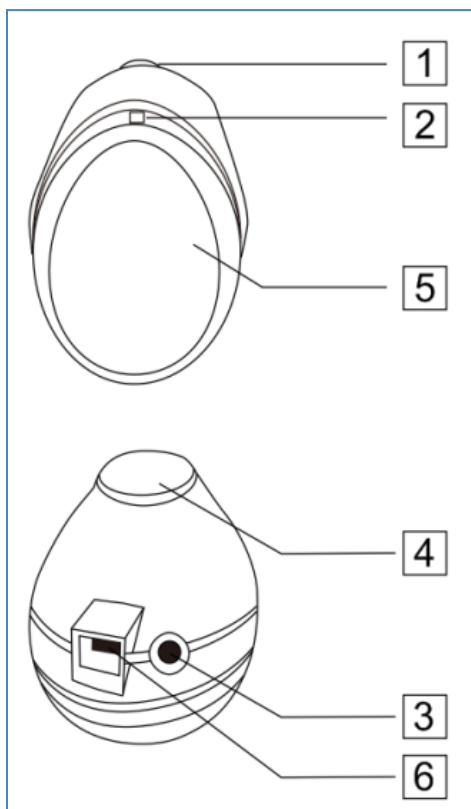


1. Włączanie / wyłączenie, regulacja głośności
2. Wskaźnik zasilania
3. Gniazdo słuchawkowe
4. Transmisja sygnału
5. Pokrywa baterii
6. Gniazdo sygnału audio

Obróć kółko (1) na urządzeniu, dioda LED zaświeci się, aby włączyć urządzenie. Stopniowe obracanie koła zwiększa głośność, obracanie w przeciwną stronę stopniowo zmniejsza dźwięk, aż urządzenie zostanie całkowicie wyłączone.

Urządzenie oferuje dwa złącza. Gniazdo słuchawkowe i gniazdo audio. Możesz tego użyć, podłączając nagrywający (brak w zestawie), aby nagrać dźwięk bicia

serca płodu. Jeśli nie musisz nagrywać dźwięku, po prostu podłącz dostarczone słuchawki, aby słuchać.


Bateria

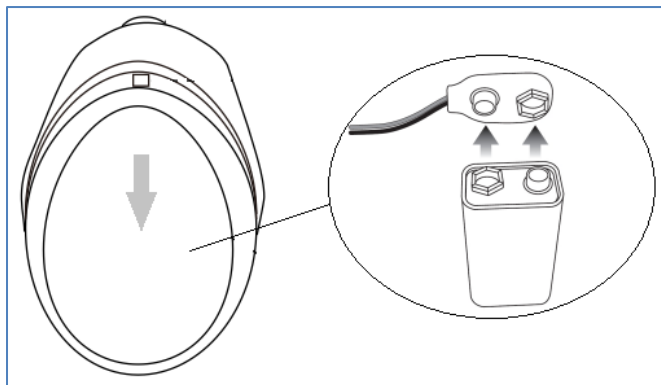

Bateria w zestawie. Znajduje się bezpośrednio na urządzeniu, ale nie jest podłączony. Przed pierwszym użyciem akumulator musi być podłączony, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Zdejmij pokrywę (5) i podłącz baterię.

Jak znaleźć serce płodu

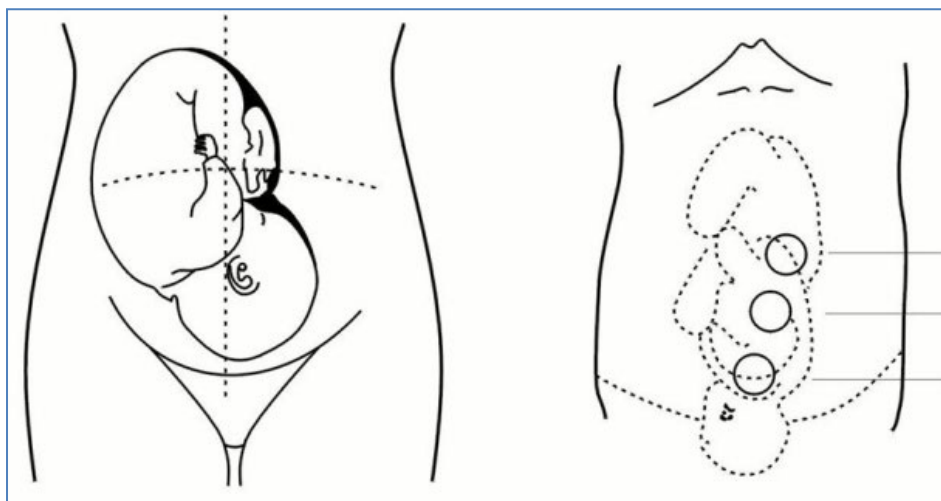

Nałóż trochę żelu na miejsce transmisji sygnału (brak w zestawie) i umieść urządzenie na brzuchu. Poruszaj się powoli, próbując znaleźć serce płodu. Po znalezieniu dźwięku kontynuuj powolne przesuwanie sondy, szukając miejsca, w którym sygnał dźwiękowy będzie najwyraźniejszy.

Zwykłą pozycję płodu można zobaczyć na poniższym obrazku. Jednak pozycja płodu może się różnić w zależności od stadium ciąży i innych warunków.

Policz liczbę dźwięków na minutę i uzyskaj informacje o rytmie serca. Zalecamy powtórzenie liczenia więcej niż jeden raz.

Nagrywanie dźwięku

Możesz także nagrywać te dźwięki podczas słuchania dźwięków serca. Wystarczy podłączyć do nagrywania (brak w zestawie) do złącza miniUSB, podłączyć drugi koniec do urządzenia, na którym dźwięk będzie nagrywany i rozpocząć nagrywanie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Unikaj używania urządzenia w środowisku o potencjalnym ryzyku wybuchu, wysokiej lub bardzo niskiej temperatury lub wilgotności, w pobliżu otwartego ognia. Zalecamy, aby nie używać urządzenia na zewnątrz.

Zawsze zetrzyj żel z urządzenia po monitorowaniu.

Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia!

Jeśli czyścisz urządzenie, zawsze wyłączaj je.

Predstavitev izdelka


AngelSounds JPD-100S Mini je lahek in prenosen detektor za poslušanje srčnega utripa otroškega zarodka.

Opomba: Za pravilno delovanje mora biti plod star vsaj 12-14 tednov, idealno 16 tednov. O uporabi pripomočka se posvetujte z zdravnikom.

Vsebina paketa

AngelSounds JPD-100S Mini, baterija, slušalke, ročno.

Osnove uporabe

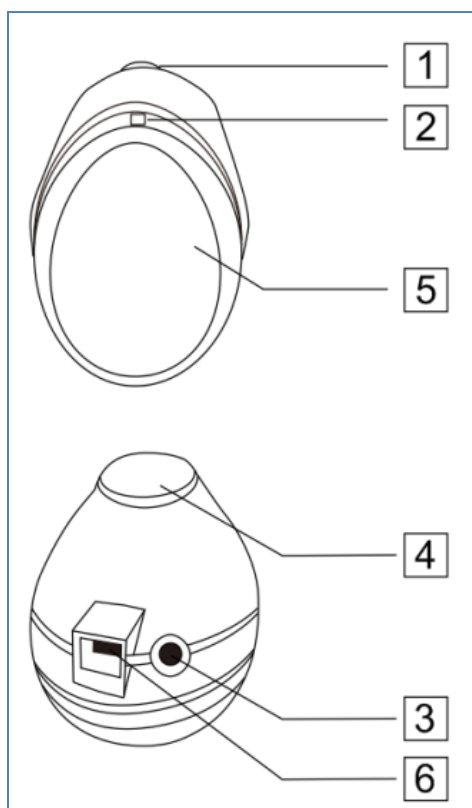


1. Vključite / izklopite, prilagodite glasnost
2. Indikator moči
3. Vtičnica za slušalke
4. Prenos signala
5. Pokrovček baterije
6. Vtičnica za zvočni signal

Zavrtite kolo (1) na napravi, lučka LED zasveti, da vklopite napravo. Postopno obračanje kolesa dodaja glasnost, obračanje na nasprotno stran postopoma zmanjšuje zvok, dokler naprava ni popolnoma izklopljena.

Naprava ponuja dva priključka. Vtičnica za slušalke in avdio vtičnica. To lahko uporabite tako, da priključite snemalni kabel (ni priložen) za snemanje zvoka srčnega

utripa ploda. Če vam ni treba snemati zvoka, za poslušanje priključite priložene slušalke.


Baterija

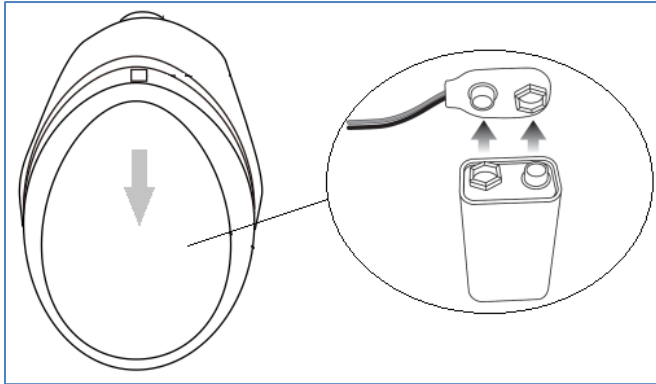

Baterija je priložena. Nahaja se neposredno v napravi, vendar ni povezana. Pred prvo uporabo mora biti baterija priključena, kot je prikazano na spodnji sliki. Odstranite pokrov (5)

in priključite baterijo.

Kako najti srce ploda

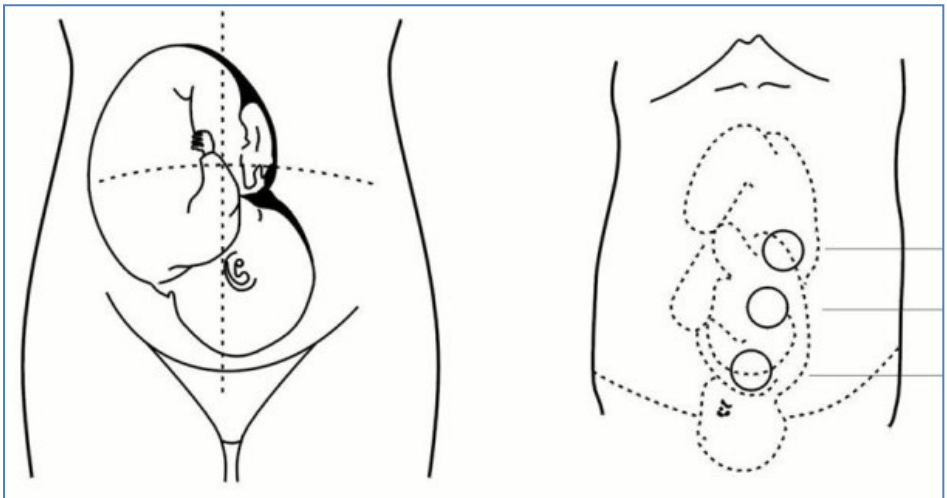

Na mesto prenosa signala nanesite majhen gel (ni priložen) in napravo položite na želodec. Premaknite ga počasi in poskušajte najti srce ploda. Ko najdete zvok, nadaljujte s počasnim premikanjem sonde in poiščite mesto, kjer bo zvočni signal najjasnejši.

Običajni položaj ploda je viden na naslednji sliki. Vendar pa se položaj ploda lahko razlikuje glede na stopnjo nosečnosti in druga stanja.

Preštejte število zvokov na minuto in pridobite informacije o svojem srčnem ritmu. Priporočamo, da štetje ponovite večkrat.

Snemanje zvoka

Te zvoke lahko posnamete tudi med poslušanjem srčnih zvokov. Samo priključite snemalni kabel (ni priložen) na priključek miniUSB, drugi konec priključite na napravo, na kateri bo zvok posnet, in začnite snemati.

Varnostna opozorila

Naprave ne uporabljajte v okolju z možno nevarnostjo eksplozije, visoke ali zelo nizke temperature ali vlažnosti v bližini odprtega ognja.

Priporočamo, da naprave ne uporabljate na prostem.

Po spremljanju gel vedno obrišite z naprave.

Naprave ne uporabljajte, če kaže znake poškodb!

Če čistite napravo, naj bo vedno izklopljena.

Introducerea produsului


AngelSounds JPD-100S Mini este un detector ușor și portabil pentru ascultarea bătăilor inimii fătului unui copil.

Notă: Pentru buna funcționare, fătul trebuie să aibă cel puțin 12-14 săptămâni, ideal 16 săptămâni. Consultați-vă medicul despre utilizarea dispozitivului.

Conținutul pachetului

AngelSounds JPD-100S Mini, baterie, căști, manual.

Noțiuni de bază de utilizare

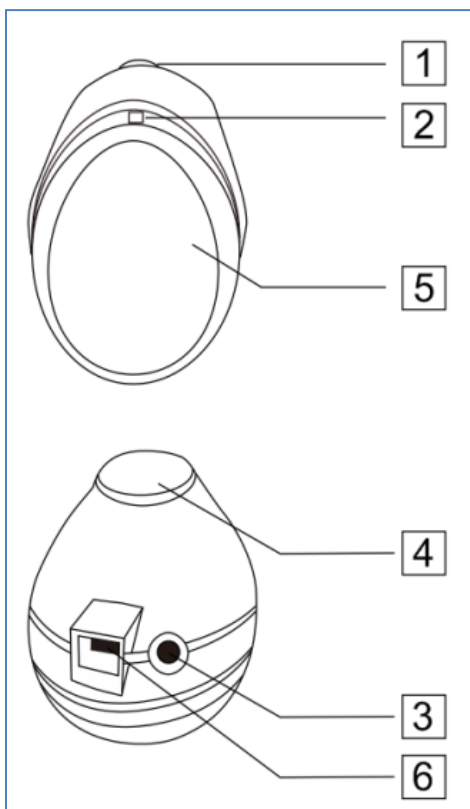


1. Porniți / opriți, reglați volumul
2. Indicator de putere
3. Mufă pentru căști
4. Transmiterea semnalului
5. Capacul bateriei
6. Mufă de semnal audio

Rotiți roțița (1) de pe dispozitiv, LED-ul se aprinde pentru a porni dispozitivul. Rotirea treptată a roții adaugă volum, întoarcerea spre partea opusă reduce treptat sunetul până când dispozitivul este complet oprit.

Dispozitivul oferă doi conectori. Mufă pentru căști și mufă audio. Puteți utiliza acest lucru conectând cablul de înregistrare (nu este inclus) pentru a înregistra sunetul bătăilor inimii fetale. Dacă nu

trebuie să înregistrați audio, trebuie doar să conectați căștile furnizate pentru a asculta.

Baterie

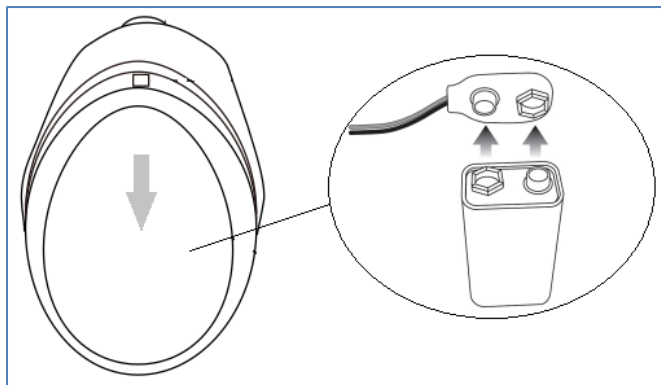


Baterie inclusă. Acesta se află direct pe dispozitiv, dar nu este conectat. Înainte de prima utilizare, bateria trebuie conectată așa cum se arată în imaginea următoare.

Scoateți capacul (5) și

conectați bateria.

Cum să găsești inima fătului

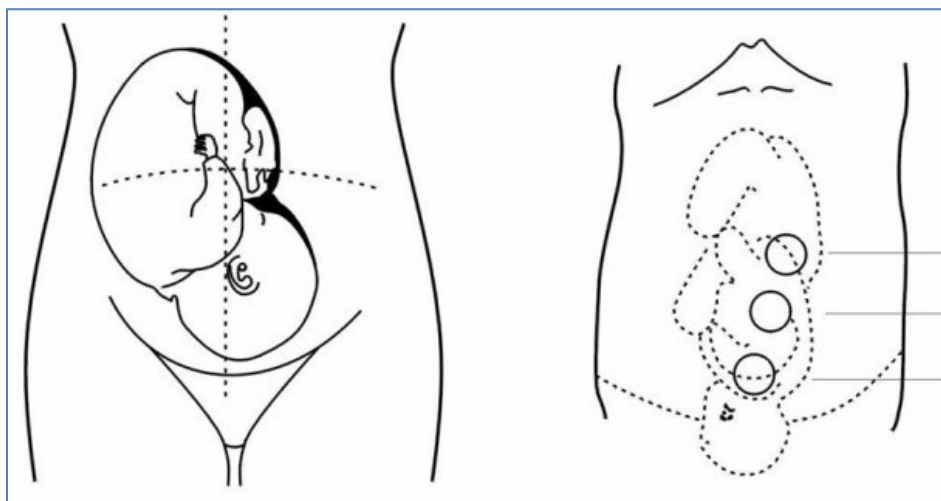

Aplicați puțin gel pe locul de transmisie a semnalului (nu este inclus) și așezați dispozitivul pe stomac. Mișcați-l încet, încercând să găsiți inima fătului. După găsirea sunetului, continuați să mișcați încet sonda, căutând locul în care semnalul sonor va fi cel mai clar.

Poziția obișnuită a fătului poate fi văzută în imaginea următoare. Cu toate acestea, poziția fătului poate varia în funcție de stadiul sarcinii și de alte condiții.

Numărați numărul de sunete pe minut și obțineți informații despre ritmul cardiac. Vă recomandăm să repetați numărătoarea de mai multe ori.

Înregistrare audio

De asemenea, puteți înregistra aceste sunete în timp ce ascultați sunetele inimii. Doar conectați cablul de înregistrare (nu este inclus) la conectorul miniUSB, conectați celălalt capăt la dispozitivul pe care va fi înregistrat sunetul și începeți înregistrarea.

Avertismente de siguranță

Evitați utilizarea dispozitivului într-un mediu cu risc potențial de explozie, temperatură sau umiditate ridicată sau foarte scăzută, în apropierea unei flăcări deschise. Vă recomandăm să nu utilizați dispozitivul în aer liber.

Ștergeți întotdeauna gelul de pe dispozitiv după monitorizare.

Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă semne de deteriorare!

Dacă vă curățați dispozitivul, mențineți-l întotdeauna oprit.

Въведение в продукта


AngelSounds JPD-100S Mini е лек и преносим детектор за слушане на сърдечния ритъм на плода на детето.

Забележка: За правилното функциониране плодът трябва да е на възраст най-малко 12-14 седмици, в идеалния случай 16 седмици. Консултирайте се с Вашия лекар относно използването на устройството.

Съдържание на пакета

AngelSounds JPD-100S Mini, батерия, слушалки, ръчно.

Основи на използването

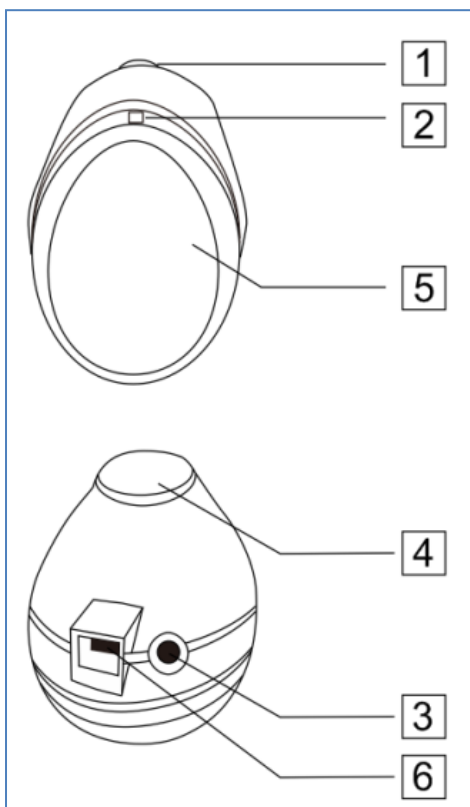

1. Включване / изключване, регулиране на силата на звука
2. Индикатор за захранване
3. Жак за слушалки
4. Предаване на сигнала
5. Капак на батерията
6. Аудио сигнал жак


Завъртете колелото (1) на устройството, светодиодът светва, за да включите устройството. Постепенното завъртане на колелото добавя сила на звука, завъртането на противоположната страна постепенно намалява звука, докато устройството не бъде напълно изключено.

Устройството предлага два конектора. Жак за слушалки и

аудио жак. Можете да използвате това, като свържете кабела за

запис (не е включен в комплекта), за да записвате звука на сърдечния ритъм на плода. Ако не е необходимо да записвате аудио, просто свържете предоставените слушалки, за да слушате.


Батерия

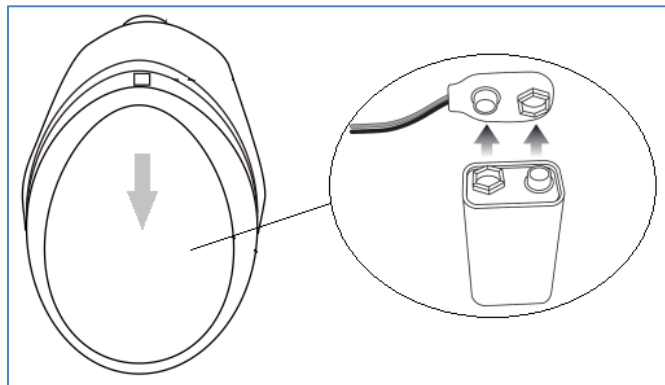

Включена батерия. Той се намира директно на устройството, но не е свързан. Преди първата употреба батерията трябва да бъде свързана, както е показано на следващата картина.

Свалете капака (5) и свържете батерията.

Как да намерим сърцето на плода

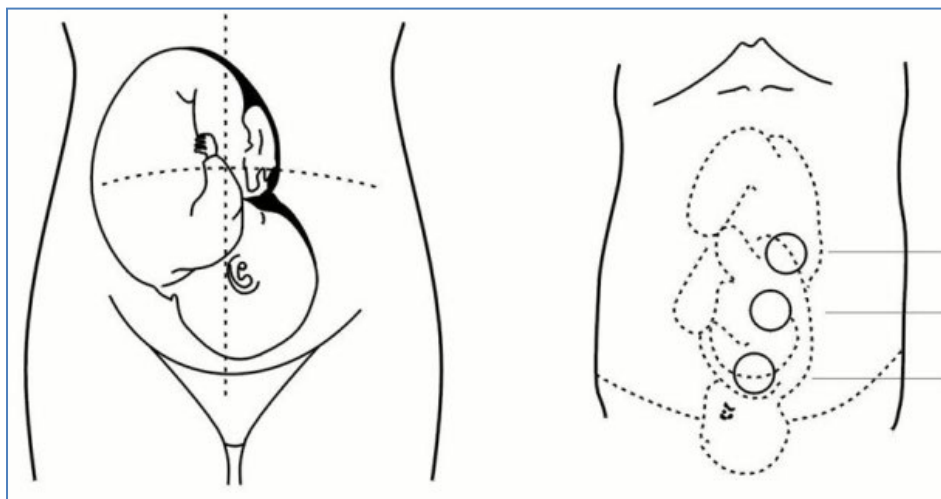

Нанесете малко гел на мястото за предаване на сигнала (не е включено) и поставете устройството върху стомаха си. Движете го бавно, опитвайки се да намерите сърцето на плода. След като

намерите звука, продължете да движите сондата бавно, търсейки мястото, където звуковият сигнал ще бъде най-ясен.

Обичайната позиция на плода може да се види на следващата картина. Въпреки това, позицията на плода може да варира в зависимост от етапа на бременността и други условия.

Пребройте броя на звуците в минута и получите информация за сърдечния си ритъм. Препоръчваме ви да повторите броенето повече от веднъж.

Аудиозапис

Можете също така да записвате тези звуци, докато слушате сърдечни звуци. Просто свържете кабела за запис (не е включен в комплекта) към miniUSB конектора, включете другия край в устройството, на което ще бъде записан звукът и започнете да записвате.

Предупреждения за безопасност

Избягвайте използването на устройството в среда с потенциален риск от експлозия, висока или много ниска температура или влажност, в близост до открит пламък. Препоръчваме ви да не използвате устройството на открито.

Винаги избърсвайте гела от устройството след наблюдение.

Не използвайте устройството, ако показва признаци на повреда!

Ако почиствате устройството си, винаги го дръжте изключено.

Введення продукту


AngelSounds JPD-100S Mini - легкий і портативний детектор для прослуховування серцебиття плоду дитини.

Примітка: Для правильного функціонування плоду має бути не менше 12-14 тижнів, в ідеалі 16 тижнів. Проконсультуйтеся з лікарем з приводу використання приладу.

Зміст упаковки

AngelSounds JPD-100S Mini, акумулятор, навушники, ручний.

ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ

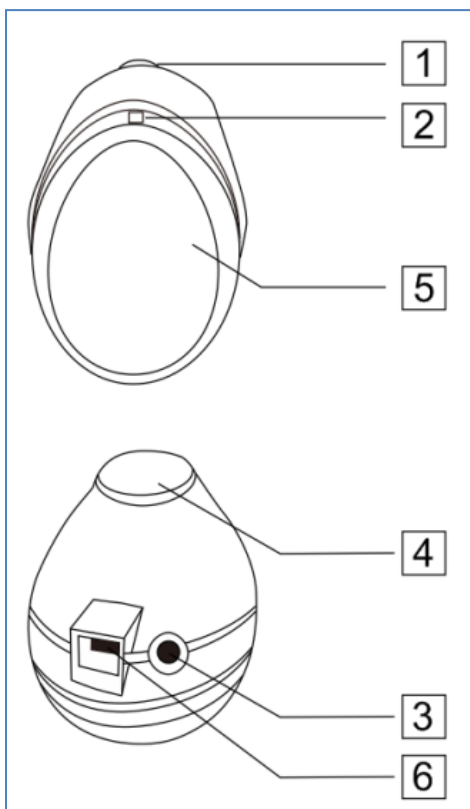


1. Увімкнення / вимкнення живлення, регулювання гучності
2. Індикатор потужності
3. Роз'єм для навушників
4. Передача сигналу
5. Кришка акумулятора
6. Роз'єм аудіосигналу

Поверніть колесо (1) на пристрій, щоб увімкнути пристрій, загориться світлодіод. Поступове поворот колеса додає гучності, поворот на протилежну сторону поступово знижує звук до повного вимкнення пристрою.

Пристрій пропонує два роз'єми. Роз'єм для навушників і аудіороз'єм. Ви можете використовувати це, підключивши записуючий кабель (не входить в

комплект) для запису звуку серцебиття плода. Якщо вам не потрібно записувати аудіо, просто підключіть навушники, що входять до комплекту, щоб прослухати.

Батарея

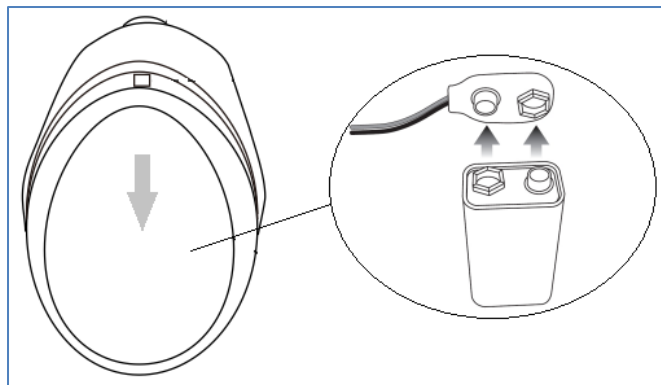


Батарея в комплекті. Він розташований безпосередньо на пристрої, але не підключений. Перед першим використанням акумулятор потрібно підключити, як

показано на наступному малюнку.

Зніміть кришку (5) і підключіть акумулятор.

Як знайти серце плода

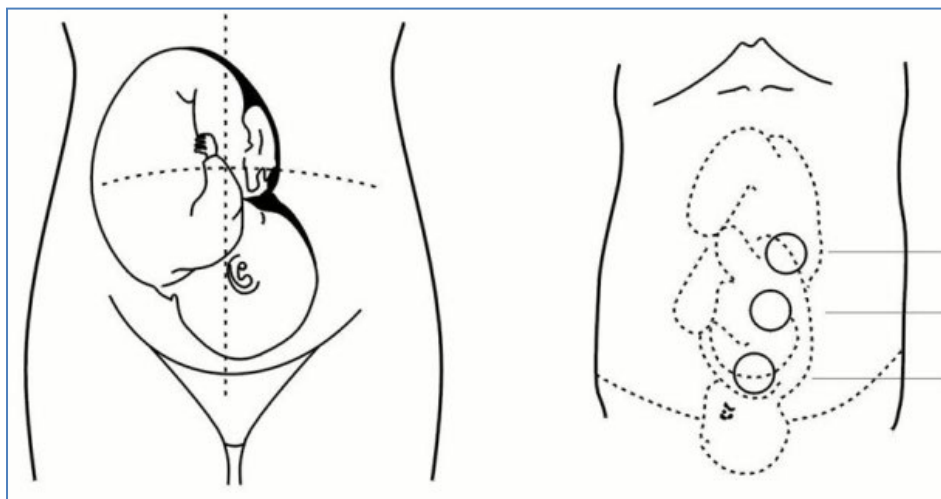

Нанесіть трохи гелю на місце передачі сигналу (не входить в комплект) і покладіть пристрій на живіт. Рухають його повільно, намагаючись знайти серце плода. Знайшовши звук, продовжуйте

повільно рухати зонд, шукаючи місце, де звуковий сигнал буде найбільш чітким.

Звичайне положення плода можна побачити на наступній картинці. Однак положення плода може змінюватися в залежності від стадії вагітності та інших станів.

Підрахуйте кількість звуків в хвилину і отримуйте інформацію про свій серцевий ритм. Рекомендовано повторити підрахунок кілька разів.

Аудіозапис

Ви також можете записувати ці звуки, слухаючи тони серця. Просто підключіть рекордний кабель (не входить в комплект) до роз'єму miniUSB, інший кінець підключіть в пристрій, на якому буде записуватися звук і почніть запис.

Попередження про безпеку

Уникайте використання пристрою в середовищі з потенційним ризиком вибуху, високою або дуже низькою температурою або вологістю, поблизу відкритого вогню. Рекомендуємо не використовувати прилад на відкритому повітрі.

Завжди витирайте гель з пристрою після моніторингу.

Не використовуйте пристрій, якщо на ньому з'явилися ознаки пошкодження!

Якщо ви чистите пристрій, завжди вимикайте його.

Produkt Introduktion


AngelSounds JPD-100S Mini er en let og bærbar detektor til at lytte til hjerteslag fra et barns foster.

Bemærk: For korrekt funktion skal fosteret være mindst 12-14 uger gammelt, ideelt set 16 uger. Kontakt din læge om brugen af enheden.

Pakkens indhold

AngelSounds JPD-100S Mini, batteri, hovedtelefoner, manuel.

Grundlæggende om brug

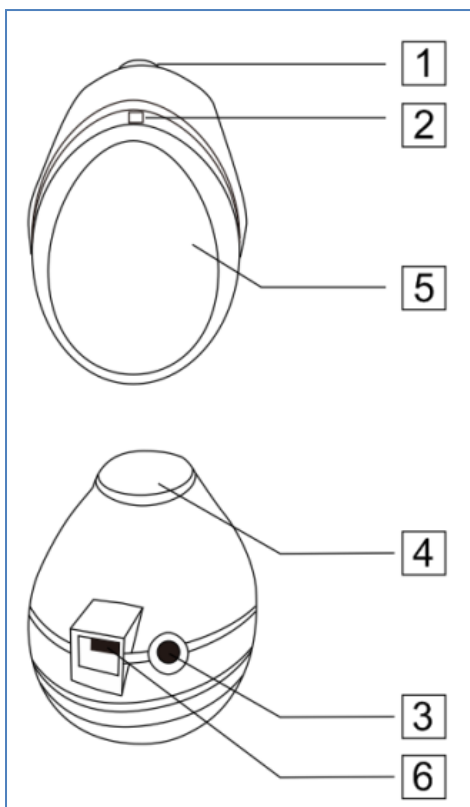

1. Tænd / sluk, juster lydstyrken

2. Strømindikator

3. Hovedtelefonstik

4. Signaloverførsel

5. Batteridæksel

6. Stik til lydsignal


Drej hjulet (1) på enheden, LED'en lyser for at tænde enheden. Gradvis drejning af hjulet tilføjer lydstyrke, drejning til den modsatte side reducerer lyden gradvist, indtil enheden er helt slukket.

Enheden tilbyder to stik.

Hovedtelefonstik og lydstik. Du kan bruge dette ved at tilslutte optagekablet (medfølger ikke) for at optage lyden af fostrets hjerteslag. Hvis du ikke har brug for at optage lyd, skal du bare tilslutte de

medfølgende hovedtelefoner for at lytte.


Batteri

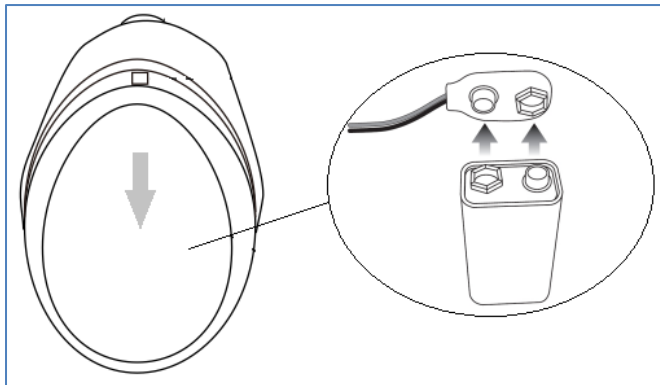

Batteri inkluderet. Den er placeret direkte på enheden, men ikke tilsluttet. Før første brug skal batteriet tilsluttes som vist på følgende billede.

Fjern dækslet (5), og tilslut batteriet.

Sådan finder du fostrets hjerte

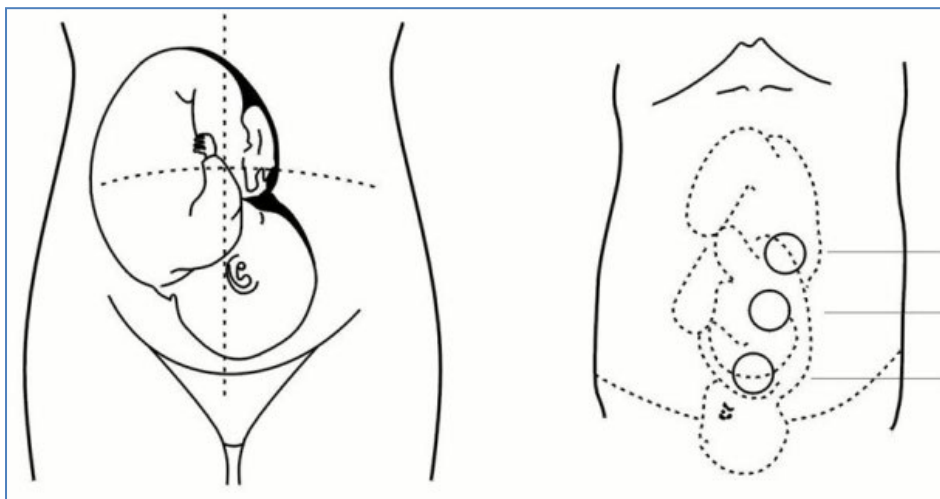

Påfør en lille gel på signaloverførselsstedet (medfølger ikke), og placer enheden på din mave. Flyt det langsomt og prøv at finde fostrets hjerte. Når du har fundet lyden, skal du fortsætte med at bevæge sonden langsomt og kigge efter det sted, hvor lydsignalet vil være klart. Fostrets sædvanlige position kan ses på det følgende billede. Fostrets position kan dog variere afhængigt af graviditetsstadiet og andre forhold. Tæl antallet af lyde pr. minut og få oplysninger om din hjerterytme. Vi anbefaler, at du gentager optællingen mere end én gang.

Lydoptagelse

Du kan også optage disse lyde, mens du lytter til hjertelyde. Tilslut bare optagekablet (medfølger ikke) til miniUSB-stikket, sæt den anden ende i den enhed, som lyden skal optages på, og start optagelsen.

Sikkerhedsadvarsler

Undgå at bruge enheden i et miljø med en potentiel risiko for eksplosion, høj eller meget lav temperatur eller fugtighed i nærheden af åben ild. Vi anbefaler, at du ikke bruger enheden udendørs.

Tør altid gelen af enheden efter overvågning.

Brug ikke enheden, hvis den viser tegn på skade!

Hvis du rengør din enhed, skal du altid holde den slukket.

Tuotteen esittely


AngelSounds JPD-100S Mini on kevyt ja kannettava ilmaisin lapsen sikiön sydämenlyöntien kuunteluun.

Huomautus: Oikean toiminnan varmistamiseksi sikiön on oltava vähintään 12-14 viikkoa vanha, mieluiten 16 viikkoa. Keskustele lääkärisi kanssa laitteen käytöstä.

Pakkauksen sisältö

AngelSounds JPD-100S Mini, akku, kuulokkeet, käyttöohje.

Käytön perusteet

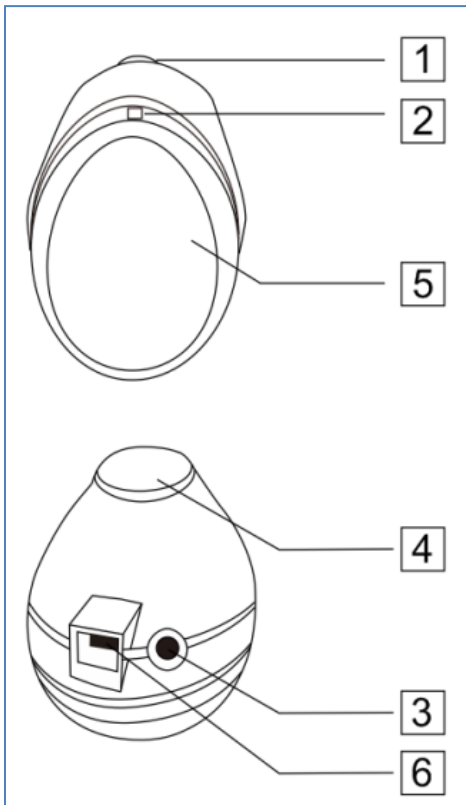


1. Virta päälle / pois, säädä äänenvoimakkuutta
2. Virran merkkivalo
3. Kuulokeliitintä
4. Signaalin siirto
5. Akun kansi
6. Äänisignaaliitintä

Käännä laitteen pyörää (1), LED syttyy kytkeäksesi laitteen päälle. Pyörän asteittainen kääntäminen lisää äänenvoimakkuutta, kääntäminen vastakkaiselle puolelle vähentää vähitellen ääntä, kunnes laite sammuu kokonaan.

Laitteessa on kaksi liitintä. Kuulokeliitintä ja ääniliitintä. Voit käyttää tätä kytkemällä tallennuskaapelin (ei sisälly toimitukseen) sikiön sykkeen äänen

tallentamiseksi. Jos sinun ei tarvitse tallentaa ääntä, liitä vain mukana toimitetut kuulokkeet kuunnellaksesi.

Akku

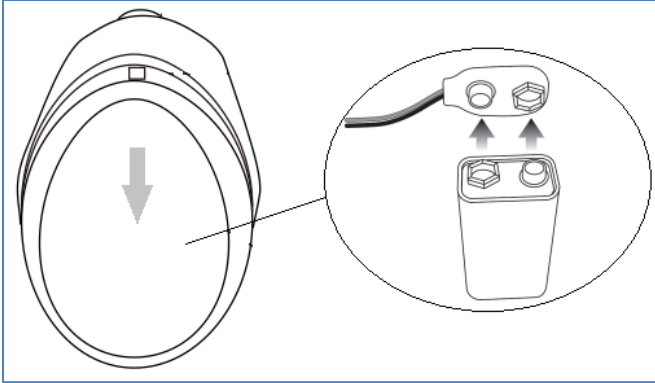


Akku mukana. Se sijaitsee suoraan laitteessa, mutta sitä ei ole yhdistetty. Ennen ensimmäistä käyttöä akku on kytkettävä seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

Poista kansi (5) ja

kytke akku.

Miten löytää sikiön sydän

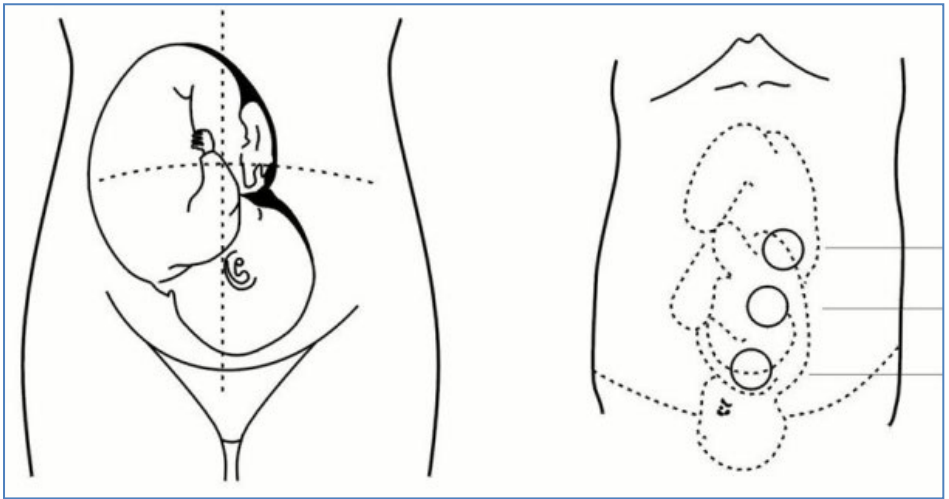

Levitä pieni geeli signaalinsiirtokohtaan (ei sisälly toimitukseen) ja aseta laite vatsallesi. Siirrä sitä hitaasti yrittäen löytää sikiön sydämen. Kun olet löytänyt äänen, jatka anturin siirtämistä hitaasti etsimällä paikkaa, jossa äänisignaali on selkein.

Sikiön tavallinen sijainti näkyy seuraavassa kuvassa. Sikiön asema voi kuitenkin vaihdella raskauden vaiheen ja muiden olosuhteiden mukaan.

Laske äänien määrä minuutissa ja hanki tietoa sydämesi rytmistä.

Suosittelemme, että toistat laskennan useammin kuin kerran.

Äänitys

Voit myös tallentaa nämä äänet kuunnellessasi sydänääniä. Liitä vain tallennuskaapeli (ei sisälly toimitukseen) miniUSB-liittimeen, kytke toinen pää laitteeseen, johon ääni tallennetaan, ja aloita tallennus.

Turvallisuusvaroitukset

Vältä laitteen käyttöä ympäristössä, jossa on räjähdysvaara, korkea tai erittäin matala lämpötila tai kosteus, avotulen lähellä. Suosittelemme, että et käytä laitetta ulkona.

Pyyhi geeli aina laitteesta seurannan jälkeen.

Älä käytä laitetta, jos siinä on merkkejä vaurioista!

Jos puhdistat laitetta, pidä se aina pois päältä.

Produkt introduktion


AngelSounds JPD-100S Mini är en lätt och bärbar detektor för att lyssna på hjärtslag hos ett barns foster.

Obs: För korrekt funktion måste fostret vara minst 12-14 veckor gammalt, helst 16 veckor. Rådgör med din läkare om användningen av enheten.

Paketets innehåll

AngelSounds JPD-100S Mini, batteri, hörlurar, manuell.

Grunderna för användning

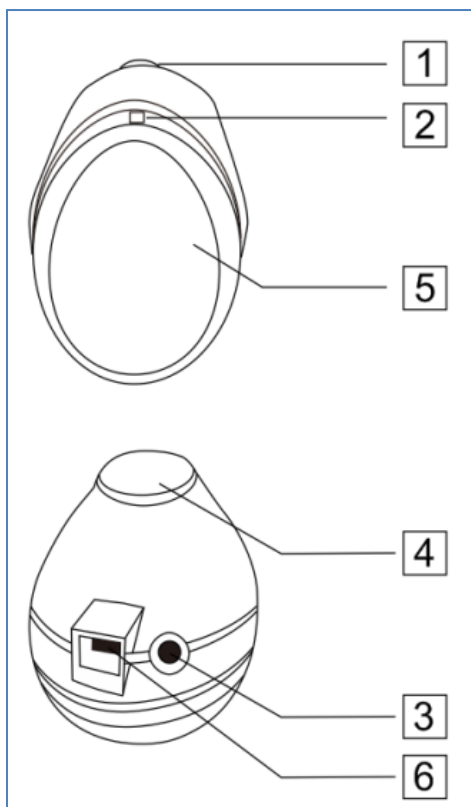

1. Slå på / av, justera volymen

2. Strömindikator

3. Uttag för hörlurar

4. Signalöverföring

5. Batterilucka


6. Uttag för ljudsignal

Vrid ratten (1) på enheten, lysdioden tänds för att slå på enheten. Gradvis vridning av hjulet lägger till volym, vridning till motsatt sida minskar ljudet gradvis tills enheten är helt avstängd.

Enheten har två kontakter. Hörlursuttag och ljuduttag. Du kan använda detta genom att ansluta inspelningskabeln (ingår ej) för att spela in ljudet från fostrets hjärtslag. Om du inte behöver spela in ljud, anslut bara de medföljande


hörlurarna för att lyssna.

Batteri

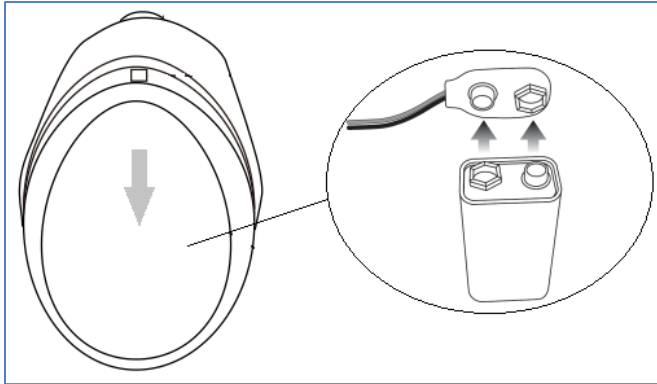

Batteri ingår. Den finns direkt på enheten, men inte ansluten. Före första användningen måste batteriet anslutas enligt följande bild. Ta bort locket (5) och anslut batteriet.

Hur man hittar fostrets hjärta

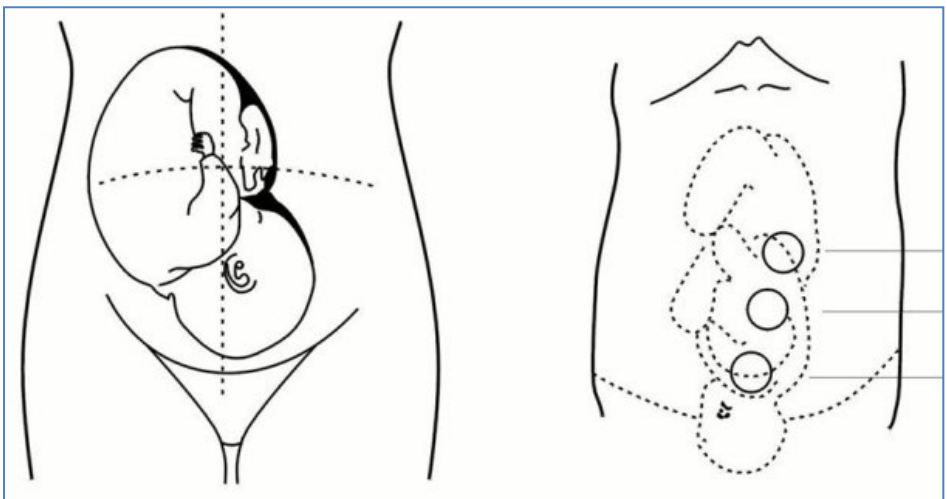

Applicera lite gel på signalöverföringsstället (ingår ej) och placera enheten på magen. Flytta det långsamt och försök hitta fostrets hjärta. Efter att ha hittat ljudet, fortsätt att flytta sonden långsamt och leta efter den plats där ljudsignalen blir tydligast.

Fostrets vanliga position kan ses i följande bild. Fostrets position kan dock variera beroende på graviditetsstadiet och andra tillstånd.

Räkna antalet ljud per minut och få information om din hjärtrytm. Vi rekommenderar att du upprepar räkningen mer än en gång.

Ljudinspelning

Du kan också spela in dessa ljud medan du lyssnar på hjärtljud. Anslut bara inspelningskabeln (ingår ej) till miniUSB-kontakten, anslut den andra änden till enheten där ljudet ska spelas in och börja spela in.

Säkerhetsvarningar

Undvik att använda enheten i en miljö med potentiell explosionsrisk, hög eller mycket låg temperatur eller luftfuktighet, nära öppen låga. Vi rekommenderar att du inte använder enheten utomhus.

Torka alltid bort gelen från enheten efter övervakning.

Använd inte enheten om den visar tecken på skador!

Om du rengör enheten ska du alltid ha den avstängd.

Εισαγωγή προϊόντος


Το AngelSounds JPD-100S Mini είναι ένας ελαφρύς και φορητός ανιχνευτής για να ακούτε τους καρδιακούς παλμούς του εμβρύου ενός παιδιού.

Σημείωση: Για σωστή λειτουργία, το έμβρυο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12-14 εβδομάδων, ιδανικά 16 εβδομάδων. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

AngelSounds JPD-100S Mini, μπαταρία, ακουστικά, εγχειρίδιο.

Βασικά στοιχεία χρήσης

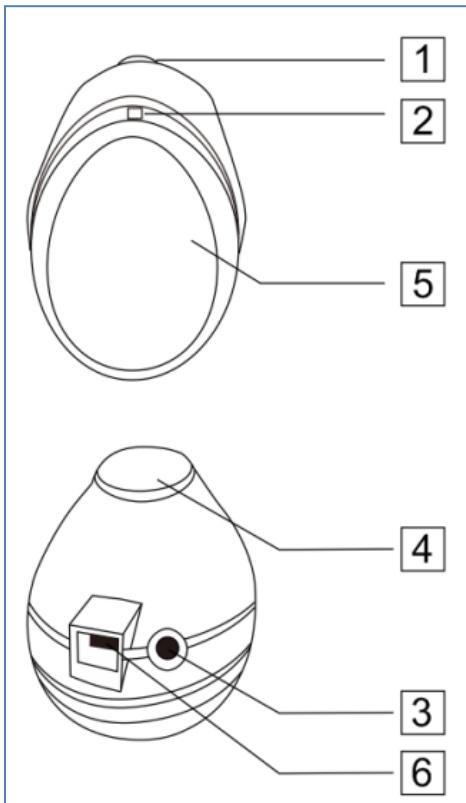

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ρυθμίστε την ένταση
2. Ένδειξη λειτουργίας
3. Υποδοχή ακουστικών
4. Μετάδοση σήματος
5. Κάλυμμα μπαταρίας
6. Υποδοχή ηχητικού σήματος


Γυρίστε τον τροχό (1) στη συσκευή, η λυχνία LED ανάβει για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η σταδιακή περιστροφή του τροχού προσθέτει ένταση, η στροφή προς την αντίθετη πλευρά μειώνει σταδιακά τον ήχο μέχρι να απενεργοποιηθεί πλήρως η συσκευή.

Η συσκευή προσφέρει δύο υποδοχές. Υποδοχή ακουστικών και υποδοχή ήχου. Μπορείτε να το

χρησιμοποιήσετε συνδέοντας το καλώδιο εγγραφής (δεν

περιλαμβάνεται) για να εγγραψετε τον ήχο του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού. Εάν δεν χρειάζεται να εγγραψετε ήχο, απλώς συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά για ακρόαση.


Μπαταρία

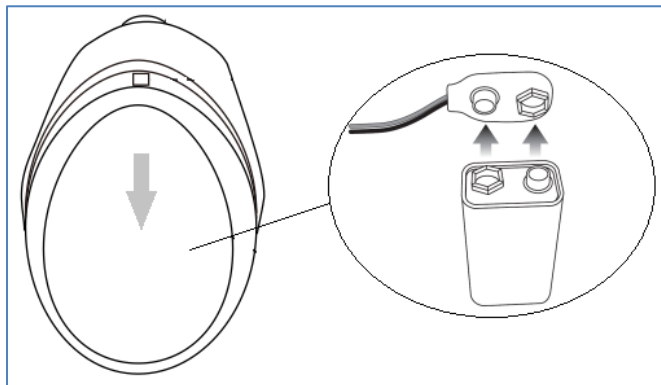

Περιλαμβάνεται μπαταρία. Βρίσκεται απευθείας στη συσκευή, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο. Πριν από την πρώτη χρήση, η μπαταρία πρέπει να συνδεθεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα (5) και συνδέστε την μπαταρία.

Πώς να βρείτε την καρδιά του εμβρύου

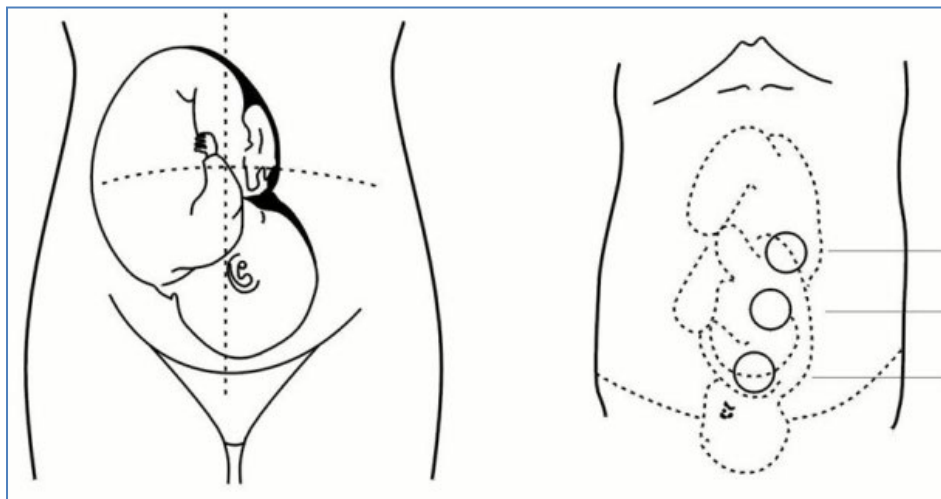

Εφαρμόστε λίγο τζελ στο σημείο μετάδοσης σήματος (δεν περιλαμβάνεται) και τοποθετήστε τη συσκευή στο στομάχι σας. Μετακινήστε το αργά, προσπαθώντας να βρείτε την καρδιά του εμβρύου. Αφού βρείτε τον ήχο, συνεχίστε να μετακινείτε αργά τον καθετήρα, αναζητώντας τον τόπο όπου το ηχητικό σήμα θα είναι καθαρότερο.

Η συνήθης θέση του εμβρύου μπορεί να φανεί στην παρακάτω εικόνα. Ωστόσο, η θέση του εμβρύου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το στάδιο της εγκυμοσύνης και άλλες συνθήκες.

Μετρήστε τον αριθμό των ήχων ανά λεπτό και λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον καρδιακό ρυθμό σας. Σας συνιστούμε να επαναλάβετε την καταμέτρηση περισσότερες από μία φορές.

Ηχογράφηση

Μπορείτε επίσης να εγγράψετε αυτούς τους ήχους ενώ ακούτε καρδιακούς ήχους. Απλώς συνδέστε το καλώδιο εγγραφής (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή miniUSB, συνδέστε το άλλο άκρο στη συσκευή στην οποία θα εγγραφεί ο ήχος και ξεκινήστε την εγγραφή.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με πιθανό κίνδυνο έκρηξης, υψηλής ή πολύ χαμηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας, κοντά σε ανοικτή φλόγα. Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Σκουπίζετε πάντα το τζελ από τη συσκευή μετά την παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει σημάδια ζημιάς!

Αν καθαρίζετε τη συσκευή σας, να την έχετε πάντα απενεργοποιημένη.

Produkto pristatymas


"AngelSounds JPD-100S Mini" yra lengvas ir nešiojamas detektorius, skirtas klausytis vaiko vaisiaus širdies plakimo.

Pastaba: Norint tinkamai funkcionuoti, vaisius turi būti bent 12-14 savaičių amžiaus, geriausia - 16 savaičių. Pasitarkite su gydytoju dėl prietaiso naudojimo.

Pakuote sudaro:

AngelSounds JPD-100S Mini, baterija, ausinės, vadovas.

Naudojimo pagrindai

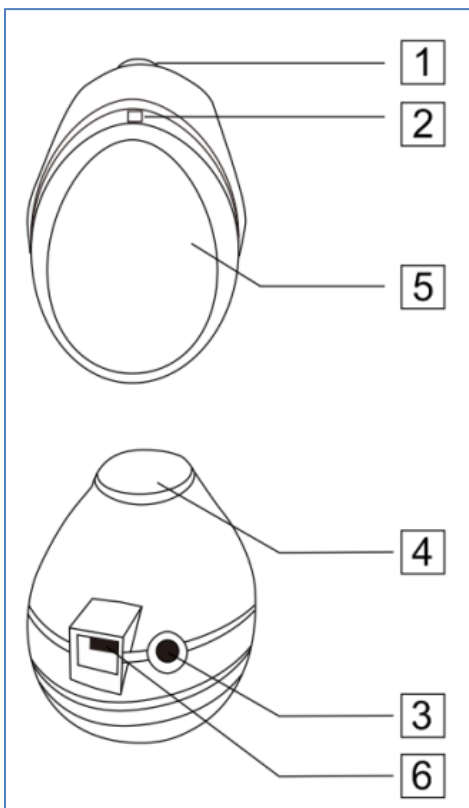


1. Įjunkite / išjunkite, sureguliuokite garsumą
2. Maitinimo indikatorius
3. Ausinių lizdas
4. Signalo perdavimas
5. Akumuliatoriaus dangtelis
6. Garso signalo lizdas

Pasukite prietaiso ratą (1), užsidega šviesos diodas, kad įjungtumėte prietaisą. Palaipsniui sukant ratą padidėja garsumas, pasukus į priešingą pusę palaipsniui sumažėja garsas, kol prietaisas bus visiškai išjungtas.

Prietaisas siūlo dvi jungtis. Ausinių lizdas ir garso lizdas. Tai galite naudoti prijungę įrašymo kabelį (nepriedamas), kad įrašytumėte vaisiaus širdies plakimo garsą. Jei

jums nereikia įrašyti garso, tiesiog prijunkite pridedamas ausines, kad galėtumėte klausytis.

Akumulatorius

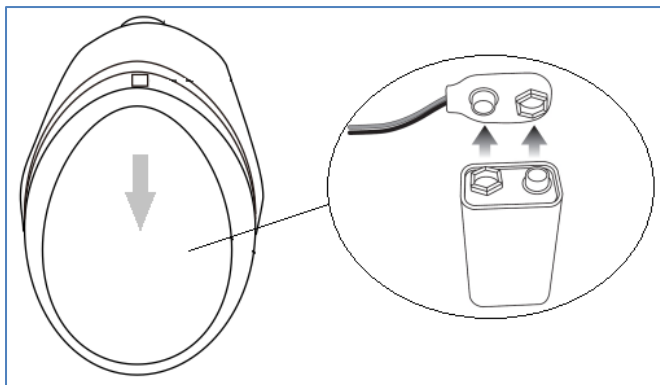


Priedama baterija. Jis yra tiesiai įrenginyje, bet neprijungtas. Prieš pirmą kartą naudojant, akumulatorius turi būti prijungtas, kaip parodyta toliau pateiktame

paveikslėlyje.

Nuimkite dangtelį (5) ir prijunkite akumuliatorių.

Kaip rasti vaisiaus širdį

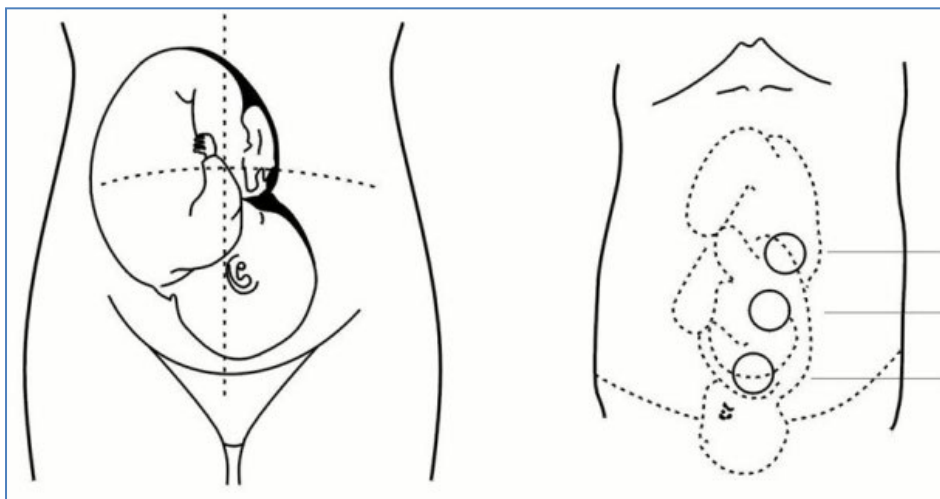

Užtepkite šiek tiek gelio į signalo perdavimo vietą (nepriedama) ir padėkite prietaisą ant skrandžio. Judėkite lėtai, bandydami rasti vaisiaus širdį. Suradę garsą, toliau lėtai judinkite zondą, ieškodami vietos, kur garso signalas bus aiškiausias.

Įprastą vaisiaus padėtį galima pamatyti šiame paveikslėlyje. Tačiau vaisiaus padėtis gali skirtis priklausomai nuo nėštumo stadijos ir kitų sąlygų.

Suskaičiuokite garsų skaičių per minutę ir gaukite informacijos apie savo širdies ritmą. Rekomenduojame pakartoti skaičiavimą daugiau nei vieną kartą.

Garso įrašymas

Taip pat galite įrašyti šiuos garsus klausydamiesi širdies garsų. Tiesiog prijunkite įrašymo kabelį (nepridedamą) prie miniUSB jungties, kitą galą prijunkite prie įrenginio, kuriame bus įrašytas garsas, ir pradėkite įrašymą.

Saugos įspėjimai

Venkite naudoti prietaisą aplinkoje, kurioje gali kilti sprogimo pavojus, aukšta arba labai žema temperatūra ar drėgmė, šalia atviros liepsnos.

Rekomenduojame nenaudoti prietaiso lauke.

Po stebėjimo visada nuvalykite gelį nuo prietaiso.

Nenaudokite prietaiso, jei jis turi pažeidimo požymių!

Jei valote įrenginį, visada laikykite jį išjungtą.

Produktu ieviešana


AngelSounds JPD-100S Mini ir viegls un pārnēsājams detektors, lai klausītos bērna augļa sirdspukstus.

Piezīme: Pareizai darbībai auglim jābūt vismaz 12-14 nedēļu vecam, ideālā gadījumā 16 nedēļām. Konsultējieties ar ārstu par ierīces lietošanu.

Iepakojuma saturs

AngelSounds JPD-100S Mini, akumulators, ausiņas, rokasgrāmata.

Lietošanas pamati

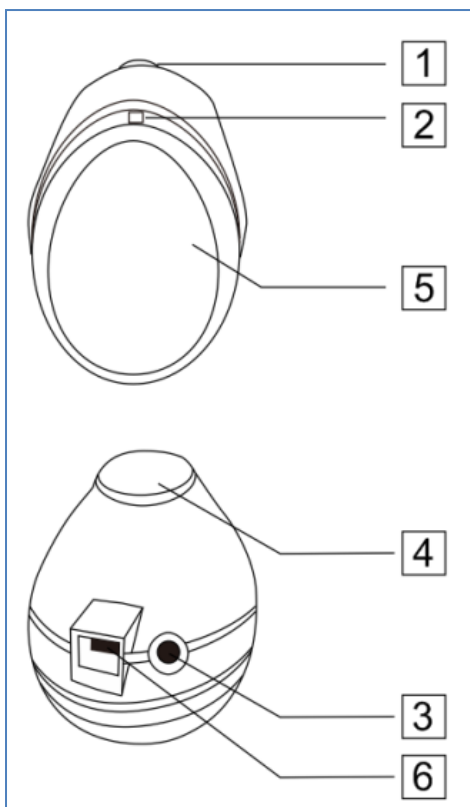


1. Ieslēdziet/izslēdziet, regulējiet skaļumu
2. Jaudas indikators
3. Ausiņu ligzda
4. Signāla pārraide
5. Akumulatora pārsegs
6. Audio signāla ligzda

Pagrieziet ierīces riteni (1), gaismas diode iedegas, lai ieslēgtu ierīci. Pakāpeniski pagriežot riteni, palielinās skaļums, pagriežoties uz pretējo pusi, pakāpeniski samazinās skaņa, līdz ierīce ir pilnībā izslēgta.

Ierīce piedāvā divus savienotājus. Ausiņu ligzda un audio ligzda. To var izmantot, pievienojot ierakstīšanas kabeli (nav iekļauts komplektā), lai ierakstītu augļa sirdsdarbības skaņu. Ja jums nav

nepieciešams ierakstīt audio, vienkārši pievienojiet komplektācijā iekļautās ausiņas, lai klausītos.


Baterija

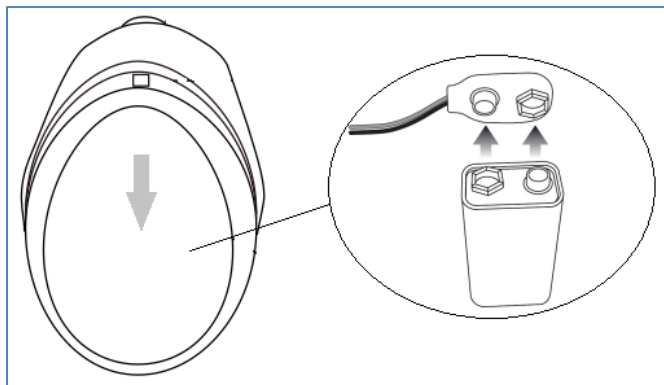

Akumulators iekļauts komplektā. Tas atrodas tieši ierīcē, bet nav savienots. Pirms pirmās lietošanas akumulators ir jāpievieno, kā parādīts nākamajā attēlā.

Noņemiet vāciņu (5) un pievienojiet akumulatoru.

Kā atrast augļa sirdi

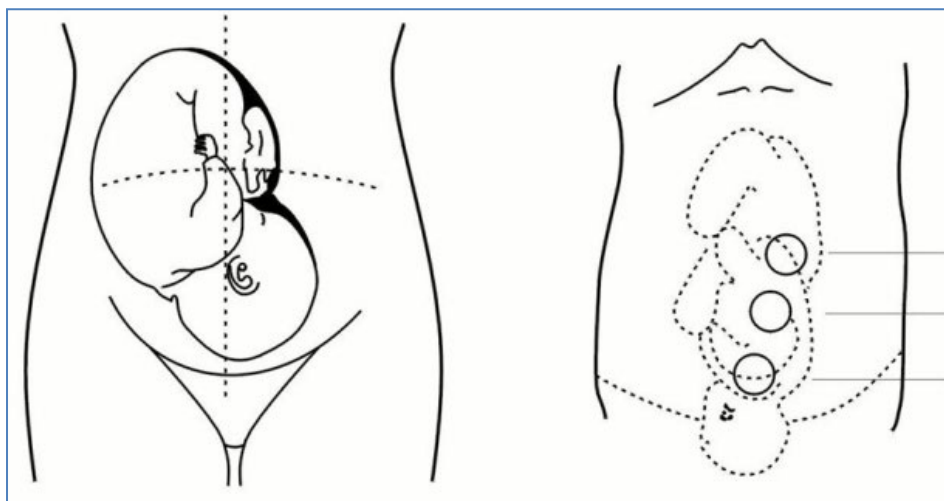

Signāla pārraides vietā uzklājiet nedaudz želejas (nav iekļauts komplektā) un novietojiet ierīci uz vēdera. Pārvietojiet to lēnām, mēģinot atrast augļa sirdi. Pēc skaņas atrašanas turpiniet lēnām pārvietot zondi, meklējot vietu, kur skaņas signāls būs skaidrākais.

Parastais augļa stāvoklis ir redzams nākamajā attēlā. Tomēr augļa stāvoklis var atšķirties atkarībā no grūtniecības stadijas un citiem apstākļiem.

Saskaitiet skaņu skaitu minūtē un iegūstiet informāciju par savu sirds ritmu. Mēs iesakām atkārtot skaitīšanu vairāk nekā vienu reizi.

Audioieraksts

Jūs varat arī ierakstīt šīs skaņas, klausoties sirds skaņas. Vienkārši pievienojiet ierakstīšanas kabeli (nav iekļauts komplektā) miniUSB savienotājam, pievienojiet otru galu ierīcei, kurā tiks ierakstīta skaņa, un sāciet ierakstīšanu.

Drošības brīdinājumi

Izvairieties no ierīces lietošanas vidē ar potenciālu eksplozijas, augstas vai ļoti zemas temperatūras vai mitruma risku atklātas liesmas tuvumā. Mēs iesakām nelietot ierīci ārpus telpām.

Pēc uzraudzības vienmēr noslaukiet želeju no ierīces.

Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes!

Ja tīrāt ierīci, vienmēr turiet to izslēgtu.

Toote tutvustus


AngelSounds JPD-100S Mini on kerge ja kaasaskantav detektor lapse loote südamelöökide kuulamiseks.

Märkus: Nõuetekohaseks toimimiseks peab loode olema vähemalt 12-14 nädalat vana, ideaalis 16 nädalat. Seadme kasutamise osas pidage nõu oma arstiga.

Pakendi sisu

AngelSounds JPD-100S Mini, aku, kõrvaklapid, kasutusjuhend.

Kasutamise alused

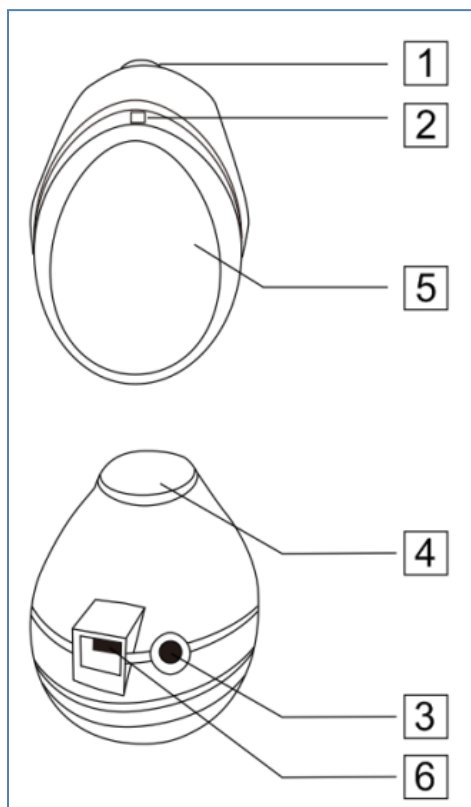


1. Lülitage sisse/välja, reguleerige helitugevust
2. Toiteindikaator
3. Kõrvaklappide pesa
4. Signaali edastamine
5. Patarei kate
6. Helisignaali pesa

Keerake seadme ratast (1), LED süttib seadme sisselülitamiseks. Ratta järkjärguline pööramine lisab helitugevust, vastasküljele pööramine vähendab heli järkjärgult, kuni seade on täielikult välja lülitatud.

Seade pakub kahte pistikut. Kõrvaklappide pesa ja helipistik. Seda saate kasutada, ühendades salvestuskaabli (ei kuulu komplekti) loote südamelöögi heli


salvestamiseks. Kui te ei pea heli salvestama, ühendage kuulamiseks lihtsalt kaasasolevad kõrvaklapid.

Patarei

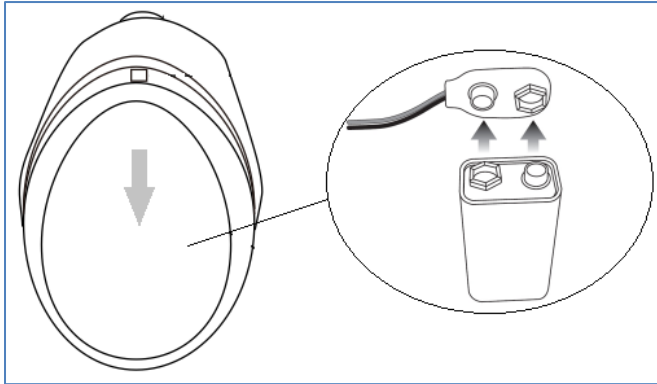

Aku komplektis. See asub otse seadmes, kuid pole ühendatud. Enne esimest kasutamist peab aku olema ühendatud järgmisel pildil näidatud viisil. Eemaldage kaas (5) ja ühendage aku.

Kuidas leida loote süda

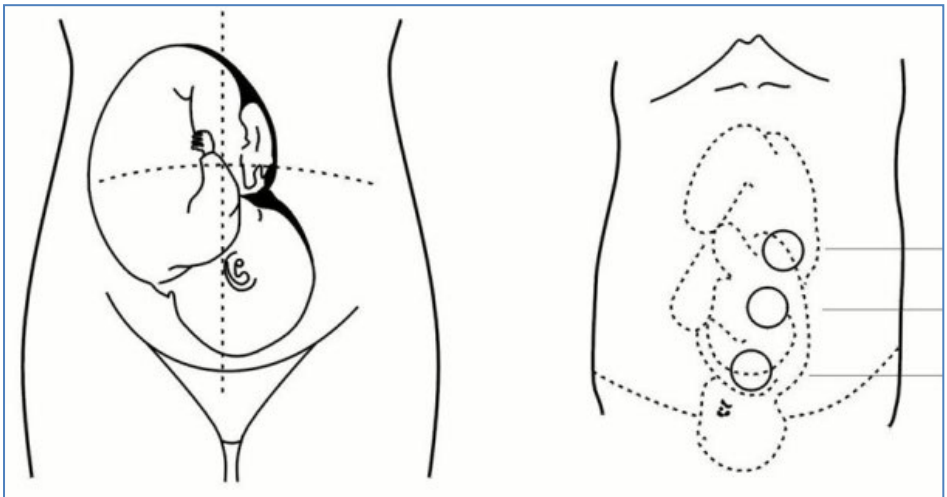

Kandke signaali edastamise kohale (ei kuulu komplekti) veidi geeli ja asetage seade kõhule. Liigutage seda aeglaselt, püüdes leida loote südant. Pärast heli leidmist jätkake sondi aeglaselt liigutamist, otsides kohta, kus helisignaali on kõige selgem.

Loote tavalist asendit võib näha järgmisel pildil. Kuid loote asend võib varieeruda sõltuvalt raseduse staadiumist ja muudest tingimustest. Loendage helide arv minutis ja hankige teavet oma südamerütmi kohta. Soovitame loendust korrata rohkem kui üks kord.

Heli salvestamine

Neid helisid saate salvestada ka südamehelisid kuulates. Lihtsalt ühendage salvestuskaabel (ei kuulu komplekti) miniUSB-pistikusse, ühendage teine ots seadmega, millele heli salvestatakse, ja alustage salvestamist.

Ohutushoiatused

Vältige seadme kasutamist keskkonnas, kus on võimalik plahvatusoht, kõrge või väga madal temperatuur või niiskus, lahtise leegi lähedal.

Soovitame seadet õues mitte kasutada.

Pärast jälgimist pühkige geel alati seadmest ära.

Ärge kasutage seadet, kui sellel on märke kahjustustest!

Kui puhastate seadet, hoidke seda alati välja lülitat.