



Digital Display Alcohol Concentration Test Meter

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 16
Čeština	17 – 30
Slovenčina	31 – 44
Magyar	45 – 58
Deutsch	59 – 72

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Precautions

- Thank you for selecting and purchasing digital display alcohol concentration test meter.
- Please read this manual carefully to ensure that you can use the product correctly.
- This device is a healthcare product; it is intended to control overdrink of alcohol so as to keep you fit, through testing the alcohol in your breath and calculating the content of alcohol in the blood via microcomputer. The product is applicable to family healthcare as well as for reference in determining whether the driver is driving after drinking.
- The test result may be affected by a number of aspects such as environmental temperature, various gases in the air and smoking, etc. the result shall, therefore, be only for reference and shall not be regarded as the justification of driving after drinking.
- No matter whether you have consumed this product, its manufacturer and appropriate agents shall be not responsible for any traffic accident arisen due to ethanol or other accidents happened under the related regulations and rules.
- As people's breath contains some fermentable gases (from stomach and intestines), so some gases may even be tested out under no drink circumstance.
- When after drinking, it is recommended to last after 20 minutes, it is because 20 minutes is approximately for alcohol to be absorbed into blood from the digestive organs, and residual alcohol remaining in the mouth takes this long to dissipate.
- For accurate result, do not repeat neat testing within 3 minutes after time.
- Do not smoke and eat for 20 minutes prior testing.
- Do not use any excitant substances near the tester, such as paint, insecticides, alcohols.
- If the device has been performed for five times successively, please stop for two minutes and then use it again.
- Do not drive after drinking!

Operation

Wait 20 minutes	No Smoking	No Eating	No Drinking
			

BAC	Dose-Specific Effects
0.020-0.039%	Generally, no loss of coordination. Slight joy or loss of shyness. Depressant effects are not clear.
0.040-0.069%	General feelings of well-being, relaxation, shyness is reduced and sensation of warmth. Joy. Some minor impairment of reasoning and memory. Lowering of caution. Driving skills may be impaired.
0.070-0.099%	Slight impairment of balance, speech, vision, reaction time, and hearing. Joy. Judgment and self-control are reduced. Caution, reason, and memory are impaired. Driving skills are always impaired.
0.100-0.129%	Major impairment of motor coordination and loss of good judgment. Speech may be slurred. Balance, vision, reaction time and hearing will be impaired. Joy.
0.130-0.159%	Gross motor impairment and lack of physical control. Blurred vision and major loss of balance. Joy reduced and state of feeling unwell begins to appear.
0.160-0.199%	Anxiety, restlessness predominates. Nausea may appear. Appearance of a "sloppy drunk."

Preparation before using


- After opening the package, please check the parts and components below. If anyone is absent, please contact its dealer.
- Accessories

1. One digital display alcohol concentration detector.
2. One User Manual.
3. Two AA alkaline batteries. (Not included).
4. 5 air-blowing pipes.
5. One bag.

Package Contents



Components Diagram

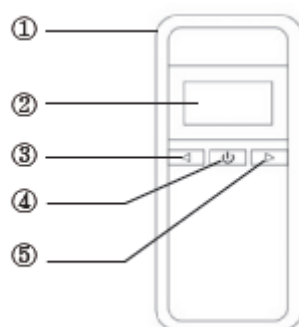

1. Mouthpiece Connector

2. LCD Display

3. Left key (K1)

4. Power Button On/Off

5. Right Key (K2)

Installing Battery

1. Open the back cover

2. Install two 1.5V AA alkaline batteries or two batteries with same specification into the battery case in a right way (as shown in figure 1) per the mark “+” and “-” on the case, and then close the cover well (as shown in figure 2)

3. Install the back cover

- Battery Replacement

If the Battery symbol on the LCD flashes, it indicates the battery electricity is not enough and the batteries need to be replaced, in order to ensure the test accuracy. Open the battery cover and take out the batteries and reinstall the new batteries with same specification (as shown in figure). Make sure to keep the old batteries out of children's reach, please dispose the useless batteries according to the local regulations.



1. Battery Compartment, 2. Space for mouthpieces

Set temperature display format


Press the power button about 2 seconds, the alcohol tester LCD will turn on with one beep sound. Figure (1)

Press right k2 to set the temperature unit conversion.



How to use the alcohol tester


- Operational Procedure:
- Wait
- Press the power button about 2 seconds, the alcohol tester LCD will turn on with one beep sound.

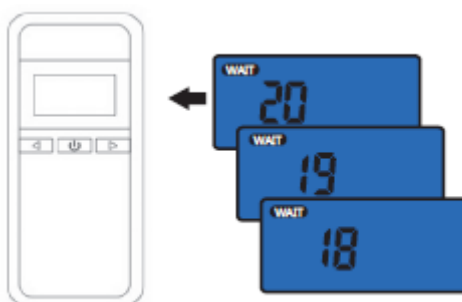


- The: "WAIT" symbol is displayed and the 20 to 0 countdown is started that indicate the tester is in work up mode.
- NOTE
- If first work up is defeated, the tester will be reset automatically and work up again for 1-2 times.
- It always has a large number of gas and impurity adsorbed on the surface of alcohol sensor, when first time taking out the tester from the packaging, or after long time no using for the tester, it needs more time for cleaning and work up the alcohol sensor, you should repress the power button and retry several times if possible.

Test

- The “RDY” symbolises displayed when work-up is succeed, and the countdown is started that indicate the tester is in testing mode.

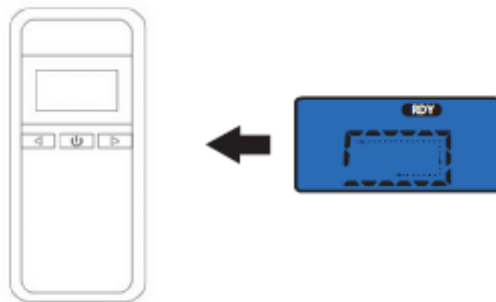

- Near and blow into the breath inhale for 3-5 seconds.
- The analysis of...

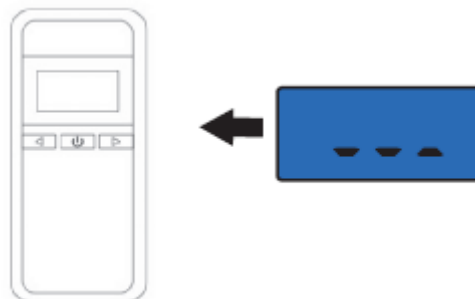

Read the tester result from the alcohol tester lcd.



Caution $\leq 0.200\% \text{BAC}$



$0.210\% \text{BAC} \leq$ Caution $\leq 0.490\% \text{BAC}$



Danger $\geq 0.500\% \text{BAC}$

Unit Conversion



Auto Power Off

1. After the result is displayed for about 10 seconds, the "off" symbol will appear 2 seconds and the alcohol tester will be turned off.
2. If warm up is defeated, the tester will be automatically turned off.
3. Long press the POWER button to turn on the product and long press it again to turn off in any mode.

Restart Mode

After displaying the testing result, click POWER button to re-activate the TESTING mode directly, no need to wait till it shut off to click the POWER button.

Set unit Result display Format

Explanation for the 4 kinds of units in the sheet.

Value	Meaning
0	%BAC
1	‰BAC
2	Mg/L
3	g/l

Setting Method

1. In the TESTING mode after turning on the product, long press left button (K1) within the 4 seconds of displaying "WAIT", so as to go into the POINTSETTING mode. Please check the following picture.

2. Then click the left button and Right button (K1) (K2) to select the unit you need, after setting up the unit, long press right button of K1 to quit the UNIT SETTING mode and return back to TESTING mode.

3. If there is not any operation within 15 seconds it will show "OFF" to shut off the product.



Set alert level

Setting Method

1. Double click the POWER button in UNIT SETTING mode to go into CAUTION setting mode, as shown the following picture.
2. Set up CAUTION first, then click left button (K1) and right button (K2) to set up CAUTION data.
3. After setting up the CAUTION data, single click POWER button to switch to DANGER setting, then click the left and right button of K1 K2 to set up the CAUTION data.
4. After finish setting, double click POWER button to quit the CAUTION mode, and return back to UNIT SETTING mode.



Caution $\leq 0.200\% \text{BAC}$



$0.210\% \text{BAC} \leq$ Caution $\leq 0.490\% \text{BAC}$



Danger $\geq 0.500\% \text{BAC}$

REC record checking mode

1. Within the TESTING mode time, double click POWER button to get into the REC record checking mode, click the left and right button of K1 K2 to check the 1-32 times TESTING record.
2. In REC mode, double click POWER button to quit the checking mode and return back to TESTING mode.
3. If there is not any operation within 15 seconds it will show "OFF" to shut off the product.



Declaration

1.Regardless of whether the product is used, manufacturers and vendors will not bear any responsibility for the violations. For example: drunk driving and high-altitude operations driving.

2.Each person reacts differently to alcohol, so the test results are for reference only, which cannot serve as the criteria in determining the outcome.

Common Faults and Solutions

Faults	Possible Faults Reason	Solution
Power on failing	Put batteries incorrectly	Installing batteries in correct polarity
	Very low power batteries	Replacing the new alkaline batteries
	Circuit Fault	Contacting aftersales service
Blowing no response	Warm up not completing	Warm up for more times
	Circuit Fault	Contacting aftersales service
Blowing no result	Residual Gas in tester	Warm up again
	Not blowing in schedule time	Blowing during "BLOW" countdown time
Now Blowing with test result	Residual gas in tester	"Warm up" for more times
Different result after several testings	Testing as soon as drinking	Testing after 20 minutes of drinking
	Blowing time different	Deep breath for 3 – 5 seconds

Different country alcohol units

No.	BAC (Blood Alcohol Concentration)				BrAC (Breath Alcohol concentration)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

Common Units:

%BAC – USA

g/l – European

mg/L BRAC – Japan

mg/100ml – China

‰BAC – Russia

‰prom – Poland

Maintenance

- Do not use these cleansers such as benzene, thinner or petrol to clean the product to avoid damaging its surface.
- Do not fall it down or strike, otherwise malfunction may be caused.
- Do not try to repair, rebuild, or dismantle any parts except for the battery replacement.
- When not use the device for a long time, you are recommended to take out the batteries to prevent the damage due to battery leakage.

Performance Parameter

- Measure range:
- 0.000-0.199%BAC.
- 0.000-1.999‰BAC
- 0.000-1.999g/l.
- 0.000-0.995mg/l
- Alarming Level: 0.05%BAC; 0.5‰BAC; 0.5g/l; 0.25mg
- Accuracy: $\pm 0.01\%$ BAC; $\pm 0.1\%$ ‰BAC; ± 0.05 mg/l
- Figure size: Length 114mm
- Width 51mm
- Height 18mm
- weight: 60g
- Battery: 2×1.5V (AA battery)
- blowing Time; 5s
- Display: LCD Display with backlight
- Current consumption: working current ≤ 180 mA
- Quiescent Current $\leq 40\mu$ A
- Environmental temperature: -10°C~50°C
- Environmental humidity: $\leq 95\%$ NO Dews
- Battery expectancy time: ≥ 300

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostní opatření

- Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili měřič koncentrace alkoholu s digitálním displejem.
- Pečlivě si přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že můžete výrobek správně používat.
- Tento přístroj je zdravotnický výrobek; je určen ke kontrole nadměrného pití alkoholu, abyste byli fit, a to prostřednictvím testování alkoholu v dechu a výpočtu obsahu alkoholu v krvi pomocí mikropočítače. Výrobek je použitelný pro rodinnou zdravotní péči i pro referenční účely při zjišťování, zda řidič řídí po požití alkoholu.
- Výsledek zkoušky může být ovlivněn řadou aspektů, jako je teplota prostředí, různé plyny v ovzduší a kouření atd. výsledek je proto pouze orientační a nelze jej považovat za ospravedlnění řízení po požití alkoholu.
- Bez ohledu na to, zda jste tento výrobek využili, jeho výrobce a příslušní zástupci nenesou odpovědnost za případné dopravní nehody způsobené etanolem nebo jiné nehody, ke kterým došlo podle souvisejících předpisů a pravidel.
- Protože lidský dech obsahuje některé z kvasitelné plyny (ze žaludku a střev), mohou být některé plyny výsledkem testování i bez pití alkoholu.
- Po pití se doporučuje vydržet 20 minut, je to proto, že 20 minut je přibližně doba, kdy se alkohol vstřebává z trávicích orgánů do krve, a zbytkový alkohol, který zůstává v ústech, se tak dlouho rozptyluje.
- Pro přesný výsledek neopakujte čisté testování do 3 minut po uplynutí času.
- 20 minut před testováním nekuřte a nejezte.
- V blízkosti testeru nepoužívejte žádné dráždivé látky, jako jsou barvy, insekticidy, alkoholy.
- Pokud bylo zařízení použito pětkrát po sobě, přestaňte ho na dvě minuty používat a poté jej použijte znovu.
- Neřidte po požití alkoholu!

Provoz

Počkejte 20 minut



Nekuřte



Nejezte



Nepijte



BAC

Účinky specifické pro danou dávku

0.020-0.039%

Obecně nedochází ke ztrátě koordinace. Mírná radost nebo ztráta plachosti. Depresivní účinky nejsou jasné.

0.040-0.069%

Celkový pocit pohody, uvolnění, snížení ostychu a pocit tepla. Radost. Určité menší zhoršení uvažování a paměti. Snížení opatrnosti. Řidičské schopnosti mohou být zhoršeny.

0.070-0.099%

Mírné zhoršení rovnováhy, řeči, zraku, reakční doby a sluchu. Radost. Úsudek a sebeovládání jsou sníženy. Opatrnost, rozum a paměť jsou zhoršeny. Řidičské schopnosti jsou vždy zhoršené.

0.100-0.129%

Výrazné narušení motorické koordinace a ztráta schopnosti správného úsudku. Řeč může být nezřetelná. Zhorší se rovnováha, zrak, reakční doba a sluch. Radost.

0.130-0.159%

Hrubá motorická porucha a nedostatečná fyzická kontrola. Rozmazané vidění a velká ztráta rovnováhy. Snížená radost a začíná se objevovat stav, kdy se necítíte dobře.

0.160-0.199%

Převládá úzkost, neklid. Může se objevit nevolnost. Vzhled "nedbalého opilce".

Příprava před použitím

- Po otevření balení zkontrolujte níže uvedené součásti a komponenty. Pokud některá z nich chybí, obraťte se na jejího prodejce.
- Příslušenství

1. Jeden detektor koncentrace alkoholu s digitálním displejem.

2. Jedna uživatelská příručka.

3. Dvě alkalické baterie AA. (Nejsou součástí dodávky).


4. 5 trubic pro vyfukování vzduchu.

5. Jeden sáček.

Obsah balení



Schéma součástí

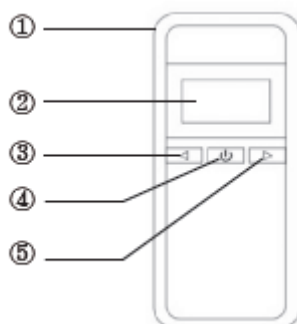

1. Konektor náustku

2. LCD displej

3. Levá klávesa (K1)

4. Tlačítko zapnutí/vypnutí

5. Pravá klávesa (K2)

Instalace baterie

1. Otevřete zadní kryt

2. Vložte dvě 1,5V alkalické baterie AA nebo dvě baterie se stejnou specifikací do bateriového pouzdra správným způsobem (jak je znázorněno na obrázku 1) podle značek "+" a "-" na pouzdře a poté kryt dobře uzavřete (jak je znázorněno na obrázku 2).

3. Nainstalujte zadní kryt

- Výměna baterie

Pokud na LCD displeji bliká symbol Baterie, znamená to, že baterie nejsou dostatečně nabitě a je třeba je vyměnit, aby byla zajištěna přesnost testu.

Otevřete kryt baterií, vyjměte baterie a znovu nainstalujte nové baterie se stejnou specifikací (jak je znázorněno na obrázku). Ujistěte se, že staré baterie jsou mimo dosah dětí, nepoužitelné baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



2. Příhrádka na baterie, 2. Prostor pro náustky

Nastavení formátu zobrazení teploty


Stiskněte tlačítko napájení asi na 2 sekundy, LCD displej alkohol testeru se rozsvítí s jedním zvukovým signálem. Obrázek (1)

Stisknutím pravého tlačítka k2 nastavte převod jednotek teploty.



Jak používat alkohol tester


- Provozní postup:
- Počkejte
- Stiskněte tlačítko napájení asi na 2 sekundy, LCD displej alkohol testeru se rozsvítí s jedním zvukovým signálem.

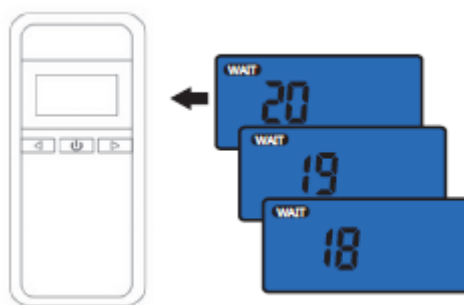


- Zobrazí se symbol "WAIT" a spustí se odpočítávání 20 až 0, což znamená, že tester je v režimu zapnutí.
- POZNÁMKA
- Pokud se první spuštění nepodaří, tester se automaticky resetuje a spustí se znovu 1-2krát.
- Vždy má velké množství plynu a nečistot adsorbovaných na povrchu alkoholového senzoru, když poprvé vyjmete tester z obalu nebo po dlouhé době nepoužíváte tester, potřebuje více času na čištění a vyčištění alkoholového senzoru, měli byste stisknout tlačítko napájení a několikrát zopakovat, pokud je to možné.

Test

- Po úspěšném zapnutí se na displeji zobrazí symbol "RDY" a  spustí se odpočítávání, které signalizuje, že je tester v režimu testování.

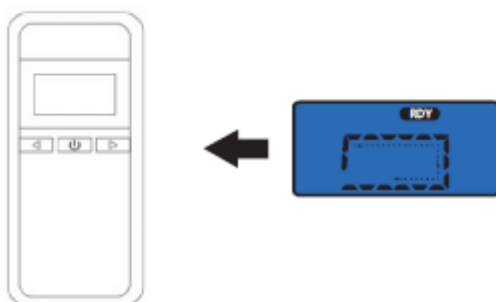

- Přiblížte tested k ústům a foukněte do něj 3-5 sekund.
- Analýza...

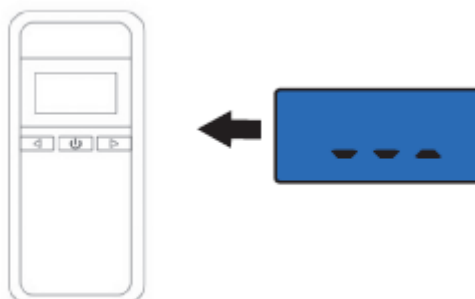

Přečtěte si výsledek z LCD displeje alkohol testeru.



Upozor $\leq 0.200\% \text{BAC}$



$0.210\% \text{BAC} \leq$ Upozor $\leq 0.490\% \text{BAC}$



Nebezp $\geq 0.500\% \text{BAC}$

Převod jednotek



Automatické vypnutí

1. Po zobrazení výsledku po dobu přibližně 10 sekund se na 2 sekundy objeví symbol "vyp" a alkohol tester se vypne.
2. Pokud je teste přehřátý, automaticky se vypne.
3. Dlouhým stisknutím tlačítka POWER výrobek zapnete a opětovným dlouhým stisknutím jej vypnete v jakémkoli režimu.

Režim restartování

Po zobrazení výsledku testování klikněte na tlačítko POWER, čímž se režim TESTOVÁNÍ znovu aktivuje přímo, není třeba čekat, až se vypne, abyste mohli kliknout na tlačítko POWER.

Nastavení jednotky formátu zobrazení výsledku

Vysvětlení 4 druhů jednotek v listu.

Hodnota	Význam
0	%BAC
1	‰BAC
2	Mg/l
3	g/l

Metoda nastavení

1. V režimu TESTOVÁNÍ po zapnutí výrobku dlouze stiskněte levé tlačítko (K1) během 4 sekund po zobrazení nápisu "WAIT", abyste přešli do režimu NASTAVENÍ BODŮ. Podívejte se na následující obrázek.
2. Poté kliknutím na levé tlačítko a pravé tlačítko (K1) (K2) vyberte požadovanou jednotku, po nastavení jednotky dlouze stiskněte pravé tlačítko K1 pro ukončení režimu NASTAVENÍ JEDNOTKY (UNIT SETTING) a návrat zpět do režimu TESTOVÁNÍ.
3. Pokud během 15 sekund nedojde k žádné operaci, zobrazí se "OFF/VYP", čímž se výrobek vypne.



Nastavení úrovně upozornění

Metoda nastavení

1. Dvojitým kliknutím na tlačítko POWER v režimu NASTAVENÍ JEDNOTKY (UNIT SETTING) přejdete do režimu nastavení UPOZORNĚNÍ, jak ukazuje následující obrázek.
2. Nejprve nastavte UPOZORNĚNÍ a poté kliknutím na levé tlačítko (K1) a pravé tlačítko (K2) nastavte data UPOZORNĚNÍ.
3. Po nastavení údajů CAUTION (UPOZORNĚNÍ) jedním kliknutím na tlačítko POWER (NAPÁJENÍ) přepněte na nastavení DANGER (NEBEZPEČÍ) a poté kliknutím na levé a pravé tlačítko K1 K2 nastavte údaje CAUTION (UPOZORNĚNÍ).
4. Po dokončení nastavení dvojitým kliknutím na tlačítko POWER ukončete režim UPOZORNĚNÍ a vraťte se zpět do režimu NASTAVENÍ JEDNOTKY (UNIT SETTING).



Upozornění $\leq 0.200\% \text{BAC}$



$0.210\% \text{BAC} \leq$ Upozor. $\leq 0.490\% \text{BAC}$



Nebezpečí $\geq 0.500\% \text{BAC}$

Režim kontroly záznamu REC

1. Během doby režimu TESTOVÁNÍ se dvojitým kliknutím na tlačítko POWER dostanete do režimu kontroly záznamu REC, kliknutím na levé a pravé tlačítko K1K2 zkontrolujte 1-32krát záznam TESTOVÁNÍ.
2. V režimu REC dvojitým kliknutím na tlačítko POWER ukončíte režim kontroly a vrátíte se zpět do režimu TESTOVÁNÍ.
3. Pokud během 15 sekund nedojde k žádné operaci, zobrazí se "OFF/VYP", čímž se výrobek vypne.



Prohlášení

1. Bez ohledu na to, zda je výrobek používán, nenesou výrobci a prodejci žádnou odpovědnost za porušení předpisů. Například: řízení pod vlivem alkoholu a řízení ve výškových provozech.
2. Každý člověk reaguje na alkohol jinak, takže výsledky testu jsou pouze orientační a nemohou sloužit jako kritérium při určování výsledku.

Běžné závady a jejich řešení

Závady	Důvod možné závady	Řešení
Napájení při selhání	Nesprávné vložení baterií	Instalace baterií ve správné polaritě
	Baterie s velmi nízkou spotřebou energie	Výměna nových alkalických baterií
	Porucha obvodu	Kontaktování poprodejního servisu
Foukání bez odezvy	Zahřívání se nedokončuje	Zahřátí po delší dobu
	Porucha obvodu	Kontaktování poprodejního servisu
Foukání bez výsledku	Zbytkový plyn v testeru	Opětovné zahřátí
	Nefoukání v plánovaném čase	Foukání během odpočítávání "BLOW"
Žádné foukání s výsledkem testu	Zbytkový plyn v testeru	"Zahřátí" po delší dobu
Rozdílný výsledek po několika testech	Testování co nejdříve po vypití	Testování po 20 minutách pití
	Rozdílný čas foukání	Hluboký nádech po dobu 3 - 5 sekund

Jednotky alkoholu v různých zemích

Ne.	BAC (koncentrace alkoholu v krvi)				BrAC (koncentrace alkoholu v dechu)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

Společné jednotky:

%BAC – USA

g/l – Evropské

mg/L BRAC – Japonsko

mg/100ml - Čína

‰BAC - Rusko

‰prom - Polsko

Údržba

- K čištění výrobku nepoužívejte čisticí prostředky, jako je benzen, ředidlo nebo benzín, aby nedošlo k poškození jeho povrchu.
- Nesmí spadnout ani do něj udeřit, jinak může dojít k poruše.
- Nepokoušejte se opravovat, přestavovat nebo demontovat žádné díly s výjimkou výměny baterie.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vyjmout baterie, abyste předešli poškození v důsledku vytečení baterií.

Výkonnostní parametr

- Rozsah měření:
- 0,000-0,199%BAC.
- 0,000-1,999 ‰BAC
- 0,000-1,999 g/l.
- 0,000-0,995 mg/l
- Alarmující úroveň: 0,05 % BAC; 0,5 ‰ BAC; 0,5 g/l; 0,25 mg
- Přesnost: $\pm 0,01$ %BAC; $\pm 0,1$ ‰BAC; $\pm 0,05$ mg/l
- Velikost: Délka 114 mm
- Šířka 51 mm
- Výška 18 mm
- Hmotnost: 60 g
- Baterie: 2× 1,5 V (baterie AA)
- Doba foukání; 5s
- Zobrazení: LCD displej s podsvícením
- Spotřeba proudu: pracovní proud ≤ 180 mA
- Klidový proud ≤ 40 μ A
- Teplota prostředí: -10 °C ~ 50 °C
- Vlhkost prostředí: $\leq 95\%$ BEZ rosení
- Předpokládaná doba provozu baterie: ≥ 300

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostné opatrenia

- Ďakujeme, že ste si vybrali a zakúpili tester koncentrácie alkoholu s digitálnym displejom.
- Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste sa ubezpečili, že môžete výrobok správne používať.
- Tento prístroj je zdravotníckym produktom; je určený na kontrolu nadmerného pitia alkoholu, aby ste sa udržali v dobrej kondícii, a to prostredníctvom testovania alkoholu v dychu a výpočtu obsahu alkoholu v krvi pomocou mikropočítača. Výrobok je použiteľný na rodinnú zdravotnú starostlivosť, ako aj na referenčné účely pri určovaní, či vodič šoféruje po požití alkoholu.
- Výsledok testu môže byť ovplyvnený viacerými aspektmi, ako je teplota prostredia, rôzne plyny v ovzduší, fajčenie atď. Výsledok je preto len orientačný a nemožno ho považovať za ospravedlnenie jazdy pod vplyvom alkoholu.
- Bez ohľadu na to, či ste tento výrobok použili, jeho výrobca a príslušní zástupcovia nenesú zodpovednosť za dopravné nehody spôsobené alkoholom, alebo iné nehody, ku ktorým došlo na základe súvisiacich predpisov a pravidiel.
- Keďže ľudský dych obsahuje niektoré kvasné plyny (zo žalúdka a čriev), niektoré plyny sa môžu pri teste objaviť aj bez požitia alkoholu.
- Keď sa po vypítí odporúča vydržať 20 minút, je to preto, že 20 minút je približne potrebných na to, aby sa alkohol vstrebal do krvi z tráviacich orgánov, a zvyšný alkohol, ktorý zostáva v ústach, sa tak dlho rozptyľuje.
- Pre presný výsledok neopakujte testovanie do 3 minút po uplynutí času.
- 20 minút pred testovaním nefajčite a nejedzte.
- V blízkosti testera nepoužívajte žiadne dráždivé látky, ako sú farby, insekticídy, alkoholy.
- Ak sa zariadenie spustilo päťkrát po sebe, zastavte sa na dve minúty a potom ho použite znova.
- Po požití alkoholu nevedte vozidlo!

Operácia

Počkajte 20 minút



Zákaz fajčenia



Žiadne jedenie



Žiadne pitie



BAC

Účinky špecifické pre dávku

0,020 – 0,039 %

Vo všeobecnosti nedochádza k strate koordinácie. Mierna eufória alebo strata plachosti. Depresívne účinky nie sú jasné.

0,040 – 0,069 %

Všeobecný pocit pohody, uvoľnenia, plachosť sa znižuje a pocit tepla. Radosť. Určité menšie zhoršenie uvažovania a pamäti. Zníženie opatrnosti. Vodičské schopnosti môžu byť zhoršené.

0,070 – 0,099 %

Mierne zhoršenie rovnováhy, reči, zraku, reakčného času a sluchu. Radosť. Úsudok a sebakontrola sú znížené. Opatrnosť, rozum a pamäť sú oslabené. Vodičské schopnosti sú vždy zhoršené.

0,100 – 0,129 %

Veľké zhoršenie motorickej koordinácie a strata správneho úsudku. Reč môže byť nezrozumiteľná. Zhorší sa rovnováha, zrak, reakčný čas a sluch. Eufória.

0,130 – 0,159 %

Hrubá motorická porucha a nedostatočná fyzická kontrola. Rozmazané videnie a veľká strata rovnováhy. Znížená eufória a začína sa objavovať stav, keď sa necítite dobre.

0,160 – 0,199 %

Prevláda úzkosť, nepokoj. Môže sa objaviť nevoľnosť. Pôsobí dojemom „nedbalého opilca“.

Príprava pred použitím

- Po otvorení balenia skontrolujte nižšie uvedené časti a komponenty. Ak niektorý z nich chýba, obráťte sa na jej predajcu.
- Príslušenstvo

1. Jeden detektor koncentrácie alkoholu s digitálnym displejom.

2. Jedna používateľská príručka.

3. Dve alkalické batérie AA (nie sú súčasťou dodávky).


4. 5 rúrok na vyfukovanie vzduchu.

5. Jedno vrecko.

Obsah balenia



Schéma komponentov

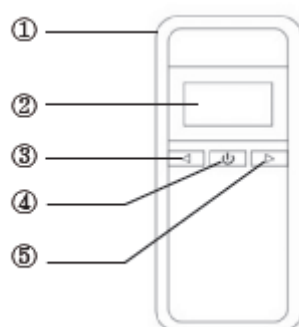

1. Konektor náustku

2. LCD displej

3. Ľavé tlačidlo (K1)

4. Tlačidlo
zapnutia/vypnutia

5. Pravé tlačidlo (K2)

Inštalácia batérie

1.Otvorte zadný kryt

2.Vložte dve 1,5 V alkalické batérie AA alebo dve batérie s rovnakou špecifikáciou do puzdra na batérie správnym spôsobom (ako je znázornené na obrázku 1) podľa značky „+“ a „-“ na puzdre a potom dobre zatvorte kryt (ako je znázornené na obrázku 2).

3.Nainštalujte zadný kryt

- Výmena batérie

Ak na LCD displeji bliká symbol batérie, znamená to, že batérie nie sú dostatočne nabité a je potrebné ich vymeniť, aby sa zabezpečila presnosť testu. Otvorte kryt batérií, vyberte batérie a znovu nainštalujte nové batérie s rovnakou špecifikáciou (ako je znázornené na obrázku). Ubezpečte sa, že staré batérie sú mimo dosahu detí, nepoužiteľné batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.



3. Priestor na batérie, 2. Priestor na náustky

Nastavenie formátu zobrazenia teploty


Stlačte tlačidlo napájania asi na 2 sekundy, LCD displej alkohol testera sa rozsvieti s jedným pípnutím. Obrázok (1)

Stlačením pravého tlačidla k2 nastavte prevod jednotiek teploty.



Ako používať alkohol tester


- Prevádzkový postup:
- Počkajte
- Stlačte tlačidlo napájania asi na 2 sekundy, LCD displej alkohol testera sa rozsvieti s jedným pípnutím.

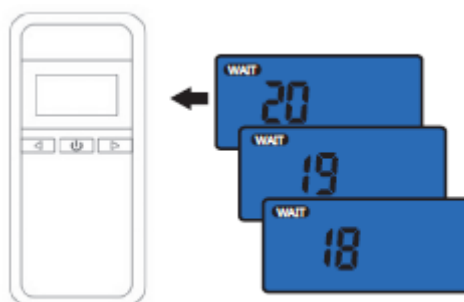


- Zobrazí sa symbol „WAIT“ a spustí sa odpočítavanie od 20 do 0, čo znamená, že tester je v režime zapnutia.
- POZNÁMKA
- Ak je prvé zapnutie neúspešné, tester sa automaticky resetuje a zapne sa znovu 1 – 2-krát.
- Pri veľkom množstve plynu a nečistôt adsorbovaných na povrchu snímača alkoholu, keď prvýkrát vyberiete tester z obalu, alebo po dlhom čase nepoužívania, tester potrebuje viac času na čistenie a vyčistenie snímača alkoholu. Mali by ste stlačiť tlačidlo napájania a skúsiť to niekoľkokrát, ak je to možné.

Test

- Symbol „RDY“ sa zobrazí, keď sa podarí zapnutie a  spustí sa odpočítavanie, ktoré indikuje, že tester je v testovacom režime.

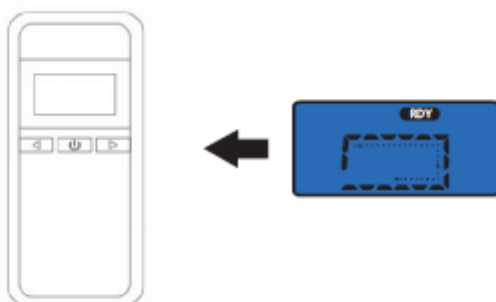

- Priložte tester k ústam a vdychujte 3 - 5 sekúnd.
- Analýza...

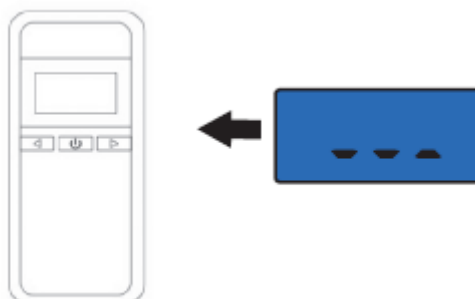

Výsledok testera si prečítajte na LCD displeji alkohol testera.



Upozornenie $\leq 0.200\% \text{BAC}$



$0.210\% \text{BAC} \leq$ Upozor
nenie $\leq 0.490\% \text{BAC}$



Nebezpečenstvo $\geq 0.500\% \text{BAC}$

Konverzia jednotiek



Automatické vypnutie

1. Po zobrazení výsledku na približne 10 sekúnd sa na 2 sekundy zobrazí symbol „vypnuté“ a alkohol tester sa vypne.
2. Ak je tester prehriaty automaticky sa vypne.
3. Dlhým stlačením tlačidla POWER prístroj zapnete a opätovným dlhým stlačením ho vypnete v akomkoľvek režime.

Režim reštartu

Po zobrazení výsledku testovania kliknite na tlačidlo POWER, aby ste znovu aktivovali režim TESTOVANIE priamo, nemusíte čakať, kým sa vypne, aby ste klikli na tlačidlo POWER.

Nastavenie jednotky formátu zobrazenia výsledku

Vysvetlenie 4 druhov jednotiek v zozname.

Hodnota	Význam
0	% BAC
1	‰ BAC
2	Mg/l
3	g/l

Metóda nastavenia

1. V režime TESTOVANIE po zapnutí výrobku dlho stlačte ľavé tlačidlo (K1) počas 4 sekúnd zobrazenia „WAIT“, aby ste prešli do režimu NASTAVENIE BODOV. Pozrite si nasledujúci obrázok.
2. Potom kliknutím na ľavé tlačidlo a pravé tlačidlo (K1) (K2) vyberte požadovanú jednotku, po nastavení jednotky dlhým stlačením pravého tlačidla K1 ukončíte režim UNIT SETTING a vráťte sa späť do režimu TESTING.
3. Ak sa do 15 sekúnd nevykoná žiadna operácia, zobrazí sa „OFF“, čím sa prístroj vypne.



Nastavenie úrovne upozornenia

Metóda nastavenia

1. Dvakrát kliknite na tlačidlo POWER (Napájanie) v režime UNIT SETTING (Nastavenie jednotky), aby ste prešli do režimu nastavenia CAUTION (Pozor), ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
2. Najprv nastavte CAUTION, potom kliknite na ľavé tlačidlo (K1) a pravé tlačidlo (K2) na nastavenie CAUTION údajov.
3. Po nastavení údajov CAUTION (UPOZORNENIE) jedným kliknutím na tlačidlo POWER (NAPÁJANIE) prepnete na nastavenie DANGER (NEBEZPEČIE) a potom kliknutím na ľavé a pravé tlačidlo K1 K2 nastavte údaje CAUTION (UPOZORNENIE).
4. Po dokončení nastavenia dvakrát kliknite na tlačidlo POWER, čím ukončíte režim CAUTION, a vráťte sa späť do režimu UNIT SETTING.



Upozornenie $\leq 0.200\%BAC$



$0.210\%BAC \leq$ Upozor
nenie $\leq 0.490\%BAC$



Nebezpečenstvo $\geq 0.500\%BAC$

Režim kontroly záznamu REC

1. V čase režimu TESTING dvakrát kliknite na tlačidlo POWER, aby ste sa dostali do režimu kontroly záznamu REcOrd, kliknite na ľavé a pravé tlačidlo K1 K2, aby ste skontrolovali 1-32-krát záznam TESTING.
2. V režime REC dvojitým kliknutím na tlačidlo POWER ukončíte režim kontroly a vráťte sa späť do režimu TESTING.
3. Ak sa do 15 sekúnd nevykoná žiadna operácia, zobrazí sa „OFF“, čím sa prístroj vypne.



Vyhlásenie

1. Bez ohľadu na to, či sa výrobok používa, výrobcovia a predajcovia nenesú žiadnu zodpovednosť za porušenia predpisov. Napríklad: jazda pod vplyvom alkoholu a prevádzka vo veľkých výškach.
2. Každý človek reaguje na alkohol inak, preto výsledky testu sú iba orientačné a nemôžu slúžiť ako kritérium pri určovaní výsledku.

Bežné poruchy a riešenia

Poruchy	Možný dôvod poruchy	Riešenie
Porucha napájania	Nesprávne vloženie batérií	Inštalácia batérií v správnej polarite
	Batérie s veľmi nízkou úrovňou energie	Výmena nových alkalických batérií
	Porucha obvodu	Kontaktovanie popredajného servisu
Fúkanie bez odozvy	Nedokončenie zahrievania	Zahrievajte dlhší čas
	Porucha obvodu	Kontaktovanie popredajného servisu
Fúkanie bez výsledku	Zvyškový plyn v testeri	Opätovné zahriatie
	Nefúkanie v plánovanom čase	Fúkanie počas odpočítavania času „BLOW“
Žiadne fúkanie s výsledkom testu	Zvyškový plyn v testeri	„Zahriatie“ po dlhšiu dobu
Rozdielny výsledok po niekoľkých testoch	Testovanie hneď po vypití	Testovanie po 20 minútach pitia
	Rozdielny čas fúkania	Hlboký nádych 3 – 5 sekúnd

Jednotky alkoholu v rôznych krajinách

Č.	BAC (koncentrácia alkoholu v krvi)				BrAC (koncentrácia alkoholu v dychu)	
	%	‰	g/l	mg/100 ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

Spoločné jednotky:

% BAC – USA

g/l – Európa

mg/L BRAC – Japonsko

mg/100 ml – Čína

‰ BAC – Rusko

‰ prom – Poľsko

Údržba

- Na čistenie výrobku nepoužívajte čistiace prostriedky ako je benzén, riedidlo, alebo benzín, aby ste nepoškodili jeho povrch.
- Nesmie spadnúť ani doň neudierajte, inak môže dôjsť k poruche.
- Nepokúšajte sa opravovať, prerábať ani demontovať žiadne časti okrem výmeny batérie.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odporúčame vám vybrať batérie, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku vytečenia batérie.

Parametre výkonu

- Rozsah merania:
- 0,000 – 0,199 % BAC.
- 0,000 – 1,999 ‰ BAC
- 0,000 – 1,999 g/l.
- 0,000 – 0,995 mg/l
- Alarmujúca úroveň: 0,05 % BAC; 0,5 ‰ BAC; 0,5 g/l; 0,25 mg
- Presnosť: $\pm 0,01$ % BAC; $\pm 0,1$ ‰ BAC; $\pm 0,05$ mg/l
- Rozmery: Dĺžka 114 mm
- Šírka 51 mm
- Výška 18 mm
- Hmotnosť: 60 g
- Batéria: 2× 1,5 V (batéria AA)
- Čas fúkania; 5 s
- Zobrazenie: LCD displej s podsvietením
- Spotreba prúdu: pracovný prúd ≤ 180 mA
- Pokojový prúd ≤ 40 μ A
- Teplota prostredia: -10 °C ~ 50 °C
- Vlhkosť prostredia: ≤ 95 % BEZ rosenia
- Predpokladaný čas prevádzky na batériu: ≥ 300

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Óvintézkedések

- Köszönjük, hogy kiválasztotta és megvásárolta a digitális kijelzős alkohol koncentráció-mérőt.
- Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy a terméket megfelelően tudja használni.
- Ez a készülék egy egészségügyi termék; célja, hogy ellenőrizze a túlzott alkoholfogyasztást, hogy Ön fitt maradjon, a leheletében lévő alkohol tesztelésével és a vér alkoholtartalmának mikroszámítógépen keresztül történő kiszámításával. A termék alkalmazható a családi egészségügyben, valamint referenciaként annak megállapítására, hogy a járművezető alkoholfogyasztás után vezetne.
- A vizsgálat eredményét számos tényező befolyásolhatja, mint például a környezeti hőmérséklet, a levegőben lévő különböző gázok, a dohányzás stb. Az eredmény csak tájékoztató jellegű, és nem tekinthető ürügynek az ittas vezetésre.
- Függetlenül attól, hogy Ön használta-e ezt a terméket, a gyártó és a megfelelő megbízottak nem felelősek az etanol miatt bekövetkezett közlekedési balesetekért vagy más, a vonatkozó előírások és szabályok szerint bekövetkezett balesetekért.
- Mivel az emberek lehelete tartalmaz néhány erjeszthető gázt (a gyomorból és a belekből), ezért egyes gázok akár italmentes körülmények között is tesztelhetők.
- Ivás után 20 perc eltelte után ajánlott használni a terméket, ez azért van, mert körülbelül 20 perc, amíg az alkohol felszívódik a vérben az emésztőszervekből, és a szájban maradó maradék alkohol ennyi idő alatt oszlik el.
- A pontos eredmény érdekében ne ismételje meg a tisztasági vizsgálatot 3 percen belül.
- A vizsgálat előtt 20 perccel ne dohányozzon és ne egyen.
- Ne használjon semmilyen irritáló anyagot a teszter közelében, például festéket, rovarirtókat, alkoholokat.
- Ha a készüléket egymás után ötször használta, kérjük, állítsa le két percre, majd használja újra.
 - Ne vezess alkoholfogyasztás után!

Művelet

Várjon 20 percet	Dohányzás tilos	Ne egyen	Ne igyon
			

BAC	Dózis-specifikus hatások
0.020-0.039%	Általában nincs koordinációvesztés. Enyhe öröm vagy a félténység elvesztése. Depresszív hatások nem egyértelműek.
0.040-0.069%	Általános jó közérzet, relaxáció, csökken a félténység és a melegség érzése. Öröm. A gondolkodás és a memória kisebb mértékű károsodása. Az óvatosság csökkenése. A vezetési képességek romlanak.
0.070-0.099%	Az egyensúly, a beszéd, a látás, a reakcióidő és a hallás enyhe romlása. Öröm. Az ítélőképesség és az önkontroll csökken. Az óvatosság, az értelem és a memória gyengül. A vezetési képesség mindig romlik.
0.100-0.129%	A motoros koordináció jelentős károsodása és a józan ítélőképesség elvesztése. A beszéd elmosódott lehet. Az egyensúly, a látás, a reakcióidő és a hallás romlik. Öröm.
0.130-0.159%	Súlyos motorhiba és elégtelen fizikai kontroll. Homályos látás és jelentős egyensúlyvesztés. Csökken az öröm és a rossz közérzet kezd megjelenni.
0.160-0.199%	Szorongás, nyugtalanság uralkodik el. Hányinger jelentkezhet. Kialakul a "hanyag részeg" megjelenés.

Használat előtti előkészítés

- A csomag felbontása után ellenőrizze az alábbi alkatrészeket és komponenseket. Ha valamelyik hiányzik, kérjük, forduljon a kereskedőjéhez.

- Tartozékok

1. Egy digitális kijelzős alkohol koncentráció-érzékelő.

2. Egy felhasználói kézikönyv.

3. Két AA alkáli elem. (Nem tartozék).


4. 5 légbefúvó cső.

5. Egy táska.

A csomag tartalma



Komponensek diagramja

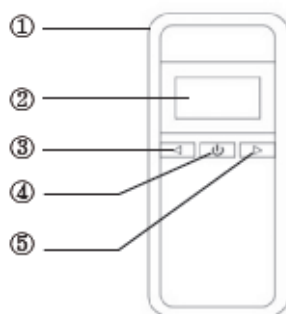

1. Szájrész csatlakozó

2. LCD kijelző

3. Bal gomb (K1)

4. Bekapcsoló gomb Be/Ki

5. Jobb gomb (K2)

Az akkumulátor beszerelése

1.Nyissa ki a hátsó borítót

2.Helyezzen be két 1,5 V-os AA alkáli elemet vagy két azonos specifikációjú elemet az elemtartóba a megfelelő módon (az 1. ábrán látható módon) a "+" és "-" jelzésnek megfelelően, majd zárja be a fedelet (a 2. ábrán látható módon).

3.Telepítse a hátsó borítást

- Akkumulátor csere

Ha az LCD kijelzőn az akkumulátor szimbólum villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor áramellátása nem elegendő, és a teszt pontosságának biztosítása érdekében ki kell cserélni az elemeket. Nyissa ki az elemfedelet, vegye ki az elemeket, és helyezze vissza az új, azonos specifikációjú elemeket (az ábrán látható módon). Ügyeljen arra, hogy a régi elemeket gyermekek elől elzárva tartsa, a használatatlan elemeket a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el.




- Akkumulátorrekesz, 2. Hely a légfúvó csövek számára

A hőmérséklet-kijelző formátumának beállítása


Nyomja meg a bekapcsológombot kb. 2 másodpercig, az alkoholtesztelő LCD kijelzője egy hangjelzéssel bekapcsol. Ábra (1)

Nyomja meg a jobb k2 billentyűt a hőmérsékleti egység átváltásának beállításához.

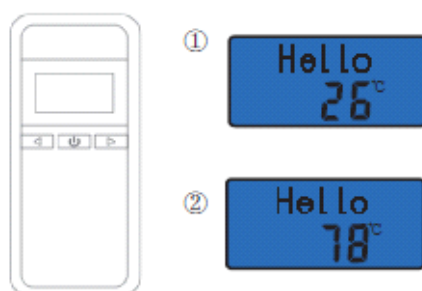

Hogyan kell használni az alkoholtesztet


- Működési eljárás:
- Várjon
- Nyomja meg a bekapcsológombot kb. 2 másodpercig, az alkoholtesztelő LCD kijelzője egy hangjelzéssel bekapcsol.

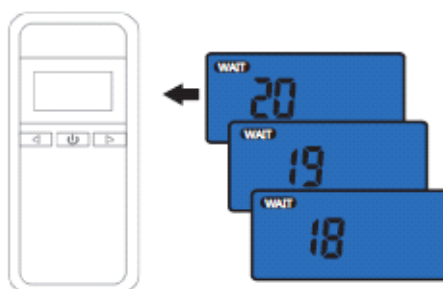


- Megjelenik a "WAIT" szimbólum, és elindul a 20-tól 0-ig tartó visszaszámlálás, ami azt jelzi, hogy a tesztelő várakozási üzemmódban van.
- MEGJEGYZÉS
- Ha az első indítás sikertelen, a teszter automatikusan visszaáll és 1-2 alkalommal újra bekapcsol.
- Mindig nagyszámú gáz és szennyeződés szívódik be az alkoholérzékelő felületén, amikor először veszi ki a tesztelőt a csomagolásból, vagy hosszú idő után használja a tesztelőt, több időre van szüksége az alkoholérzékelő tisztításához, akkor nyomja le a bekapcsológombot, és próbálja újra többször, ha lehetséges.

Teszt

- A "RDY" szimbólum megjelenik, amikor a bekapcsolás sikeres, és a  visszaszámlálás elindul, ami azt jelzi, hogy a teszter tesztelési üzemmódban van.

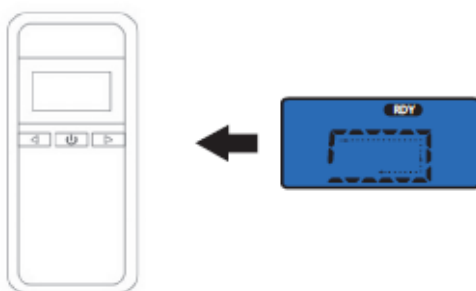

- Közelítse a szájához a terméket és fújja be a levegőt 3-5 másodpercig belélegezve.
- Elemzés...

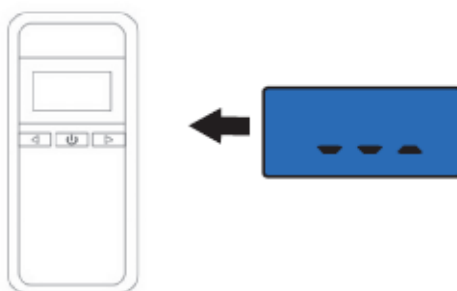

Olvassa le a teszter eredményét az alkoholtesztelő kijelzőjéről.



 **Caution** ≤ 0.200 %BAC



0.210 %BAC $\leq$  **Caution** ≤ 0.490 %BAC



 **Danger** ≥ 0.500 %BAC

Egységek átváltása



Automatikus kikapcsolás

1. Az eredményt körülbelül 10 másodpercig megjeleníti, majd az "off" szimbólum 2 másodpercig megjelenik, és az alkoholtesztér kikapcsol.
2. Ha a bemelegítés sikertelen, a tesztér automatikusan kikapcsol.
3. Nyomja meg hosszan a POWER gombot a termék bekapcsolásához, és nyomja meg újra hosszan a kikapcsoláshoz bármely üzemmódban.

Újraindítási mód

A tesztteredmény megjelenítése után kattintson a POWER gombra a TESZTELÉS üzemmód közvetlen újraaktiválásához. Nem kell megvárni, amíg kikapcsol, hogy megnyomja a POWER gombot.

Egység beállítása Eredmény kijelzése Formátum

Magyarázat a lapon szereplő 4 féle egységre.

Érték	Jelentése
0	%BAC
1	‰BAC
2	Mg/L
3	g/l

Beállítási módszer

1. A TESZTELÉS üzemmódban a termék bekapcsolása után nyomja meg hosszan a bal oldali gombot (K1) a "VÁRAKOZÁS" kijelzés megjelenését követő 4 másodpercen belül, hogy a POINTSETTING üzemmódba lépjen. Kérjük, ellenőrizze a következő képet.
2. Ezután kattintson a bal és a jobb gombra (K1) (K2) a szükséges egység kiválasztásához, az egység beállítása után nyomja meg hosszan a K1 jobb gombját az UNIT SETTING üzemmódból való kilépéshez és a TESTING üzemmódba való visszatéréshez.
3. Ha 15 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, akkor a termék kikapcsolásához a "OFF" felirat jelenik meg.



Riasztási szint beállítása

Beállítási módszer

1. Kattintson duplán a POWER gombra az UNIT SETTING üzemmódban, hogy a következő képen látható CAUTION beállítási módba lépjen.
2. Először állítsa be a CAUTION-t, majd kattintson a bal gombra (K1) és a jobb gombra (K2) a CAUTION adatok beállításához.
3. A CAUTION adatok beállítása után kattintson egyszer a POWER gombra a DANGER beállításra való átváltáshoz, majd kattintson a K1 K2 bal és jobb gombjára a CAUTION adatok beállításához.
4. A beállítás befejezése után kattintson duplán a POWER gombra a CAUTION módból való kilépéshez, és térjen vissza az UNIT SETTING módba.



 Caution ≤ 0.200 %BAC



0.210 %BAC $\leq$  Caution ≤ 0.490 %BAC



 Danger ≥ 0.500 %BAC

REC felvétel ellenőrzési mód

1. A TESTING módban kattintson duplán a POWER gombra, hogy belépjen a RECCrecord módba, kattintson a bal és jobb oldali K1K2 gombra a TESZTELÉSI rekord 1-32 alkalommal történő ellenőrzéséhez.
2. REC módban kattintson duplán a POWER gombra az ellenőrzési módból való kilépéshez és a TESTING módba való visszatéréshez.
3. Ha 15 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, akkor a termék kikapcsolásához a "OFF" felirat jelenik meg.



Nyilatkozat

1. Függetlenül attól, hogy a terméket használja-e, a gyártók és az eladók nem vállalnak felelősséget a jogsértésekért. Például: ittas vezetés és nagy magasságban végzett műveletek vezetése.
2. Minden ember másképp reagál az alkoholra, ezért a teszteredmények csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálhatnak kritériumként az eredmény meghatározásában.

Gyakori hibák és megoldások

Hibák	Lehetséges hibák Ok	Megoldás
Hibás tápegység	Helytelenül vannak behelyezve az elemek	Az elemek helyes polaritású behelyezése
	Nagyon kis teljesítményű elemek	Az új alkáli elemek cseréje
	Áramköri hiba	Kapcsolatfelvétel az értékesítési szervizvel
Fűtés nincs válasz	A bemelegítés nem fejeződik be	Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal
	Áramköri hiba	Kapcsolatfelvétel az értékesítési szervizvel
Fűtés nincs eredmény	Maradék gáz a tesztben	Újra bemelegítés
	Nem fűt a meghatározott időben	Fűtés a "BLOW" visszaszámlálás ideje alatt
Most Fűtés a teszt eredményel	Maradék gáz a tesztben	"Bemelegítés" több időre
Különböző eredmények több tesztelés után	Vizsgálat, rögtön ivás után történt	Vizsgálat 20 perc ivás után
	Eltérő fűtési idő	Mély lélegzetvétel 3-5 másodpercig

Különböző országos alkoholegységek

Nem.	BAC (véralkoholkoncentráció)				BrAC (alkoholkoncentráció a légzésben)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

Közös egységek:

%BAC - USAg/l

- Európaimg/L

BRAC - Japánmg/100ml

- Kína

‰BAC - Oroszország

‰prom - Lengyelország

Karbantartás

- Ne használja ezeket a tisztítószerket, például benzolt, hígítót vagy benzint a termék tisztításához, hogy elkerülje a felületének károsodását.
- Ne ejtse le, vagy ne üsse meg, különben meghibásodást okozhat.
- Az akkumulátor cseréjén kívül ne próbálja meg javítani, átépíteni vagy szétszerelni semmilyen alkatrészt.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ajánlott kivenni az elemeket, hogy megelőzze az akkumulátor szivárgása miatti károkat.

Teljesítmény paraméter

- Mérési tartomány:
- 0,000-0,199%BAC.
- 0,000-1,999‰BAC
- 0,000-1,999g/l.
- 0,000-0,995mg/l
- Riasztási szint: 0,05%BAC; 0,5‰BAC; 0,5g/l; 0,25mg
- Pontosság: $\pm 0,01\%$ BAC; $\pm 0,1\%$ ‰BAC; $\pm 0,05$ mg/l
- Az ábra mérete: Hossza 114mm
- Szélesség 51mm
- Magasság 18mm
- súly: 60g
- Elem: 2×1.5V (AA elem)
- fűjési idő; 5s
- Megjelenítés: LCD kijelző háttérvilágítással
- Áramfelvétel: munkaáram ≤ 180 mA
- Nyugalmi áram $\leq 40\mu$ A
- Környezeti hőmérséklet: -10 °C ~ 50 °C
- Környezeti páratartalom: $\leq 95\%$ NINCS pára
- Az akkumulátor várható élettartama: ≥ 300

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év jótállás vonatkozik. Ha a jótállási időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Vorsichtsmaßnahmen

- Vielen Dank für die Auswahl und den Kauf von Digitalanzeige Alkoholkonzentration Test Meter.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt richtig verwenden können.
- Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Gesundheitsprodukt, das dazu bestimmt ist, übermäßigen Alkoholkonsum zu kontrollieren, um Sie fit zu halten, indem es den Alkoholgehalt in der Atemluft misst und über einen Mikrocomputer den Alkoholgehalt im Blut berechnet. Das Produkt eignet sich für die Gesundheitsfürsorge in der Familie sowie als Referenz, um festzustellen, ob der Fahrer nach Alkoholkonsum fährt.
- Das Testergebnis kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. die Umgebungstemperatur, verschiedene Gase in der Luft, Rauchen usw. Das Ergebnis dient daher nur als Anhaltspunkt und darf nicht als Rechtfertigung für das Fahren nach Alkoholkonsum angesehen werden.
- Unabhängig davon, ob Sie dieses Produkt verwenden, sind der Hersteller und die entsprechenden Vertreter nicht verantwortlich für Verkehrsunfälle, die durch Ethanol oder andere Unfälle im Rahmen der entsprechenden Vorschriften und Regeln entstanden sind.
- Da der Atem des Menschen einige fermentierbare Gase (aus Magen und Darm) enthält, können einige Gase sogar unter Alkoholeinfluss getestet werden.
- Es wird empfohlen, nach dem Trinken 20 Minuten zu warten. Denn nach etwa 20 Minuten ist der Alkohol aus den Verdauungsorganen ins Blut übergegangen, und der im Mund verbliebene Restalkohol braucht so lange, um sich aufzulösen.
- Um ein genaues Ergebnis zu erhalten, wiederholen Sie den Test nicht innerhalb von 3 Minuten.
- Rauchen und essen Sie 20 Minuten vor dem Test nicht mehr.
- Verwenden Sie in der Nähe des Prüfgeräts keine anregenden Substanzen wie Farben, Insektizide oder Alkohole.
- Wenn Sie das Gerät fünfmal hintereinander benutzt haben, machen Sie bitte eine Pause von zwei Minuten und benutzen Sie es dann erneut.
- Fahren Sie nicht nach dem Trinken!

Operation

20 Minuten warten	Rauchen verboten	Kein Essen	Kein Alkoholkonsum
			

BAC	Dosisabhängige Wirkungen
0.020-0.039%	Im Allgemeinen kein Verlust der Koordination. Leichte Freude oder Verlust der Schüchternheit. Depressive Wirkungen sind nicht eindeutig.
0.040-0.069%	Allgemeines Wohlbefinden, Entspannung, Abbau der Schüchternheit und Wärmegefühl. Leichte Beeinträchtigung des Denkens und des Gedächtnisses. Herabsetzung der Vorsicht. Die Fahrtüchtigkeit kann beeinträchtigt sein.
0.070-0.099%	Leichte Beeinträchtigung des Gleichgewichts, der Sprache, des Sehvermögens, der Reaktionszeit und des Hörvermögens. Urteilsvermögen und Selbstbeherrschung sind vermindert. Vorsicht, Vernunft und Gedächtnis sind beeinträchtigt. Die Fahrtüchtigkeit ist immer beeinträchtigt.
0.100-0.129%	Starke Beeinträchtigung der motorischen Koordination und Verlust des Urteilsvermögens. Die Sprache kann undeutlich sein. Gleichgewicht, Sehvermögen, Reaktionszeit und Gehör werden beeinträchtigt.
0.130-0.159%	Grobmotorische Beeinträchtigung und mangelnde Körperbeherrschung. Verschwommenes Sehen und starker Verlust des Gleichgewichts. Verminderte Freude und beginnendes Unwohlsein.
0.160-0.199%	Angst und Unruhe überwiegen. Übelkeit kann auftreten. Erscheinungsbild von "stark betrunken".

Vorbereitung vor der Verwendung


- Nach dem Öffnen der Verpackung überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Teile und Komponenten. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Zubehör

1. Eine digitale Anzeige Alkoholkonzentration Detektor.
2. Ein Benutzerhandbuch.
3. Zwei AA-Alkalibatterien. (Nicht enthalten).
4. 5 Röhrchen zum reinblasen.
5. Eine Tasche.

Inhalt des Pakets



Komponenten Diagramm

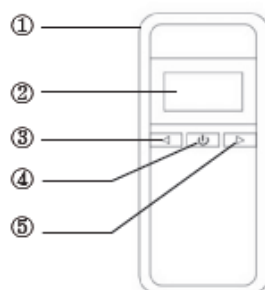

1. Mundstückanschluss

2. LCD-Anzeige

3. Linke Taste (K1)

4. Power-Taste Ein/Aus

5. Rechte Taste (K2)

Einsetzen der Batterie

1. öffnen Sie die hintere Abdeckung

Legen Sie zwei 1,5 V AA-Alkalibatterien oder zwei Batterien mit den gleichen Spezifikationen in das Batteriefach ein (siehe Abbildung 1) und schließen Sie den Deckel (siehe Abbildung 2).

3. montieren Sie die hintere Abdeckung

- Auswechseln der Batterien

Wenn das Batteriesymbol auf der LCD-Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass die Batterieleistung nicht ausreicht und die Batterien ausgetauscht werden müssen, um die Testgenauigkeit zu gewährleisten. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie neue Batterien mit denselben Spezifikationen ein (siehe Abbildung). Achten Sie darauf, die alten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren, und entsorgen Sie die unbrauchbaren Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften.




4. Batteriefach, 2. Platz für Mundstücke

Temperaturanzeigeformat einstellen


Drücken Sie die Einschalttaste ca. 2 Sekunden lang, die LCD-Anzeige des Alkoholtesters leuchtet auf und ein Piepton ertönt. Abbildung (1)

Drücken Sie die rechte Taste k2, um die Umrechnung der Temperatureinheit einzustellen.

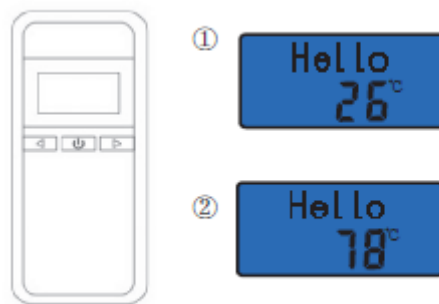

Verwendung des Alkoholtesters


- Operatives Verfahren:
- Warten
- Drücken Sie die Einschalttaste ca. 2 Sekunden, der LCD-Bildschirm des Alkoholtesters leuchtet auf und ein Piepton ertönt.

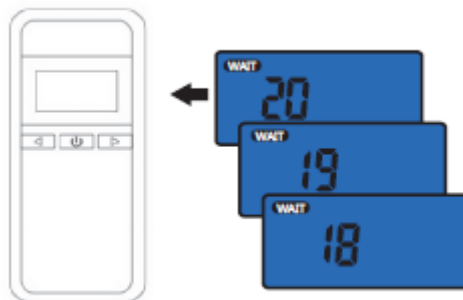


- Das "WAIT"-Symbol wird angezeigt und der Countdown von 20 bis 0 wird gestartet, um anzuzeigen, dass sich das Prüfgerät im Aufwärmmodus befindet.
- ANMERKUNG
- Wenn der erste Startvorgang fehlschlägt, wird der Tester automatisch zurückgesetzt und muss erneut 1-2 Mal gestartet werden.
- Es gibt immer Verunreinigungen z.B. Gas auf der Oberfläche des Alkohol-Sensor. Wenn Sie den Tester zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen oder ihn lange Zeit nicht benutzt haben, brauchen Sie mehr Zeit, um den Alkoholsensor zu reinigen und zum Einschalten. Sie sollten die Einschalttaste erneut drücken und mehrere Male versuchen, wenn möglich.

Test

- Das "RDY"-Symbol wird angezeigt, wenn das Aufladen erfolgreich war, und der  Countdown wird gestartet, um anzuzeigen, dass sich das Prüfgerät im Testmodus befindet.

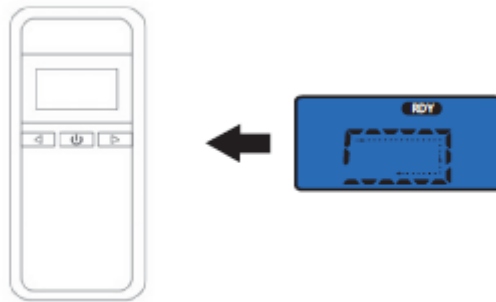

- Tief einatmen und 3-5 Sekunden blasen.
- Die Analyse beginnt.

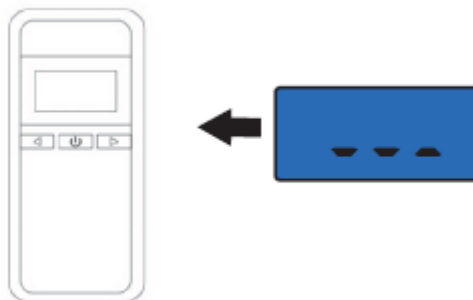

Lesen Sie das Testergebnis auf der LCD-Anzeige des Alkoholtesters ab.



Vorsicht $\leq 0.200\% \text{BAC}$



$0.210\% \text{BAC} \leq$ Vorsicht $0.490\% \text{BAC}$



Gefahr $\geq 0.500\% \text{BAC}$

Umrechnung von Einheiten



Automatisches Ausschalten

1. nachdem das Ergebnis für ca. 10 Sekunden angezeigt wird, erscheint das "Aus"-Symbol für 2 Sekunden und der Alkoholtester wird ausgeschaltet.

(2) Wenn die Aufwärmfunktion deaktiviert ist, schaltet sich das Prüfgerät automatisch aus.

3. drücken Sie lange auf die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie erneut lange auf die Taste, um es auszuschalten.

Neustart-Modus

Nachdem das Testergebnis angezeigt wurde, klicken Sie auf die POWER-Taste, um den Testmodus direkt wieder zu aktivieren. Sie müssen nicht warten, bis das Gerät ausgeschaltet ist, um auf die POWER-Taste zu klicken.

Einheit einstellen Ergebnisanzeige Format

Erläuterung der 4 Arten von Einheiten auf dem Blatt.

Wert	Bedeutung
0	%BAC
1	‰BAC
2	Mg/L
3	g/l

Einstellung Methode

1. im Testmodus nach dem Einschalten des Geräts die linke Taste (K1) innerhalb von 4 Sekunden nach der Anzeige von "WAIT" lange drücken, um in den PUNKTEINSTELLUNGS-Modus zu gelangen. Bitte prüfen Sie das folgende Bild.

Klicken Sie dann auf die linke Taste und rechte Taste (K1) (K2), um das gewünschte Gerät auszuwählen, und drücken Sie nach der Einstellung des Geräts lange auf die rechte Taste von K1, um den Einstellungs-Modus zu verlassen und zum Modus PRÜFEN zurückzukehren.

3. Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird "OFF" angezeigt und das Gerät schaltet aus.



Alarmstufe festlegen

Einstellung Methode

1. Machen Sie einen Doppelclick auf die POWER-Taste und gelangen in den EINSTELLUNGSMODUS, um in den VORSICHTSEINSTELLUNGS-MODUS zu gelangen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Richten Sie zuerst die ACHTUNG ein und klicken Sie dann auf die linke Taste (K1) und die rechte Taste (K2), um die ACHTUNG-Daten einzurichten.

Nachdem Sie die ACHTUNG-Daten eingestellt haben, klicken Sie einmal auf die POWER-Taste, um zur Einstellung GEFAHR zu wechseln, und klicken Sie dann auf die linke und rechte Taste von K1 K2, um die ACHTUNG-Daten einzustellen.

Nach Beendigung der Einstellung doppelklicken Sie auf die POWER-Taste, um den GEFAHR-Modus zu verlassen und zum Einstellungs-Modus zurückzukehren.



Vorsicht $\leq 0.200\%BAC$



$0.210\%BAC \leq$ Vorsicht $\leq 0.490\%BAC$



Gefahr $\geq 0.500\%BAC$

REC-Aufnahmeprüfungsmodus

1. während des Testmodus doppelklicken Sie auf die POWER-Taste, um in den Aufzeichnungsprüfungsmodus zu gelangen, klicken Sie auf die linke und rechte Taste (K1, K2), um die 1-32-fache Testaufzeichnung zu prüfen.

Doppelklicken Sie im Aufnahmemodus auf die Taste POWER, um den Prüfmodus zu verlassen und zum Testmodus zurückzukehren.

3. wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird "OFF" angezeigt, um das Gerät schaltet aus.



Erklärung

1. unabhängig davon, ob das Produkt verwendet wird, tragen Hersteller und Verkäufer keine Verantwortung für die Verstöße. Beispiel: Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren in großen Höhen.

Jeder Mensch reagiert anders auf Alkohol, so dass die Testergebnisse nur als Anhaltspunkt dienen und nicht als Kriterium für die Bestimmung des Ergebnisses herangezogen werden können.

Häufige Fehler und Lösungen

Fehler	Mögliche Fehler Ursache	Lösung
Strom-Fehler	Falsch eingelegte Batterien	Einsetzen der Batterien in der richtigen Polarität
	Batterien mit sehr geringer Leistung	Auswechseln der neuen Alkalibatterien
	Fehler im Stromkreis	Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst
Blasen keine Reaktion	Aufwärmen wird nicht abgeschlossen	Mehr Zeit zum Aufwärmen
	Fehler im Stromkreis	Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst
Blasen ohne Ergebnis	Restgas im Prüfgerät	Wieder aufwärmen
	Nicht in der vorgesehenen Zeit blasen	Blasen während der "BLOW"-Countdown-Zeit
Ohne Blasen mit Testergebnis	Restgas im Prüfgerät	Mehr Zeit zum Aufwärmen
Unterschiedliches Ergebnis nach mehreren Versuchen	Testen, sobald Sie trinken	Prüfung nach 20 Minuten nach dem Trinken
	Blaszeit unterschiedlich	Tief einatmen für 3 - 5 Sekunden

Verschiedene Länder-Alkohol-Einheiten

Nummer.	BAC (Blutalkoholkonzentration)				BrAC (Atemalkoholkonzentration)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

Gemeinsame Einheiten:

%BAC – USA g/l

- Europa mg/L

BRAC – Japan mg/100ml

- China

‰BAC - Russland

‰prom - Polen

Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Reinigungsmittel wie Benzol, Verdünner oder Benzin, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Lassen Sie es nicht fallen und schlagen Sie nicht dagegen, sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Versuchen Sie nicht, Teile zu reparieren, umzubauen oder zu zerlegen, mit Ausnahme des Batteriewechsels.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie die Batterien herausnehmen, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

Leistungsparameter

- Messbereich:
- 0,000-0,199%BAC.
- 0,000-1,999‰BAC
- 0,000-1,999 g/l.
- 0,000-0,995mg/l
- Alarmstufe: 0,05%BAC; 0,5‰BAC; 0,5g/l; 0,25mg
- Genauigkeit: $\pm 0,01\%$ BAC; $\pm 0,1\%$ ‰BAC; $\pm 0,05$ mg/l
- Größe des Geräts: Länge 114mm
- Breite 51mm
- Höhe 18 mm
- Gewicht: 60g
- Batterie: 2×1,5V (AA-Batterie)
- Ausblaszeit; 5s
- Anzeige: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Stromverbrauch: Arbeitsstrom ≤ 180 mA
- Ruhestrom $\leq 40\mu$ A
- Umgebungstemperatur: -10°C~50°C
- Umgebungsfeuchtigkeit: $\leq 95\%$ Luftfeuchtigkeit
- Batterielebensdauer: ≥ 300

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.