


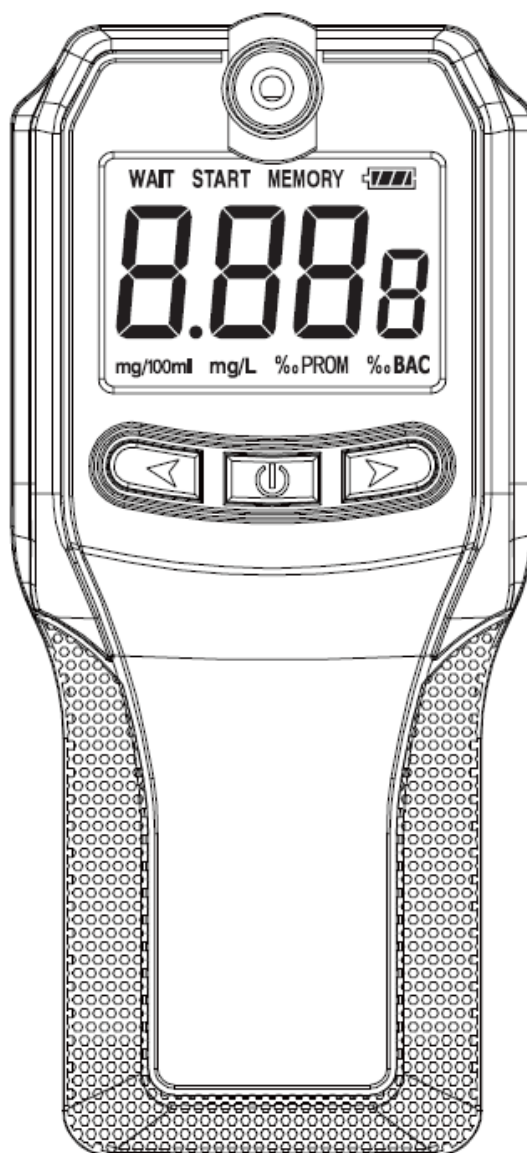

Digital Alcohol Tester

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 16
Čeština	17 – 30
Slovenčina	31 – 44
Magyar	45 – 58
Deutsch	59 – 73

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Introduction

Thank you for choosing our product! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the user manual carefully before use. Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us

The Digital Breathalyzer is a quick, easy, and reliable way to test your BAC (Blood Alcohol Concentration). The device is portable and easy to use. Your BAC results are displayed after 10 seconds on a bright, easy to read VA screen. You can change the units of measurement and set a user-defined BAC threshold for testing. Remember: do NOT drink and drive or operate other machinery!

Warnings and Safety Instructions

Due to the physical difference of every person, the test results vary from person to person. The testing results of the Digital Breathalyzer are for reference only. The Digital Breathalyzer is NOT similar to the devices used by law enforcement. This test and your test result CAN NOT be used as juridical proof in case of law encounters. is not responsible or liable for any behaviour that might break the law.

Before using your Digital Breathalyzer, read the following:

- If you have not used the Digital Breathalyzer before, it is important that you read and follow the instructions as stated in the user manual. Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Digital Breathalyzer. Misuse of the Digital Breathalyzer can result in personal injury, or destruction of the device and of the installations.
- This device should NOT be used by persons (including children) with physical, sensory, or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Use the Digital Breathalyzer only for purposes described in this user manual.
- The Digital Breathalyzer is designed and intended for private, non-commercial use only.
- Do NOT drink and drive or operate other machinery. Do NOT let another person drink and drive or operate other machinery. Make sure to always assign a designated driver.
- The alcohol level in your blood can keep increasing up to 2 hours after drinking your last alcoholic beverage. A continuous negative test result cannot be guaranteed.
- Excessive drinking can damage your health.
- Do NOT drink or smoke for at least 20 minutes before testing. Rinse your mouth with water before testing.
- Only perform the test in a temperature range between 0°C - 45°C. Performing the test in temperatures outside of this range can lead to false test results.
- For better performance and a longer battery life, avoid using the product at extreme high or extreme low temperatures or in a static environment, such as in hot weather or a sunbaking car, besides a fire, on a hot surface or in a cold environment.
- Do NOT blow smoke, liquid, or food residue into the device.
- Conditions that increase the amount of ketones on your breath, such as diabetes or low calorie intake may cause false test results.
- Do NOT clean the Digital Breathalyzer with any chemical detergents.
- Use a standard 5V adaptor to charge the product.
- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the product. This can damage the device.
- Keep the Digital Breathalyzer away from children when using and storing.

Receiving your Shipment

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Ordering Information


Digital Breathalyzer - Model EK-9 1 2 - EAN 8720195250180

Contents of Package

Digital Breathalyzer — Model EK—9 12 - EAN 8720195250180


Included Accessories:

- A: Breathalyzer x1
- B: Mouthpieces x1 0
- C: USB cable x1
- D: User manual x1
- E: Storage bag x1

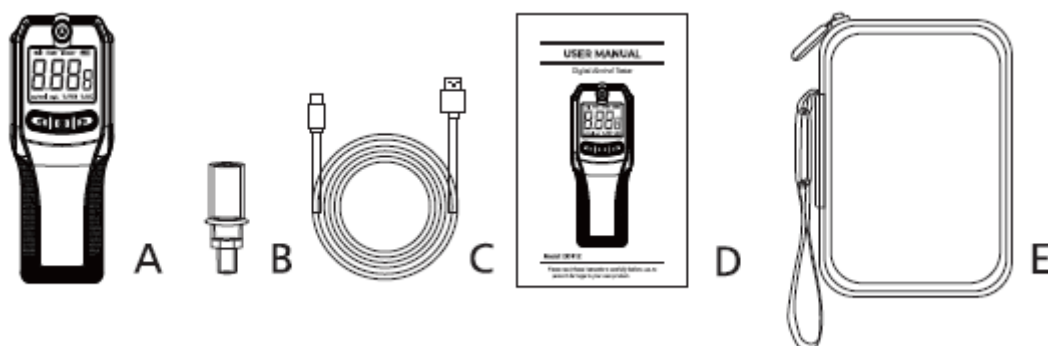

Product Features

Product Overview

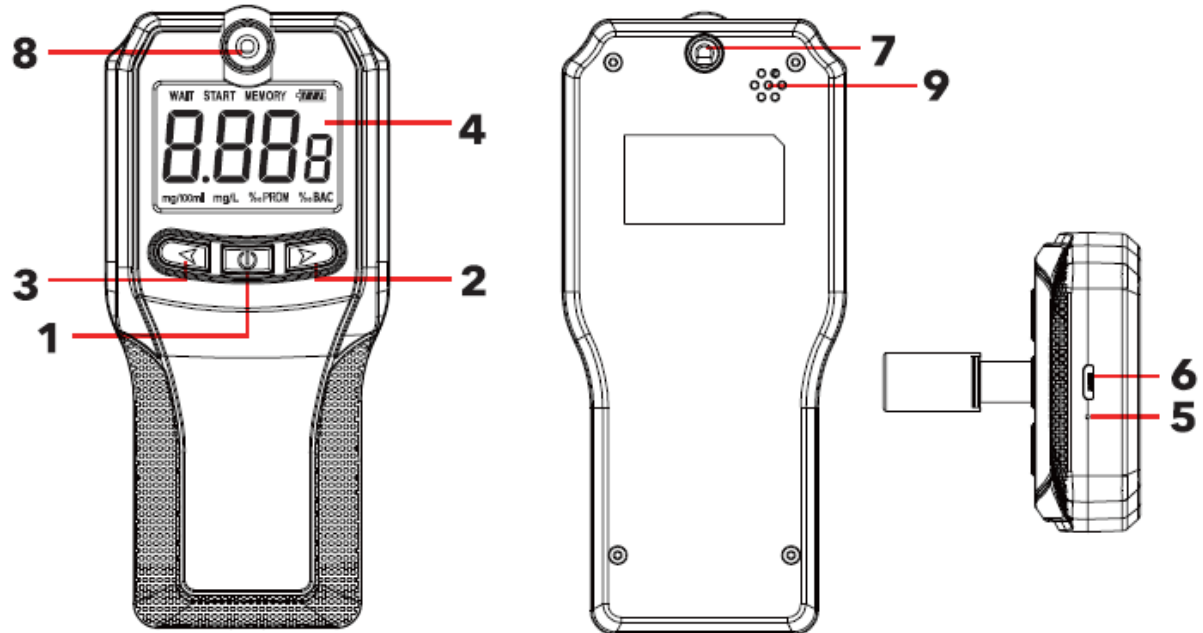

- 1. Power button
- 2. Right button
- 3. Left button
- 4. VA screen - 9. Alarm
- 5. Charging indicator light
- 6. USB-charging port
- 7. Ventilation hole
- 8. Collapsible mouthpiece hole
- 8. Collapsible mouthpiece hole

Product Specifications

Technical Data

Charging Voltage	5V	Weight	126 g
Battery Capacity	Lithium Batter 1000 mAh	Warm-up Time	<10 s
Working Current	~50 mA	Blowing Time	4,5 s
Continues Testing Times	800~1000 times	Response Time	<5 s
Working Temperature	0 °C – 45 °C	Sensor	Fuel Cell Sensor
Charing Time	3 hours	Size	165x62x22 mm

Performance Specifications

Testing Range:

0.000~0.500 %BAC

0.000~5.000 ‰

BAC 0.000~2.500 mg/L

0.000~0.500 g/L

0~500 mg/100ml

0.000~5.000 ‰PROM

NOTE: HI is displayed if the detection result is out of detection range

Unit Explanation

BAC	Blood Alcohol Concentration (The percent of alcohol in a person's bloodstream)
%BAC	How many grams of alcohol are present in 100 ml of blood
‰BAC	How many grams of alcohol are present in 1000 ml of blood
g/L	How many grams of alcohol are present in one litre of blood
Mg/100 mL	How many milligrams of alcohol are present in 100 ml of blood
BrAc	Breath Alcohol Concentration (The percent of alcohol in a person's breath)
Mg/L	How many milligrams of alcohol are present in one litre of blood

Comparison Chart of Alcohol Concentration

%BAC America

g/L Europe

mg/L BrAc Japan

mg/100ml China

See the table on the next page:

No.	BAC (Blood Alcohol Concentration)				BrAC (Breath Alcohol concentration)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

1. If the deviations of 2 successive readings are both larger than 0,01%BAC or 0.1 ‰BAC or 0.05mg/L, you need to take the test again.
2. Do not block the side air outlet when you're blowing
3. There will be a deviation between the testing value and the true value when the battery of the product is running low. Use the Digital Breathalyzer when it is fully loaded.
4. The testing results cannot be used as evidence in court
5. Do not indulge in excessive drinking.

Operation Instructions

Unit Settings

1. Press the Power button for 2 seconds. In the upper left corner of the screen the word "WAIT" During this countdown, press the left button to start the setting mode to enter the preferred unit.
2. When you are in the unit setting mode, press the left button to turn to the next page and press the right button to go to the previous page. Select your preferred unit (%BAC, ‰BAC, M//L, //L, MQ/100M), ‰PROM).
3. After selecting the preferred unit, press the Power button to secure the unit setting and exit the unit mode

- Alert Triggering Value (Warning/Danger Value) Settings

You can customize the warning and danger value according to your local standard of the legal alcohol limit when driving. There are 3 indications:

- a. Safe: Indicates a safe state.
- b. Warning: Alert, indicates a warning state before the drunk driving state. The alarm will make a beeping sound.
- c. Danger: Indicates a drunk driving state. The alarm will make a beeping sound that will last for 10 seconds.


1. Turn on the Digital Breathalyzer. In the upper left corner of the screen the word "WAIT" Press the Right button to start the setting mode to enter the alert triggering value.
2. When you have entered the setting mode, press the left button to increase the warning value and press the right button to decrease the warning value. Press the Power button to save your setting and to start the setting mode to enter the danger value.
3. When you have entered the setting mode, Press the left button to increase the danger value and press the right button to decrease the danger value. Press the Power button to save the trigger value settings and to exit the unit setting mode. You will automatically go back to the alcohol testing mode.

Default Value of Triggering Alarm


	%BAC	‰BAC	‰Prom	G/L	Mg/100ml	Mg/L
Safe	0 – 0,02	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0-20	0-0,1
Warning	0,02-0,05	0,2-0,5	0,2-0,5	0,2-0,5	0-50	0,1-0,25
Danger	≥0,05	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥50	≥0,25

Alcohol Testing

1. Press the Power button for 2 seconds and the Digital Breathalyzer will turn on after you hear a beeping sound.
2. In the upper left corner of the screen the word “WAIT” This means that the device is starting its warm-up sequence.

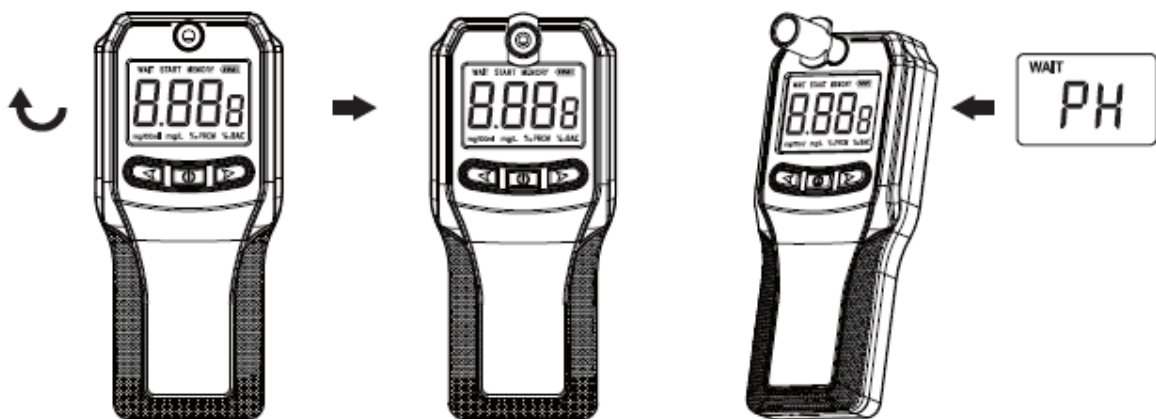

3. After warming up, the word "START" will be displayed on the screen and the Digital Breathalyzer is ready for use. Make sure to start the test within 10 seconds after the word "START" has appeared. Take a deep breath and blow steadily (softly, continuously, and evenly) into the mouthpiece for 4-5 seconds.

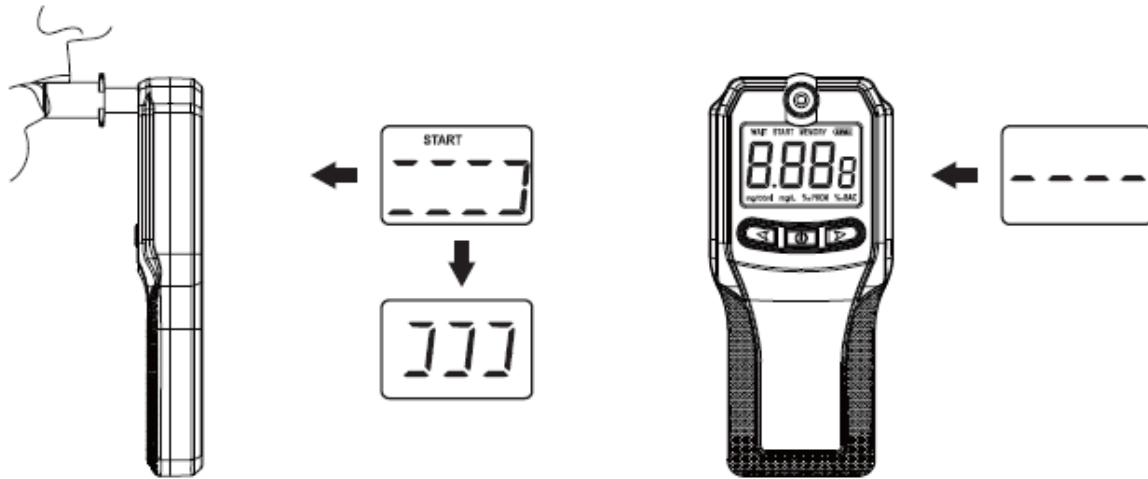

4. Wait for the device to analyse the testing result after blowing and read the results from the screen.



Other Functions

Restart Mode

1. After you have finished the test and have the results, press the Power button to restart the Digital Breathalyzer. After restarting, the device will start its warm-up sequence automatically and you can take the next test.
2. Wait for at least 3 minutes between each test to get the most accurate test readings.

Memory Mode

1. After turning the Digital Breathalyzer on, the word "WAIT" will be displayed in the upper left corner of the screen. Press the Power button to enter the memory mode. The Digital Breathalyzer can store and display 123 test results.
2. Press the left button to check the previous test results from oldest to newest.
3. Press the right button to check the previous test results from newest to oldest.
4. Press the Power button to exit the memory mode.

Automatic Power Off

1. If the Digital Breathalyzer is not used for 15 seconds after showing the last test results, the device will turn off automatically. The word "OFF" will flash twice on the display and the alarm will beep twice.
2. The product will turn off automatically if its warming-up sequence is interrupted
3. Press the Power button for 2 seconds to turn the Digital Breathalyzer

Low Battery Indication

The battery is low, and the Digital Breathalyzer needs to be charged when the power icon in the upper right corner of the screen indicates a low battery or "Lo" appears on the screen after you have turned the device on.

Charging Indication

When the Digital Breathalyzer cannot be turned on or the battery is running low, you can charge the device with a USB cable (included) and a 5V adapter (not included). The indicator light turns red when the device is charging, and green when the device is fully charged.

Note: The Digital Breathalyzer will turn off automatically when you plug in the USB charging cable for a safer use.

Voltage Protection

The Digital Breathalyzer can be charged with any 5V adapter. If you charge it with a nonstandard adapter, the device will go in auto-protection mode and the charging indicator light will not light up. The charging indicator light will function normally after you switch to a standard 5V adapter to charge the device.

Maintenance and Cleaning

Do not clean the Digital Breathalyzer with any chemical detergents. Use a soft, dry anti-static cloth to wipe the device.

Storage

Store the Digital Breathalyzer in a clean dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

Disposal – Recycle

Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Digital Breathalyzer with the household waste. For proper recycling, please take these products to a designated collection point. Please contact your local authority or your household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Uživatelská příručka k produktu obsahuje funkce produktu, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Pro zajištění správné a bezpečné funkce výrobku si před použitím pečlivě přečtěte návod k použití. Pro bezpečné používání se vždy řiďte pokyny. Pokud máte k výrobku jakékoli dotazy nebo se vyskytnou jakékoli problémy, kontaktujte nás prosím

Digitální dechový analyzátor je rychlý, snadný a spolehlivý způsob, jak zjistit koncentraci alkoholu v krvi. Přístroj je přenosný a snadno se používá. Výsledky měření BAC se zobrazí po 10 sekundách na jasném a snadno čitelném VA displeji. Můžete měnit jednotky měření a nastavit uživatelem definovanou hranici BAC pro testování. Nezapomeňte: NEŘÍDTE pod vlivem alkoholu ani neobsluhujte jiné stroje!

Upozornění a bezpečnostní pokyny

Vzhledem k fyzické odlišnosti každého člověka se výsledky testů u jednotlivých osob liší. Výsledky testování digitálním dechovým analyzátozem jsou pouze orientační. Digitální dechový analyzátor NENÍ podobný přístrojům používaným orgány činnými v trestním řízení. Tento test a výsledek vašeho testu NELZE použít jako právní důkaz v případě střetu se zákonem. není odpovědný za žádné chování, které by mohlo porušovat zákon, ani za něj nenese odpovědnost.

Před použitím digitálního dechového analyzátoru si přečtěte následující informace:

- Pokud jste digitální dechový analyzátor dosud nepoužívali, je důležité, abyste si přečetli pokyny uvedené v uživatelské příručce a postupovali podle nich. Uvědomte si rizika a důsledky vyplývající z nesprávného použití digitálního dechového analyzátoru. Nesprávné použití digitálního analyzátoru dechu může mít za následek zranění osob nebo zničení přístroje a zařízení.
- Tento přístroj NESMÍ používat osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby (včetně dětí), které nemají s přístrojem zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly poučeny o používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Digitální dechový analyzátor používejte pouze k účelům popsáným v této uživatelské příručce.
- Digitální dechový tester je navržen a určen pouze pro soukromé, nekomerční použití.
- NEŘÍDTE pod vlivem alkoholu ani neobsluhujte jiné stroje. NEDOVOLTE jiné osobě, aby řídila pod vlivem alkoholu nebo obsluhovala jiné stroje. Dbejte na to, abyste vždy určili vhodného řidiče.
- Hladina alkoholu v krvi se může zvyšovat až 2 hodiny po vypití posledního alkoholického nápoje. Trvale negativní výsledek testu nelze zaručit.
- Nadměrné pití alkoholu může poškodit vaše zdraví.
- Nejméně 20 minut před testováním NEPIJTE ani NEKUŘTE. Před testováním si vypláchněte ústa vodou.
- Test provádějte pouze v teplotním rozmezí 0 °C - 45 °C. Provedení testu při teplotách mimo tento rozsah může vést k chybným výsledkům testu.
- Pro lepší výkon a delší životnost baterie nepoužívejte výrobek při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách nebo ve statickém prostředí, například v horkém počasí nebo v autě rozpáleném sluncem, vedle ohně, na horkém povrchu nebo v chladném prostředí.
- Do přístroje nefoukejte kouř, tekutiny ani zbytky jídla.
- Stavby, které zvyšují množství ketolátek v dechu, jako je cukrovka nebo nízký příjem kalorií, mohou způsobit falešné výsledky testu.
- Digitální dechový analyzátor NEČISTĚTE žádnými chemickými čisticími prostředky.
- K nabíjení výrobku použijte standardní 5V adaptér.
- Výrobek nepřestavujte, neopravujte ani nerozebírejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Digitální dechový analyzátor při používání a skladování uchovávejte mimo dosah dětí.

Přijem zásilky

Při přebírání zásilky se ujistěte, že její obsah odpovídá seznamu balení. Upozorněte svého distributora na chybějící položky. Pokud se zdá, že je zařízení poškozeno, neprodleně podejte reklamaci u dopravce a neprodleně informujte svého distributora a uveďte podrobný popis poškození. Poškozený obal si uschovejte pro doložení reklamace.

Informace pro objednání

Digitální dechový analyzátor - model EK-9 1 2 - EAN 8720195250180

Obsah balení

Digitální dechový analyzátor - model EK-9 12 - EAN 8720195250180

Dodávané příslušenství:


A: Dechový analyzátor x1

B: Náustky x10

C: USB kabel x1


D: Uživatelská příručka x1

E: Úložná taška x1

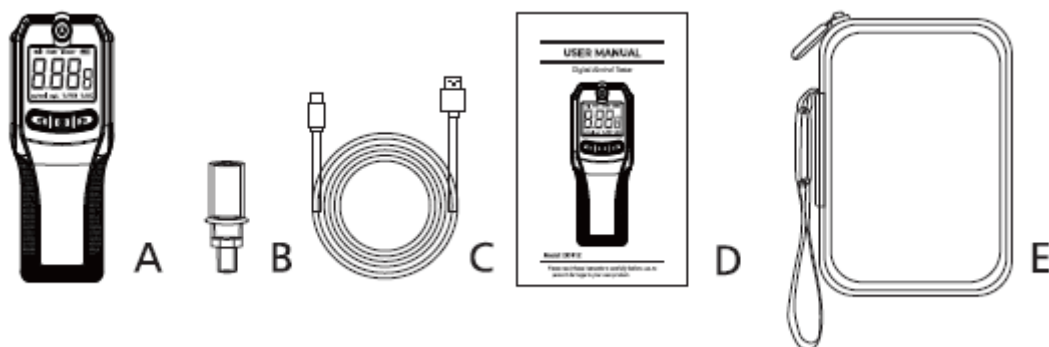

Vlastnosti produktu

Přehled produktu

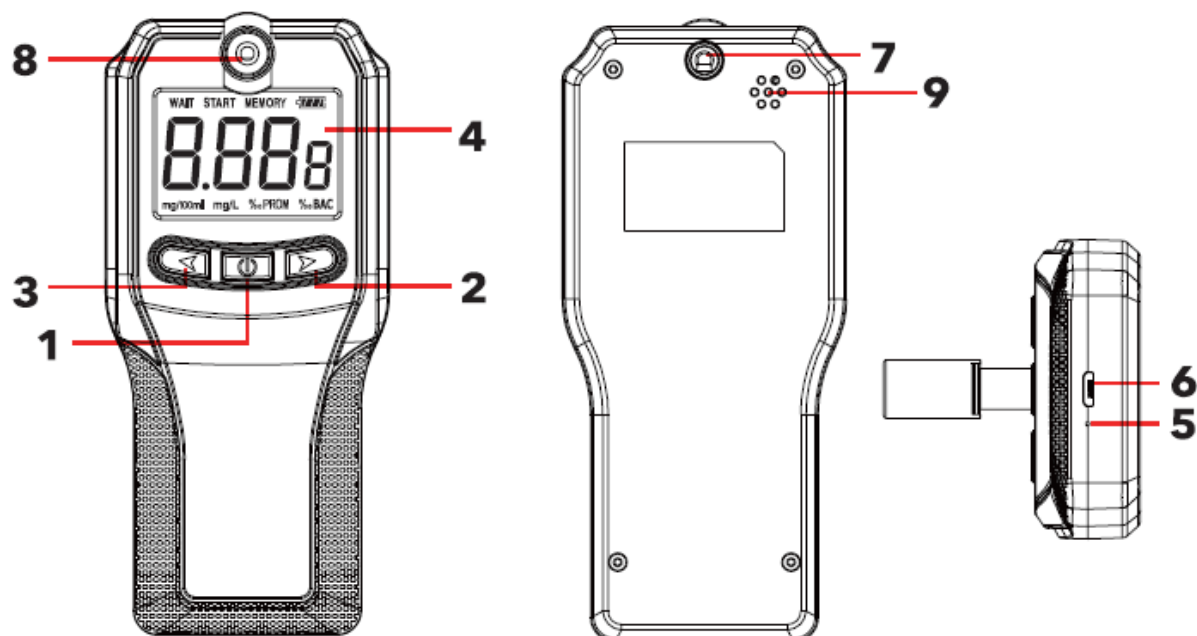

- 1. Tlačítko napájení
- 2. Pravé tlačítko
- 3. Levé tlačítko
- 4. Obrazovka VA
- 5. Kontrolka nabíjení
- 6. Nabíjecí port USB
- 7. Větrací otvor
- 8. Skládací otvor pro náustek
- 9. Alarm

Specifikace produktu

Technické údaje

Nabíjecí napětí	5V	Hmotnost	126 g
Kapacita baterie	Lithiová baterie 1000 mAh	Doba zahřívání	<10 s
Pracovní proud	~50 mA	Doba foukání	4,5 s
Doba nepřetržitého testování	800~1000krát	Doba odezvy	<5 s
Pracovní teplota	0 °C - 45 °C	Senzor	Senzor palivového článku
Doba napájení	3 hodiny	Velikost	165x62x22 mm

Specifikace výkonu

Rozsah testování:

0,000~0,500 %BAC

0.000~5.000 ‰

BAC 0,000~2,500 mg/l

0,000 ~ 0,500 g/l

0 ~ 500 mg/100ml

0,000~5,000 ‰ PROM.

POZNÁMKA: HI se zobrazí, pokud je výsledek detekce mimo detekční rozsah.

Vysvětlení jednotky

BAC	Koncentrace alkoholu v krvi (procento alkoholu v krvi)
%BAC	Kolik gramů alkoholu je obsaženo ve 100 ml krve
‰BAC	Kolik gramů alkoholu je obsaženo v 1000 ml krve
g/L	Kolik gramů alkoholu je obsaženo v jednom litru krve
Mg/100 ml	Kolik miligramů alkoholu je obsaženo ve 100 ml krve
BrAc	Koncentrace alkoholu v dechu (procento alkoholu v dechu)
Mg/l	Kolik miligramů alkoholu je obsaženo v jednom litru krve?

Srovnávací graf koncentrace alkoholu

%BAC America

g/L Evropa

mg/LBrAX Japonsko

mg/100ml Čína

Viz tabulka na následující straně:

Č,	BAC (koncentrace alkoholu v krvi)				BrAC (koncentrace alkoholu v dechu)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

1. Pokud jsou odchylky dvou po sobě jdoucích měření větší než 0,01 % BAC nebo 0,1 ‰ BAC nebo 0,05 mg/l, je třeba provést test znovu.

2. Při foukání neblokujte boční výstup vzduchu.

3. Při vybití baterie výrobku dojde k odchylce mezi testovací a skutečnou hodnotou. Digitální dechový analyzátor používejte, když je plně nabitý.

4. Výsledky testů nelze použít jako důkaz u soudu.

5. Nepodléhejte nadměrnému pití alkoholu.

Návod k obsluze

Nastavení jednotky

1. Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí nápis "WAIT". Během tohoto odpočítávání stiskněte levé tlačítko pro spuštění režimu nastavení pro vstup do preferované jednotky.

2. Když jste v režimu nastavení jednotky, stisknutím levého tlačítka přejdete na další stránku a stisknutím pravého tlačítka přejdete na předchozí stránku. Vyberte preferovanou jednotku (%BAC, ‰BAC, M//L, //L, MQ/100M), ‰PROM).

3. Po výběru preferované jednotky stiskněte tlačítko napájení, abyste zajistili nastavení jednotky a ukončili režim jednotky.

- Nastavení hodnoty spuštění výstrahy (hodnota varování/nebezpečí)

Hodnotu výstrahy a nebezpečí můžete přizpůsobit podle místní normy pro povolený limit alkoholu při řízení. K dispozici jsou 3 indikace:

a. Bezpečné: Označuje bezpečný stav.

b. Varování: Výstraha, označuje výstražný stav před stavem řízení pod vlivem alkoholu. Alarm vydá zvukový signál.

c. Nebezpečí: Označuje stav řízení pod vlivem alkoholu. Alarm vydá zvukový signál, který trvá 10 sekund.

1. Zapněte digitální dechový analyzátor. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí nápis "WAIT" (čekat). Stisknutím pravého tlačítka spustíte režim nastavení pro zadání hodnoty spuštění výstrahy.

2. Po vstupu do režimu nastavení stiskněte levé tlačítko pro zvýšení hodnoty výstrahy a stiskněte pravé tlačítko pro snížení hodnoty výstrahy. Stisknutím tlačítka napájení uložíte nastavení a spustíte režim nastavení pro zadání hodnoty nebezpečí.


3. Po vstupu do režimu nastavení stiskněte levé tlačítko pro zvýšení hodnoty nebezpečí a stiskněte pravé tlačítko pro snížení hodnoty nebezpečí. Stisknutím tlačítka napájení uložíte nastavení hodnoty a ukončíte režim nastavení jednotky. Automaticky se vrátíte do režimu testování alkoholu.

Výchozí hodnota spuštění alarmu


	%BAC	‰BAC	‰Prom	G/L	Mg/100ml	Mg/l
Bezpečné	0 – 0,02	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0-20	0-0,1
Varování	0,02-0,05	0,2-0,5	0,2-0,5	0,2-0,5	0-50	0,1-0,25
Nebezpečí	≥0,05	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥50	≥0,25

Testování na alkohol

1. Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy a digitální dechový analyzátor se zapne poté, co uslyšíte pípnutí.
2. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí nápis "WAIT" To znamená, že zařízení zahajuje zahřívací sekvenci.

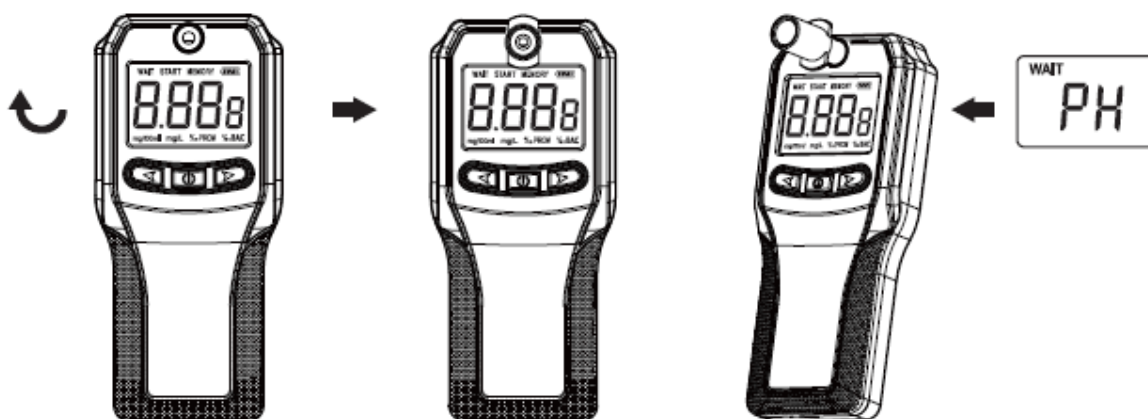

3. Po zahřátí se na displeji zobrazí nápis "START" a digitální dechový analyzátor je připraven k použití. Dbejte na to, abyste test spustili do 10 sekund po zobrazení nápisu "START". Zhluboka se nadechněte a foukejte rovnoměrně (jemně, plynule a rovnoměrně) do náustku po dobu 4-5 sekund.

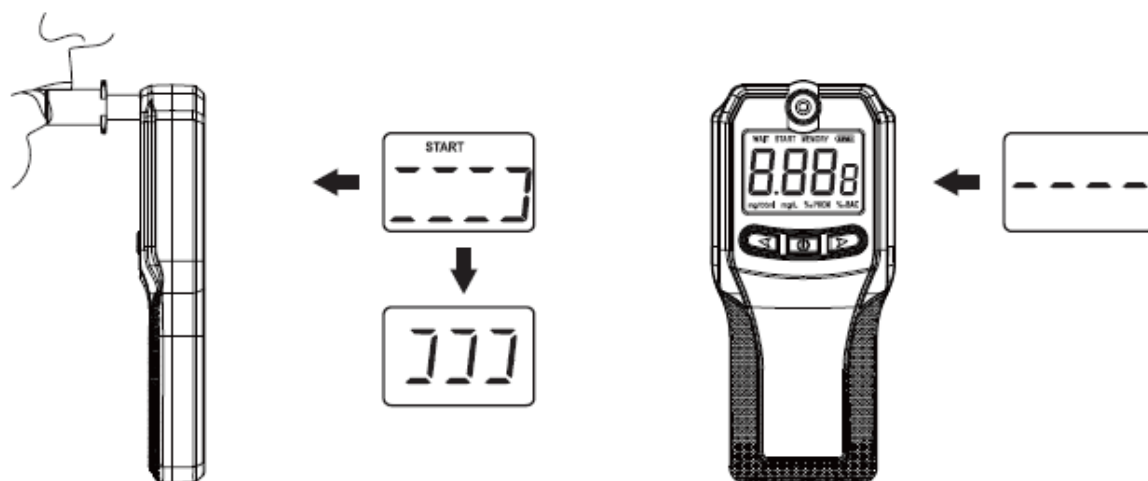

4. Počkejte, až přístroj po vyfouknutí analyzuje výsledek testování, a přečtěte si výsledky z obrazovky.



Další funkce

Režim restartování

1. Po dokončení testu a získání výsledků digitální dechový analyzátor restartujte stisknutím tlačítka napájení. Po restartování přístroj automaticky zahájí zahřívací sekvenci a vy můžete provést další test.
2. Mezi jednotlivými testy vyčkejte alespoň 3 minuty, abyste dosáhli co nejpřesnějších hodnot.

Paměťový režim

1. Po zapnutí digitálního dechového analyzátoru se v levém horním rohu obrazovky zobrazí nápis "WAIT". Stisknutím tlačítka napájení přejděte do paměťového režimu. Digitální dechový analyzátor může uložit a zobrazit 123 výsledků testů.
2. Stisknutím levého tlačítka zkontrolujte předchozí výsledky testů od nejstarších po nejnovější.
3. Stisknutím pravého tlačítka zkontrolujte předchozí výsledky testů od nejnovějších po nejstarší.
4. Paměťový režim ukončíte stisknutím tlačítka napájení.

Automatické vypnutí

1. Pokud digitální dechový analyzátor nepoužijete po dobu 15 sekund od zobrazení posledních výsledků testu, přístroj se automaticky vypne. Na displeji dvakrát zabliká nápis "OFF" a dvakrát zazní zvukový signál.
2. Pokud dojde k přerušení zahřívací sekvence, výrobek se automaticky vypne.
3. Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete digitální dechový analyzátor.

Indikace slabé baterie

Baterie je vybitá a digitální dechový analyzátor je třeba nabít, pokud ikona napájení v pravém horním rohu obrazovky signalizuje vybitou baterii nebo se na obrazovce po zapnutí přístroje zobrazí nápis "Lo".

Indikace nabíjení

Pokud digitální dechový analyzátor nelze zapnout nebo se vybíjí baterie, můžete zařízení nabíjet pomocí kabelu USB (je součástí dodávky) a adaptéru 5V (není součástí dodávky). Indikátor svítí červeně, když se zařízení nabíjí, a zeleně, když je zařízení plně nabitě.

Poznámka: Digitální dechový analyzátor se automaticky vypne, když připojíte nabíjecí kabel USB, aby bylo jeho používání bezpečnější.

Napěťová ochrana

Digitální dechový analyzátor lze nabíjet jakýmkoli 5V adaptérem. Pokud jej budete nabíjet nestandardním adaptérem, zařízení přejde do režimu automatické ochrany a kontrolka nabíjení se nerozsvítí. Kontrolka nabíjení bude normálně fungovat poté, co zařízení přepnete na standardní 5V adaptér pro nabíjení.

Údržba a čištění

Digitální dechový analyzátor nečistěte žádnými chemickými čisticími prostředky. K otírání přístroje používejte měkký, suchý antistatický hadřík.

Úložiště

Digitální dechový analyzátor skladujte na čistém a suchém místě. Neskladujte přístroj při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.

Likvidace - Recyklace

Přispějte k čistšímu životnímu prostředí! Nevyhazujte digitální dechový analyzátor do domovního odpadu. Pro správnou recyklaci odнесите tyto výrobky na určené sběrné místo. Bližší informace o nejbližším určeném sběrném místě získáte na místním úřadě nebo u služby likvidace domovního odpadu.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt! Na zabezpečenie správneho a bezpečného fungovania výrobku si pred použitím pozorne prečítajte návod na použitie. Vždy dodržiavajte pokyny na bezpečné používanie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku alebo sa vyskytnú akékoľvek problémy, kontaktujte nás

Digitálny dychový analyzátor je rýchly, jednoduchý a spoľahlivý spôsob testovania koncentrácie alkoholu v krvi. Prístroj je prenosný a ľahko sa používa. Výsledky BAC sa zobrazia po 10 sekundách na jasnej, ľahko čitateľnej VA obrazovke. Môžete zmeniť jednotky merania a nastaviť používateľom definovanú hraničnú hodnotu BAC pre testovanie. Nezabudnite: NEŠOFÉRUJTE pod vplyvom alkoholu ani neobsluhujte iné stroje!

Upozornenia a bezpečnostné pokyny

Vzhľadom na fyzickú odlišnosť každého človeka sa výsledky testov u jednotlivých osôb líšia. Výsledky testovania digitálnym dychovým analyzátorom sú len orientačné. Digitálny dychový analyzátor NIE JE podobný zariadeniam, ktoré používajú orgány činné v trestnom konaní. Tento test a váš výsledok testu NEMÔŽE byť použitý ako právny dôkaz v prípade stretov so zákonom. nenesie zodpovednosť za žiadne správanie, ktoré by mohlo porušovať zákon.

Pred použitím digitálneho dychového analyzátora si prečítajte nasledujúce informácie:

- Ak ste digitálny dychový analyzátor ešte nepoužívali, je dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali pokyny uvedené v návode na použitie. Uvedomte si riziká a dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania digitálneho analyzátora dychu. Nesprávne používanie digitálneho analyzátora dychu môže mať za následok zranenie osôb alebo zničenie prístroja a zariadení.
- Toto zariadenie NESMÚ používať osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby (vrátane detí) s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami o zariadení, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Digitálny dychový analyzátor používajte len na účely opísané v tejto používateľskej príručke.
- Digitálny dychový analyzátor je navrhnutý a určený len na súkromné, nekomerčné použitie.
- NEPITE a nevedzte vozidlo ani neobsluhujte iné stroje. NEDOVOLTE inej osobe, aby šoférovala pod vplyvom alkoholu alebo obsluhovala iné stroje. Dbajte na to, aby ste vždy určili vhodného vodiča.
- Hladina alkoholu v krvi sa môže zvyšovať až 2 hodiny po vypití posledného alkoholického nápoja. Nie je možné zaručiť nepretržitý negatívny výsledok testu.
- Nadmerné pitie alkoholu môže poškodiť vaše zdravie.
- Aspoň 20 minút pred testovaním NEPITE ani nefajčite. Pred testovaním si vypláchnite ústa vodou.
- Test vykonávajte len v teplotnom rozsahu 0 °C – 45 °C. Vykonanie testu pri teplotách mimo tohto rozsahu môže viesť k chybným výsledkom testu.
- Pre lepší výkon a dlhšiu životnosť batérie nepoužívajte výrobok pri extrémne vysokých alebo extrémne nízkych teplotách alebo v statickom prostredí, napríklad v horúcom počasí alebo v aute rozpálenom slnkom, vedľa ohňa, na horúcom povrchu, alebo v chladnom prostredí.
- Do zariadenia NEFÚKAJTE dym, tekutiny ani zvyšky jedla.
- Stavby, ktoré zvyšujú množstvo ketónov v dychu, ako napríklad cukrovka alebo nízky príjem kalórií, môžu spôsobiť falošné výsledky testu.
- Digitálny dychový analyzátor NEČISTITE žiadnymi chemickými čistiacimi prostriedkami.
- Na nabíjanie výrobku používajte štandardný 5 V adaptér.
- Výrobok neprerábajte, neopravujte ani nerozoberajte. Môže to viesť k poškodeniu zariadenia.
- Digitálny dychový analyzátor pri používaní a skladovaní uchovávajte mimo dosahu detí.

Prijatie zásielky

Pri preberaní zásielky sa ubezpečte, že jej obsah zodpovedá zoznamu balenia. Upozornite svojho distribútora na všetky chýbajúce položky. Ak sa zdá, že zariadenie je poškodené, okamžite podajte reklamáciu u dopravcu a ihneď to oznámte svojmu distribútorovi, pričom podrobne popíšte prípadné poškodenie. Poškodený obal si uschovajte na doloženie reklamácie.

Informácie pre objednanie


Digitálny dychový analyzátor – model EK-9 1 2 – EAN 8720195250180

Obsah balenia

Digitálny dychový analyzátor – model EK-9 12 – EAN 8720195250180


Dodávané príslušenstvo:

- A: Dychový analyzátor ×1
- B: Náustky ×10
- C: USB kábel ×1
- D: Používateľská príručka ×1
- E: Úložná taška ×1

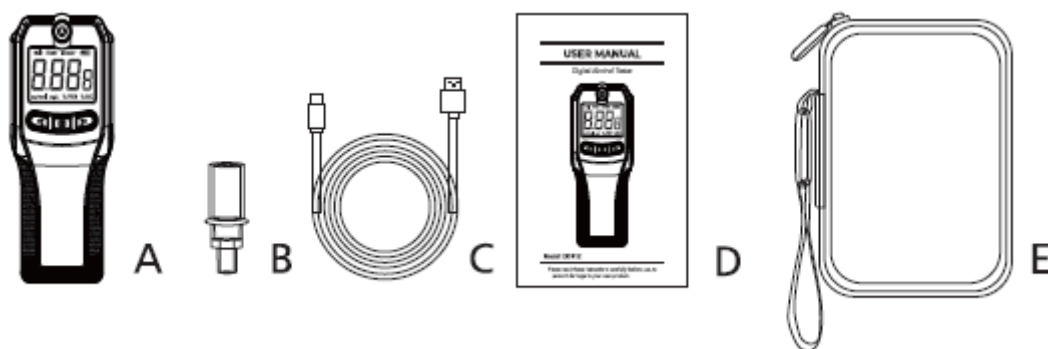

Vlastnosti produktu

Prehľad produktu

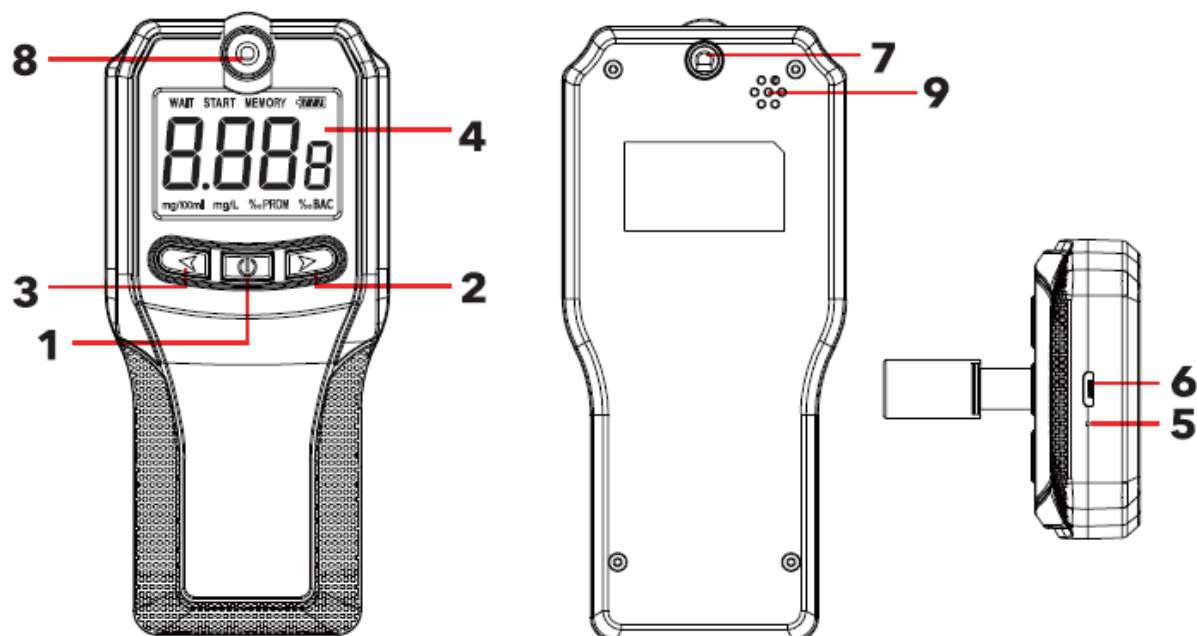

- 1. Tlačidlo napájania
- 2. Pravé tlačidlo
- 3. Ľavé tlačidlo
- 4. Obrazovka VA
- 5. Indikátor nabíjania
- 6. Port USB na nabíjanie
- 7. Vetrací otvor
- 8. Sklopný otvor na náustok
- 9. Alarm

Špecifikácia produktu

Technické údaje

Nabíjacie napätie	5 V	Hmotnosť	126 g
Kapacita batérie	Lítiová batéria 1 000 mAh	Čas zahrievania	<10 s
Pracovný prúd	~50 mA	Čas fúkania	4,5 s
Pokračuje testovanie	800 ~1 000 krát	Čas odozvy	<5 s
Pracovná teplota	0 °C - 45 °C	Senzor	Senzor palivového článku
Doba napájania	3 hodiny	Velkosť	165 × 62 × 22 mm

Špecifikácia výkonu

Rozsah testovania:

0,000 ~ 0,500 % BAC

0.000 ~ 5.000 ‰

BAC 0,000 ~ 2,500 mg/l

0,000 ~ 0,500 g/l

0 ~ 500 mg/100ml

0,000 ~ 5,000 ‰ PROM

POZNÁMKA: HI sa zobrazí, ak je výsledok detekcie mimo detekčného rozsahu

Vysvetlenie jednotky

BAC	Koncentrácia alkoholu v krvi (percento alkoholu v krvi)
% BAC	Koľko gramov alkoholu sa nachádza v 100 ml krvi
‰ BAC	Koľko gramov alkoholu sa nachádza v 1 000 ml krvi
g/L	Koľko gramov alkoholu sa nachádza v jednom litri krvi
Mg/100 ml	Koľko miligramov alkoholu sa nachádza v 100 ml krvi
BrAc	Koncentrácia alkoholu v dychu (percento alkoholu v dychu)
Mg/l	Koľko miligramov alkoholu sa nachádza v jednom litri krvi

Porovnávací graf koncentrácie alkoholu

% BAC Amerika

g/L Európa

mg/LBrAX Japonsko

mg/100 ml Čína

Pozri tabuľku na nasledujúcej strane:

Č.	BAC (koncentrácia alkoholu v krvi)				BrAC (koncentrácia alkoholu v dychu)	
	%	‰	g/l	mg/100 ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

1. Ak sú odchýlky dvoch po sebe nasledujúcich meraní väčšie ako 0,01 % BAC alebo 0,1 ‰ BAC alebo 0,05 mg/l, musíte test zopakovať.

2. Pri fúkaní neblokujte bočný výstup vzduchu

3. Keď sa batéria výrobku vybije, dôjde k odchýlke medzi testovacou hodnotou a skutočnou hodnotou. Digitálny dychový analyzátor používajte, keď je úplne nabitý.

4. Výsledky testovania nemožno použiť ako dôkaz na súde

5. Nepodliehajte nadmernému pitiu alkoholu.

Návod na obsluhu

Nastavenia jednotky

1. Stlačte tlačidlo napájania na 2 sekundy. V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí nápis „WAIT“. Počas tohto odpočítavania stlačte ľavé tlačidlo na spustenie režimu nastavenia, aby ste vstúpili do preferovanej jednotky.

2. Keď ste v režime nastavenia jednotky, stlačením ľavého tlačidla prejdete na ďalšiu stránku a stlačením pravého tlačidla prejdete na predchádzajúcu stránku. Vyberte požadovanú jednotku (% BAC, ‰ BAC, M//L, //L, MQ/100M), ‰ PROM).

3. Po výbere preferovanej jednotky stlačte tlačidlo napájania, aby ste zabezpečili nastavenie jednotky a ukončili režim jednotky.

- Nastavenia hodnoty spustenia výstrahy (hodnota varovania/nebezpečenstva)

Hodnotu výstrahy a nebezpečenstva môžete prispôbiť podľa miestnej normy povoleného limitu alkoholu pri jazde. K dispozícii sú 3 indikácie:

a. Bezpečné: Označuje bezpečný stav.

b. Varovanie: Výstraha, označuje výstražný stav pred stavom jazdy pod vplyvom alkoholu. Alarm vydá pípavý zvuk.

c. Nebezpečenstvo: Označuje stav, keď vodič vedie pod vplyvom alkoholu. Alarm vydá zvukový signál, ktorý trvá 10 sekúnd.

1. Zapnite digitálny dychový analyzátor. V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí nápis „WAIT“ (čakať). Stlačením pravého tlačidla spustíte režim nastavenia na zadanie hodnoty spustenia výstrahy.

2. Po vstupe do režimu nastavenia stlačte ľavé tlačidlo pre zvýšenie hodnoty výstrahy a stlačte pravé tlačidlo pre zníženie hodnoty výstrahy. Stlačením tlačidla napájania uložíte nastavenie a spustíte režim nastavenia na zadanie hodnoty nebezpečenstva.


3. Po vstupe do režimu nastavenia stlačte ľavé tlačidlo pre zvýšenie hodnoty nebezpečenstva a stlačte pravé tlačidlo pre zníženie hodnoty nebezpečenstva. Stlačením tlačidla Power uložíte nastavenia hodnoty spúšte a opustíte režim nastavenia jednotky. Automaticky sa vrátite do režimu testovania alkoholu.

Predvolená hodnota spustenia alarmu


	%BAC	‰BAC	‰Prom	G/L	Mg/100ml	Mg/l
Bezpečné	0 – 0,02	0 – 0,2	0 – 0,2	0 – 0,2	0 – 20	0 – 0,1
Upozornenie	0,02 – 0,05	0,2 – 0,5	0,2 – 0,5	0,2 – 0,5	0 – 50	0,1 – 0,25
Nebezpečenstvo	≥0,05	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥50	≥0,25

Testovanie na alkohol

1. Stlačte tlačidlo napájania na 2 sekundy a digitálny dychový analyzátor sa zapne po tom, ako budete počuť pípnutie.
2. V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí nápis „WAIT“ to znamená, že zariadenie začína svoju zahrievaciu sekvenciu.

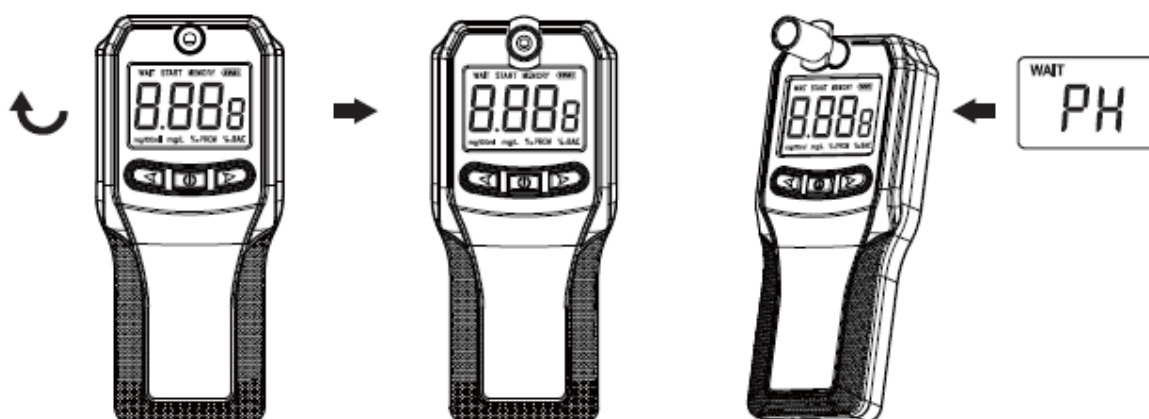

3. Po zahriatí sa na displeji zobrazí nápis „START“ a digitálny dychový analyzátor je pripravený na použitie. U bezpečte sa, že ste test spustili do 10 sekúnd po zobrazení nápisu „START“. Zhlboka sa nadýchnite a rovnomerne (jemne, nepretržite a rovnomerne) fúkajte do náustka počas 4 – 5 sekúnd.

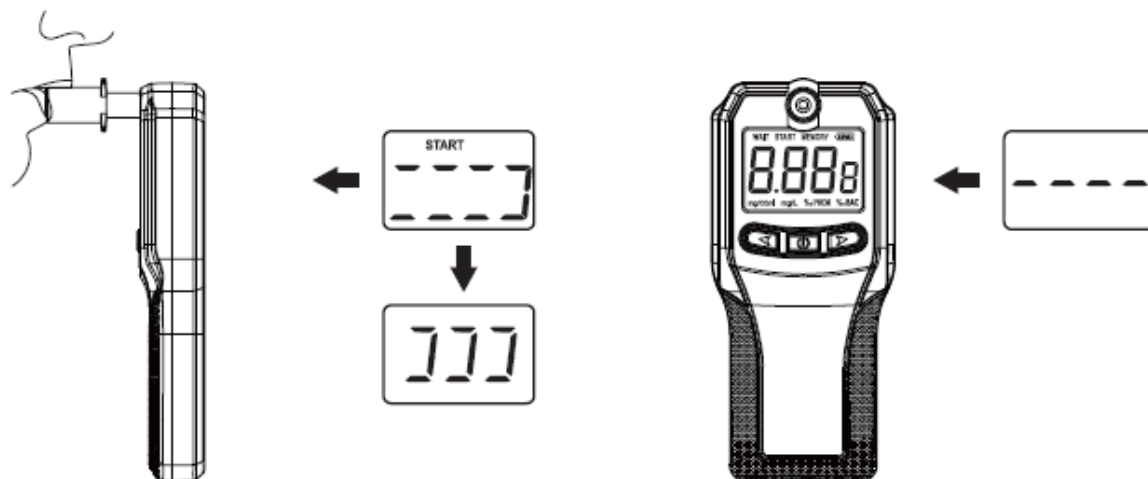

4. Počkajte, kým zariadenie po fúknutí analyzuje výsledok testovania, a prečítajte si výsledky z obrazovky.



Ďalšie funkcie

Režim reštartu

1. Po dokončení testu a získaní výsledkov stlačte tlačidlo napájania, čím digitálny analyzátor dychu reštartujete. Po reštartovaní sa automaticky spustí zahrievacia sekvencia zariadenia a môžete vykonať ďalší test.
2. Medzi jednotlivými testami počkajte aspoň 3 minúty, aby ste dosiahli čo najpresnejšie hodnoty.

Režim pamäte

1. Po zapnutí digitálneho dychového analyzátora sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí nápis „WAIT“. Stlačením tlačidla napájania vstúpte do pamäťového režimu. Digitálny analyzátor dychu môže uložiť a zobrazíť 123 výsledkov testov.
2. Stlačením ľavého tlačidla skontrolujete predchádzajúce výsledky testov od najstarších po najnovšie.
3. Stlačením pravého tlačidla skontrolujete predchádzajúce výsledky testov od najnovších po najstaršie.
4. Stlačením tlačidla napájania ukončíte pamäťový režim.

Automatické vypnutie

1. Ak sa digitálny dychový analyzátor nepoužijete 15 sekúnd po zobrazení výsledkov posledného testu, zariadenie sa automaticky vypne. Na displeji dvakrát zabliká nápis „OFF“ a dvakrát zaznie zvukový signál.
2. Výrobok sa automaticky vypne, ak sa preruší jeho zahrievacia sekvencia
3. Stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy zapnete digitálny dychový analyzátor

Indikácia slabej batérie

Batéria je vybitá a digitálny analyzátor dychu je potrebné nabiť, keď ikona napájania v pravom hornom rohu obrazovky signalizuje vybitú batériu alebo sa na obrazovke po zapnutí zariadenia zobrazí „Lo“.

Indikácia nabíjania

Ak digitálny dychový analyzátor nemožno zapnúť alebo sa batéria vybíja, môžete zariadenie nabíjať pomocou kábla USB (je súčasťou dodávky) a 5 V adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Indikátor svieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja, a na zeleno, keď je zariadenie úplne nabité.

Poznámka: Digitálny dychový analyzátor sa automaticky vypne, keď pripojíte nabíjací kábel USB, aby jeho používanie bolo bezpečnejšie.

Ochrana pred napätím

Digitálny dychový analyzátor je možné nabíjať pomocou akéhokoľvek 5 V adaptéra. Ak ho budete nabíjať neštandardným adaptérom, zariadenie prejde do režimu automatickej ochrany a indikátor nabíjania sa nerozsvieti. Indikátor nabíjania bude normálne fungovať po prepnutí na štandardný 5 V adaptér na nabíjanie zariadenia.

Údržba a čistenie

Digitálny dychový analyzátor nečistite žiadnymi chemickými čistiacimi prostriedkami. Na utieranie prístroja používajte mäkkú, suchú antistatickú handričku.

Skladovanie

Digitálny dychový analyzátor skladujte na čistom a suchom mieste. Prístroj neskladujte pri extrémne vysokých alebo extrémne nízkych teplotách.

Likvidácia – Recyklácia

Prispievajte k čistejšiemu životnému prostrediu! Digitálny dychový analyzátor nevyhadzujte do domového odpadu. Pre správnu recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určenom zbernom mieste. Bližšie informácie o najbližšom určenom zbernom mieste získate od miestneho úradu alebo služby likvidácie domového odpadu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Bevezetés

Köszönjük, hogy termékünket választotta! A termék megfelelő és biztonságos működése érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kérjük, a biztonságos használat érdekében mindig kövesse az utasításokat. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen probléma merül fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

A digitális alkoholszonda gyors, egyszerű és megbízható módja a BAC (véralkoholkoncentráció) mérésének. A készülék hordozható és könnyen használható. Az Ön BAC-eredményei 10 másodperc múlva megjelennek egy fényes, könnyen olvasható VA-képernyőn. Megváltoztathatja a mértékegységeket, és beállíthat egy felhasználó által meghatározott BAC küszöbértéket a teszteléshez. Ne feledje: NE igyon és vezessen, illetve ne kezeljen más gépeket!

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

Az egyes emberek fizikai különbségei miatt a vizsgálati eredmények személyenként eltérőek. A digitális alkoholszonda teszteredményei csak tájékoztató jellegűek. A Digitális alkoholszonda NEM hasonlít a bűnüldöző szervek által használt készülékekre. Ez a teszt és az Ön teszteredménye NEM használható fel jogi bizonyítékként a törvény előtti találkozás esetén. nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen olyan magatartásért, amely törvénsértő lehet.

A digitális alkoholszonda használata előtt olvassa el az alábbiakat:

- Ha még nem használt korábban a digitális alkoholszondát, fontos, hogy elolvassa és kövesse a használati útmutatóban szereplő utasításokat. Legyen tisztában a Digitális alkoholszonda helytelen használatából eredő kockázatokkal és következményekkel. A digitális alkoholszondás készülék helytelen használata személyi sérülésekhez, illetve a készülék és a berendezések tönkremeneteléhez vezethet.
- Ezt a készüléket NEM használhatják fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek nincs tapasztalatuk és ismeretük a készülékkel kapcsolatban, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasítást kapott a használatra vonatkozóan.
- A digitális alkoholszondát csak a jelen használati útmutatóban leírt célokra használja.
- A digitális alkoholszondát kizárólag magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tervezték és szánják.
- NE igyon és vezessen, illetve ne kezeljen más gépeket. NE hagyja, hogy más személy ittasan vezessen vagy más gépeket kezeljen. Ügyeljen arra, hogy mindig azonosítsa a kijelölt sofőrt.
- A vér alkoholszintje az utolsó alkoholos ital elfogyasztása után akár 2 órával is tovább emelkedhet. A folyamatos negatív teszteredmény nem garantálható.
- A túlzott alkoholfogyasztás károsíthatja az egészséget.
- A vizsgálat előtt legalább 20 perccel NE igyon vagy dohányozzon. A tesztelés előtt öblítse ki a száját vízzel.
- A vizsgálatot csak 0 °C - 45°C közötti hőmérséklet-tartományban végezze el. A teszt ezen a tartományon kívüli hőmérsékleten történő elvégzése téves teszteredményekhez vezethet.
- A jobb teljesítmény és az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében kerülje a termék használatát extrém magas vagy extrém alacsony hőmérsékleten, illetve statikus környezetben, például forró időben vagy napon sütő autóban, tűz mellett, forró felületen vagy hideg környezetben.
- NE fújjon füstöt, folyadékot vagy ételmaradékot a készülékbe.
- Az olyan állapotok, amelyek növelik a ketonok mennyiségét a leheletben, mint például a cukorbetegség vagy az alacsony kalóriabevitel, hamis teszteredményeket okozhatnak.
- NE tisztítsa a digitális alkoholszondát semmilyen kémiai tisztítószerrel.
- A termék töltéséhez használjon szabványos 5 V-os adaptert.
- NEM szabad a terméket átalakítani, megjavítani vagy szétszerelni. Ez károsíthatja a készüléket.
- A digitális alkoholszondát használat és tárolás során tartsa távol a gyermekektől.

A küldemény átvétele

A küldemény átvételekor győződjön meg arról, hogy a csomag tartalma megfelel a csomagolási listának. Értesítse a forgalmazót a hiányzó tételekről. Ha a berendezés sérültnek tűnik, azonnal nyújtson be reklamációt a szállítmányozónak, és azonnal értesítse a forgalmazót, részletesen leírva a sérüléseket. A sérült csomagolópapírt tegye félre a reklamáció alátámasztására.

Rendelési információk


Digitális alkoholszondás készülék - Modell EK-9 1 2 - EAN 8720195250180

A csomag tartalma

Digitális alkoholszondás készülék - Modell EK-9 12 - EAN 8720195250180


Tartozékok:

- A: Alkoholszonda x1
- B: Fúvókák x1 0
- C: USB kábel x1
- D: Felhasználói kézikönyv x1
- E: Tárolótáska x1

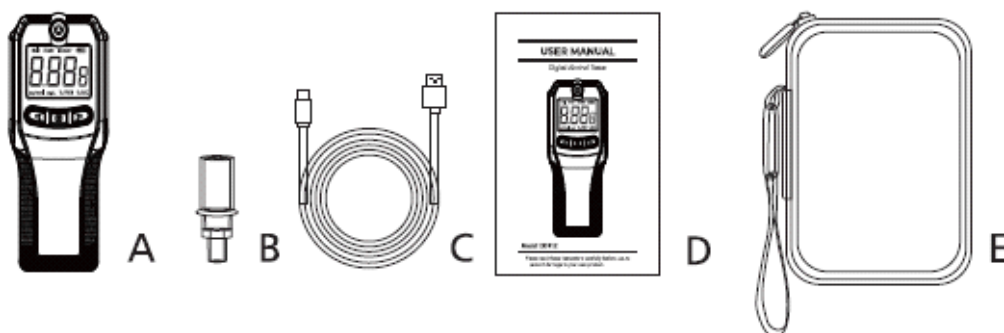

A termék jellemzői

Termék áttekintés

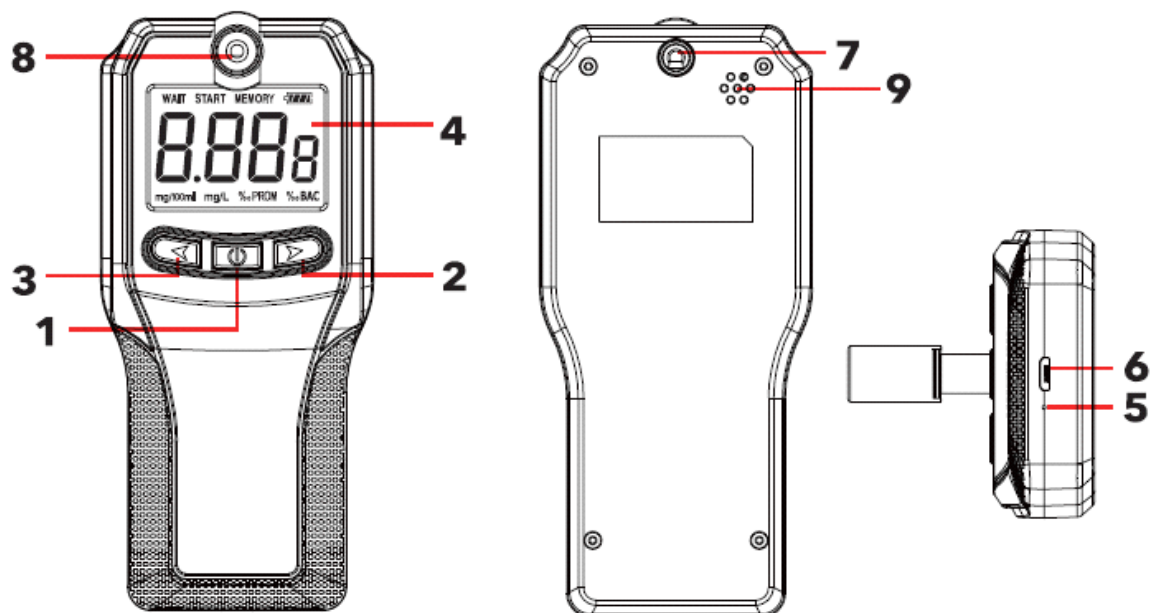

- 1. Bekapcsológomb
- 2. Jobb gomb
- 3. Left gomb
- 4. VA képernyő
- 5. Töltés jelzőfény
- 6. USB-töltőport
- 7. Szellőzőnyílás
- 8. Összecsukható szájnylás
- 8. Összecsukható szájnylás
- 9. Riasztás

Termékleírások

Műszaki adatok

Töltési feszültség	5V	Súly	126 g
Az akkumulátor kapacitása	Lítium akkumulátor 1000 mAh	Bemelegítési idő	<10 s
Munkaáram	~50 mA	Fújás idő	4,5 s
Folytatódik a Tesztelési idő	800~1000 alkalommal	Válaszidő	<5 s
Munkahőmérséklet	0 °C - 45 °C	Érzékelő	Üzemanyagcella érzékelő
Charing Time	3 óra	Méret	165x62x22 mm

Teljesítmény specifikációk

Vizsgálati tartomány:

0,000~0,500 %BAC

0.000~5.000 ‰

BAC 0.000~2.500 mg/L

0,000~0,500 g/L

0~500 mg/100ml

0,000~5,000 ‰ BÁL

MEGJEGYZÉS: HI jelenik meg, ha az érzékelési eredmény az érzékelési tartományon kívül esik.

Egység magyarázat

BAC	Véralkohol-koncentráció (Az alkohol százalékos aránya a személy vérében)
%BAC	Hány gramm alkohol van jelen 100 ml vérben?
‰BAC	Hány gramm alkohol van jelen 1000 ml vérben?
g/L	Hány gramm alkohol van jelen egy liter vérben?
Mg/100 ml	Hány milligramm alkohol van jelen 100 ml vérben?
BrAc	Légzésalkohol-koncentráció (Az alkohol százalékos aránya a személy leheletében)
Mg/L	Hány milligramm alkohol van jelen egy liter vérben?

Az alkoholkoncentráció összehasonlító táblázata

%BAC America

g/L Európa

mg/LBrAX Japán

mg/100ml Kína

Lásd a következő oldalon található táblázatot:

Nem.	BAC (véralkoholkoncentráció)				BrAC (alkoholkoncentráció a légzésben)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

1. Ha két egymást követő mérés eltérése egyaránt nagyobb, mint 0,01%BAC vagy 0,1 ‰BAC vagy 0,05 mg/l, akkor újra el kell végeznie a tesztet.
2. Fújás közben ne zárja el az oldalsó légkivezető nyílást.
3. Ha a termék akkumulátora lemerül, a vizsgálati érték és a valós érték között eltérés mutatkozik. A digitális alkoholszondát akkor használja, ha teljesen feltöltött.
4. A vizsgálati eredmények nem használhatók fel bizonyítékként a bíróságon.
5. Ne engedje meg magának a túlzott alkoholfogyasztást.

Működési utasítások

Egység beállításai

1. Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a "WAIT" szó. A visszaszámlálás alatt nyomja meg a bal oldali gombot a beállítási mód elindításához, hogy belépjen a kívánt egységbe.

2. Amikor a készülék beállítási módjában van, nyomja meg a bal oldali gombot a következő oldalra lapozáshoz, és nyomja meg a jobb oldali gombot az előző oldalra lapozáshoz. Válassza ki a kívánt egységet (%BAC, %BAC, M//L, //L, MQ/100M), %PROM).

3. A kívánt egység kiválasztása után nyomja meg a bekapcsológombot az egység beállításának rögzítéséhez és az egység üzemmódból való kilépéshez.

- Riasztás kiváltó érték (figyelmeztetés/veszély érték) beállítások

A figyelmeztető és a veszélyértéket a vezetés közbeni legális alkoholhatár helyi szabványának megfelelően testre szabhatja. 3 jelzés áll rendelkezésre:

a. Biztonságos: Biztonságos állapotot jelez.

b. Figyelmeztetés: Riasztás, az ittas vezetési állapotot megelőző figyelmeztető állapotot jelzi. A riasztó hangjelzést ad.

c. Veszély: Ittas vezetési állapotot jelez. A riasztó 10 másodpercig tartó sípoló hangot ad ki.

1. Kapcsolja be a digitális alkoholszondát. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a "WAIT" szó. Nyomja meg a jobb oldali gombot a beállítási mód elindításához, a riasztást kiváltó érték megadásához.

2. Ha belépett a beállítási módba, nyomja meg a bal oldali gombot a figyelmeztető érték növeléséhez, és nyomja meg a jobb oldali gombot a figyelmeztető érték csökkentéséhez.

3. Nyomja meg a bekapcsológombot a beállítás mentéséhez és a veszélyérték beviteléhez szükséges beállítási üzemmód elindításához.


3. Ha belépett a beállítási üzemmódba, nyomja meg a bal gombot a veszélyérték növeléséhez, és nyomja meg a jobb gombot a veszélyérték csökkentéséhez. Nyomja meg a bekapcsológombot a kioldóérték-beállítások mentéséhez és a készülék beállítási módjából való kilépéshez. Automatikusan visszatér az alkoholtesztelési üzemmódba.

A riasztás kiváltásának alapértelmezett értéke


	%BAC	‰BAC	‰Prom	G/L	Mg/100ml	Mg/L
Biztonságos	0 – 0,02	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0-20	0-0,1
Figyelmeztetés	0,02-0,05	0,2-0,5	0,2-0,5	0,2-0,5	0-50	0,1-0,25
Veszély	≥0,05	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥50	≥0,25

Alkoholtesztelés

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot 2 másodpercig, és a digitális alkoholszonda bekapcsol, miután egy sípoló hangot hall.
2. A képernyő bal felső sarkában a "WAIT" felirat jelenik meg Ez azt jelenti, hogy a készülék megkezdte a bemelegedési folyamatot.

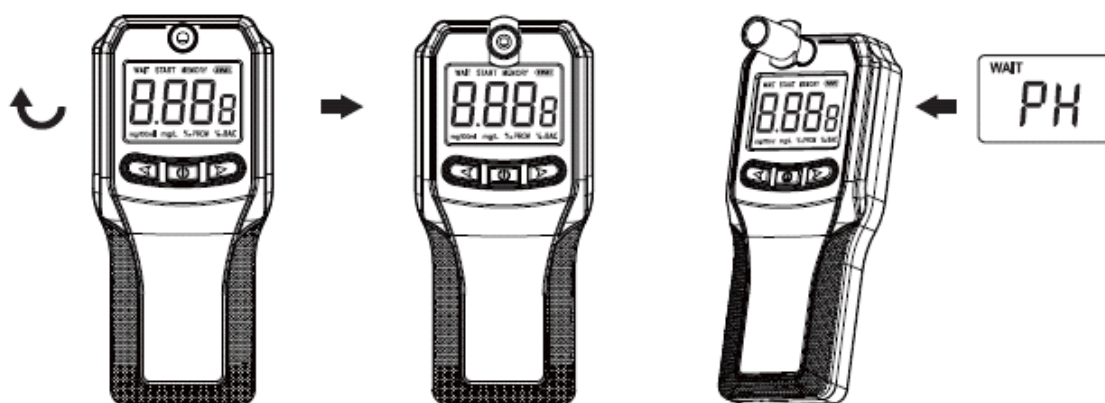

3. A bemelegedés után a képernyőn megjelenik a "START" szó, és a digitális alkoholszonda készen áll a használatra. Ügyeljen arra, hogy a "START" szó megjelenésétől számított 10 másodpercen belül indítsa el a tesztet. Vegyen mély lélegzetet, és fújjon egyenletesen (lágyan, folyamatosan és egyenletesen) a szájrészbe 4-5 másodpercig.

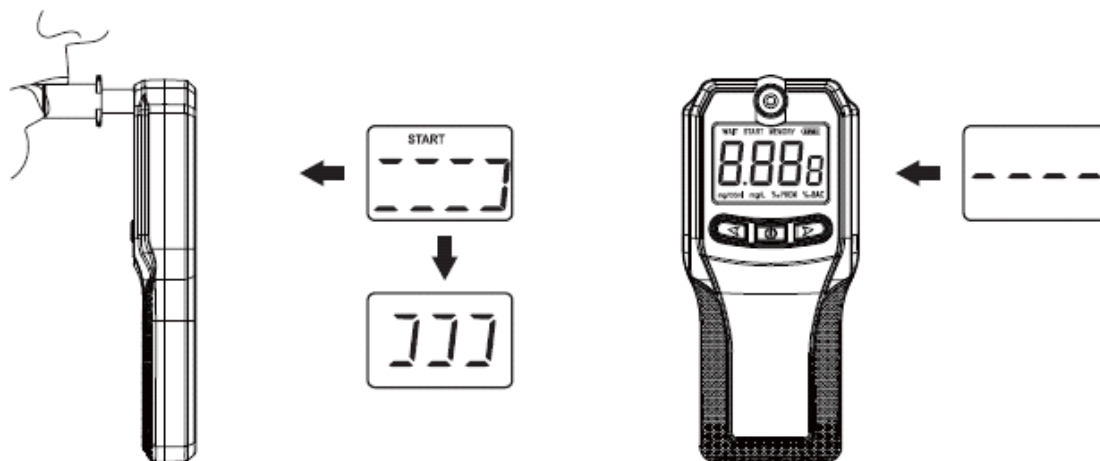

4. Várja meg, amíg a készülék a fújás után elemzi a vizsgálati eredményt, és olvassa le az eredményeket a képernyőről.



Egyéb funkciók

Újraindítási mód

1. Miután befejezte a tesztet és megkapta az eredményeket, nyomja meg a bekapcsológombot a digitális alkoholszonda újraindításához. Az újraindítás után a készülék automatikusan megkezdí a bemelegedési folyamatot, és elvégezheti a következő tesztet.
2. Várjon legalább 3 percet az egyes tesztek között, hogy a legpontosabb mérési eredményeket kapja.

Memória üzemmód

1. A digitális alkoholszonda bekapcsolása után a képernyő bal felső sarkában a "WAIT" (VÁRJ) szó jelenik meg. Nyomja meg a bekapcsológombot a memória üzemmódba való belépéshez. A digitális alkoholszonda 123 teszteredményt tud tárolni és megjeleníteni.
2. Nyomja meg a bal oldali gombot a korábbi teszteredmények megtekintéséhez a legrégebbitől a legújabbig.
3. Nyomja meg a jobb oldali gombot a korábbi teszteredmények megtekintéséhez legújabbtól a legrégebbiig.
4. Nyomja meg a bekapcsológombot a memória üzemmódból való kilépéshez.

Automatikus kikapcsolás

1. Ha a digitális alkoholszondát az utolsó teszteredmény megjelenítését követően 15 másodpercig nem használják, a készülék automatikusan kikapcsol. A kijelzőn kétszer villog a "OFF" szó, és a riasztás kétszer hangjelzést ad.
2. A termék automatikusan kikapcsol, ha a bemelegedési folyamat megszakad.
3. Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig a digitális alkoholszonda bekapcsolásához.

Alacsony töltöttségi szint jelzése

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a digitális alkoholszondát fel kell tölteni, ha a képernyő jobb felső sarkában lévő táp ikon alacsony töltöttségi szintet jelez, vagy ha a készülék bekapcsolása után a képernyőn megjelenik a "Lo" felirat.

Töltés jelzése

Ha a digitális alkoholszonda nem kapcsolható be, vagy az akkumulátor lemerül, a készüléket USB-kábellet (tartozék) és 5 V-os adapterrel (nem tartozék) töltheti. A jelzőfény pirosra vált, amikor a készülék töltődik, és zöldre, amikor a készülék teljesen feltöltődött.

Megjegyzés: A digitális alkoholszonda automatikusan kikapcsol, amikor csatlakoztatja az USB töltőkábelt a biztonságosabb használat érdekében.

Feszültségvédelem

A digitális alkoholszonda bármilyen 5 V-os adapterrel feltölthető. Ha nem szabványos adapterrel tölti, a készülék automatikus védelmi üzemmódba kerül, és a töltés jelzőfénye nem fog világítani. A töltés jelzőfénye normálisan fog működni, miután szabványos 5V-os adapterre váltott a készülék töltéséhez.

Karbantartás és tisztítás

Ne tisztítsa a digitális alkoholszondát semmilyen kémiai tisztítószerrel.
A készüléket puha, száraz, antisztatikus ruhával törölje át.

Tárolás

Tárolja a digitális alkoholszondát tiszta, száraz helyen. Ne tárolja a készüléket extrém magas vagy extrém alacsony hőmérsékleten.

Eltávolítás - Újrahasznosítás

Járuljon hozzá a tisztább lakókörnyezethez! Ne dobja ki a digitális alkoholszondát a háztartási hulladékkal együtt. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket egy kijelölt gyűjtőhelyre. A legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyről további információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a háztartási hulladékkezelési szolgálathoz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év jótállás vonatkozik. Ha a jótállás időszaka alatti javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Um die ordnungsgemäße und sichere Funktion des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bitte befolgen Sie immer die Anweisungen für einen sicheren Gebrauch. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte

Der digitale Atemalkoholtester ist ein schneller, einfacher und zuverlässiger Weg, um Ihre Blutalkoholkonzentration (BAK) zu messen. Das Gerät ist tragbar und einfach zu bedienen. Ihre BAK-Ergebnisse werden nach 10 Sekunden auf einem hellen, leicht lesbaren VA-Bildschirm angezeigt. Sie können die Maßeinheiten ändern und einen benutzerdefinierten BAK-Grenzwert für den Test festlegen. Denken Sie daran: Fahren Sie NICHT unter Alkoholeinfluss oder bedienen Sie keine Maschinen!

Warnungen und Sicherheitshinweise

Aufgrund der physischen Unterschiede zwischen den einzelnen Personen variieren die Testergebnisse von Person zu Person. Die Testergebnisse des digitalen Atemalkoholtesters sind nur als Referenz zu verstehen. Der digitale Atemalkoholtester ist NICHT vergleichbar mit den Geräten, die von den Strafverfolgungsbehörden verwendet werden. Dieser Test und Ihr Testergebnis KANN NICHT als juristischer Beweis im Falle von Gesetzesverstößen verwendet werden. Er ist nicht verantwortlich oder haftbar für jegliches Verhalten, das das Gesetz brechen könnte.

Bevor Sie Ihr digitales Atemalkoholmessgerät benutzen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Wenn Sie den digitalen Alkoholtester noch nie benutzt haben, ist es wichtig, dass Sie die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung lesen und befolgen. Seien Sie sich der Risiken und Konsequenzen bewusst, die sich aus dem Missbrauch des digitalen Atemalkoholtesters ergeben. Der Missbrauch des digitalen Atemalkoholtesters kann zu Verletzungen oder zur Zerstörung des Gerätes und der Anlagen führen.
- Dieses Gerät darf NICHT von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen (einschließlich Kindern) mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben eine Einweisung in die Verwendung erhalten.
- Verwenden Sie das digitale Atemalkoholmessgerät nur für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke.
- Der digitale Atemalkoholtester ist nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch gedacht und bestimmt.
- Fahren Sie NICHT unter Alkoholeinfluss und bedienen Sie keine anderen Maschinen. Lassen Sie eine andere Person NICHT unter Alkoholeinfluss Auto fahren oder andere Maschinen bedienen. Stellen Sie sicher, dass Sie immer einen Fahrer bestimmen.
- Der Alkoholgehalt in Ihrem Blut kann bis zu 2 Stunden nach dem letzten alkoholischen Getränk weiter ansteigen. Ein durchgehend negatives Testergebnis kann nicht garantiert werden.
- Übermäßiger Alkoholkonsum kann Ihre Gesundheit schädigen.
- Trinken oder rauchen Sie mindestens 20 Minuten vor dem Test NICHT. Spülen Sie Ihren Mund vor dem Test mit Wasser aus.
- Führen Sie den Test nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C - 45°C durch. Die Durchführung des Tests bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann zu falschen Testergebnissen führen.
- Um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder in einer statischen Umgebung verwenden, wie z. B. bei heißem Wetter oder in einem in der Sonne stehendem Auto, neben einem Feuer, auf einer heißen Oberfläche oder in einer kalten Umgebung.
- Blasen Sie KEINEN Rauch, keine Flüssigkeiten oder Essensreste in das Gerät.

- Zustände, die die Menge an Ketonen in Ihrer Atemluft erhöhen, wie z. B. Diabetes oder geringe Kalorienzufuhr, können zu falschen Testergebnissen führen.
- Reinigen Sie das digitale Atemalkoholmessgerät NICHT mit chemischen Reinigungsmitteln.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts einen Standard-5V-Adapter.
- Das Produkt darf NICHT umgebaut, repariert oder zerlegt werden. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Halten Sie das digitale Atemalkoholmessgerät bei der Benutzung und Aufbewahrung von Kindern fern.

Erhalt Ihrer Sendung

Vergewissern Sie sich bei Erhalt Ihrer Sendung, dass der Inhalt mit der Packliste übereinstimmt. Benachrichtigen Sie Ihren Händler über fehlende Teile. Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint, reklamieren Sie den Schaden sofort beim Spediteur und benachrichtigen Sie sofort Ihren Händler, wobei Sie eine detaillierte Beschreibung des Schadens abgeben. Bewahren Sie den beschädigten Verpackungsbehälter auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

Bestellinformationen

Digitales Atemalkoholmessgerät - Modell EK-9 1 2 - EAN 8720195250180

Inhalt des Pakets

Digitales Atemalkoholmessgerät - Modell EK-9 12 - EAN 8720195250180

Enthaltenes Zubehör:


A: Atemalkoholtester x1

B: Mundstücke x1 0

C: USB-Kabel x1


D: Benutzerhandbuch x1

E: Aufbewahrungstasche x1

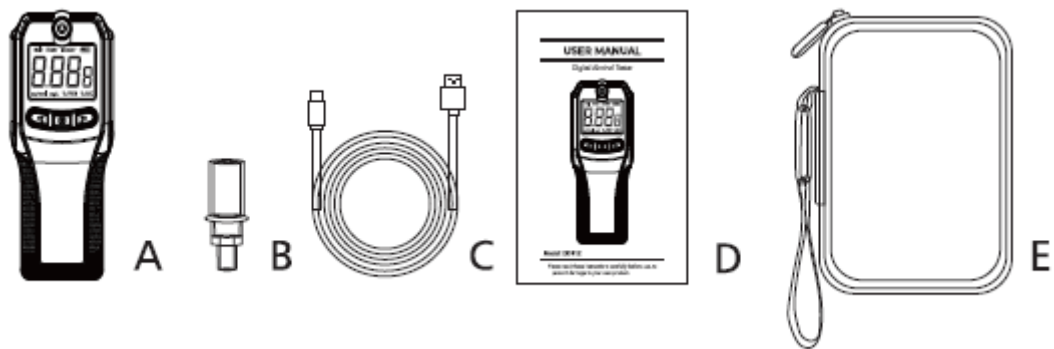

Produktmerkmale

Produktübersicht

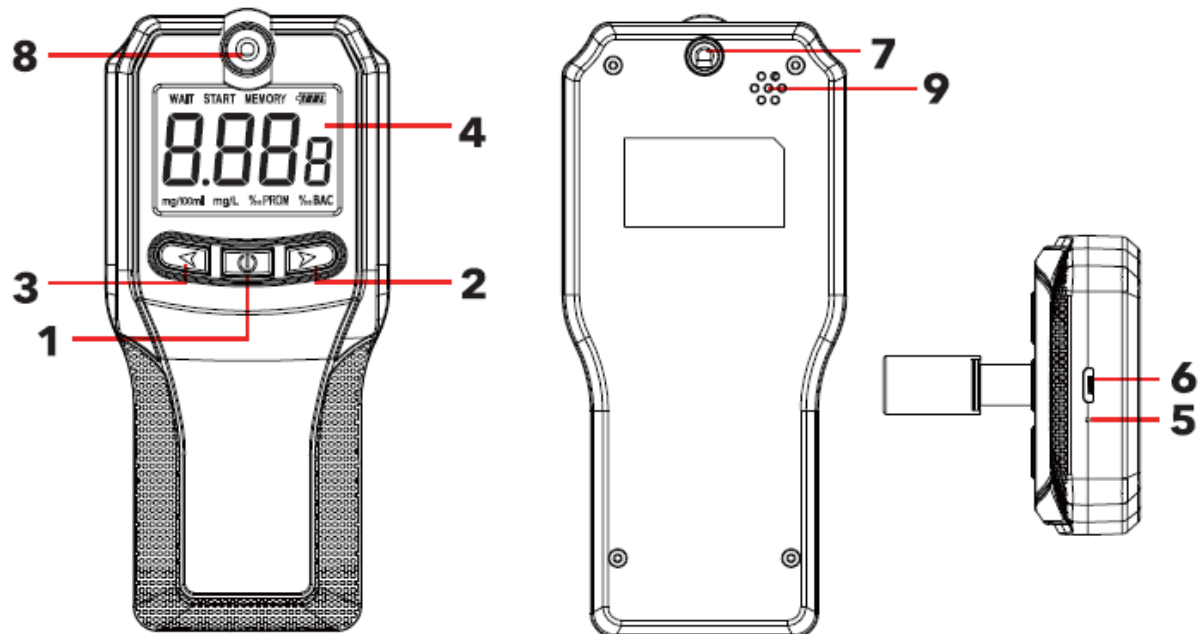

- 1. die Einschalttaste
- 2. Rechte Taste
- 3. linke Taste
- 4. der VA-Bildschirm
- 5. Ladekontrollleuchte
- 6. USB-Ladeanschluss
- 7. Belüftungsöffnung
- 8. Zusammenklappbares Mundstückloch
- 9. Alarm

Produktspezifikationen

Technische Daten

Ladespannung	5V	Gewicht	126 g
Batteriekapazität	Lithium-Akku 1000 mAh	Aufwärmzeit	<10 s
Arbeitsstrom	~50 mA	Blasezeit	4,5 s
Fortsetzung der Testzeiten	800~1000 mal	Reaktionszeit	<5 s
Arbeitstemperatur	0 °C - 45 °C	Sensor	Brennstoffzellen-Sensor
Auflade-Zeit	3 Stunden	Größe	165x62x22 mm

Leistungsspezifikationen

Prüfbereich:

0,000~0,500 %BAC

0.000~5.000 ‰

BAC 0,000~2,500 mg/L

0,000~0,500 g/L

0~500 mg/100ml

0,000~5,000 ‰ PROM

HINWEIS: HI wird angezeigt, wenn das Messergebnis außerhalb des Erfassungsbereichs liegt.

Einheit Erläuterung

BAC	Blutalkoholkonzentration (der prozentuale Anteil von Alkohol im Blut einer Person)
%BAC	Wie viel Gramm Alkohol sind in 100 ml Blut enthalten?
‰BAC	Wie viel Gramm Alkohol sind in 1000 ml Blut enthalten?
g/L	Wie viel Gramm Alkohol sind in einem Liter Blut enthalten?
Mg/100 mL	Wie viel Milligramm Alkohol sind in 100 ml Blut enthalten?
BrAc	Atemalkoholkonzentration (der prozentuale Anteil von Alkohol in der Atemluft einer Person)
Mg/L	Wie viel Milligramm Alkohol sind in einem Liter Blut enthalten?

Vergleichstabelle der Alkoholkonzentration

%BAC Amerika

g/L Europa

mg/LBrAX Japan

mg/100ml China

Siehe die Tabelle auf der nächsten Seite:

Nr.	BAC (Blutalkoholkonzentration)				BrAC (Atemalkoholkonzentration)	
	%	‰	g/l	mg/100ml	mg/l	ppm
1	0,01	0,1	0,1	10	0,05	25
2	0,02	0,2	0,2	20	0,10	50
3	0,03	0,3	0,3	30	0,15	75
4	0,04	0,4	0,4	40	0,20	100
5	0,05	0,5	0,5	50	0,25	125
6	0,06	0,6	0,6	60	0,30	150
7	0,07	0,7	0,7	70	0,35	175
8	0,08	0,8	0,8	80	0,40	200
9	0,09	0,9	0,9	90	0,45	225
10	0,10	1,0	1,0	100	0,50	250
11	0,11	1,1	1,1	110	0,55	275
12	0,12	1,2	1,2	120	0,60	300
13	0,13	1,3	1,3	130	0,65	325
14	0,14	1,4	1,4	140	0,70	350
15	0,15	1,5	1,5	150	0,75	375
16	0,16	1,6	1,6	160	0,80	400
17	0,17	1,7	1,7	170	0,85	425
18	0,18	1,8	1,8	180	0,90	450
19	0,19	1,9	1,9	190	0,95	475
20	0,20	2,0	2,0	200	1,00	500

1. Wenn die Abweichungen von 2 aufeinanderfolgenden Messwerten beide größer als 0,01%BAC oder 0,1 ‰BAC oder 0,05mg/L sind, müssen Sie den Test wiederholen.
2. Blockieren Sie nicht den seitlichen Luftauslass, wenn Sie blasen.
3. Es wird eine Abweichung zwischen dem Testwert und dem tatsächlichen Wert geben, wenn die Batterie des Geräts schwach ist. Verwenden Sie den digitalen Atemalkoholtester, wenn er voll geladen ist.
4. Die Testergebnisse können nicht als Beweismittel vor Gericht verwendet werden
5. Vermeiden Sie übermäßigen Alkoholenuss.

Betriebsanleitung

Einstellungen der Einheit

1. Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden. In der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint das Wort "WAIT". Während dieses Countdowns drücken Sie die linke Taste, um den Einstellungsmodus zu starten und die bevorzugte Einheit einzugeben.

2. Wenn Sie sich im Modus zur Einstellung der Einheit befinden, drücken Sie die linke Taste, um zur nächsten Seite zu wechseln, und die rechte Taste, um zur vorherigen Seite zu wechseln. Wählen Sie Ihre bevorzugte Einheit (%BAC, ‰BAC, M//L, //L, MQ/100M), ‰PROM).

3. Nachdem Sie das gewünschte Gerät ausgewählt haben, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Geräteeinstellung zu sichern und den Gerätemodus zu verlassen.

- Einstellungen für den Alarmauslösewert (Warn-/Gefahrwert)

Sie können den Warn- und Gefahrenwert entsprechend Ihrer örtlichen Norm für die gesetzliche Alkoholgrenze beim Fahren anpassen. Es gibt 3 Anzeigen:

a. Sicher: Zeigt einen sicheren Zustand an.

b. Warnung: Zeigt einen Warnzustand vor dem Zustand der Trunkenheit am Steuer an. Der Alarm gibt einen Piepton von sich.

c. Gefahr: Weist auf eine Trunkenheitsfahrt hin. Der Alarm gibt einen Piepton ab, der 10 Sekunden lang anhält.

1. Schalten Sie das digitale Atemalkoholmessgerät ein. In der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint das Wort "WAIT". Drücken Sie die rechte Taste, um den Einstellungsmodus zu starten und den Alarmauslösewert einzugeben.

2. Wenn Sie den Einstellmodus aufgerufen haben, drücken Sie die linke Taste, um den Warnwert zu erhöhen, und die rechte Taste, um den Warnwert zu verringern. Drücken Sie die Einschalttaste, um Ihre Einstellung zu speichern und den Einstellmodus zur Eingabe des Gefahrenwerts zu starten.


3. Wenn Sie den Einstellmodus aufgerufen haben, drücken Sie die linke Taste, um den Gefahrenwert zu erhöhen, und die rechte Taste, um den Gefahrenwert zu verringern. Drücken Sie die Einschalttaste, um die Einstellungen des Auslösewerts zu speichern und den Einstellmodus des Geräts zu verlassen. Sie kehren automatisch in den Alkoholtestmodus zurück.

Standardwert für die Auslösung des Alarms


	%BAC	‰BAC	‰Prom	G/L	Mg/100ml	Mg/L
Sicher	0 – 0,02	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0-20	0-0,1
Warnung	0,02-0,05	0,2-0,5	0,2-0,5	0,2-0,5	0-50	0,1-0,25
Gefahr	≥0,05	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥50	≥0,25

Alkoholtests

1. Drücken Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden. Der digitale Alkoholtester schaltet sich ein, nachdem Sie einen Piepton hören.
2. In der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint das Wort "WAIT" Dies bedeutet, dass das Gerät seine Aufwärmsequenz beginnt.

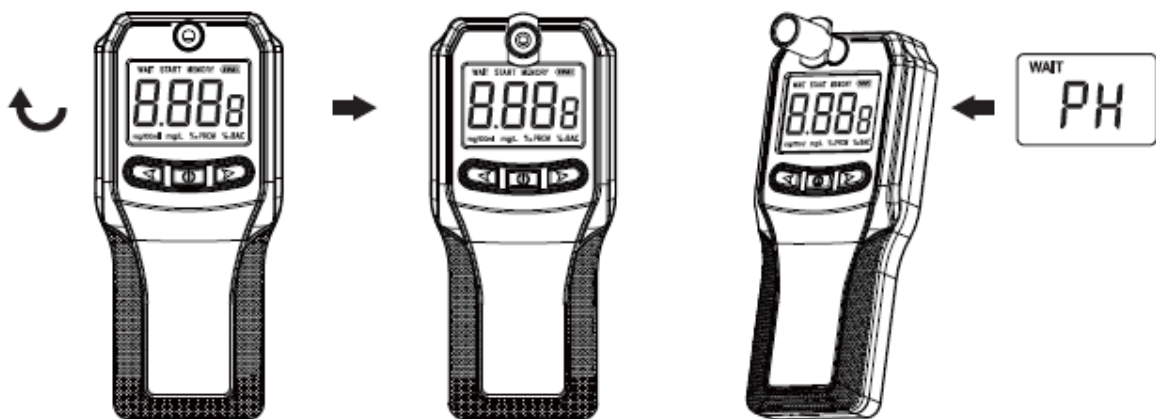

3. Nach dem Aufwärmen erscheint das Wort "START" auf dem Bildschirm und der digitale Alkoholtester ist einsatzbereit. Stellen Sie sicher, dass Sie den Test innerhalb von 10 Sekunden nach Erscheinen des Wortes "START" beginnen. Atmen Sie tief ein und blasen Sie gleichmäßig (sanft, kontinuierlich und gleichmäßig) 4-5 Sekunden lang in das Mundstück.

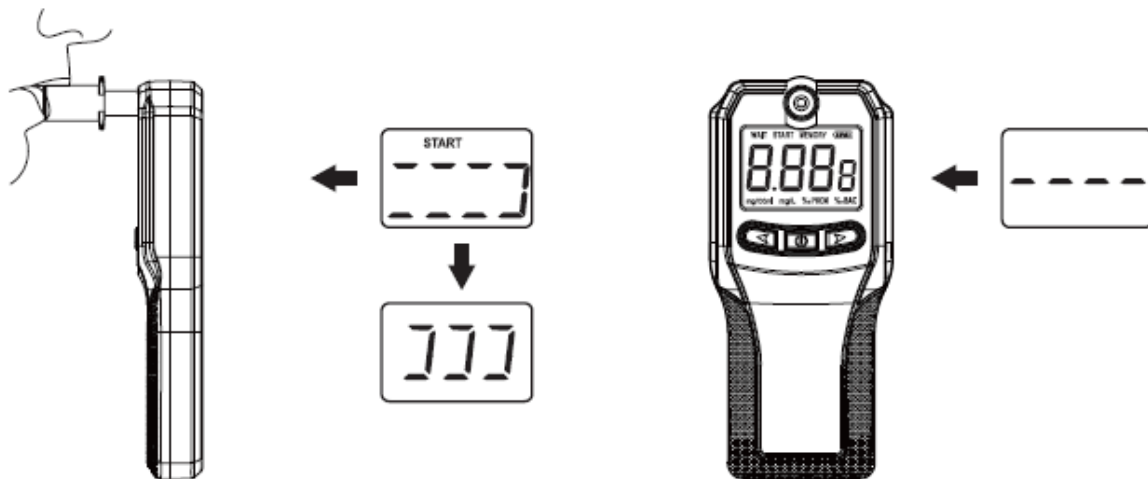

4. Warten Sie, bis das Gerät das Testergebnis nach dem Pusten analysiert hat und lesen Sie die Ergebnisse auf dem Bildschirm ab.



Andere Funktionen

Neustart-Modus

1. Nachdem Sie den Test beendet und die Ergebnisse erhalten haben, drücken Sie die Einschalttaste, um das digitale Atemalkoholmessgerät neu zu starten. Nach dem Neustart startet das Gerät automatisch seine Aufwärmsequenz und Sie können den nächsten Test durchführen.

2. Warten Sie mindestens 3 Minuten zwischen den einzelnen Tests, um möglichst genaue Messwerte zu erhalten.

Speicher-Modus

1. Nach dem Einschalten des digitalen Atemalkoholtests wird das Wort "WAIT" in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um in den Speichermodus zu gelangen. Das digitale Atemalkoholmessgerät kann 123 Testergebnisse speichern und anzeigen.
2. Drücken Sie die linke Taste, um die vorherigen Testergebnisse von den ältesten bis zu den neuesten zu überprüfen.
3. Drücken Sie die rechte Taste, um die vorherigen Testergebnisse vom neuesten zum ältesten zu prüfen.
4. Drücken Sie die Power-Taste, um den Speichermodus zu beenden.

Automatisches Ausschalten

1. Wenn das digitale Atemalkoholmessgerät nach Anzeige der letzten Testergebnisse 15 Sekunden lang nicht benutzt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das Wort "OFF" blinkt zweimal auf dem Display und der Alarm ertönt zweimal.
2. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn seine Aufwärmsequenz unterbrochen wird.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden, um den digitalen Alkoholtester einzuschalten.

Anzeige für schwache Batterie

Die Batterie ist schwach, und der digitale Alkoholtester muss aufgeladen werden, wenn das Stromsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms eine schwache Batterie anzeigt oder "Lo" auf dem Bildschirm erscheint, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben.

Anzeige des Ladevorgangs

Wenn sich das digitale Atemalkoholmessgerät nicht einschalten lässt oder die Batterie leer ist, können Sie das Gerät mit einem USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) und einem 5-V-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen. Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät geladen wird, und grün, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

Hinweis: Der digitale Atemalkoholtester schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das USB-Ladekabel einstecken, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

Spannungsschutz

Der digitale Atemalkoholtester kann mit jedem 5V-Adapter aufgeladen werden. Wenn Sie es mit einem nicht standardmäßigen Adapter aufladen, geht das Gerät in den automatischen Schutzmodus über und die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht auf. Die Ladeanzeige leuchtet normal, wenn Sie zum Aufladen des Geräts zu einem 5-V-Standardadapter wechseln.

Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das digitale Atemalkoholmessgerät nicht mit chemischen Reinigungsmitteln.

Verwenden Sie zum Abwischen des Geräts ein weiches, trockenes, antistatisches Tuch.

Lagerung

Bewahren Sie den digitalen Alkoholtester an einem sauberen, trockenen Ort auf. Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen.

Entsorgung - Recyceln

Tragen Sie zu einer sauberen Umwelt bei! Werfen Sie den digitalen Alkoholtester nicht in den Hausmüll. Bringen Sie diese Produkte zum ordnungsgemäßen Recycling zu einer ausgewiesenen Sammelstelle. Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Hausmüllentsorgungsdienst, um weitere Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle zu erhalten.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.